

Tomcat elektriske trehjulssykler. Brukerveiledning.

Takk for at du valgte et produkt fra Tomcat™. Vi håper du får mange års glede og nytte av sykkelen din.

Din Tomcat trehjulssykkle er et medisinsk utstyr i klasse 1 som gjør at tenåringer og voksne som er 14 år eller eldre kan sykle. Sykkelen er beregnet for personer med balanseproblemer, nedsatt mobilitet eller ettervirkninger av slag, eller de med genetiske tilstander som er kjennetegnet av cerebral parese. Regelmessig sykling kan ha en positiv innvirkning på brukerens styrke, mobilitet og generelle helse og velvære. Formålet med denne bruksinformasjonen er å hjelpe deg å få mest mulig ut av produktet.

Din trehjulssykkle kan være utstyrt med spesielle tilpasninger for å kompensere for visse personlige problemer som ikke er dekket av denne bruksinformasjonen.



For å være trygg og få mest mulig ut av produktet, vennligst les disse instruksjonene nøye.



ADVARSEL.



Følg til enhver tid trafikkreglene som gjelder der du sykler.



Ha alltid på deg hjelm og nødvendig beskyttende plagg.



Bruk alle sikkerhetsinnretninger som følger med til enhver tid



Ikke la andre sitte på sykkelen, for eksempel på bakakselen eller i kurven. Ikke sitt flere på sykkelen, hverken på bakaksel eller i kurven.



Bruk parkeringsbremsen når du går av/på trehjulssykkelen, eller når du forlater den uten tilsyn.



Ikke kjør over fortauskanter (unntatt nedsenkte kanter) eller andre hindringer som kan skade sykkelen eller gjøre den ustabil.



Ikke bruk enheten i terreng, bratte brakker, kraftige sidveis hellinger, eller på ujevnt veidekke.

Generelt vedlikehold og sikkerhet for trehjulssykler

Før bruk.

- Sørg for at alle lys, reflektorer, flagg og varselsinnretninger er i god stand og fungerer som de skal.
- Kontroller dekkene og pass på at det er riktig lufttrykk i dem (det riktige lufttrykket er stemplet på siden av dekket).

- Kontroller bremse- og styrefunksjonene.
- Kontroller at batteriet er fulladet og låst på plass i holderen.
- Kontroller at alle avtakbare deler (hjul, sete, delbare rammemekanismer, o.l.) er forsvarlig festet, riktig montert i samsvar med instruksjonene i brukerveiledningen, låst sammen der det er hensiktsmessig, og at de virker som de skal.

Under bruk

- Bruk alltid alle sikkerhetsinnretninger som følger med.
- Overhold nasjonale og lokale forskrifter som gjelder sykling.
- Ha med deg et kommunikasjonsmiddel for bruk i nødstilfeller.
- Bruk en sikker sykkellås når du forlater trehjulsykkelen uten tilsyn.

Etter bruk

- Vask og tørk trehjulsykkelen før den settes bort.
- Oppbevar den på et tørt sted med god ventilasjon uten ultrafiolett (UV) lys.
- Lad batteripakken (la aldri batteriet være utladet).
- Utfør vedlikehold på trehjulsykkelen i samsvar med informasjonen i brukerveiledningen, samt etter langvarig oppbevaring.


Generell justering for trehjulsykler

- Juster høyden på styret. Når det er riktig justert, vil underarmene være nesten i horisontal stilling.
- Juster ryggstøtten til en komfortabel vinkel (dersom den er justerbar).
- Juster skyvemekanismen for setet til du oppnår en komfortabel rekkevidde.
- Juster den nedre braketten og pedalene til du oppnår en komfortabel rekkevidde.
- Juster bredden på sidestøttene (hvis montert) så de sitter tett inntil kroppen og brukerens klær.
- Juster tilbehøret (fotstøtter, sele, bencalipere, hansker, hodestøtte, osv.) i henhold til råd fra fysioterapeut / helsepersonell.

Justere spesialtilpassinger på trehjulsykkelen (hvis montert) Merk! Med mindre noe annet er angitt, betyr remontering eller låsing det motsatte av å fjerne eller låse opp.

Svinge setet

- Skyv den røde spaken ned (forskjellige steder)
- Sving setet og slipp opp spaken. Setet låses automatisk når det er helt rotet.


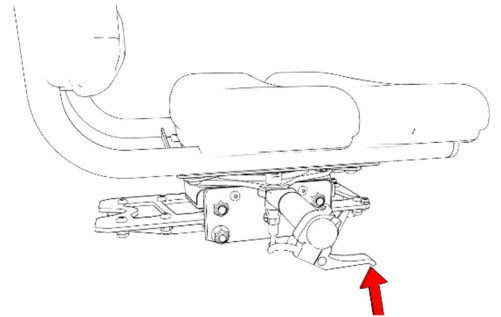


Skyve setet

- På standard skyveseter, lås opp låsemutrene, foreta justeringen og lås på nytt.


ELLER

- På hurtigjusterende seter, trykk/skyv knappen (på venstre side av setet), foreta justeringen, og slipp deretter opp knappen.

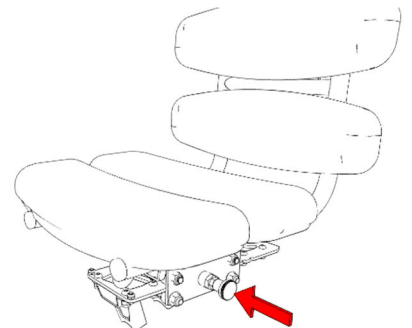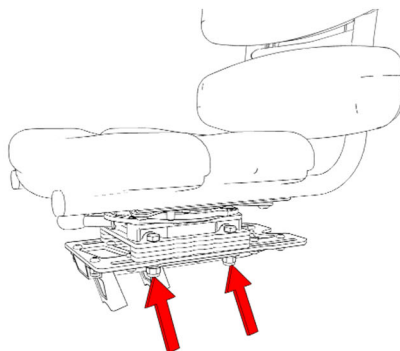


Demontere setet.

- Sving setet til den normale kjørestillingen.
- Skyv den svarte knotten (under setet) bakover på sykkelen. (Advarsel! Ikke dra knotten opp eller ned).
- Sving spaken mot urviserne.
- Løft setet for å fjerne det.

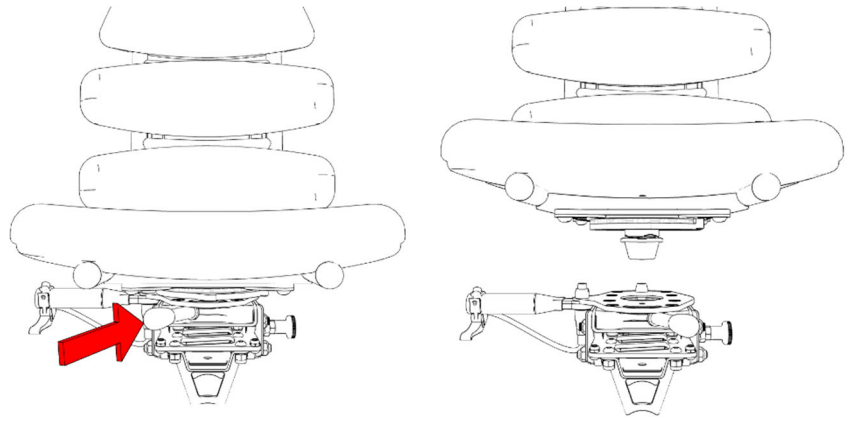


Gjøre sveivene og pedalene lenger/kortere

- Frigjør fjærklemmen (1)
- Drei justeringsknotten (2) for å justere sveivene og pedalene.
- Stram klemmen godt etter justering og før bruk.

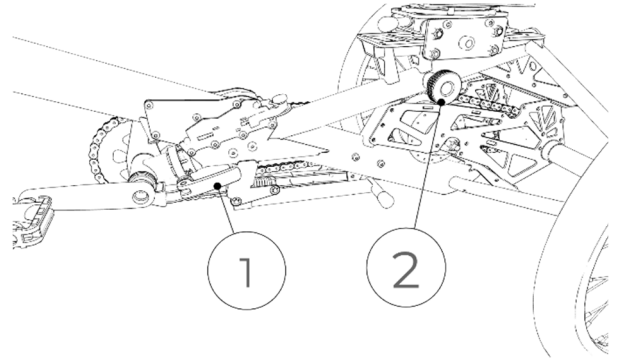


Dele rammen

- Fold ut midtstøtten (3)
- Løft og slipp låseknappen (4), samtidig som du roterer utløerspaken (5) til den låses opp.
- Fjern den øvre rammen ved å løfte forhjulet, til den øvre rammen kan flyttes bakover. Den øvre rammen kan da løftes vekk.

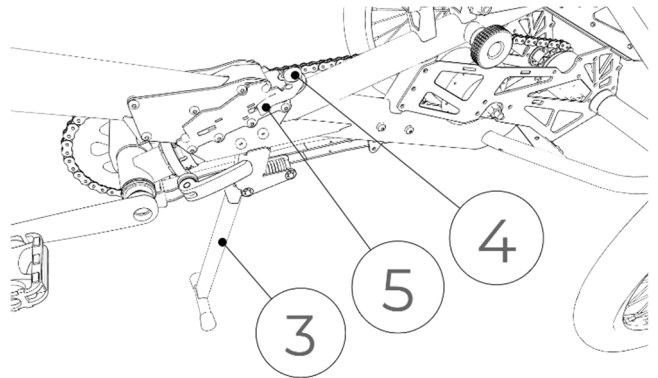

Fjerne "hurtigutløsende" bakhjul

- Fjern den øvre rammen mens den nedre rammen er støttet på stativet.
- Med den ledige hånden løft rammen litt, slik at hjulet som skal fjernes løftes fra bakken.
- Trykk på den svarte, midtre knappen (6) før du fjerner hjulet du ønsker.
- Senk rammen ned til bakken, og gjenta denne fremgangsmåten for det andre hjulet.
- **VIKTIG!** Sett alltid deksler på akselskaft og hjul når hjulene er fjernet.

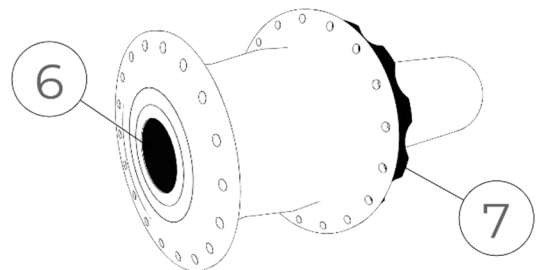


Sett tilbake hjulene


- Kontroller at akselen og navet er helt rene!
- Med den ledige hånden, hold på den svarte ringen (7) for å hindre at akselen vrir seg.
- Skyv hjulet over akslen.
- Trykk på den svarte knappen (6) og roter hjulet til det glir helt inn og låses på plass.
- Den svarte knappen (6) må være i flukt med akselen og hjulflaten. Test før trehjulssykkelen brukes.

Batterihåndtering

- For å installere - sett batteriet inn i batterikassen. Lås batteriet som skal brukes.
- For å lade - sett ladepluggen inn i ladekontakten.
- Når du lader, vil lyset på laderen være rødt for å indikere at batteriet lades opp, eller grønt for å indikere at batteriet er fulladet.
- Trykk på indikatorknappen for å kontrollere ladenivåene (fire lamper).
- Ikke la batteriet lades helt ut.
- Lad batteriet regelmessig når det ikke er i bruk. (Minst annenhver måned)
- Slå av strømmen når sykkelen ikke er i bruk.

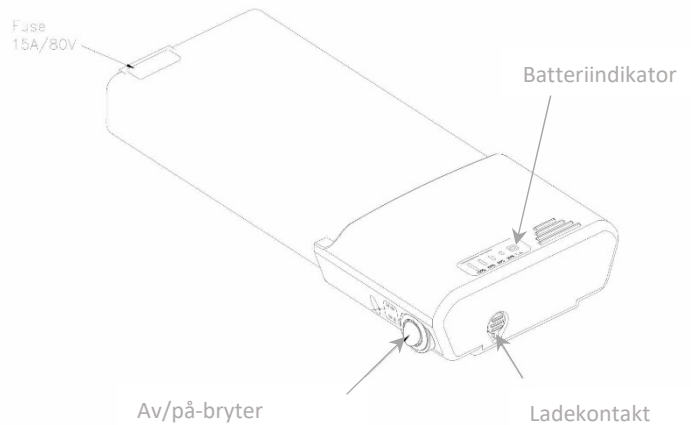

Elektrisk kraftassistanse - bruk av styreanordning

 **Advarsel.** Brukeren må sitte på sykkelen og være klar til å kjøre den før NOEN av følgende funksjoner aktiveres.

- Trykk på "A"-knappen for å aktivere "Start Assist" (start assistanse) (maks. 6 km/t)
- Trykk på plussknappen (+) for å øke farten og kraftassistanse.
- Trykk på minusknappen (-) for å senke farten og elektrisk assistanse.
 - 0 lamper – strøm av
 - 1 blinkende lampe – effektnivå 1
 - 1 lysende lampe – effektnivå 2
 - 1 blinkende og 1 lysende lampe – effektnivå 3
 - 2 lysende lamper – effektnivå 4
 - 1 blinkende og 2 lysende lamper – effektnivå 5
 - 3 lysende lamper – effektnivå 6

Maks hastighet i effektnivå 6 er 25 km/t.



For ytterligere informasjon om hvordan du setter opp og bruker trehjuls sykkel på trygg måte, gå til

www.tomcatuk.org

Standard sykkeldeler og slitasjedeler/tilbehør/funksjoner

Merk! Bremsespaker, girskiftmekanismer, indikatorer, lys, reflektorer, sykkelhjelmer, pedaler, kabler, klemmer, håndtak, seter, pumper, reparasjonssett osv. er standard og velkjente sykkeldeler som er godt kjent innen sykkelindustrien, og som bør brukes på den måten som er tiltenkt av produsenten. Hvis du er usikker på hvordan du bruker eller vedlikeholder noen av standarddelene til sykkelen, bør du søke råd fra en sykkeltekniker før sykkelen brukes.



Tomcat SNI Ltd
Unit 13/7 The Gloucester Business Park
Hucclecote
Gloucester
GL3 4AA, UK
Tel +44(0)1452 616900
E-post info@tomcatuk.org
Nettside www.tomcatuk.org



Advena Limited.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street,
Swatar, BKR 4013
Malta.
Tel +356 2546 6689
E-post info@advena.mt
Nettside www.advena.mt