

Kombinationsübersicht Empulse M90



04/2025

Hersteller / Model	Docking
Sunrise Medical	
QS5 X QS5 X SA	4
Neon ² SA	14
Xenon ² / Xenon ² Hybrid	14
Xenon ² SA	14
Helium	2
Nitrum	2
Easy 200	4
Easy 300	4
Easy Life ECO	4
Easy Life R / Easy Life R SA	4
Easy Life RT / Easy Life RT SA	4
Easy Life T / Easy Life T SA	4
Easy Life i	4
Easy Life / Easy Life SA	4
Argon ²	15
Simba	15
Youngster 3	4
HeliX ²	12
RubiX ²	4
BasiX ²	4
PariX ²	5
Ibis	13

Bitte beachten Sie: Die oben stehende Liste gibt einen Hinweis auf Rollstuhlmodelle, an denen der M90 montiert werden kann. Rahmenform, CoG, Radgröße und Sitztiefe spielen jedoch eine wichtige Rolle. Daher empfehlen wir, die Kombination unbedingt zu testen, um 100% sicher zu sein! Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Die Übersicht zeigt nur Rollstühle, für die eine verbindliche Kombinationsvereinbarung vorliegt. Weitere Informationen zum Andocken finden Sie auf der nächsten Seite..

Empulse M90



Docking Information

- Zwei Aufnahmehalterungen werden fest an der Achshalterung montiert, so dass die Verwendung von Handrädern weiterhin möglich ist.
- Die Aufnahmehalterungen für die linke Seite des Stuhls enthält einen Magneten, der in Richtung der Vorderseite oder der Oberseite des Stuhls angebracht werden muss.



- Die Aufnahmehalterungen für die rechte Seite wird ohne Magnet geliefert und muss in Richtung der Rückseite oder des Bodens des Stuhls montiert werden.

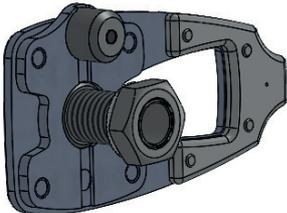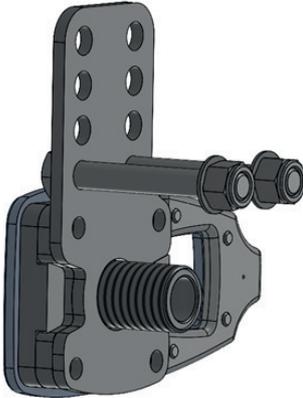

Faltrollstühle mit Achsplatten	Starrrahmenrollstühle mit Achsplatten
<p>Beispielsätze, genauer Satz, je nach Rollstuhlmodell</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Montagelösung mit Drehmomentstütze • Durchmesser und Formschluss zur rollstuhlspezifischen Achsplatte • Kits: 4, 5, 12 	 <ul style="list-style-type: none"> • Drehmoment-Stützplatte mit Stiften oder Schrauben, eventuell Achsmanschette • Form und Design passend zum jeweiligen Rollstuhl • Kits: 2, 6, 13, 14, 15

Technische Anforderungen:

- Antriebsrad Größe 24"
- Radsturz 0°
- Sicherheitsräder aus Sicherheitsgründen immer empfohlen

Technische No-Gos:

- Wenn der Achsdurchmesser des vorhandenen manuellen Rades nicht 12,7 mm beträgt, besteht die Möglichkeit, ein manuelles Rad von Sunrise Medical zu bestellen, das mit der neuen Achseinheit kompatibel ist.
- Kombination von M90 und Trommelbremse nicht möglich