


ASSEMBLY INSTRUCTION


Drum brake

Ledsagerbrems

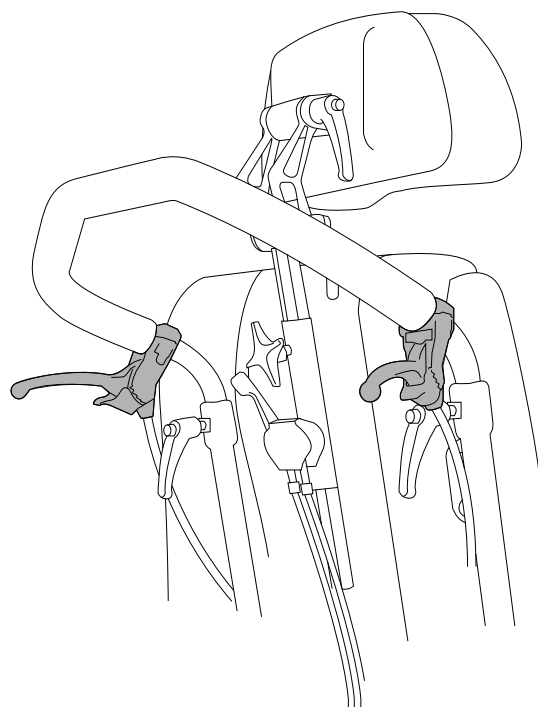

Description / Beskrivelse	Item no./ Art. nr.	
20" Pneumatic / Luft	☐	84416
22" Pneumatic / Luft	☐	84436
24" Pneumatic / Luft	☐	84456
20" Compact / Kompakt	☐	84419
22" Compact / Kompakt	☐	84439
24" Compact / Kompakt	☐	84458
Parts for dum brake / Deler til ledsagerbrems - Emineo Basic	☐	3409994



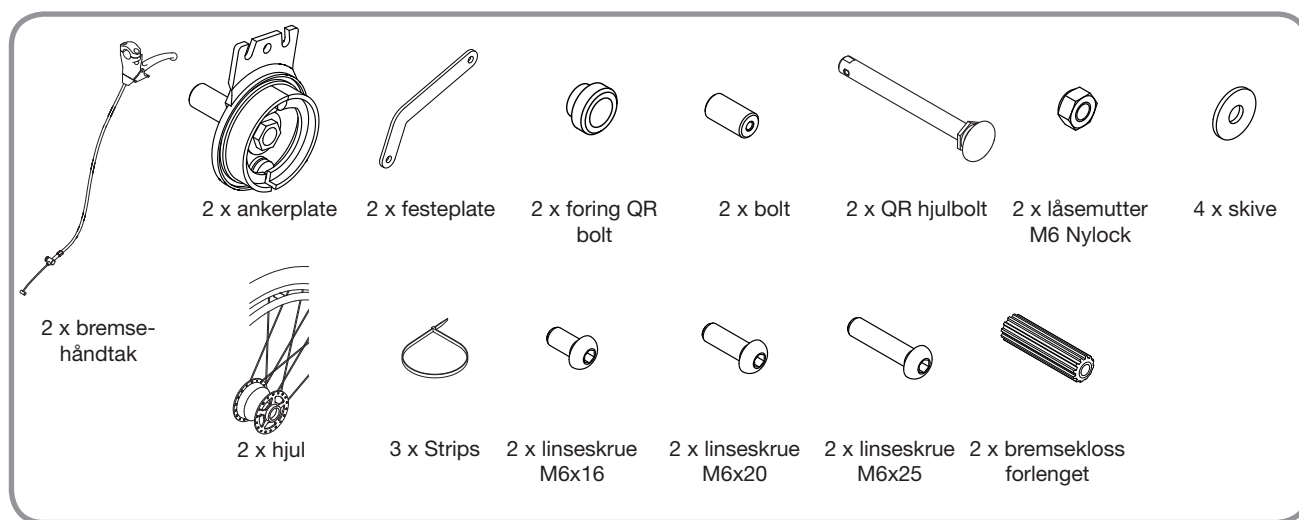

EN

Preparatory work

- 1 Put on the push handles.
- 2 Remove the wheel. Remove the existing casing. In order to do this, use a 27 mm wrench to work loose the nut with washer. Use a 16 mm wrench to unscrew the casing.

Keep the washer ^(A) for use under paragraph 4.

- 3 **Assembling the anchor plate**
In order to assemble the anchor plate in the foremost hole pattern of the wheel base, see figure 3a. See figure 3b for assembling in the rear hole pattern.
- 4 **Fixing the anchor plate to the wheel base**
In order to assemble the anchor plate in the foremost hole pattern of the wheel base, see figure 4a. Reuse the washer ^(A) from paragraph 2. See figure 4b for assembling in the rear hole pattern.







NO

Forberedelser

- 1 Fest bremsehåndtakene på kjørebøylen.
- 2 Ta av hjulene og fjern eksisterende hjulhylser.
Benytt en 27 mm fastnøkkel for å løsne mutteren med skive. Benytt en 16 mm fastnøkkel for å skru ut selve hjulhylsen.

Ta vare på skiven ^(A), den skal du benytte under punkt 4.

- 3 **Sammenstilling av ankerplaten**
Følg figur 3a for montering i fremre hullbilde av hjulblokka. Følg figur 3b for montering i bakre hullbilde av hjulblokka.
- 4 **Montering av ankerplaten i hjulblokka**
Følg figur 4a for montering i fremre hullbilde av hjulblokka. Følg figur 4b for montering i bakre hullbilde av hjulblokka, benytt skiven ^(A) du tok vare på under punkt 2.

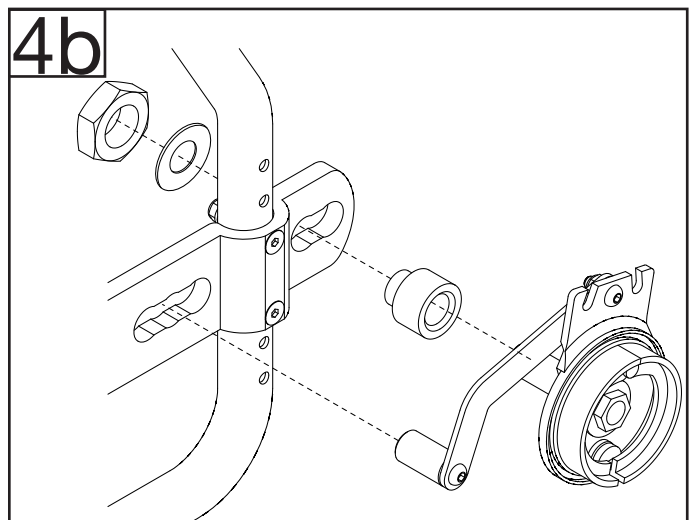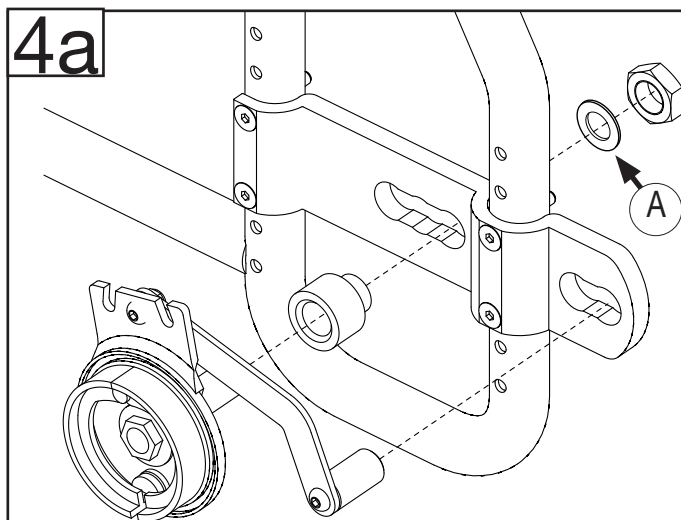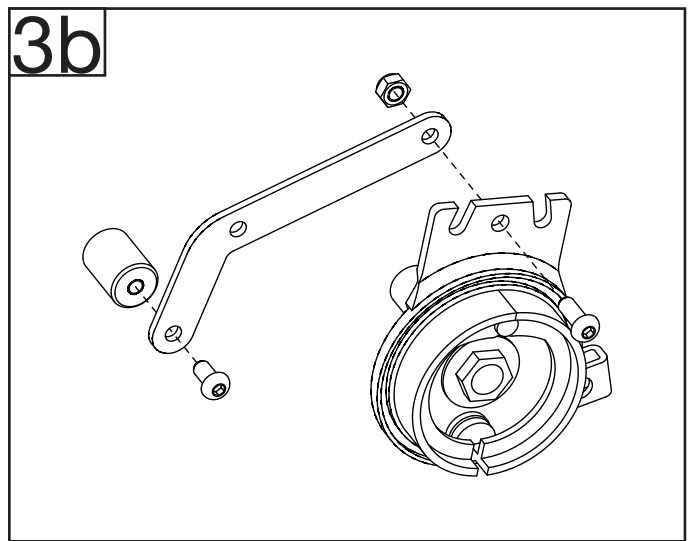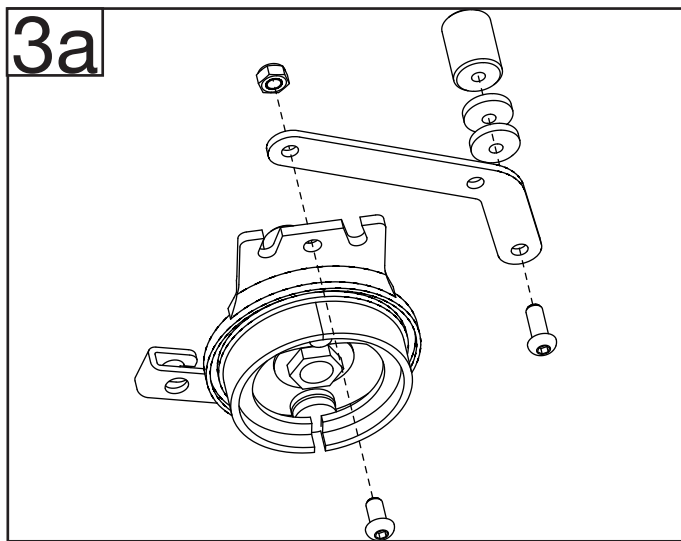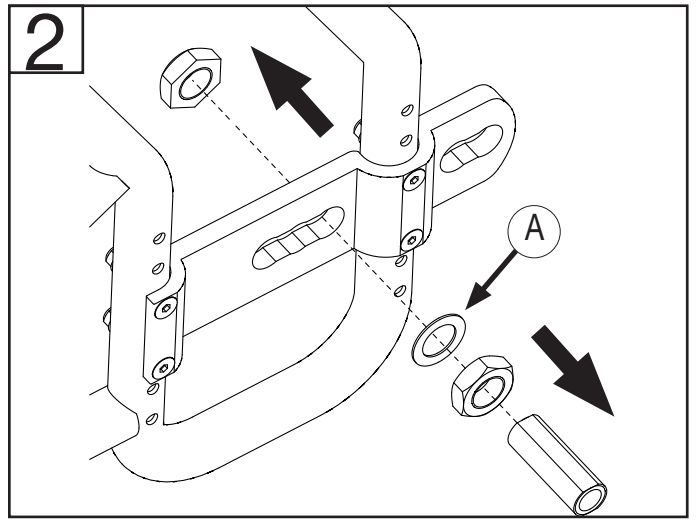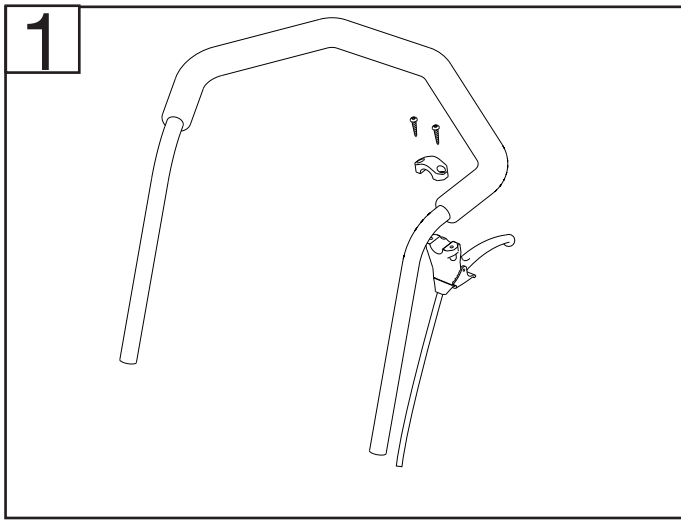

- 5 Use a 17 mm socket wrench to tighten the casing.
- 6 Fix the wire  to the brake handle.
- 7 Screw the wire stretcher  to the most slack position. Fit the wire stretcher to the slot in the anchor plate.






To adjust the drum brake, screw out the wire stretcher step by step. Mount the wheel and test the brake by spinning the wheel and squeezing the brake handle. The wheel should spin easily.

- 8 Unscrew the brake block as displayed in figure 9. Replace with the extended brake block.
- 9 Use strips to fasten the brake-wire. Glue the wire fixing to the side cover which is located by the armrest. Use trips to assemble the brake-wires behind the back.

- 5 Trekk til drivhjulshylsa med en 17 mm pipenøkkel.
- 6 Fest vaierenden  til bremsehendelen.
- 7 Skru kabelstrammeren  til slakkeste posisjon og fest den til sporet i ankerplata.

For å justere ledsagerbremsen, skru du ut kabelstrammeren trinn for trinn, setter på hjulet og tester bremsen ved å snurre hjulet og klemme inn bremsehåndtakene. Hjulet skal trille lett.

- 8 Skru ut bremseklossen som vist i figur 9, og bytt med den nye, lengre bremseklossen.
- 9 Strips fast bremsevaierne så disse ikke henger løst. Lim feste for stripsen på sidedekselene ved armlenet. Strips deretter vaierne sammen bak på ryggen.

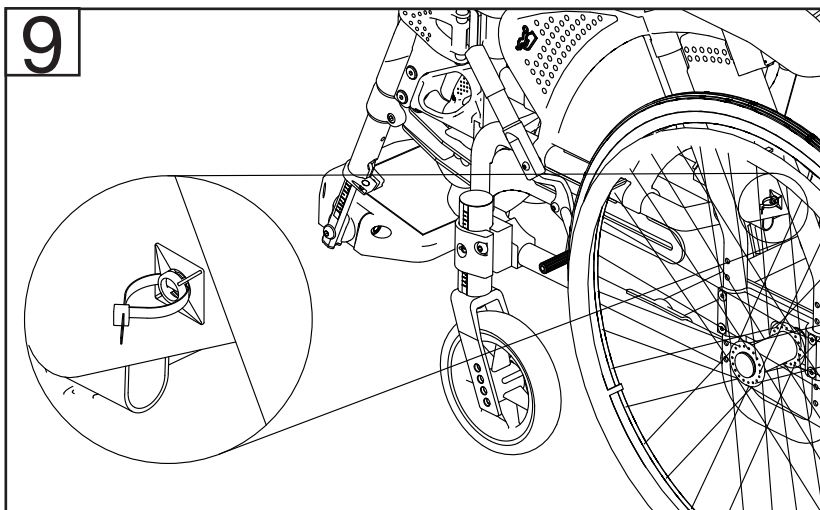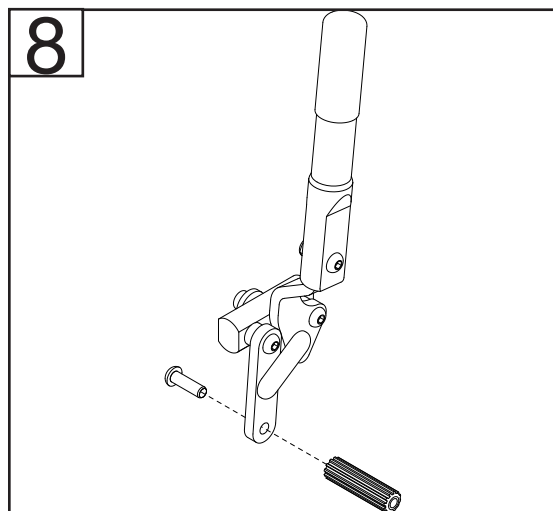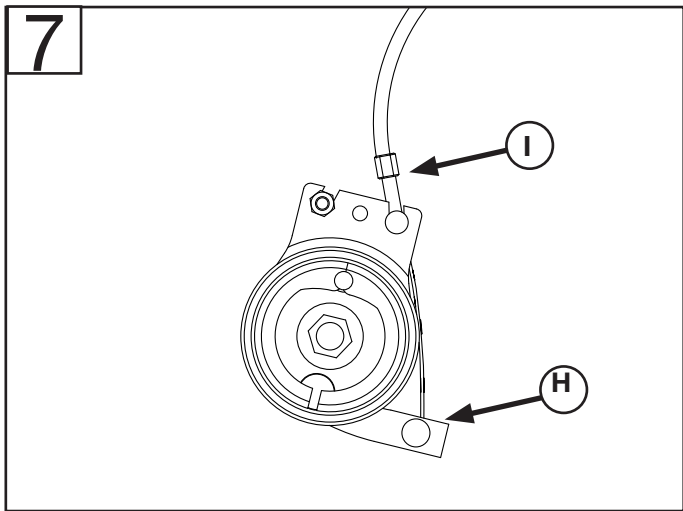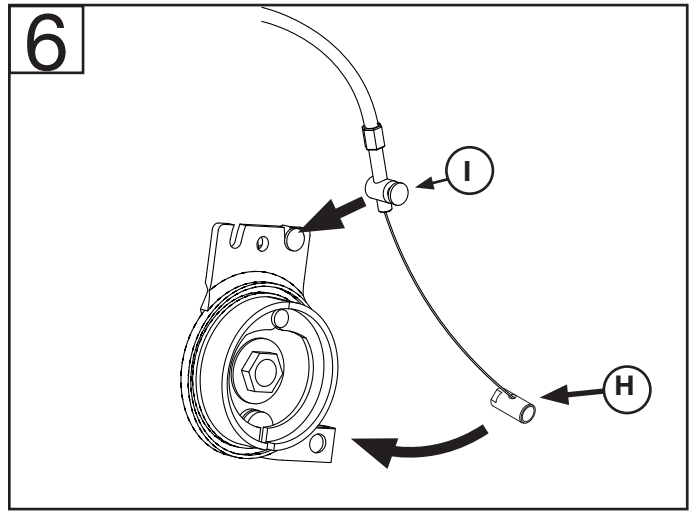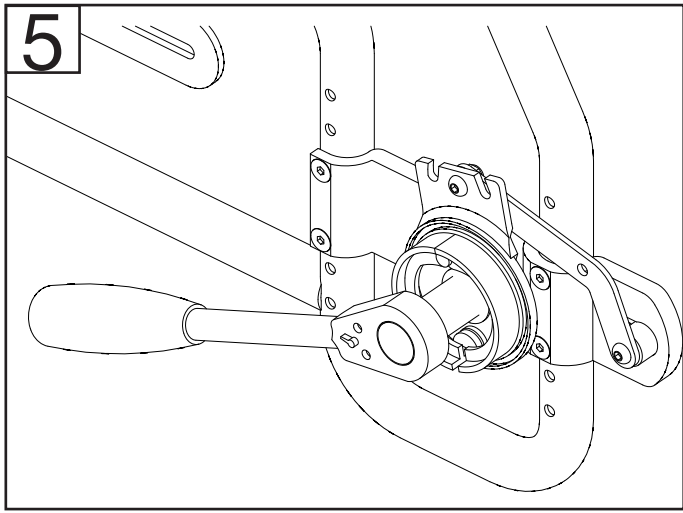

Adjusting the seat height and the centre of gravity

11 Seat height

In order to move the anchor plate up or down; unscrew the four screws attaching the wheel block to the frame. It is not necessary to remove the anchor plate.

12 Centre of gravity

Use a 17 mm socket wrench and a 24 mm spanner to loosen the casing.

- 13 Move the anchor plate forward or backward. In order to use the opposite hole pattern turn the anchor plate. The rear hole pattern represents the best anti-tipping position.

Innstilling av setehøyde og tyngdepunkt

11 Setehøyde





Skru ut de 4 skruene som fester hjulblokka til ramma.

Flytt hjulblokka opp- eller nedover og skru til skruene igjen. Det er ikke nødvendig å fjerne ankerplata for å justere setehøyden

12 Tyngdepunkt

Løsne drivhjulshylsen med en 17 mm pipenøkkel og en 24 mm fastnøkkel

- 13 Flytt ankerplata framover eller bakover. Du kan snu ankerplata for å benytte motsatt side av hjulbildet. Plassering av ankerplata i det bakre hjulbildet, gir den mest tippesikre stolen.

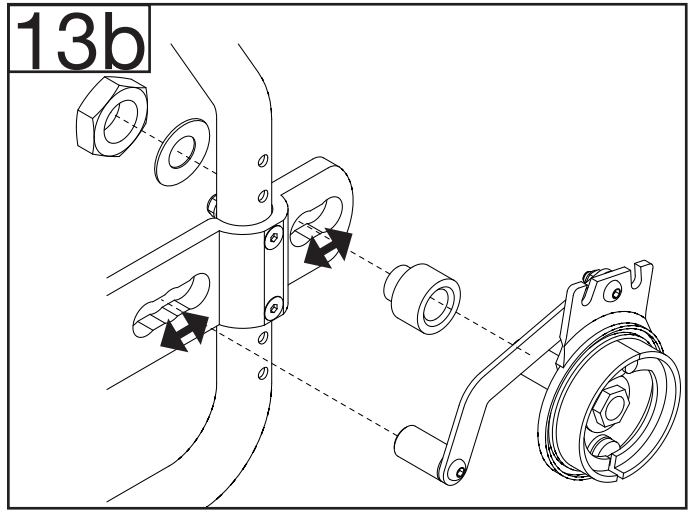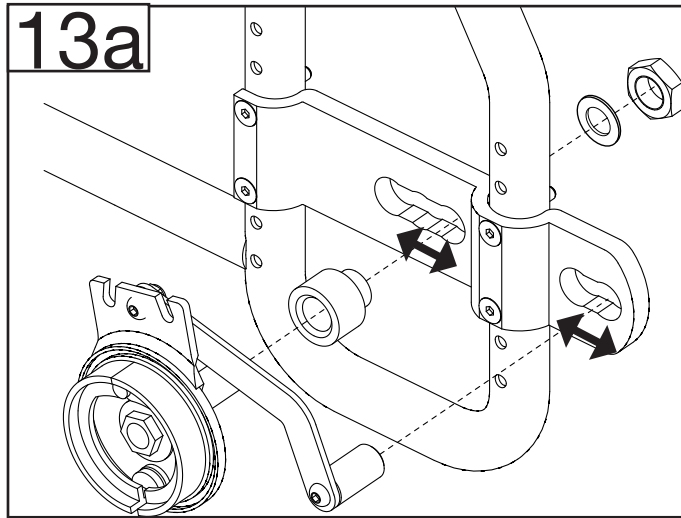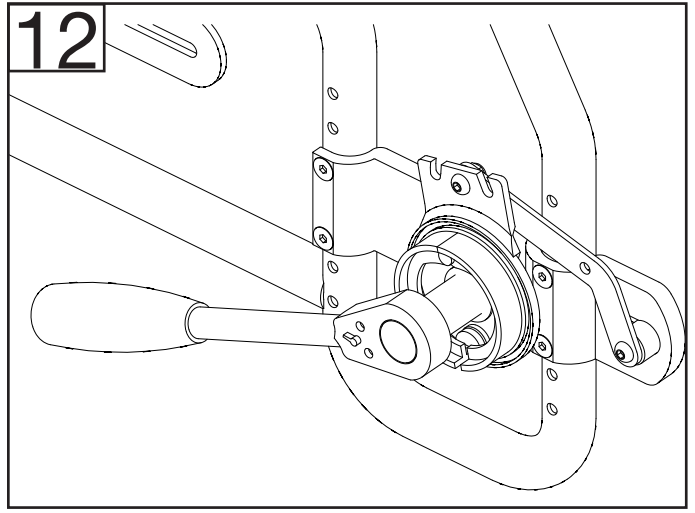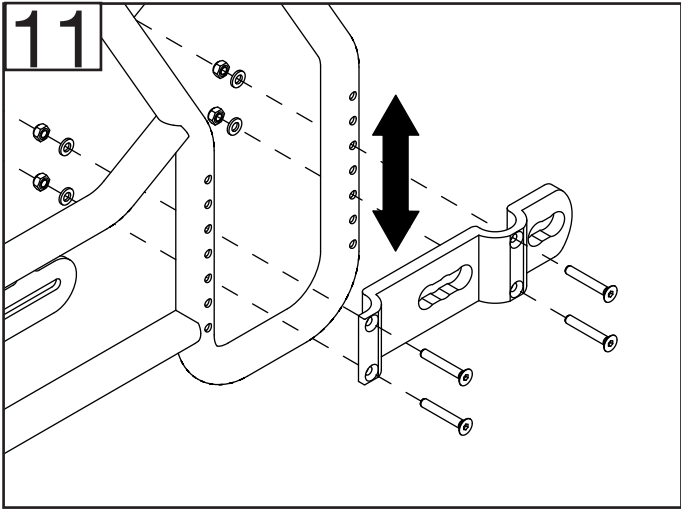



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 593 888
customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu