


ASSEMBLY INSTRUCTION

Electric back and seat tilt Elektrisk rygg og setetilt

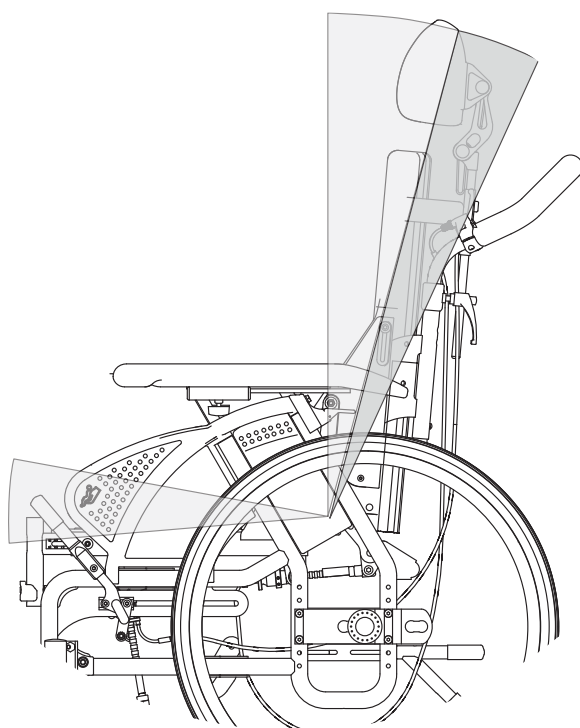


Description

Electric back and seat tilt Emineo / Elektrisk rygg- og setetilt Emineo

Article number

3019505



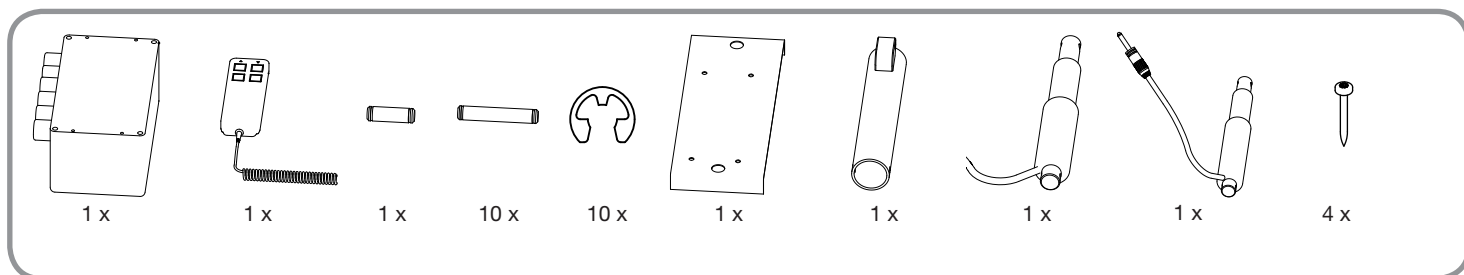

EN


Preparations – disassembling of adjustment mechanism for seat tilt and back


- 1 Disassemble the seat plate by unscrewing the four screws **A** (keep the screws).
- 2 Disassemble the adjustment mechanism for back **B**.
- 3 Disassemble the adjustment mechanism for seat **C**.
- 4 Disassemble wires and handles **D**.







NO



Forberedelser - demontering av reguleringsmekanisme for rygg og tilt

- 1 Demonter seteplata ved å skru ut de fire skruene **A** (ta vare på skruene).
- 2 Demonter reguleringsmekanisme for rygg **B**.
- 3 Demonter reguleringsmekanisme for sete **C**.
- 4 Demonter vaiere og hendler **D**.

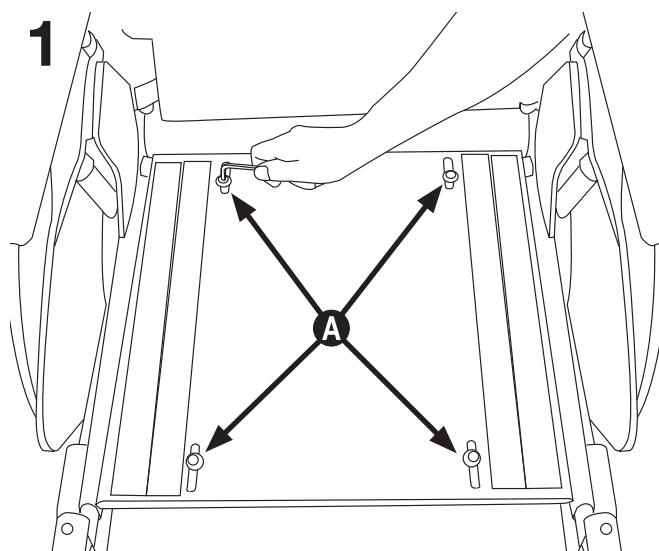

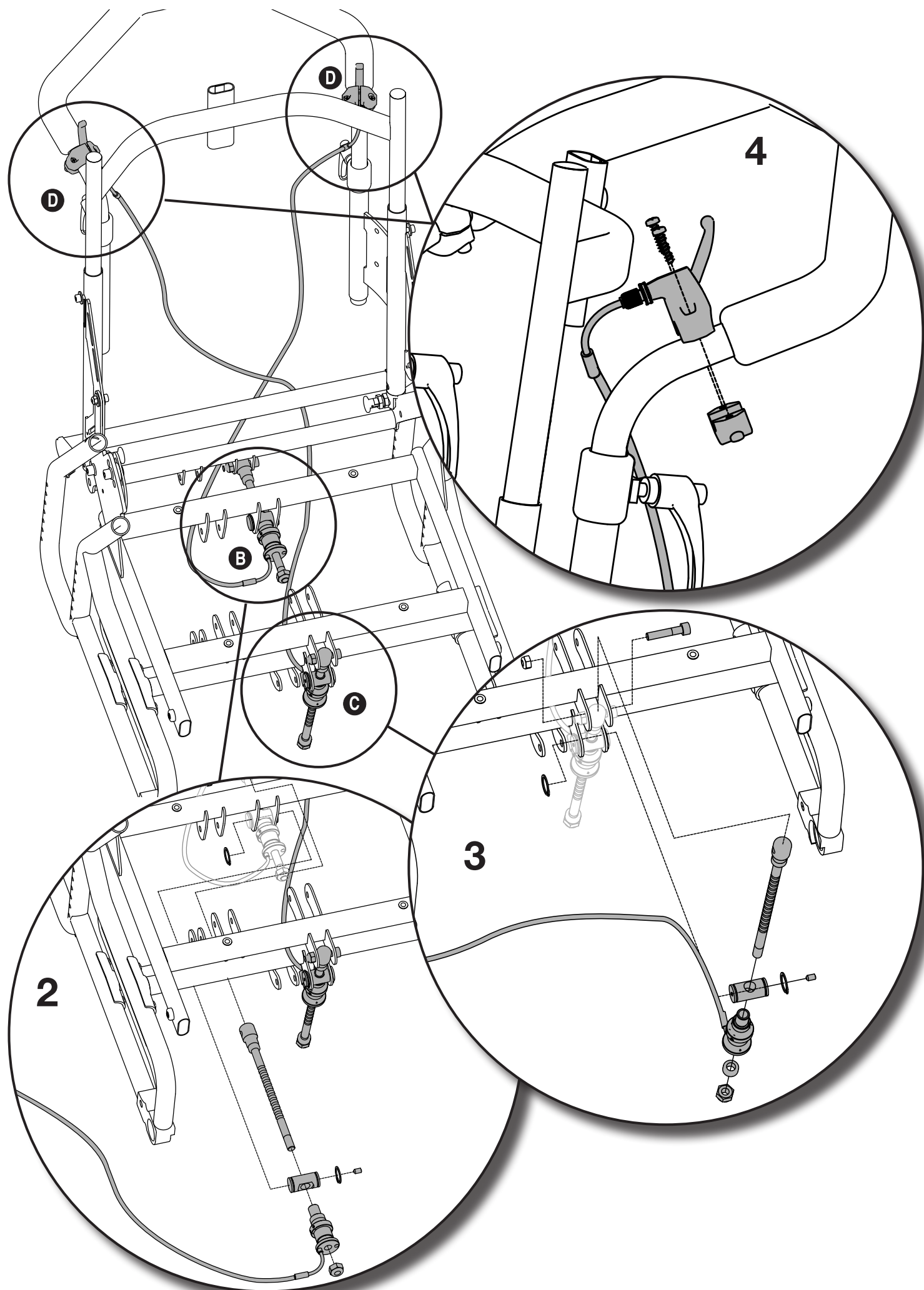

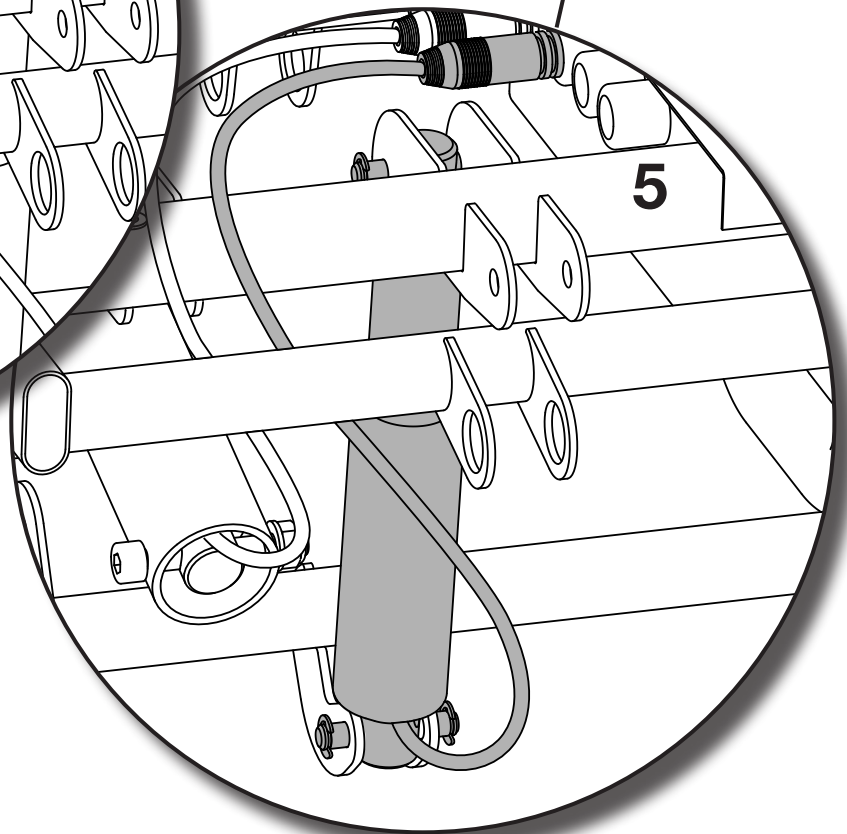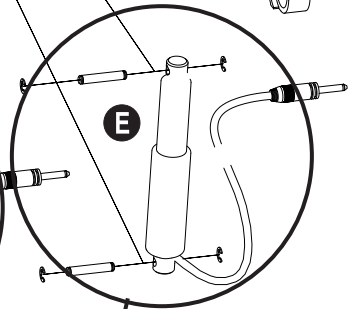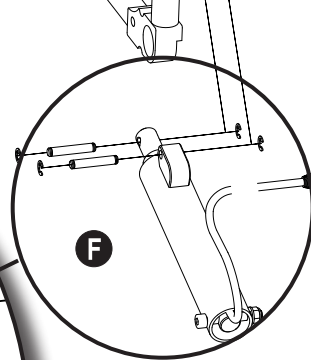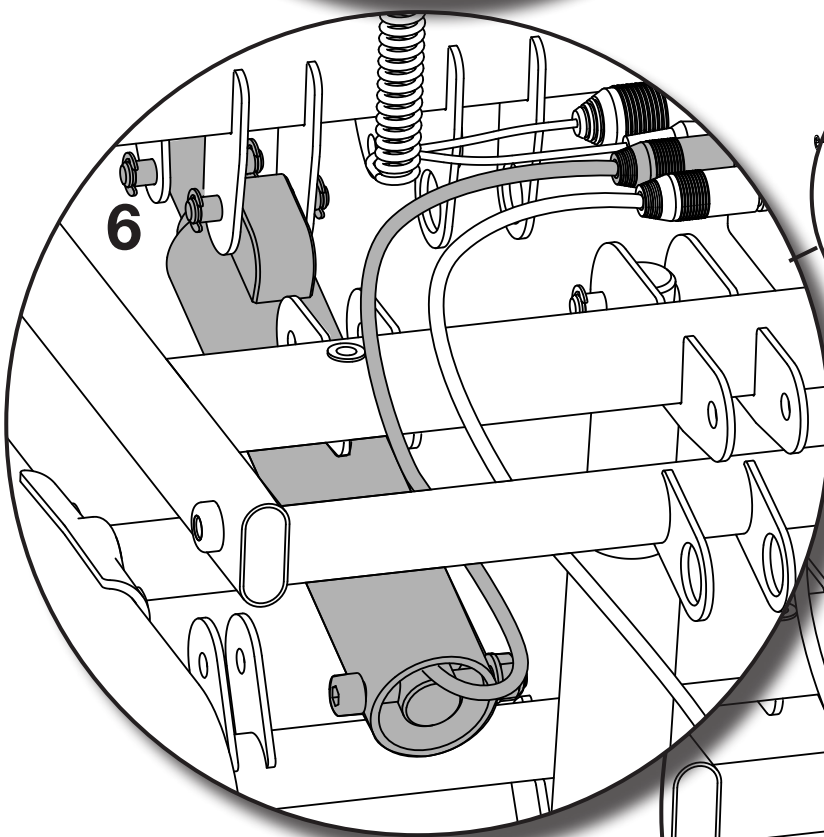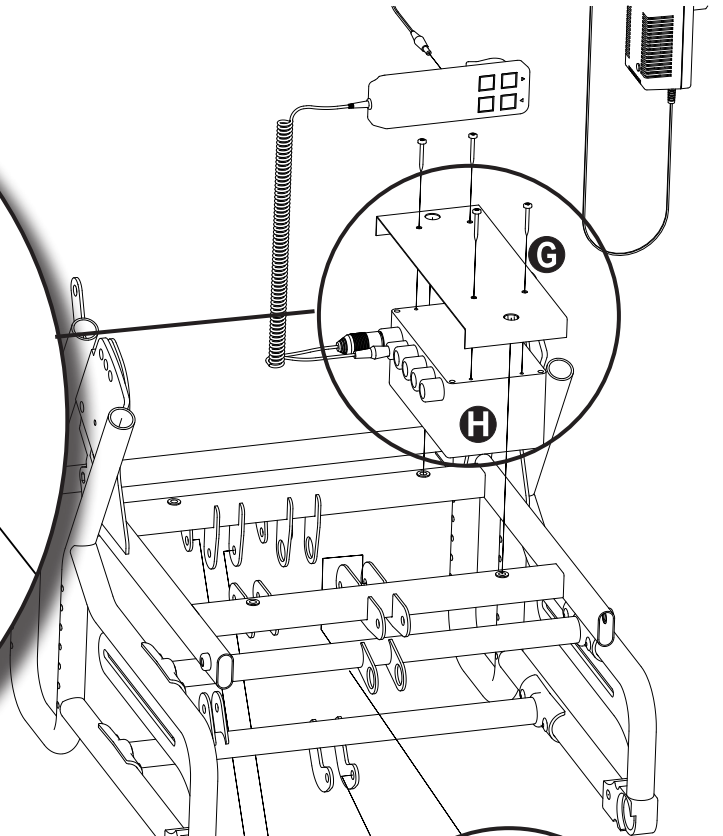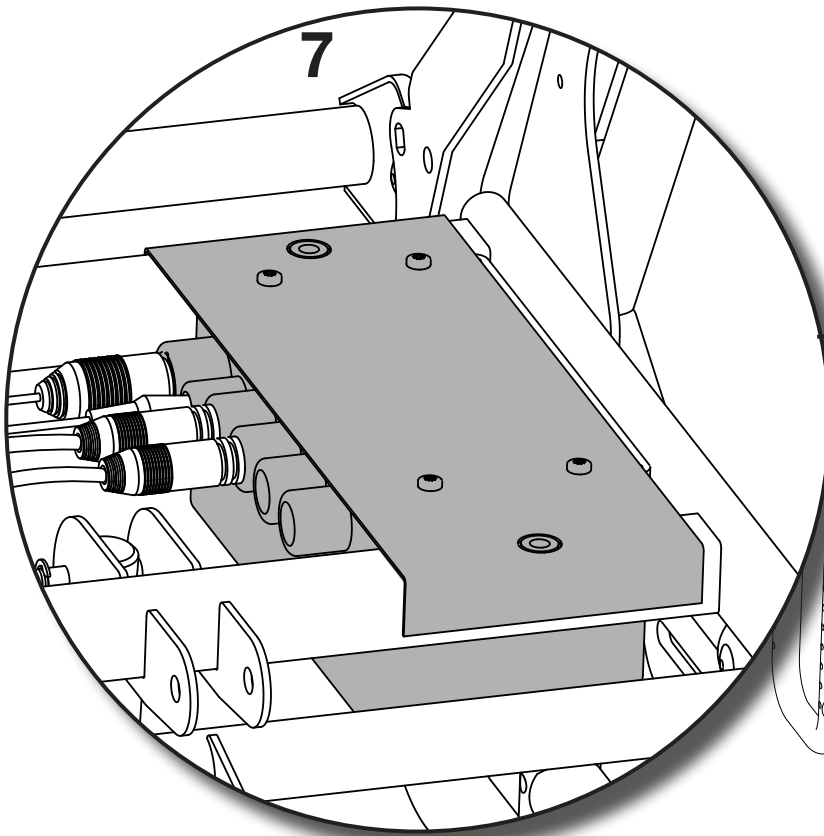

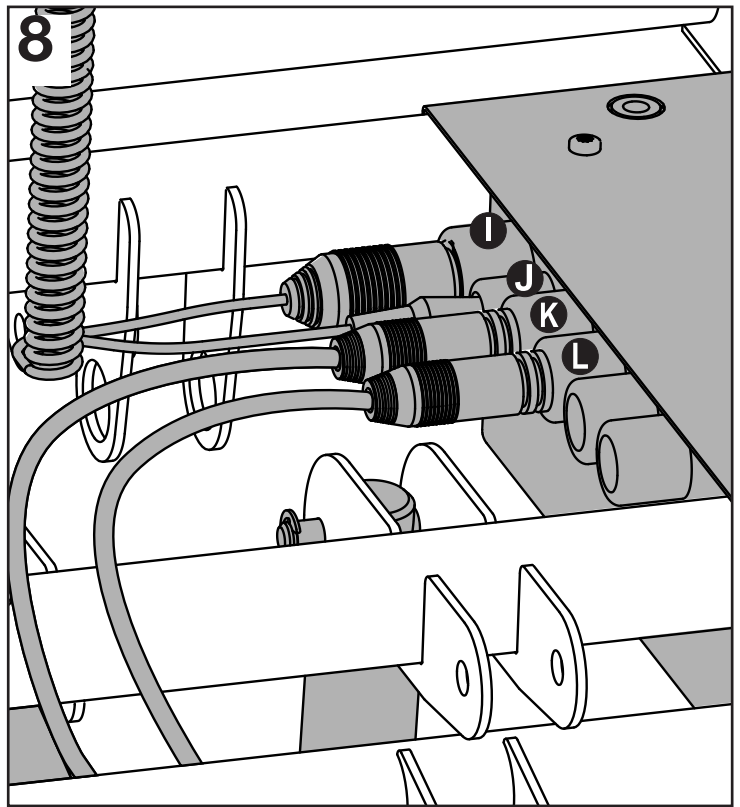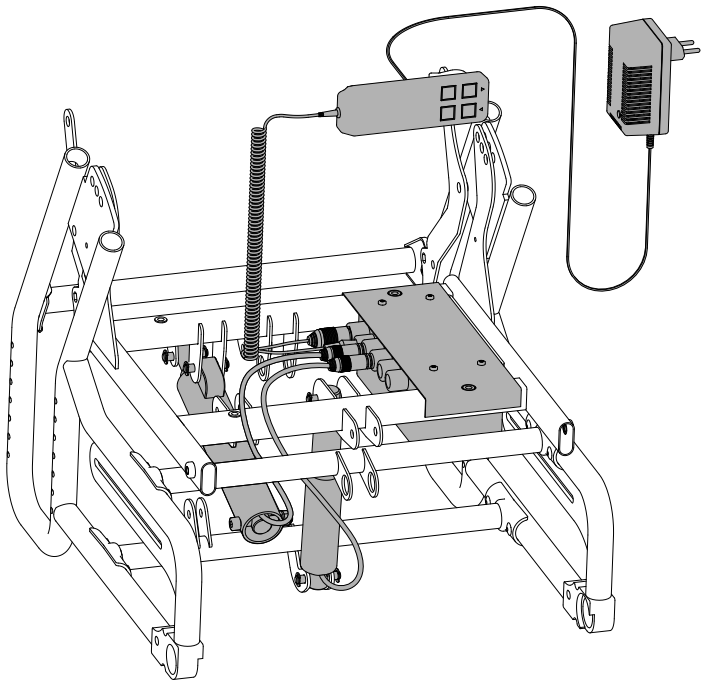


EN

- 5 Assemble seat actuator **E**.
- 6 Assemble back actuator **F**.
- 7 Screw together fixation plate **G** and control unit **H**.
Place the jointed fixation plate and control unit onto the seat frame, see illustration. (The control unit will be fixed to the frame when you reassemble the seat plate).
- 8 Lay the cables to the control unit
 - I** hand control
 - J** cable for charger
 - K** actuator back
 - L** actuator seat tilt
- 9 Remount the seat plate, ensure that the control unit is fixed to the seat frame while tighten the screws.

NO

- 5 Monter aktuator for sete **E**.
- 6 Monter aktuator for rygg **F**.
- 7 Skru sammen festeplate **G** og kontrollboks **H**.
Plasser festeplate med kontrollboks på seterammen som vist i figuren (Kontrollboksen festes til rammen når du skrur fast seteplata).
- 8 Trekk kabler til kontrollboksen
 - I** håndkontroll
 - J** ladekabel
 - K** aktuator for rygg
 - L** aktuator for setetilt
- 9 Monter seteplata, påse at du samtidig fester kontrollboksen til seteramma.

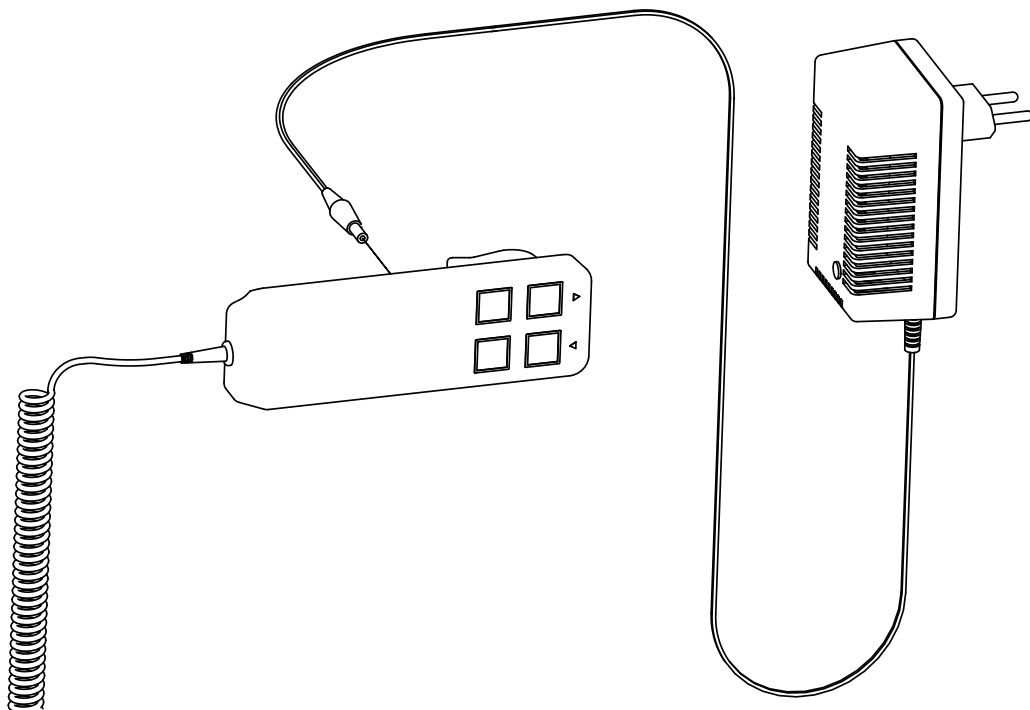

EN

Charging procedure

Insert the charger plug in the hand control. Connect the charger to the power supply (230 V). The indicator on the charger shines green when the battery is fully charged.

Do not use the wheelchair while charging. Charge the batteries when the wheelchair is not in use.

Washing

If you flush the wheelchair with a hose or a high-pressure jet spray, you must first disassemble the actuators and control box.

NO

Ladeprosedyre

Sett ladepluggen i håndkontrollen. Laderen kobles til strømnettet (230 V). Det lyser en grønn lampe på laderen når batteriene er fulladet.

Rullestolen må ikke brukes når den står til lading. Sett stolen til lading når den ikke er i bruk.

Renhold

Aktuatorer og kontrollboks må demonteres hvis rullestolen skal spyles/vaskes med slange eller høytrykksspyler.



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 593 888
customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu