

ASSEMBLY INSTRUCTION

External Joystick / External Joystick Lite



Description

Article number

External Joystick - Mounting on electrical swing-away chin arm



1016503

External Joystick Lite - Mounting on electrical swing-away chin arm



1016509





1015013



1015014



1016719




1016497



1016683



9010243*

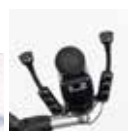

1015019



00355.0477



1016717



1016716

**Included
in kit**

1016503	1		1	1	1	1	1	1	1	1
1016509		1	1	1	1	1	1	1	1	1



Torx 30 mm

EN

1. Assemble the bracket for the chin arm.*
2. Slide the chin arm into the back tube.
3. Assemble the bracket for buddy button on headrest.
4. Assemble the Omni screen bracket.
5. Assemble the swing-away controller bracket.
6. Set up the cabling.

* Only in combination with Sedeo Pro+ back.

In order to set up the system, see R-net Omni technical manual.

NO

1. Monter braketten for hakestyringsarmen.*
2. Skyv armen inn i ryggørret.
3. Monter braketten til Buddy-knapper på nakkestøtten.
4. Monter Omni-skjermbraketten
5. Monter den utsvingbare styreboksbraketten.
6. Sett opp kablene.

* Kun i kombinasjon med Sedeo Pro+ rygg.

Se den tekniske manualen for R-net Omni for oppsett av systemet.

SE

1. Montera fästet för hakstyrning.*
2. Skjut in hakstyrningsarmen i ryggörret.
3. Montera fäste för buddy-kontakt på nackstöd.
4. Montera Omni-skärmens fäste.
5. Montera undansvingbara controller fästet.
6. Installera kablagen.

* Endast i kombination med Sedeo Pro+ rygg.


För att installera systemet, se R-net Omni teknisk manual.




1




2

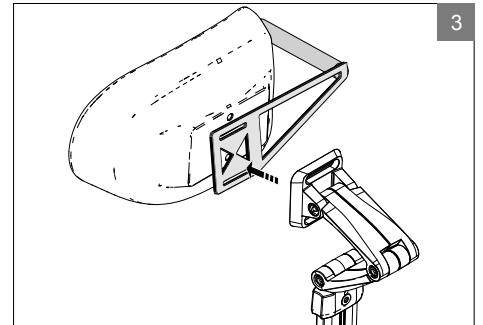


3

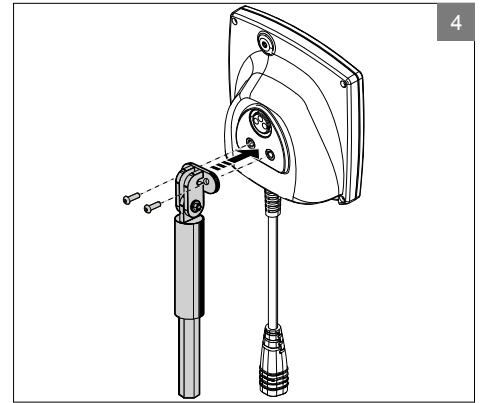

4

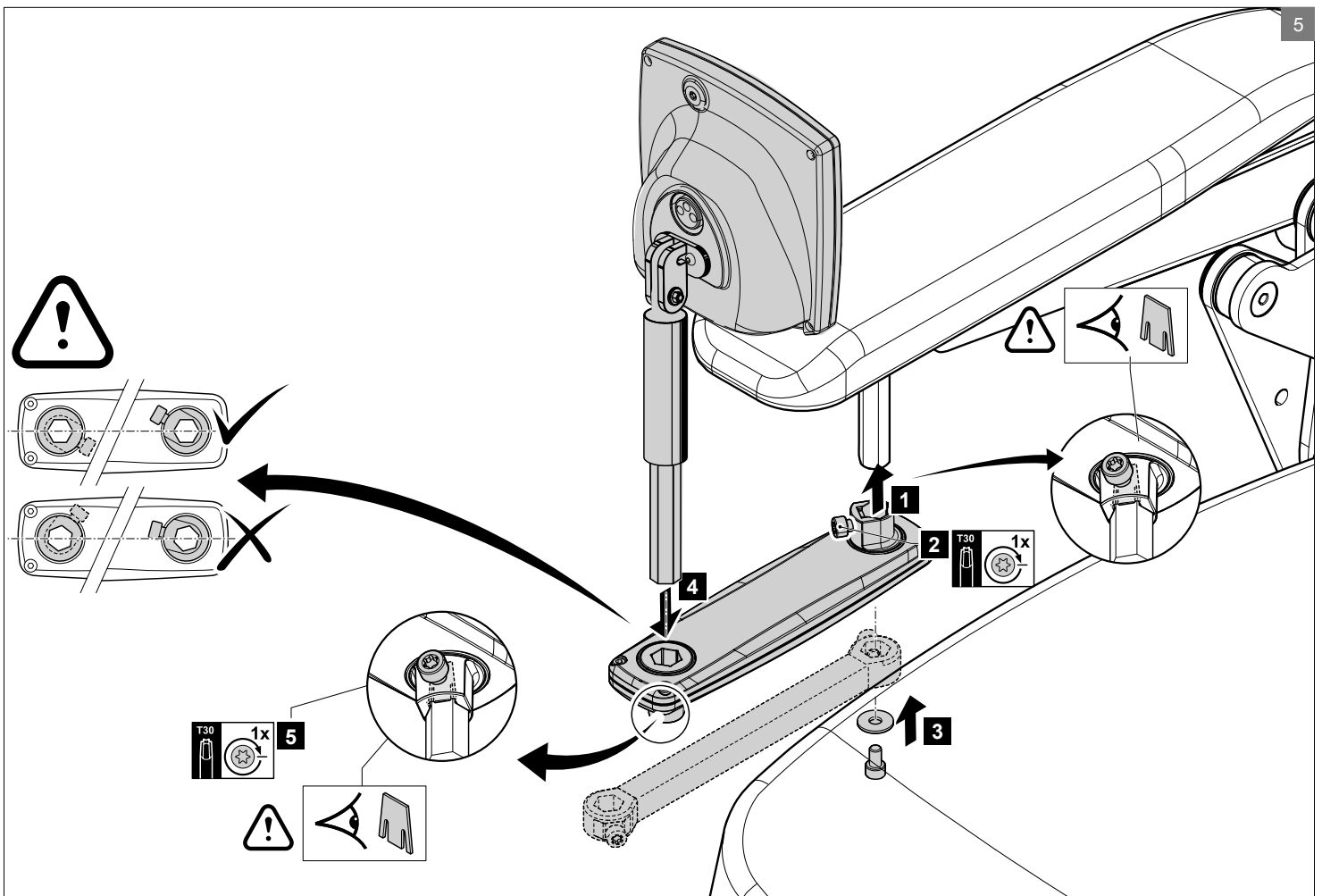

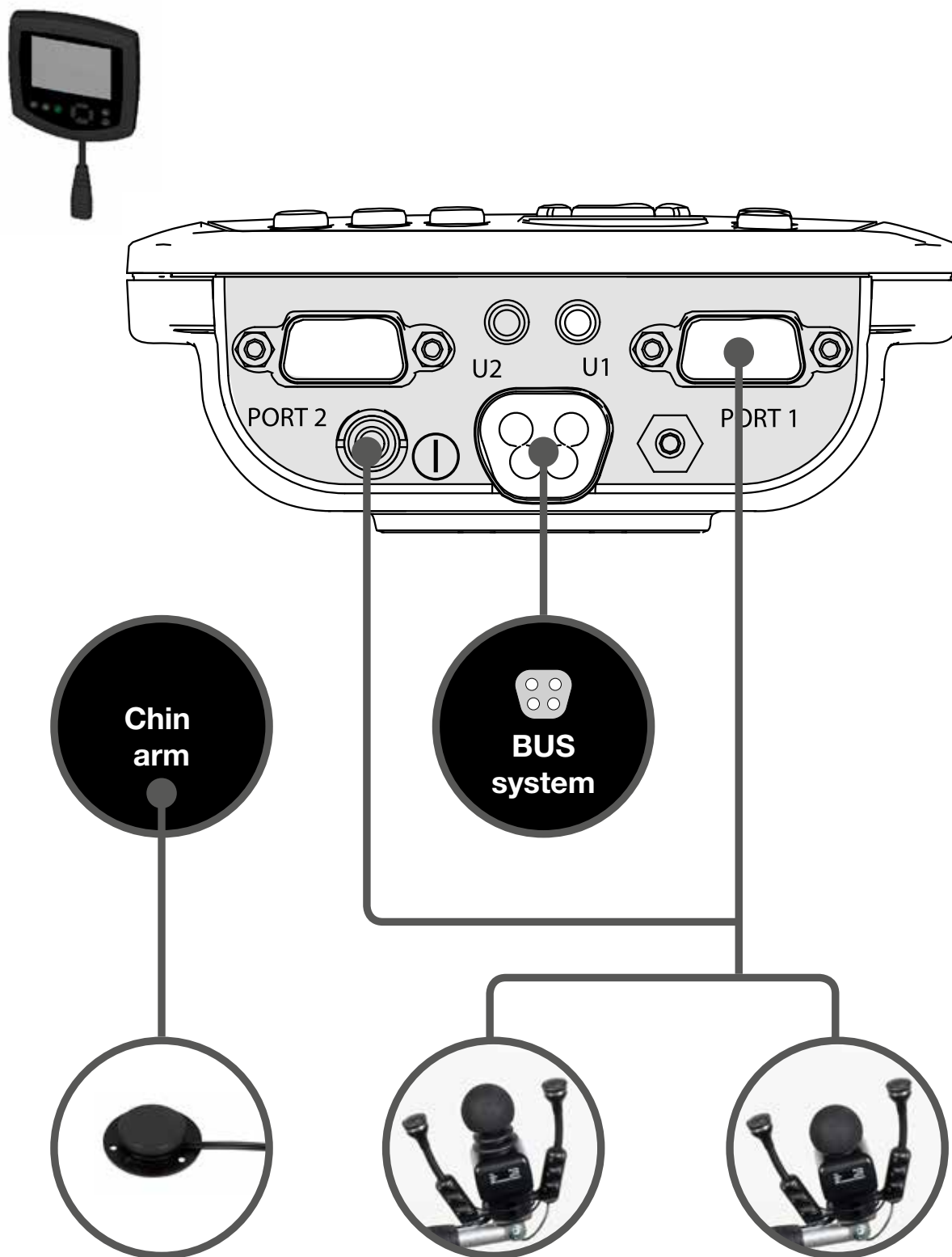

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 593 888
customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu