

ASSEMBLY INSTRUCTION

Micro Pilot Joystick / Micro Guide Joystick



Description

Article number

Micro Pilot Joystick - Mounting on worktop



1016512

Micro Guide Joystick - Mounting on worktop



1016672





Included in kit

1016512	1	1	1	1	1	1	1
1016672	1	1		1	1	1	1



Torx 30 mm



Drill

EN

1. Fit the worktop bracket to the armrest. Slide the worktop tube into the bracket and tighten the locking knob.
2. Assemble the Omni screen bracket.
3. Assemble the swing-away controller bracket.
4. Mount the joystick in the worktop and adjust the height of the joystick.
5. Drill holes in the worktop for the buddy buttons (to be done with user in the wheelchair). Mount the joystick to the worktop and set up the cabling.

In order to set up the system, see R-net Omni technical manual.

NO





1. Monter bordbraketten på armlenet. Skyv bordrøret inn i braketten og stram til låserattet.
2. Monter Omni-skjermbraketten
3. Monter den utsvingbare styreboksbraketten.
4. Monter joysticken på bordplaten og juster joystickens høyde.
5. Bor hull i bordplaten til Buddy-knappene (gjøres med brukeren i rullestolen). Monter joysticken på bordplaten og sett opp kablingen.


Se den tekniske manualen for R-net Omni for oppsett av systemet.

SE

1. Montera bordsfästet på armstödet. Skjut in bordsröret på fästet och dra åt låsknappen.
2. Montera Omni-skärmens fäste.
3. Montera undansvängbara controller fästet.
4. Montera joysticken i bordet och justera höjden på joysticken.
5. Borra hål i bordet för buddy-kontakterna (görs med brukaren i rullstolen). Montera joystick på bordet och installera kablagen.

För att installera systemet, se R-net Omni teknisk manual.

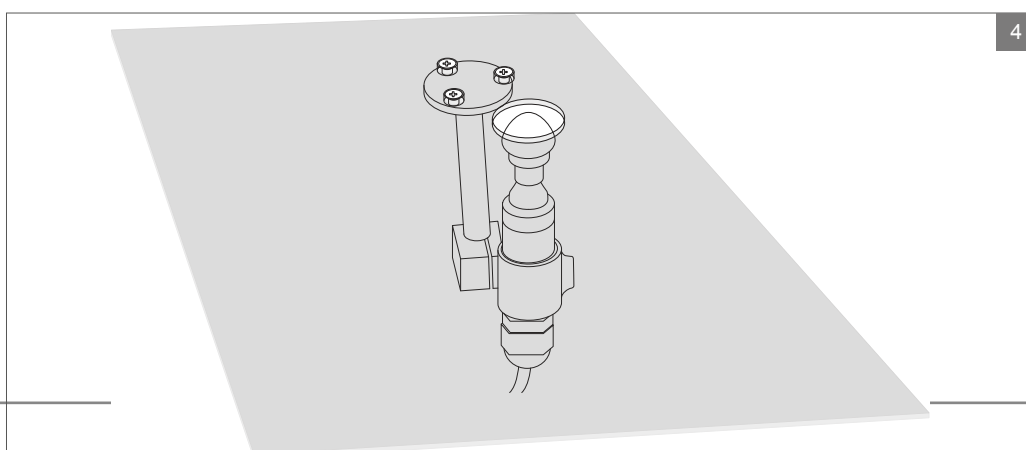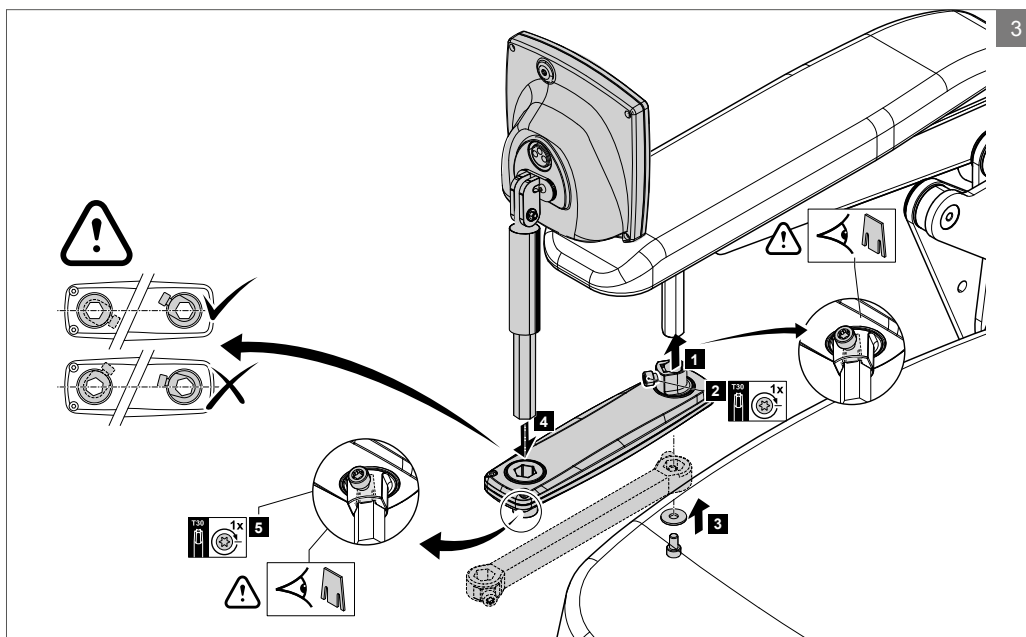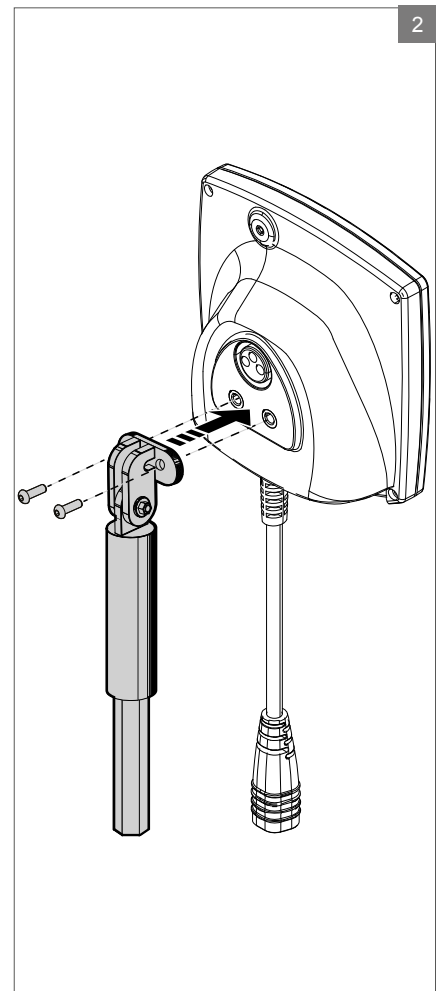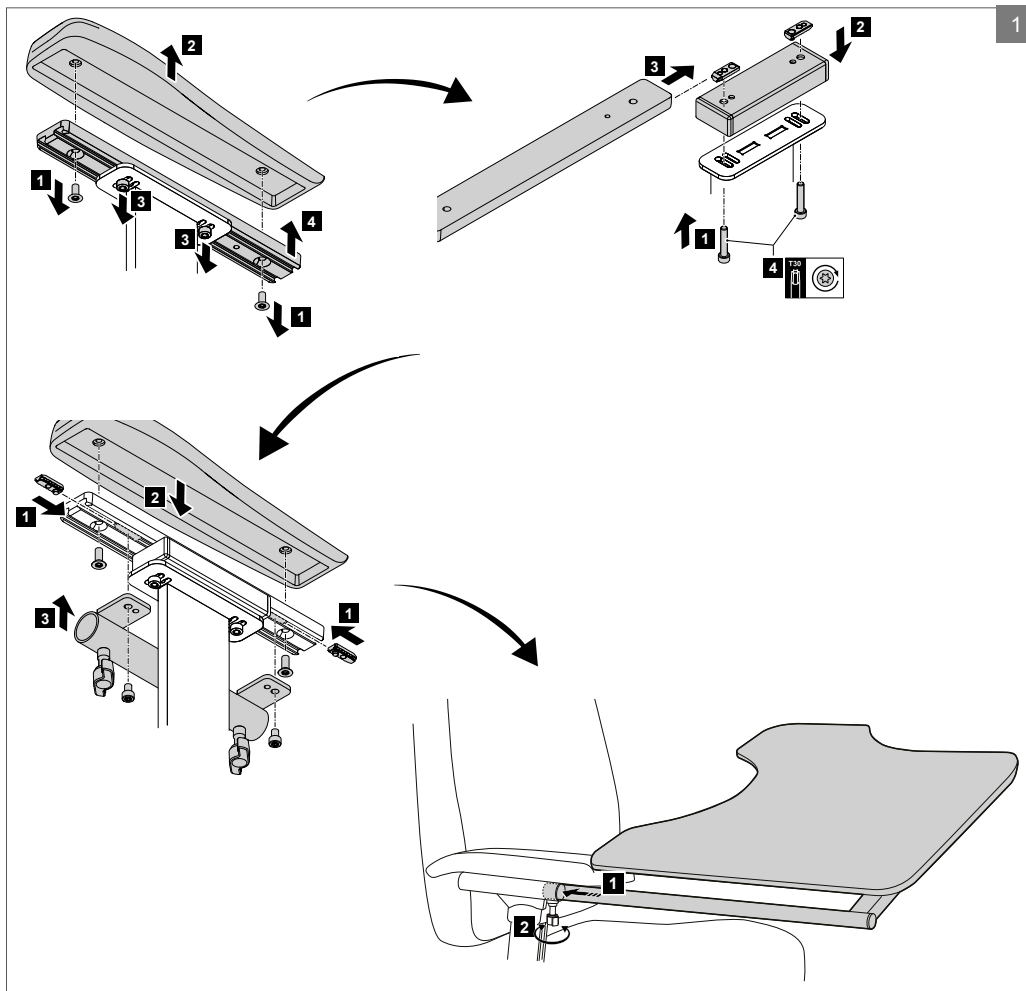

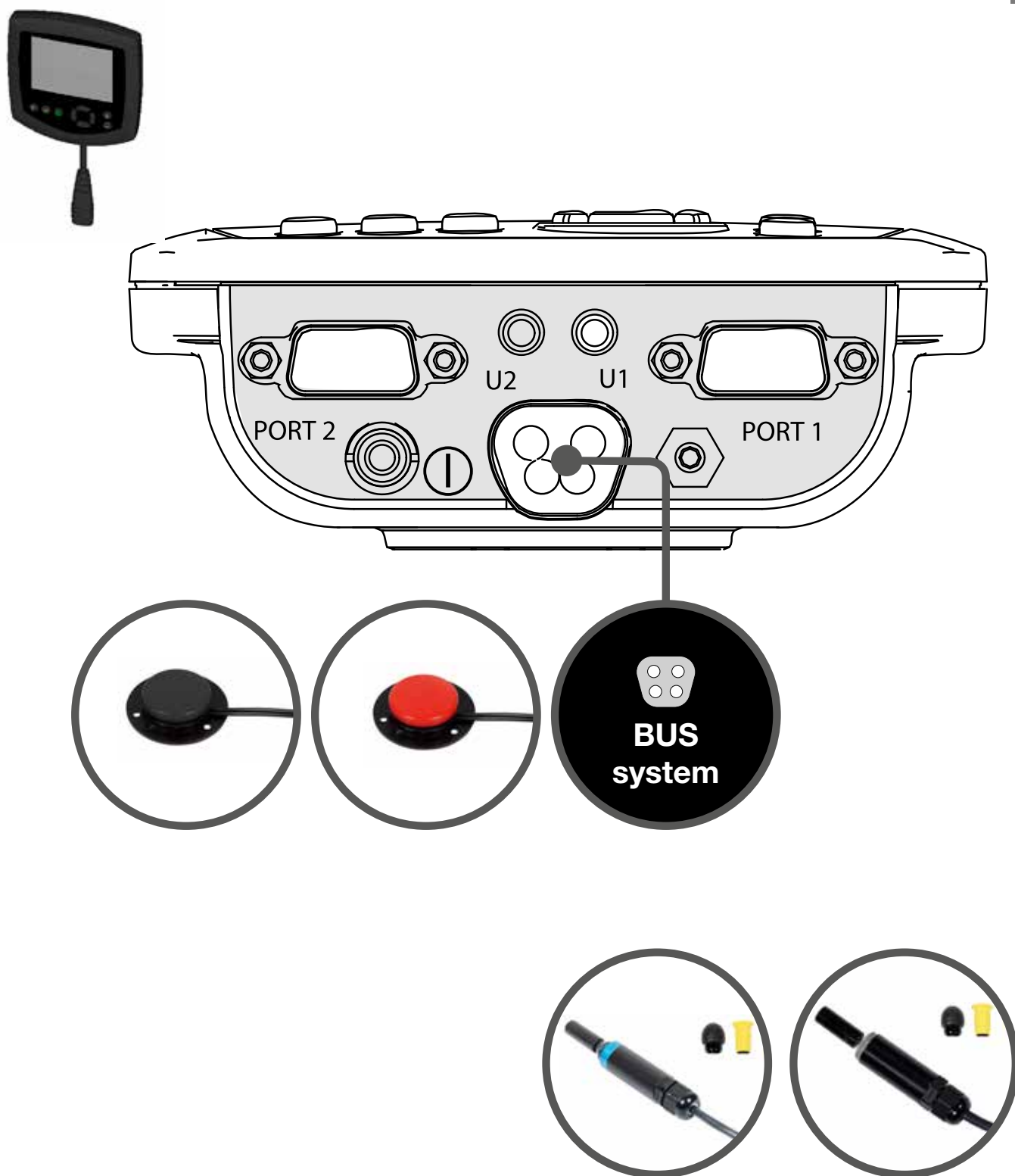

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 593 888
customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu