


Seat cushion cover
Trekket på seteputen
Sittdynans klädsel

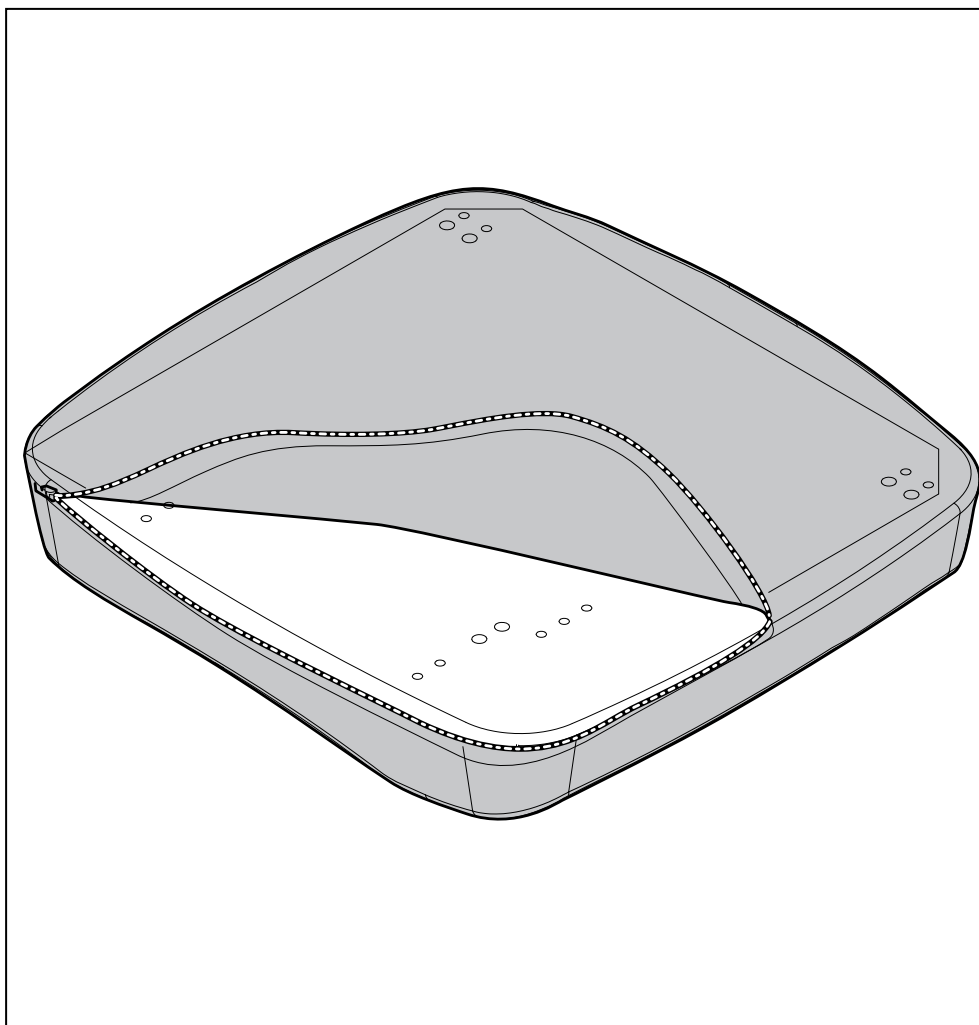

Seddeo Lite / Pro Seddeo Pro+

Seat cushion cover


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING

EN
NO
SV

SEDEO


9010199C

1

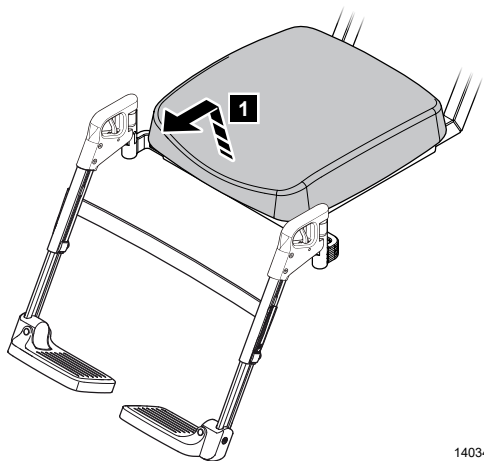


140348-02-033

2

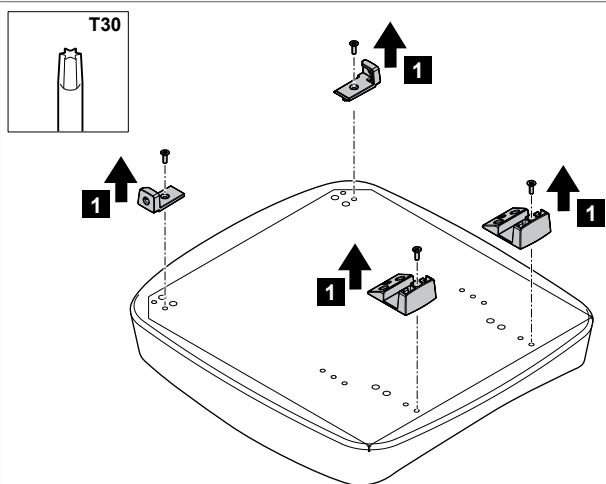


140348-02-034

3

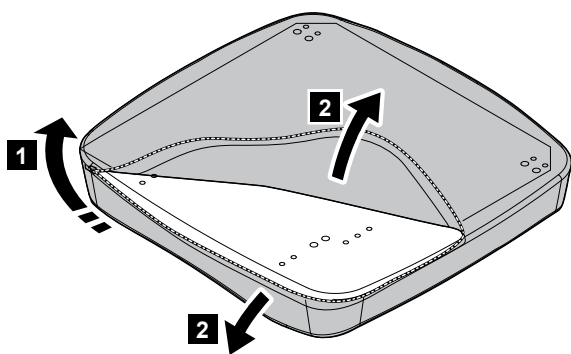


4

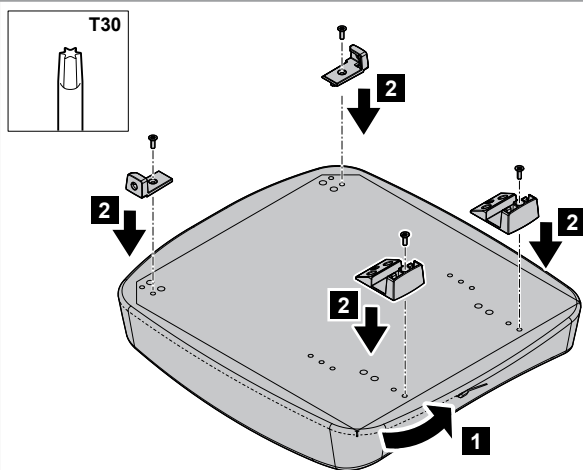

140348-02-036

5

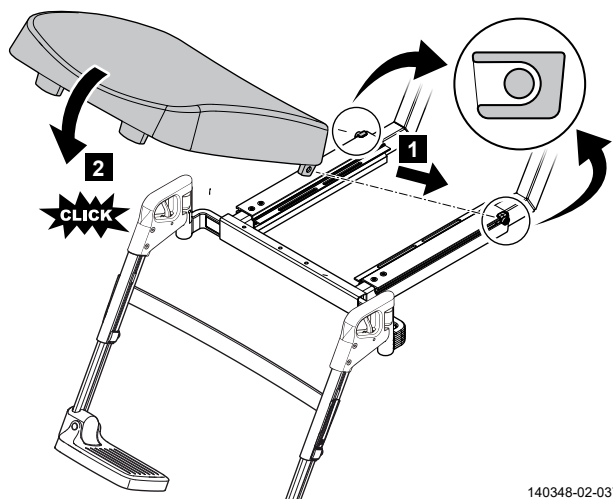

140348-02-037

Replacing the seat cushion cover

Preparation

Note! Switch off the wheelchair via remote control.

Instructions


Note! Suitable work area required!

- Pull the seat up and forwards to remove it from the chair.
- Unscrew the bolts (4x) from the mounting brackets at the bottom of the seat.
- Remove the mounting brackets (4x) from bottom plate.
- Unzip the seat cushion cover.
- Replace the seat cushion cover and mount the seat in reversed order.

Relevant article numbers

All seat cushions, see service manual page 15

Tools used

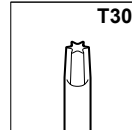

Skifte trekket på seteputen

Forberedelser

Merk! Slå av rullestolen via styreboksen

Anvisninger


Merk! Bruk et egnet arbeidsområde!

- Trekk setet opp og frem for å fjerne det fra stolen.
- Skru løs skruene (4 stk.) fra festebrakettene på undersiden av setet.
- Fjern festebrakettene (4 stk.) fra bunnplaten.
- Åpne glidelåsen på seteputetrekket.
- Skift seteputetrekket og monter setet i motsatt rekkefølge.

Relevante artikkelnumre

Alle seteputer, se side 15 i servicemanualen

Verktøy som brukes

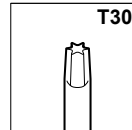

Byte av sittdynans klädsel

Förberedelser

Obs! Stäng av manöverboxens av- och påknapp

Anvisningar


Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Dra sitsen uppåt och framåt för att avlägsna den från stolen.
- Skruva loss bultarna (4x) från fästkonsolerna på sätets undersida.
- Avlägsna fästkonsolerna (4x) från bottenplattan.
- Öppna blixtlåset i sittdynans klädsel.
- Sätt tillbaka sittdynans klädsel och montera sisten i omvänd ordning.

Relevanta artikelnummer

Information om alla sittdynor finns på sidan 15 i servicehandboken

Verktyg som krävs

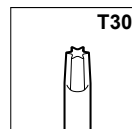

AU
Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood
NSW 2148
Australia
T: +61 (2) 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

BE
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +32 (0)78 150 159
E: customerservice@sunrisemedical.be
www.SunriseMedical.be

CH
Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
T: +41 (0)31 958 3838
E: info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

DE / AT
Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0) 7253/980-0
E: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

DK
Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
T: +45 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

ES / PT
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
T: +34 (0) 902142434
E: marketing@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es

FR
Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
T: + 33 (0) 2 47 55 44 00
E: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

IT
Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
T: +39 0523 573111
E: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

NO
Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

PL
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
T: + 48 42 275 83 38
E: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

SE
Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

UK
Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
United Kingdom
T: +44 (0) 845 605 66 88
E: enquiries@sunmed.co.uk
www.SunriseMedical.co.uk

Dealer / distributor:

Serial number:



MD_Sedeo_seat_cushion_cover_EU_EN_NO_SE_RevC_2016_11_25

