


Backrest cushion cover
Ryggputetrekk
Ryggdynans klädsel

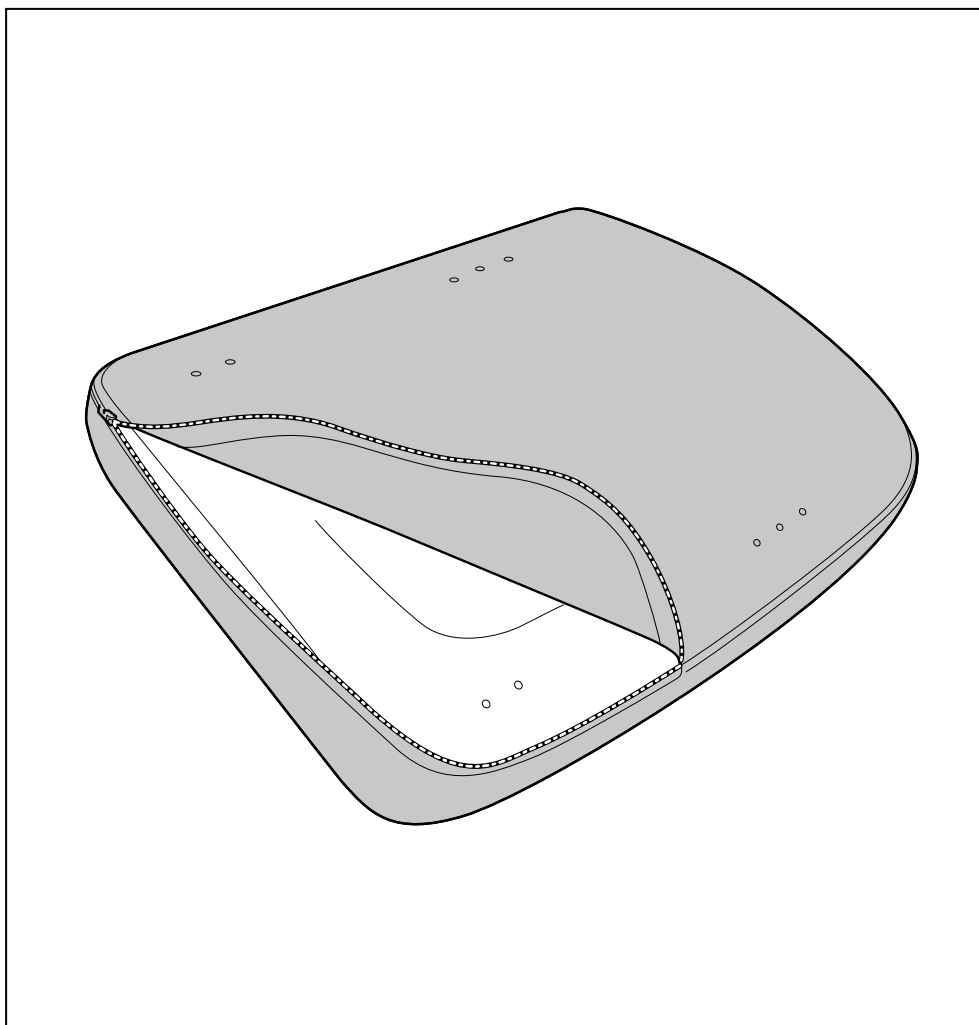

Sedeo Pro+




Backrest cushion cover

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING

EN
NO
SV

SEDEO

9010201C

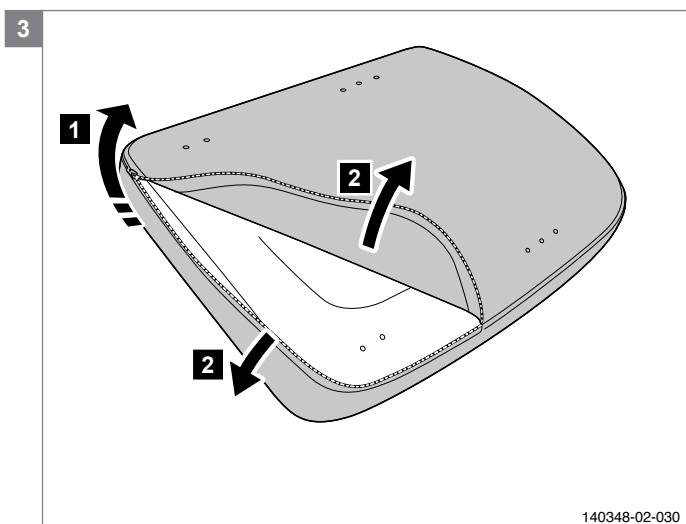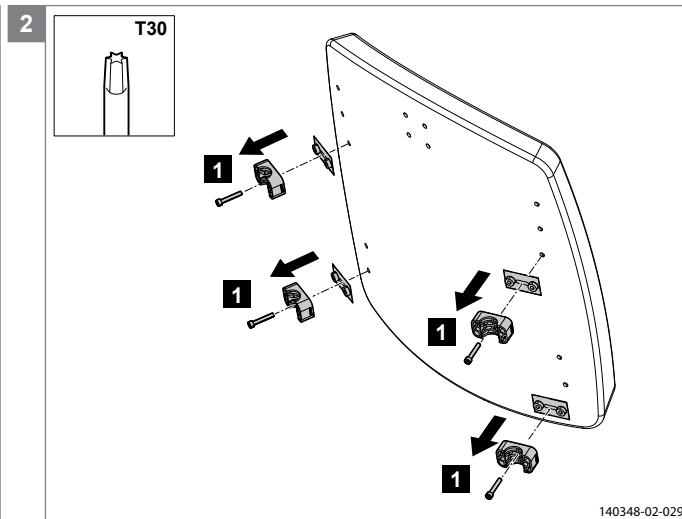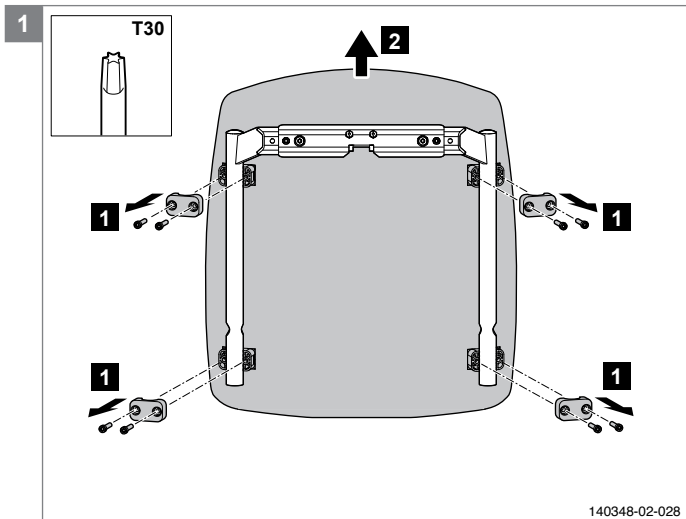

Replacing the backrest cushion cover

Preparation

Note! Switch off the wheelchair via remote control.

Instructions


Note! Suitable work area required!

- Unscrew the bolts (8x) from the mounting brackets, which attach the backrest to the frame.
- Remove the mounting brackets (4x).
- Pull the backseat upwards to remove it from the chair.
- Unscrew the bolts (4x) from the counterparts of the mounting brackets.
- Remove the counterparts of the mounting brackets from the backrest.
- Unzip the backrest cushion cover.
- Replace the backseat cushion cover and mount the backrest in reversed order.

Relevant article numbers

All backrest cushions, see service manual page 24

Tools used

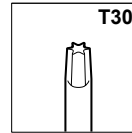

Skifte ryggputetrekk

Forberedelser

Merk! Slå av rullestolen via styreboksen.

Anvisninger


Merk! Bruk et egnet arbeidsområde!

- Skru løs skruene (8 stk.) fra festebrakettene som fester ryggen til rammen.
- Fjern klemmene (4x).
- Trekk ryggen oppover for å løsne den fra stolen.
- Skru løs skruene (4 stk.) fra motpartene til klemmene.
- Fjern motpartene til klemmene fra ryggstøtten.
- Åpne glidelåsen på ryggtrekket.
- Skift ryggtrekket og monter ryggstøtten i motsatt rekkefølge.

Relevante artikkelnumre

Alle ryggputer, se side 24 i servicemanualen

Verktøy som brukes

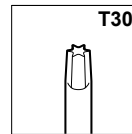

Byte av ryggdynans klädsel

Förberedelser

Obs! Stäng av manöverboxens av- och påknapp

Anvisningar


Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Skruva loss bultarna (8x) från fästkonsolerna, som fäster ryggstödet vid ramen.
- Avlägsna fästkonsolerna (4x).
- Dra ryggstödet uppåt för att avlägsna det från stolen.
- Skruva loss bultarna (4x) från fästkonsolernas motstycken.
- Avlägsna fästkonsolernas motstycken från ryggstödet.
- Öppna blixtlåset i ryggdynans klädsel.
- Sätt tillbaka ryggdynans klädsel och montera ryggstödet i omvänd ordning.

Relevanta artikelnummer

Information om alla ryggdynor finns på sidan 24 i servicehandboken

Verktyg som krävs

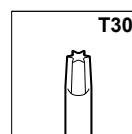

AU
Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood
NSW 2148
Australia
T: +61 (2) 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

BE
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +32 (0)78 150 159
E: customerservice@sunrisemedical.be
www.SunriseMedical.be

CH
Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
T: +41 (0)31 958 3838
E: info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

DE / AT
Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0) 7253/980-0
E: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

DK
Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
T: +45 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

ES / PT
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
T: +34 (0) 902142434
E: marketing@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es

FR
Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
T: + 33 (0) 2 47 55 44 00
E: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

IT
Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
T: +39 0523 573111
E: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

NO
Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

PL
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
T: + 48 42 275 83 38
E: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

SE
Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

UK
Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
United Kingdom
T: +44 (0) 845 605 66 88
E: enquiries@sunmed.co.uk
www.SunriseMedical.co.uk

Dealer / distributor:

Serial number:



MD_Sedeo_backrest_cushion_cover_EU_EN_NO_SE_RevC_2016_11_25

