


Thoracic supports  
Sidestøter  
Bröstkorgsstöden

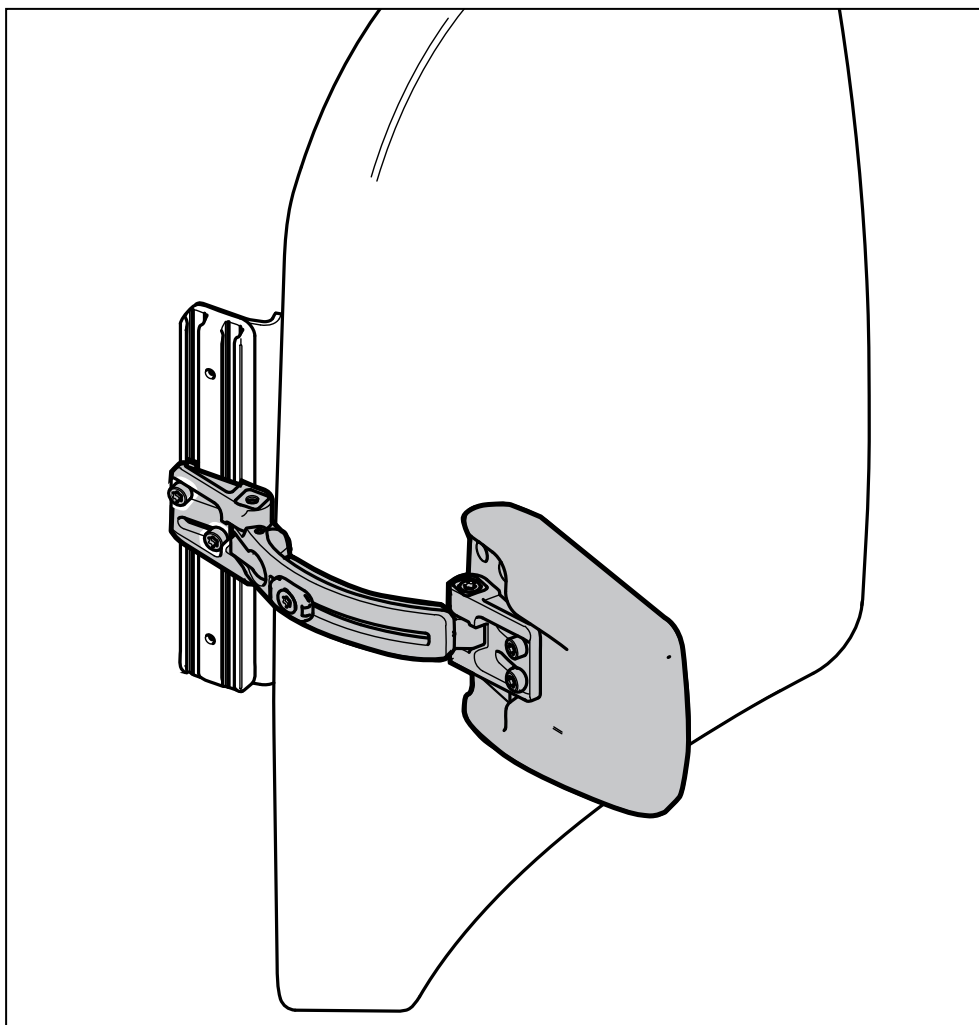

# Sedeo Pro+

Thoracic supports

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MONTERINGSANVISNING  
MONTERINGSANVISNING

EN  
NO  
SV

# SEDEO

9010202C

## Mounting the thoracic supports

EN

### Preparation

**Note!** Switch off the wheelchair via remote control.

### Instructions

**Note!** Suitable work area required!

- Follow the illustrated instructions for mounting the thoracic supports.
- Rebuild afterwards the wheelchair in reversed order.


### Notice

Some parts need to be replaced; the replacement is indicated by a  symbol.

### Relevant article numbers

1016905 Thoracic support mounting, right  
1016906 Thoracic support mounting, left  
1016907 Thoracic support mounting, set  
1016904 Thoracic support complete, set  
1010980 Thoracic support cushion PU, small, right = left

### Tools used

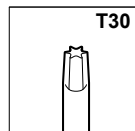

## Montere sidestøtter

NO

### Forberedelser

**Merk!** Slå av rullestolen via styreboksen

### Anvisninger

**Merk!** Bruk et egnet arbeidsområde!

- Følg de illustrerte anvisningene for å montere korsryggstøttene.
- Sett sammen rullestolen igjen i motsatt rekkefølge.


### Merk!

Enkelte deler må skiftes. Utskiftingen er indikert med symbolet .

### Relevante artikkelnumre

1016905 Feste for sidestøtte, høyre  
1016906 Feste for sidestøtte, venstre  
1016907 Feste for sidestøtte, sett  
1016904 Komplette sidestøtte, sett  
1010980 Sidestøttepute, høyre = venstre

### Verktøy som brukes

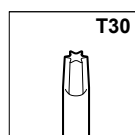

## Montering av brystkorgsstøden

SV

### Förberedelser

**Obs!** Stäng av manöverboxens av- och påknapp

### Anvisningar

**Obs!** Lämpligt arbetsområde krävs!

- Följ de illustrerade anvisningarna för montering av bröstkorgsstöden.
- Montera sedan ihop rullstolen i omvänd ordning.


### Anmärkning




Vissa delar behöver bytas ut. Utbytesdelar indikeras med symbolen .

### Relevanta artikelnummer

1016905 Thoracic support mounting, right  
1016906 Thoracic support mounting, left  
1016907 Thoracic support mounting, set  
1016904 Thoracic support complete, set  
1010980 Thoracic support cushion PU, small, right = left

### Verktyg som krävs

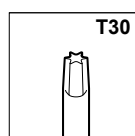

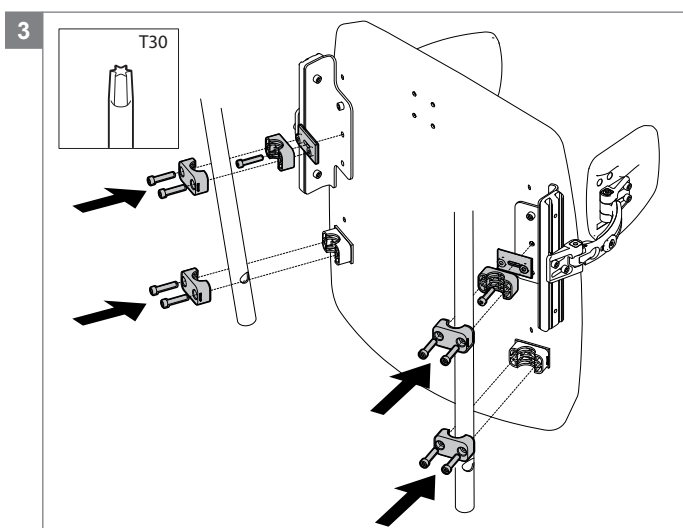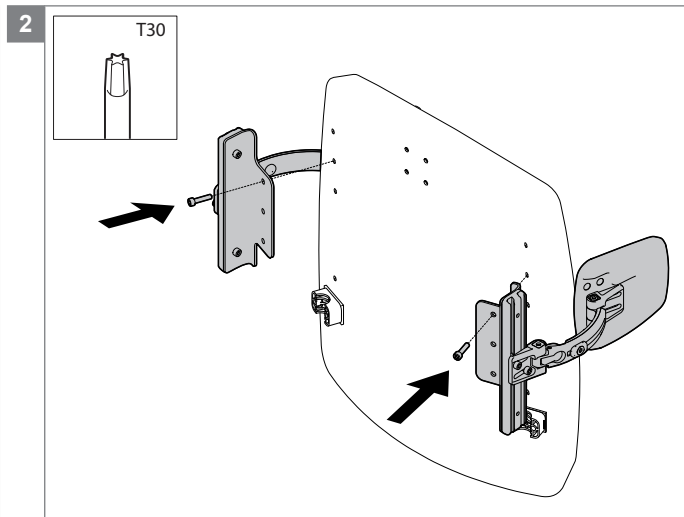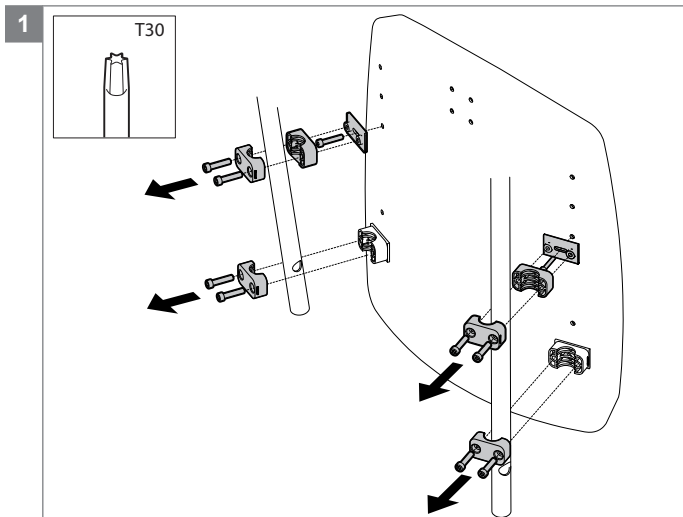

AU  
Sunrise Medical Pty. Ltd.  
6 Healey Circuit, Huntingwood  
NSW 2148  
Australia  
T: +61 (2) 9678 6600  
E: enquiries@sunrisemedical.com.au  
www.SunriseMedical.com.au

BE  
Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands  
T: +32 (0)78 150 159  
E: customerservice@sunrisemedical.be  
www.SunriseMedical.be

CH  
Sunrise Medical AG  
Lückhalde 14  
3074 Muri/Bern  
Schweiz/Suisse/Svizzera  
T: +41 (0)31 958 3838  
E: info@sunrisemedical.ch  
www.SunriseMedical.ch

DE / AT  
Sunrise Medical GmbH & Co. KG  
Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/Heidelberg  
Deutschland  
T: +49 (0) 7253/980-0  
E: kundenservice@sunrisemedical.de  
www.SunriseMedical.de

DK  
Sunrise Medical ApS  
Park Allé 289 G  
DK-2605 Brøndby  
T: +45 70 22 43 49  
Email: info@sunrisemedical.dk  
www.SunriseMedical.dk

ES / PT  
Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga – Vizcaya  
España  
T: +34 (0) 902142434  
E: marketing@sunrisemedical.es  
www.SunriseMedical.es

FR  
Sunrise Medical S.A.S  
ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Mickaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
T: + 33 (0) 2 47 55 44 00  
E: info@sunrisemedical.fr  
www.SunriseMedical.fr

IT  
Sunrise Medical S.r.l.  
Via Riva, 20 – Montale  
29122 Piacenza  
Italia  
T: +39 0523 573111  
E: info@sunrisemedical.it  
www.SunriseMedical.it



NL  
Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands  
T: +31 (0)492 593 888  
E: customerservice@sunrisemedical.nl  
www.SunriseMedical.nl  
www.SunriseMedical.eu (International)

NO  
Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 Vestby  
Norway  
T: +47 66963800  
E: post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no

PL  
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.  
ul. Elektronowa 6,  
94-103 Łódź  
Polska  
T: + 48 42 275 83 38  
E: pl@sunrisemedical.de  
www.Sunrise-Medical.pl

SE  
Sunrise Medical AB  
Box 9232  
400 95 Göteborg  
Sweden  
T: +46 (0)31 748 37 00  
E: post@sunrisemedical.se  
www.SunriseMedical.se

UK  
Sunrise Medical  
Thorns Road  
Brierley Hill  
West Midlands  
DY5 2LD  
United Kingdom  
T: +44 (0) 845 605 66 88  
E: enquiries@sunmed.co.uk  
www.SunriseMedical.co.uk

Dealer / distributor:

Serial number:



MD\_Sedeo\_thoracic\_supports\_EU\_EN\_NO\_SE\_RevC\_2016\_11\_25

