


Standard legrest
Standard benstøte
Standardbenstöd

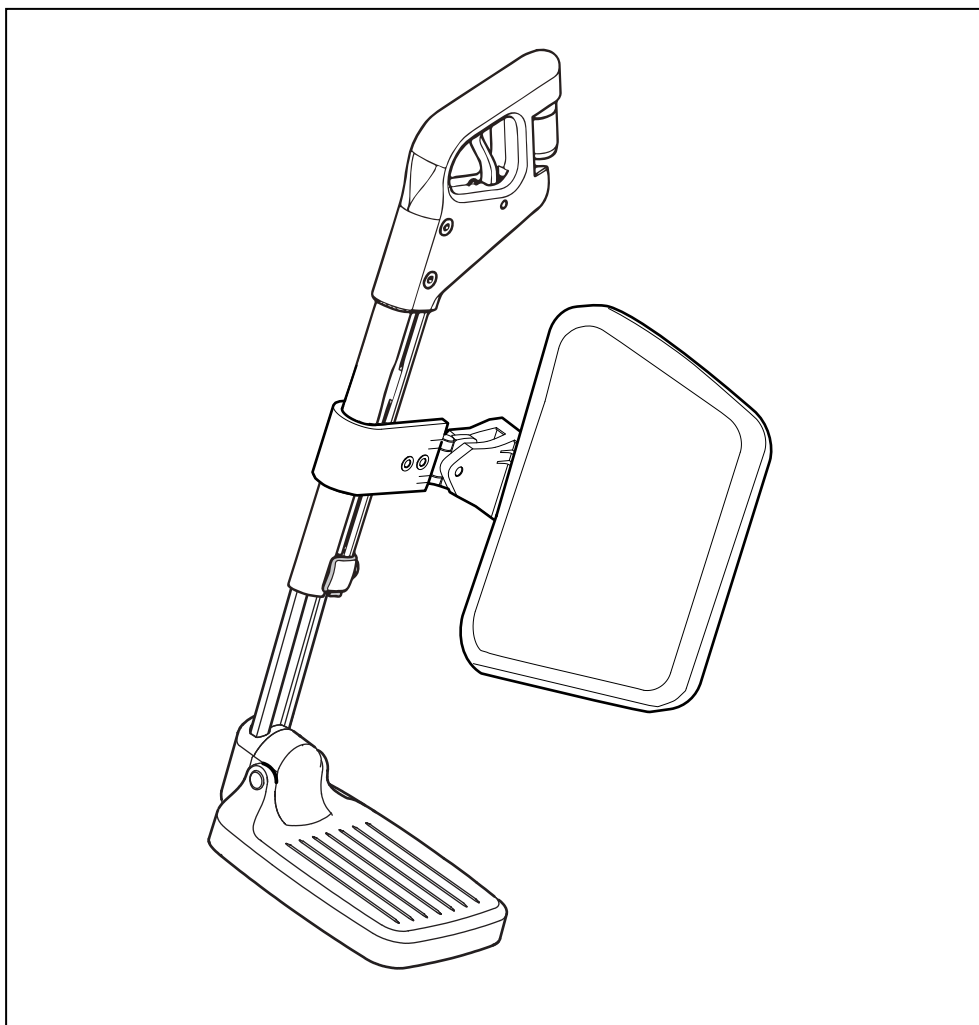

Sedeo Lite / Pro

Sedeo Pro+







Standard legrest

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING

EN
NO
SV

SEDEO

9010203C

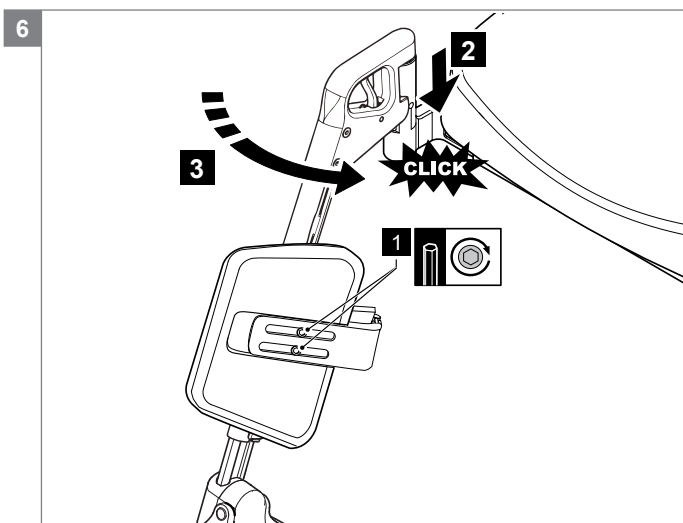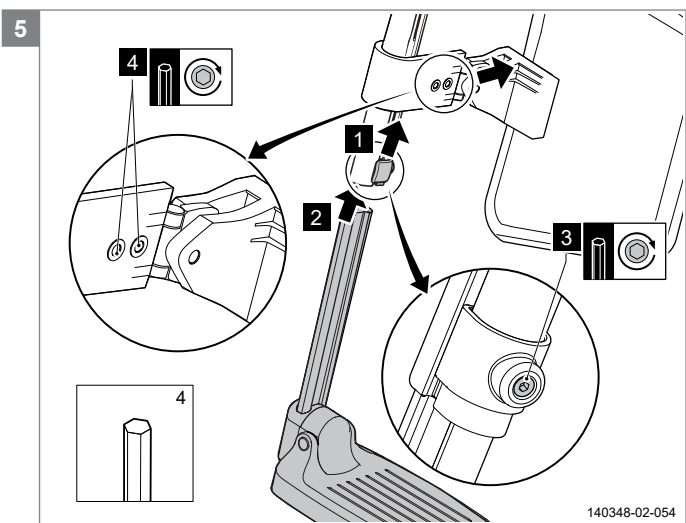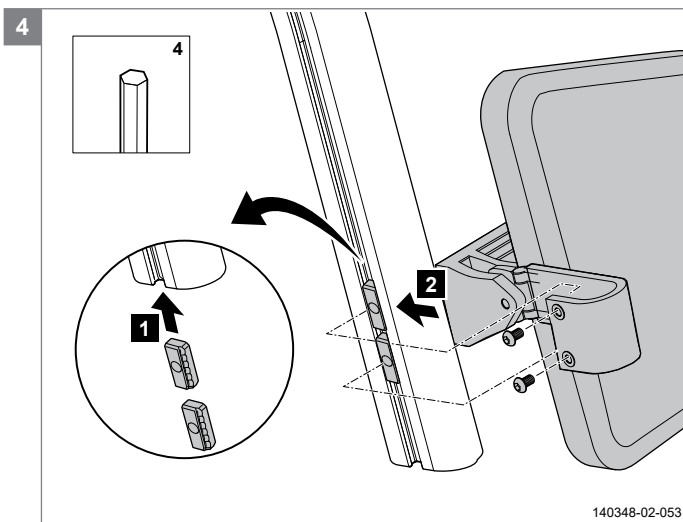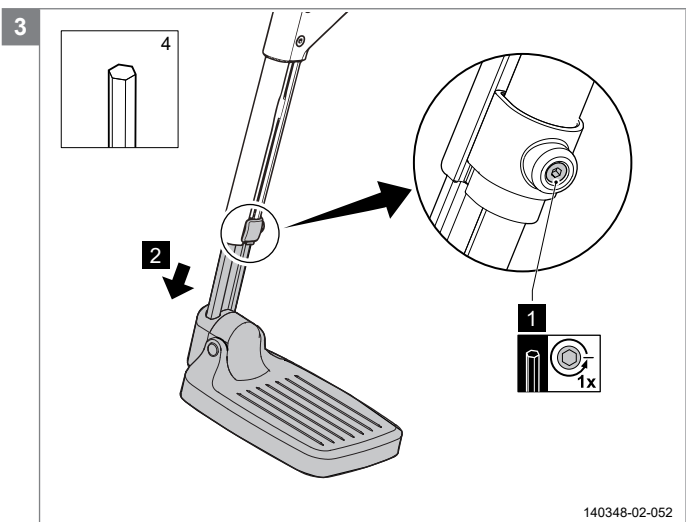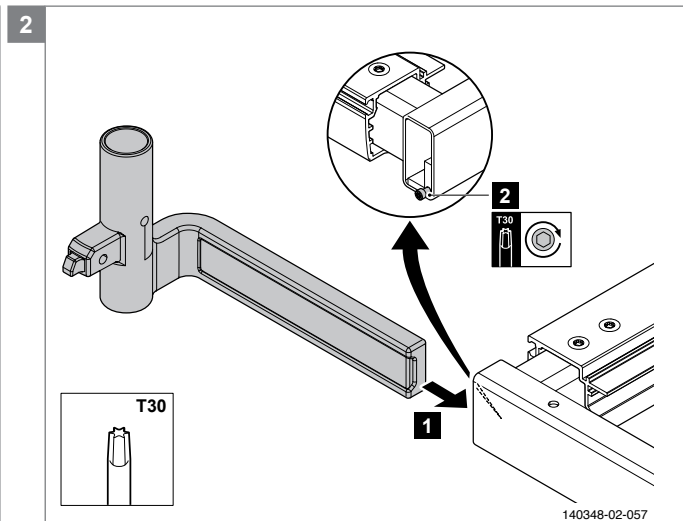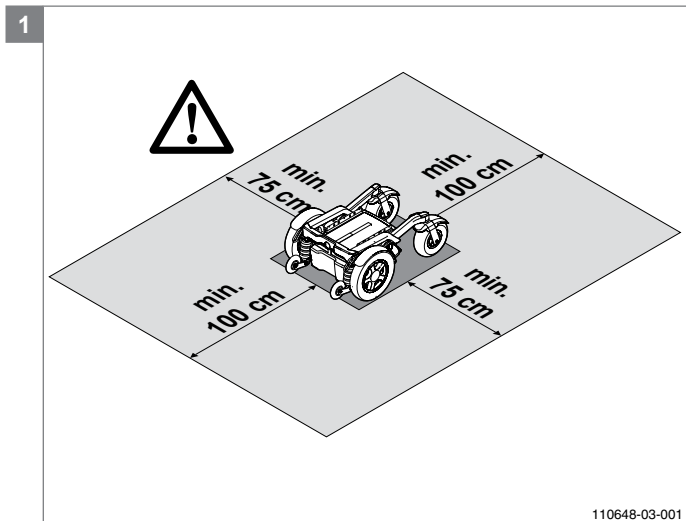

Mounting the standard legrest

Preparation

Note! Switch off the wheelchair via remote control.

Instructions

Note! Suitable work area required!

- Mount the legrest mounting bracket to the seat support frame.
- Release the footplate fixing screw and lower the footplate to remove it from the legrest.
- Position the clamp nuts in the legrest profile and attach the calf plate to the clamp nuts.
- Adjust the calf plate height to the desired position, tighten the clamp nuts.
- Reposition the footplate and tighten the fixing screw. Adjust the calf plate depth to the desired position.
- Adjust the calf plate inwards/outwards to the desired position. Lower the legrest into the tube of the mounting bracket, holding the footplate outwards. Swing the legrest inwards to lock it in position.


Note! Make sure the locking pin falls in place (with a 'click') and secures the legrest from becoming detached.

Note! If locking fails: Adjust the screw from the locking mechanism.

Relevant article numbers

1018285 Standard legrest RHS SW 42-46
1018288 Standard legrest LHS SW 42-46
1018286 Standard legrest RHS SW 50
1018289 Standard legrest LHS SW 50
1018287 Standard legrest RHS SW 54
1018290 Standard legrest LHS SW 54

Tools used

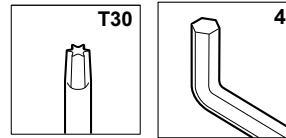

Montere standard benstøtte

Forberedelser

Merk! Slå av rullestolen via styreboksen.

Anvisninger

Merk! Bruk et egnet arbeidsområde!

- Monter festebraketten for benstøtte til seterammen.
- Løsne festeskruen for fotplaten og senk fotplaten for å fjerne den fra benstøtten.
- Plasser klemmemutteren i benstøtteprofilen og fest ankelplaten til klemmemutteren.
- Juster ankelplaten høyden til ønsket posisjon, og trekk til klemmemutteren
- Sett på fotplaten igjen, og trekk til festeskruen. Juster ankelplaten dybde til ønsket posisjon.
- Juster ankelplaten innover / utover til ønsket posisjon. Senk benstøtten ned i røret på monteringsbraketten mens du holder fotplaten utover. Sving benstøtten innover, slik at den går i lås.


Merk! Kontroller at låsepinnen faller på plass (med et "klikk") og sikrer benstøtten slik at den ikke løsner.

Merk! Hvis låsing ikke lykkes: Juster skruen for låsemekanismen.

Relevante artikkelnumre

1018285 Standard benstøt RHS SW 42-46
1018288 Standard benstøt LHS SW 42-46
1018286 Standard benstøt RHS SW 50
1018289 Standard benstøt LHS SW 50
1018287 Standard benstøt RHS SW 54
1018290 Standard benstøt LHS SW 54

Verktøy som brukes

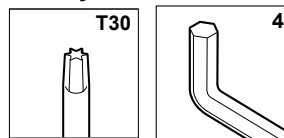

Montering av standardbenstödet

Förberedelser

Obs! Stäng av manöverboxens av- och påknapp

Anvisningar

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Montera benstödet fästkonsol på sätets stöddram.
- Lossa fotstödet fästskruv och sänk ned fotstödet för att avlägsna det från benstödet.
- Placera låsmuttern i benstödsprofilen och fäst vadstödet vid låsmuttern.
- Justera vadplattan till önskat läge och dra åt låsmuttern.
- Sätt tillbaka fotstödet och dra åt fästskruven.
- Justera vadplattans djup till önskad position.
- Justera vadplattan inåt/utåt till önskad position. Sänk ned fotstödet i fästkonsolens rör med fotstödet vänt utåt. Vrid fotstödet inåt för att låsa det i fäst läge.



Obs! Se till att låsstiftet griper in (med ett "klick") och låser benstödet så att det sitter fast.

Obs! Om det inte går att låsa: justera skruven för låsmekanismen.

Relevanta artikelnummer

1018304	Standard legrest set with calfstrap SW 42-46
1018285	Standard legrest RHS SW 42-46
1018288	Standard legrest LHS SW 42-46
1018286	Standard legrest RHS SW 50
1018289	Standard legrest LHS SW 50
1018287	Standard legrest RHS SW 54
1018290	Standard legrest LHS SW 54

Verktyg som krävs

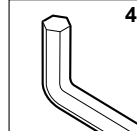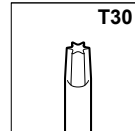

AU
Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood
NSW 2148
Australia
T: +61 (2) 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

BE
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +32 (0)78 150 159
E: customerservice@sunrisemedical.be
www.SunriseMedical.be

CH
Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
T: +41 (0)31 958 3838
E: info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

DE / AT
Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0) 7253/980-0
E: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

DK
Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
T: +45 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

ES / PT
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
T: +34 (0) 902142434
E: marketing@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es

FR
Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
T: + 33 (0) 2 47 55 44 00
E: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

IT
Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
T: +39 0523 573111
E: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

NO
Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

PL
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
T: + 48 42 275 83 38
E: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

SE
Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

UK
Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
United Kingdom
T: +44 (0) 845 605 66 88
E: enquiries@sunmed.co.uk
www.SunriseMedical.co.uk

Dealer / distributor:

Serial number:



MD_Sedeo_standard_legrest_EU_EN_NO_SE_RevC_2016_11_25

