


Manually elevating legrest
Manuelt vinkelstillbar benstøte
Manuellt höjbart benstöd

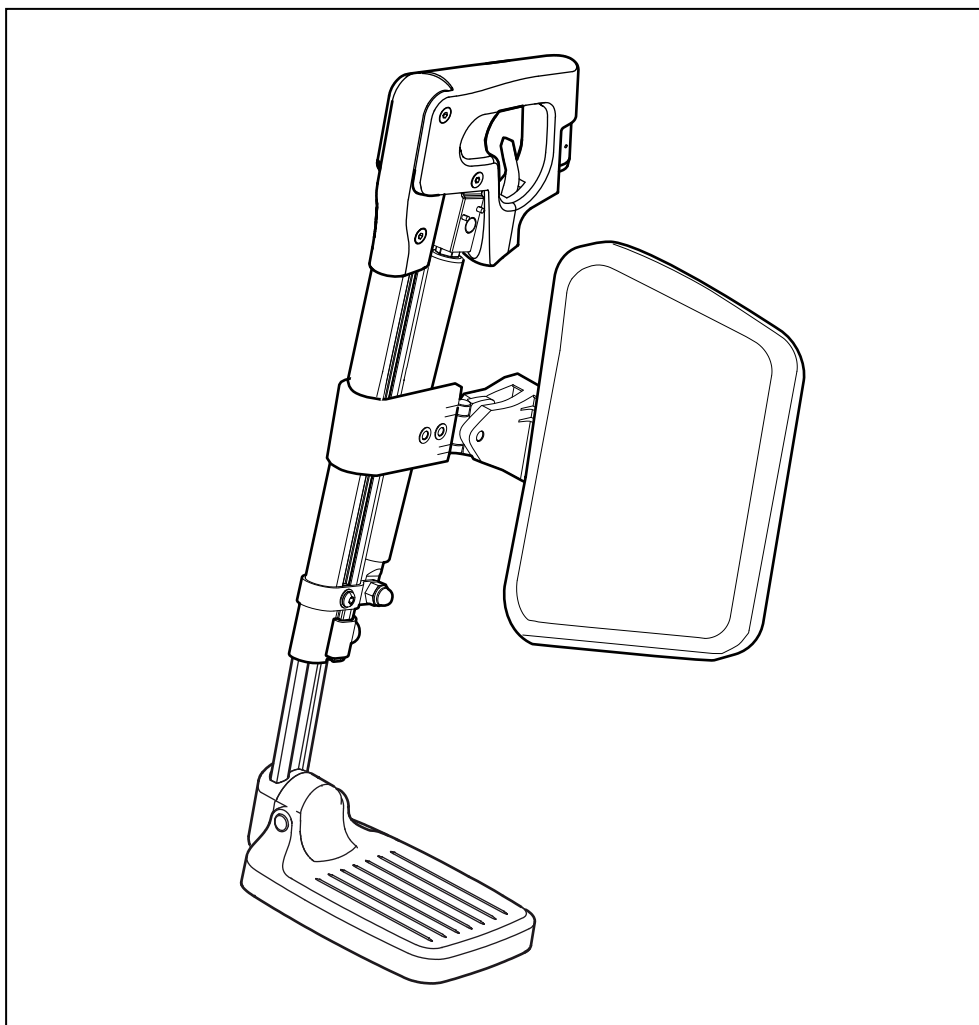

Sedeo Lite / Pro

Sedeo Pro+






Manually elevating legrest




ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING

EN
NO
SV

SEDEO

9010204C

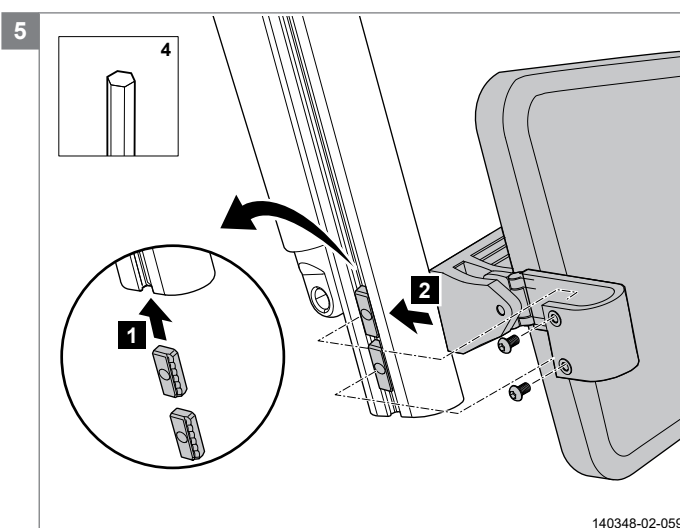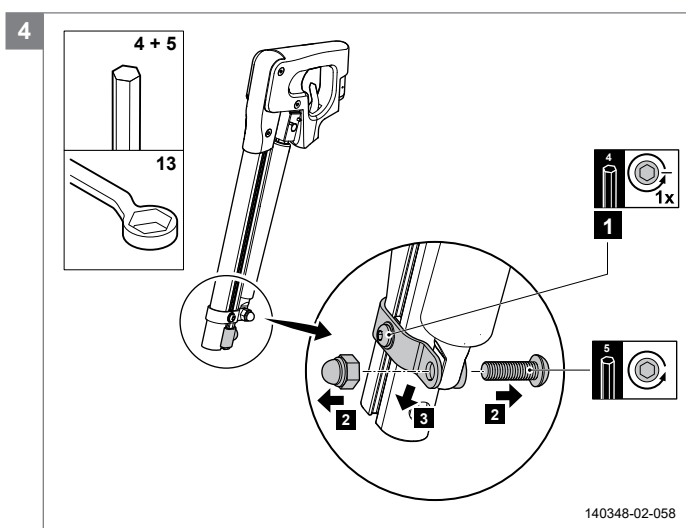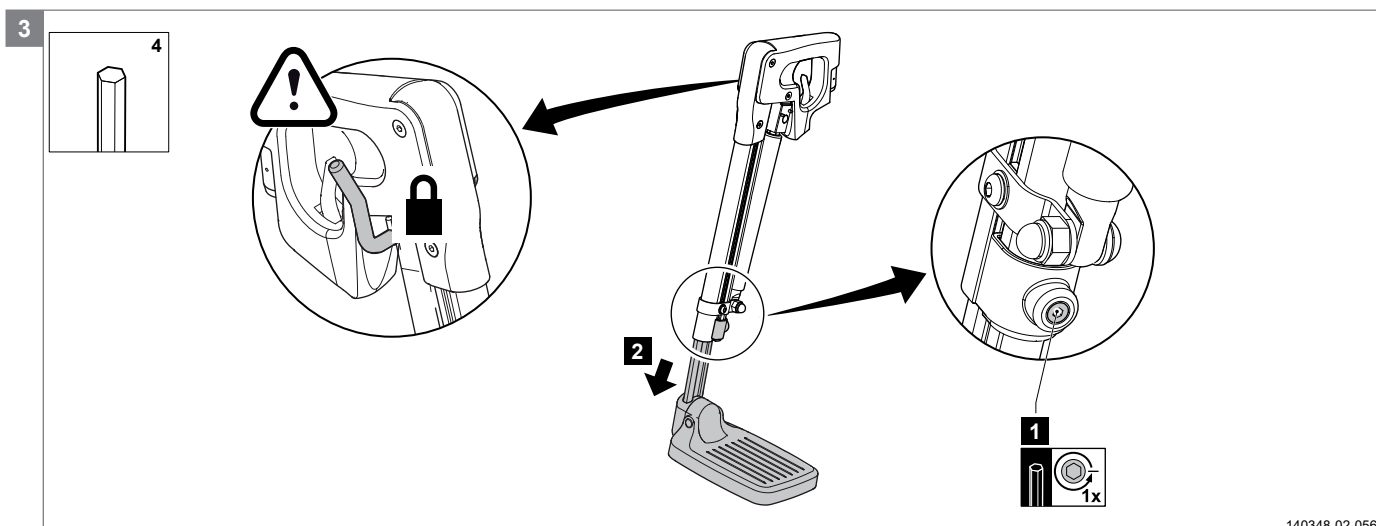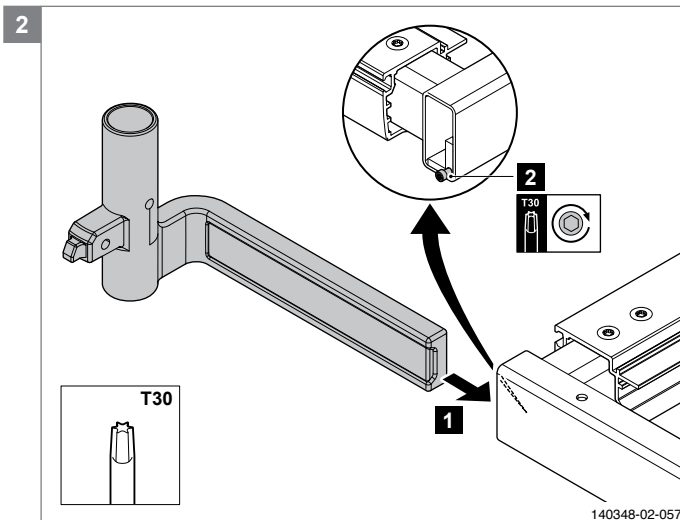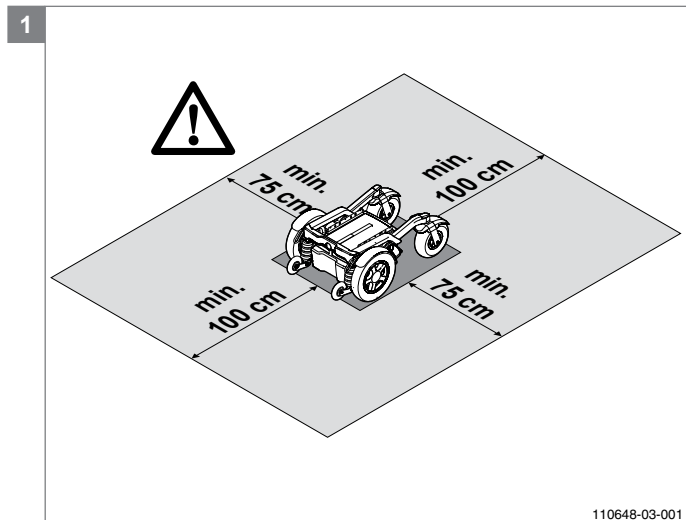

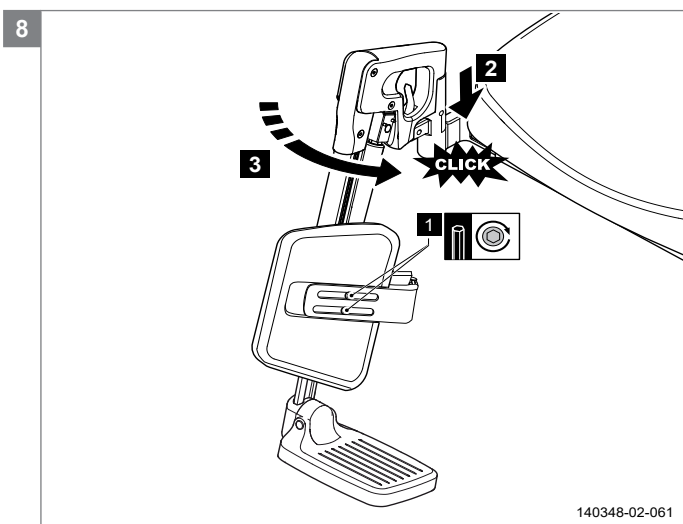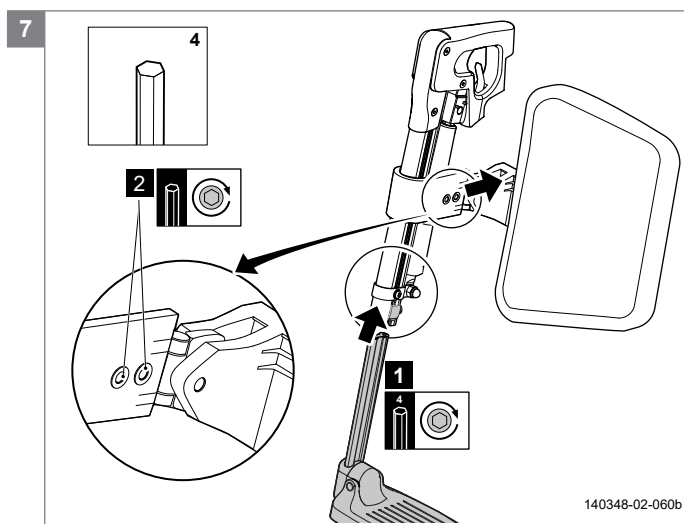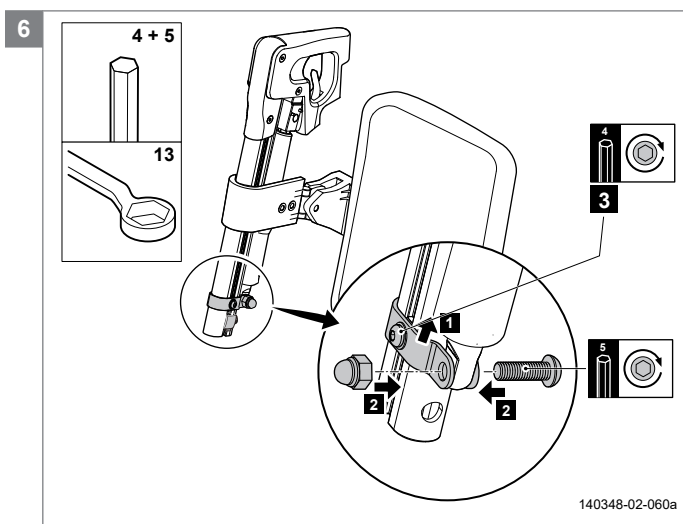

Mounting the manually elevating legrest

Preparation

Note! Switch off the wheelchair via remote control.

Instructions

Note! Suitable work area required!

- Mount the legrest mounting bracket to the seat support frame.
- Secure the legrest in its upper position.
- Release the footplate fixing screw and lower the footplate to remove it from the legrest.
- Unscrew the lower clamp of the damper unit.
- Position the clamp nuts in the legrest profile and attach the calf plate to the clamp nut.
- Adjust the calf plate height to the desired position, tighten the clamp nuts.
- Remount the lower clamp of the damper unit.
- Reposition the footplate and tighten the fixing screw. Adjust the calf plate depth to the desired position.
- Adjust the calf plate inwards/outwards to the desired position. Lower the legrest into the tube of the mounting bracket, holding the footplate outwards. Swing the legrest inwards to lock it in position.

Note! Make sure the locking pin falls in place (with a 'click') and secures the legrest from becoming detached.

Note! If locking fails: Adjust the screw from the locking mechanism.

Relevant article numbers

1018305 Manually elevating legrest set with calfplates SW 42-46

1018291 Manually elevating legrest RHS SW 42-46 cm

1018294 Manually elevating legrest LHS SW 42-46 cm




1018293 Manually elevating legrest RHS SW 54 cm

1018295 Manually elevating legrest LHS SW 50 cm

1018292 Manually elevating legrest RHS SW 50 cm

1018296 Manually elevating legrest LHS SW 54 cm

Tools used

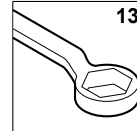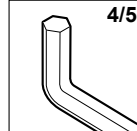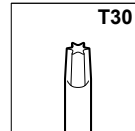

Montere manuelt vinkelstillbar benstøtte

Forberedelser

Merk! Slå av rullestolen via styreboksen.

Anvisninger

Merk! Bruk et egnet arbeidsområde!

- Monter festebraketten for benstøtte til seterammen.
- Lås benstøtten i øvre posisjon.
- Løsne festeskruen for fotplaten og senk fotplaten for å fjerne den fra benstøtten.
- Skru løs den nedre klemmen på demperen.
- Plasser klemmemutteren i benstøtteprofilen og fest ankelplaten til klemmemutteren.
- Juster ankelplaten høyden til ønsket posisjon, og stram klemmemutteren.
- Monter den nedre klemmen på demperen igjen.
- Sett på fotplaten igjen, og trekk til festeskruen. Juster ankelplaten dybde til ønsket posisjon.
- Juster ankelplaten innover / utover til ønsket posisjon. Senk benstøtten ned i røret på monteringsbraketten mens du holder fotplaten utover. Sving benstøtten innover, slik at den går i lås.

Merk! Kontroller at låsepinnen faller på plass (med et "klikk") og sikrer benstøtten slik at den ikke løsner.

Merk! Hvis låsing ikke lykkes: Juster skruen for låsemekanismen.

Relevante artikkelnumre

1018305 Manuelt vinkelstillbar benstøtte sett med ankelplaten SW 42-46

1018291 Manuelt vinkelstillbar benstøt RHS SW 42-46 cm

1018294 Manuelt vinkelstillbar benstøt LHS SW 42-46 cm




1018293 Manuelt vinkelstillbar benstøt RHS SW 54 cm

1018295 Manuelt vinkelstillbar benstøt LHS SW 50 cm

1018292 Manuelt vinkelstillbar benstøt RHS SW 50 cm

1018296 Manuelt vinkelstillbar benstøt LHS SW 54 cm

Verktøy som brukes

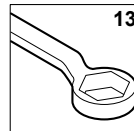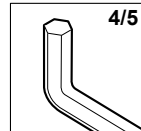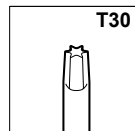

Montering av det manuellt höjbara benstödet

Förberedelser

Obs! Stäng av manöverboxens av- och påknapp

Anvisningar

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Montera benstödet fästkonsol på sätets stödram.
- Fäst benstödet i det översta läget.
- Lossa fotstödet fästskruv och sänk ned fotstödet för att avlägsna det från benstödet.
- Skruva loss den nedre klämman på dämparen.
- Placera låsmuttern i benstödsprofilen och fäst vadvstödet vid låsmuttern.
- Justera vadvstödet till önskat höjd läge och dra åt låsmuttern.
- Sätt tillbaka den nedre klämman på dämparen.
- Sätt tillbaka fotstödet och dra åt fästskruven. Justera vadvplattans djup till önskad position.
- Justera vadvplattan inåt/utåt till önskad position. Sänk ned fotstödet i fästkonsolens rör med fotstödet vänt utåt. Vrid fotstödet inåt för att låsa det i fäst läge.




Obs! Se till att låsstiftet griper in (med ett "klick") och låser benstödet så att det sitter fast.

Obs! Om det inte går att låsa: justera skruven för låsmekanismen.

Relevanta artikelnummer

- 1018305 Manually elevating legrest set with calfplates SW 42-46
- 1018291 Manually elevating legrest RHS SW 42-46 cm
- 1018294 Manually elevating legrest LHS SW 42-46 cm
- 1018293 Manually elevating legrest RHS SW 54 cm
- 1018295 Manually elevating legrest LHS SW 50 cm
- 1018292 Manually elevating legrest RHS SW 50 cm
- 1018296 Manually elevating legrest LHS SW 54 cm

Verktyg som krävs

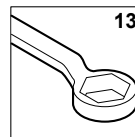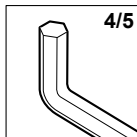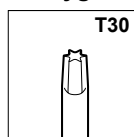

AU
Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood
NSW 2148
Australia
T: +61 (2) 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

BE
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +32 (0)78 150 159
E: customerservice@sunrisemedical.be
www.SunriseMedical.be

CH
Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
T: +41 (0)31 958 3838
E: info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

DE / AT
Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0) 7253/980-0
E: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

DK
Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
T: +45 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

ES / PT
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
T: +34 (0) 902142434
E: marketing@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es

FR
Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
T: + 33 (0) 2 47 55 44 00
E: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

IT
Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
T: +39 0523 573111
E: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

NO
Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

PL
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
T: + 48 42 275 83 38
E: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

SE
Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

UK
Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
United Kingdom
T: +44 (0) 845 605 66 88
E: enquiries@sunmed.co.uk
www.SunriseMedical.co.uk

Dealer / distributor:

Serial number:



MD_Sedeo_manually_elevating_legrest_EU_EN_NO_SE_RevC_2016_11_25

