


Standard / Swing-away controller bracket
Standard / Utsvingbar styreboksbrakett
Standard / Svängbart fäste till styrenheten

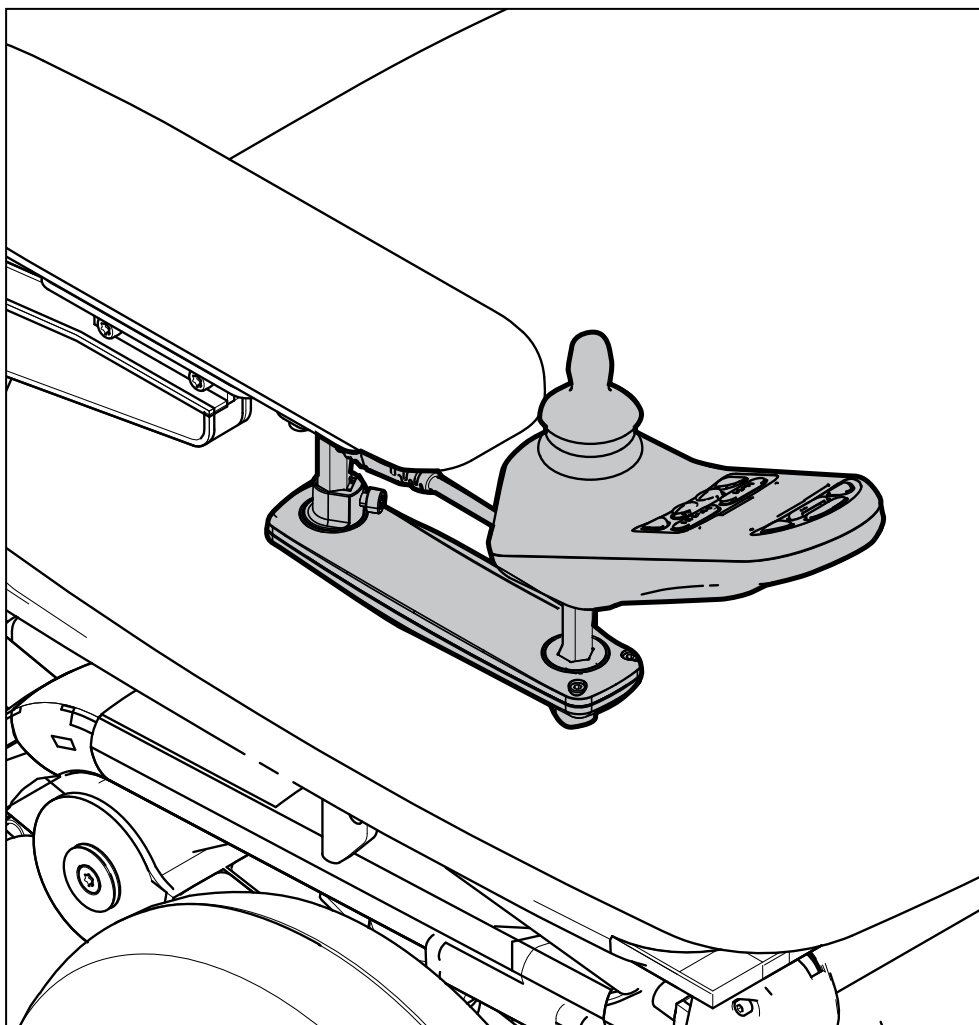

Sedeo Lite / Pro

Sedeo Pro+



Standard / Swing-away controller bracket

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING

EN
NO
SV

SEDEO

9010208C

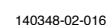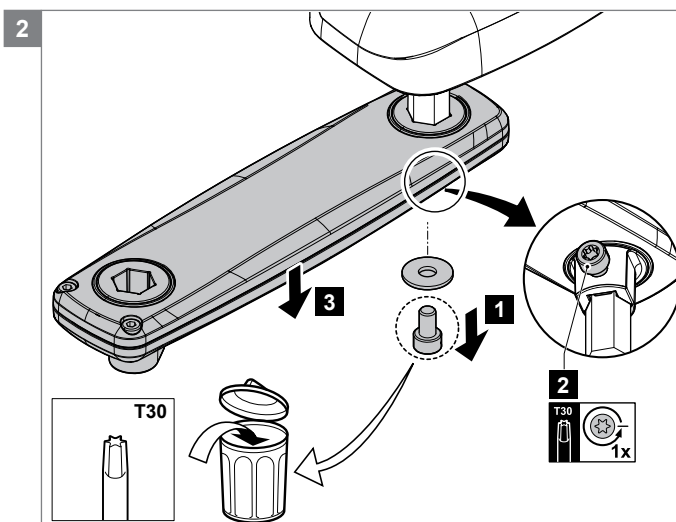

Mounting the standard or swing-away controller bracket

Preparation

Note! Switch off the wheelchair via remote control.

Instructions

Note! Suitable work area required!

Note! Notice the position of the hexagon at any bracket. The hexagon should point with an edge forward!

Note! Replace the bolt in step 6 by a new precoted bolt

Note! Check the cable laying after you have mounted the swing-away controller bracket, connected the controller and adjusted the height, width and depth of the armrest. The controller cable needs enough clearance to swing away the controller freely inwards and outwards.

Relevant article numbers


1010951 Swing-away remote holder

1010952 Standard remote holder

1011164 Swing-away remote holder complete

1011165 Standard remote holder complete

Tools used

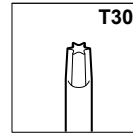

Montere standard eller utsvingbar styreboksbrakett

Forberedelser

Merk! Slå av rullestolen via styreboksen.

Anvisninger

Merk! Bruk et egnet arbeidsområde!

Merk! Merk deg posisjonen til sekskanten på alle brakettene. Sekskanten skal peke med en kant framover!

Merk! Bytt skruen i trinn 6 med en ny skrue som er forbelagt med låsemiddel.

Merk! Kontroller kabelføringen når du har montert den utsvingbare styreboksbraketten, koblet til styreboksen og justert høyden, bredden og dybden på armlenet. Kabelen til styreboksen trenger nok klaring til at styreboksen kan svinges fritt innover og utover.

Relevante artikkelnumre


1010951 Utsvingbar styreboksholder

1010952 Standard styreboksholder

1011164 Utsvingbar styreboksholder komplett

1011165 Standard styreboksholder komplett

Verktøy som brukes

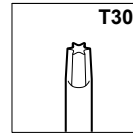

Montering av standardfäste eller svängbart fäste till styrenheten

Förberedelser

Obs! Stäng av manöverboxens av- och påknapp

Anvisningar

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

Obs! Observera sexkantens placering i alla fästen. Sexkanten ska ha en kant vänd framåt!

Obs! Byt ut bulten i steg 6 mot en ny förbehandlad bult.

Obs! Kontrollera kabeldragningen efter att du har monterat det svängbara fästet till styrenheten, anslutit styrenheten och justerat armstödet höjd, bredd och djup. Det måste finnas tillräckligt med utrymme för styrenhetskabeln så att styrenheten kan svängas fritt inåt och utåt.

Relevanta artikelnummer


1010951 Swing-away remote holder

1010952 Standard remote holder

1011164 Swing-away remote holder complete

1011165 Standard remote holder complete

Verktyg som krävs

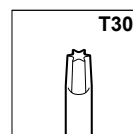

AU
Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood
NSW 2148
Australia
T: +61 (2) 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

BE
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +32 (0)78 150 159
E: customerservice@sunrisemedical.be
www.SunriseMedical.be

CH
Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
T: +41 (0)31 958 3838
E: info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

DE / AT
Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0) 7253/980-0
E: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

DK
Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
T: +45 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

ES / PT
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
T: +34 (0) 902142434
E: marketing@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es

FR
Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
T: + 33 (0) 2 47 55 44 00
E: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

IT
Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
T: +39 0523 573111
E: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

NO
Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

PL
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
T: + 48 42 275 83 38
E: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

SE
Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

UK
Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
United Kingdom
T: +44 (0) 845 605 66 88
E: enquiries@sunmed.co.uk
www.SunriseMedical.co.uk

Dealer / distributor:

Serial number:



MD_Sedeo_controller_bracket_EU_EN_NO_SE_RevC_2016_11_25

