


Lights on the seat frame
Lysene på seteramm
Ljusen på sätesramen

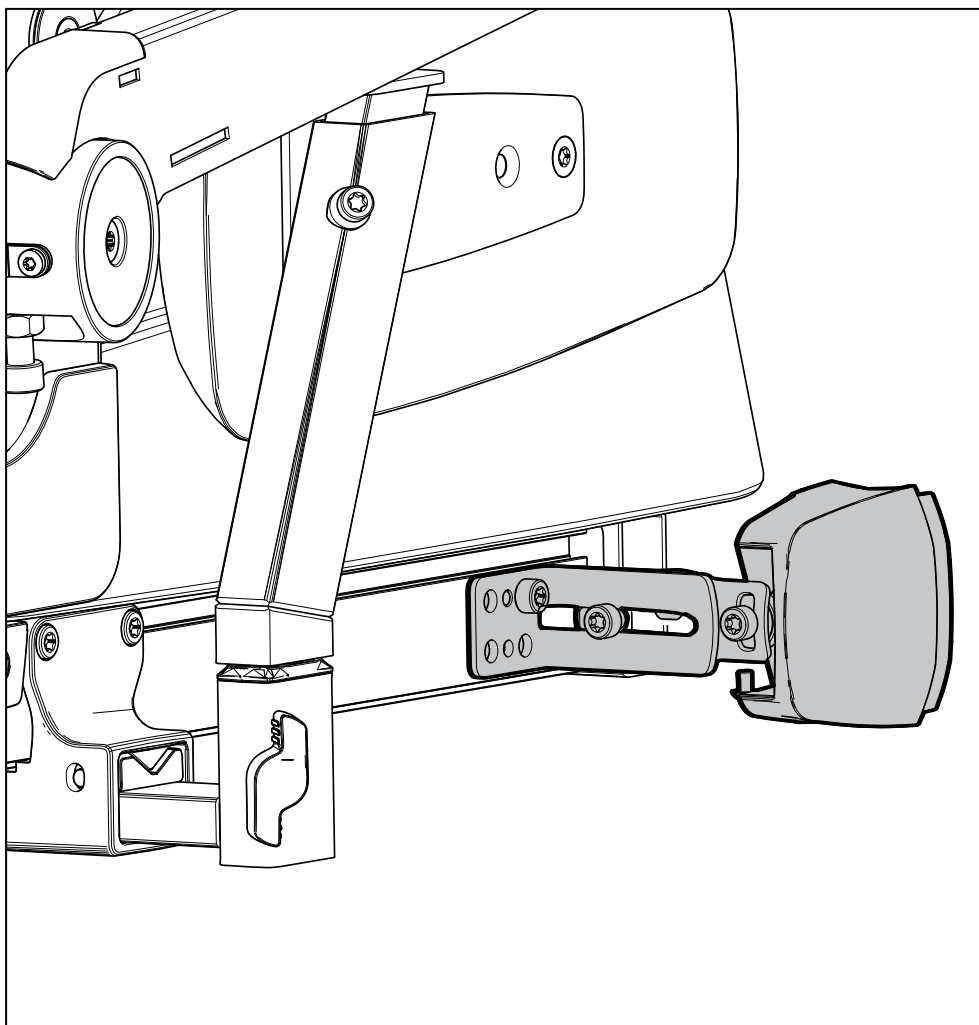

Sedeo Pro+

Lights on the seat frame

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING

EN
NO
SV

SEDEO

9010209C

Mounting the lights on the seat frame

EN

Preparation

Note! Switch off the wheelchair via remote control.

Instructions

Note! Suitable work area required!
Follow the illustrated instructions

Relevant article numbers

1016796 Lighting set R-net for mounting on seat frame


1016799 Front light module for mounting on seat frame, left = right

1016801 Rear light module incl mounting bracket, left = right

9006331 Lighting harness R-net lighting

9006332 Lighting harness R-net lighting and horn

Tools used

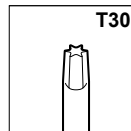

Montere lysene på seterammen

NO

Forberedelser

Merk! Slå av rullestolen via styreboksen.

Anvisninger

Merk! Bruk et egnet arbeidsområde!
Følg de illustrerte anvisningene

Relevante artikkelnumre

1016796 Lyssett, R-nett, for montering på seteramme


1016799 Fremre lysmodul for montering på seteramme,
venstre = høyre

1016801 Bakre lysmodul inkl festebraketten, venstre = høyre

9006331 Lysledninger, R-nett lyssystem

9006332 Lysledningssett, R-nett, lys og horn

Verktøy som brukes

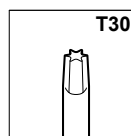

Montering av ljusen på sätesramen

SV

Förberedelser

Obs! Stäng av manöverboxens av- och påknapp

Anvisningar

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!
Följ de illustrerade anvisningarna

Relevanta artikelnummer

1016796 Lighting set R-net for mounting on seat frame


1016799 Front light module for mounting on seat frame, left = right



1016801 Rear light module incl mounting bracket, left = right

9006331 Lighting harness R-net lighting

9006332 Lighting harness R-net lighting and horn

Verktyg som krävs

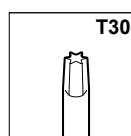

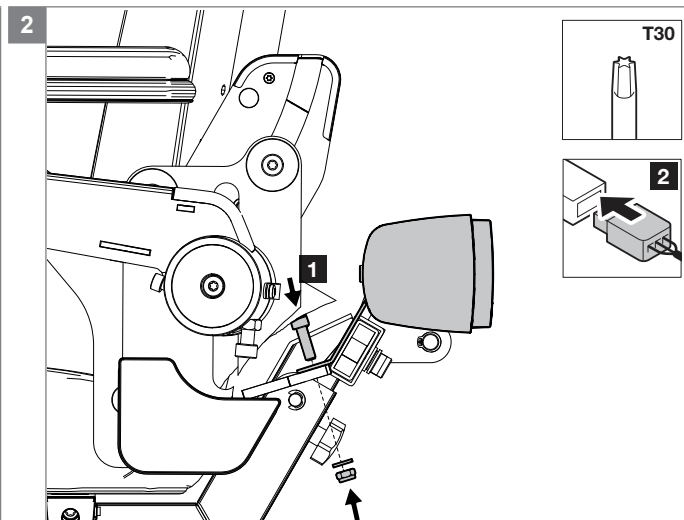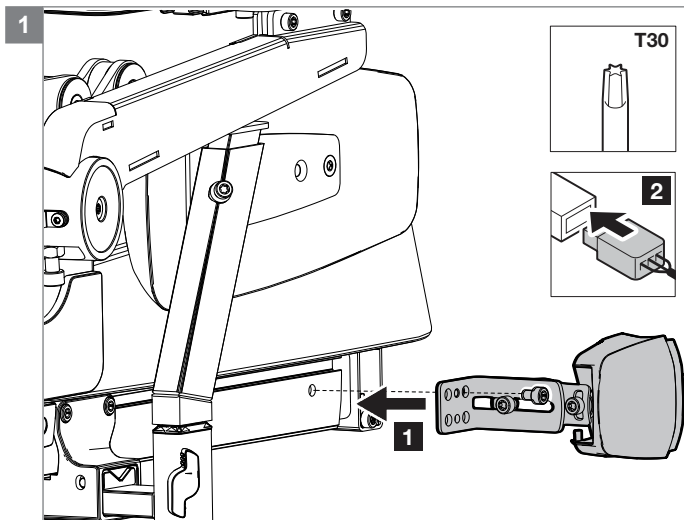

AU
Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood
NSW 2148
Australia
T: +61 (2) 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

BE
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +32 (0)78 150 159
E: customerservice@sunrisemedical.be
www.SunriseMedical.be

CH
Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
T: +41 (0)31 958 3838
E: info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

DE / AT
Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0) 7253/980-0
E: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

DK
Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
T: +45 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemobility.dk

ES / PT
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
T: +34 (0) 902142434
E: marketing@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es

FR
Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
T: + 33 (0) 2 47 55 44 00
E: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

IT
Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
T: +39 0523 573111
E: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

NO
Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

PL
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
T: + 48 42 275 83 38
E: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

SE
Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

UK
Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
United Kingdom
T: +44 (0) 845 605 66 88
E: enquiries@sunmed.co.uk
www.SunriseMedical.co.uk

Dealer / distributor:

Serial number:



MD_Sedeo_light_seat_frame_EU_EN_NO_SE_RevC_2016_11_25

