


Lights on the central legrest frame
Lysene på sentermonterte benstøtten ramme
Ljusen på den centrala benstödsramena

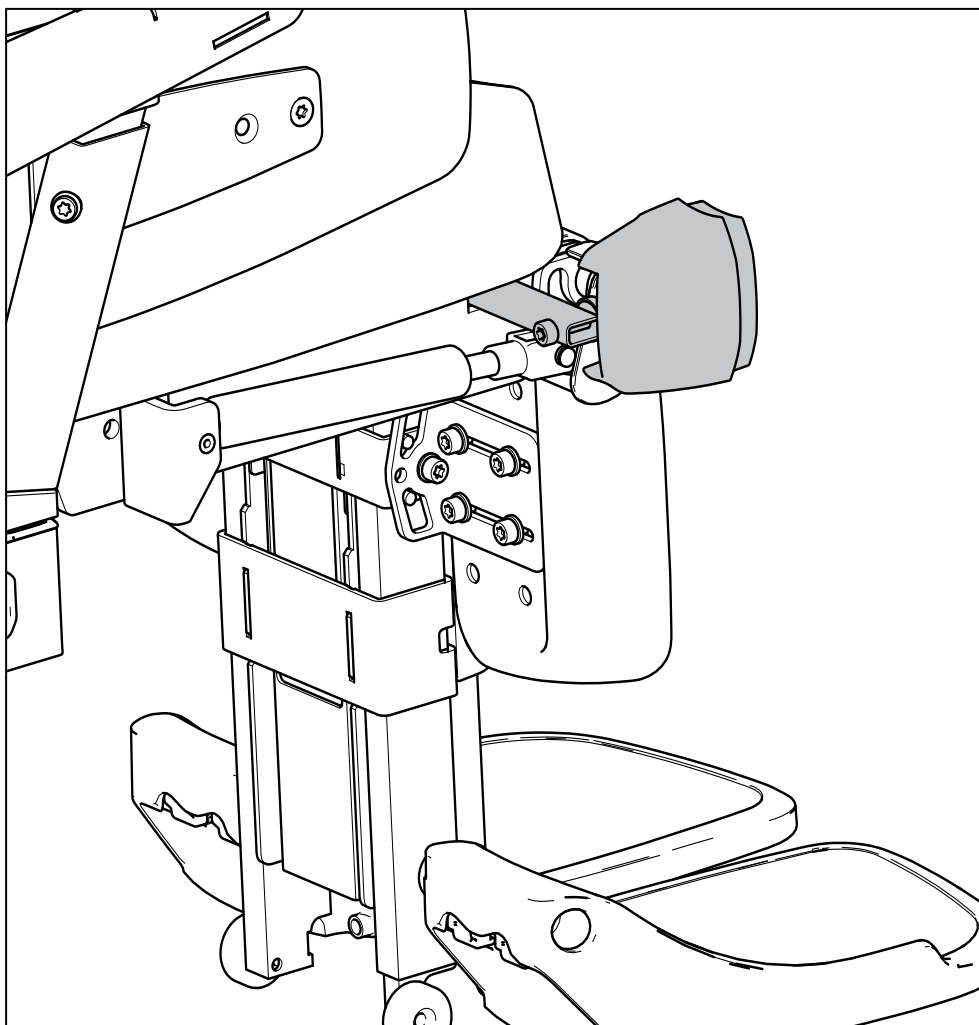

Sedeo Pro+



Lights on the central legrest frame

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING

EN
NO
SV

SEDEO

9010210C

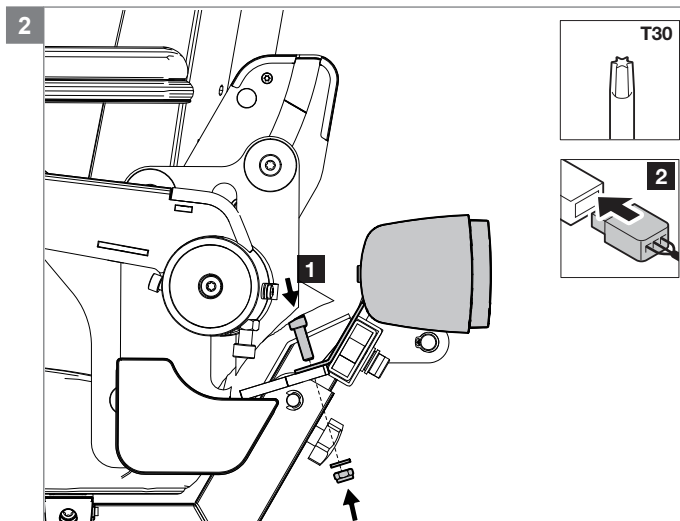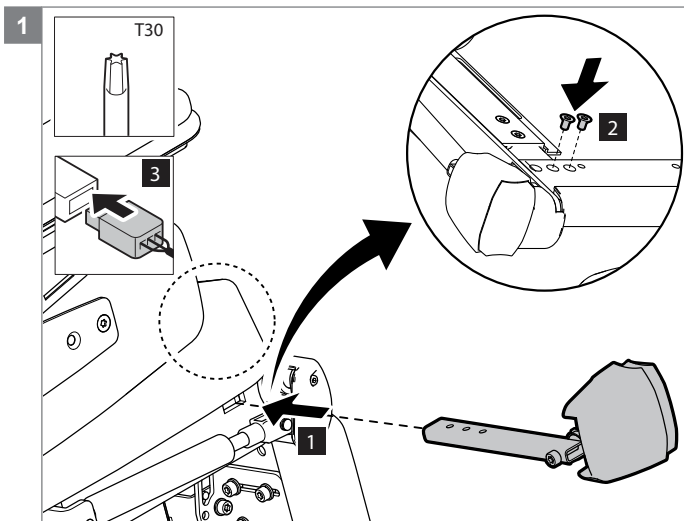

Mounting the lights on the central legrest frame

EN

Preparation

Note! Switch off the wheelchair via remote control.


Instructions

Note! Suitable work area required!
Follow the illustrated instructions

Relevant article numbers

1016795 Lighting set R-net for mounting with central electrical legrest
1016797 Front light module for mounting with central electrical legrest, left = right
1016801 Rear light module incl mounting bracket, left = right
9006331 Lighting harness R-net lighting
9006332 Lighting harness R-net lighting and horn

Tools used

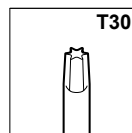

Montere lysene på den sentermonterte benstøtten

NO

Forberedelser

Merk! Slå av rullestolen via styreboksen


Anvisninger

Merk! Bruk et egnet arbeidsområde!
Følg de illustrerte anvisningene

Relevante artikkelnumre

1016795 Ledningssett R-nett for montering med sentermontert elektrisk benstøtte
1016797 Frontlyktmodul for montering med sentral elektrisk benstøtte, venstre = høyre
1016801 Bakre lysmodul inkl festebraketten, venstre = høyre
9006331 Lysledninger, R-nett lyssystem
9006332 Lysledningssett, R-nett, lys og horn

Verktøy som brukes

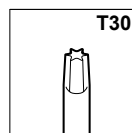

Montering av ljusen på den centrala benstödsramen

SV

Förberedelser

Obs! Stäng av manöverboxens av- och påknapp


Anvisningar

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!
Följ de illustrerade anvisningarna

Relevanta artikelnummer

1016795 Lighting set R-net for mounting with central electrical legrest
1016797 Front light module for mounting with central electrical legrest, left = right
1016801 Rear light module incl mounting bracket, left = right
9006331 Lighting harness R-net lighting
9006332 Lighting harness R-net lighting and horn

Verktyg som krävs

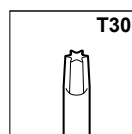

AU
Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood
NSW 2148
Australia
T: +61 (2) 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

BE
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +32 (0)78 150 159
E: customerservice@sunrisemedical.be
www.SunriseMedical.be

CH
Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
T: +41 (0)31 958 3838
E: info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

DE / AT
Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0) 7253/980-0
E: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

DK
Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
T: +45 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

ES / PT
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
T: +34 (0) 902142434
E: marketing@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es

FR
Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
T: + 33 (0) 2 47 55 44 00
E: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

IT
Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
T: +39 0523 573111
E: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

NO
Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

PL
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
T: + 48 42 275 83 38
E: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

SE
Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

UK
Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
United Kingdom
T: +44 (0) 845 605 66 88
E: enquiries@sunmed.co.uk
www.SunriseMedical.co.uk

Dealer / distributor:

Serial number:



MD_Sedeo_lights_legrest_frame_EU_EN_NO_SE_RevC_2016_11_25

