


Armrest pads
Armlenepads
Armstödspolstren

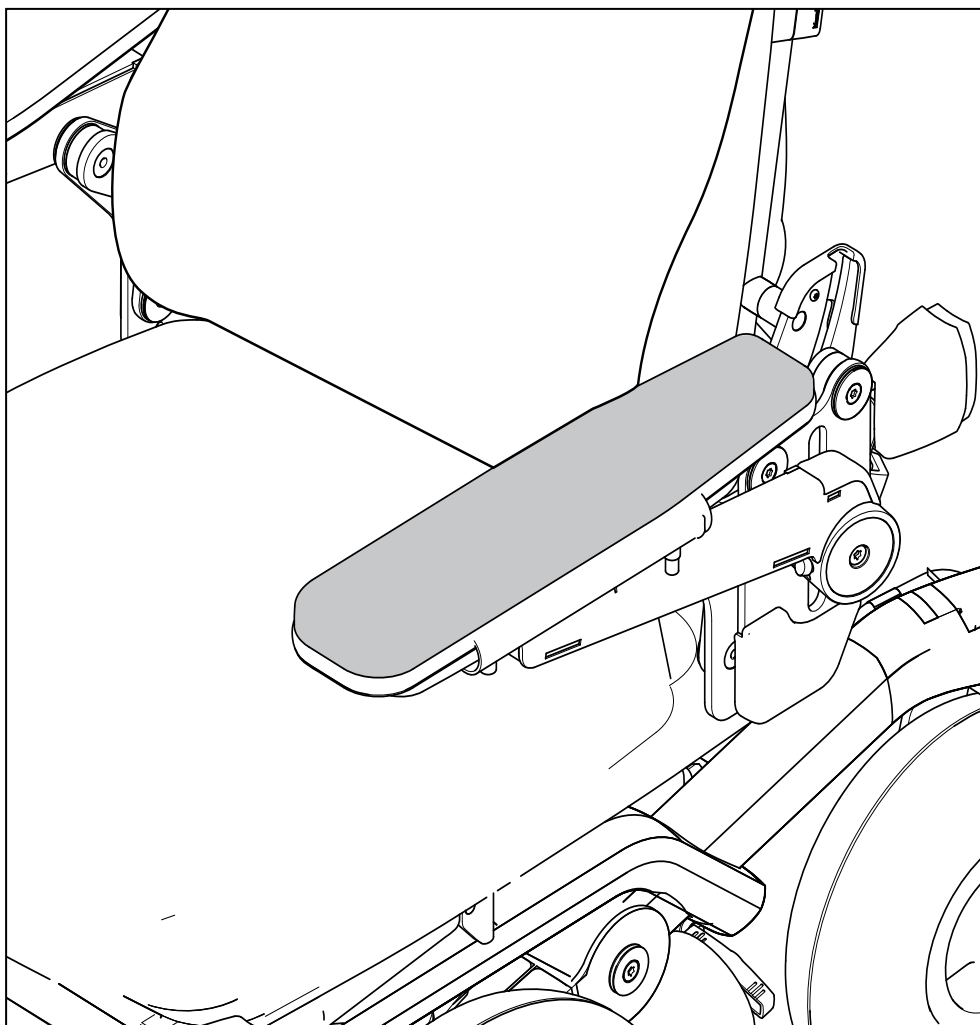

Sedeo Pro+

Armrest pads


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING

EN
NO
SV


SEDEO

9010213C


1

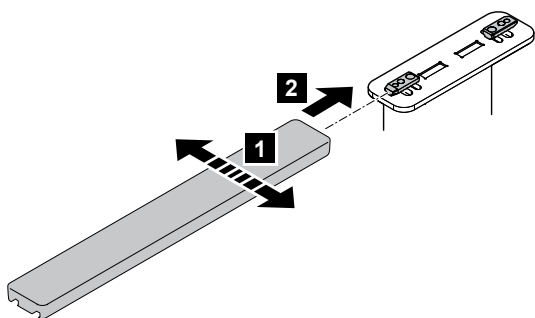

2

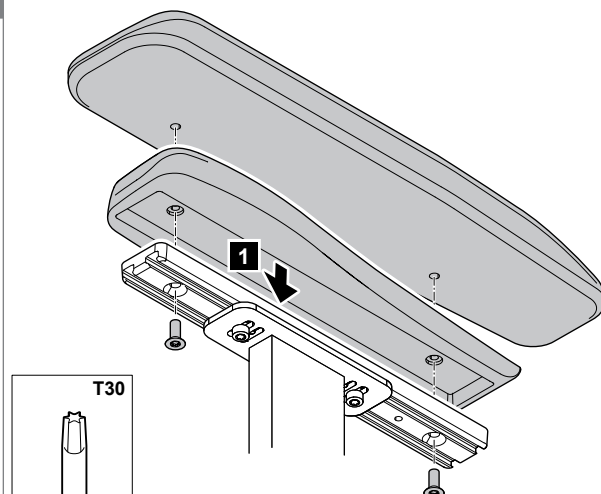

3

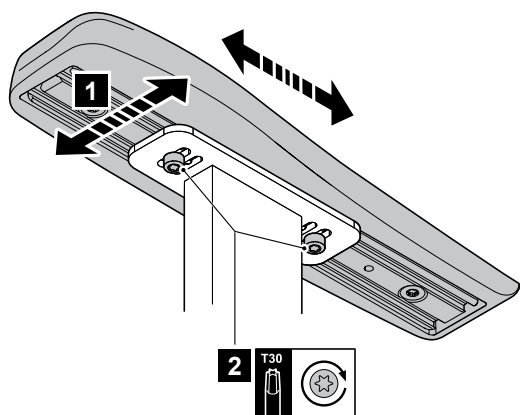

Mounting the armrest pads

Preparation

Note! Switch off the wheelchair via remote control

Instructions


Note! Suitable work area required!

- Place two clamp nuts on the top each armrest frame
- Note!** Do not fully tighten the clamp nuts.
- Slide mounting profile on the clamp nuts.
- Screw the armrest pads on the mounting profile.
- Adjust the armrest pads into the desired position.
- Tighten the clamp nuts.

Relevant article numbers

- 1017052 Armrest pad 30 cm upholstered, stretch rubber, right = left
- 1017053 Armrest pad 40 cm upholstered, stretch rubber, right = left
- 1010908 Armrest pad 30 cm, PU, right
- 1010909 Armrest pad 30 cm, PU, left
- 1017054 Armrest pad 30 cm removeable upholstery, fabric, right = left
- 1017055 Armrest pad 40 cm removeable upholstery, fabric, right = left

Tools used

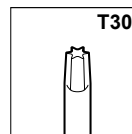

Montere armlenepads

Forberedelser

Merk! Slå av rullestolen via fjernkontroll

Anvisninger


Merk! Bruk et egnet arbeidsområde!

- Monter to klemmemuttere på oversiden av hver armleneramme
- Merk!** Ikke trekk klemmemutterne helt til.
- Skjv monteringsprofilen inn på klemmemutterne.
- Skrue armlenepadsene inn på monteringsprofilen.
- Juster armlenepadsene til ønsket posisjon.
- Trekk til klemmemutterne.

Relevante artikkelnumre

- 1017052 Armlenepad 30 cm polstret, stretch-gummi, høyre = venstre
- 1017053 Armlenepad 40 cm, polstret, stretch-gummi, høyre = venstre
- 1010908 Armlenepad 30 cm, PU, høyre
- 1010909 Armlenepad 30 cm, PU, venstre
- 1017054 Armlenepad 30 cm avtakbart trekk, stoff, høyre = venstre
- 1017055 Armlenepad 40 cm avtakbart trekk, stoff, høyre = venstre

Verktøy som brukes

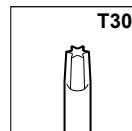

Montering av armstödspolstren

Förberedelser

Obs! Stäng av manöverboxens av- och påknapp

Anvisningar


Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

- Placera två låsmuttrar på ovansidan av vardera armstödsram.
- Obs!** Dra inte åt låsmuttrarna helt.
- Skjut fast monteringsprofilen på låsmuttrarna.
- Skruva fast armstödspolstren på monteringsprofilen.
- Justera armstödspolstren till önskat läge.
- Dra åt låsmuttrarna.

Relevanta artikelnummer

- 1017052 Armrest pad 30 cm upholstered, stretch rubber, right = left
- 1017053 Armrest pad 40 cm upholstered, stretch rubber, right = left
- 1010908 Armrest pad 30 cm, PU, right
- 1010909 Armrest pad 30 cm, PU, left
- 1017054 Armrest pad 30 cm removeable upholstery, fabric, right = left
- 1017055 Armrest pad 40 cm removeable upholstery, fabric, right = left

Verktyg som krävs

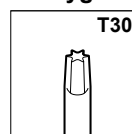

AU
Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood
NSW 2148
Australia
T: +61 (2) 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

BE
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +32 (0)78 150 159
E: customerservice@sunrisemedical.be
www.SunriseMedical.be

CH
Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
T: +41 (0)31 958 3838
E: info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

DE / AT
Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0) 7253/980-0
E: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

DK
Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
T: +45 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

ES / PT
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
T: +34 (0) 902142434
E: marketing@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es

FR
Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
T: + 33 (0) 2 47 55 44 00
E: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

IT
Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
T: +39 0523 573111
E: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

NO
Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

PL
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
T: + 48 42 275 83 38
E: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

SE
Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

UK
Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
United Kingdom
T: +44 (0) 845 605 66 88
E: enquiries@sunmed.co.uk
www.SunriseMedical.co.uk

Dealer / distributor:

Serial number:



MD_Sedeo_armrest_pads_EU_EN_NO_SE_RevC_2016_11_25

