
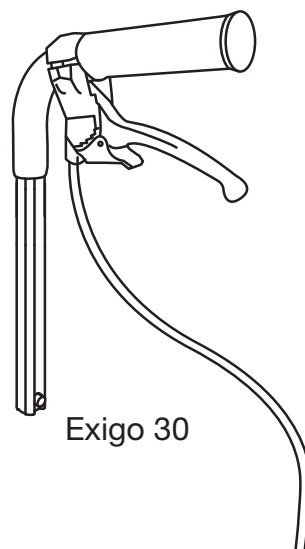



MONTERINGSANVISNING

Ledsagarbroms, One-tool

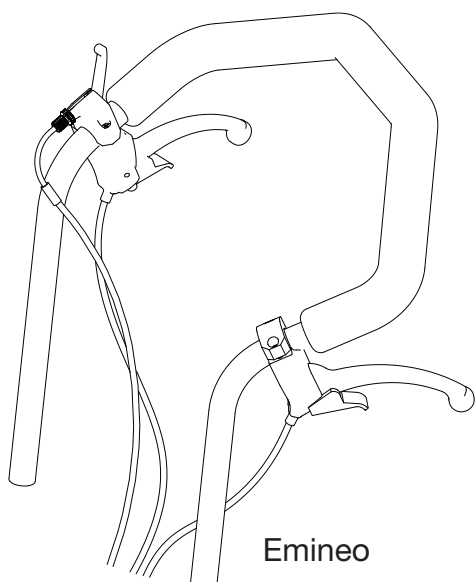






Benämning	Artikelnummer
20" Lufthjul	<input type="checkbox"/> 84416
22" Lufthjul	<input type="checkbox"/> 84436
24" Lufthjul	<input type="checkbox"/> 84456
20" Kompakta hjul	<input type="checkbox"/> 84419
22" Kompakta hjul	<input type="checkbox"/> 84439
24" Kompakta hjul	<input type="checkbox"/> 84458
Monteringsatts till ledsagarbroms One-tool	<input type="checkbox"/> 3409990

 **Breezy**[®]

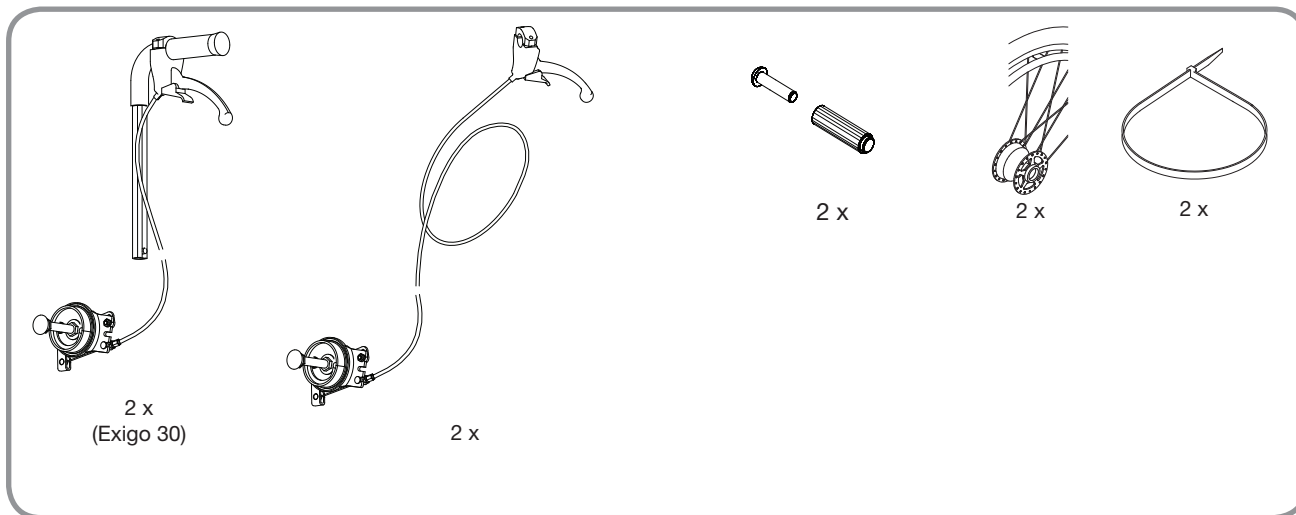

EN

1. Remove the wheel. Remove the existing casing. In order to do this, use a 27 mm wrench to work loose the nut with washer. Pull the casing to position 1 or 5. Use a 16 mm wrench to unscrew the casing.
 2. Dismount QR bolt and nut.
 3. Fit the clamping plate into the sleeve
 4. Fasten the casing. In order to do this you have to slide the nut into the notch inside of the wheelbase.
 5. Use a 17 mm socket wrench to tighten the casing. It is important to ensure that the pins in the wheel block goes into the holes in the frame and that the casing lies horizontally in the track before tightening the screw.
1. Tag av hjulen och befintliga hjulnav. Använd en 27 mm nyckel för att lossa muttern med skiva. Dra hjulhylsan till position 1 eller 5. Använd en 16 mm nyckel för att skruva ut själva hjulhylsan.
 2. Demontera hjulbult och mutter.
 3. Sätt in förankringsplattan i hjulblocket.
 4. Fäst höljet genom att skjuta in muttern i spåret på insidan av hjulblocket.
 5. Använd en 17 mm hylsnyckel för att dra åt höljet. Det är viktigt att se till att stiften i hjulblocket går in i hålen i ramen och att höljet ligger horisontellt i spåret innan skruven skruvas fast.

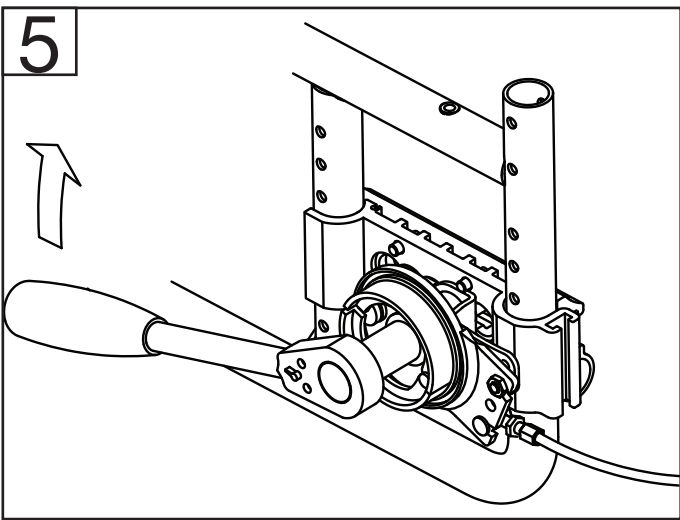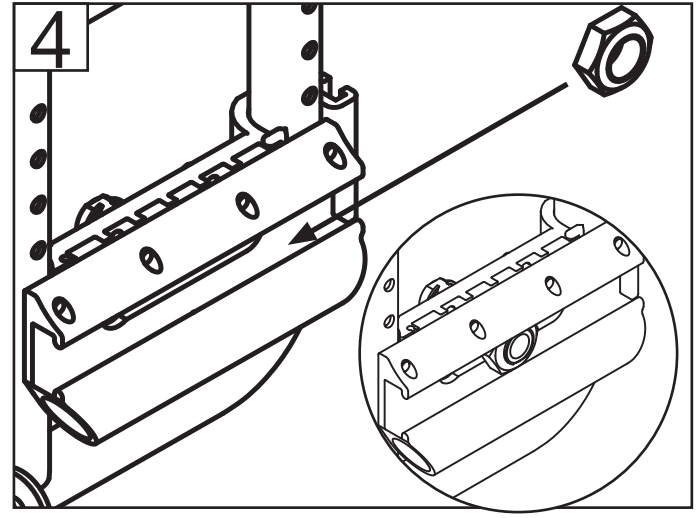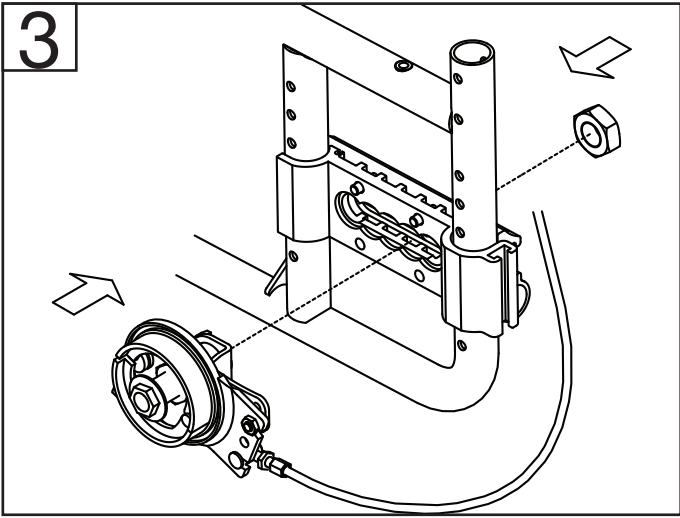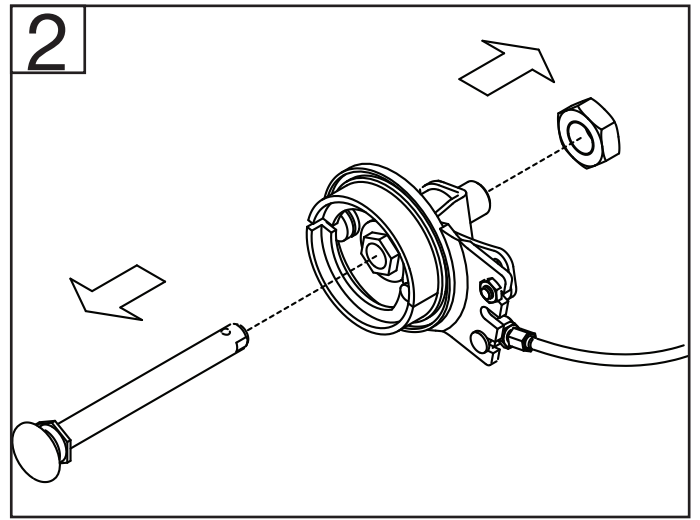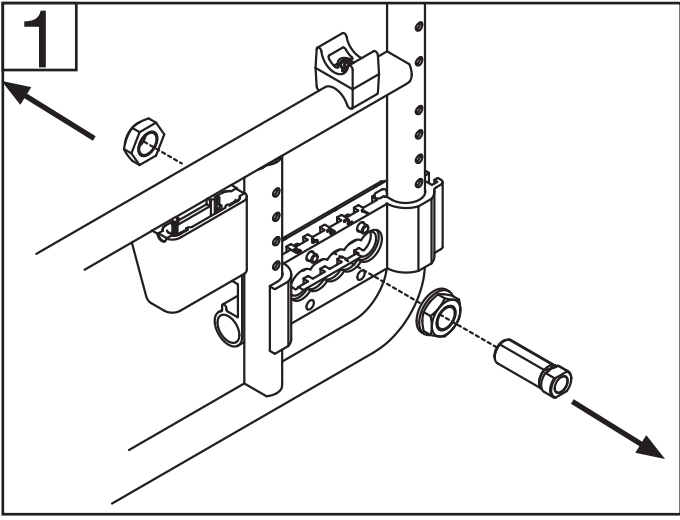

6. a Brake lever Exigo 30
Dismount the old push handles and fit the new ones.
 - b Brake lever Emineo
Assemble the brake lever as displayed in figure 6b. Illustration in the circle displays assembling together with tilt lever.
 7. Dismount the old brake blocks and fit the new ones.
 8. To adjust the drum brake, screw out the wire stretcher step by step. Mount the wheel and test the brake by spinning the wheel and squeezing the brake handle. The wheel should spin easily.
- Use strips to fasten the brake-wire under the back cover.
9. Adjusting the seat height and the centre of gravity
Use a 17 mm socket wrench to loosen the casing. Turn the casing until you can loosen the wheel block.

10. Seat height

Pull the inner wheel block slightly apart from the frame. Adjust the wheel block step-by-step up or down.

Squeeze the inner and outer wheel block together. It is important to ensure that the pins in the wheel block go into the holes in the frame and that the casing lies horizontally in the track before tightening the screw.

Centre of gravity

Pull the casing slightly out and adjust forward or backward.

Squeeze the inner and outer wheel block together. It is important to ensure that the pins in the wheel block go into the holes in the frame and that the casing lies horizontally in the track before tightening the screw.

6. a **Bromshandtag Exigo 30**
Demontera de gamla körhandtagen och montera de nya.
 - b **Bromshandtag Emineo**
Montera bromshandtagen som visas i figur 6b. Illustrationen i cirkeln visar montering tillsammans med tilthandtaget.
 7. Demontera de gamla bromsklossarna och montera de nya.
 8. För att justera ledsagarbromsen, skruva ut vajersträngaren, sätt på hjulet och testa bromsen genom att snurra hjulet och klämma åt bromshandtaget. Hjulet ska snurra lätt.
- Använd buntband för att se till att bromsvajrarna inte hänger löst. Sätt dem t. ex under ryggöverdraget.

9. Inställning av sitthöjd och tyngdpunkt

Använd en 17 mm hylsnyckel för att lossa höljet. Vrid höljet tills du kan lossa hjulblocket.

10. Sitthöjd







Dra det inre hjulblocket något ut från ramen. Justera sedan hjulblocket upp eller ned.

Kläm ihop det inre och det yttre hjulblocket. Det är viktigt att se till att stiften i hjulblocket går in i hålen i ramen och att höljet ligger horisontellt i spåret innan skruven skruvas fast.

Tyngdpunkt

Dra ut höljet någon från ramet. Justera sedan bakåt eller framåt.

Kläm ihop det inre och det yttre hjulblocket. Det är viktigt att se till att stiften i hjulblocket går in i hålen i ramen och att höljet ligger horisontellt i spåret innan skruven skruvas fast.

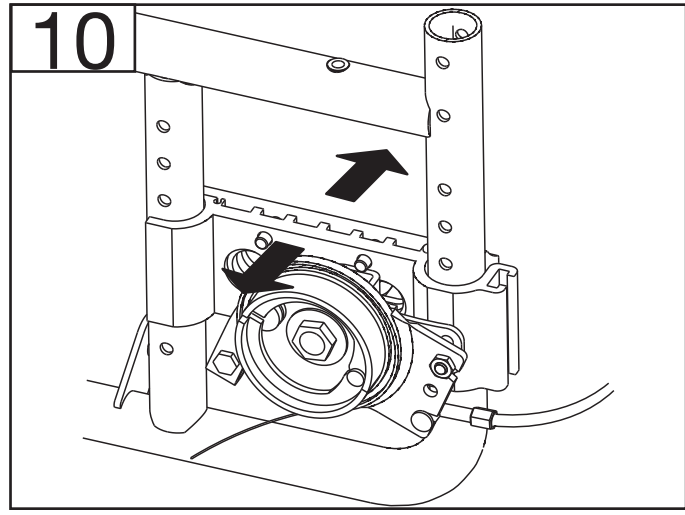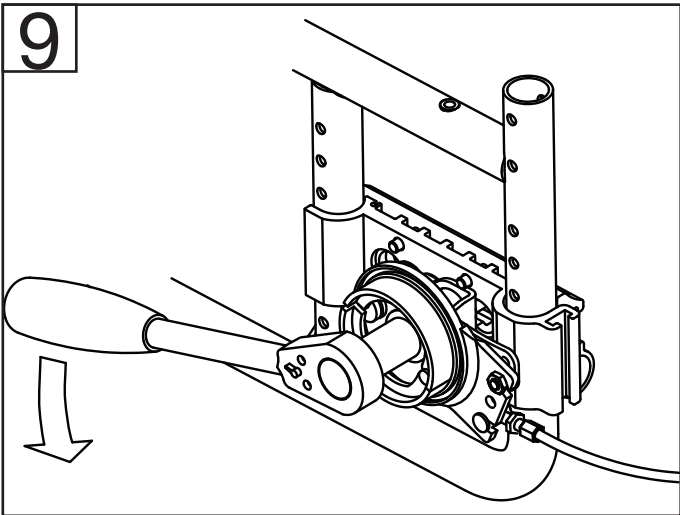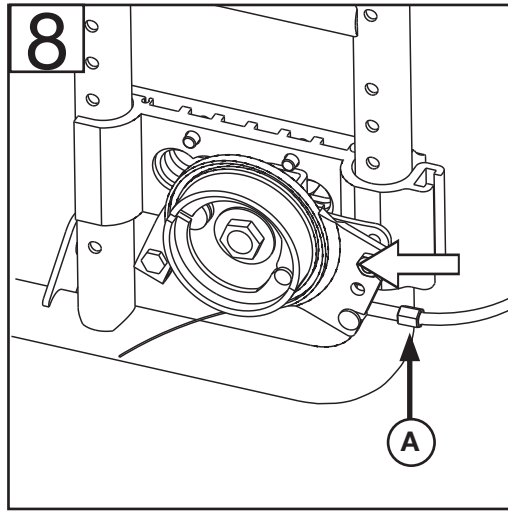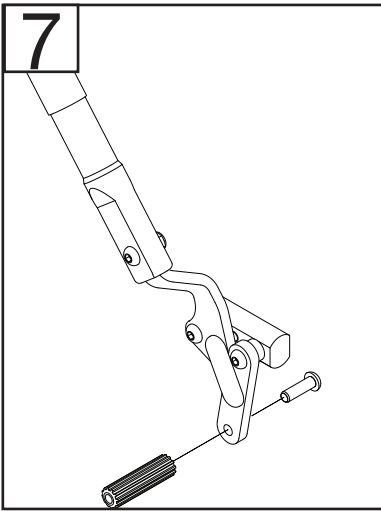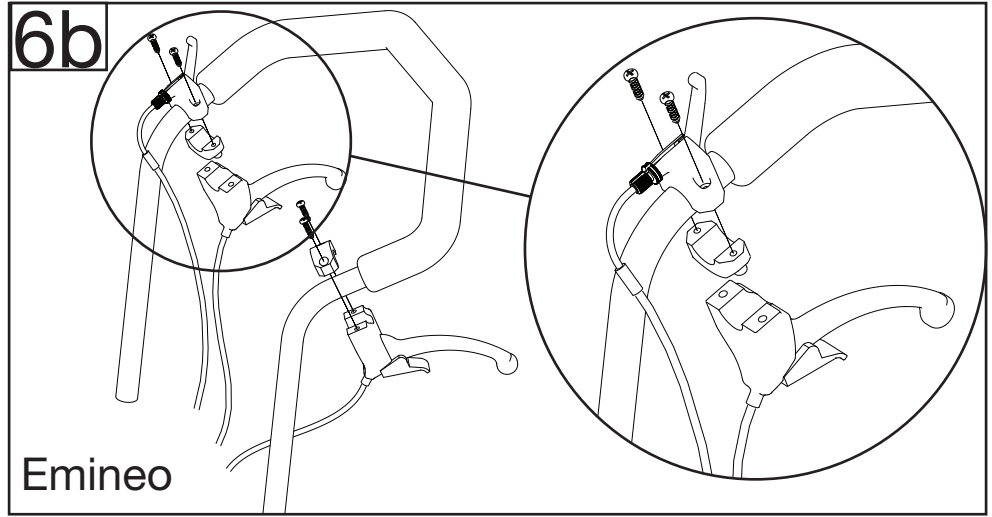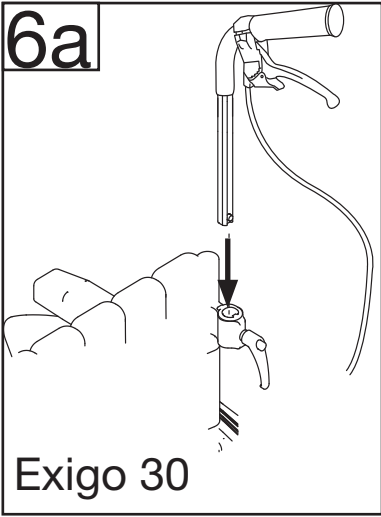



Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00
F: +46 (0) 31 748 37 37
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se