




Cirrus **G5**

Gebruikershandleiding

 **Breezy**[®]

MB3171-NL

www.sunrisemedical.com

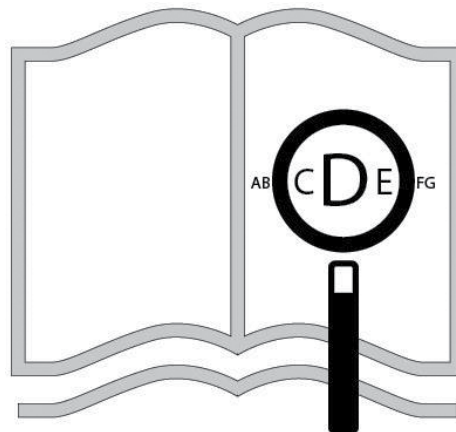

Rolstoelonderdelen

NL





SUNRISE MEDICAL heeft het ISO 13485 certificaat toegekend gekregen, een bewijs van de kwaliteit van onze processen in elk stadium, vanaf het onderzoek en de ontwikkeling tot de productie. Dit product voldoet aan de standaarden zoals bepaald in wettelijke voorschriften van de EU en het VK. Getoonde opties en accessoires zijn tegen betaling verkrijgbaar.



NL 07

Rolstoelonderdelen:

- A. Rugleuning en rugkussen
- B. Armsteun
- C. Zijschot
- D. Zitframe en zitkussen
- E. Beensteun
- F. Voetenplaat
- G. Duwstang
- H. Aandrijfwiel
- I. Hoepel
- J. Asplaat
- K. Rem
- L. Lagerbehuizing voor zwenkwiel
- M. Voorvork
- N. Zwenkwiel
- O. Hoofdsteun

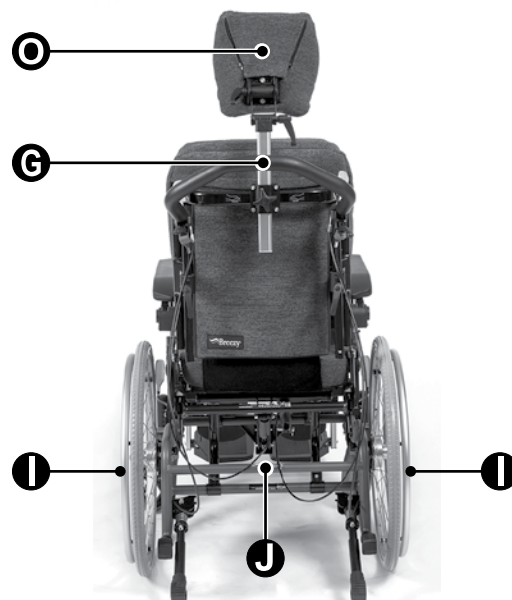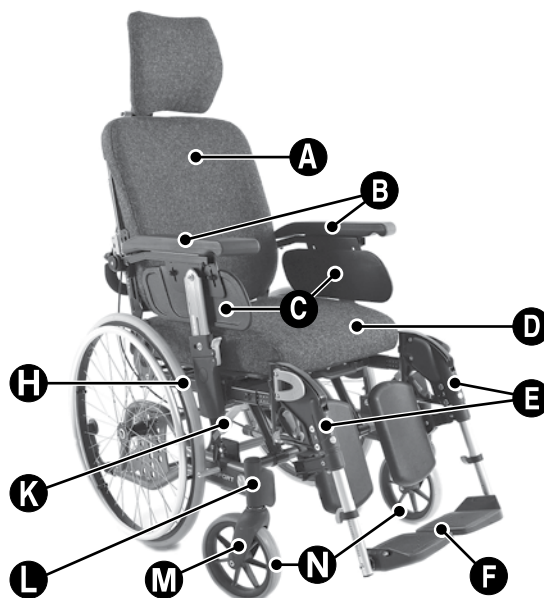










Montage

De standaardrolstoel wordt compleet afgeleverd. U hoeft alleen maar:


• De rugleuning omhoog te vouwen - zie pagina 16


• De beensteunen te monteren - zie pagina 19

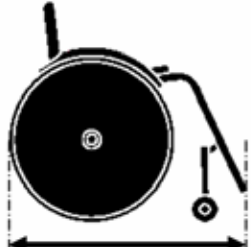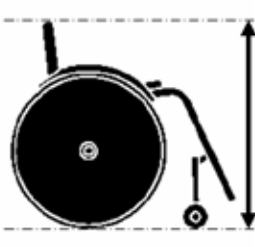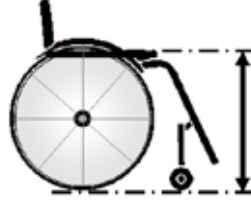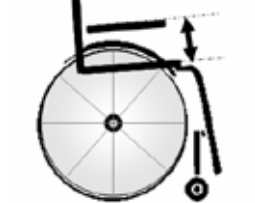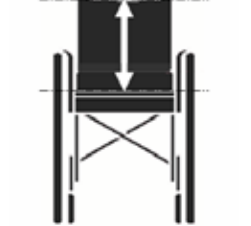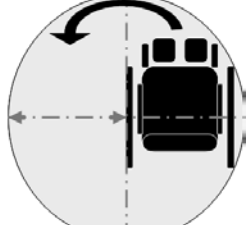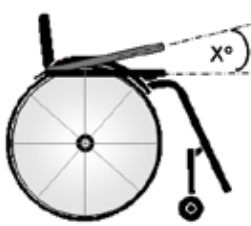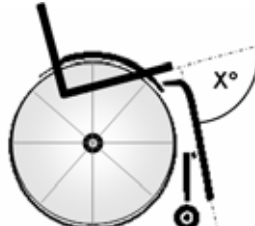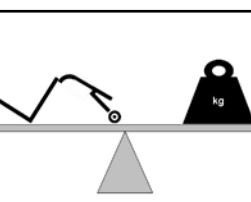

	1150 ↕ 850		780 ↕ 630		1100 ↕ 945		480 ↕ 330
	525 ↕ 375		550 ↕ 390		280 ↕ 180		535 ↕ 445
	650 ↕ 550		540 ↕ 390				
	960 ↕ 810		470 ↕ 400				MAX. mm ↕ MIN. mm
	7° ↕ 0°		7° ↕ 0°		7° ↕ 0°		< MAX. ↕ MIN. <
	25° ↕ 0°		35° ↕ 0°		180° ↕ 90°		< MAX. ↕ MIN. <
	18,0 ↕ 18,0		48 ↕ ?		135 ↕		4,0 ↕ ---

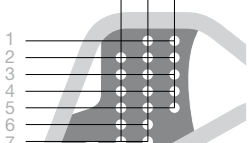

Positie achterwiel 20"			Configuratie voorwiel 5", 6", 8"																		
	a	b	c	A	B	C	D	E	F	C	D	E	F								
	1	2	3	120	120	130	130	130	130	130	130	130	130								
	4	5	6																		
	7																				
Zithoogte (mm)	Vaste zitting	Schuifzitting	20"	5"	20"	5"	20"	6"	20"	6"	20"	6"	20"	6"	20"	8"	20"	8"	20"	8"	
			a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c
	375	400	1	1	A																
	400	425			2	2	2	B													
	425	450					3	3	3	C											
	450	475							4	4	4	D			4	4	4	C			
	475	500								5	5	5	E			5	5	5	D		
	500	525									6	6		F			6	6		E	
525	550																	7	7	F	

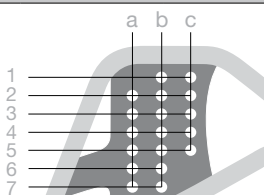Positie achterwiel 22"			Configuratie voorwiel 5", 6", 8"																
	a	b	c	B	C	D	E	F	C	D	E	F							
	1			120	130	130	130	130	130	130	130	130	130						
	2																		
	3																		
	4																		
5																			
6																			
7																			
Zithoogte (mm)	Vaste zitting	Schuifzitting	22"	5"	22"	6"	22"	6"	22"	6"	22"	6"	22"	8"	22"	8"	22"	8"	
			a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c		
	400	425		1	1	B													
	425	450				2	2	2	C										
	450	475					3	3	3	D			3	3	3	C			
	475	500								4	4	4	E			4	4	4	D
	500	525									5	5	5	F					
525	550														5	5	5	E	
																6	6		F


Positie achterwiel 24"			Configuratie voorwiel 6", 8"																
	a	b	c	C	D	E	F	C	D	E	F								
	1	2	3	130	25	130	25	130	25	130	25								
	4	5	6	130	130	130	130	130	130	130	130								
	7																		
Zithoogte (mm)	Vaste zitting	Schuifzitting	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	6"	24"	8"	24"	8"	24"	8"	24"	8"	
			a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c		
	425	450		1		C													
	450	475			2	2		D			2	2		C					
	475	500					3	3		E				3	3		D		
	500	525							4	4		F				4	4		E
525	550															5	5		F

Positie achterwiel 16"				Configuratie voorwiel 5", 6", 8"															
1 2 3 4 5 6 7				A		B		C		D		E		C		D			

Aandraaimoment

OPMERKING: Steeds wanneer de vereiste draaikracht (torque) is gespecificeerd, wordt het sterk aanbevolen om met behulp van een momentsleutel (niet meegeleverd) te controleren of de draaikracht is bereikt. Als er geen andere informatie wordt gegeven, is de draaikracht voor M6 schroeven doorgaans 7 Nm.

⚠ GEVAAR! Sommige schroeven die tijdens de fabricage worden gebruikt, zijn voorzien van een schroefdraadborgingsmiddel (blauwe stip op de draad) en kunnen maximaal drie keer worden losgedraaid en weer vastgedraaid voordat ze vervangen moeten worden door nieuwe schroeven met schroefdraadborgingsmiddel. Als alternatief kunt u Loctite™ 243 schroefdraadborgingsmiddel op de schroeven aanbrengen en ze weer vastdraaien.

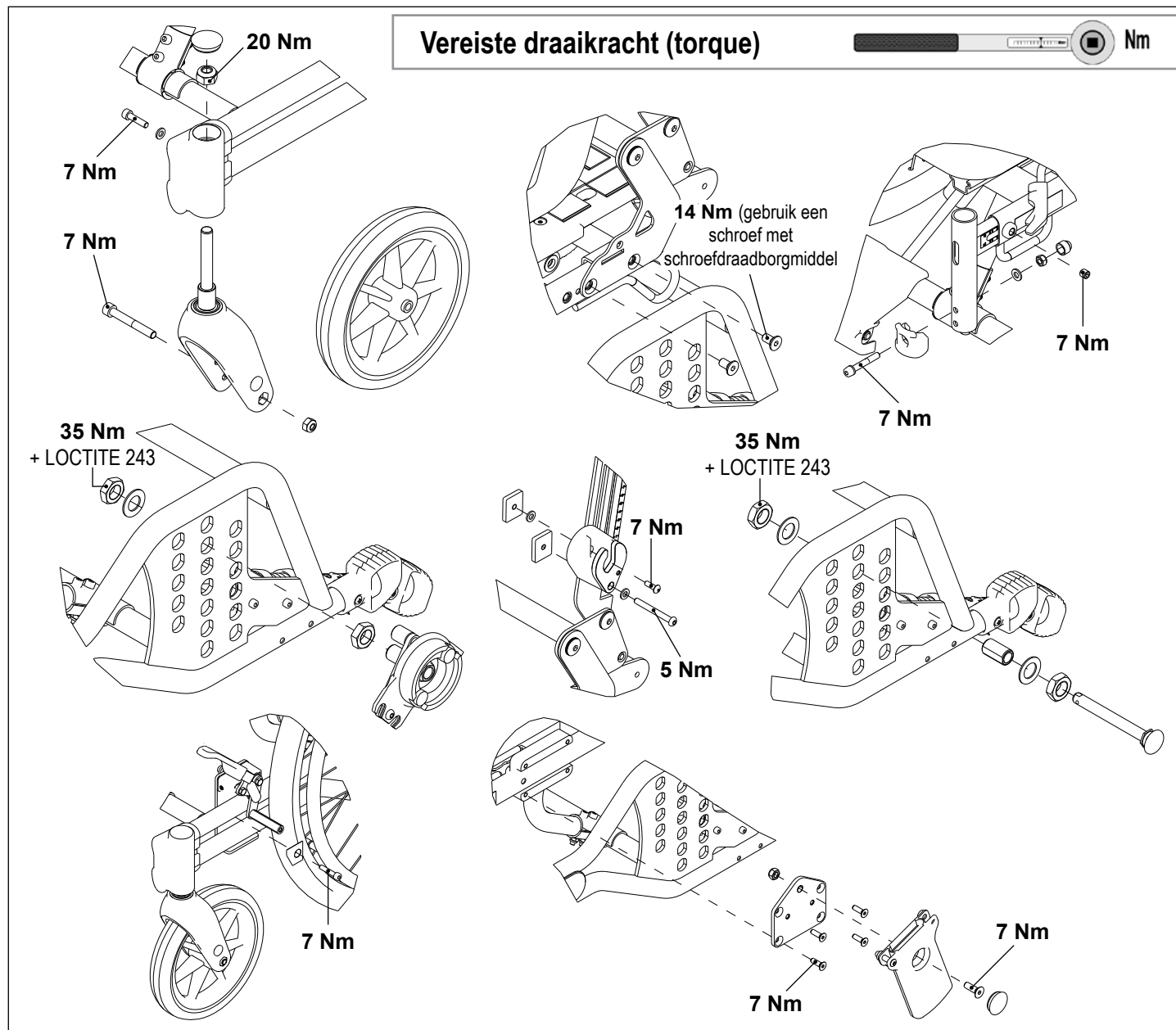

Voorwoord

Beste klant,

Wij zijn erg blij dat u gekozen hebt voor een kwalitatief hoogstaand SUNRISE MEDICAL-product.

In deze gebruikshandleiding vindt u tal van tips en ideeën waarmee u van uw nieuwe rolstoel een betrouwbare partner in uw leven kunt maken.

Wij bij Sunrise Medical staan erop om een nauwe band met onze klanten te onderhouden. Daarom willen wij u op de hoogte houden van de huidige en de nieuwe ontwikkelingen in ons bedrijf. Een goede band met onze klanten betekent ook: snelle service, uitstekende toegankelijkheid en nauwe samenwerking met onze klanten. Wanneer u vervangende onderdelen of accessoires nodig hebt, of een vraag over uw rolstoel hebt, staan wij voor u klaar.

Wij willen dat u tevreden bent over onze producten en diensten.

Bij Sunrise werken we voortdurend aan verdere ontwikkeling van onze producten. Dat maakt dat de vorm, de technologie en de uitrusting van onze producten kan veranderen. Er zijn dan ook geen juridische vorderingen mogelijk op basis van de gegevens of de afbeeldingen in deze gebruikershandleiding.

Het managementsysteem van SUNRISE MEDICAL is gecertificeerd en voldoet aan de DIN EN ISO 13485 en ISO 14001.

 SUNRISE MEDICAL verklaart als fabrikant dat dit product voldoet aan de EU-verordening Medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR) (2017/745).

OPMERKING:

Algemeen advies.

Wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot fysiek letsel, schade aan het product of schade aan de omgeving!

Een mededeling aan de gebruiker en/of patiënt: Als dit product betrokken was bij een ernstig incident, dient dit aan Sunrise Medical en de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd, te worden gemeld.

Built-4-Me speciale aanpassingen

Sunrise Medical adviseert nadrukkelijk alle bij uw Built-4-Me product meegeleverde gebruikersinformatie zorgvuldig door te lezen voordat u het product voor het eerst gebruikt. Alleen wanneer u de gebruiksaanwijzingen volledig hebt doorgelezen en begrijpt, bent u ervan verzekerd dat het Built-4-Me product functioneert en presteert zoals de fabrikant dit heeft bedoeld.

Sunrise Medical adviseert tevens de gebruikersinformatie na het lezen niet weg te gooien, maar het veilig op te bergen, zodat u de informatie later nog eens kunt doornemen.

Combinaties van medische hulpmiddelen

Het is eventueel mogelijk om dit medische hulpmiddel met één of meerdere andere medische hulpmiddelen of een ander product te combineren. Kijk voor informatie over mogelijke combinaties op www.Sunrisemedical.nl. Alle op de lijst vermelde combinaties zijn gevalideerd om te voldoen aan de Algemene veiligheids- en prestatievereisten, Bijlage I nr. 14.1 van de MDR - Verordening voor Medische hulpmiddelen (2017/745).

Richtlijnen voor de combinatie, zoals de bevestiging, vindt u op www.SunriseMedical.nl

Heeft u vragen over het gebruik, het onderhoud of de veiligheid van uw rolstoel, neem dan contact op met uw plaatselijke erkende dealer van SUNRISE MEDICAL.

Is er geen erkende dealer in uw regio of hebt u vragen, neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met Sunrise Medical:

Sunrise Medical HCM B.V.

Vossenbeemd 104

5705 CL Helmond

The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88

E: info@sunrisemedical.nl

www.SunriseMedical.nl



BELANGRIJK:

GEBRUIK UW ROLSTOEL NIET TOT U DEZE GEBRUIKSAANWIJZING HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN.

Gebruik

Rolstoelen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik, voor personen die niet in staat zijn te lopen of die beperkt mobiel zijn. De rolstoelen kunnen door de gebruiker zelf worden voortbewogen of door een derde (een begeleider die duwt), zowel binnens- als buitenshuis.

Het maximale gewicht dat de stoel kan dragen (gebruiker en het gewicht van de accessoires die zijn gemonteerd) staat vermeld bij het serienummer; dit vindt u aan de kruisstang of stabiliseerstang onder de zitting.

Aansprakelijkheid wordt uitsluitend geaccepteerd indien het product wordt gebruikt onder die specifieke omstandigheden en voor het doel waarvoor het product is gemaakt.

De verwachte levensduur van de rolstoel is vijf jaar.

Er mogen uitsluitend door Sunrise Medical goedgekeurde STANDAARD onderdelen worden gebruikt.

Toepassingen.

Indicaties

De keuze aan beschikbare accessoires en het modulaire ontwerp betekenen dat de rolstoel kan worden gebruikt door personen die niet kunnen lopen of beperkt mobiel zijn vanwege:

- Verlamming
- Amputatie (van been of benen)
- Disfunctioneren of misvorming van extremiteiten
- Contractuur van/letsel aan gewrichten
- Ziektes zoals hart- en vaatziekten, evenwichtsstoornissen of cachexie, neurologische aandoeningen, spierdystrofie, hemiplegie, evenals voor oudere mensen die nog kracht in het bovenlichaam hebben.

Contra-indicaties

De rolstoel mag niet zonder begeleider worden gebruikt bij:

- Waarnemingsstoornissen
- Evenwichtsstoornissen
- Verlies van beide armen, indien niet door een zorgverlener begeleid
- Gewrichtscontractuur of beschadiging van gewrichten in beide armen
- Onvermogen om te zitten

Wanneer levering/aanschaf van een rolstoel wordt overwogen, neem dan de volgende zaken in overweging: lichaamsgrootte, gewicht, fysieke en psychische toestand, leeftijd, leefomstandigheden en -omgeving.

OPMERKING:

NB: het besturen van een rolstoel vereist voldoende cognitieve, fysieke en visuele vaardigheden. De gebruiker moet in staat zijn de effecten van handelingen tijdens het gebruik van de rolstoel te beoordelen en deze zo nodig te corrigeren. Deze vermogens en het veilige gebruik van aanvullend bevestigde onderdelen kunnen niet door Sunrise Medical als fabrikant worden beoordeeld. We kunnen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan accepteren.

Lees de gebruiksaanwijzing van de rolstoel en de aanvullend aangebrachte onderdelen door. Instrueer de gebruiker over het veilige gebruik van de rolstoel en de aanvullend bevestigde onderdelen. Informeer gebruikers over specifieke waarschuwingen die gelezen, begrepen en gerespecteerd moeten worden.

Gebruik	7
Toepassingen	7
Definities	9
1.0 Algemene veiligheidsinstructies en besturingsrestricties	10
2.0 Garantie	12
3.0 Transport	13
4.0 Transport zonder persoon in de rolstoel	15
4.1 De rugleuning omhoog of naar beneden vouwen	16
5.0 Gebruik van de rolstoel	17
5.1 Quick-release-as	17
5.2 Duwstang - in hoogte verstelbaar	17
5.3 Duwstang - hoekverstelbaar	17
5.4 Armsteunen, wegzwenkbaar - omhoog klappen, verwijderen en bevestigen	18
5.5 Naar buiten zwenken/bevestigen/verwijderen van de beensteunen	19
5.6 Aanpassen van de hoek van de beensteun en de kuitondersteuning - Hoekverstelbare beensteun	19
5.7 Schuifzitting	20
5.8 Remmen	20
5.9 Trapdop/anti-tip	21
5.10 Wijzigen van de zitpositie door de rugleuning en zithoek aan te passen	21
5.11 Verplaatsing in en uit de rolstoel	22
5.12 Op of afgaan van obstakels, trappen	23
5.13 Op- of afgaan van obstakels, stoepranden	23
6.0 Instellingen	24
6.1 De zittinghoogte instellen	24
6.2 Aanpassen van de zithoogte achterzijde en het zwaartepunt	25
6.3 De zithoogte voorzijde aanpassen door de lagerbehuizing te draaien	25
6.4 De zithoogte voorzijde aanpassen door pasringen toe te voegen/te verwijderen	25
6.5 Andere manieren op de hoogte voorzijde zitting aan te passen	26
6.6 Aanpassen van de remmen	26
6.7 Aanpassen van de anti-tip	26
6.8 Aanpassen van de neksteun	27
6.9 Aanpassen van de kromming van de rugleuning	28
6.10 Aanpassing van de hoogte van de rugleuning	28
6.11 Rompsteun	28
6.12 Aanpassen van de lengte van de beensteunen - Hoekverstelbare beensteunen	28
6.13 Aanpassen van de hoek van de vaste beensteunen	28
6.14 Voetenplaat - Aanpassing hoek	29
6.15 Aanpassen van de zitdiepte/lengte bovenbeen door de bevestiging van de beensteun te verplaatsen	29
6.16 Verwijder de bevestiging van de beensteun	29
6.17 Aanpassen van de zitdiepte/het zwaartepunt	30
6.18 Aanpassen van de hoogte van de armsteunen	31
6.19 Aanpassen van de diepte van de armsteun	31
6.20 Aanpassen van de hoogte van het zijschot	31
6.21 Bevestigen van de heupgordel (accessoire)	32
Sticker	34
Dagelijkse controle	34
Banden en montage	35
Algemeen onderhoud	35
Mogelijke problemen	36
Afvalverwerking / recycling van materialen	36
Accessoires	37

Definities

Betekenis van woorden die in deze handleiding worden gebruikt

Woord	Betekenis
 GEVAAR!	De gebruiker wordt geattendeerd op de kans op ernstig letsel of overlijden indien het advies niet wordt opgevolgd.
 WAARSCHUWING!	De gebruiker wordt geattendeerd op de kans op letsel indien het advies niet wordt opgevolgd.
 OPGELET!	De gebruiker wordt geattendeerd op de kans op schade aan de apparatuur indien het advies niet wordt opgevolgd.
OPMERKING:	Algemeen advies of beste gebruik
	Verwijzing naar aanvullende documentatie

OPMERKING:

De getoonde en beschreven rolstoelen in deze gebruikershandleiding kunnen op sommige punten van uw eigen model afwijken. Alle instructies zijn echter belangrijk, ongeacht de verschillen in detail.

De fabrikant houdt zich het recht voor zonder opgaaf gegevens met betrekking tot gewicht, maten of andere technische gegevens zoals genoemd in deze handleiding, te wijzigen. Alle afbeeldingen, maten en mogelijkheden zoals getoond in deze handleiding zijn slechts indicatief en bevatten geen specificaties.

OPMERKING:

Noteer het adres en telefoonnummer van uw plaatselijke dealer in de daarvoor bestemde ruimte.

Neem in het geval van storingen contact met de dealer op en probeer zoveel mogelijk relevante informatie te geven zodat hij u snel kan helpen.

Stempel en handtekening dealer

1.0 Algemene veiligheidsinstructies en besturingsrestricties

De techniek en constructie van deze rolstoel zijn ontworpen voor het bieden van maximale veiligheid. Aan de momenteel van kracht zijnde internationale veiligheidsnormen is voldaan en zij zijn overtroffen. Toch kunnen gebruikers zichzelf in gevaar brengen door onjuist gebruik van hun rolstoel. Voor uw eigen veiligheid moeten de volgende regels absoluut worden opgevolgd. Onprofessionele of foutieve aanpassingen of instellingen kunnen de kans op ongelukken vergroten. Als rolstoelgebruiker maakt u, net als andere weggebruikers, deel uit van het dagelijkse verkeer op straten en trottoirs. Wij herinneren u er aan dat u daardoor ook onderworpen bent aan alle verkeerswetgeving. Wees voorzichtig tijdens uw eerste rit in deze rolstoel. Leer uw rolstoel kennen.

Voor elk gebruik, moet het volgende worden gecontroleerd:


- Vaste assen of Quick release assen op de achterwielen.
- Velcro op de zittingen en rugleuningen
- Banden, bandendruk en parkeerremmen.

Alvorens aanpassingen van deze rolstoel te wijzigen, is het belangrijk het bijbehorende deel van de gebruiksaanwijzing te lezen.

Het is mogelijk dat de rolstoel door kuilen of oneffen oppervlakken kan kantelen, in het bijzonder wanneer heuvel op of af wordt gereden. Wanneer over een trede of helling op wordt gereden, moet het lichaam naar voren zijn gebogen.

GEVAAR!

- Overschrijd NOOIT de maximale belasting van 135 kg voor de gebruiker plus voorwerpen die meegenomen worden op de handbike. Als u de maximale belasting overschrijdt, kan dit leiden tot schade aan de stoel, of u kunt omvallen of omkantelen, de controle verliezen, wat ernstig letsel aan de gebruiker en andere personen tot gevolg kan hebben.
- Draag lichte of reflecterende kleding wanneer u in het donker naar buiten gaat. Zo wordt u gemakkelijker gezien. Zorg ervoor dat de reflectoren op de zij- en achterkant van de rolstoel duidelijk zichtbaar zijn.

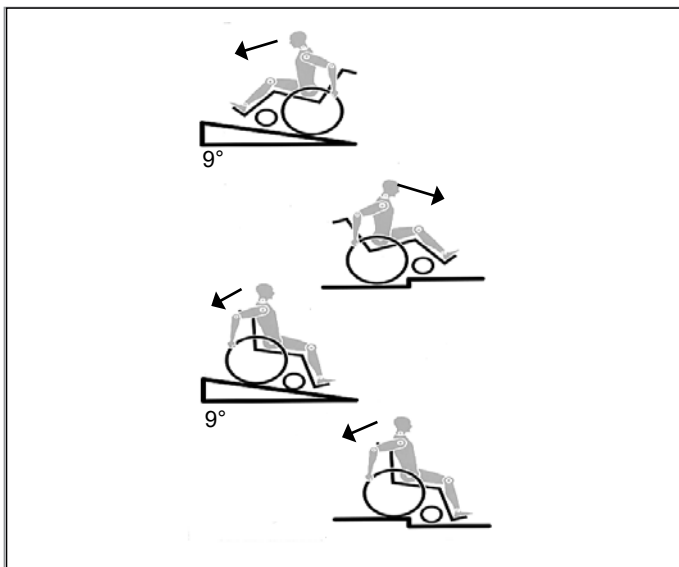

- Sunrise adviseert tevens gebruik te maken van verlichting.
- Om vallen en gevaarlijke situaties te voorkomen, is het verstandig om eerst met uw nieuwe rolstoel te oefenen op een vlakke ondergrond, bij goed zicht.
- Gebruik de voetplaten niet als u in of uit de rolstoel stapt.
- Deze moeten van tevoren omhoog worden geklapt en zo ver mogelijk naar buiten worden gedraaid. Plaats uzelf altijd zo dicht mogelijk bij de plek waar u naar toe wilt overstappen of overgebracht wilt worden.
- Wees voorzichtig wanneer u de rolstoel gebruikt. Bijvoorbeeld, probeer niet tegen een voorwerp op te rijden zonder te remmen (opstapje, trottoirrand) of verschillen in afstapjes.
- De parkeerremmen zijn niet bedoeld om uw rolstoel te remmen wanneer deze in beweging is. Zij dienen er slechts voor om te voorkomen dat uw rolstoel onbedoeld begint te rollen. Wanneer u op een oneffen oppervlak stopt, dient u altijd uw parkeerremmen te gebruiken om weggrollen te voorkomen. Gebruik altijd beide remmen anders kan uw rolstoel kantelen.
- Probeer uit welk effect een verandering op het zwaartepunt van de rolstoel heeft; bijvoorbeeld op hellingen of wanneer u over obstakels probeert te rijden. Doe dit met de hulp van een begeleider
- Met extreme instellingen (bijv. achterwielen in de voorste positie) en minder dan perfecte houding, kan de rolstoel zelfs op een effen oppervlak omkantelen.
- Leun met uw bovenlichaam naar voren als u hellingen en opstapjes opgaat.
- Leun met uw bovenlichaam verder naar achteren, wanneer u van een helling of afstapje afdraait. Probeer nooit diagonaal een helling op of af te gaan.
- Gebruik nooit een roltrap, aangezien u hier vanaf kunt vallen wat ernstig letsel kan veroorzaken.
- Gebruik de rolstoel niet op hellingen steiler dan $> 7^\circ$. De veilige dynamische hellingshoek hangt af van de instellingen van de stoel, de capaciteiten van de gebruiker en de rijstijl. Omdat Sunrise Medical vooraf niet kan voorzien hoe de capaciteiten en rijstijl van de gebruiker is, kan de maximale veilig te nemen helling niet worden bepaald. Daarom moet dit door de gebruiker worden bepaald, samen met een begeleider, die kan voorkomen dat de rolstoel kantelt. Sunrise Medical adviseert onervaren gebruikers veiligheidswielen te laten installeren.
- Het is mogelijk dat de rolstoel door kuilen of oneffen oppervlakken kan kantelen, in het bijzonder wanneer heuvel op of af wordt gereden.
- Gebruik de rolstoel niet op modderige of bevroren (gladde) ondergrond.
- Daar waar voetgangers niet zijn toegestaan, mag u ook niet met de rolstoel rijden.
- Steek nooit uw handen tussen de spaken of tussen het achterwiel en wielvergrendeling terwijl u rijdt. Dit kan leiden tot letsel aan de handen.
- Met name bij het gebruik van lichtgewicht hoepels, worden vingers gemakkelijk warm bij het remmen op hoge snelheid of op steile hellingen.

- Gebruik geen trappen zonder de hulp van een begeleider. Er bestaan middelen om u te helpen, bijv. hellingen om op te gaan of de lift te gebruiken. Wij raden u aan deze te gebruiken. Als deze niet beschikbaar zijn, dient de rolstoel naar achteren te worden gekanteld en over de treden te worden geduwd (2 helpers), maar mag nooit worden getild. We adviseren gebruikers zwaarder dan 100 kg niet op deze wijze over te brengen. Over het algemeen moeten anti-tip wielen vooraf zodanig worden ingesteld dat ze de treden niet kunnen raken, omdat dit tot een ernstige val zou kunnen leiden. Naderhand moeten de anti-tip wielen weer in de oude positie worden teruggebracht.

GEVAAR!

- Zorg ervoor dat de begeleider de rolstoel alleen aan stevig bevestigde onderdelen vasthoudt. Gebruik geen verwijderbare onderdelen (bijvoorbeeld de voetsteunen of de zijkant).
- Wanneer u de rolstoellift gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de aangebrachte anti-tip wielen buiten de gevarenzone zijn geplaatst.
- Gebruik de remvergrendeling om de stoel vast te zetten wanneer u zich op ongelijke grond bevindt of wanneer de rolstoel bijvoorbeeld in een auto wordt geplaatst.
- Wanneer u de rolstoellift gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de aangebrachte anti-tip wielen buiten de gevarenzone zijn geplaatst.
- Gebruik de remvergrendeling om de stoel vast te zetten wanneer u zich op ongelijke grond bevindt of wanneer de rolstoel bijvoorbeeld in een auto wordt geplaatst.
- Wanneer gebruik wordt gemaakt van een speciaal voor gehandicaptenvervoer ingericht voertuig, dienen de personen die worden vervoerd, voor zover mogelijk, gebruik te maken van de stoelen van het voertuig en het juiste gordelsysteem. Alleen op deze wijze genieten de personen optimale bescherming indien een ongeluk plaatsvindt.
- Afhankelijk van de diameter en instelling van de zwenkwielen evenals de instelling van het zwaartepunt van de rolstoel, kunnen de zwenkwielen op hoge snelheid beginnen te trillen. Hierdoor kunnen de zwenkwielen geblokkeerd raken en kan de rolstoel omkantelen. Zorg er daarom goed voor dat de zwenkwielen goed zijn aangepast (zie het hoofdstuk "Zwenkwielen").
- Met anti-tip kan de stoel niet onbedoeld achterover kantelen. Ze mogen in geen geval de transitwielen vervangen en gebruikt worden om een persoon in een rolstoel te vervoeren als de achterwielen zijn verwijderd.
- Wanneer u naar voorwerpen (die zich voor, aan de zijkant of achter de rolstoel bevinden) reikt, zorg er dan voor dat u niet te ver uit de rolstoel leunt, want als u het zwaartepunt verandert, bestaat het gevaar dat u omkantelt of omver rolt. Als u extra belasting (rugzak of gelijksoortige voorwerpen) aan de buizen van de rugleuning hangt, kan dit van invloed zijn op de stabiliteit aan de achterkant van uw stoel, vooral in combinatie met rugleuningen die achterover kunnen leunen. Hierdoor kan de stoel naar achteren kantelen en letsel veroorzaken.
- Gebruikers met een amputatie vanaf de dij, moeten anti-tip wielen gebruiken.
- Controleer voor vertrek of de bandenspanning correct is. Voor de achterwielen moet de druk ten minste 3,5 bar (350 kPa). Op de banden staat de maximale druk aangegeven. Het remsysteem functioneert alleen als de bandenspanning voldoende en de instelling juist is (zie het hoofdstuk over "Wielvergrendeling").

- Indien de zitting of rugbekleding van de rugleuning beschadigd zijn, dient u deze direct te vervangen.
- Wees voorzichtig met vuur, en vooral met brandende sigaretten. De banden van de rugleuning en zitting kunnen vlam vatten.
- Als de rolstoel langere tijd aan direct zonlicht of zeer lage temperaturen blootgesteld wordt, kunnen sommige delen van de rolstoel zoals het frame, de beensteunen, de wielvergrendeling en de zijkant, erg heet (>41°C) of erg koud (<0°C) worden.
- Zorg er altijd voor dat de quick release assen op de achterwielen, indien deze zijn gemonteerd, op de juiste wijze zijn afgesteld en vergrendeld (kogellagers van de vergrendelende bal moeten volledig zichtbaar zijn door het ashuis). Wanneer de knop op de quick release as niet ingedrukt is, kan het achterwiel niet worden verwijderd.

OPGELET!

- Niet alleen het vermogen van de remhendel maar ook de algemene rij-eigenschappen zijn afhankelijk van de bandenspanning. De rolstoel is aanzienlijk lichter en gemakkelijker te manoeuvreren wanneer de achterwielen op de juiste spanning zijn en beide dezelfde spanning hebben.
- De banden van de rolstoel moeten voldoende profiel hebben!
- Let op dat u zich aan alle verkeerswetten moet houden wanneer u zich op de openbare weg begeeft.
- Wees altijd voorzichtig wanneer u de rolstoel aanpast!
- Wijzigingen waarvoor gereedschappen nodig zijn, moeten altijd door de erkende dealer worden uitgevoerd.
- Reinig de rolstoel regelmatig om roest en corrosie door zout te voorkomen.
- Controleer de schroeven, bouten en moeren om te controleren of ze goed vastzitten zodat er geen onderdelen van de rolstoel los gaan zitten.
- Bij bewegende onderdelen is er altijd gevaar op beknelde vingers. Wees voorzichtig wanneer u iets wilt veranderen aan de rolstoel.
- Het kan zijn dat de getoonde en beschreven product in deze handleiding niet op elk detail precies hetzelfde als uw eigen model is. Alle instructies zijn echter belangrijk, ongeacht de verschillen in detail.
- De fabrikant houdt zich het recht voor zonder opgaaf gegevens met betrekking tot gewicht, maten of andere technische gegevens zoals genoemd in deze handleiding, te wijzigen. Alle afbeeldingen, maten en mogelijkheden zoals getoond in deze handleiding zijn slechts indicatief en bevatten geen specificaties.

GEVAAR!

VERSTIKKINGSGEVAAR - In dit mobiliteitshulpmiddel zijn kleine onderdelen verwerkt die onder bepaalde omstandigheden een verstikkingsgevaar voor kleine kinderen kunnen vormen.

Levensduur

De verwachte levensduur van dit product is 5 jaar, op voorwaarde dat:

- Het product wordt gebruikt in strikte overeenstemming met het bedoelde gebruik en dat aan alle voorwaarden ten aanzien van service en onderhoud wordt voldaan.

GARANTIE

DEZE GARANTIE DOET OP GEEN ENKELE WIJZE AFBREUK AAN UW RECHTEN.

Sunrise Medical* biedt haar klanten een garantie op rolstoelen, zoals bepaald in de garantievoorwaarden die het onderstaande dekken:

Garantievoorwaarden

1. Indien een onderdeel of onderdelen van de rolstoel binnen 24 maanden gerepareerd of vervangen moet(en) worden als gevolg van een fabricagefout en/of gebrek in het materiaal, of voor het frame en vouwframe binnen 5 jaar na levering aan de klant, wordt het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen kosteloos gerepareerd of vervangen. (Op accu's wordt een garantie gegeven voor een periode van 12 maanden, op voorwaarde dat het juiste onderhoudsschema voor accu's wordt opgevolgd.)
2. Om de garantie ten uitvoer te brengen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Sunrise Medical met de exacte gegevens over het probleem. Indien u de rolstoel gebruikt buiten het gebied dat wordt gedekt door de klantenservice van Sunrise Medical, wordt de reparatie of vervanging uitgevoerd door een ander servicepunt dat door de fabrikant wordt aangewezen. De rolstoel moet worden gerepareerd door een door Sunrise Medical aangewezen servicepunt (dealer).
3. Voor onderdelen die binnen het bereik van deze garantiebepalingen zijn gerepareerd of vervangen, bieden we een garantie in overeenstemming met deze garantievoorwaarden voor de resterende garantieperiode voor de rolstoel in overeenstemming met punt 1.
4. Voor originele reserveonderdelen die op kosten van de klant zijn gemonteerd, geldt een garantieperiode van 12 maanden (na montage) in overeenstemming met deze garantiebepalingen.
5. Verbruiksartikelen zoals kussens, banden, binnenbanden en soortgelijke onderdelen zijn van garantie uitgesloten, behalve wanneer voortijdige slijtage van het onderdeel het directe gevolg van een fabrieksfout is.
6. Vorderingen op basis van deze garantie kunnen niet worden uitgeoefend indien een reparatie of vervanging van een rolstoel of een onderdeel daarvan noodzakelijk is vanwege de onderstaande redenen:
 - a) Het product of onderdeel is niet onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding en/of de onderhoudsinstructies.
 - b) Er zijn accessoires gebruikt die niet gespecificeerd zijn als originele onderdelen.
 - c) De rolstoel of het onderdeel is beschadigd door nalatigheid, ongeval of onjuist gebruik.
 - d) Er zijn veranderingen/wijzigingen aangebracht aan de rolstoel of onderdelen die afwijken van de specificaties van de fabrikant.
 - e) Reparaties zijn uitgevoerd voordat onze Klantenservice is geïnformeerd over de omstandigheden.
7. Deze garantie wordt beheerst door het recht van het land waarin het product van Sunrise Medical werd aangekocht.

** Dit betekent de Sunrise Medical faciliteit waarvan het product werd aangekocht.*

3.0 Transport



GEVAAR!

Indien dit advies wordt genegeerd ontstaat het risico op ernstig letsel of overlijden.

Het vervoer van uw rolstoel in een voertuig:

Een in een voertuig vastgezette rolstoel biedt niet dezelfde veiligheid als een normale stoel en veiligheidssysteem in dat voertuig. Sunrise adviseert altijd om de rolstoelgebruiker over te brengen naar een stoel van het voertuig. Sunrise Medical erkent dat het niet altijd praktisch is om een rolstoelgebruiker over te laten stappen naar een gewone stoel in het voertuig. Wanneer de gebruiker vervoerd moet worden in de rolstoel, moet onderstaand advies worden opgevolgd:

1. Controleer of het voertuig over de juiste hulpmiddelen beschikt om een passagier in een rolstoel te vervoeren. Controleer tevens of de methode om in en uit het voertuig te komen, geschikt zijn voor uw type rolstoel. De vloer van het voertuig moet sterk genoeg zijn om het gecombineerde gewicht van de gebruiker, rolstoel en accessoires te dragen.
2. Rondom de rolstoel dient voldoende ruimte te zijn om de spanbanden en veiligheidsgordels te bevestigen en de rolstoel goed en gemakkelijk vast te zetten en los te maken.
3. De stoel met daarin de gebruiker moet in de rijrichting worden geplaatst. De rolstoel dient te worden vastgezet met taxifixatiebanden en voor de gebruiker dienen veiligheidsgordels gebruikt te worden, waarbij wordt voldaan aan de normen ISO 10542 of SAE J2249 en aan de WTORS instructies van de fabrikant.
4. De rolstoel is niet getest in andere posities binnen een voertuig. De rolstoel met daarin de gebruiker mag nooit in zijwaartse richting worden vervoerd (fig. A).
5. De rolstoel moet worden vastgezet met een bevestigingssysteem dat voldoet aan ISO 10542 of SAE J2249, met niet-verstelbare taxifixatiebanden aan de voorzijde en verstelbare taxifixatiebanden aan de achterzijde, die worden bevestigd door middel van karabijnhaken/S-haken en gesp en gordel bevestigingen. De bevestigingen bestaan doorgaans uit vier aparte taxifixatiebanden die vastgemaakt worden aan iedere hoek van de rolstoel.
6. De verankeringsbanden moeten aan het frame van de rolstoel worden bevestigd zoals aangegeven in de tekening op de volgende pagina. Ze mogen niet worden bevestigd aan accessoires, wielspaken, wielvergrendeling, voetsteunen en dergelijke.
7. De taxifixatiebanden dienen in een hoek van 45 graden zo dicht mogelijk bij de stoel bevestigd te worden; de banden moeten strak vastgezet worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. De verankeringspunten, frame en structurele onderdelen van de rolstoel mogen niet zonder overleg met de fabrikant worden gewijzigd of vervangen. Dergelijke wijzigingen kunnen de rolstoel van Sunrise Medical ongeschikt maken voor transport in een voertuig.
9. Zowel de heupgordel als de veiligheidsgordel voor het bovenlichaam moet worden gebruikt om de rolstoelgebruiker goed in de rolstoel te laten zitten. Hierdoor wordt het risico verkleind dat hoofd en borst in botsing komen met onderdelen van het voertuig. Tevens wordt risico verkleind dat de rolstoelgebruiker of de andere inzittenden van het voertuig geblesseerd raken. (Fig. B) De bovenlichaamsgordel dient bevestigd te worden aan de "B" stang van het voertuig. Indien dit wordt nagelaten, wordt het risico van ernstig (onder) buikletsel van de gebruiker vergroot.
10. Wanneer er tijdens het transport gebruik gemaakt wordt van een hoofdsteen, dient deze geschikt te zijn voor transport (zie etiket van de hoofdsteen). Deze moet gedurende het hele transport op de juiste wijze zijn aangebracht.
11. Lichaamsondersteunende gordels (zoals heupgordels) mogen niet worden gebruikt als veiligheidsgordel voor een rolstoelgebruiker, tenzij deze voldoen aan de normen zoals gespecificeerd in ISO 7176- 19 of SAE J2249.
12. De veiligheid van de rolstoelgebruiker tijdens het transport hangt af van de nauwkeurigheid waarmee de verankeringsbanden worden bevestigd. De persoon/personen die de verankerung tot stand brengt/brengen, moet(en) op juiste wijze zijn geïnstrueerd en getraind.

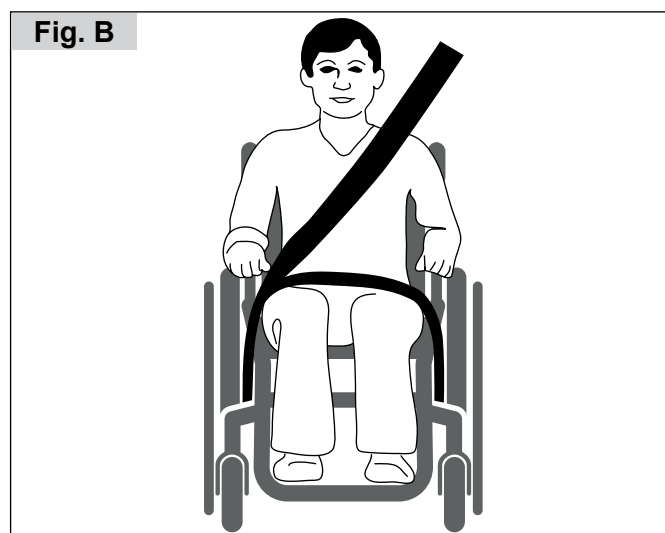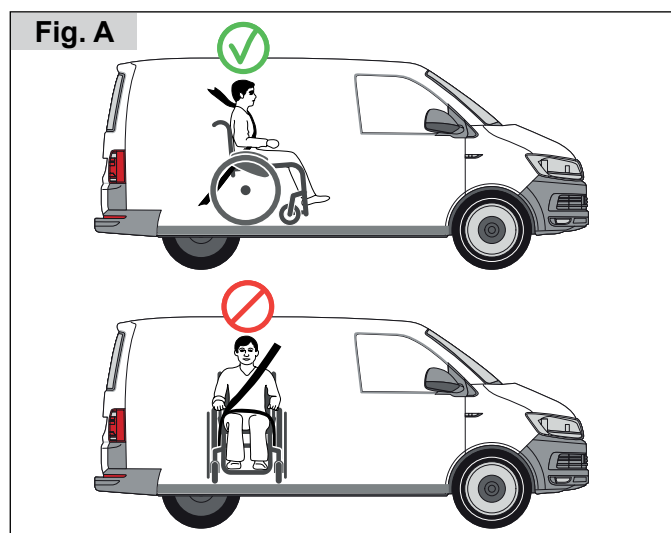

13. Verwijder waar mogelijk hulpmiddelen en accessoires en berg deze veilig op. Hierbij kunt u denken aan: krukken, losse kussens en werkbladen.
14. Een comfort beensteun mag zich niet in opgetilde positie bevinden tijdens transport van de rolstoel en gebruiker, wanneer de rolstoel is verankerd met taxifixatiebanden en veiligheidsgordels.
15. Een gekantelde rugleuning moet in rechte positie worden gezet.
16. De remmen moet strak toegepast worden.
17. Veiligheidsgordels moeten worden bevestigd aan de "B" stang van het voertuig en mogen niet van het lichaam afgehouden worden door bijvoorbeeld armsteunen of wielen.

Instructies voor veiligheidsgordels:

1. De heupgordel moet laag worden bevestigd over de voorzijde van de heup, zodanig dat de hoek van de heupgordel zich binnen de horizontale voorkeurszone van 30 tot 75 graden bevindt. Hoe groter de hoek binnen deze begrenzing, hoe beter, maar de hoek mag nooit groter zijn dan 75 graden. (Fig. C)
2. De bovenlichaamgordel moet over de schouder en diagonaal over de borst worden gedragen, zoals op de afbeeldingen (d, e) wordt weergegeven. De gordels moeten zo strak mogelijk worden gebruikt, maar tegelijkertijd altijd comfortabel zijn voor de gebruiker. Veiligheidsriemen mogen niet gedraaid zitten tijdens gebruik. De gordel voor het bovenlichaam moet dwars over de schouder worden bevestigd, zoals getoond in afbeeldingen D en E.
3. De bevestigingspunten van de stoel bevinden zich aan de binnenzijde aan de voorkant van het frame vlak boven het zwenkwiel en aan het frame aan de achterzijde. De banden worden rond het frame aan de zijkanten geplaatst waar de horizontale en verticale buizen van het frame elkaar kruisen. (Zie Fig. G).

4. Op het frame van de rolstoel wordt door middel van het symbool voor het verankeringspunt (Fig. F) aangegeven waar de verankeringsbanden geplaatst moeten worden. De banden worden strak getrokken nadat de banden aan de voorzijde zijn aangebracht om de rolstoel te borgen.

De plaatsing van verankeringsbanden op de rolstoel:

1. Positie aan de voorzijde en achterzijde, van de sticker en het verankeringspunt (Fig. G).

Gewicht van gebruiker minder dan 22 kg






Wanneer de gebruiker die wordt vervoerd een kind is dat minder dan 22kg weegt, en het betrokken voertuig minder dan acht (8) inzittenden heeft, wordt het aanbevolen dat het kind wordt overgeplaatst naar een kinderzitje met veiligheidsgordels dat voldoet aan de UN-ECE R44 regelgeving.

Dit type gordelsysteem biedt een doelmatiger gordelsysteem dan het conventionele 3-puntsgordelsysteem. Daarbij bieden sommige kinderzitjes ook extra ondersteunende elementen waardoor de houding van het kind wanneer het zit, beter wordt ondersteund.

In sommige omstandigheden kunnen de ouders of zorgverleners overwegen om het kind in de rolstoel te laten zitten tijdens transport, als de rolstoel het kind veel lichaamssteuning en comfort biedt.

In dergelijke omstandigheden adviseren we een risicobeoordeling te laten uitvoeren door uw medische deskundige of andere relevante personen die over de vereiste kennis beschikken.

Op de Cirrus G5 zijn vier punten gemarkeerd die gebruikt moeten worden als de rolstoel geborgd wordt.

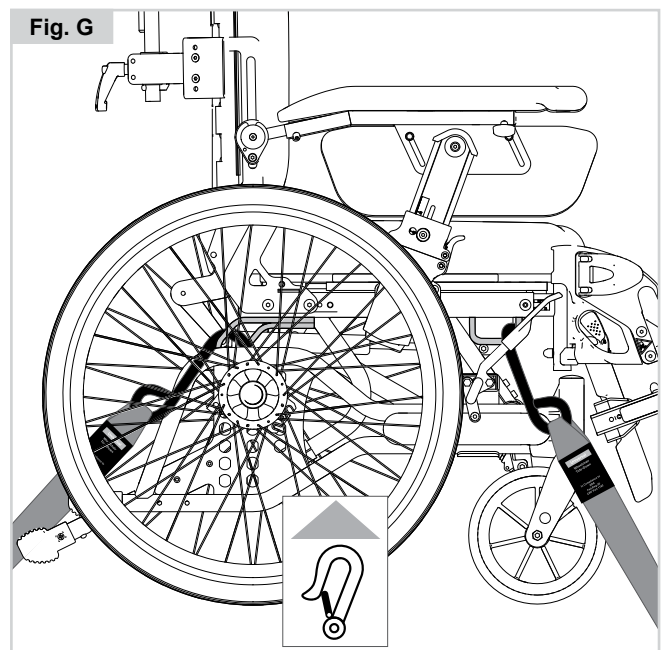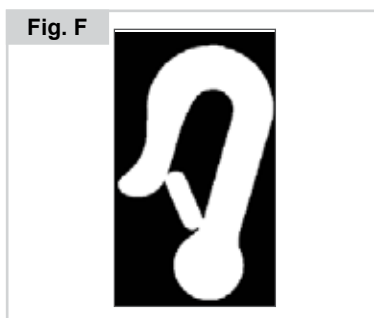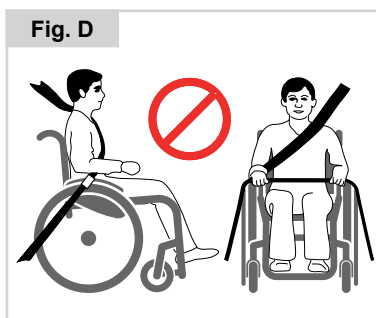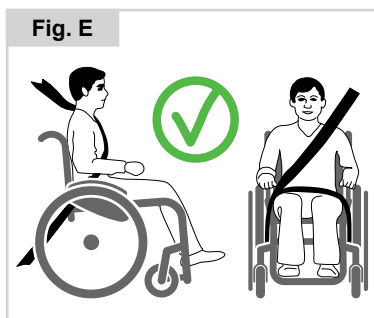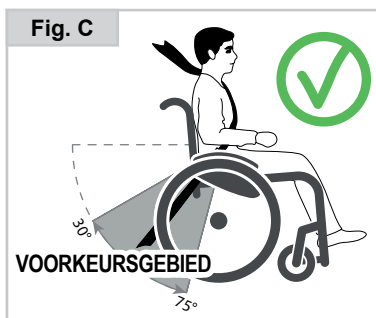

4.0 Transport zonder persoon in de rolstoel

De rolstoel kan over land en/of door de lucht worden vervoerd.

De delen van de rolstoel die gemakkelijk losgemaakt kunnen worden, moeten voor transport van de rolstoel worden verwijderd.

- Armsteunen
- Beensteunen
- Achterwielen
- Hoofdsteun

Nadat de rolstoel in het voertuig is gezet, moet hij worden vastgezet met een bevestigingssysteem dat geschikt is voor het gewicht van die bepaalde rolstoel inclusief opties.

OPGELET!

Zorg ervoor dat onderdelen die los kunnen raken, goed vastgemaakt zijn aan uw rolstoel. Of verpak ze afzonderlijk met naamstickers, zodat ze tijdens het laden en lossen niet verloren gaan.

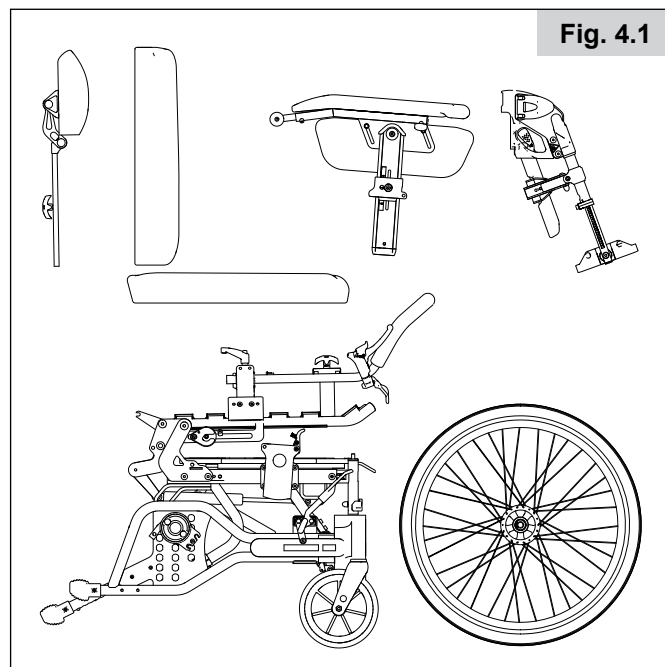


Fig. 4.1

4.1 De rugleuning omhoog of naar beneden vouwen (Fig. 4.2)

De rugleuning kan naar voren worden gevouwen om transport van de rolstoel mogelijk te maken. Zet de rugleuning vast zodat hij niet per ongeluk kan vallen. Om de opgevouwen rolstoel nog kleiner te maken, kunnen de kussens van de zitting en de rugleuning worden verwijderd.

De rugleuning omlaag vouwen

- Kantel de rolstoel voorwaarts.
- Verwijder de armsteun.
- Maak het klittenband **A** los dat de kabels bij elkaar houdt.
- Trek de quick-release-as **B** eruit en vouw de rugleuning naar beneden.

Terugvouwen van de rugleuning

Deze procedure voert u omgekeerd uit om de rugleuning weer omhoog te trekken.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel - Houd de rugleuning vast terwijl u hem ontgrendelt.

Om de rugleuning weer rechtop te zetten, vouwt u hem omhoog en plaatst u de veiligheidspin terug.

GEVAAR!

Gevaar voor letsel - houd de rugleuning altijd vast terwijl u hem los- of vastmaakt.

OPGELET!

Plaats de kabels bij het terugvouwen van de rugleuning zoals in de afbeelding (Fig. 4.2) wordt getoond.

Controleer of de rugplaat op de juiste wijze en plaats is vergrendeld.

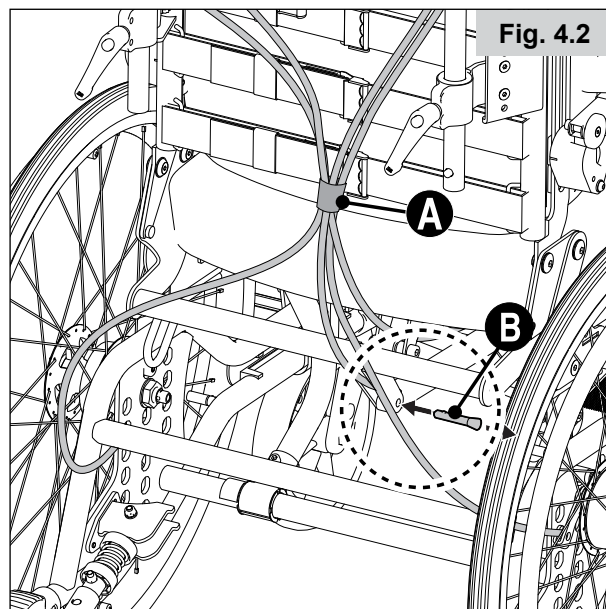


Fig. 4.2

5.0 Gebruik van de rolstoel

5.1 Quick-release-as (fig. 5.1)

De rolstoel is uitgerust met een quick-release-as op de aandrijfwielen. Om het wiel te verwijderen of bevestigen, drukt u op de knop in het midden van het aandrijfwiel.

OPMERKING!

Wanneer de bout van het wiel volledig in de behuizing valt, springt deze knop ongeveer 5 mm uit het wiel. Controleer of het wiel goed vastzit door te controleren of de knop 5 mm naar buiten is gekomen.

⚠ OPGELET!

Houd de quick release as ingedrukt terwijl u de as in het frame steekt om de achterwielen te monteren. Laat de knop los om het wiel op zijn plaats te vergrendelen. De quick release knop zou weer op zijn oorspronkelijke plaats moeten klikken.


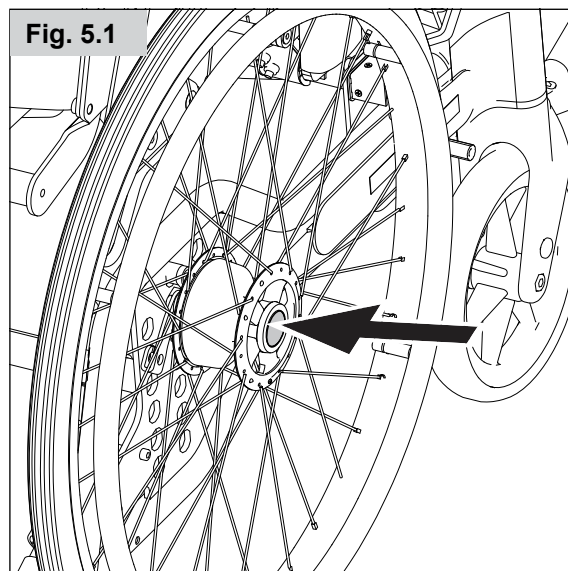


Fig. 5.2

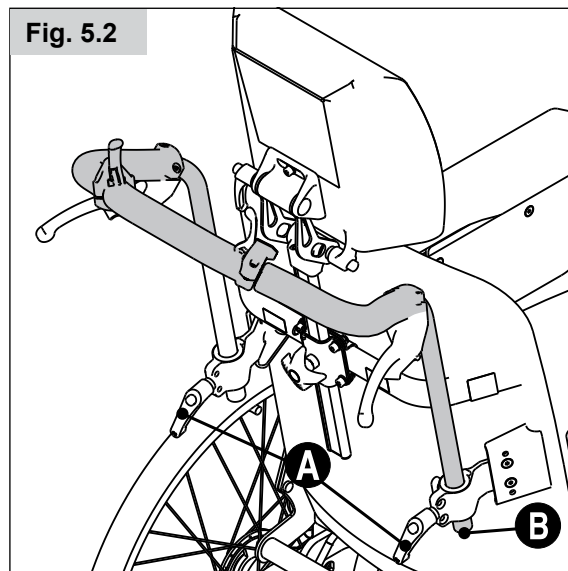

5.2 Duwstang - in hoogte verstelbaar (Fig. 5.2)

Aanpassen van de hoogte van de duwstang

- Maak de vergrendelingshendels los **A** en trek of duw de duwstang tegelijkertijd omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte.
- Draai de vergrendelingshendels weer vast.

Verwijderen van de duwstang


Voor extra veiligheid is de duwstang in de hoogste positie voorzien van een klikvergrendeling.

- Om de duwstang te verwijderen, trekt u deze naar de hoogste positie en knijpt in de klikvergrendeling **B**.

⚠ WAARSCHUWING!

Oefen geen druk uit op de duwstang wanneer u een stoep op of af gaat. Plaats één voet op de trapdop om de rolstoel te kantelen terwijl u met de duwstang stuurt. Zie "5.13 Negotiating obstacles" on page 23.

Fig. 5.3

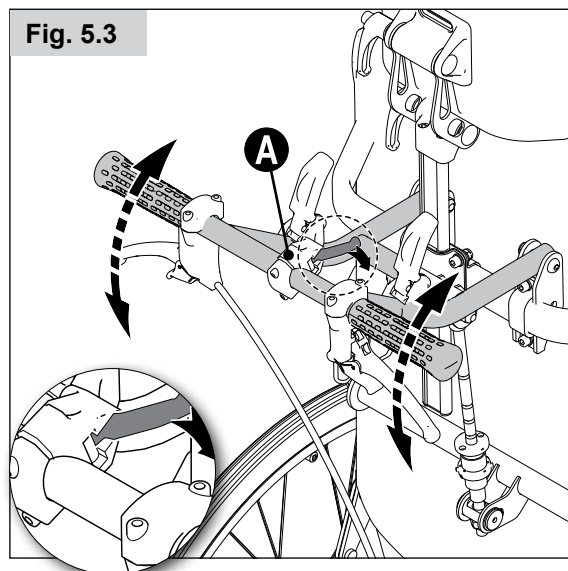

5.3 Duwstang - hoekverstelbaar (fig. 5.3)

Aanpassen van de hoek van de duwstang

- Trek aan de hendel **A** waarbij u tegelijkertijd de duwstang omhoog of omlaag naar de gewenste hoek duwt.
- Laat de hendel los wanneer de pal de gewenste hoek heeft bereikt.

⚠ WAARSCHUWING!

Oefen geen druk uit op de duwstang wanneer u een stoep op of af gaat. Plaats één voet op de trapdop om de rolstoel te kantelen terwijl u met de duwstang stuurt. Zie "5.13 Negotiating obstacles" on page 23.

5.4 Armsteunen, wegzwenkbaar - omhoog klappen, verwijderen en bevestigen

- Om de armsteun omhoog te klappen, duwt u op de ontgrendelingspal **A** en trekt u de armsteun omhoog.
- Om de armsteun te verwijderen: klap de armsteun omhoog en trek hem omhoog.
- Om de armsteun te bevestigen, voert u deze procedure in omgekeerde volgorde uit.

OPMERKING!

Controleer of de armsteun in de positie vergrendelt wanneer u hem naar beneden klapt.

⚠ WAARSCHUWING!

Wees bij het verwijderen van de armsteun alert op het mogelijke risico dat uw vingers of kleding in het wiel beklemd raken.

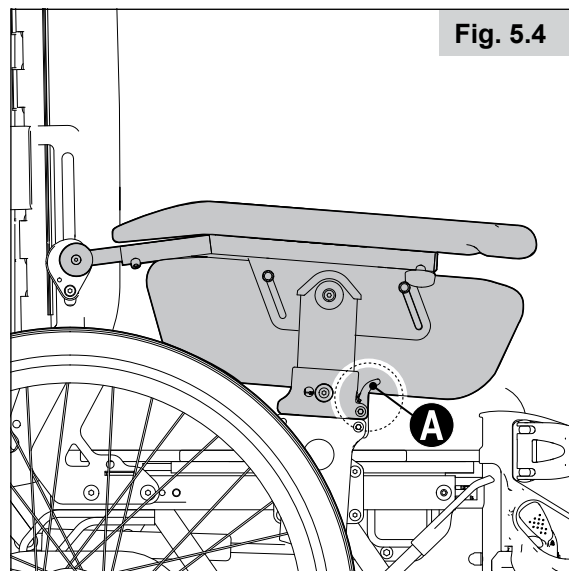


Fig. 5.5


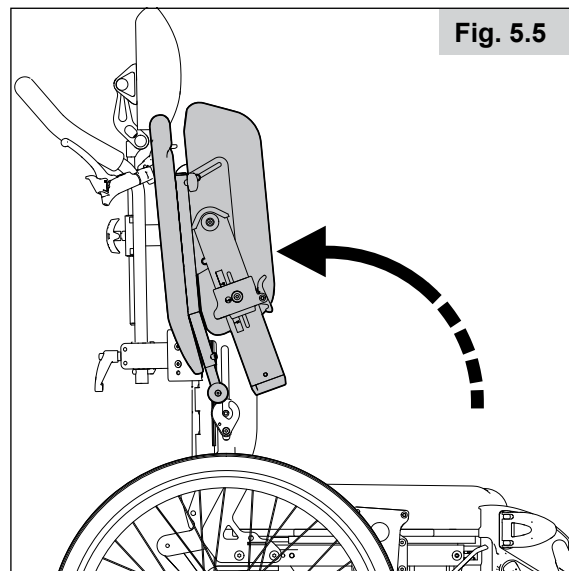


Fig. 5.6

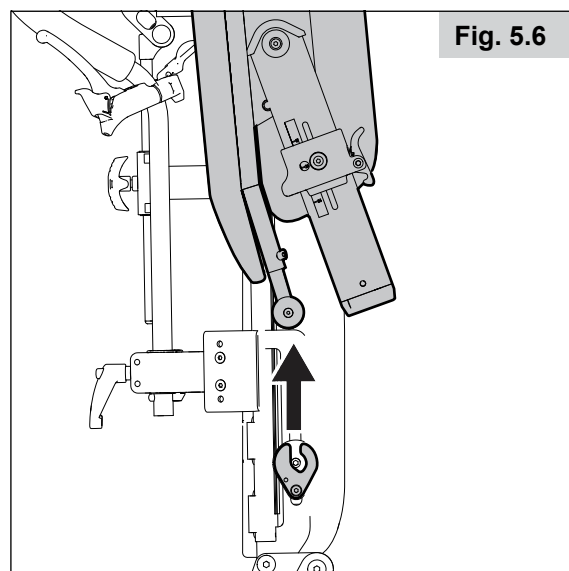

5.5 Naar buiten zwenken/bevestigen/verwijderen van de beensteunen

De procedure is hetzelfde voor vaste en hoekverstelbare beensteunen. De beensteunen kunnen naar binnen of buiten worden gezwenkt of worden verwijderd om transport en transfers in/uit de rolstoel te vergemakkelijken. De beensteunen kunnen worden ontkoppeld door de hendel **A** naar binnen of buiten te draaien.

Indien gewenst, kan de beensteun volledig worden verwijderd door hem recht omhoog te tillen. Om de beensteun weer terug te plaatsen voert u deze stappen in omgekeerde volgorde uit; de hendel vergrendelt automatisch.

De volledige beensteun kan inclusief bevestigingen worden verwijderd, zie "6.15 Adjusting the seat depth/upper leg length by moving the leg support fitting" on page 29.

5.6 Aanpassen van de hoek van de beensteun en de kuitondersteuning - Hoekverstelbare beensteun

Aanpassen van de hoek van de beensteun

De beensteunen kunnen afzonderlijk worden aangepast.

- Maak de hendel **A** los
- Verstel naar de gewenste hoek en draai de hendel **A** weer vast

Aanpassen van de kuitondersteuning

De kuitondersteuning **B** kan in diepte en in zijwaartse richting worden aangepast.

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor beknellen!

Fig. 5.7

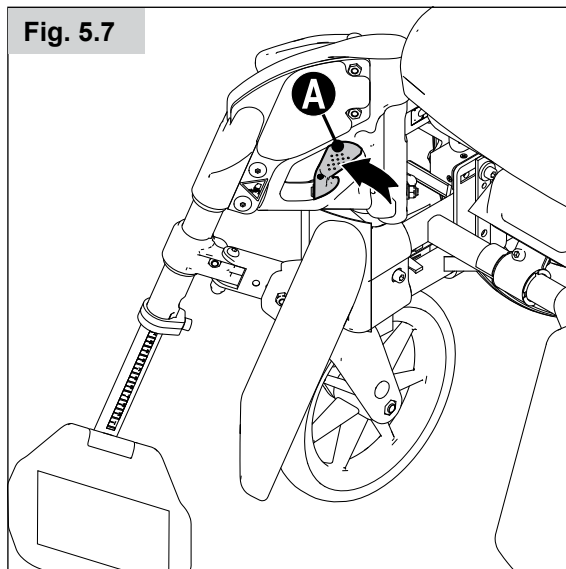


Fig. 5.8


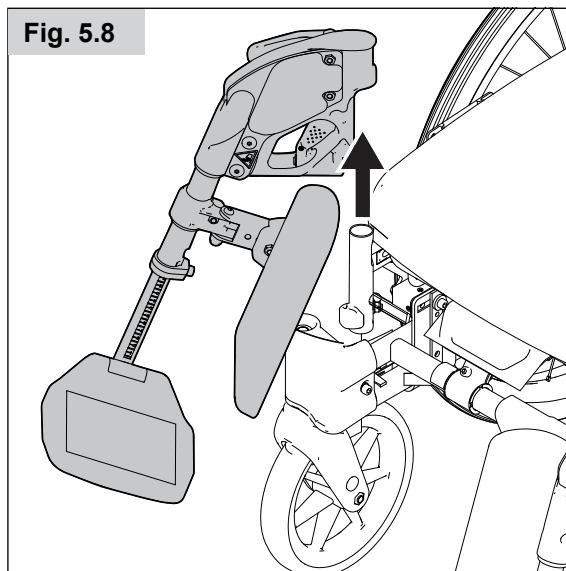


Fig. 5.9

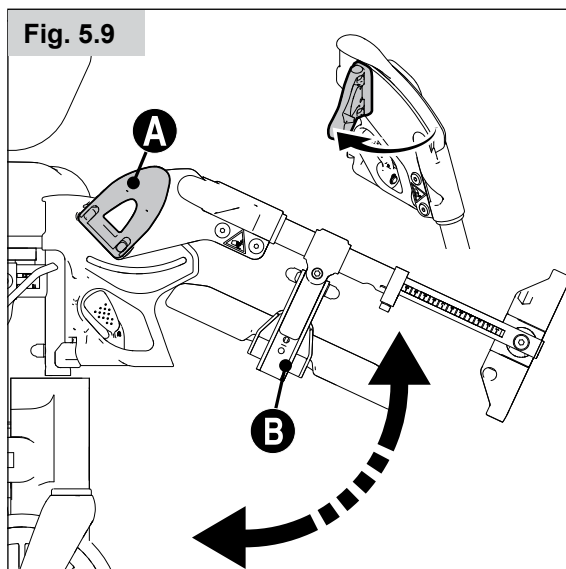

5.7 Schuifzitting

Gebruik de schuiffunctie om de stoeldiepte aan te passen en de zitting verder voorwaarts te bewegen wanneer de gebruiker wordt overgeplaatst (Fig. 5.10).

- Zet de zitting in horizontale positie
- Duw de hendel **A** achterwaarts en houd tegelijkertijd de lus **B** vast en duw of trek de zitting in de gewenste positie

OPMERKING!

Trek bij een transfer naar of uit de rolstoel de schuifzitting helemaal naar voren.

5.8 Remmen

Uw rolstoel heeft twee remmen.

Ze komen rechtstreeks op de banden terecht.

Om de vergrendeling te gebruiken, trekt u beide vergrendelingshendels tegen de aanslagen (fig. 5.11).

Om te ontgrendelen, duwt u de hendels terug naar hun oorspronkelijke positie.

Het remvermogen vermindert wanneer:

- het loopvlak van de band versleten is;
- de bandendruk niet voldoende is;
- de banden nat zijn;
- de wielvergrendelingen niet goed afgesteld zijn.

De wielvergrendeling is niet ontworpen om gebruikt te worden als remmen voor een bewegende rolstoel. U mag de wielvergrendelingen dan ook niet gebruiken om een bewegende rolstoel te doen remmen. Rem een bewegende rolstoel altijd met behulp van de hoepels. Zorg ervoor dat de afstand tussen de banden en de wielvergrendelingen voldoet aan de vermelde specificaties. Om die afstand aan te passen, draait u de schroef los en stelt u de juiste afstand in. Draai vervolgens de schroef weer aan (zie '6.6 Aanpassen van de remmen' op bladzijde 26).

⚠ OPGELET!

Telkens wanneer u de achterwielen hebt bijgesteld, moet u nagaan of de afstand tot de remmen in orde is. Pas die indien nodig aan. Wanneer u de wielvergrendeling te dicht bij het wiel monteert, zal deze moeilijker te hanteren zijn. Hierdoor kan de remverlenger breken! De hendel kan ook breken wanneer u op de remhendels gaat leunen tijdens transfers! Opspattend water en vuil van de banden kan slecht functioneren van de wielvergrendelingen veroorzaken.

Trommelremmen

Trommelremmen helpen een begeleider om veilig en goed te remmen. U kunt deze ook gebruiken met behulp van een vergrendeling (B) om te voorkomen dat u weggrolt. U moet de hendel in zijn plaats horen klikken. Trommelremmen werken onafhankelijk van de luchtdruk in de banden (fig. 5.12).

⚠ WAARSCHUWING!

- U mag de trommelremmen alleen door erkende dealers laten aanpassen.
- Gebruik de 2 trommelremmen altijd tegelijkertijd zodat u de controle over de rijrichting behoudt!
- Trommelremmen kunnen uitsluitend als dynamische rem worden gebruikt om de rolstoel te stoppen wanneer deze in beweging is.
- Schakel altijd de wielvergrendeling in tijdens een lange of korte stop, of bij het overplaatsen van de gebruiker, om de rolstoel op zijn plaats te houden.

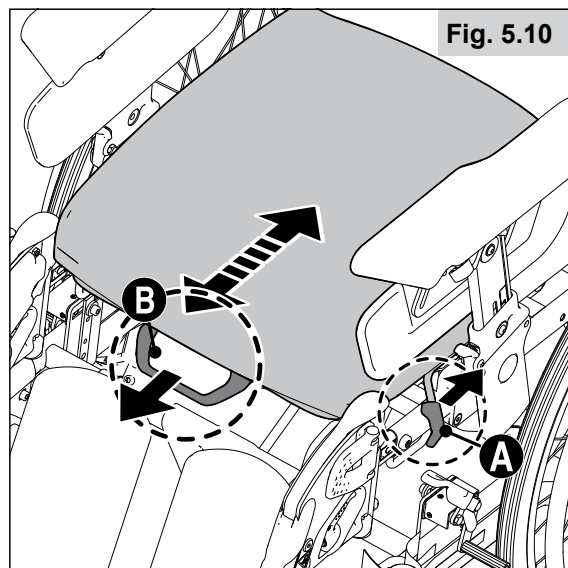


Fig. 5.10

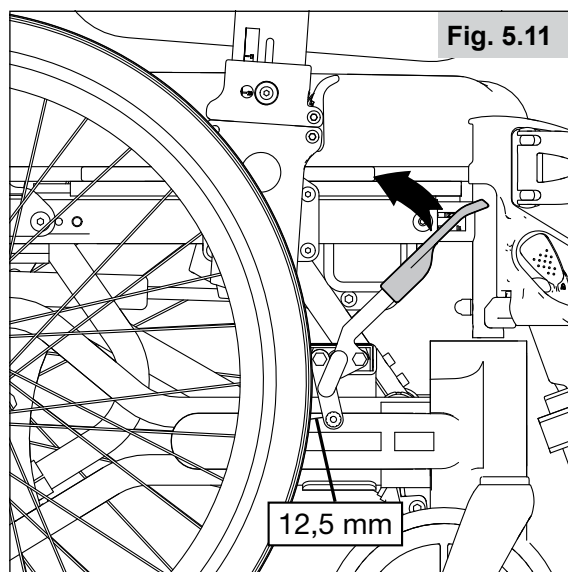


Fig. 5.11

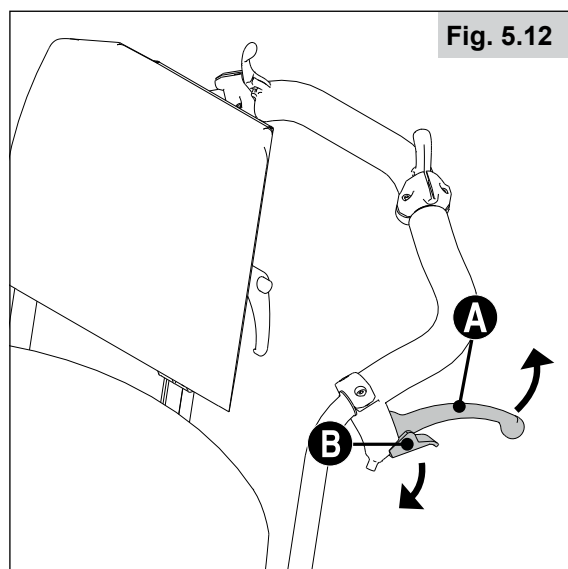


Fig. 5.12

5.9 Trapdop/anti-tip


De anti-tip is standaard zodanig afgesteld dat het mogelijk is om over drempels en dergelijke heen te rijden.

⚠ WAARSCHUWING!

Controleer bij gebruik van de rolstoel altijd of de anti-tip in de correcte positie staat.

De anti-tip wordt in positie gebracht door hem achterwaarts te draaien.

De trapdop is bereikbaar wanneer de anti-tip naar binnen of buiten is gedraaid.

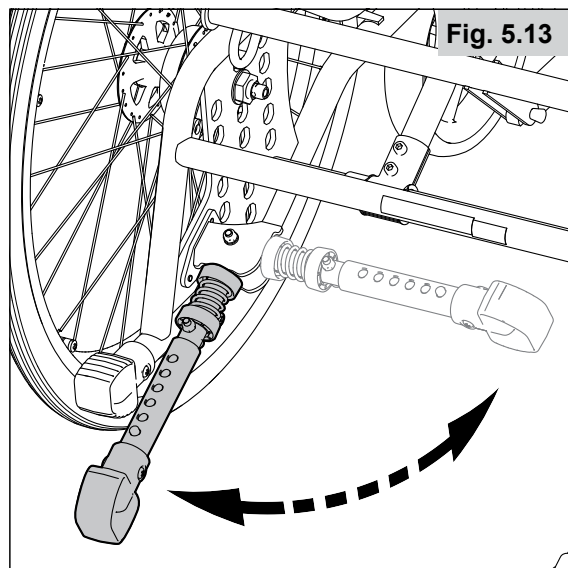

5.10 Wijzigen van de zitpositie door de rugleuning en zithoek aan te passen



- Pas de hoek van de rugleuning aan met de rechter stelhendel.
- Kantel de rolstoel met de linker stelhendel.

OPMERKING!

Voor een veilige aanpassing van de zitpositie moet de begeleider het duwhandvat stevig met één hand vastpakken en de stelhendels met de andere hand bedienen.

⚠ WAARSCHUWING!

De rolstoel kan instabiel worden wanneer de rugleuning en zitting in de meest naar achteren geplaatste positie worden gekanteld. Wanneer de zitpositie naar achteren wordt versteld, moet de anti-tip worden gebruikt.

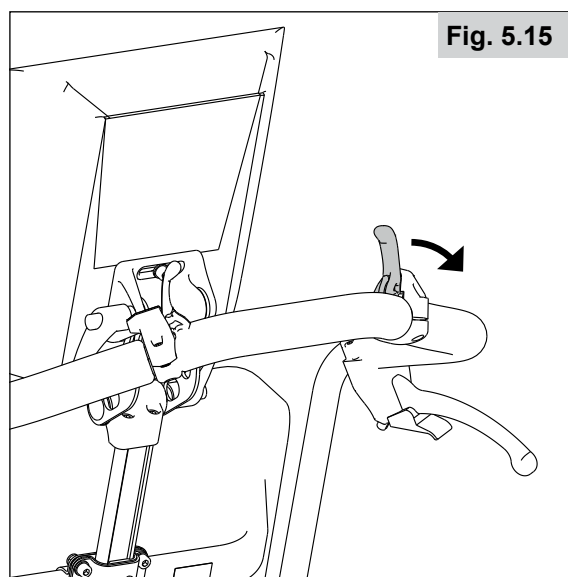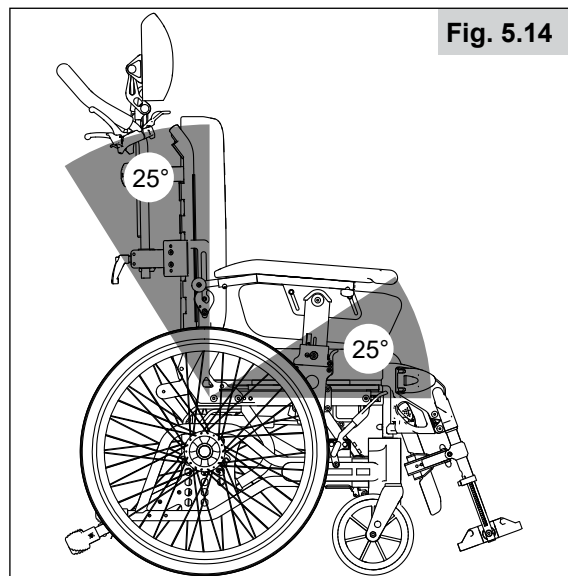

5.11 Verplaatsing in en uit de rolstoel

- Activeer de remmen
- Zwenk de beensteunen naar buiten of verwijder ze.
- Kantel de rolstoel voorwaarts
- Gebruik de schuifzitting voordat de gebruiker uit de rolstoel wordt verplaatst, zie “5.7 Sliding seat” on page 20.
- De gebruiker kan nu in of uit de rolstoel worden verplaatst door hem/haar handmatig of met een personenlift in of uit de rolstoel te tillen. Wanneer de gebruiker kan staan, kan hij/zij voorwaarts uit de rolstoel komen.

WAARSCHUWING!

- De voetsteunen mogen niet worden gebruikt om de stoel te tillen of te dragen wanneer de gebruiker in de stoel zit.
- Gebruik de voetplaten niet als u in of uit de rolstoel stapt.

WAARSCHUWING!

Deze moeten voordien omhoog worden gekanteld of de voetsteun moet zover mogelijk naar buiten worden geduwd.

Voor zijwaartse verplaatsing moet de armsteun omhoog worden geklapt of worden verwijderd.

OPGELET!

Let erop dat de wielvergrendeling niet wordt gedeactiveerd doordat de remhendel wordt geraakt.

Fig. 5.16

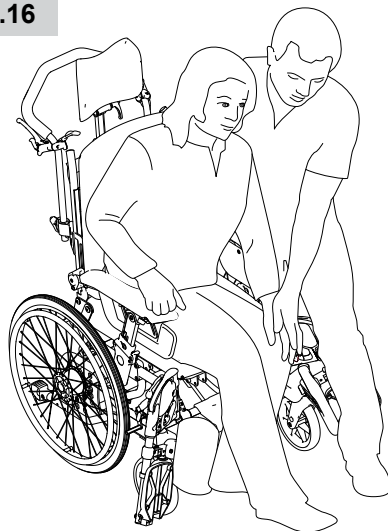


Fig. 5.17

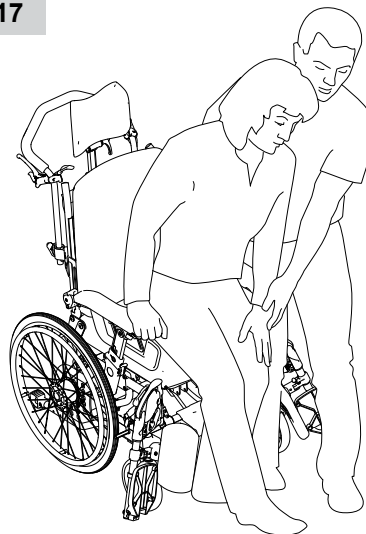


Fig. 5.18



5.12 Op of afgaan van obstakels, trappen

Als de rolstoel wordt opgetild terwijl de gebruiker erin blijft zitten, moeten de aanbevolen tilpunten worden gebruikt. Deze staan op de rolstoel aangegeven.


De kruisstang **A** op de rugleuning en het zitframe **B** vormen de tilpunten.

Om een betere tilpositie te hebben, kunnen begeleiders de zijde waar ze tillen, afwisselen.

WAARSCHUWING!

Til de rolstoel niet op aan:

- De armsteunen
- De hoekverstelbare beensteunen
- De bevestigingen van de beensteunen
- De hoekverstelbare duwstang

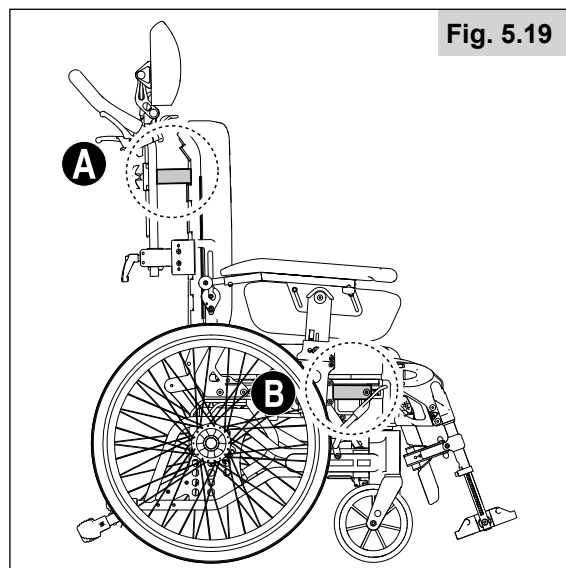


5.13 Op- of afgaan van obstakels, stoepranden

Klap, als het nodig is, de anti-tip omhoog of naar binnen. Wanneer u een stoep op of af gaat, plaatst u één voet op één van de trapdoppen **A** terwijl u met de duwstang stuurt. Kantel, waar nodig, de rolstoel naar achteren om ruimte te krijgen tussen het obstakel en de beensteunen.

Steil terrein

Wanneer de rolstoel regelmatig in heuvelachtig terrein wordt gebruikt, adviseren we, waar van toepassing, een aparte rem voor de begeleider te installeren.

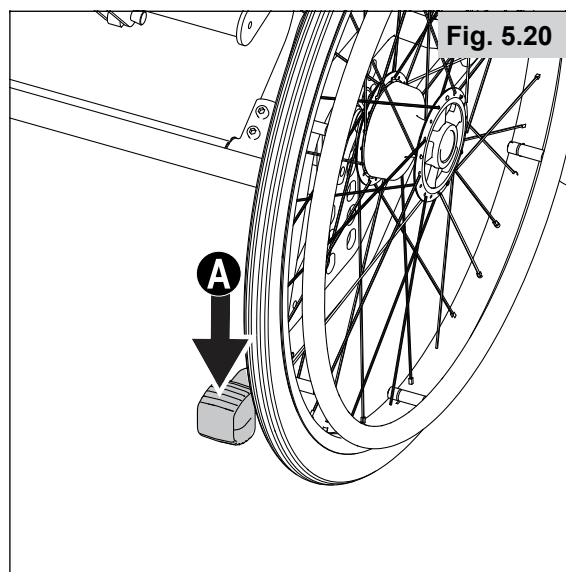

6.0 Instellingen

Er bestaat geen gemiddelde rolstoelgebruiker. Daarom kunnen rolstoelen van Sunrise Medical worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker.

Daarbij maken we een onderscheid tussen rolstoelinstellingen en opties om de rolstoel aan te passen. Instellingen worden slechts éénmaal uitgevoerd en dit moet door een gekwalificeerde specialist worden gedaan, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven. Aanpassingsopties kunnen door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Voor deze aanpassingen zijn geen gereedschappen nodig.

! WAARSCHUWING!

Wijzigingen aan de technische specificaties van de rolstoel zijn niet toegestaan. Aanpassingen aan de rolstoel of onderdelen daarvan zijn niet toegestaan.

6.1 De zittinghoogte instellen


De zithoogte kan gemakkelijk worden aangepast. De verschillende manieren om de zithoogte aan te passen, zijn van invloed op de mogelijkheid om obstakels te overwinnen en op de reigenschappen van de rolstoel.

! WAARSCHUWING!

Pas de Cirrus G5 niet zodanig aan dat u verschillende zithoogtes aan de voor- en achterkant hebt, omdat dit het evenwichtspunt en de rijeigenschappen kan beïnvloeden.

De zithoogte kan per 10 cm (4 hoogtes) worden aangepast zonder dat het noodzakelijk is om de wielen of wielvorken te wijzigen. De kogellager van de vork kan worden omgedraaid en er kunnen pasringen worden toegevoegd voor verschillende hoogtes aan de voorzijde. De gaten in het asplaat geven corresponderende verstelmogelijkheden aan voor de achterwielen. Als er verdere aanpassingen nodig zijn, kunnen andere wielmaten worden gebruikt.

Fig. 6.1

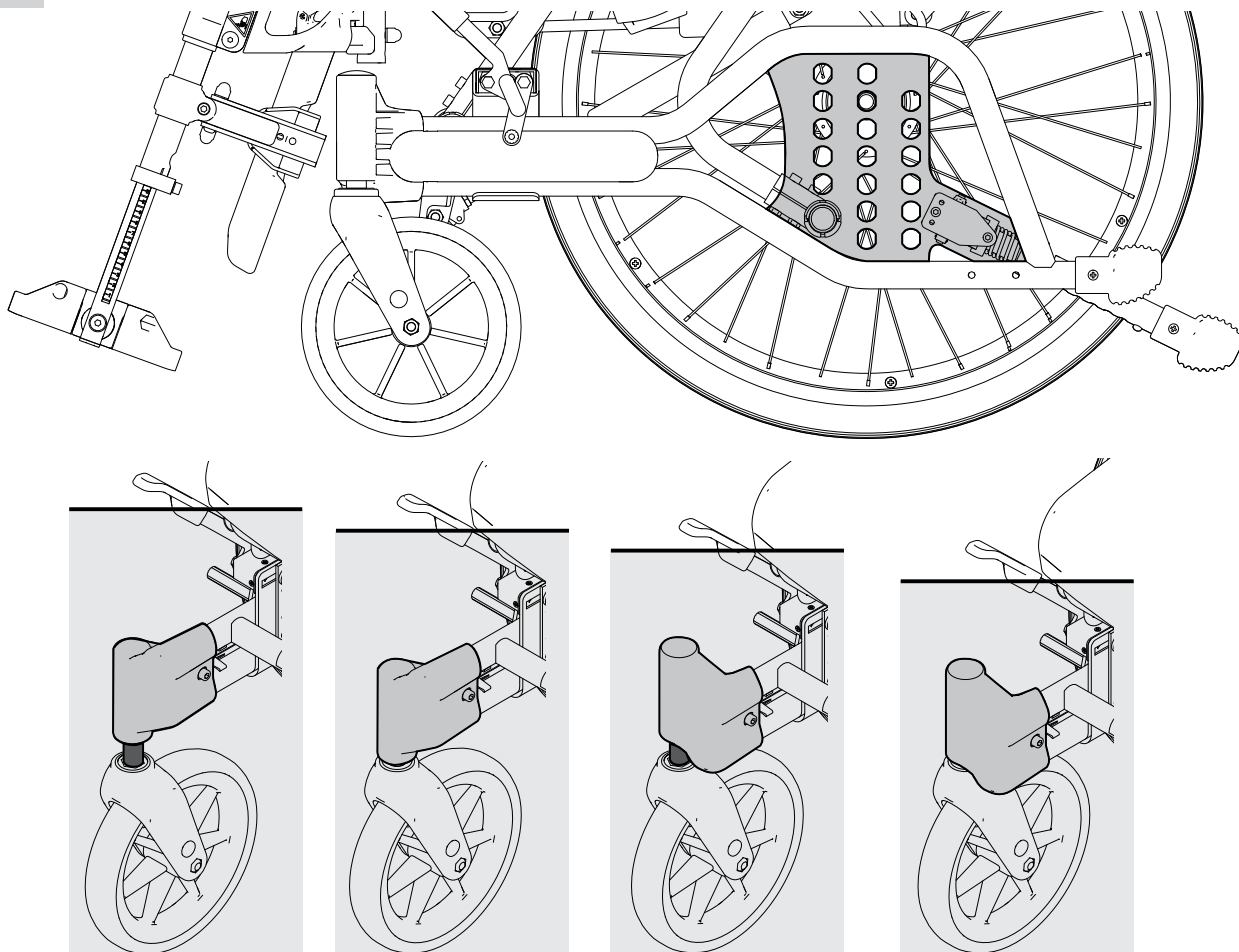

6.2 Aanpassen van de zithoogte achterzijde en het zwaartepunt

De zithoogte achterzijde kan hoger of lager worden ingesteld door het wiel hoger of lager op het frame te plaatsen. Als u wilt dat de rolstoel gemakkelijker rijdt, kunt u de aandrijfwielen naar voren verplaatsen. Als u wilt dat de rolstoel stabiel rijdt en niet zo snel kantelt, kunt u de aandrijfwielen naar achteren verplaatsen.

- Draai de bevestigingsmoer **A** op het wiel enkele malen rond, draai de behuizing **B** 90° en verplaats het wiel naar het gewenste gat.
- Draai de behuizing 90° terug en draai de bevestigingsmoer weer goed vast

⚠ WAARSCHUWING!

Vergeet niet de remmen en de anti tip aan te passen nadat u de zithoogte en het zwaartepunt hebt gewijzigd.

OPMERKING!

Wanneer u de zithoogte en het zwaartepunt aanpast, moet u beginnen met het aanpassen van de aandrijfwielen, gevolgd door de hoogte van de zwenkwielen.


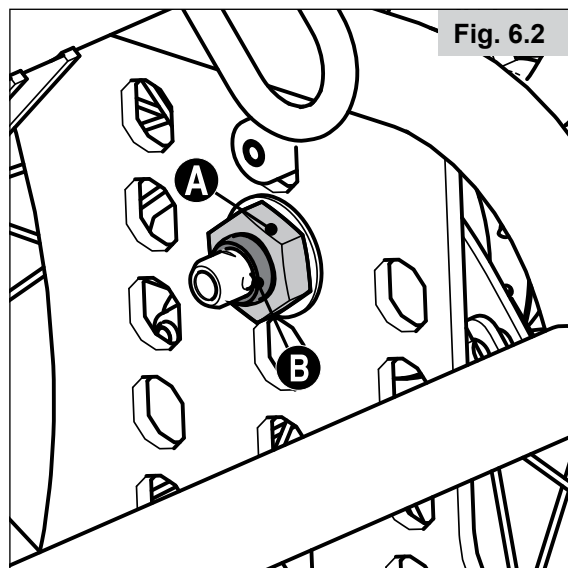


Fig. 6.3

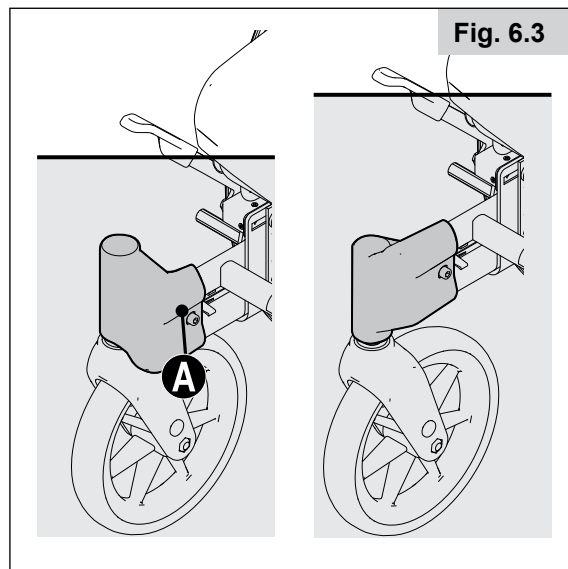


6.3 De zithoogte voorzijde aanpassen door de lagerbehuizing te draaien

- Draai de schroef **A** los.
- Haal het wiel en de vork los.
- Draai de lagerbehuizing om.
- Zet het wiel en de vork weer in elkaar.
- Draai de schroef **A** aan.

6.4 De zithoogte voorzijde aanpassen door pasringen toe te voegen/te verwijderen

- Haal het wiel en de vork los.
- Voeg pasringen toe of verwijder ze **B**.
- Zet het wiel en de vork weer in elkaar.

Fig. 6.4

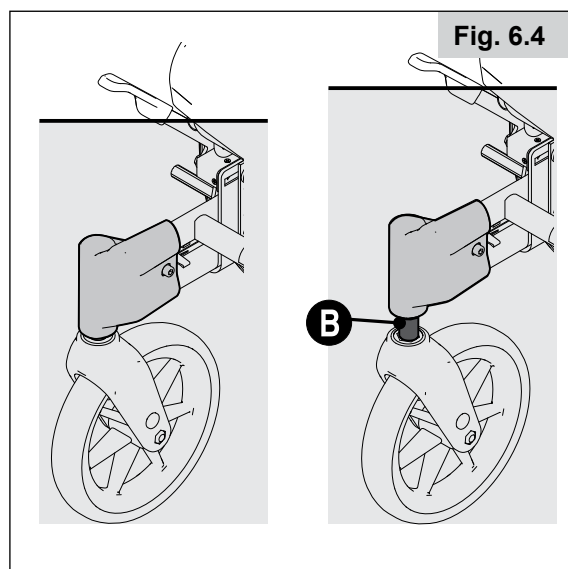

6.5 Andere manieren op de hoogte voorzijde zitting aan te passen

Het zwenkwiel in de vork in een hogere of lagere positie zetten.



- Door het zwenkwiel in de vork in een hogere positie te zetten, gaat de zitting naar beneden. Door het zwenkwiel in een lagere positie te zetten, gaat de zitting omhoog.

Grotere of kleinere zwenkwielen gebruiken

- Door een kleiner zwenkwiel te gebruiken, gaat de zithoogte omlaag, door een groter zwenkwiel te gebruiken, wordt de zithoogte verhoogd. Een kleiner zwenkwiel levert een kleinere draaistraal op. Hierdoor wordt het gemakkelijker om in krappe ruimtes over obstakels heen te rijden. Daarnaast krijgen de benen meer ruimte. Een groter zwenkwiel vergroot de draaistraal, maar verbetert ook het vermogen om op ongelijke ondergrond over obstakels te rijden.

Een langere of kortere voorvork gebruiken


- Een kortere zwenkwielvork verlaagt de zithoogte en levert een kleinere draaistraal op. Daarmee wordt het gemakkelijker om in krappe ruimtes over obstakels heen te rijden. Ook krijgen de benen meer ruimte. Een langere voorvork vergroot de zithoogte en maakt het mogelijk verschillende zwenkwielen te gebruiken.

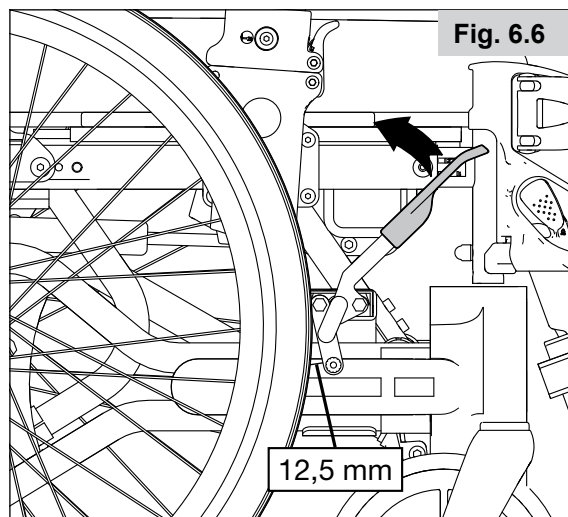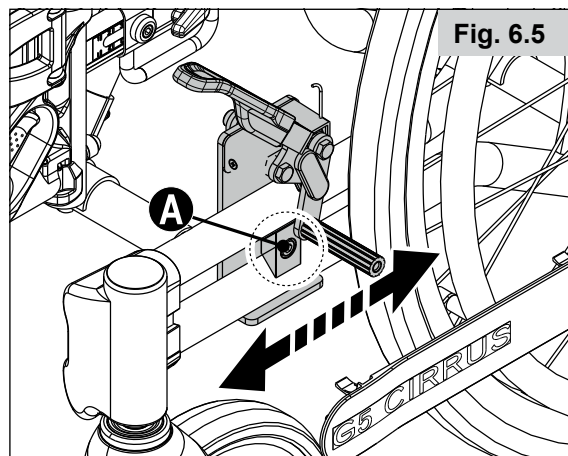

6.6 Aanpassen van de remmen (Fig. 6.6)

Doorgaans hoeven de met de rolstoel meegeleverde remmen niet te worden aangepast.

- Maak de schroef **A** los.
- Plaats de hele rem in de sleuf naar de gewenste positie.
- De juiste afstand tussen het remblok en het wiel bedraagt ongeveer 12,5 mm.
- Draai de schroef weer aan (tot 7 Nm).

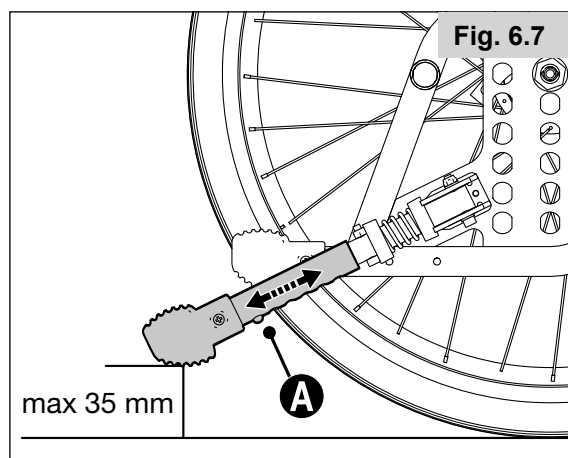

6.7 Aanpassen van de anti-tip

Aanpassing van de anti-tip bij wijziging van het zwaartekrachtspunt van de rolstoel. Vanaf de vloer gemeten mag de afstand naar het uiteinde van de anti-tip max. 35 mm bedragen.


Aanpassing lengte (fig. 6.7)

- Druk op de klikvergrendeling **A**.
- Trek of duw de anti-tip in de juiste positie.

Aanpassing hoek (Fig. 6.8)

De anti-tip kan in drie verschillende hoeken worden gezet.

- Maak de schroef **B** los.
- Draai de schroef **C** los. Plaats de schroef **C** naar het gat dat de gewenste hoek oplevert. Draai **B** en **C** weer aan.

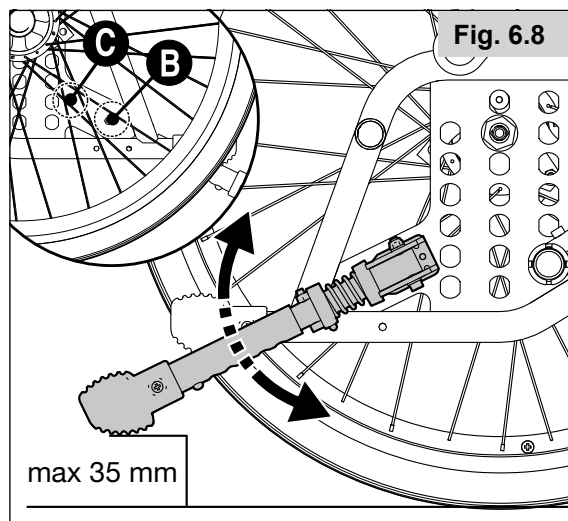

6.8 Aanpassen van de neksteun (Fig. 6.9)

Aanpassing diepte en hoek



- Maak de vergrendelingshendels **A** los, doe de aanpassing en draai de vergrendelingshendels weer vast.

Aanpassing hoogte

- Draai de vergrendelingsknop **B** los, doe de neksteun omhoog of omlaag, en draai de vergrendelingsknop weer vast.

Aanpassen van de kromming (alleen bij Comfort hoofdsteen met banden) (Fig. 6.10)


- Pas de geïntegreerde banden aan voor laterale ondersteuning en extra diepte-ondersteuning.

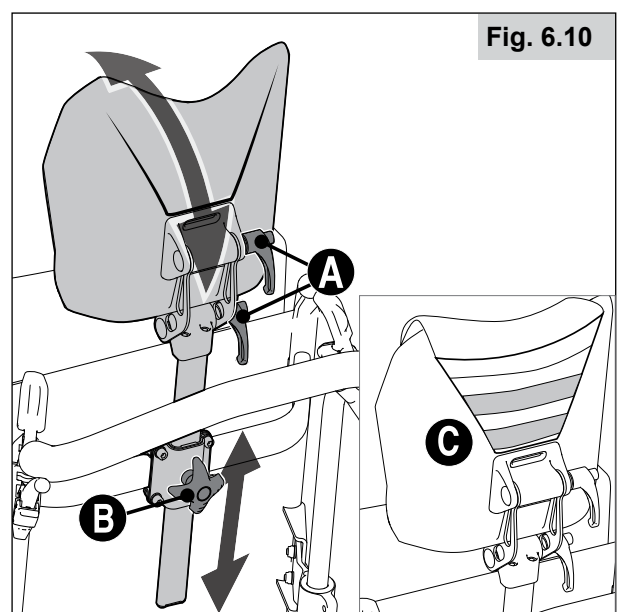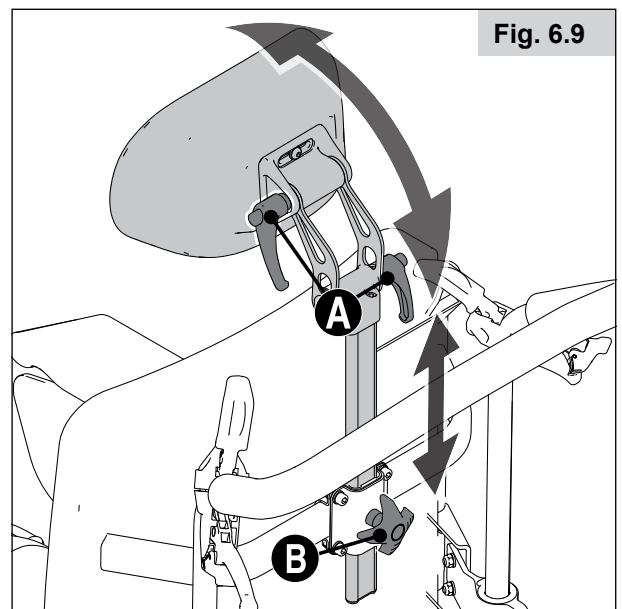

6.9 Aanpassen van de kromming van de rugleuning

De rolstoel heeft een gepolsterde rugleuning die aan de kromming van de rug kan worden aangepast. Hierdoor wordt een comfortabele zitpositie en goede stabiliteit verkregen. De gebruiker kan in de rolstoel blijven zitten terwijl de aanpassingen aan de spanbanden van de rugleuning wordt uitgevoerd.

- Maak de hoes van de rugleuning los om bij de banden te komen. Deze kunnen worden aangepast om de kromming van de rugleuning te wijzigen en zo maximaal comfort en optimale ondersteuning te bereiken.

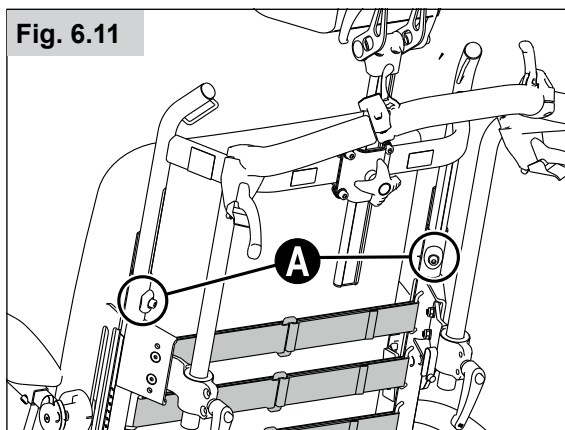


6.10 Aanpassing van de hoogte van de rugleuning (Fig. 6.11)

De rolstoel heeft een verstelbare rughoogte.

- Maak de schroef A aan beide kanten los, pas de hoogte naar wens aan en draai beide schroeven weer vast tot 9Nm.

6.11 Rompsteun (fig. 6.12)

De hoek, diepte en hoogte van de rompsteun kunnen worden aangepast. Hij kan opzij worden geklapt door op A te drukken (zie Onderdelenhandboek/Stroom)

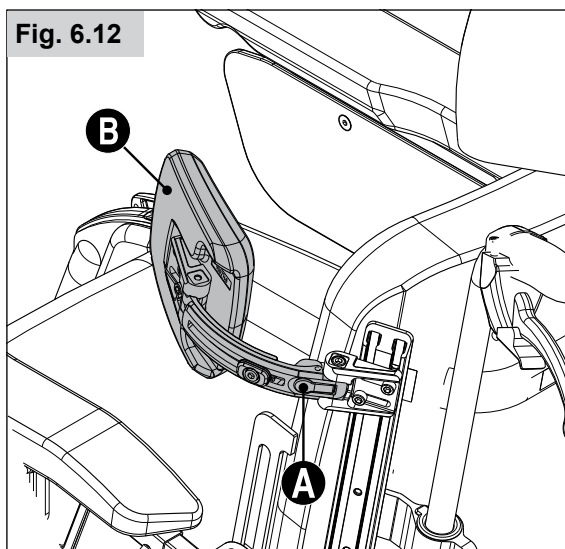


6.12 Aanpassen van de lengte van de beensteunen - Hoekverstelbare beensteunen (Fig. 6.13)

- De beensteunen zijn voorzien van een lineaire schaalverdeling A, waarmee u de juiste lengte kunt instellen.
- Om de lengte van de beensteunen aan te passen, draait u de schroef B los.
- Stel de beensteunen in op de gewenste lengte en draai de schroef weer vast (tot 7 Nm).


⚠ WAARSCHUWING!

Houd altijd minimaal 30mm ruimte tussen het laagste punt van de voetsteun en de grond.

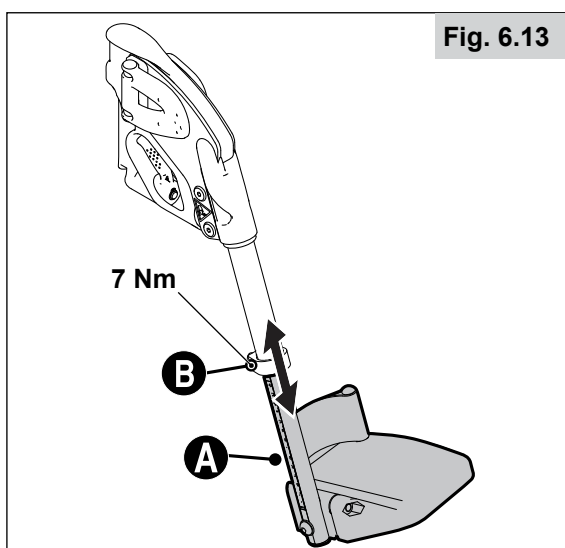

6.13 Aanpassen van de hoek van de vaste beensteunen (Fig. 6.14)

- Draai de moer A los.
- Trek of duw de beensteun in de gewenste hoek.
- Plaats de bout in het gewenste gat en draai hem aan

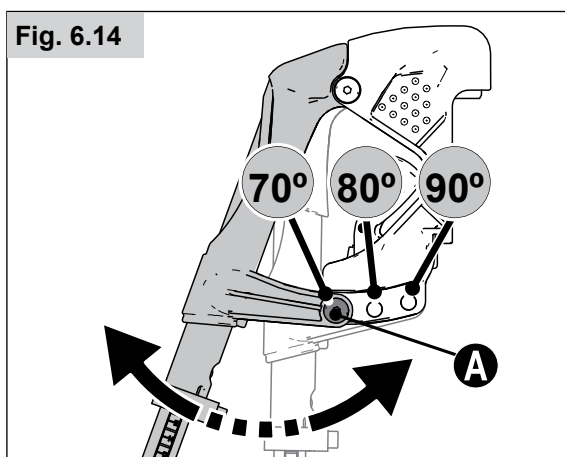

6.14 Voetenplaat - Aanpassing hoek (fig. 6.15)

- Maak de schroef **A** los.
- Verstel naar de gewenste hoek en draai de schroef weer aan.

6.15 Aanpassen van de zitdiepte/lengte bovenbeen door de bevestiging van de beensteun te verplaatsen (Fig. 6.16)

De diepte van de bevestiging van de beensteun kan worden aangepast, of de beensteun kan worden verwijderd.



- Draai de schroef **A** met behulp van een 4 mm inbussleutel los.
- Trek of duw de beensteun in de gewenste positie.
- Draai de schroef weer aan.

WAARSCHUWING!

De bevestiging van de beensteun mag niet meer dan 8 cm worden uitgetrokken.

6.16 Verwijder de bevestiging van de beensteun

- Draai **A** los met behulp van een 4 mm inbussleutel.
- Trek de bevestiging van de beensteun naar buiten.

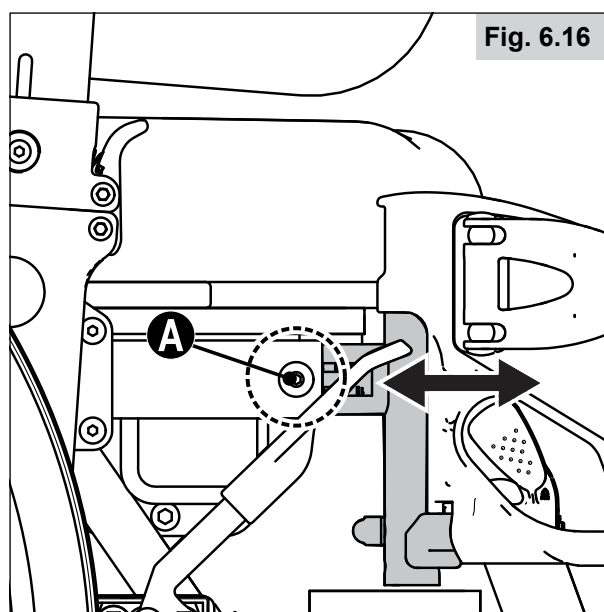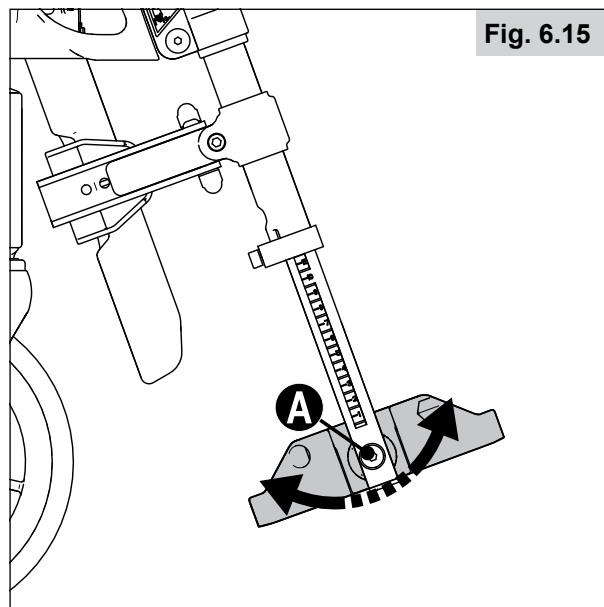



6.17 Aanpassen van de zitdiepte/het zwaartepunt (Fig. 6.17-6.18)

In aanvulling op de schuifzitting, kan de zitdiepte in 3 stappen van 30 mm worden aangepast door de bevestigingsbeugels van de rugleuning **B** naar voren of achteren te verplaatsen.

- Maak de bouten **A** aan beide zijden van de rolstoel los. Plaats de beugels in de gewenste positie en draai de bouten weer aan. Er moeten altijd één of twee gaten tussen de bouten open blijven.
- Draai de gasveerbout/moer **C** los en verplaats deze naar het gat dat overeenkomt met de gaten voor de bevestigingsbeugel van de rugleuning.
- Wanneer de voorste positie van de bevestigingsbeugel van de rugleuning wordt gebruikt, moet de bout/moer **C** naar het achterste gat worden verplaatst.

WAARSCHUWING!

Een aanpassing van het zwaartepunt kan van invloed zijn op de rijeigenschappen, de balans en het kantelpunt van de rolstoel. Wees met name voorzichtig wanneer u de rolstoel voor het eerst na een aanpassing weer gebruikt.

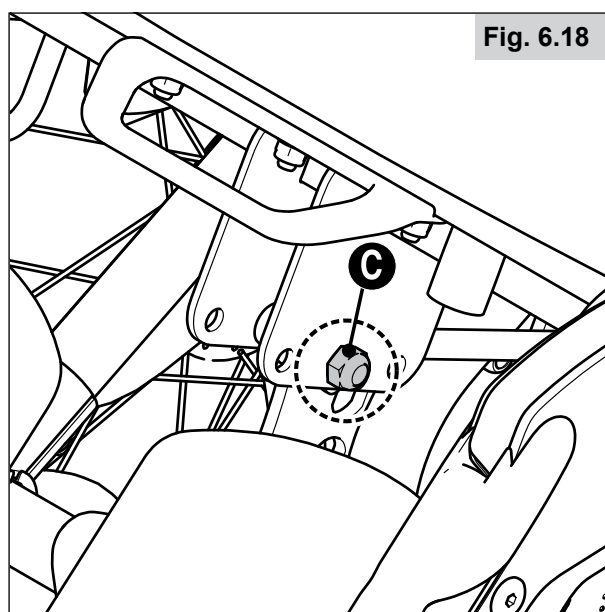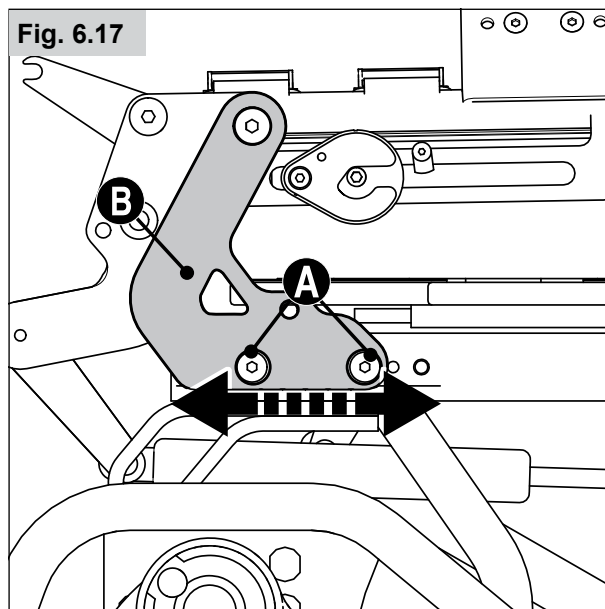

6.18 Aanpassen van de hoogte van de armsteunen (Fig. 6.19)

- Draai de schroeven **A** en **B** los.
- Zet de armsteun hoger of lager naar de gewenste positie.
- De schroeven opnieuw aan te draaien.

6.19 Aanpassen van de diepte van de armsteun (Fig. 6.20)

- Maak de schroef **A** los.
- Trek het kussen van de armsteun naar voren of naar achteren in de gewenste positie.
- Draai de schroef aan.

6.20 Aanpassen van de hoogte van het zijschot (Fig. 6.21)

- Draai de schroeven **A** los.
- Laat het zijschot naar de gewenste hoogte omhoog of omlaag glijden.
- Draai de schroeven aan

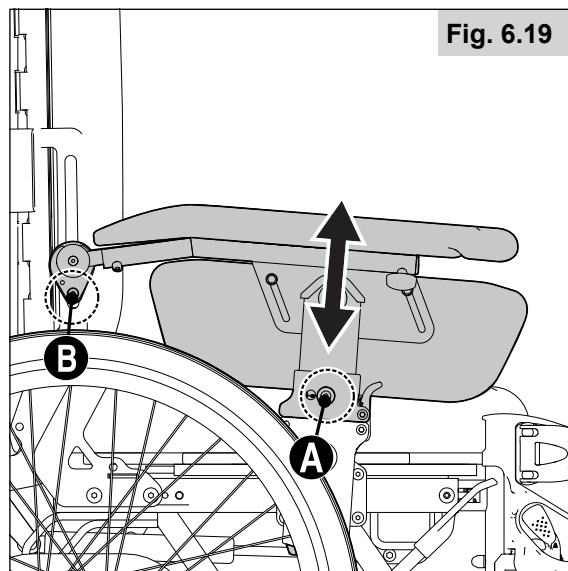


Fig. 6.19

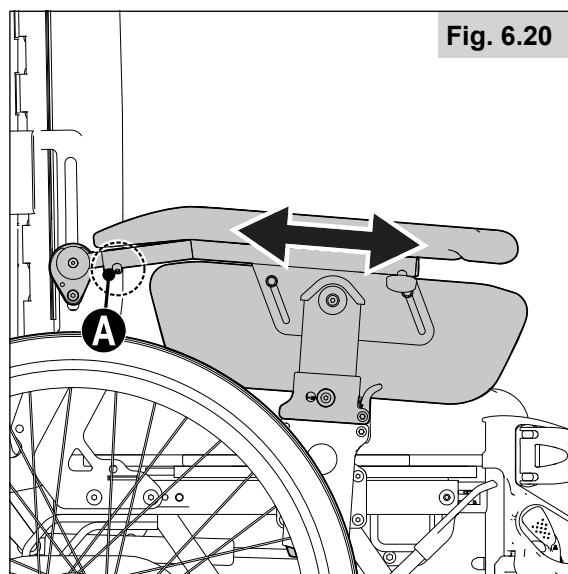


Fig. 6.20

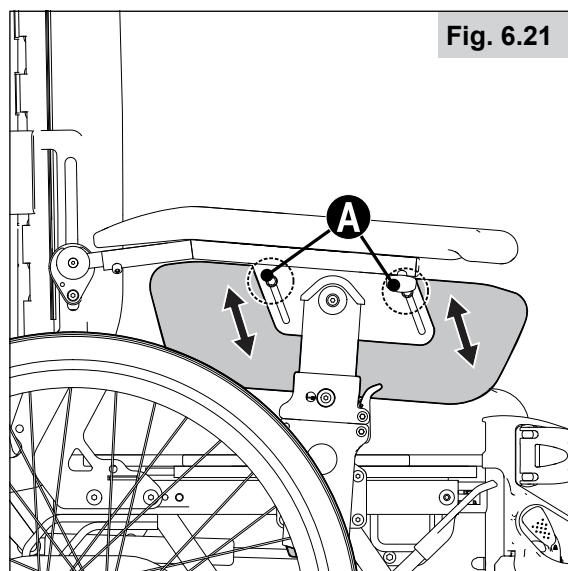


Fig. 6.21

6.21 Bevestigen van de heupgordel (accessoire)

GEVAAR!

Controleer, voordat u uw rolstoel gebruikt, of de heupgordel correct is aangepast en vastgemaakt.

De heupgordel dient aan de rolstoel bevestigd te zijn zoals getoond op de afbeeldingen. De gordel bestaat uit twee delen. Ze worden bevestigd d.m.v. de aanwezige schroef, die door het ringetje van de gordel wordt gestoken. De gordel wordt onder de achterzijde van het zijpaneel geleid. (Fig. 6.22).

WAARSCHUWING!

Wanneer de gordel over de heup tegen de zachte huid van de maag wordt geplaatst, kan dit leiden tot een verkeerde zitpositie waarbij de gebruiker in de rolstoel naar voren glijdt.

De heupgordel wordt als volgt aangepast aan de wensen van de gebruiker:

Om de lengte van de gordel te vergroten

- Om de gordel langer te maken, haalt u het niet-gebruikte deel van de gordel door de geleiders en gesp, (Fig. 6.23).

Om de lengte van de gordel te verkorten

- Haal vervolgens het niet-gebruikte deel van de gordel door de gesp en geleiders (Fig. 6.24).
- Controleer of de gordel niet om de sluiting is gedraaid. (Fig. 6.25)

Controleer na het vastmaken de ruimte tussen de gordel en de gebruiker. Als men een vlakke hand tussen de gordel en het lichaam van de gebruiker kan steken (niet meer en niet minder), is de gordel correct aangemeten. (Fig. 6.26)

Over het algemeen moet de heupgordel zodanig bevestigd zijn dat de gordel in een hoek van 45° vastgemaakt kan worden. Als de gordel op de juiste wijze bevestigd is, kan de gebruiker niet in de rolstoel naar beneden glijden. (Fig. 6.27).

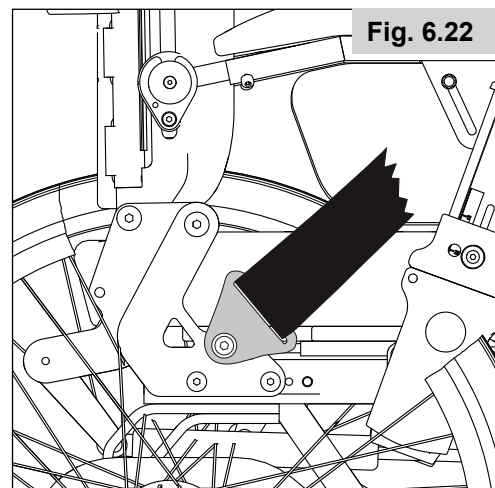


Fig. 6.23



Fig. 6.24



Fig. 6.25


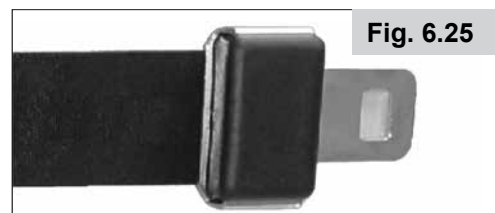


Fig. 6.26



Fig. 6.27

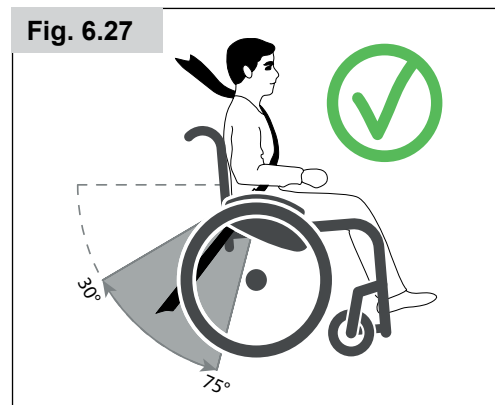

Om de sluiting te sluiten (Fig. 6.28):

- Steek de tanden van de gesp in de sluiting.

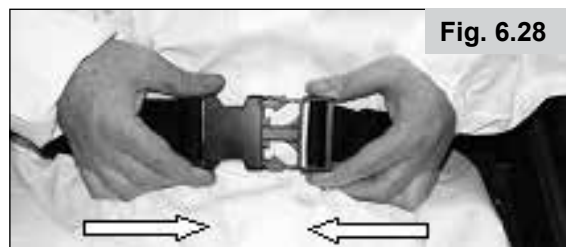


Fig. 6.28

Om de sluiting los te maken (Fig. 6.29):

- Druk de zijkanten van de gesp naar binnen / druk op de drukknop van de gesp terwijl u de twee gespdelen rustig uit elkaar trekt.



Fig. 6.29

Nuttige tips

GEVAAR!

- Gebruik niet alleen de heupgordel tijdens transport van de gebruiker en rolstoel in een voertuig. Gebruik ook de afzonderlijke heupgordel en diagonale veiligheidsgordels die in het voertuig aanwezig zijn.
- Sunrise adviseert om de heupgordel voor gebruik te controleren om er zeker van te zijn dat de gordel op juiste wijze is aangebracht, niet gehinderd wordt, niet versleten is en de sluiting goed gesloten is.
- Wanneer niet wordt gecontroleerd of de heupgordel in goede staat is en correct omgedaan is, kan dit leiden tot ernstig letsel van de scootmobielgebruiker. Een te losse gordel kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de rolstoelgebruiker naar beneden glijdt, waarbij gevaar op verstikking ontstaat.

WAARSCHUWING!

Wanneer de gordel over de heup tegen de zachte huid van de maag wordt geplaatst, kan dit leiden tot een verkeerde zitpositie waarbij de gebruiker in de rolstoel naar voren glijdt.

Sticker

Sticker

De sticker bevindt zich of op het kruisframe, of op de dwarsstang van het frame. Ook vindt u een sticker met gegevens in de gebruikershandleiding. Op de sticker met het serienummer staat ook de precieze naam van het model en andere technische gegevens. Wanneer u vervangingsonderdelen bestelt of een schadeclaim indient, moet u de volgende gegevens vermelden:

[VOORBEELD]

		 Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		 XXXX-XX-XX	
TYPE:		Wheelchair, Rollstuhl, Fauteuil Roulant, Silla de Ruedas		SN XXXXXXXXXXXXXXXX	
Cirrus G5		ISO 7176-19:2008			
 XXX kg	 max X°	 XXX mm	 XXX mm		

SOORT:	Naam product, SKU nummer
 max X°	De maximale veilige helling met anti-tip wielen, deze hangt af van de instellingen van de rolstoel, en van het postuur en de fysieke capaciteiten van de gebruiker.
 XXX mm	Zitbreedte
 XXX mm	Zitdiepte.
 XXX kg	Maximale belasting.
	VKCA-markering.
	CE-keurmerk.
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
 XXXX-XX-XX	Productiedatum
	Serienummer.
	Dit symbool betekent: Medisch hulpmiddel.
	Adres fabrikant.
	Crashtest heeft ondergaan volgens ISO 7176-19:2008.
	Adres van de importeur
 	Verantwoordelijke persoon VK
 	Het adres van de vertegenwoordiger in Zwitserland

Ons beleid is erop gericht het ontwerp van onze scootmobielen voortdurend te verbeteren. Hierdoor kunnen productspecificaties enigszins afwijken van de getoonde voorbeelden. Alle gewichten, afmetingen en gegevens betreffende prestaties zijn bij benadering en dienen slechts als richtlijn.

CE Alle rolstoelen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

 Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

Dagelijkse controle

⚠ OPGELET!

Als gebruiker bent u de eerste die mogelijke defecten opmerkt. Wij adviseren daarom dat u de onderstaande punten controleert voor ieder gebruik:

- Controleer of de bandenspanning correct is.
- Controleer of de wielvergrendeling correct werkt.
- Controleer of alle verwijderbare onderdelen, zoals armsteun, voetsteun, quick-release as en dergelijke, goed vast zitten.
- Controleer op zichtbare schade aan bijvoorbeeld het frame, de rugleuning, bespanning van zitting en rugleuning, wielen, voetplaten enzovoorts.
- Als u schade of slecht functionerende onderdelen ontdekt, neem dan contact op met uw erkende dealer.



ISO 7010-M002
Gebruikershandleiding/brochure moet worden gelezen! (Blauw icoon)

Banden en montage

De rolstoel wordt af fabriek standaard met massieve banden geleverd.

Wanneer u gebruikmaakt van luchtbanden, zorg er dan voor dat u de juiste bandenspanning houdt, want de bandenspanning beïnvloedt de prestaties van de rolstoel. Als er niet genoeg druk op de banden staat, zal de rolweerstand toenemen waardoor u een grotere inspanning moet leveren om de rolstoel voort te bewegen;

bovendien maakt een lage bandendruk de rolstoel minder wendbaar. Als de bandendruk te groot is, kan de band springen. De juiste druk voor een bepaalde band staat vermeld op het oppervlak van de band zelf, (Max. 3,5 bar).

De banden zijn op dezelfde manier op de velg aan te brengen als gewone fietsbanden. Alvorens u een nieuwe binnenband oplegt, moet u altijd controleren of er zich geen vreemde voorwerpen bevinden op de basis van de velg en de binnenzijde van de band. Controleer de druk nadat u een band opgelegd of hersteld hebt. Het is voor uw veiligheid en voor de goede werking van uw rolstoel van erg groot belang dat de voorgeschreven luchtdruk altijd gehandhaafd blijft en dat de banden in goede conditie zijn.

Algemeen onderhoud

Onderhoud

- Controleer de bandendruk om de 4 weken. Controleer alle banden op slijtage en beschadiging.
- Controleer de wielvergrendelingen ongeveer iedere vier weken om u ervan te verzekeren dat ze correct functioneren en gemakkelijk te gebruiken zijn.
- Verander de banden zoals u dat bij een gewone fiets zou doen.
- Alle verbindingen die van essentieel belang zijn voor het veilige gebruik van uw rolstoel zijn zelfvergrendelend.
- Controleer om de 3 maanden of alle bouten stevig vast zitten (zie hoofdstuk over het aandraaimoment).
- U mag borgmoeren maar één keer monteren en u moet ze vervangen na een bepaalde gebruikperiode.
- Gebruik alleen zachte (niet agressieve) schoonmaakproducten om uw rolstoel schoon te maken. Gebruik alleen water en zeep wanneer u de bekleding van de stoel en de heupgordel reinigt.
- Droog uw rolstoel af wanneer deze tijdens gebruik nat is geworden. Zo voorkomt u roest en zoutcorrosie.
- Om de 8 weken ongeveer moet u een klein beetje naaimachine-olie op de quick-release-assen aanbrengen. Afhankelijk van hoe frequent u uw rolstoel gebruikt, raden we aan dat u om de 12 maanden met uw rolstoel naar uw dealer gaat waar gespecialiseerd personeel hem kan nakijken.

OPGELET!

Zand en zeewater (of zout in de winter) kan de rollagers van de voor- en achterwielen beschadigen. Maak de rolstoel grondig schoon nadat die aan zand en zeewater is blootgesteld.

De onderstaande onderdelen kunnen worden verwijderd en voor reparatie teruggezonden naar de fabrikant/dealer:

Achterwielen, armsteunen, hanger, anti-tip wielen Deze onderdelen zijn als reserveonderdelen beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding onderdelen.

Hygiënemaatregelen bij hergebruik:

Voordat de rolstoel door een nieuwe gebruiker in gebruik genomen wordt, moet de stoel zorgvuldig worden voorbereid. Alle oppervlaktes waarmee de gebruiker in aanraking komt, moeten behandeld worden met een desinfecterende spray.

Hiertoe moet u een desinfectiemiddel gebruiken dat in uw land is toegestaan/wordt geadviseerd voor snelle, op alcohol gebaseerde ontsmetting van medische producten en medische hulpmiddelen die snel gedesinfecteerd moeten worden.

Wees u bewust van en volg de instructies van de fabrikant van het desinfecterende middel dat u gebruikt.

Over het algemeen kan op de naden van de rolstoel geen volledige ontsmetting worden gegarandeerd. We adviseren zitting- en rugbanden (slings) te verwijderen volgens de voor u geldende wetgeving inzake infectiebescherming om microbacteriële bestemming met actieve agentia te voorkomen.

Opslag

- Binnenshuis opbergen op een koele, droge plaats
- Tijdens de opslagperiode mag de omgevingstemperatuur niet lager dan -20°C of hoger dan +65°C zijn.
- Aanbevolen vochtigheid: 15% - 93%.
- Geen beperkingen op luchtdruk.

Mogelijke problemen

Rolstoel trekt naar één kant

- Controleer de bandenspanning (geldt alleen voor luchtbanden).
- Controleer of het wiel vlot draait (lagers, as)
- Controleer of de hoeken van de zwenkwielen gelijk zijn en of de wielen goed contact maken met de grond.
- Controleer of de lagers van de wielvork vrij draaien.

Voorwielen beginnen te wiebelen

- Controleer hoeken van zwenkwielen
- Controleer of alle bouten vast zitten; draai ze indien nodig vast (zie hoofdstuk over de koppelsleutel)
- Controleer of beide voorwielen de grond goed raken

Rolstoel piept en rammelt

- Controleer of alle bouten vast zitten; draai ze indien nodig vast (zie hoofdstuk over de koppelsleutel)
- Breng een beetje smeerolie aan op plaatsen waar beweegbare delen met elkaar in contact komen

Rolstoel begint te wiebelen

- Controleer de hoek en hoogte van de voorwielen
- Controleer bandendruk
- Controleer of achterwielen verschillend ingesteld zijn

Schokbrekers en kabels

⚠ OPGELET!


Om vermindering van de functie te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de kabels nooit te strak gespannen zijn.

Probleem:

Speling in de hendel

Oplossing:

Maak de stelschroef **A** los totdat de hendel **B** geen speling meer heeft (Fig. A).

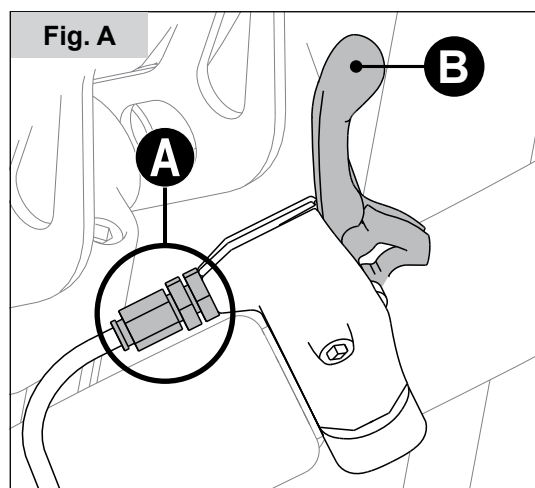

Instelling van de hoek van de zitting

Probleem:

De zitting gaat uit positie, zonder de vergrendeling van de schokbreker te gebruiken.

Oorzaak:

De Bowdenmantel op de schokbreker zijn te strak gespannen.

Oplossing:

Stel de Bowdenmantel op de stelschroef (1).

⚠ OPGELET!

Voorkom dat er een knik in de Bowdenmantel komt. Als er een knik in zit, moet de kabel worden vervangen.

Afvalverwerking / recycling van materialen

OPMERKING: Wanneer u de rolstoel gratis heeft ontvangen, is deze mogelijk niet uw eigendom. Wanneer u de rolstoel niet langer nodig hebt, volg dan de instructies op van de organisatie van wie u de rolstoel hebt ontvangen. De organisatie wil de rolstoel vermoedelijk terug hebben.

De onderstaande informatie heeft betrekking op de in de rolstoel en verpakking gebruikte materialen, voor wat betreft de afvalverwerking of recycling van de rolstoel en het verpakkingsmateriaal. Er kan specifieke wetgeving bestaan in uw land of woonplaats; neem deze wet- of regelgeving in overweging, wanneer u de rolstoel naar de afvalverwerking wilt brengen. (Dit kan inhouden dat u de stoel voor verwijdering naar de afvalverwerking moet schoonmaken en ontsmetten).

Staal:	bevestigingsmateriaal, QR assen, zijkanen, armsteunen, frame, beensteunen, duwhandvatten.
Plastic:	Handgrepen, zwenkwielvorken, dopjes, zwenkwielen, voetplaten, armkussens, 12" wiel/banden, wielen, zijkant.
Verpakking:	lage-dichtheid polyethyleen zak, kartonnen doos.
Bekleding:	Geweven polyester met PVC coating en geëxpandeerd gevormd schuim.

Afvalverwerking of recycling dient plaats te vinden via een erkende agent, afvalverwerking met vergunningen. Als alternatief kunt u uw rolstoel ook terugbrengen naar uw dealer voor verdere afvalverwerking.



Accessoires

Aandrijf wiel en bevestiging aandrijf wiel

- Aandrijfwielen zijn in uiteenlopende maten en types verkrijgbaar: massief, hogedruk en luchtgevuld
- Hoepel
- Hoes
- Spaakbeschermers
- Aandrijfwielen 20", 22" en 24" met rem voor begeleider
- Transportwielen 16" met rem voor begeleider

Zwenkwiel en bevestiging zwenkwiel

- Zwenkwielen zijn er in uiteenlopende maten en types: massief en luchtgevuld
- Wielvork zwenkwiel in diverse maten

Beenondersteuning

- Diverse beensteunen en voetplaten
- Beensteunen met 70° en 90° hanger
- Amputatiesteun

Hoofdsteunen

- Diverse hoofdsteunen

Armsteunen en zijschotten

- Hemiplegische armsteunen

Verschillende accessoires

- Krukkenhouder
- Tafel
- Diverse zitting- en rugkussens
- Positioneringsgordel

Montage-instructies worden bij de accessoires meegeleverd.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde vestiging van Sunrise Medical of zorgwinkel voor accessoires en reserveonderdelen.





Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr



OM_Cirrus G5_EU_NL_
Rev.K_2024-12-27