

### JAY<sup>®</sup> Combi Soft P Sittdyna


#### VIKTIG KONSUMENTINFORMATION

OBS: Denna manual innehåller endast kortfattade instruktioner gällande användande av denna produkt. Vänligen läs också den fullständiga bruksanvisningen för produkten innan produkten används.

#### ANVÄNDARE:

Innan du använder denna produkt, vänligen läs den fullständiga bruksanvisningen och spara den sedan för framtida behov.

#### Kortbruksanvisning

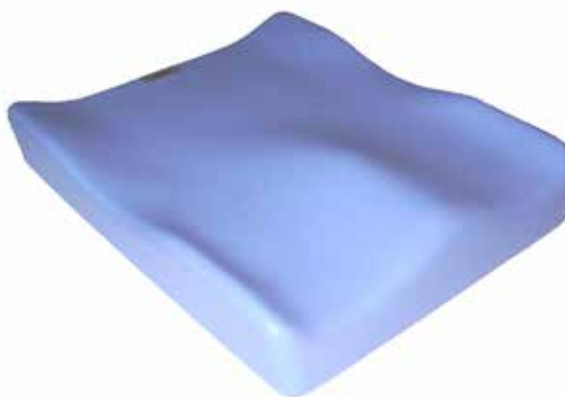

**Sunrise Medical rekommenderar att en läkare, terapeut eller rehab-tekniker, med erfarenhet av sitsprodukter och positionering, gör bedömningen huruvida en Jay combi soft p dyna är lämplig.**

## PLACERING AV DYNAN

Dynans längd skall nå till inom 2,5 - 5 cm från knävecket. Lägg in dynan mot ryggstödet med materiellapparna baktill och knölen vid framkanten. Firmamärket skall synas på höger sida av dynan.

Undvik användning av dynan på ett mycket uttänjt säte. Byt ut det uttänjda sätet eller köp ett Jay Fast sitsilägg för din dyna. Kontakta din förskrivare för demonstration.

## LÄTT UNDERHÅLL

Rengöring varje månad och regelbundet underhåll kan hjälpa till att förlänga livet på din dyna. Vi rekommenderar inspektion av delarna vid rengöring. Kontrollera överdraget för revor och extra nötning.

### Rengöring av överdraget

Tag av överdraget från skumdynan. Vänd överdraget ut och in, tvätta i maskin i varmt vatten, och häng till torkning eller torka i tummlare på låg värme. Strykning behövs inte.

**Märk:** Överdraget får inte kemtvättas, eller tvättas och torkas i industrimaskiner. Överdraget får heller inte ångtvättas under högtryck, eller blekas. Efter tvätten, dra tillbaka överdraget utanpå skumgrunddynan. Var säker på att bakkanten av överdraget passar ihop med bakkanten på skumgrunddynan.

### Rengöring av skumgrunddynan

Ta av överdraget på skumgrunddynan. Tvätta av den med varmt vatten och tvål. Torka efter med en ren duk. Undvik att helt sänka ner skumgrunddynan i vatten.

**Vid problem med dynan eller tryck kontakta din Arbetsterapeut eller sjukgymnast.**

Max brukarvikt: 150 kg

Sunrise Medical AB  
Neongatan 5,431 53 Mölndal  
Sweden  
Tel: +46 (0) 31-748 37 00  
[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)



This product is manufactured to comply with the 'Medical Device Directive' 93/42/EEC.