

EN

Clamp version for the Life & Mobility products (will be clamped around the oval frame tubing)

Fitting the docking system (Fig. 1.0)

Position the clamping jaw (1 & 2) around the lower frame tube (9) from the outside and the bar (4) from the inside and screw both parts together with the screws (5). Make this attachment on both sides in the same way.

Position the two clamps (B-C) exactly opposite each other (Fig.2.0) in such a way that both clamps are at the same height.


To do this use a reference point from which you can measure (e.g. from the axle plate of the wheelchair to the clamp). If necessary undo the screws (5) a little and move both clamps (B-C) so that they are at the same level. Then re-tighten the screws (5) (Torque setting: 3 Nm).

Mounting the control unit (Fig. 3.0)

Take the complete control unit (T) through the rear zip fastening of the back pack. Now undo the screws (1.4) – position the gripper clamp (1.2) from the outside and the beam clamp (1.1) from inside around the backrest tube. (Torque setting: 3 Nm).

Please note: The above list is an indication of wheelchair models Roxx & Canto the R20 can be mounted on. However year of build, frame shape, back accessories, connecting bars between the side frame, type of push handles, special settings, frame accessories are of influence. Therefore it is essential to try and test it to be 100% sure! Or ask your supplier for advice.

Attention: In case of a reclining or angle adjustable back the backpack weight of the R20 (~2kg) may affect the stability and could cause a tipping backward. Therefore we strongly recommend to use anti tips.

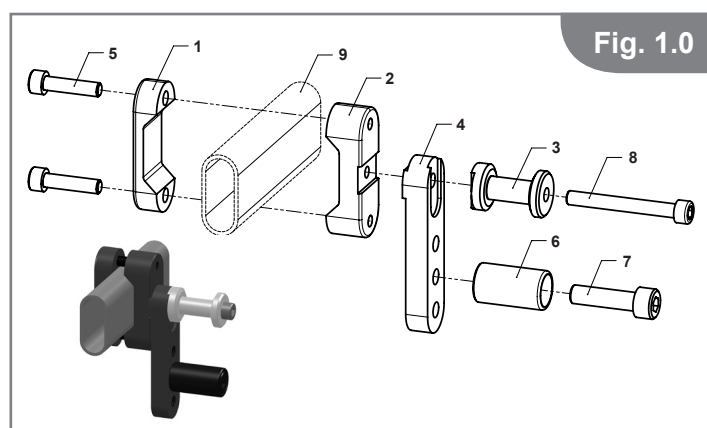

NL

Klemmen ten behoeve van Life en Mobility producten (worden geklemd om de ovalen buizen)

Montage van het aankoppelsysteem (Fig. 1.0)

Positioneer de frameklemmen (1 & 2) om de onderste frame buis met deel (9) aan de buitenzijde en (4) aan de binnenzijde van het frame en schroef beide delen aan elkaar met de schroeven (5). Doe dit aan beide zijden van het frame.

Positioneer de twee klemmen (B-C) exact tegenover elkaar (Fig.2.0) zodat beide klemmen op dezelfde hoogte zitten.


Gebruik, om dit te controleren, een refentiepunt van waarvandaan je kan meten (bijv. van de asplaat van de rolstoel tot aan de klem). Indien noodzakelijk kunnen de schroeven (5) iets losgedraaid worden en beide klemmen (B-C) verschoven worden zodat ze op gelijke hoogte eindigen. Draai de schroeven (5) vervolgens vast (draaikracht: 3 Nm)

Montage van de bediening (Fig. 3.0)


Haal de hele bedieningseenheid (T) door de achterste ritssluiting van de rugzak. Maak nu de schroeven (1.4) los - plaats de klem (1.2) vanaf de buitenzijde en de klem (1.1) vanaf de binnenzijde rond de stang van de rugleuning (draaikracht: 3 Nm).

Let op: Bovenstaande lijst is een indicatie van rolstoelmodellen van de Roxx & Canto waarop de R20 gemonteerd kan worden. Het bouwjaar, frame opties, rug accessoires, verbindingstaven tussen het zijframe, type duwbeugels, speciale instellingen, frameaccessoires zijn echter van invloed. Daarom is het essentieel om het uit te proberen en te testen om 100% zeker te zijn! Of vraag uw leverancier om advies.

Pas op: In het geval dat de rolstoel is uitgerust met een rughoek- of kantelverstelling, kan het gewicht van de rugtas van de R20 (~ 2 kg) de stabiliteit beïnvloeden en kan het de rolstoel achterover laten kiepen. Daarom raden we ten eerste aan om in geval van een rughoek- en/of kantelverstelling gebruik te maken van anti-kiep wielen.

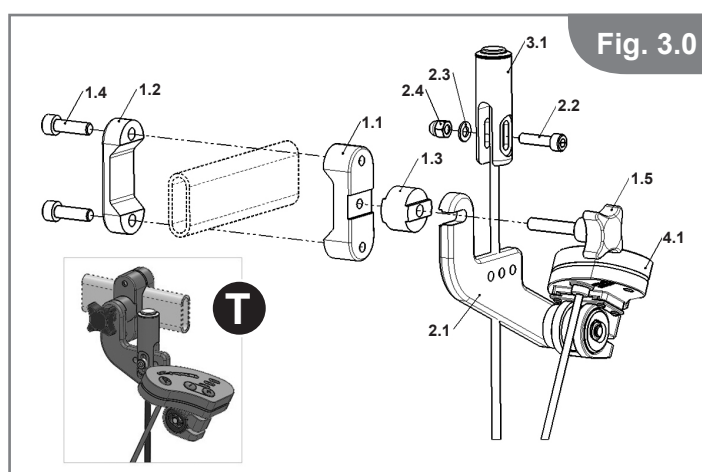

EN Images lower frame clamp
NL Afbeeldingen montageklemmen

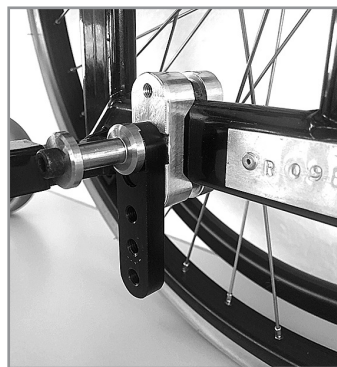

EN Images lower control unit clamp
NL Afbeeldingen montage bedieningseenheid



EN Back pack fixation
NL Rugzakmontage



EN Attached to the chair
NL Gemonteerd op de rolstoel

