

StreetJet

Guida alla Compatibilità



Marca e modello della carrozzina	Sistema di aggancio	Marca e modello della carrozzina	Sistema di aggancio
Sunrise Medical		RGK	
Nitrum	C	Tiga	B
Nitrum Hybrid	C	Tiga Sub4	B
Helium	C	Tiga F2	B
Xenon ²	C	Octane	B
Xenon ² Hybrid	C	Octane Sub4	B
Argon ²	B	Hilite	B
Neon ²	A	Hilite XTR	B
Easy 200	A	Maxlite	A
Easy Life R	A		
Easy Life F	A		
Easy max	A		
QS5 X (solo versione FF)	B		

Nota: Questa lista fornisce solo un'indicazione delle marche e dei modelli di carrozzine su cui StreetJet può essere applicato. E' importante ricordare che forma del telaio, centro di gravità, misura delle ruote e profondità della seduta potrebbero influenzarne la compatibilità. Inoltre, è necessario che sui tubi del telaio anteriore sia presente una sezione diritta lunga almeno 45 mm per l'aggancio dei morsetti. Per questa ragione è essenziale provare e testare la carrozzina completa di StreetJet per essere sicuri al 100%! Chiedere consiglio al rivenditore. La guida alla compatibilità riporta unicamente le carrozzine per cui è stato siglato un accordo ufficiale tra le aziende produttrici coinvolte. Seguendo le indicazioni riportate nelle prossime pagine è possibile controllare in 6 passi la compatibilità di StreetJet con la carrozzina.


StreetJet

Controllo della Compatibilità in 6 passi

StreetJet è compatibile con carrozzine dal telaio chiuso o aperto, con pedane integrate e angolo anteriore del telaio compreso tra 75° e 90°. Per essere sicuri della compatibilità tra StreetJet e la carrozzina, seguire i passi qui riportati per il controllo della compatibilità.


1 - Accordo di Compatibilità - Controllare se è stato siglato un accordo di compatibilità tra StreetJet e la carrozzina. E' possibile trovare tutti gli accordi di compatibilità su www.SunriseMedical.it

2 - Diametro dei Tubi del Telaio Anteriore - Controllare se i morsetti disponibili per il montaggio di StreetJet si adattano ai tubi del telaio anteriore della carrozzina. Sono disponibili i seguenti morsetti:

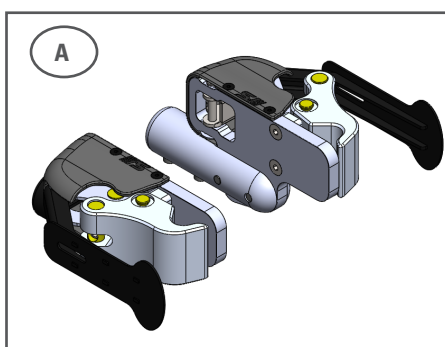


Versione A

Morsetti One-Touch per tubi del telaio rotondi, diametro regolabile da 19 mm a 24 mm (STE010053)

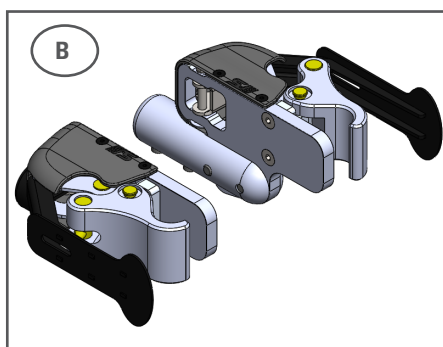

Versione B


Morsetti One-Touch per tubi del telaio rotondi, diametro regolabile da 25 mm a 35 mm (STE010054)

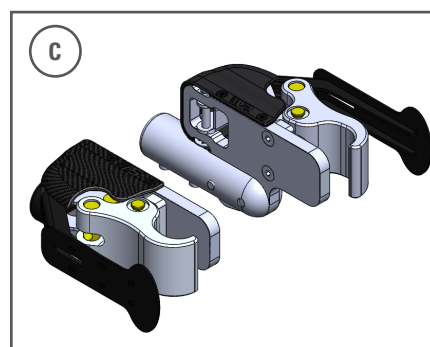

Versione C

Morsetti One-Touch per tubi del telaio ovali (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon² FF) (STE010059)

3 - Altezza Minima Richiesta per il Montaggio - L'angolo ottimale di StreetJet rispetto al terreno è di 80°. Per una prestazione ottimale si raccomanda di non montare i morsetti a un'altezza minore di 340 mm (misurata dal terreno all'estremità inferiore del morsetto).

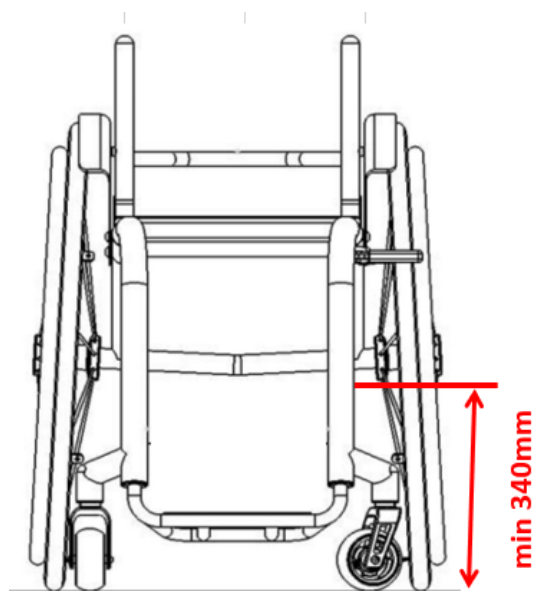



Ruota da 12" e 16"

Altezza minima di montaggio 340 mm

StreetJet

Controllo della Compatibilità in 6 passi

4 - Misurazione della Sezione Diritta del Telaio - Per applicare in modo corretto i morsetti One-Touch è necessario che sui tubi del telaio anteriore sia presente una sezione diritta lunga almeno 45 mm. Controllare che sui tubi del telaio anteriore sia presente una sezione diritta lunga almeno 45 mm, misurata all'altezza minima di montaggio di 340 mm o più in alto. In caso di telaio convergente, la posizione di montaggio si deve trovare sotto la curva.

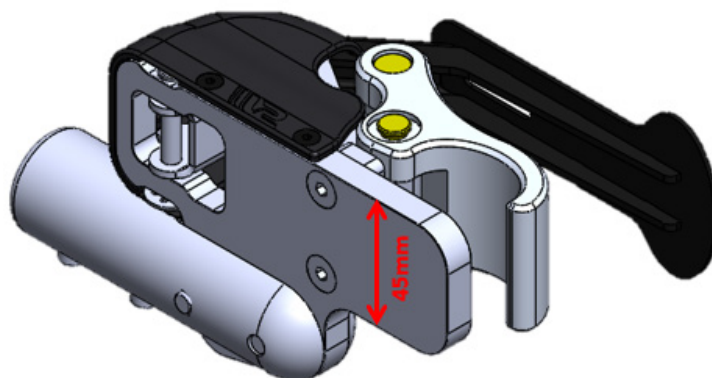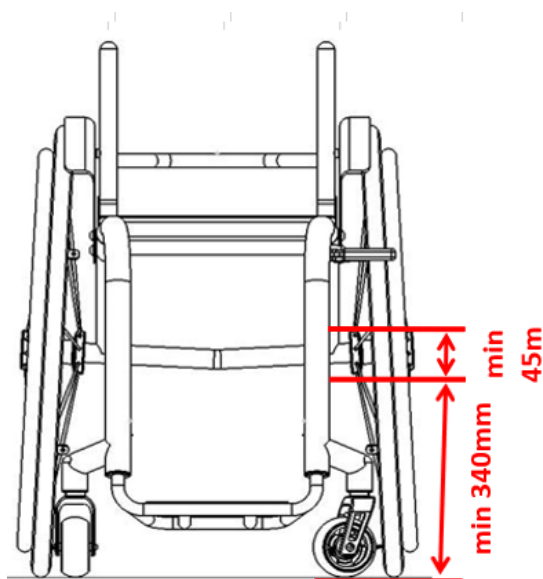


Ruota da 12" e 16"

Altezza minima di montaggio 340 mm

5 - Larghezza del telaio anteriore - La larghezza del telaio anteriore misurata da interno tubo a interno tubo, all'altezza minima di montaggio di 340 mm o più in alto, deve essere compresa tra 220 mm e 425 mm.

La larghezza così misurata può differire dalla larghezza della seduta per il metodo di misurazione utilizzato o per la versione del telaio (convergente, a V, in abduzione o adduzione, ecc.). Per controllare la compatibilità utilizzare esclusivamente la dimensione del telaio anteriore rilevata e non la larghezza della seduta.

Selezionare sulla scheda d'ordine la larghezza del telaio anteriore della carrozzina!

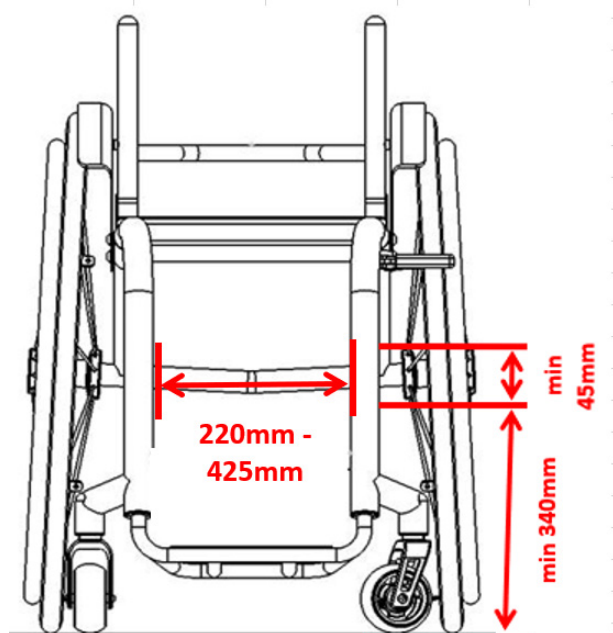

Larghezze del telaio anteriore possibili:

da 220 a 275 mm

da 275 a 330 mm

da 330 a 425 mm

StreetJet

Controllo della Compatibilità in 6 passi

6 - Altezza della pedana - La distanza da terra alla parte inferiore dell'appoggiapiedi deve essere almeno 60 mm

