



Jockey Basic

Bedienungsanleitung

Oktober 2020



Sicherheit

Alle Krabat-Produkte sind CE-gekennzeichnet nach 93/42 / EØF, Klasse 1 vom 14. Juni 1993 - Medizinprodukterichtlinie. Dies bescheinigt, dass sie alle relevanten europäischen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Dieses Handbuch ist nach diesen Normen genehmigt. Die Haltbarkeit des Produktes entspricht einer Lebensdauer von etwa 5 Jahren bei normalem Gebrauch.

Nach etwa 5 Jahren sollte das Produkt von Krabat AS oder einem zugelassenen Partner erneuert werden, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Der gesamte Service muss von Krabat oder einem autorisierten Partner durchgeführt werden.

Produkte mit elektrischen Komponenten müssen bei Krabat zur technischen Überprüfung/Überholung eingereicht werden, bevor sie wieder in Gebrauch genommen werden.



Das CE-Kennzeichen ist zu entfernen, wenn das Produkt verändert wird oder Nicht-Originalteile verwendet werden!



Anpassungen, die nicht in den Krabat-Benutzerhandbüchern beschrieben sind, dürfen nur von Krabat oder von durch Krabat genehmigtem Personal durchgeführt werden.



Krabat-Produkte sind kein Spielzeug! Unsachgemäßer Gebrauch kann sowohl dem Benutzer als auch dem Produkt Schaden zufügen.



Garantie

Krabat gewährt für alle Produkte eine Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie bezieht sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die Garantie kann reduziert oder aufgehoben werden, wenn Service oder tägliche Wartung nicht eingehalten werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dafür zu sorgen, dass die Wartung durchgeführt wird.

Die Garantie deckt keine zufälligen Schäden ab, einschließlich Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung verursacht wurden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf normalen Verschleiß oder Verschleißteile.

Die Garantie ist ungültig, wenn Nicht-Originalteile verwendet werden oder wenn das Produkt durch nicht von Krabat autorisiertes Personal repariert oder modifiziert wird.



Jockey Basic

01.0. Allgemein.....	s. 04
02.0. Hauptkomponente.....	s. 05
03.0. Anwendung.....	s. 06
04.0. Zubehör.....	s. 08
05.0. Wartung.....	s. 08
06.0. Individuelle Anpassungen.....	s. 08
07.0. Technische Daten.....	s. 09
08.0. Symbole.....	s. 10
09.0. Garantie.....	s. 11

01 - Allgemeines

Dieses Benutzerhandbuch gibt einen Überblick über den Krabat Jockey Basic mit manueller Anhebung der Sitzeinheit. Der Krabat Jockey Basic ist in zwei verschiedenen Grössen erhältlich. Mit unterschiedlichem Zubehör sind viele Konfigurationen möglich.

Krabat Jockey Basic ist ein Aktivstuhl für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren (2 Größen). Der Stuhl ist höhenverstellbar und kann vom Boden bis auf die Höhe einer Küchenarbeitsplatte eingestellt werden. Die Sitzposition kann individuell an das Kind angepasst werden. Alle Winkel und Positionen können stufenlos eingestellt werden. Ein Ergotherapeut oder ein Physiotherapeut sollte die Verwendung dieses Stuhls festlegen.

Die ausgezeichnete Sitzposition, die der Krabat Jockey Basic bietet, ist sowohl auf den Sattelsitz zurückzuführen, der eine neutrale Position im Becken und Abduktion in der Hüfte fördert, als auch auf die Fußstützen, die die Füße in einer optimalen Position unterstützen. Der Stuhl fördert eine gute Stabilität in

den Unterkörper und verleiht der Wirbelsäule natürliche Krümmungen. Dies bietet eine gute Grundlage für Gleichgewicht und Aktivität im Rumpf und Oberkörper. Der Sattelsitz fördert eine aktive Sitzposition anstelle einer abgesenkten und passiven Position. Die aufrechte und aktive Position fördert auch das Sprechen, Schlucken und die Atmung.

Um eine optimale Sitzposition zu gewährleisten, ist es wichtig, den Stuhl vor der Benutzung auszuprobieren und einzustellen. Benutzen Sie den Stuhl nur, wenn ein individueller Versuch durchgeführt wurde. Lassen Sie außerdem andere Kinder den Stuhl nicht ohne einen individuellen Versuch benutzen.

Wenn Kinder wachsen, ändern sie regelmäßig ihre Bewegungs- und Sitzmuster. Es ist wahrscheinlich, dass das Kind eine andere Größe der Sitzeinheit oder andere Anpassungen benötigt. Wenden Sie sich an Ihren Physio- oder Ergotherapeuten vor Ort, wenn das Produkt nicht optimal ist oder wenn Anpassungen erforderlich sind.



02.0 - Hauptkomponenten -Jockey Basic mit manueller Höhenverstellung

Der Krabat Jockey Basic mit manueller Erhöhung hat folgende Hauptkomponenten:

- 01 Sattelsitz mit einstellbarem Winkel der Sitzeinheit
- 02 Verstellbare Rückenlehne
- 03 Verstellbare Einzelfußrasten oder Fußrasten in einer
- 04 Untergestell
- 05 Räder



03.0 - Verwendung

Um die optimale Sitzposition zu erreichen, müssen die Winkel von Sitz, Rückenlehne und Die Fußstütze muss angepasst werden. Dies sollte von einem Therapeuten durchgeführt werden, der von Krabat AS oder einem Vertreter von Krabat AS ausgebildet wurde.

Rückenlehne umklappen: Griff (1) lösen, die 2 Griffknöpfe (2) lösen, Rückenlehne umklappen

Höhenverstellung der Rückenlehne: Griff (1) lösen, Höhe einstellen, Griff (1) anziehen

Einstellung der Sitzneigung: Griff (3) lösen, Neigung einstellen, Griff (3) anziehen

Zentraler Bruch: Hebel (4) nach unten drücken, zum Lösen der Räder Hebel (4) nach oben ziehen

Sitzhöhenverstellung: Hebel (5) nach oben ziehen, Höhe einstellen, Hebel (5) loslassen

Höhenverstellung der Armlehne: Knopf (6) nach oben ziehen, Höhe einstellen, Knopf (6) loslassen

Tiefeneinstellung der Armlehne: Armlehne (7) vorwärts/rückwärts in die gewünschte Position schieben

03.1 - Einzelne Fußrasten

Stellen Sie die Füße auf die Fußstützen und ziehen Sie die Gurte fest. Kinder, die Knöchel-Fuß-Einlagen verwenden, sollten diese zusammen mit ihren Schuhen tragen, während sie im Krabat Jockey Basic sitzen. Die Höhe der Fußstützen wird durch Verschieben auf den Schienen oder einfach durch die Länge des unter dem Sitz angebrachten Gurtes eingestellt. Es ist auch möglich, Knöchelriemen an den Fußstützen anzubringen. Diese müssen eingestellt werden, um sicherzustellen, dass sich der Füße des Kindes in der richtigen Position befindet.



03.2 - Fußstütze in einer

Die Höhe der Fußstützen wird eingestellt, indem sie auf den Schienen nach oben oder unten geschoben werden oder indem einfach die Länge des unter dem Sitz angebrachten Gurtes verstellt wird. Es ist auch möglich, Knöchelgurte an der Fußstütze anzubringen. Diese müssen eingestellt werden, um sicherzustellen, dass sich der Fuß des Kindes in der richtigen Position befindet.



04.0 Zubehör/ Sonderausstattung

Für den Krabat Jockey Basic ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich. Unter www.krabat.com finden Sie eine aktualisierte Liste der optionalen Ausrüstung. Alle Zusatzausrüstungen werden mit einem eigenen Benutzerhandbuch geliefert. Wenn Sie Zubehör/Zusatzausstattung für Ihren Krabat Jockey Basic Stuhl benötigen, kontaktieren Sie bitte einen Krabat-Vertreter oder einen von Krabat zugelassenen Therapeuten für die Installation und Einstellung.

05.0 - Instandhaltung

Alle Metall- und Kunststoffteile können mit milder Seifenlauge gereinigt werden. Sitz und Rückenlehne sind gepolstert und können entweder mit einem Tuch und Seifenwasser oder in der Maschine bei 40 Grad Celsius gereinigt werden.

Das Textil wird mit Klettverschluss am Stuhl befestigt. Ratschläge zur Fleckenentfernung finden Sie unter www.krabat.com. Lager und andere bewegliche Teile sind wartungsfrei und sollten nicht geschmiert werden.

Um Verletzungen zu vermeiden, darf kein Teil des Produkts während des Gebrauchs gewartet oder instand gehalten werden.

ANMERKUNG: Sollte ein Teil zerbrechen oder offensichtlich beschädigt sein, stellen Sie bitte die Benutzung des Stuhls ein und wenden Sie sich an eine autorisierte Person, die den Stuhl reparieren oder entsprechende Abhilfemaßnahmen ergreifen kann.

06.0 - Individuelle Anpassungen und Anpassungen


Wenn die Sitzeinheit aus irgendeinem Grund angepasst werden muss, wenden Sie sich bitte an einen Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten. Anpassungen der Sitzeinheit müssen von qualifiziertem Personal oder von Krabat AS vorgenommen werden.

Nehmen Sie unter keinen Umständen selbst Änderungen vor.

07.0 - Technische Daten

Maße	Beschreibung	Größe 2	Größe 3
A	Sitztiefe	34 cm	42 cm
B	Sitzhöhe	32 cm	35 cm
C	Kantelung	7° vorwärts 25° rückwärts	7° vorwärts 25° rückwärts
D	Abstand Sitz bis Fußstütze	33 bis 47 cm	33 bis 47 cm
E	Sitzhöhe über dem Boden	50 bis 65 cm	50 bis 65 cm
F	Breite der Rückenlehne	32 cm	32 cm
G	Höhe der Rückenlehne	41 bis 47 cm	45 bis 51 cm
H	Gesamtgewicht	56 cm	56 cm
I	Gesamtbreite	53 cm	53 cm
J	Gesamthöhe	96-116 cm*	96-116 cm*
	Breite zwischen Armlehnen	32 bis 46 cm	32 bis 46 cm
	Höhe der Armlehnen	13 bis 22 cm	13 bis 22 cm
	Alter des Benutzers (ungefähr)	6 bis 14 Jahre	14 bis 18 Jahre
	Maximales Benutzergewicht	100 kg	100 kg
	Produktgewicht	26 kg	26 kg

*Gesamthöhe Breite plus Rückenlehne plus 5 cm

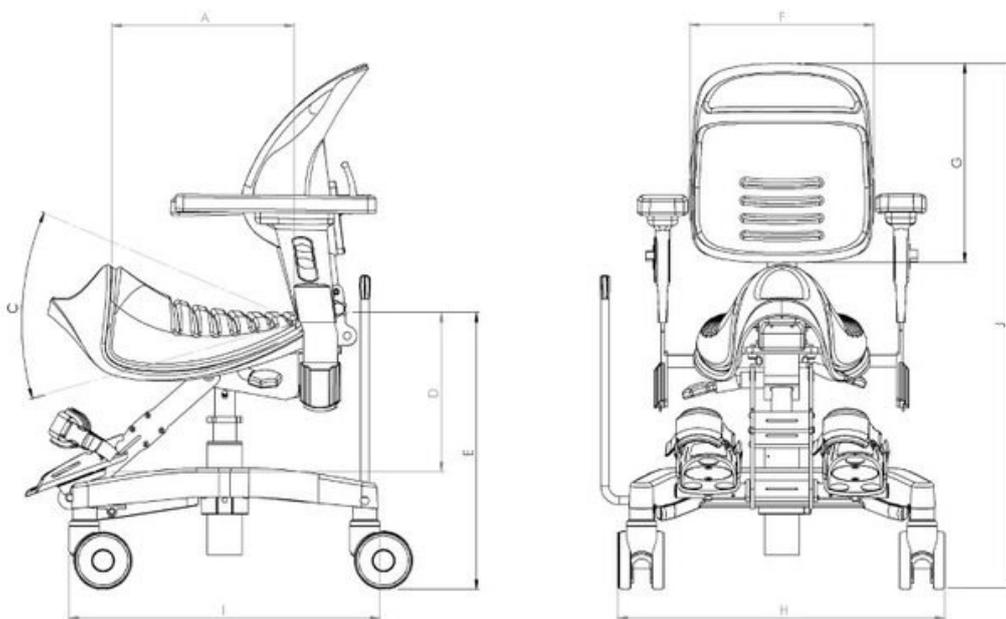

08.0 - Symbole, Beschreibung/ Erklärung

Die verschiedenen Symbole, die auf dem Produkt und in diesem Benutzerhandbuch verwendet werden, werden nachstehend erläutert

Symbol	Beschreibung	Bedeutung	Erklärung
	Symbol zur Verwendung bei der Kennzeichnung von Medizinprodukten	Hersteller	Gibt den Hersteller des Medizinprodukts an.
	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und grundlegende Leistungsfähigkeit.	Gebrauchsanweisung konsultieren	Weist auf die Notwendigkeit für den Benutzer hin, die Gebrauchsanweisung zu konsultieren.
	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen für grundlegende Sicherheit und wesentliche Leistung	Gebrauchsanweisung befolgen	Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre.
	Allgemeines Warnschild	Lesen Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanweisung	Weist auf die Notwendigkeit hin, dass der Anwender die Gebrauchsanweisung für wichtige Vorsichtsinformationen wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die nicht auf dem Medizinprodukt selbst angebracht werden können, konsultieren muss.
	Medizinische elektrische Geräte -	Anwendungsteil vom Typ BF	Zur Identifizierung eines Anwendungsteils vom Typ BF, das der IEC 60601-1 entspricht.
IPN ₁ N ₂	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen für grundlegende Sicherheit und grundlegende Leistung.	Grad des Eindringenschutzes durch die Umhüllung	Herstellerbestimmter Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Partikeln und Wasser
	Symbol zur Verwendung bei der Kennzeichnung von elektrischen Geräten.	Nur Innenanwendung	Identifizierung von elektrischen Geräten, die hauptsächlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt sind.
	Symbole zur Verwendung bei der Kennzeichnung von elektrischen Geräten.	Geräteklasse II	Zur Identifizierung von Geräten, die die für Geräte der Klasse II festgelegten Sicherheitsanforderungen erfüllen
	Die Anforderungen für Akkreditierung und Marktüberwachung in Bezug auf die Vermarktung von Produkten; Richtlinie über Medizinprodukte.	CE-Kennzeichnung	Bedeutet europäische technische Konformität.

09.0 - Garantie

Hersteller der Krabat-Produkte, Krabat AS - nachfolgend KRABAT genannt - mit Sitz in Ravensborgveien 56, 1395 Hvalstad, Asker, Norwegen - gewährt dem Käufer eines KRABAT-Produktes die folgende Produktgarantie, nachfolgend "GARANTIE" genannt:

1. Diese GARANTIE wird unter der strikten Bedingung gewährt, dass der Käufer und alle Personen, denen der Käufer Zugang zum KRABAT-Produkt gewährt, die folgenden SICHERHEITSVORSCHRIFTEN beachten und einhalten:
 - I. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie das entsprechende Benutzerhandbuch für das jeweilige KRABAT-Produkt gelesen und verstanden haben, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
 - II. Das KRABAT Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch in Übereinstimmung mit dem KRABAT Benutzerhandbuch für das jeweilige KRABAT Produkt bestimmt.
 - III. Lassen Sie niemals ein Kind oder einen anderen Benutzer, der das KRABAT-Produkt benutzt, ohne die Aufsicht eines Erwachsenen.
 - IV. Vergewissern Sie sich stets, dass die Sicherheitsgurte richtig angelegt und befestigt sind und keine Fehlfunktion aufweisen, und überprüfen Sie die vorstehend genannten Punkte in regelmäßigen Abständen, wenn das KRABAT-Produkt in Gebrauch ist.
 - V. Verwenden Sie das KRABAT-Produkt immer unter Beachtung der Ratschläge Ihres Physio- oder Ergotherapeuten.
 - VI. Denken Sie immer daran, dass das KRABAT-Produkt KEIN Spielzeug ist, und lassen Sie daher niemals ein Kind oder eine andere Person mit dem KRABAT-Produkt spielen, da es sowohl Personen als auch das Produkt schädigen und Schäden verursachen kann.
 - VII. Lagern Sie das KRABAT-Produkt immer - wenn es nicht in Gebrauch ist - auf sichere Weise, damit es von niemandem missbraucht werden kann, und darüber hinaus mit dem Ziel, das KRABAT-Produkt keinen Bedingungen auszusetzen, die es und/oder seine Funktionen beeinträchtigen könnten.
2. Gemäß den Bedingungen der GARANTIE garantiert KRABAT, dass das KRABAT-Produkt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ("die Garantiezeit") ab dem Kauf des KRABAT-Produkts gemäß seiner Zweckbestimmung, wie im KRABAT-Benutzerhandbuch nach dem tatsächlichen Kauf des KRABAT-Produkts angegeben, funktioniert.
3. KRABAT wird auf eigene Kosten entweder selbst oder mit Hilfe eines Dritten innerhalb angemessener Zeit Hilfestellung bei der Behebung eines innerhalb der genannten Gewährleistungsfrist auftretenden Sachmangels des KRABAT-Produktes leisten, indem das betroffene Gerät zur Reparatur gebracht oder Ersatzteile zum Austausch eingesandt werden, vorausgesetzt jedoch, dass der Käufer des KRABAT-Produktes unverzüglich nach Kenntnisnahme des/der Mängel(s) KRABAT oder einem von KRABAT autorisierten Vertreter den/die festgestellten Mangel(n) schriftlich mitgeteilt hat. KRABAT behält sich jedoch das Recht vor, nach eigenem Ermessen anstelle der Mängelbeseitigung ein neues Gerät anstelle des mangelhaften oder defekten Gerätes zu liefern. Hinsichtlich der Nachsendung von Ersatz- oder Austauschteile bzw. eines Neugerätes gilt die Verpflichtung von KRABAT bzw. seines Bevollmächtigten insoweit als erfüllt, als das betreffende Teil bzw. die betreffenden Teile oder Geräte in den Geschäftsräumen, in denen das ursprüngliche KRABAT-Produkt verkauft wurde, zur Abholung bereitgestellt werden.
4. Für den Fall, dass ein Mangel nicht erfolgreich behoben werden konnte,
 - I. Der Käufer hat das Recht auf eine Minderung des Kaufpreises im Verhältnis zum geminderten Wert des KRABAT-Produktes, wobei die Minderung in keinem Fall fünfzehn Prozent (15 %) des Kaufpreises für das genannte KRABAT-Produkt überschreiten darf, oder

- II. Wenn der Mangel so erheblich ist, dass der Käufer den Nutzen des Kaufzwecks erheblich beeinträchtigt, kann der Käufer den Kauf in Bezug auf das fehlerhafte KRABAT-Produkt kündigen. Der Käufer hat dann Anspruch auf den tatsächlich erlittenen Schaden, gegebenenfalls jedoch begrenzt auf maximal fünfzehn Prozent (15 %) des Kaufpreises für das besagte KRABAT-Produkt.
5. Diese GARANTIE gibt keine anderen Garantien als die, die ausdrücklich unter dieser GARANTIE gegeben werden.
 6. Um Zweifel auszuschließen, erstreckt sich diese GARANTIE nicht auf die Haftung von KRABAT oder seinen autorisierten Vertretern in Bezug auf indirekte oder Folgeschäden, die dem Käufer oder einer Person, der der Käufer absichtlich oder unabsichtlich Zugang zum KRABAT-Produkt gewährt, entstehen.
 7. Diese GEWÄHRLEISTUNG gilt nicht, soweit das KRABAT-Produkt durch nicht von KRABAT hergestellte Teile oder durch Teile, die von anderen hergestellt oder zur Verfügung gestellt wurden, ergänzt oder verändert wird und deren Verwendung von KRABAT nicht schriftlich genehmigt wurde.
 8. KRABAT haftet nur für Mängel, die unter den Betriebs- oder Einsatzbedingungen auftreten, die in der dem KRABAT-Produkt folgenden jeweiligen Bedienungsanleitung vorgesehen sind.
 9. KRABAT haftet nicht für Mängel, die durch fehlerhafte Wartung, falsche Einstellungen oder fehlerhafte Reparatur durch andere Personen als KRABAT oder durch von KRABAT autorisierte Vertreter oder durch Änderungen am KRABAT-Produkt, die ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KRABAT durchgeführt wurden, verursacht wurden. This WARRANTY does not cover normal wear and tear.
 10. KRABAT haftet unter keinen Umständen für Mängel an einem Teil eines KRABAT-Produkts für einen Zeitraum von mehr als zwei (2) Jahren ab Lieferung.
 11. Außer wie oben unter dieser GARANTIE dargelegt, haften KRABAT sowie seine autorisierten Vertreter unter keinen Umständen für Mängel des KRABAT-Produkts. Dies gilt für jeglichen Verlust, den der Fehler verursachen kann, einschließlich Produktionsausfall, entgangenem Gewinn und anderen indirekten Verlusten.

**krabat**TM

STOLT AV Å VÆRE ANNERLEDES

Hepro AS, avd. Kroat

Ravnsborgveien 56

1395 Hvalstad Norway

www.krobat.no