

QUICKIE®

Perfekte kjøreegenskaper!

HELIUM®




reddot design award
winner 2010



Den nye Quickie Helium!

Helium er den letteste av våre edelgasser, men også den letteste aktive rullestolen for voksne med en totalvekt fra i underkant av 6,5 kg! Vekten er angitt i størrelse 40x40, inklusiv hjul, fotplate, klesbeskyttere og bremses, men uten pute. Ved å benytte den nyeste teknologi innen rammeproduksjon fra sykkelindustrien, har vi nå gleden av å introdusere et unikt produkt på det norske markedet! Selv om stolen er svært lett, har den også mange justeringsmuligheter slik at den kan tilpasses den enkeltes behov!



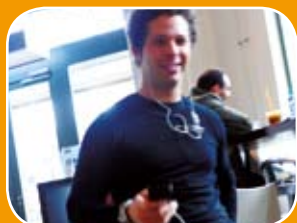

Quickie Helium

AVANSERT TEKNOLOGI - LAV VEKT:

Helium bygger på den aller siste teknikk som benyttes for morgendagens sykkel- og motorsports industri. Den er designet og produsert gjennom en aluminiumsteknikk og spesialutforming som gir et ultralett resultat.

JUSTERINGSMULIGHETER I BEHOLD:

Store justerings- og tilpasningsmuligheter betyr ikke lenger at du må gi avkall på stabilitet, kjøreegenskaper eller lett vekt. Helium beholder hele skalaen av ergonomiske justeringsmuligheter og styrken/stabiliteten i fastrammen.

ERGONOMI

Løfting og forflytning handler om teknikk og vekt. Helium er en ultralett stol og veier kun 4,2 kg når hjulene er tatt av. Nøkkelen til enklere løft er 2 ergonomiske håndtak med gummigrep. Disse er plassert slik at rullestolen balanseres lett under løft. Dette reduserer risiko for overbelastning.



Med teknologi som benyttes i sykkelindustrien er Quickie Helium unik i sin klasse. Velg mellom 88° og 80° knevinkel i rammen.



Quickie Helium med sin innovative 'ovale' formede ramme. Sammenslått er Helium enkel å plassere samt løfte inn/ut av bilen.



Innovativ lettvekt ryggvinkel innstilling -31° til +15°. Ryggen kan låses i nedfelt posisjon.



Ryggen kan fås som fast, nedfellbar eller nedfellbar med lås.



Rask, enkel og lett tyngdepunktsjustering. Akselbraketten flyttes trinnløst.



Det finnes mange typer svinghjul og gafler som standard tilbehør. Her vises svinghjul med aluminiumfelg.

QUICKIE®




Skjult justering av svinghjulsgafler. En patentert mekanisme for enkel justering av gafler. Gaffelen er justerbar i „alle“ ledd.



Proton Quick Release lettvektshjul. Et nytt hjul utviklet for maksimal styrke og respons, men samtidig med lavest mulig vekt.



Ovale ergonomiske håndtak gir et godt grep ved løfting av stolen. Minsker belastning på håndledd ved gjentatte løft av stolen.

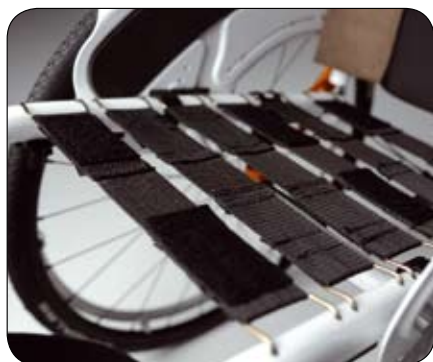

Lav vekt: Electron seteremmer med innovativ 'clip style' setematte.



Visuell hjelpemiddel for optimal tilpasning (toe in / toe out).



Et bredt utvalg av klesbeskyttere, for eksempel lette karbon smart style.



Ergonomiske kompakte bremsere. Suveren lav vekt. Bremsene er ikke i veien for brukers fingre når de ikke er aktivert.




Gjennom distanser kan setehøyde bak justeres for å etterkomme brukers behov.



Quickie mobiltelefonveske.



Tekniske spesifikasjoner

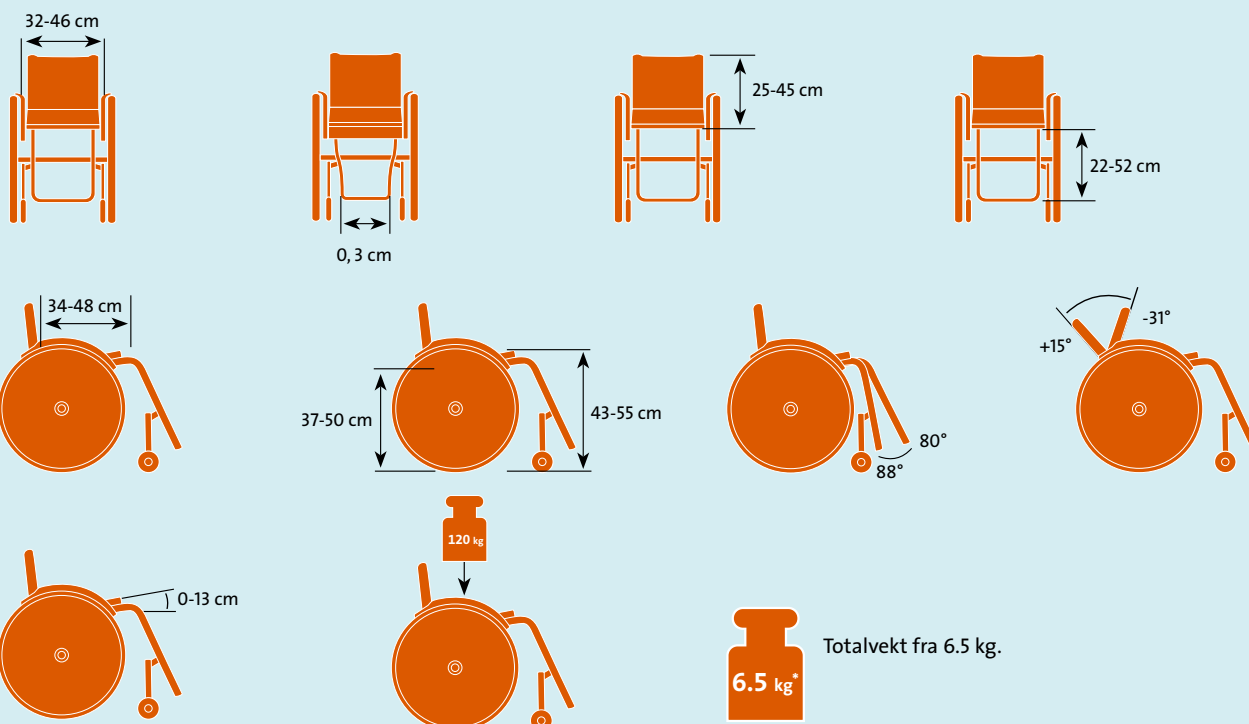

Setebredde:	32 - 46 cm	Legglengde:	22 - 52 cm
Setedybde:	34 - 48 cm	U/V-front:	0,3 cm
Rygg høyde:	25 - 45 cm	Camber:	0°, 3°, 6°
Ryggvinkling:	-31° - +15°	Maks. brukervekt:	120 kg

For mer informasjon om valgmuligheter og tilbehør, se Bestillingskjemaet.

* Konfigurasjon: setebredde og setedybde 40 cm, inklusive fotplate og klesbeskyttere, ekskl sittepute.

STLPS[™]
Sunrise Training and Education Programmes
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE



SUNRISE
MEDICAL

Sunrise Medical AS
Håkonskastet 5, Rehabcenteret
1450 Nesoddtangen
Norway
T: +47 66 96 38 00
F: +47 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no