

JIVE

Leistungsstark für
maximale Mobilität -
Die Jive Elektrorollstühle





Maximale Kontrolle,
Maximale Sicherheit,
Maximaler Komfort,
Maximale Traktion!

Modulare Plattformtechnologie

Die modulare Plattformtechnologie bietet eine individuelle und unabhängige Auswahl für Antrieb, Sitzsystem und Schnittstellenoptionen. Das Konzept: eine Plattform, verschiedene Sitzsysteme, verschiedene Module und die freie Wahl des Antriebs. Aufrüstung, Abrüstung oder Wiedereinsatz – passen Sie den Jive an die Bedürfnisse des Nutzers an.

Sitzsysteme

JAY Comfort



JAY



Andere, z. B. Recaro oder Sitzschalen



Schnittstellen

**Kombimodul
Sitzlift 30 cm
und Sitzneigung
0° bis 30°**



**Elektrische Sitzneigung,
0° bis 30° / 0° bis 50°**



Antriebe

Heckantrieb



Mittelradantrieb



Frontantrieb





Innovativer Sitzrahmen

Der Sitzrahmen des Jive verfügt über ein funktionales Design, das Flexibilität im Einsatz mit Einfachheit in der Nutzung verbindet. Die Sitzsysteme und Anbauteile sind leicht anpassbar.

- Stufenlos einstellbare Sitzbreiten, Sitztiefen und Armlehnen sind präzise an die Nutzermaße anpassbar.
- Sitzbreite und -tiefe sind zwischen 40 und 56 cm einstellbar.
- Das JAY Comfort Sitzsystem ist in den Größen 40 bis 56 cm (4 cm-Schritte) verfügbar. Weitere Größen sind auf Anfrage über FMG (Für Mich Gebaut) erhältlich.
- Die Armauflage ist für eine noch bessere Anpassung des Sitzsystems an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers vielfältig verstellbar.



Armauflage verstellbar

Einfacher Anbau von Zubehörteilen

Dank des ovalen Aluminiumprofils des Rückenrahmens ist der Anbau von Zubehörteilen, wie Sondersteuerungen, Beatmungs-/Absauggeräte, etc. mit Hilfe von Fixierungsklemmen jederzeit – auch nachträglich – einfach und schnell möglich.



Ovales Aluminiumprofil mit T-Nut



JAY Comfort Sitzsystem

Anatomisch geformtes Standard Sitz- und Rückenkissen für besten Komfort.

JAY J3 Rückensystem

Für Nutzer mit besonderen Anforderungen an Positionierung und Hautschutz kann der Jive Sitzrahmen mit einem JAY J3 Rückensystem sowie einem JAY Sitzkissen ausgestattet werden.*



Individuelles Sitzen – einfaches Umrüsten

Für Nutzer, die ein Sitzsystem eines anderen Herstellers, wie z. B. Recaro, wünschen oder eine Sitzschale benötigen, besteht die Möglichkeit mittels Anbauelementen das Sitzsystem auf einfache Weise schnell umzurüsten.



Adapter an der Rückenlehne machen ein einfaches Umrüsten für individuelles Sitzen möglich.



Recaro Sitzsystem

* Weitere Informationen zu Produkten der Marke JAY entnehmen Sie bitte der Broschüre „JAY - Einfach, Effektiv, Sitzen“.

JIVE® M

Höchste Performance,
Souveränes Handling,
Maximale Traktion



SpiderTrac™ Technologie:

Komfortabel, sicher und kontrolliert auf jedem Untergrund.




Das innovative SpiderTrac™ Fahrwerk des Jive M Mittelradantriebs harmonisiert über Gasdruckdämpfer die Bewegungen des gesamten Rollstuhls. Die über eine Verbundmechanik gekoppelten Lenkradarme reduzieren die Bewegung des Sitzes auf ein Minimum.



Mehr Sicherheit

Das **Antipitch-System** verhindert ein nach vorne Kippen des Rollstuhls beim Kanten herunter oder bergab fahren. Dabei haben die vorderen Radaufhängungen einen Bewegungsfreiraum von mehr als 10 cm nach oben und unten.

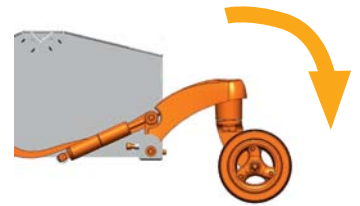



Erhöhte Sitzstabilität

Die **Gasdruckdämpfer** verbunden mit den vorderen und hinteren Lenkradarmen mindern die Erschütterungen im Oberkörper, erhöhen die Sitzstabilität und begünstigen dadurch ein angenehmes und sicheres Fahren auch auf unebenem Gelände.

Maximale Traktion

Die **mechanisch verbundene vordere und hintere Radaufhängung** hält die Antriebsräder immer in Kontakt mit dem Untergrund, selbst beim Befahren von Kanten oder stark unebenem Gelände.

Die Lenk- und Antriebsräder bewegen sich durch die verbundene Radaufhängung in unterschiedliche Richtungen und erzielen somit außerdem ein Maximum an Traktion, was insbesondere bei Übergängen, wie z. B. dem Befahren von Rampen, hilfreich ist. Der Jive M kann mühelos Kanten bis 10 cm und Steigungen bis 10° befahren.

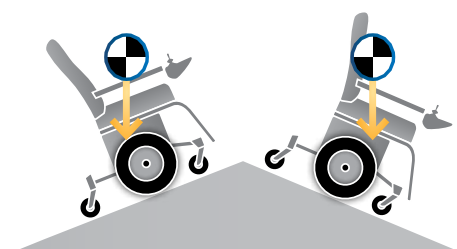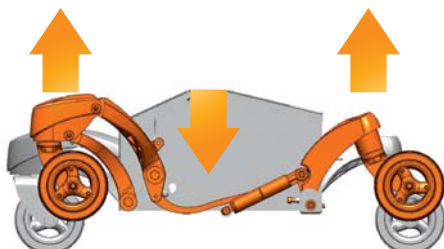


Kompakt im Innenbereich

- Dreht auf der Stelle und ist damit auch in engen Räumen leicht manövrierbar
- Kompakte Basis: mit nur 63 cm Gesamtbreite bietet der Jive M hervorragendes Fahrverhalten auch beim Durchfahren von Engstellen, wie z. B. Türen und Fahrstühlen
- Die zentral montierte Fußraste ermöglicht eine Positionierung der Knie im 90° Winkel
- Die niedrige Sitzhöhe ab 43 cm ist ideal, um z. B. an Tische heranzufahren

Intuitives Fahren

Durch den Mittelradantrieb liegt der Drehpunkt des Rollstuhls genau über dem natürlichen Drehpunkt des Körpers. Das Fahren geschieht damit intuitiv.

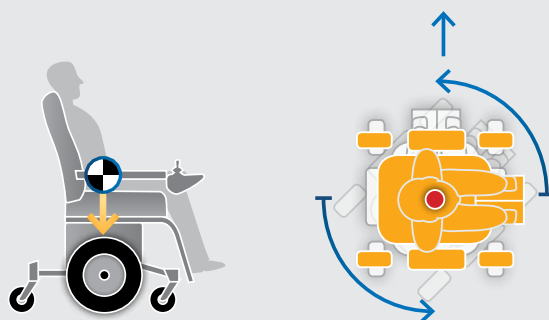

Optionen

- Sitzneigung elektrisch 0° bis 30° oder 0° bis 50°, manuell 0° bis 9°
- Rückenneigung elektrisch und manuell -10° bis 40°, mechanisch -5° bis 12°
- Kombimodul mit elektrischer Sitzneigung 0° bis 30° und 30 cm Sitzlift
- Elektrisch hochschwenkbare Fußraste, zentral montiert oder abschwenkbar



Leistungsstark für den Außenbereich

- Komfortables Fahren auch auf unebenem Gelände
- Optimale Traktion beim Befahren von Übergängen, z. B. Kanten und Rampen
- Exzellente Stabilität und Sicherheit – beim Befahren von Schrägen
- Kantensteigfähigkeit bis zu 10 cm
- 10° Dynamische Stabilität
- Geschwindigkeit 6 / 10 / 13 km/h
- Batterien 60 Ah (optional 70 Ah)



Einfacher Service

- Automatischer Einrastmechanismus des Sitzsystems
- Einfacher Batteriezugang
- Einfacher Zugang zu mechanischen und elektrischen Komponenten



JIVE® F

Funktionalität für
mehr Lebensqualität




Kompakte Abmaße und die ganze Kraft auf dem vorderen Antrieb – der Frontantrieb

- Hohe Stabilität, da der Schwerpunkt zwischen Antriebsachse und Lenkrad liegt
- Die Bergabfahrt wird begünstigt durch mehr Traktion auf der Antriebsachse
- Kompakte Abmaße

Der Frontantrieb

Der Drehpunkt des Rollstuhls liegt **vor** dem Drehpunkt des Nutzers.

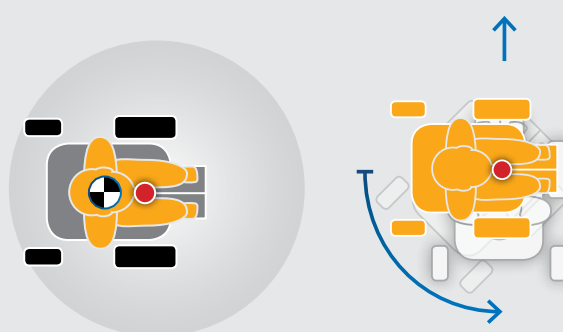

Optionen

- Sitzneigung elektrisch 0° bis 30°, manuell 0° bis 9°
- Rückenneigung elektrisch und manuell -10° bis 40°, mechanisch -5° bis 12°
- Kombimodul mit elektrischer Sitzneigung 0° bis 30° und 30 cm Sitzlift
- Elektrisch hochschwenkbare Fußraste, zentral montiert oder abschwenkbar

Stark und robust

- Geschwindigkeit 6 / 10 km/h
- Batterien 60 Ah (optional 70 Ah)
- Einfacher Service

JIVE® R²

Der Klassiker




Heckantrieb – die klassische Antriebsart

- Gute Stabilität bei hoher Geschwindigkeit
- Der Rollstuhl bewegt sich in die Richtung, in die der Joystick gelenkt wird
- Die Bergauffahrt wird begünstigt durch mehr Traktion auf der Antriebsachse

Der Heckantrieb

Der Drehpunkt des Rollstuhls liegt **hinter** dem Drehpunkt des Nutzers.

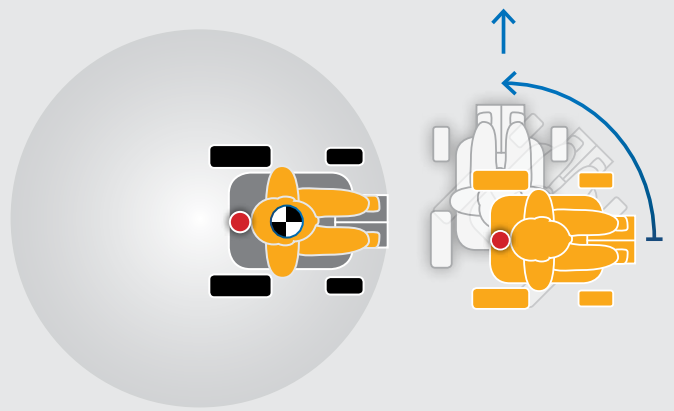

Optionen

- Sitzneigung elektrisch 0° bis 30°,
manuell 0° bis 9°
- Rückenneigung elektrisch und manuell
-10° bis 40°, mechanisch -5° bis 12°
- Kombimodul mit elektrischer Sitzneigung
30° und 30 cm Sitzlift
- Elektrisch hochschwenk-, sowie abnehm-
und wegschwenkbare Fußraste

Stark und robust

- Geschwindigkeit 6 / 10 / 13 km/h
- Batterien 60 Ah (optional 70 Ah)
- Einfacher Service

Leistungsstarke Rollstuhlsteuerungen

Von der einfachen VR2 Steuerung, über die erweiterbare R-Net Steuerung bis hin zu High End Sondersteuerungen, wie der Kinn- oder Kopfsteuerung. Wir bieten Ihnen und Ihrem Kunden speziell zugeschnittene Lösungen, um möglichst allen Nutzerwünschen gerecht zu werden.

LED/LCD Bedienpult oder die Infrarotschnittstelle am Omni Display können nach Wunsch des Kunden individuell programmiert werden. Ein Bluetooth Modul bietet die Möglichkeit einen PC oder ein Mobiltelefon anzusteuern (Windows oder Android basiert).

Die von Sunrise Medical patentierte **Zuordenbare-Tasten-Technologie** bietet vielfältige software-integrierte und benutzerfreundliche Möglichkeiten für die Verbesserung der Lebensqualität.

Um veränderten Anforderungen gerecht zu werden kann der Jive Elektrorollstuhl mit dem **Web iQ** Online Konfigurator und der Download Plattform www.sunmedwebiq.com jederzeit neu konfiguriert werden.



Bedienpult LED



Bedienpult mit LCD Anzeige



Bedienpult Begleitsteuerung/Dual



ISM6-L Modul



Elektronik 90 A/120 A



IO-Modul

Die Umwelt steuern




Bluetooth Modul



Handprogrammiergerät



Omni Display mit Schnittstelle für Sondersteuerungen und IR Funktion

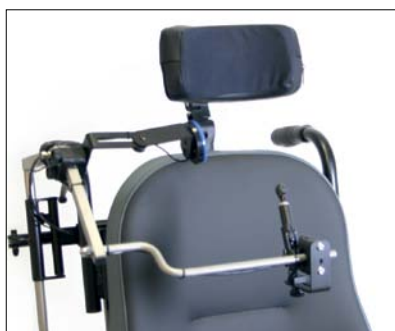

0-Weg Joystick



Kinnsteuerung abschwenkbar



Kopfsteuerung



Crash **getestet** für mehr **Sicherheit** beim **Transport**

Alle Jive Rollstuhlmodelle sind nach ISO 7176-19 Crash getestet und damit zum Transport von Personen im Rollstuhl sitzend im Fahrzeug zugelassen.

Rollstuhl Modell	Testbericht	Prüfbericht Nr.	Datum	Getestet mit System nach ISO 10542
Jive R ²	Jive R ²	Millbrook S12752	02/09/13	6-Punkt Rollstuhlrückhaltesystem
Quickie Jive R (Heckantrieb)	Quickie Jive Heckantrieb	Millbrook S11843	18/10/11	6-Punkt Rollstuhlrückhaltesystem
Quickie Jive F (Frontantrieb)	Quickie Jive Frontantrieb	Millbrook S11843	18/10/11	6-Punkt Rollstuhlrückhaltesystem
Quickie Jive M (Mittelradantrieb)	Frontalaufprall eines Rhythm 2 Elektrorollstuhls mit einer mittelgroßen männlichen Testpuppe	MP 1007	23/09/10	6-Punkt Rollstuhlrückhaltesystem
Quickie Jive F (Frontantrieb)	Sunrise Quickie Jive F	Dahl 2703-2013	26/03/13	Dahl Docking System
Quickie Jive M (Mittelradantrieb)	Quickie Jive M	Dahl 1611-2012	16/11/12	Dahl Docking System

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre „Sunrise Medical Rollstühle und Rückensysteme: Getestet nach ISO 7176-19 und ISO 16840-4“, die Sie auch online unter www.SunriseMedical.de abrufen können.



FMG – Für **Mich** Gebaut

Jeder Mensch ist so individuell wie sein Fingerabdruck. Deshalb konstruieren und fertigen wir Ihren Rollstuhl auch gerne nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen.

Sprechen Sie uns einfach an!
www.fmg-sunrisemedical.de

Beispiel Quickie Jive M, FMG Optionen:

- Kinnsteuerung über Kopf abschwenkbar
- 0-Weg Joystick im Tisch wegschwenkbar
- Therapietisch mit Brustpolster
- Jay Comfort Sitz- / Rückensystem mit atmungsaktiver Bespannung in orange
- Schwarze Bereifung
- Fahrbasis komplett schwarz (Schwingen)
- Rammschutz vorne & hinten für E-Hockey



Technische Daten



Geschwindigkeit

Batterien

Max. Reichweite

Sitzbreite

Sitzhöhe

Sitztiefe

Rückenhöhe

Armlehnenhöhe

Sitzneigung

Rückenneigung

Gesamtbreite

Gesamthöhe ohne Kopfstütze

Gesamtlänge inkl. Fußrasten

Transportlänge ohne Fußrasten

Wendekreis

Max. Steigfähigkeit

Max. Kantensteigfähigkeit

**Gewicht in der minimalsten Konfiguration
inkl. Batterien**

Max. Zuladung

Elektronik

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:

Jive M

6 / 10 / 13 km/h

60 Ah (optional 70 Ah)

40 km

40 - 56 cm

43 - 48 cm

40 - 55 cm

30 - 61 cm (abhängig vom Rückenkissen)

22 - 32 cm

0° bis 9° manuell / 0° bis 30° oder 0° bis 50° elektrisch

-5° bis 12° mechanisch / -10° bis 40° elektrisch und manuell

63 cm (Fahrbasis)

98 cm

104 cm (mit Zentralbeinstützen)

95 cm

55 cm

10°

bis 10 cm

140 kg

160 kg

VR2 / R-Net

18.50.04.0142
18.99.06.1065 (Sitzlift)



Jive F

6 / 10 km/h

60 Ah (optional 70 Ah)

40 km

40 - 56 cm

43 - 48 cm

40 - 55cm

30 - 61 cm (abhängig vom Rückenkissen)

22 - 32 cm

0° bis 9° manuell / 0° bis 30° elektrisch

-5° bis 12° mechanisch / -10° bis 40° elektrisch und manuell

64 cm (Fahrbasis)

99 cm

111 cm

88 cm

70 cm

6°

bis 10 cm

145 kg

160 kg / 240 kg XL-Version

VR2 / R-Net

18.50.04.0141
18.99.06.1064 (Sitzlift)

Jive R²

6 / 10 / 13 km/h

60 Ah (optional 70 Ah)

40 km

40 - 56 cm

43 - 48 cm

40 - 55 cm

30 - 61 cm (abhängig vom Rückenkissen)

22 - 32 cm

0° bis 9° manuell / 0° bis 30° elektrisch

-5° bis 12° mechanisch / -10° bis 40° elektrisch und manuell

63 cm (Fahrbasis)

99 cm

118 cm

88 cm

100 cm

10°

bis 10 cm (mit Bürgersteighilfe)

145 kg

160 kg

VR2 / R-Net

18.50.04.0xxx beantragt
18.99.06.1xxx (Sitzlift) beantragt



Stärken der Antriebsarten



	Frontantrieb	Heckantrieb	Mittelradantrieb
Wendigkeit	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Fahren im Außenbereich	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Fahren im Innenbereich	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Kantensteigfähigkeit	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ *	■ ■ ■
Spurstabilität	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
90° Positionierung	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ **	■ ■ ■ ■
Sondersteuerungen	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

■ 5 = sehr gut, 4 = gut, 3 = geeignet,
2 = bedingt geeignet, 0 = nicht geeignet

*mit Bürgersteighilfe bis max. 137 kg Zuladung
**90° Position nur bei kurzer UL

Für weitere Informationen sehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung auf unserer Internetseite. Fragen beantwortet Ihnen gerne auch der Sunrise Medical Kundenservice. Die Unterlage können Sie auch unter www.SunriseMedical.de im PDF-Format in größerer Schrift ansehen und herunterladen.



MADE IN
MALSCH/GERMANY



Sunrise Medical GmbH & Co. KG

Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de