



## Monkey

Sistema regolabile per la  
statica prono-eretta per  
bambini da 9 mesi a 4 anni.



# Monkey

Monkey è una scelta veramente valida poiché risponde ai bisogni di molti bambini mantenendo un look gradevole ed una grande facilità d'uso.

Dati tecnici		
Monkey	Unità di misura	NR50
Età di utilizzo (circa)	mesi/anni	9 mesi - 4 anni
Range di angolazione (0° = posizione eretta)	gradi	0° - 20°
Misura della base	mm	880 x 575
Altezza tronco rispetto alla pedana (Min/Max)	mm	510 - 750
Larghezza torace (Min/Max)	mm	150 - 235
Larghezza del bacino (Min/Max)	mm	150 - 235
Portata massima	kg	25kg
Profondità tavolino	mm	360
Larghezza tavolino	mm	530

## Caratteristiche principali



### 1 Imbottiture di posizionamento regolabili

Le imbottiture di posizionamento possono essere regolate su due piani per dare un supporto davvero preciso.



### 2 Cinghie regolabili con cinghie di sicurezza integrate

Le cinghie regolabili vengono strette intorno al bambino e le cinghie di sicurezza bene allacciate, in questo modo il bambino è al sicuro.



### 3 Lunghezza della superficie di supporto regolabile

La lunghezza della superficie di supporto può essere regolata in base ai bisogni del bambino.



### 4 Cuneo per abduzione

Il cuneo per abduzione si fissa utilizzando il Velcro. Si attacca nel centro della supporto ed aiuta a mantenere le ginocchia separate e a supportare la postura eretta.



### 5 Regolazione dell'angolo

L'angolo della superficie di supporto di Monkey può essere regolato di 20 gradi dalla posizione orizzontale a quella eretta.




### 6 Ruote con freni

Tutte e quattro le ruote possono essere bloccate per sicurezza.

# Accessori


## 1. Telaio per attività Codice: GT10

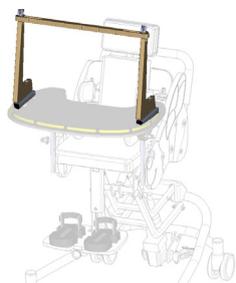

Il telaio per attività viene fissato al tavolino e i giochi vengono agganciati al telaio per consentire al bambino di avere pieno accesso ai giochi senza che questi rischino di cadere dal tavolino.

540 (w) x 360 (h)


## 2. Barra di presa Codice: NT04

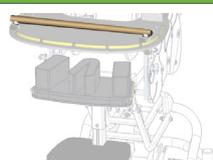

Questa barra viene fissata al tavolino e può essere utilizzata per dare stabilità ai bambini quando ruotano la parte superiore del busto. La barra può essere regolata in modo tale da essere posizionata nel posto più adatto per ogni bambino.

440 (w)  
17.3" (w)

## 3. Rialzi per sandali Codice: SRB01

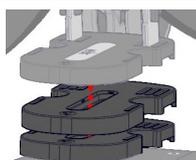

Possono essere utilizzati per aumentare l'altezza del bambino, se posizionati sotto entrambi i sandali, oppure in caso di gambe di lunghezza differente.

1 Supporto	17 mm
2 Supporti	34 mm
3 Supporti	51 mm
4 Supporti	68 mm

