

improving people's lives

JAY Xtreme Active



Nuevo cojín Jay Xtreme Active

- Diseño de un único cojín teniendo en cuenta el feedback recibido del mercado de los actuales Jay Xtreme y Jay Active→
- Se dirige principalmente a dos tipos de usuarios activos
 - Usuarios que desean un cojín de bajo perfil y bajo peso con estabilidad y buena protección de la piel (moderada –alta)
 - Usuarios activos que debido a su atrofia muscular ó historia clínica de UPP, necesitan mas fluido para una protección de la piel superior
- Amplia gama de tallas nuevas, en respuesta a la demanda clínica
- Nueva tecnología utilizada en los últimos lanzamientos Jay (mejora de materiales, fundas, estética y efectividad clínica)



1 Diseñado para dar solución a las necesidades del usuario activo

- Cojín ligero y de bajo perfil
- Transferencias y propulsión optimizadas

2 Cojín modular para la protección de la piel y el posicionamiento de extremidades inferiores

- Bolsa de fluido Jay Std u Overfill
- Opción de cuñas de posicionamiento

3 Tecnología innovadora en las fundas

- Materiales y Estética mejorada
- Fáciles de lavar y de secado rápido

4 Fácil de pedir

MUCHAS MAS TALLAS DISPONIBLES



1 Diseñado para dar solución al usuario activo

El cojín Jay Xtreme Active ha sido diseñado pensando en el usuario activo. Además de proporcionar la reducción de presión y fricción fundamentales para la protección de la piel, ofrece la estabilidad pélvica necesaria para optimizar la función, tanto durante las actividades de la vida diaria como durante la propulsión de la silla.



Protección Piel + Estabilidad = Integridad piel + Función



1 Diseñado para dar solución al usuario activo

- Cojín ligero y de perfil bajo
 - Altura: 5 cms
 - Peso optimizado para la función
 - Cojín con bolsa de fluido Standard: 1,36 kg (Cojín 34x34)
 - Cojín con bolsa de fluido Overfill: 1,78 kg (Cojín 34x34)
- La bolsa de fluido Jay optimiza la protección de la piel y minimiza la fricción que se produce en los usuarios activos durante la propulsión y las transferencias
- El diseño de la base y la espuma de alta densidad garantizan el confort y la estabilidad funcional → Sedestación cómoda, estable y activa
- Práctico y sin mantenimiento
- Tecnología Innovadora en las fundas
 - Microclimática / Incontinencia / Elástica



- 2 Cojín modular para garantizar la protección de la piel y el posicionamiento de las extremidades inferiores



Jay Xtreme Active – Modular



Bolsa de fluido
Standard



Base con
hondonada
Standard



Bolsa de fluido
Overfill



Base con
hondonada
modificada para
Overfill



Kit de Posicionamiento – Las cuñas llevan su
propia funda y pueden añadirse a la funda interior
del cojín mediante velcros (opcionales)



Funda Interna- Se adapta a ambas bases del
cojín (Std y Overfill)



Funda Externa que se adapta a bolsa
de fluido Std y Overfill y cojines con o
sin kit de posicionamiento



El fluido Jay protege y garantiza la integridad de la piel optimizando el reparto de presión y minimizando la fricción que tiene el usuario activo

Cojín Xtreme Active con bolsa de Fluido Standard

Tipo de usuario:

Usuario activo que requiere un cojín ligero y de bajo perfil con optima protección de su piel y con la estabilidad necesaria para maximizar la función en su vida activa



Cojín Xtreme Active con bolsa de Fluido Overfill

Tipo de usuario:


Mayor cantidad de fluido para usuarios activos con riesgo alto-muy alto de desarrollar UPP. Indicado en usuarios con mucha atrofia muscular o con antecedentes previos de UPP. Requieren mayor cantidad de fluido para mayor protección de la integridad de la piel.

Reaction Force
Reduction



Kit de posicionamiento (Opcional)

El kit de Posicionamiento esta compuesto por 2 cuñas adductoras de 2,5 cm de alto y una cuña Abductora de 2,5 cm alto

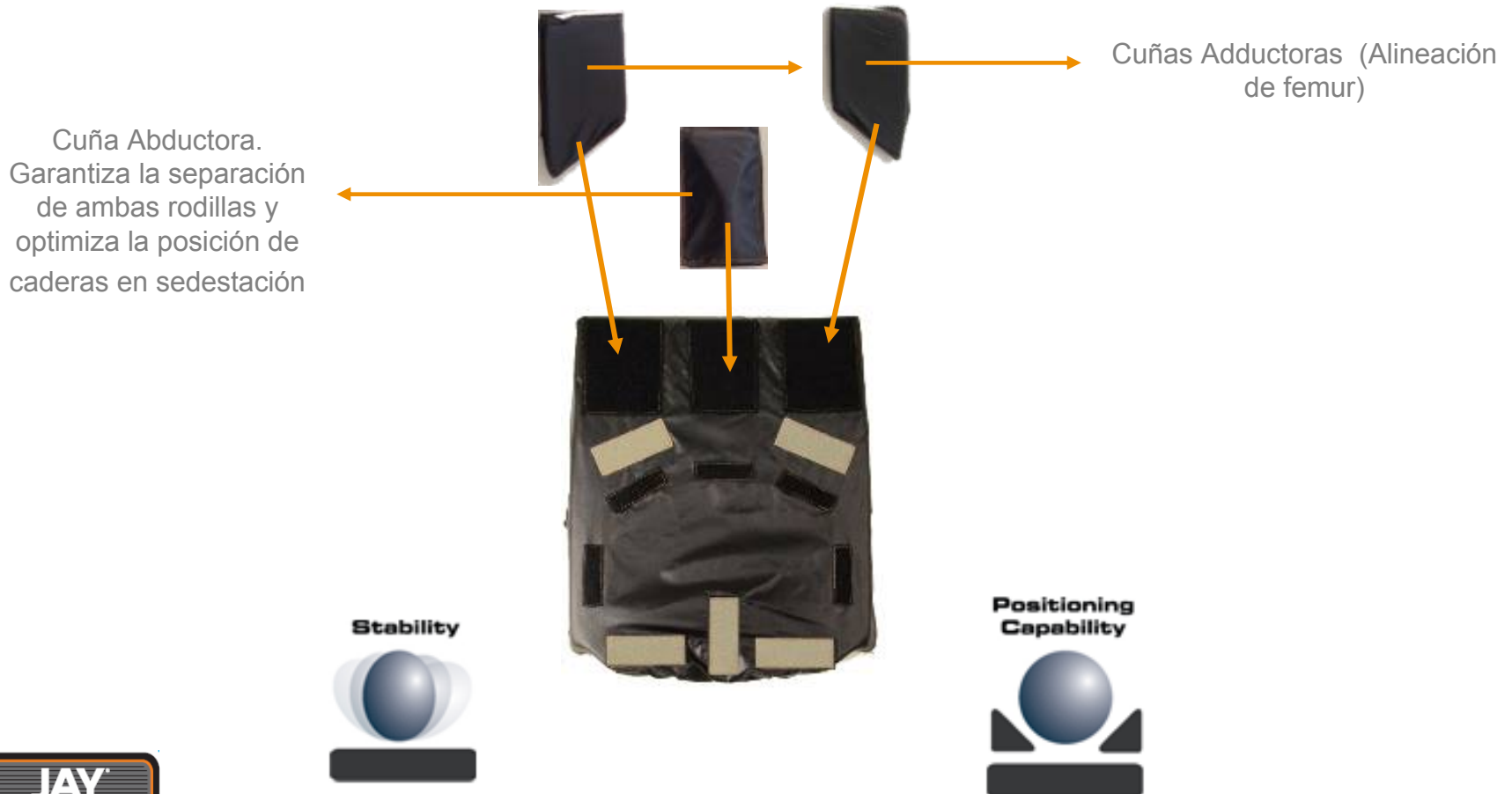

3 Tecnología innovadora en las fundas



Funda interna

- Funda resistente a la Incontinencia
- Cremallera con tecnología Aqua-guard → Base de espuma siempre seca
- Hilo de costura con revestimiento especial para evitar que el agua se introduzca en el cojín → Máxima función anti-incontinencia para máxima protección del cojín
- Muy fácil de limpiar
- Una única funda interna a la que se adaptan mediante velcros
 - Bolsa de fluido Std y Overfill
 - Cuñas de Posicionamiento



Funda externa

- Materiales y estética mejorada
- Logo actualizado
- Diseño biselado en parte frontal del cojín para optimizar el posicionamiento del usuario activo → Permite la sedestación con rodillas flexionadas sin sacrificar la longitud del cojín
- Asa de agarre ergonómica
- Práctico bolsillo integrado en la funda para objetos personales




3 opciones de funda exterior

- **Microclimática**- Optimiza la ventilación de la piel, disipando el calor y la humedad la para salvaguardar la integridad de la piel
- **Elástica** - Permite mayor inmersión y adaptación al kit de posicionamiento.
- **Incontinencia** – Indicada en los casos de incontinencia del usuario para protección extra de la base del cojín

Microclimática




Elástica

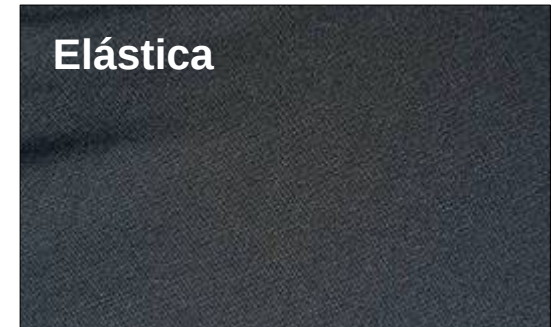

Incontinencia



Microclimatic
Material

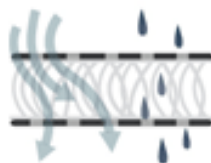

Tension
Reduction



4 Fácil de pedir





JAY®

Cojín Xtreme Active

Mayo 2014.v1

Facturado a:

Nombre: _____

Calle: _____

Localidad: _____ Código postal: _____

E-Mail: _____

Tel: _____ Fax: _____

Fecha de pedido: _____

Número de pedido de Sunrise _____

Enviado a:

Nombre: _____

Calle: _____

Localidad: _____ Código postal: _____

E-Mail: _____

Tel: _____ Fax: _____

Características Jay® Xtreme Active

Cojín ligero y de bajo perfil para facilitar las transferencias

Espuma contorneada para estabilización pélvica

Bolsa de fluido disponible en 2 tamaños: standard o grande

2 fundas: funda interior impermeable de fácil limpieza, y 3 opciones de funda exterior: elástica, microclimática o resistente a la incontinencia

Kit de posicionamiento opcional para la correcta alineación de las extremidades inferiores

2 años garantía cojín - 6 meses garantía funda

Peso máximo usuario: 150 kg

Peso usuario kg

Tipo de usuario - Indicaciones clínicas:

Usuario activo que necesita óptima protección de la piel con estabilidad en un cojín de bajo perfil (altura de asiento al suelo baja).

Excelente manejo de la presión y fricción en sedestación.

Ideal en usuarios con posturas simétricas y capaces de realizar independientemente cambios de peso.

Cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido Standard

Cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido Grande

XXXX €

XXXX €

Siga los siguientes pasos para obtener la referencia del cojín Jay Xtreme Active

Todas las referencias de cojines Jay Xtreme Active deben empezar por JXAC

	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	
JXAC	40	42	S	M	EU
Cojín Xtreme Active	Anchura	Profundidad	Tipo de fluido	Funda	

Ejemplo: JXAC4042SMEU
Cojín de 40 cm de ancho x 42 cm de profundidad, con fluido standard y funda microclimática

PASOS 1 y 2 - ANCHURA Y PROFUNDIDAD

Seleccione anchura y profundidad del cojín

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

PASO 1

ANCHURA

PASO 2

PROFUNDIDAD

Ante aquí la anchura y profundidad del cojín que desea



© Sunrise Medical 2014 1 / 3

	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	
JXAC	40	42	S	M	EU
Cojín Xtreme Active	Anchura	Profundidad	Tipo de fluido	Funda	

Todas las referencias comienzan por **JXAC** -> (**J**ay **X**treme **A**ctive **c**ushion)

Pedido Completo en solo **4 pasos**

Paso 1: Selección **ancho** de cojín, por ejemplo: 40 cms

Paso 2: Selección **profundidad** de cojín , por ejemplo: 42 cms

Paso 3: Selección **tamaño** de bolsa de Fluido

- S para Bolsa de Fluido Standard
- L para Bolsa de Fluido Overfill

Paso 4: Selección tipo de **funda exterior**

- M para Microclimatica
- S para Elástica (Stretch)
- I para resistente a la Incontinencia

Accesorios: Kit de posicionamiento

- Cuando el usuario necesita posicionamiento extra en EEII, es recomendable pedir el kit de posicionamiento

CUÑAS DE POSICIONAMIENTO (Opcional)	
LSKJXACEU-S	☐ Kit de posicionamiento (corto) para cojines con profundidades hasta 42 cm <i>Contiene 2 cuñas adductoras (derecha e izquierda) y 1 cuña abductora (central), todas ellas de 2,5 cm de alto</i>
LSKJXACEU-R	☐ Kit de posicionamiento (regular) para cojines con profundidades entre 44 y 50 cm <i>Contiene 2 cuñas adductoras (derecha e izquierda) y 1 cuña abductora (central), todas ellas de 2,5 cm de alto</i>

- Hay dos longitudes de posicionamiento dependiendo de la profundidad del cojín
 - LSKJXACEU-S – Corto, para profundidades desde 34 a 42 cm
 - LSKJXACEU-R – Regular, para profundidades desde 44 a 50 cm



Muchas más tallas disponibles

Antes: 21

Ahora: 44!!!

Bolsa de fluido STANDARD

Funda microclimática JAXC___SMEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34		○	○							
	36		○	○							
	38			○	○						
	40				○	○	○	○	○		
	42					○	○	○	○	○	○
	44						○	○	○	○	○
	46							○	○	○	○
	50								○	○	○

Bolsa de Fluido GRANDE

Funda microclimática JAXC___LMEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34		○	○							
	36		○	○							
	38			○	○						
	40				○	○	○	○	○		
	42					○	○	○	○	○	○
	44						○	○	○	○	○
	46							○	○	○	○
	50								○	○	○

Funda de Incontinencia JAXC___SIEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34		○	○							
	36		○	○							
	38			○	○						
	40				○	○	○	○	○		
	42					○	○	○	○	○	○
	44						○	○	○	○	○
	46							○	○	○	○
	50								○	○	○

Funda de Incontinencia JAXC___LIEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34		○	○							
	36		○	○							
	38			○	○						
	40				○	○	○	○	○		
	42					○	○	○	○	○	○
	44						○	○	○	○	○
	46							○	○	○	○
	50								○	○	○

Funda elástica JAXC___SSEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34		○	○							
	36		○	○							
	38			○	○						
	40				○	○	○	○	○		
	42					○	○	○	○	○	○
	44						○	○	○	○	○
	46							○	○	○	○
	50								○	○	○

Funda elástica JAXC___LSEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34		○	○							
	36		○	○							
	38			○	○						
	40				○	○	○	○	○		
	42					○	○	○	○	○	○
	44						○	○	○	○	○
	46							○	○	○	○
	50								○	○	○

Plazo de entrega

- Plazo de entrega standard
- Plazo de entrega superior
- /// Talla no disponible



JAY Xtreme Active



*... la solución más completa para el usuario activo.
Protección de la piel con estabilidad en un cojín de
perfil bajo*

