

Q500[®] SERIES

Stwórz własną przygodę



Wózki z napędem elektrycznym
z serii Q

Zaawansowana inżynieria. Dostosowane dla Ciebie.



Q500 R



Q500 M



Q500 F

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

A man with curly hair is seen from behind, sitting in a motorized wheelchair on a grassy bank. He is looking out over a calm lake towards a forested hill under a bright, hazy sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a strong lens flare and reflecting on the water. The wheelchair is black with orange accents on the wheels. The overall mood is peaceful and contemplative.

ZAANSOWANA TECHNOLOGIA DOSTOSOWANA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB.

Modele QUICKI®, SEDEO®, JAY®, WHITMYER® i SWITCH-IT® to najszerszy wybór innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie wózków z napędem elektrycznym najwyższej jakości, tworzonych pod kątem indywidualnych potrzeb klinicznych bądź wymogów stylu życia.

MOC QUICKIE

Pełny zakres wózków elektrycznych, od podstawowej mobilności po kompleksową rehabilitację. Cokolwiek potrzebujesz - bez kompromisów.

POTRZEBY KLINICZNE



Q50

SIEDZISKA
TAPICERKOWE

PODSTAWY
RWD



Q100

SIEDZISKA
TAPICERKOWE

PODSTAWY
RWD



Q200

SIEDZISKA
TAPICERKOWE

PODSTAWY
RWD



Q300

SIEDZISKA
SEDEO PRO
SEDEO LITE
KIDS SEAT
TEENS SEAT

PODSTAWY
MWD
RWD



Q400

SIEDZISKA
SEDEO PRO
SEDEO LITE

PODSTAWY
MWD
FWD
RWD



Q500

SIEDZISKA
SEDEO PRO
SEDEO LITE

PODSTAWY
MWD
FWD
RWD
HWD



Q700

SIEDZISKA
SEDEO PRO
SEDEO PRO ADV.
SEDEO PRO HD

PODSTAWY
MWD
FWD
RWD



Q700-UP

SIEDZISKA
SEDEO PRO ADVANCED

PODSTAWY
MWD
FWD

□ RWD: Napęd na oś tylną □ MWD: Napęd na oś środkową □ FWD: Napęd na oś przednią □ HWD: Napęd Hybryd

Nie wszystkie siedziska można łączyć ze wszystkimi podstawami. Proszę zapoznać się z formularzem zamówienia w celu uzyskania informacji o możliwych kombinacjach siedziska/podstawy.

WYDAJNOŚĆ PODSTAWY

PREZENTACJA SERII

PREZENTACJA SERII Q500

Seria QUICKIE Q500 powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie w tworzeniu wiodących na rynku podstaw, siedzisk i zaawansowanych rozwiązań elektrycznych QUICKIE®.



Q500 z
SEDEO PRO
NAPĘD NA OŚ TYLNA



Q500 z
SEDEO PRO
NAPĘD NA OŚ ŚRODKOWĄ



Q500 z
SEDEO PRO
NAPĘD NA OŚ PRZEDNIĄ



TRWAŁE WÓZKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM DO JAZDY NA ZEWNĄTRZ

Dzięki możliwości wyboru jednej z czterech podstaw (z zaawansowaną technologią zawieszenia i silnikami o dużej mocy), bardzo elastycznego siedziska SEDEO® PRO (w tym JAY i WHITMYER) oraz szerokiej ofercie najwyższej klasy sterowania R-Net i SWITCH-IT, model Q500 można dostosować do własnych potrzeb klinicznych bądź wymogów stylu życia.



PODSTAWY NAPĘDOWE

Q500 M: Napęd na oś środkową

Q500 R: Napęd na oś tylną

Q500 F: Napęd na oś przednią

Q500 H: Napęd Hybrid

SYSTEMY SIEDZISK

SEDEO PRO

JAY & WHITMYER

STEROWANIE I ŁĄCZNOŚĆ

Sterowanie VR2

Sterowanie RNET

Sterowniki SWITCH-IT

System montażu LINK-IT

WYJĄTKOWY STYL

STYLOWY DESIGN i wybór kolorów

WYBIERZ PODSTAWĘ Z NAPĘDEM NA OŚ PRZEDNIĄ, TYLNAŁ LUB ŚRODKOWĄ

Wszystkie podstawy Q500 doskonale sprawdzają się na zewnątrz dzięki 4-biegunowym silnikom o dużej mocy, amortyzowanemu zawieszeniu kół napędowych, które zapewnia wygodę i doskonałą przyczepność, dużym kołom, prędkości jazdy do 13 km/h i akumulatorom o pojemności do 80 Ah.



Wybór podstawy napędowej decyduje o tym, jak wózek radzi sobie w różnych sytuacjach i środowiskach. QUICKIE Q500 oferuje największy wybór podstaw na rynku, tak by każdy użytkownik znalazł najlepszą opcję w zależności od preferencji, doświadczenia, potrzeb klinicznych i stylu życia.

	Q500R	Q500M	Q500F
Rodzaj napędu	Napęd na oś tylną	Napęd na oś środkową	Napęd na oś przednią
Średnica skrętu	950 mm	560-630 mm	735 mm
Koła napędowe	13 i 14"	13 i 14"	13 i 14"
Kółka samonastawne	9" & 10"	7"	9"
Prędkość maks.	6, 8, 10 i 12,5 km/h (optionalnie)		
Akumulatory	50 Ah, 60 Ah; 80 Ah opcjonalnie		
Maks. szerokość zawracania	1258 mm	1100 mm	1240 mm
Maks. kąt podjazdu	10°	6°	6°
Maks. wysokość krawężnika	100 mm z KC 80 mm bez KC	50 mm	70 mm
Opcje kolorystyczne	7 kolorów	7 kolorów	7 kolorów
Maks. zasięg (iso 7176-4)	40 km	40 km	40 km
Min. wys. siedz. od podłoża	415 mm z przchyleniem siedziska / 425 mm z przchyleniem siedziska i windą (z akumulatorami 60 Ah)		

Q500 R

NAPĘD NA TYLNE KOŁA

Napęd na oś tylną to stabilna podstawa i sprawne pokonywanie krawężników. Zapewnia bezproblemowe prowadzenie wózka, co wiąże się z dobrą kontrolą za pomocą urządzeń sterowania nieproporcjonalnego.



Q500 M

NAPĘD NA ŚRODKOWE KOŁA

Napęd na oś środkową zapewnia niezrównaną zwrotność, zajmując przy tym mniej miejsca niż napęd na koła przednie lub tylne. Oznacza to także najmniejszy promień skrętu oraz ogromną intuicyjność jazdy i sterowania.



Q500 F

NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA

Podstawa z napędem na oś przednią gwarantuje bezproblemową jazdę na zewnątrz, dobrą zwrotność w pomieszczeniach oraz największą stabilność na stromych pochyłościach. Wymaga jednak od użytkownika większego doświadczenia.



Q500 M

NAPĘD NA OŚ ŚRODKOWĄ

Nowa podstawa QUICKIE Q500 M zapewnia zarówno doskonałą zwrotność w pomieszczeniach, jak i bezproblemową jazdę na zewnątrz. Silniki o dużej mocy w połączeniu z 6-kołowym amortyzowanym zawieszeniem i technologią Anti-pitch QUICKIE zapewniają wyjątkowo komfortową i bezpieczną jazdę.

DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ W POMIESZCZENIACH

Możliwość przejeżdżania przez drzwi o szerokości zaledwie 60 cm, jeżdżenia windą i poruszania się w ciasnych przestrzeniach dzięki niewielkiemu promieniowi skrętu i kompaktowym wymiarom podstawy. Łatwe przesiadanie się z wózka i na wózek, prosty dostęp do pojazdów i możliwość siadania przy stole dzięki siedzisku umieszczonemu niżej niż kiedykolwiek wcześniej, 41,5 cm nad ziemią w przypadku wersji z przechyłanym siedziskiem lub 42,5 cm w przypadku opcji windy i przechyłu siedziska.



ŚWIETNA WYDAJNOŚĆ W TERENIE



AMORTYZOWANE ZAWIESZENIE WSZYSTKICH KÓŁ

Użytkownik może się cieszyć płynną i stabilną jazdą nawet po nierównym terenie dzięki opatentowanemu amortyzowanemu zawieszeniu QUICKIE - sześć kół z niezależną amortyzacją łagodzi wszelkie wstrząsy. Zawieszenie to pozwala też pokonywać krawężniki o wysokości do 50 mm i zapewnia maksymalną przyczepność nawet w trakcie wjeżdżania na zbocza o nachyleniu do 8 stopni.



TECHNOLOGIA ANTI-PITCH

Technologia QUICKIE Anti-pitch zapobiega zsuwaniu się z pochyłości, a umieszczenie całego ciężaru użytkownika nad kołem napędowym maksymalizuje przyczepność wózka i bezpieczeństwo jadącego.



MAKSYMALNA SWOBODA

Dzięki niezwykle niezawodnym 4-biegunowym silnikom o wysokim momencie obrotowym, które zapewniają prędkość 6, 8, 10 lub 13 km/h oraz akumulatorom o pojemności 60 lub 80 Ah, które maksymalizują zasięg, z Q500 M zawsze możesz podróżować pewnie.

PODSTAWY NAPEŁDOWE

Q500 F

NAPĘD NA OŚ PRZEDNIĄ

Niewielka odległość siedziska Q500 F od podłoża wynosząca 415 mm zapewnia dobry dostęp do pojazdów przystosowanych do przewozu wózków, stołów itd.

DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ W POMIESZCZENIACH

Q500 F, z przywiedzionymi ramionami kółek, jest responsywny i oferuje dobrą zwrotność do użytku w pomieszczeniach.



ŚWIETNA WYDAJNOŚĆ W TERENIE

Q500 F charakteryzuje trwała konstrukcja z zaawansowanym zawieszeniem kół napędowych i silnikami dużej mocy, co przekłada się na płynną i stabilną jazdę w każdych warunkach.



ZAAWANSOWANE ZAWIESZENIE KOŁA

Pełne amortyzowane zawieszenie koła napędowego pozwala pokonać wszystkie przeszkody, niemal tego nie zauważając. W połączeniu z technologią wyrównującą gwarantuje to płynną i komfortową jazdę w każdych warunkach




TECHNOLOGIA WYRÓWNUJĄCA

Maksymalna przyczepność dzięki unikatowej technologii wyrównującej. Koła napędowe są połączone osią, która niweluje naturalne ściąganie na bok na łukach i zakrętach pokonywanych z dużą prędkością, tak by zapewnić obu kołom maksymalną przyczepność



MAKSYMALNA SWOBODA

Dzięki niezwykle niezawodnym 4-biegowym silnikom o wysokim momencie obrotowym, które zapewniają prędkość 6, 8, 10 lub 13 km/h oraz akumulatorom o pojemności 60 lub 80 Ah, które maksymalizują zasięg, z Q500 F zawsze możesz podróżować pewnie.

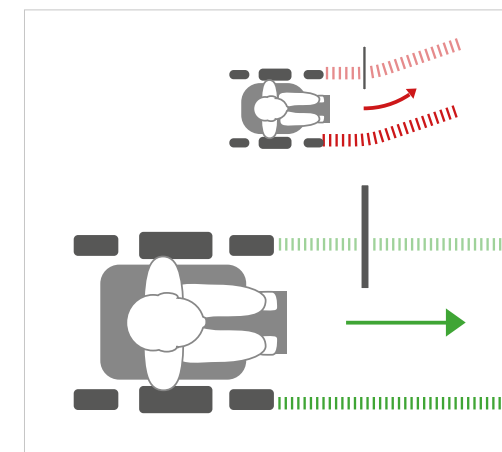

UTRZYMYWANIE KIERUNKU JAZDY ZA POMOCĄ ŻYROSKOPOWEJ KONTROLI TRAKCJI

Opcjonalny system żyroskopowej kontroli trakcji automatycznie wykrywa i koryguje nawet najmniejsze odstępstwa od wybranego kierunku jazdy. Zapewniając precyzyjne sterowanie jazdą, zmniejsza liczbę fizycznych lub kognitywnych działań koniecznych do utrzymania kierunku jazdy, dzięki czemu jazda jest mniej wymagająca (szczególnie w przypadku korzystania ze specjalnych sterowników).

PODSTAWY NAPEŁDOWE

Q500 R

NAPĘD NA OŚ TYLNA

Niewielka odległość siedziska Q500 R od podłoża wynosząca 415 mm zapewnia dobry dostęp do pojazdów przystosowanych do przewozu wózków, stołów itd.

PROSTA I INSTUICYJNA OBSŁUGA

Dzięki umiejscowieniu kół napędowych, Q500 R zapewnia intuicyjną jazdę i jest prosty w obsłudze.



STWORZONE Z MYŚLĄ O JEŹDZIE W TERENIE

Wytrzymała konstrukcja Q500R w połączeniu z niezrównanym działaniem systemu pełnego zawieszenia, technologią wyrównującą i wbudowaną kontrolą trakcji gwarantują płynną, stabilną jazdę oraz pełną kontrolę nad wózkiem w każdej sytuacji, bez żadnych kompromisów.



ZAAWANSOWANE ZAWIESZENIE KOŁA

Pełne amortyzowane zawieszenie koła napędowego pozwala pokonać wszystkie przeszkody, niemal tego nie zauważając. W połączeniu z technologią wyrównującą gwarantuje to płynną i komfortową jazdę w każdych warunkach




TECHNOLOGIA WYRÓWNUJĄCA

Maksymalna przyczepność dzięki unikatowej technologii wyrównującej. Koła napędowe są połączone osią, która niweluje naturalne ściąganie na bok na łukach i zakrętach pokonywanych z dużą prędkością, tak by zapewnić obu kołom maksymalną przyczepność



MAKSYMALNA SWOBODA

Dzięki niezwykle niezawodnym 4-biegowym silnikom o wysokim momencie obrotowym, które zapewniają prędkość 6, 8, 10 lub 13 km/h oraz akumulatorom o pojemności 60 lub 80 Ah, które maksymalizują zasięg, z Q500 R zawsze możesz podróżować pewnie.

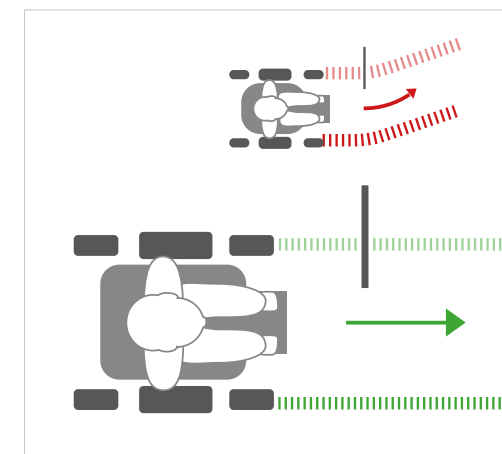

UTRZYMYWANIE KIERUNKU JAZDY ZA POMOCĄ ŻYROSKOPOWEJ KONTROLI TRAKCJI

Opcjonalny system żyroskopowej kontroli trakcji automatycznie wykrywa i koryguje nawet najmniejsze odstępstwa od wybranego kierunku jazdy. Zapewniając precyzyjne sterowanie jazdą, zmniejsza liczbę fizycznych lub kognitywnych działań koniecznych do utrzymania kierunku jazdy, dzięki czemu jazda jest mniej wymagająca (szczególnie w przypadku korzystania ze specjalnych sterowników).



SEDEO PRO

System siedzenia SEDEO PRO łączy elastyczną ramę siedziska oferującą liczne opcje konfiguracji z ogromnym wyborem możliwości podparcia i pozycjonowania, w tym szeroką ofertą poduszek i oparć SEDEO PRO opracowanych z myślą o umiarkowanych lub wysokich potrzebach klinicznych.

SEDEO PRO zapewnia wygodę użytkowania i zwiększa niezależność użytkownika w codziennym życiu.

SZYBKA I ŁATWA REGULACJA

Rama SEDEO PRO jest niezwykle elastyczna i w pełni regulowana. Wszelkie regulacje można wykonać w szybki i prosty sposób za pomocą jednego narzędzia, nawet gdy użytkownik siedzi na wózku. Ramę można łatwo dostosować i zmodyfikować pod kątem zmieniających się potrzeb użytkownika.

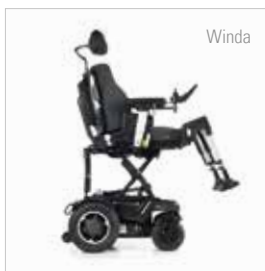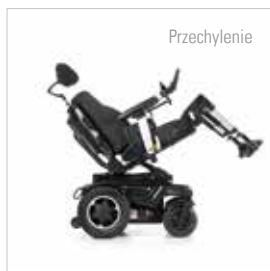

SIEDZISKO, KTÓRE W PEŁNI DOSTOSOWUJE SIĘ DO UŻYTKOWNIKA



Oparcie Anti-shear

Odkryj nowe elektrycznie odchylane oparcie ze 100 mm zabezpieczeniem przed siłami ścinania – dzięki niemu użytkownik nie zsuwa się z poduszki. Dodatkowo SEDEO PRO jest dostępny ze stałym oparciem lub dwoma innymi opcjami odchylanego oparcia: mechanicznym i z siłownikami.

Odchylany podnóżek z regulacją kąta

Elektryczny podnóżek z regulacją kąta i długości pozwala uzyskać optymalną pozycję. Dostępny jest w wersji montowanej centralnie i odchylanej. Ponadto można wybrać podnóżek ze standardowym montażem centralnym, odchylany 70° lub odchylany z manualną regulacją kąta.

Elastyczna poduszka oparcia

System SEDEO PRO oferuje szeroki wybór poduszek siedziska i oparcia, w tym elastyczną poduszkę oparcia z regulowanymi paskami i pelotami bocznymi, co zapewnia wyjątkową wygodę i ułatwia pozycjonowanie.

Elementy pozycjonujące

Dostępnych jest także wiele elementów pozycjonujących, takich jak zagłówki SEDEO i WHITMYER, odchylane boczne peloty piersiowe oraz peloty udowe lub kolanowe. Wszystkie elementy pozycjonujące łatwo odchylić lub zdjąć.

Odchylane podłokietniki

Łatwe w obsłudze odchylane podłokietniki zapewnia wolną przestrzeń do przesiadania się. Możesz wybrać wersję wyjmowaną lub rozkładaną. Dostępne również: Zdejmowany podłokietnik z pojedynczym słupkiem. Wszystkie kompatybilne z 5 opcjami podłokietników.

SYSTEMY SIEDZISK



JAY® I WHITMYER®

OPCJE POZYCJONOWANIA

Szeroki wybór zagłówek WHITMYER i poduszek JAY kompatybilnych z ramą SEDEO PRO pozwala sprostać wysokim wymagom klinicznym i zapewnić użytkownikowi możliwie najlepsze siedzisko.





ZAGŁÓWKI WHITMYER

Stworzone z myślą o różnych potrzebach użytkownika: od podstawowego podparcia po wielopunktową kontrolę. Zagłówki WHITMYER oferują poduszki w wielu różnych kształtach i rozmiarach, tak by zapewnić jak najlepsze pozycjonowanie głowy i wygodę.

PODUSZKI I OPARCIA JAY

Poduszki i oparcia JAY, stworzone z myślą o stabilności miednicy, ochronie skóry i wygodzie, nie wymagają wielu czynności konserwacyjnych, można je łatwo dostosować do własnych potrzeb i dostępne są w wielu wersjach.

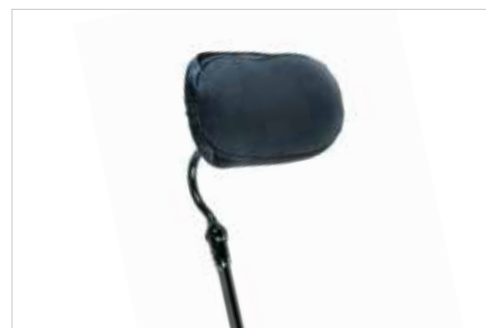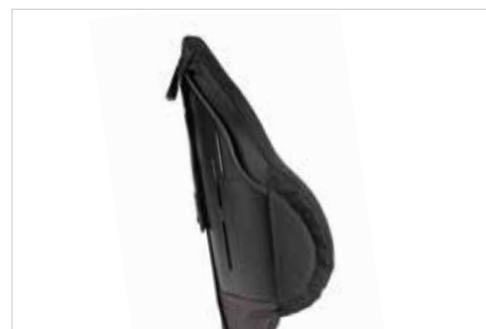

STEROWANIE I ŁĄCZNOŚĆ

KONTROLA W ZASIĘGU PALCA

Seria Q500 i jej zaawansowana technologia sterowania zapewniają użytkownikowi pełną kontrolę nad sytuacją. Możliwe jest sterowanie nie tylko Q500, ale także urządzeniami domowymi, telefonem i komputerem.



VR2 i R-NET ZAAWANSOWANE JOYSTICKI

Każdy wózek Q500 wyposażony jest w niezawodne sterowanie VR2 i zaawansowany joystick R-Net. Duży, czytelny wyświetlacz HD i łatwe w obsłudze przełączniki zapewniają intuicyjną obsługę.

ŁĄCZNOŚĆ

Bezproblemowa kontrola nad otoczeniem za pomocą zintegrowanej funkcji podczerwieni. Dzięki joystickowi można sterować kinem domowym, telewizorem, odtwarzaczem DVD, stacjami dokującymi i innymi urządzeniami.

BLUETOOTH i IDRIVE

Dzięki tej przydatnej funkcji dodatkowej, można sterować telefonem, komputerem, tabletem oraz innymi urządzeniami wyposażonymi w moduł Bluetooth lub iDrive.

OPATENTOWANE PRZYCISKI QUICKIE Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA

Opatentowana funkcja programowania przycisków Quickie pozwala dowolnie ustawiać działanie przycisków joysticka. Przyciskom można przypisać także dodatkowe funkcje (aktywowane dłuższym przytrzymaniem przycisku), dzięki czemu użytkownik ma szybszy i prostszy dostęp do często używanych funkcji, bez konieczności użycia joysticka.




SWITCH-IT[®]

INNOWACYJNE STEROWANIE

Wygodny dostęp do 5 programowalnych położeń za pomocą Ctrl+5 – doskonałe połączenie z siedziskiem Memory. Użytkownik może przejść bezpośrednio do wymaganej funkcji, naciskając przycisk.

ALTERNATYWNE STEROWANIE NAPĘDEM

Jeżeli sterowanie za pomocą tradycyjnego joysticka nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem, alternatywne sterowanie napędem pozwala doświadczyć pełni możliwości i korzyści oferowanych przez

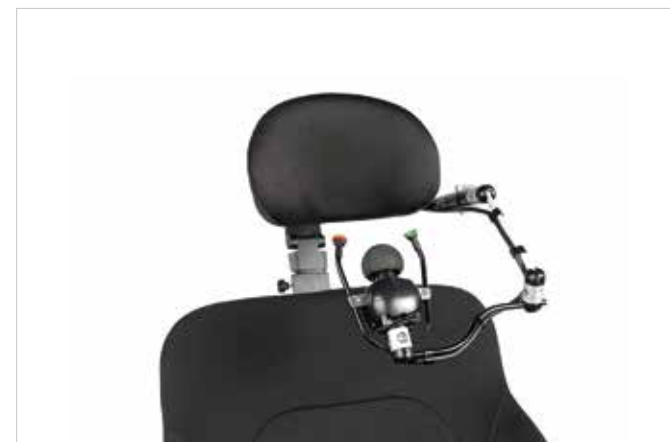

LINK-IT SYSTEM MOCOWANIA

Konieczne są dodatkowe przełączniki lub elementy sterowania? To żaden problem, wystarczy je podłączyć za pomocą uniwersalnego systemu Link-It.

Dzięki zastosowaniu różnych dostępnych modułów i drążków, można stworzyć nieskończoną liczbę rozwiązań, dostosowanych do każdych potrzeb. Link-It to nie tylko łatwy montaż, ale także minimalistyczne wzornictwo współgrające z oszczędną estetyką Twojego wózka, mimo dodatkowych elementów. Kontroler na podłokietniku, przycisk na oparciu, przełącznik przy nagłówku? Link-It – po prostu go podłącz.







DESIGN I WYGLĄD

WYJĄTKOWY STYL

Seria Q500 to nowy wymiar stylu. Matowe czarne wykończenie podwozia, ukryte przewody i części w połączeniu z elegancką tapicerką przekładają się na atrakcyjny, nowoczesny wygląd.

Masz ochotę na zmianę?

Seria Q500 z SEDEO PRO i SEDEO LITE dostępna jest w 7 nowoczesnych opcjach kolorystycznych, które stanowią doskonałe uzupełnienie atrakcyjnej matowej czerni podstawy napędowej. Wystarczy zmienić wstawki. Stylizacja wózka elektrycznego nigdy nie była prostsza.



DANE TECHNICZNE / Q500 R - Q500 M - Q500 F z SEDEO PRO

	Q500 R	Q500 M	Q500 F		Q500 R	Q500 M	Q500 F
Maks. waga użytkownika	160 kg	160 kg	160 kg	Maks. prędkość	12,5 km/h	12,5 km/h	12,5 km/h
Szerokość siedziska	380-560 mm	380-560 mm	380-560 mm	Akumulatory	50/60/80 Ah	50/60/80 Ah	50/60/80 Ah
Głębokość siedziska	400-600 mm	400-600 mm	400-600 mm	Elektronika	VR2, R-Net	VR2, R-Net	VR2, R-Net
Wysokość siedziska	415-490 mm	415-490 mm	415-490 mm	Średnica zawracania	950 mm	560-630 mm	735 mm
Wysokość opracia	440-620 mm	440-620 mm	440-620 mm	Maks. szerokość zawracania	1258 mm	1100 mm	1240 mm
Szerokość całkowita	640 mm	610-620 mm	640 mm	Maks. kąt podjazdu	10°	6°	6°
Długość całkowita	Maks. 1180	Maks. 1280	Maks. 1340	Maks. wys. krawężnika	80 mm (100 mm z KC)	50 mm	70 mm
Wysokość całkowita	Maks. 1400	Maks. 1400	Maks. 1400	Koła napędowe	13"/14"	13"/14"	13"/14"
El. odchylane oparcie	90°-150°	90°-150°	90°-150°	Kółka samonastawne	9"-10"	7"	9"
Oparcie Antishear	100 mm (opcjonalnie)	100 mm (opcjonalnie)	100 mm (opcjonalnie)	Opcje kolorystyczne	7 kolorów	7 kolorów	7 kolorów
Kąt siedziska	30°/50°	30°/50°	30°/50°	Maks. zasięg (ISO 7176-4)	Maks. 40	Maks. 40	Maks. 40
Funkcje siedziska	Przechylenie siedziska, Winda i przechylenie siedziska, Odchylenie oparcia			Waga wózka	od 133 kg	od 130 kg	od 133 kg
Crash test	Tak - zatwierdzony do transportu przodem do kierunku jazdy w pojeździe (ISO 7176-19). Mocowanie: 4 punkty mocowania wózka z 2 podwójnymi paskami z tyłu i 2 pojedynczymi paskami z przodu. Ogólna ocena dopasowania pasów bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 7176-19:2008 Załącznik D=A. Zakotwiczone pasy bezpieczeństwa są niedozwolone. Łatwość dostępu i zwrotność w pojazdach zależy od rozmiaru wózka.			Transport bez użytkownika	Dozwolony do transportu (w samochodzie czy samolocie)		
				Przeznaczenie i środowisko	Dla użytkowników z ograniczoną mobilnością; produkt do samodzielnego użytkowania lub opieki, do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Klasa wózka - B		



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl

Więcej informacji na temat pełnych specyfikacji, osprzętu opcjonalnego i akcesoriów można znaleźć na formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Sunrise Medical.

Z myślą o osobach niedowidzących niniejszy dokument udostępniono w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Rev.: 06/2023