

EASY FAMILIE

FÜR JEDEN LIFESTYLE
DER PASSENDE ROLLSTUHL





DAS LEBEN GENIESSEN.
DIE EASY PRODUKTFAMILIE
VON SOPUR BIETET FÜR JEDEN
DAS PASSENDE PRODUKT.

EASY LIFE

Der Bestseller

Hervorragende Grundausstattung, hohe Individualität und jede Menge Optionen.



Easy Life

Rahmen mit integrierter Fußraste.



Easy Life Swing Away

Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0176



// ABKLAPPBARER RÜCKEN

Für ein sehr kompaktes Packmaß läßt sich der Rücken nach vorne klappen.



// MEHR INDIVIDUALITÄT

Definieren Sie Ihren Style nach Ihren Wünschen aus 3 Eloxalfarben für Lochplatte und Gabel.



// WINKLEINSTELLBARER RÜCKEN

Leicht einzustellen in 3° Schritten von -12° bis 12° für eine optimale Sitzposition im Rollstuhl.

EASY LIFE R

Der Bestseller auch als Starrrahmen

Der Starrrahmenrollstuhl: Minimalistischer Stil mit hervorragenden Fahreigenschaften. Aktiv, mobil und unabhängig.



Easy Life R

Rahmen mit integrierter Fußraste.



Easy Life R Swing Away

Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.5004



// KNIEHEBELBREMSE

Die leicht zu bedienende Kniehebelbremse erleichtert den Transfer aus und in den Rollstuhl durch den Abklappmechanismus des Griffes.



// ANPASSBAR

Variable Sitztiefeinstellung für individuelle Anpassung an den Nutzer.



// EXO EVO RÜCKENBESPANNUNG

Mit einem komfortabel-breiten, fein einstellbaren obersten Gurt, und einer neuen, angenehm weichen Polsterung.

EASY LIFE Teen



Easy Life T
Rahmen mit integrierter Fußraste.

Der Jugendliche

Der Easy Life T ist der ideale Begleiter für den Alltag: Leicht zu transportieren und dank der Optionsvielfalt individuell auf den jugendlichen Nutzer einstellbar.



Easy Life T Swing Away
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.1081



// FUSSBRETTVERRIEGELUNG

Mit der Fußbrettverriegelung bleibt auch beim Befahren von unebenem Gelände alles in Position.



// SAFARI-BREMSE

Druckbremse im Kleiderschutzseitenteil integriert für bessere Handhabung und mehr Sicherheit.



// SITZHÖHE EINSTELLBAR

Für eine ideale Sitzposition mit sieben Einstellmöglichkeiten, optional auch mit Radsturz für noch mehr Wendigkeit.

EASY LIFE RT^{teen}

Der Jugendliche auch als Starrrahmen

Stark und zuverlässig: Der Easy Life RT ist dann in seinem Element, wenn er richtig gefordert wird: Der Starrrahmen und beste Fahreigenschaften verleihen ihm die nötige Stabilität.



Easy Life RT
Rahmen mit integrierter Fußraste.



Easy Life RT Swing Away
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.6007



// WINKLEINSTELLBARER RÜCKEN

In 4°-Schritten von 78° bis 98° einstellbar, mit integrierter Verriegelung für platzsparenden Transport.



// EINSTELLBARE SITZTIEFE

Variable Sitztiefeinstellung für individuelle Anpassung an den Nutzer.



// ABDUKTIONSRAHMEN

Zur optimalen Positionierung im Rollstuhl (2 cm pro Seite).

EASY 200



Der Klassiker

Ein Gesamtkonzept, das immer wieder überzeugt: drei Rahmenlängen, optimale Einstellmöglichkeiten und eine kompakte Bauweise.



Easy 200
Rahmen mit integrierter Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0043



// AUTOMATISCH FALTENDES FUSSBRETT

Für vereinfachtes Zusammenfallen des Rollstuhls.



// 4-ARM-KREUZSTREBE

Belastbar, zuverlässig und langlebig.



// EXO EVO RÜCKENBESPANNUNG

Mit einem komfortabel-breiten, fein einstellbaren obersten Gurt, und einer neuen, angenehm weichen Polsterung.

EASY 300

Der Allrounder

Hohe Flexibilität und individuelle Anpassung – Argumente, die den Erfolg des Easy 300 ausmachen und heute mehr denn je im Mittelpunkt stehen.



Easy 300


Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0044



// CARBON FUSSBRETT

Leicht, stabil und für eine optimale Positionierung der Füße winkel- und tiefeinstellbar.

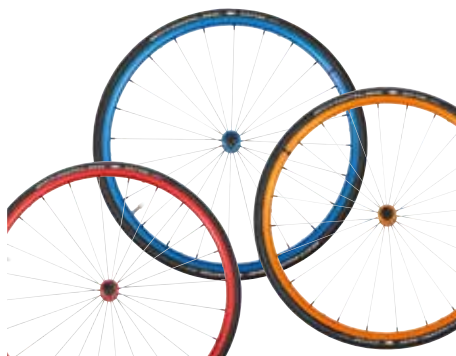

// ELOXIERTE ANTRIEBSRÄDER

Mit farbig eloxierter Nabe und Felge, verleihen Sie Ihrem Aktivrollstuhl eine ganz persönliche Note.



// KNIEHEBELBREMSE

Die leicht zu bedienende Kniehebelbremse erleichtert den Transfer aus und in den Rollstuhl durch den Abklappmechanismus des Griffes.

EASY LIFE ECO

Der Bestseller

Macht das Leben einfach. Ein faltbarer Rollstuhl für den wirtschaftlichen Nutzer. Für jeden Anspruch die passende Lösung.



Easy Life Eco

Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste..

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0176



// AKTIVE SCHIEBEGRIFFE

Ergonomisches und modernes Design.



// ALUMINIUM SEITENTEIL

Für optimale Positionierung zum Rad.



// ACHSPLATTE

Reduktion der Gesamtbreite durch neue Achsplatte und Montageoptimierung (Distanzscheiben).

EASY LIFE i

Der Klinikstuhl

Durch seine vielseitige Einstellbarkeit ist der Easy Life i besonders für die Versorgung von Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie z.B. MS, ALS und Schlaganfall geeignet und kann einfach an Veränderungen des Krankheitsbildes des Nutzers angepasst werden.



Easy Life i

Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0205



// SITZHÖHENEINSTELLUNG

Die vordere Sitzhöhe ist für die wechselnden Bedürfnisse in 1 cm Schritten einstellbar.



// SEITENTEIL MIT EINHANDBEDIENUNG

Einfache Höheneinstellbarkeit mit nur einer Hand.



// HALBSEITENTISCH

Zur Positionierung des Armes für mehr Sicherheit und Komfort.

EASY^{MAX.}

MIT EXO EVO
RÜCKEN-
BESPANNUNG



Easy Max.
Rahmen mit integrierter Fußraste.

Reduce to the max

Der Easy^{max.} macht keine Kompromisse: starke Optik, optimale Beinjustierung, abgerundeter Rahmen, flach geformte Radabdeckung – keine Ecken, keine Kanten.



Easy max. Swing Away
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0128



// RÜCKENWINKEL EINSTELLBAR

In 3° Stufen von -9° bis 9° für eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers.



// ACHSVERSTELLUNG

Vertikale & horizontale Einstellmöglichkeit für die optimale Sitzhöhe und den idealen Schwerpunkt.



// INNENLIEGENDE KREUZSTREBE

Für maximale Stabilität, beste Fahreigenschaften sowie angenehmeren Transfer.

FMG – FÜR MICH GEBAUT

Jeder Mensch ist so individuell wie sein Fingerabdruck. Deshalb konstruieren und fertigen wir Ihren Rollstuhl auch gerne nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen.

Sie wünschen technische Alternativen oder Sonderausstattungen? Sprechen Sie uns einfach an!



→ Easy^{max} mit Style Paket

CRASH GETESTET FÜR MEHR SICHERHEIT BEIM TRANSPORT

Nahezu alle unsere Rollstuhlmodelle sind nach ISO 7176-19 Crash getestet und damit zum Transport von Personen im Rollstuhl sitzend im Fahrzeug zugelassen. Darüber hinaus sind auch unsere JAY Rückensysteme und JAY Zip Rückensysteme in Verbindung mit einer entsprechenden JAY Kopfstütze nach ISO 16840-4 Crash getestet.

TECHNISCHE DATEN

→ Faltrollstühle



	EASY LIFE	EASY LIFE SWING AWAY*
Sitzbreite	360 – 540 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 540 mm (in 20 mm Schritten)
Sitztiefe	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)
Vordere Sitzhöhe	400 – 540 mm	400 – 530 mm
Hintere Sitzhöhe	400 – 510 mm	400 – 500 mm
Sitzwinkel	0° bis 12°	0° bis 12°
Rückenhöhe	250 bis 500 mm (in 25 mm Schritten)	250 bis 500 mm (in 25 mm Schritten)
Rückenwinkel	-12° bis 12°	-12° bis 12°
Gesamtbreite	Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm
Rahmenwinkel	105° / 95°	90° / 100°
Einzug	20 mm je Seite	–
Sturz	0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°
Max. Zuladung	140 kg	140 kg
Gewicht	ab 11 kg	ab 12,6 kg
Bespannungsfarben	1	1
Rahmenfarben	10	10
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:	18.50.03.0176	18.50.03.0176

*Fußraste abnehm- und wegschwenkbar

SOPUR

→ Starrrahmenrollstühle



EASY LIFE ECO	EASY LIFE R	EASY LIFE R SWING AWAY*
360 – 540 mm (in 20 mm Schritten)	340 – 480 mm (in 20 mm Schritten)	340 – 480 mm (in 20 mm Schritten)
400 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)
450 – 520 mm	390 – 500 mm	390 – 500 mm
430 – 500 mm	360 – 470 mm	360 – 450 mm
0° bis 12°	0° bis 12°	0° bis 12°
375 bis 460 mm (in 25 mm Schritten)	250 bis 450 mm (in 25 mm Schritten)	250 bis 450 mm (in 25 mm Schritten)
–	-12° bis 8°	-12° bis 8°
Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm
100°	105° / 95°	90° / 100°
–	20 mm je Seite	–
0° / 3°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°
140 kg	125 kg	125 kg
ab 15,5 kg	ab 11 kg	ab 12,6 kg
1	1	1
7	10	10
18.50.03.0176	18.50.03.5004	18.50.03.5004



TECHNISCHE DATEN

→ Faltrollstühle



	EASY LIFE Teen	EASY LIFE Teen SWING AWAY*
Sitzbreite	280 – 500 mm	280 – 500 mm
Sitztiefe	320 – 460 mm	320 – 460 mm
Vordere Sitzhöhe	400 – 530 mm	400 – 530 mm
Hintere Sitzhöhe	400 – 500 mm	400 – 500 mm
Sitzwinkel	0° – 12°	0° – 12°
Rückenhöhe	250 – 475 mm	250 – 475 mm
Rückenwinkel	-12° bis 12°	-12° bis 12°
Gesamtbreite	Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm
Rahmenwinkel	95° / 105°	90° / 100°
Einzug	20 mm (Abduktion 23mm)	–
Sturz	0° / 1° / 2° / 3° / 4° / 6°	0° / 1° / 2° / 3° / 4° / 6°
Max. Zuladung	100 kg	100 kg
Gewicht	ab 10 kg	ab 11,5 kg
Bespannungsfarben	1	1
Rahmenfarben	31	31
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:	18.50.03.1081	18.50.03.1081

*Fußraste abnehm- und wegschwenkbar

SOPUR

→ Starrrahmenrollstühle



EASY LIFE RT_{een}

EASY LIFE RT_{een} SWING AWAY*

280 – 480 mm

280 – 480 mm

320 – 460 mm

320 – 460 mm

360 – 500 mm

360 – 500 mm

360 – 450 mm

360 – 450 mm

0° – 12°

0° – 12°

250 – 475 mm

250 – 475 mm

-8° bis 12°

-8° bis 12°

Sitzbreite + 200 mm

Sitzbreite + 200 mm

95° / 105°

90° / 100°

20 mm (Abduktion 23mm)

–

0° / 1° / 2° / 3° / 4° / 6°

0° / 1° / 2° / 3° / 4° / 6°

100 kg

100 kg

ab 10 kg

ab 11,5 kg

1

1

31

31

18.50.03.6007

18.50.03.6007



TECHNISCHE DATEN

→ Faltrollstühle



	EASY LIFE i*	EASY 200
Sitzbreite	340 - 540 mm (in 20 mm Schritten)	320 – 540 mm (in 20 mm Schritten)
Sitztiefe	360 - 540 mm (in 20 mm Schritten)	340 – 500 mm (in 20 mm Schritten)
Vordere Sitzhöhe	380 - 530 mm	400 – 540 mm
Hintere Sitzhöhe	370 - 510 mm	400 – 520 mm
Sitzwinkel	0° bis 12°	0° bis 11°
Rückenhöhe	360 bis 500 mm (in 25 mm Schritten)	275 bis 475 mm (in 25 mm Schritten)
Rückenwinkel	-5° bis 25°	-3° bis 15°
Gesamtbreite	Sitzbreite + 260 mm	Sitzbreite + 200 mm
Rahmenwinkel	100°	110°
Einzug	–	–
Sturz	0° / 3°	0° / 1° / 2° / 4°
Max. Zuladung	140 kg	140 kg
Gewicht	ab 14,5 kg	ab 12,5 kg
Bespannungsfarben	1	5
Rahmenfarben	10	33
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:	18.50.03.0205	18.50.03.0043

*Fußraste abnehm- und wegschwenkbar



SOPUR



EASY 300*	EASY ^{MAX.}	EASY ^{MAX.} SWING AWAY*
320 – 540 mm (in 20 mm Schritten)	340 – 460 mm (in 20 mm Schritten)	340 – 460 mm (in 20 mm Schritten)
340 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)	360 – 500 mm (in 20 mm Schritten)
400 – 540 mm	460 – 530 mm	460 – 500 mm
400 – 520 mm	430 – 500 mm	430 – 480 mm
0° bis 11°	0° bis 12°	0° bis 12°
275 bis 475 mm (in 25 mm Schritten)	275 bis 475 mm (in 25 mm Schritten)	275 bis 475 mm (in 25 mm Schritten)
-3° bis 15°	-9° bis 9°	-9° bis 9°
Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm	Sitzbreite + 200 mm
90° / 100°	105°	100°
–	–	–
0° / 1° / 2° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°	0° / 1° / 2° / 3° / 4°
140 kg	120 kg	120 kg
ab 13,2 kg	ab 9,8 kg	ab 9,9 kg
4	6	6
33	28	28
18.50.03.0044	18.50.03.0128	18.50.03.0128





FÜR JEDEN NUTZER EINE
INDIVIDUELLE LÖSUNG:
DIE EASY PRODUKTFAMILIE.



Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung auf unserer Internetseite. Fragen beantwortet Ihnen auch gerne der Sunrise Medical Kundenservice. Dieses Dokument können Sie auch unter www.SunriseMedical.de im PDF-Format in größerer Schrift ansehen.



MADE IN
MALSCH/GERMANY



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

