

Accora

Utvalg av gulvsenger



Hvorfor velge en Accora gulvseng

Sengehøyde er en betydelig årsak til fallrelaterte skader.

Accora gulvsenger er designet for å redusere denne risikoen ved å redusere avstanden mellom madrassplattformen og gulvet, noe som reduserer potensialet for skadelige fall sammenlignet med standard senger.



FloorBed-teknologi: Den velprøvde løsningen for å unngå fallskader

Klinisk evaluering av Accoras FloorBed-teknologi viste 77% reduksjon i sengefall og relaterte skader ble eliminert.


Kasusstudie av gulvseng i et¹

- 55% Nedgang i fall
- 77% Reduksjon i sengefall
- 100% Reduksjon i skadelige sengefall



BodyMove-teknologien støtter forebygging av trykkskader.

Når du beveger deg fra liggende til sittende stilling i sengen, forlenges kroppen naturlig. Accora BodyMove™-teknologien imøtekommer denne endringen med trykkfordeling og reduksjon av friksjon på huden, samtidig som komforten økes.

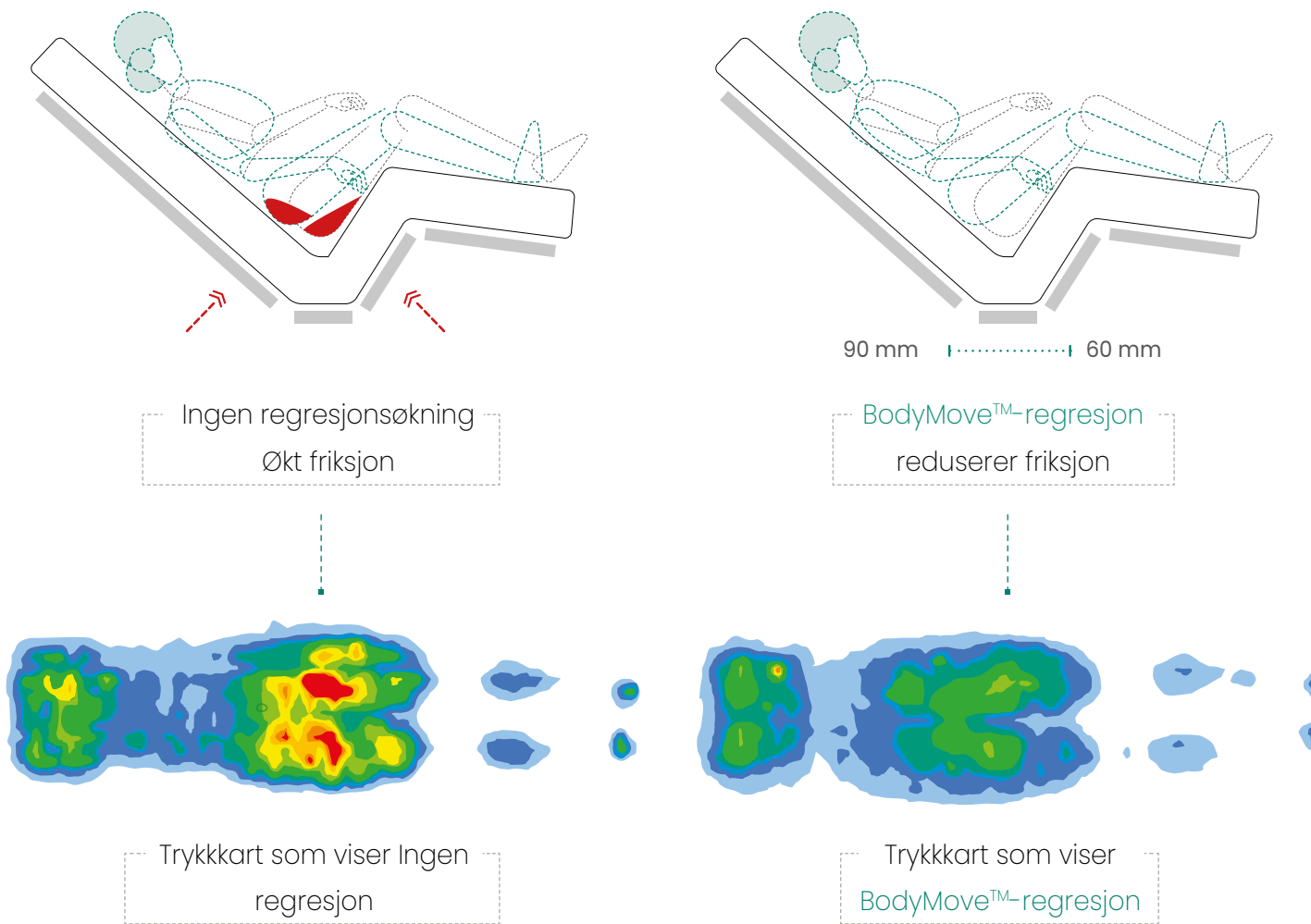

I evalueringer har BodyMove Funksjonalitet demonstrert:

23%
Reduksjon

I sakralt trykk sammenlignet med en standard sykepleieseng uten automatisk regresjon^[3].



Proxima[®]

Akuttsengen på gulvnivå

Proxima®

Funksjoner

Høyde gulvnivå

Senkes til 115 mm, noe som bidrar til å redusere risikoen for fall og tilhørende skader.



Omsorg og komfort stillinger

Forhåndsprogrammerte innstillinger for ekstra pasientkomfort.



HLR (funksjon)

Rask pasientposisjonering for HLR.



Hever til full stellohøyde

Proxima øker til en full stellohøyde på 815 mm, noe som reduserer belastningen på pleiernes rygg.

BodyMove™-teknologi

Autoregresjonsfunksjonalitet gir forbedret trykkfordeling, reduserer effektivt friksjon og minimerer torsokompresjon.

Del av kampen mot helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

Hode og fotbrett har glatte, lett rengjorte overflater som hemmer inntrengning av væsker, og integrert ledninger støtter infeksjonskontroll og forebygging.

Pleiepanel med intuitivt grensesnitt

Gjør det enkelt for omsorgspersoner å ha kontrollen over kritiske posisjoneringsfunksjoner.

Håndkontroll pasient

Gir pasienter redusert funksjonalitet for større sikkerhet.

Lengde regulering

Innebygd regulering for å øke sengelengden med opptil 200 mm.

Proxima leveres med en rekke valgfrie tilbehør.
Se side 18

Tekniske spesifikasjoner

Totalmål	1060 mm bredde x 2160 mm lengde
Madrass standard størrelse	900 mm bredde x 2000 mm lengde
Madrassstørrelse med lengdeforlengelse	900 mm bredde x 2200 mm lengde
Madrass plattform høyde	115 mm til 815 mm
UniSafe bremsesystem	2 sett med bremseser, bremseser 4 hjul
Hjul diameter	100 mm
Maksimal belastning løftebøyle	75 kg (12 m)
Automatisk regresjon BodyMove-teknologi	Ja
Ryggstøtte maks vinkel	70 grader
Leggstøtte maks vinkel	36 grader
Trendelenburg (funksjon)	Minimum 12 grader
Væskeinntrengningsbeskyttelse	IPX6
Sikker arbeidsbelastning	275 kg (43 m)
Maks pasientens vekt	210 kg (33 m)
Seng vekt	136kg
Delenummer	NSB-0-FL7-000
Garanti	Ramme: 10 år Elektrisk/deler: 2 år



EMPRESA

For effektiv hindring av fallskader/
moderne design.

EMPRESA

Funksjoner

Ytelse på gulvnivå

Empresa senkes til 100 mm for å beskytte pasientene mot fall.



Hever til full stellohøyde

Empresa heves til en full stellohøyde på 800 mm, noe som reduserer belastningen på pleiers rygg.



Omsorg og komfort stillinger

Ett-trykks forhåndsprogrammerte pleie- og komfortposisjoner som kan bidra til å redusere trykkrisiko.



Forhåndsprogrammerte funksjoner for å redusere trykkrisiko:

- Ryggstøtte med BodyMove™
- Leggstøtte med BodyMove™
- Trendelenburg 15 grader
- Anti-Trendelenburg 15 grader

Justerbar lengde

Innebygd justering for å øke sengelengden med opptil 200 mm.

Alternativer for utforming

Over 100 designkombinasjoner som passer til enhver innredning.



Empresa leveres med en rekke valgfrie tilbehør. Se side 16

Tekniske spesifikasjoner

Totalmål (buet hodegavl)	1015 mm bredde x 2090 mm lengde
Madraass størrelse standard bredde Madraass størrelse med bredde forlengelse Madraass størrelse med lengde forlengelse	900 mm bredde x 2000 mm lengde 1050 mm bredde x 2000 mm lengde 2200 mm lengde
Madraass plattform høyde	100 mm til 800 mm
UniSafe bremsesystem	2 sett bremses, bremses alle 4 hjul
8 hjul	4 låsbare hjul; 4 hjul for bedre manøvrering
hjul diameter	63 mm
Maksimal belastning løftebøyle	75 kg (12 st)
Automatisk regresjon	BodyMove-teknologi
Ryggstøtte maks vinkel	70 grader
Leggstøtte maks vinkel	36 grader
Trendelenburg (funksjon)	12 grader
Væskeinntrengningsbeskyttelse	IPX6
Sikker arbeidsbelastning	275 kg (43 st)
Maks pasientens vekt	240 kg (38 st)
Garanti	Ramme: 10 år Elektrisk/deler: 2 år



FloorBed[®]2

Fleksibel seng for effektiv hindring av fallskader

FloorBed[®]2

Funksjon

Høyde gulvnivå

FloorBed 2 senkes til bare 71 mm og bidrar til å forhindre fall og tilhørende skader.



En sikker arbeidshøyde

En pleiehøyde på opptil 800 mm gir en tryggere arbeidshøyde for pleiere og lettere tilgang for effektiv og trygg pleie.



Forhåndsprogrammerte funksjoner:

Ryggstøtte med BodyMove, Knestilling, Anti-Trendelenburg.



Kompatibel med de fleste madrasssystemer

Standard madrassplattform er 2000 x 900 mm, som er kompatibel med et bredt spekter av madrass størrelser

Kompakt motorsystem

De kompakte motorene og ledningene er montert i sengerammen, noe som gir enklere tilgang ved en eventuell service




FloorBed 2 leveres med en rekke valgfrie tilbehør. Se side 17

Tekniske spesifikasjoner

Totalmål	935 x 2285 mm
Madrass størrelse	900 x 2000 mm
Sikker arbeidsbelastning	185 kg
Pasientens vekt	150 kg
Løfteområde	71 - 800 mm (uten madrass)
Viktige funksjoner	Ryggstøtte med automatisk regresjon, høyde, Kne, Anti-Trendelenburg, Trendelenburg
Min. høyde på pleiepersonell	1460 mm
Denummer	NSB-0-FL2-200

EMPRESA


Tilbehør

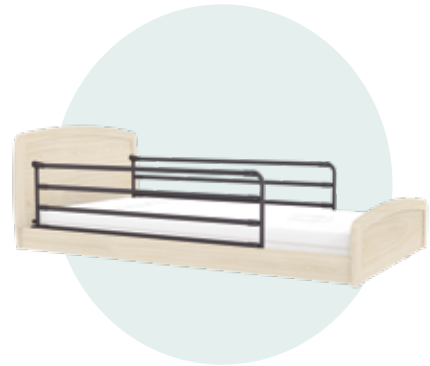

Sammenleggbar
sideskinne



Seng spak

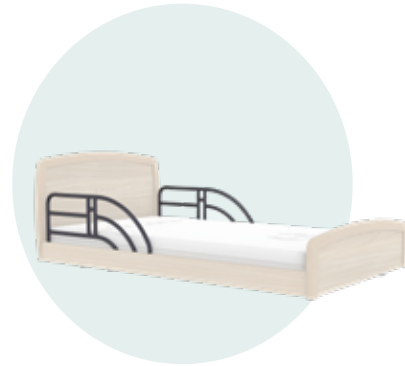


Long assit bar



ProTect sideskinne



Løftestang

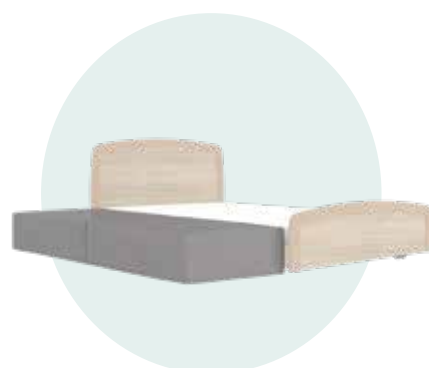

Høy sikker-
hetsmatte



Width extension for
1050 mm platform width

FloorBed[®]2

Tilbehør




2200 mm
Høy sikkerhetsmatte



Safety sleeve



Integrerte polstrede
sidegrinder

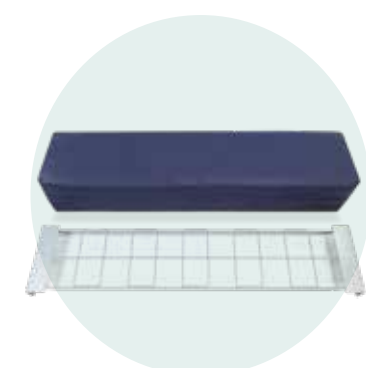

Seng forlengelse kit



Seng spak



Hode og fot polstring



Løftestang



Madras for-
lenger




Junior Kit

Proxima®

Tilbehør



Sammenleggbar
sideskinne

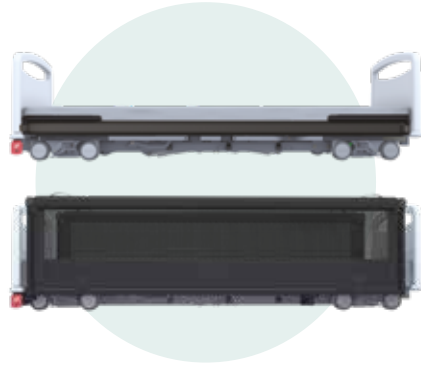

ProTect 2000 mm
sideskinne



Holder for urinpose




Løftestang



IV pol



Seng spak

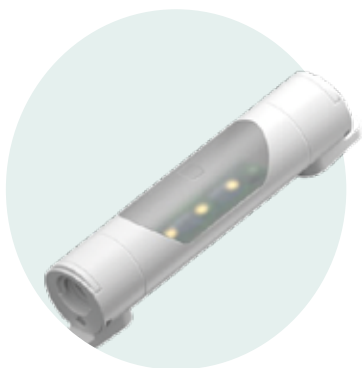

Under sengen lys



Accora

E: rick.vaneijken@accora.care

W: accora.care

All informasjon er korrekt på utskriftstidspunktet og kan endres.

1. Tak, K. (2022). Vurdering av forekomsten av sengefall og skader etter innføring av en "gulvseng" i et høyrisiko, langsiktig omsorgsanlegg: en prospektiv cross-over evaluering. [https://uploads-ssl.webflow.com/621c376689014f3080f9a3bb/6477142a9dcf824017blebe8_Empresa%20Masonic%20Villages%20White%20Paper%20\(1\).pdf](https://uploads-ssl.webflow.com/621c376689014f3080f9a3bb/6477142a9dcf824017blebe8_Empresa%20Masonic%20Villages%20White%20Paper%20(1).pdf) (besøkt 31. mai 2023).

2. Bowers, B., Lloyd, J., Lee, W., Powell-Cope, G. og Baptiste, A. (2008) Biomekanisk evaluering av skadegrad forbundet med pasientfall fra sengen. Rehabil Nurs. 33 (6), 253–9. Tilgjengelig fra: doi: 10.1002/j.2048-7940.2008.tb00237.x.

3. Zaphir, J. (2014). Laveste høyde på gulvnivå senger: fallhastighet og slagkraftanalyse og resulterende skader. Hentet fra https://vital.net.au/sites/default/files/zaphir_study_2014_-_bed_height_impact.pdf (Besøkt 5. mai 2021).