

SUNRISE  
MEDICAL

Empulse.



E | F35

VORES MINDSTE OG LETTESTE  
HJÆLPEMOTOR NOGENSINDE

# F35 - DIN LIVSSTIL OPGRADERET








# TRÆT AF KLODSEDE HJÆLPEMOTORER?

Det er vi også. Hvert lille skub fremad føles måske ikke som en stor ting, men dag ud, dag ind, akkumuleres belastningen på dine skuldre over tid.

Hjælpe motorer kan være superhelte i mobilitetsverdenen, men nogle er bare for store og tunge til hverdagsbrug - især til de hurtige udflugter rundt i byen, eller når det kommer til at rejse.

Empulse F35 rammer den perfekte balance mellem form og funktion. Denne ultra-bærbare mikro-træk-hjælpe motor er ikke kun flot - den er din billet til hurtig og ubesværet mobilitet.

-  Vores mindste og letteste hjælpe motor nogensinde
-  Passer ind i små biler og rum
-  Mindste vendecirkel og op til 15 km rækkevidde skjult i en kompakt ramme
-  2 måder at til- og afkoble F35 på (docking)
-  Passer til de fleste stive eller sammenklappelige kørestole
-  Rejsevenligt batteri, ideelt til rejser med fly, bil og tog



Scan QR koden  
og se F35 i  
bevægelse

**EGENSKABER**



Perfekt til hyppige stop: Frakobl F35 fra underrammen på få sekunder.

## TO KOBLINGSMETODER - VÆLG DEN, SOM PASSER DIG BEDST

**1 "Den hurtige":** Patentanmeldt, nem one-motion docking til hurtige stop rundt i byen. Fjern nemt røret fra modtageren, mens underrammen forbliver monteret på stolen. Ideel til pauser, når F35-support ikke er påkrævet, såsom en tur på café eller når du er på på universitetet eller kontoret. Og det bedste ved F35'eren? Den kobles på igen på få sekunder, når du har brug for et ekstra boost.

**Folde- og låsehåndtag:** Nu behøver du ikke mere at kæmpe med uhåndterligt udstyr. Passer bekvemt i den mindste bils bagagerum eller på bagsædet, hvilket muliggør problemfri og uafhængig biltransport.



Scan QR koden for at se, hvordan man fastgør F35 til en kørestol



# 2

**2 "Til opbevaring":** Når det er tid til at skifte fra kørestol til bil, sofa eller seng, har du mulighed for nemt at fjerne hele enheden fra din stol. Du skal blot fjerne ratstammen og underrammen fra stolen ved hjælp af de brugervenlige klemmer, hvilket giver den perfekte løsning til opbevaring af din F35.



Afmonteres i to lettere stykker for nem transportering (underramme og F35 kan adskilles).

## LET I VÆGT & KOMPAKT UNDER TRANSPORT

**Fjerlet:** Uanset om du er alene på tur eller med en hjælper, tilbyder F35 en superlet vægt på kun 7,5 kg (underramme fjernet), hvilket gør biltransport til en leg og fremmer uafhængighed på dine daglige eventyr.

**Smart kompakt design:** Oplev et slankt og kompakt design med vores alt-i-et rørdesign, der sikrer nem håndtering og transport.


OPBEVARING OG TRANSPORTERING

**Flyvenlige 4Ah-batterier** - kompakte, men kraftfulde og præcis, hvad du har brug for til bykørsel og rejser (tjek venligst specifikke batterikrav på forhånd med dit flyselskab).

**Det intelligente batteristyringssystem** og innovative 21700 battericeller betyder, at du får mest muligt ud af hver opladning.

**Ultra kompakt venderadius:** i en menneskemængde eller elevator - drej nemt rundt med F35s kompakte venderadius.

Med en **rækkevidde** på hele **15 km** har du friheden til at udforske vidt og bredt.

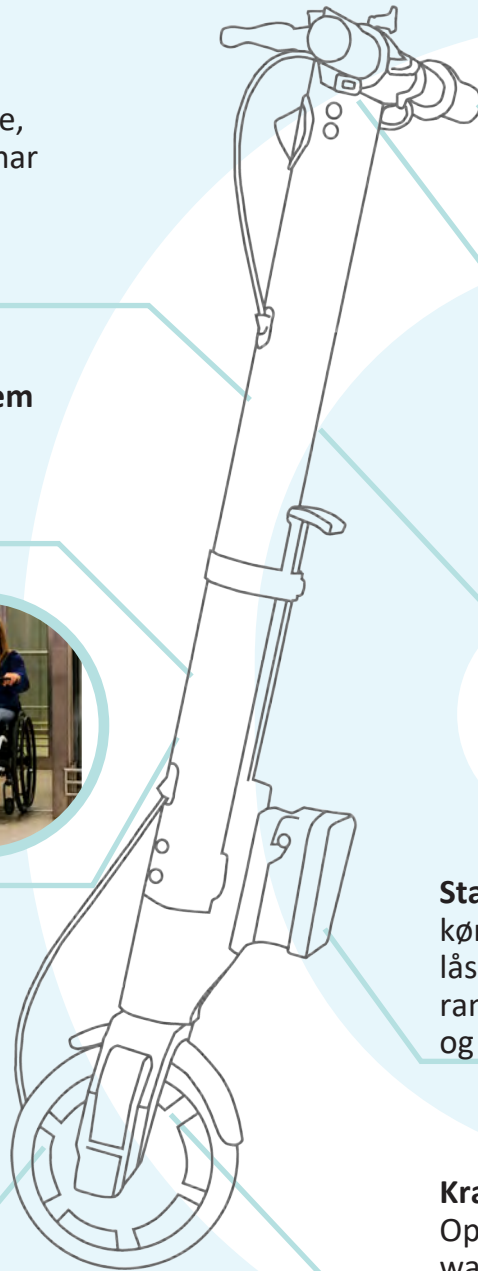

**Kraftfuldt bremsesystem:** Drag fordel af et dobbelt bremsesystem – en proportional elektronisk bremse og pålidelig tromlebremse – og en parkeringsbremse, der giver præcis kontrol og sikkerhed under dine rejser.



**Fartpilot:** holder hastigheden konstant op og ned ad bakke.



**Overvind stigninger:** Parkeringspladser, ramper, offentlig transport, fortove - tag fat i hverdagens irriterende forhindringer med selvtillid! F35 kan klare i en stigning på 6 grader, selv med en maksimal brugervægt på 110 kg.

**Stabilitet på højt niveau:** Sig farvel til rystende køreture. Takket være en patentanmeldt låsemekanisme er F35 praktisk talt limet til rammen. Ingen rystelser - bare en super støt og stabil tur.



**Kraftig motor med højt drejningsmoment:** Oplev en dynamisk køretur drevet af en 250 watt motor, hvilket sikrer en jævn og smidig rejse.





### 3 maks. tilgængelige hastigheder:

Vælg dit tempo, uanset om det er rolige 6 km/t, moderate 10 km/t eller hurtige 15 km/t.



### Ingen hjulspind:

3 accelerationstilstande (Langsom, Standard, Hurtig) tilpasser energien til enhver overflade.



**USB-opladningsport:** Giver dig mulighed for at oplade din telefon, så du ikke behøver at bekymre dig om at aflade telefonens batteri, mens du bruger navigation eller lytter til musik.



Scan QR koden og se F35 service videoer



**LED-Lys:** LED-lyset passer perfekt ind i F35's design, hvilket giver dig en praktisk måde at oplyse din vej og forbedre din synlighed.

LED LYS

## TEKNISK DATA

Maks. Brugervægt	110 kg
Maks. Dimensioner	915 mm x 584 mm x 610 mm / 36 x 22.9 x 24" (højde x bredde x dybde)
Batteri Rækkevidde*	op til 15 km
Maks. hældning	op til 11% (6°)
Vægt	
inkl. batteri og underramme	Fra 9 kg
transportvægt	fra 7.5 kg
Forramme bredde	260 – 480 mm
Farve	Sort
Justerbar maks. hastighed	6 km/t; tilvalg 10/15 km/t (hastigheden kan reguleres i 3 niveauer)
Batteri	Lithium-Ion 36V 4Ah
Batteri Opladningstid	ca. 2 timer
Hjulstørrelse	6,5"
Motor	250 watt
Bremse	Dobbelt bremsesystem (mekanisk tromlebremse og separat proportional elektronisk motorbremse) og parkeringsbremse
Garanti	i henhold til lokale regler
Konformitet	EN12184

(1) Ramebredde målt fra midten af rammerøret til midten af rammerøret ved monteringsposition.



F35 Hjemmeside



F35 HMI

**DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR SUNRISE MEDICAL**  
Læs venligst din brugermanual for sikker betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger.

*\* Rækkevidden er afhængig af overfladen, der køres på, brugerens vægt, køreadfærd, temperatur og terræn i henhold til ISO 7176-4.*

## TILBEHØR



**Smartphone holder:**  
Smartphoneholderen lader dig forblive forbundet og i kontrol, mens du kører.



**Opladningsadaptor til bilen:**  
Opladningsadapteren holder din F35 opladet, uanset hvor din rejse tager dig.



**Lock It Up**  
Låsen sikrer, at din F35 bliver, hvor du efterlod den, hvilket giver dig ro i sindet, uanset hvor du parkerer.

### Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
Tlf.: +45 70 22 43 49  
E-Mail: info@sunrisemedical.dk

For yderligere information om de fulde specifikationer, muligheder og tilbehør henvises til bestillingsformularen. Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt venligst Sunrise Medical med eventuelle spørgsmål, du måtte have.



Hvis du er synshandicappet, kan dette dokument ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.dk](http://www.SunriseMedical.dk).