



E|R90[®]

NIECH CIĘ PROW-



red dot winner 2022
best of the best



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

WYGLĄD PRZYCIĄGAJĄCY WZROK

NE PEWNO ZWRÓCI UWAGĘ

Elegancka, prosta i kompaktowa konstrukcja znajduje się pod spodem Twojego wózka. Jest niepozorny, intuicyjny i utrzymuje rozmiar wózka oraz promień skrętu.

WYOBRAŹ SOBIE SWOJĄ JAZDĘ NA NOWO

Prosta, sterowana przyciskiem i napędzana.

Gdy wspomaganie pchania nie jest potrzebne, podnośnienie koła zapewnia zerowy opór toczenia.

V-Lock bezpiecznie i łatwo się mocuje.

Łatwo zmień wymienną baterię.

Wybierz profile wydajności wewnątrz lub na zewnątrz lub monitoruj swoje urządzenie za pomocą aplikacji R90.

Pasuje do większości wózków na ramach sztywnych i

*Zgłoszona do opatentowania technologia Empulse



CENTRALNY OBRÓT

PRECYZYJNE TOCZENIE

Koło napędowe R90 znajduje się pod siedziskiem. Oznacza to, że możesz manewrować do przodu, do tyłu i 360° przy minimalnym oporze oraz bez rozłączenia.

Nie wystaje z tyłu za wózek.

Porusza się jak część Ciebie.



INTELIŻENTNA KONTROLA PRĘDKOŚCI

R90 automatycznie zmniejsza prędkość na ostrych

WYKRYWANIE NACHYLENIA TERENU

R90 może wykryć, kiedy dotrzesz do zbocza lub przeszkody i zapewnić większą lub mniejszą moc, aby pomóc utrzymać prędkość.

DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ

Ponieważ cały R90 jest umieszczony pod Twoim wózkiem, rozmiar i promień skrętu pozostają takie same. W ciasnych przestrzeniach poruszaj się tak, jak zwykle.

WYRÓWNIANIE KOŁA NAPĘDOWEGO

Koło R90 ściśle przylega do tylnych kół, dzięki czemu pokonuje przeszkody w tym samym czasie co Ty.



ZGŁOSZONE DO OPATENTOWANIA PODNOŠONE KOŁO

Gdy R90 nie jest potrzebny, podnieś koło, aby uzyskać zerowy opór toczenia. Można to zrobić za pomocą przycisku na skrzynce kontrolnej lub w aplikacji. Chociaż R90 można łatwo zdjąć, wystarczy podnieść koło i trzymać je na wózku przez cały dzień.



PŁYNNA JAZDA

R90 napędza Cię dzięki oczekującemu na opatentowanie zawieszeniu, które zmniejsza wstrząsy i wibracje.

Niezwykle wytrzymała, pozbawiona powietrza opona gumowa zapewnia dobry kontakt z nawierzchnią i płynną jazdę przy minimalnej konserwacji.

WYJMOWANA BATERIA

Wymień baterię lub spraw, aby było lżejsze do przenoszenia.

Drugi lub akumulator o zwiększonym zasięgu zapewnia

dotatkową odległość lub jeszcze większą wygodę.

Double the battery = double the distance!

- Standardowa bateria = do 15,5 km
- Akumulator o zwiększonym zasięgu = do 31 km

Zasięg zależy od nawierzchni, wagi użytkownika, stylu jazdy,

PODRÓŻE LOTNICZE



Standardowy akumulator (2,5 Ah) spełnia obowiązujące przepisy dotyczące wnoszenia go na pokład samolotu.

Zawsze sprawdzaj w swoich liniach lotniczych aktualne przepisy.




PROSTE, BEZPIECZNE MOCOWAN-

ZGŁOSZONA DO OPATENTOWANIA BLOKADA V-LOCK™

Zgłoszony do opatentowania V-LOCK™ to zwężający się zatrzask, który bezpiecznie mocuje R90 do odbiornika na wózku.

W połączeniu z ergonomicznym uchwytem, pionową orientacją i toczącą się oponą, R90 można łatwo i bezpiec-

Zatrzask w kształcie litery V pomaga wprowadzić R90 do odbiornika, a następnie blokuje go na miejscu.

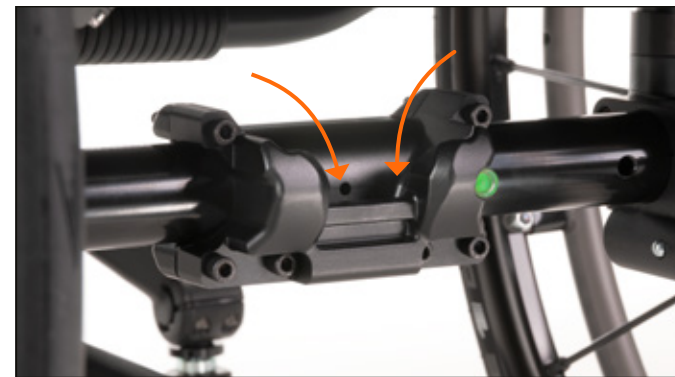

NA SPOKOJNIE

NAPĘD ZA POMOCĄ PRZYCISKU

Oszczędzaj ramiona lub po prostu zrelaksuj się. R90 napędza Cię bez obciążania rąk i ramion. Po prostu naciśnij przycisk.

KONTROLA PRĘDKOŚCI JEDNĄ RĘKĄ

Aby utrzymać prędkość, jechać szybciej lub wolniej, po prostu naciśnij przycisk na łatwo dostępnym panelu kontrolnym.

WYGODNE ŁADOWANIE

Po prostu włóż magnetyczną ładowarkę do swojego R90. Aby uzyskać jeszcze większą wygodę lub utrzymać dodatkową baterię naładowaną, użyj opcjonalnej ładowarki dokującej.

POKONUJ ODLEGŁOŚCI

Standardowa bateria R90 ma zasięg ponad 15 km. Lub z opcjonalnym akumulatorem o zwiększonym zasięgu możesz podróżować aż do 31 km! Naładuj dodatkową baterię i miej pewność, że nigdy nie zabraknie Ci energii.

Zasięg zależy od nawierzchni, wagi użytkownika, stylu jazdy, temperatury i terenu.





TECHNOLOGIA R90

PROSTA SKRZYŃKA KONTROLNA

Prowadź wózek z łatwością bez silnego uchwytu lub zręczności. Uruchom i kontroluj prędkość jednym naciśnięciem przycisku. Uwolnij ręce, aby sterować i zatrzymywać się, pchać wózek lub trzymać za rękę ukochaną osobę.

- Bezprzewodową skrzynkę kontrolną można zamontować na rurze ramy w dowolnym dogodnym dla Ciebie miejscu.
- Podnieś lub opuść koło w dowolnym momencie.
- Wybierz swoją prędkość w każdej sytuacji – łatwo i przyjemnie w zatłoczonym sklepie lub nadążając za psem. Masz maksymalną prędkość 9 km/h!
- Aby ruszyć, po prostu naciśnij przycisk plus lub możesz rozpędzić się do żądanej prędkości i nacisnąć przycisk plus, aby utrzymać prędkość (jak tempomat).

Żadnej krzywej uczenia się ani „przekonywania” go, co ma robić, po prostu szybciej, wolniej, podnieś koło lub JEDŹ!

BLUETOOTH

Żadnych kabli, które mogłyby Ci przeszkadzać. Skrzynka kontrolna łączy się z R90 przez Bluetooth® i niezawodnie pozostaje

APLIKACJA SUNRISE INTELLIGENT SI

WYBIERZ PROFIL JAZDY

Użyj aplikacji, aby wybrać profil wydajności wewnątrz lub na zewnątrz, który najlepiej pasuje do Twojego środowiska.

Wstępnie ustawione profile są dostosowane do progów prędkości, momentu obrotowego i nachylenia dla sytuacji podczas jazdy w pomieszczeniach lub na zewnątrz.

MONITORUJ SWÓJ R90

Sprawdź swoją baterię, aby zawsze wiedzieć, kiedy trzeba ją naładować. Możesz także zobaczyć, czy koło jest w górze lub na dole i poprosić R90 o podniesienie lub opuszczenie.

SKONFIGURUJ R90 DLA SIEBIE

Użyj aplikacji do wstępnej konfiguracji, kalibrując R90 do swojej wagi, aby uzyskać optymalną wydajność.

PANEL WSKAŹNIKÓW

Dane historyczne są wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym, dzięki czemu możesz zobaczyć swoje wzorce użytkownika, maksymalną prędkość i dystans.



ZGODNOŚĆ

Empulse R90 jest kompatybilny z większością wózków na ramie sztywnej lub składanej. Wsporniki odbiornika nie koludują z elementami krzyżaka i nadal umożliwiają złożenie wózka.

DLA WÓZKÓW NA RAMIE SZTYWNEJ, wspornik odbiornika montuje się bezpośrednio do rury osi i może pozostać na miejscu, niezależnie od tego, czy R90 jest na wózku, czy poza nim.

DLA WÓZKÓW NA RAMIE SKŁADANEJ, zespół ma solidną poprzeczkę, która jest obciążona sprężyną, co umożliwi szybki montaż lub demontaż. *Zobacz specyfikację dla dokładnych pomiarów*

SKRZYŃKA KONTROLNA, można zamówić do użytku z prawej lub lewej strony i można go zamontować w dowolnym miejscu na rurze ramy.



Gniazdo do wózków na ramie sztywnej



Składany wspornik gniazda dla wózków na ramie składanej

KOMPONENTY

CO JEST W PUDEŁKU?

- Wspomaganie pchania R90
- Standardowy, wymienny akumulator
- Skrzynka kontrolna (z krótkimi i wysokimi płytami montażowymi)
- Ładowarka urządzenia
- Gniazdo montażowe*
- Torba podróżna

Opcjonalne dodatki

- Akumulator o zwiększonym zasięgu
- Dodatkowy standardowy akumulator
- Ładowarka dokująca (kompatybilna z baterią o standardowym lub rozszerzonym zasięgu)
- Dodatkowa ładowarka do urządzenia
- Dodatkowa torba podróżna

* Pokazano elementy gniazda dla wózków na ramach sztywnych i składanych. Wysłane zostaną tylko elementy potrzebne do Twojego



DANE TECHNICZNE

Maks. waga użytkownika	125 kg
Zasięg*	
Standardowa (2.5 Ah)	15.7 km
Rozszerzony (5 Ah)	31.4 km
Maksymalne nachylenie	6 stopni
Waga (bez akumulatora)	5.9 kg
Standardowy akumulator	0.7 kg
Rozszerzony akumulator	1.2 kg
Kompatybilność ram	
Średnica rury osi	22 mm do 45 mm
Wysokość osi	276 mm do 329 mm
Szerokość (Tylko składane wózki. Między płytami osi.)	300 mm do 530 mm
Regulowana maks. prędkość	9 kpm/h
Elektronika	Bluetooth / Wireless
Akumulatory	Lithium-Ion 36V 2.5Ah / 5Ah
Czas ładowania baterii	1 h (dla 2.5Ah) 2 h (dla 5Ah)
Silnik	250 W / 22 Nm
Hamulec silnika	Nie
Gwarancja	Akumulator: 6 miesięcy Silnik: 1 rok



Strona internetowa R90



Formularz zamówienia R90

SUNRISE MEDICAL DBA O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO.
Przeczytaj instrukcję obsługi, aby uzyskać instrukcje

Zobacz formularz zamówienia, ponieważ specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.

* Zasięg jest zależny od nawierzchni, wagi użytkownika, zachowania podczas jazdy, temperatury i ukształtowania

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

 MK-129861 Rev.A ©03.2023

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów znajduje się w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical.



Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.



www.Sunrise-Medical.pl

Producent:

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD, Germany



EMPOWER YOUR LIFE

