



E|R90[®]

LET IT DRIVE YOU



red dot winner 2022
best of the best



IØYENFALLENDE DESIGN

SOM IKKE VIL FJERNE OPPMERKSOMHETEN

Det slanke, enkle og kompakte drivaggregatet sitter under stolen din. Det er uanselig, intuitivt og opprettholder stolens størrelse og svingradius.

TENK NYTT OM TUREN DIN

Enkel, trykk-knapp kontroll og fremdrift.

Når du ikke trenger skyveassistanse, løftes hjulet for null rullemotstand.

V-Lock™ fester seg sikkert og enkelt.

Bytt enkelt det utskiftbare batteriet.

Velg innendørs eller utendørs kjøreprofiler, eller overvåk enheten din med R90 appen.

Passer de fleste fastramme- eller sammenleggbare rullestoler.

* Patent-Pending Empulse Technology



MIDTSVING

PRESISJONSSVING

R90-drivhjulet er plassert under setet ditt. Dette betyr at du kan manøvrere fremover, bakover og 360° med minimalt motstand.

Ingen motstand mot underlag.
Det beveger seg som en del av deg.



SKRÅNINGSSOPPDAGELSE

R90 kan oppdage når du når en skråning eller hindring og gi mer eller mindre kraft for å hjelpe deg med å opprettholde hastigheten.

UTMERKET MANØVRERING

Fordi hele R90 er plassert under stolen din, forblir størrelsen og svingradiusen til stolen din den samme. På trange steder, beveg deg som du vanligvis gjør.


DRIVHJULJUSTERING

R90-hjulet er nøye justert med bakhjulene dine, slik at det skyver over hindringer samtidig som du gjør det.



LØFTEFUNKSJON FOR HJUL

Når R90 ikke trengs, hev hjulet for null rullemotstand. Dette kan gjøres med en knapp på kontrollboksen eller fra appen. Selv om R90 er enkel å fjerne, hev bare hjulet og la det stå på stolen din hele dagen.

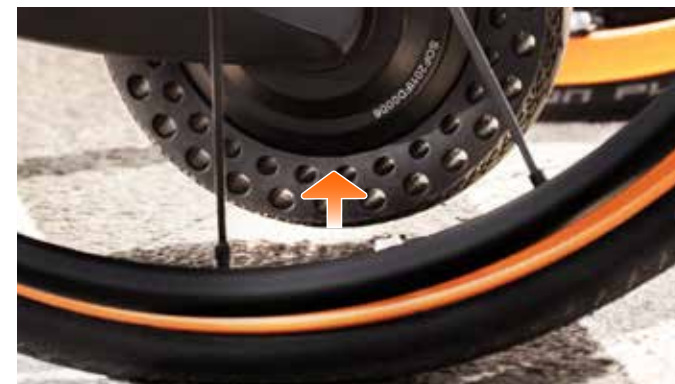

BEHAGELIG KJØRING

R90 driver deg fremover med en patentsøkt fjæring, som reduserer støt og vibrasjon.

Det ekstremt slitesterke, kompakte gummidekket gir god kontakt med underlaget og en jevn kjøring med minimal vedlikehold.

UTTAKBART BATTERI

Bytt ut batteriet eller gjør R90 lettere å bære. Et ekstra batteri eller et batteri med utvidet rekkevidde gir ekstra distanse eller enda mer bekvemmelighet.

Dobbelt batteri = dobbel distanse!

- Standard batteri = opp til 15,7 km
- Batteri med utvidet kapasitet = opp til 31,3 km

Rekkevidden avhenger av følgende faktorer: underlag, brukerens vekt, kjørsadferd, temperatur og terreng.

FLYREISE ✈

Begge R90-batteriene er flykompatible.

- Standard (2.5 Ah) – sertifisering ikke nødvendig
- Utvidet kapasitet (5 Ah) – sertifisering påkrevd

Sertifisering kan lastes ned her: www.sunrisemedical.com/power-assist/empulse/add-on-devices/r90

Verifiser alltid med flyselskapet for gjeldende forskrifter.



TRYGG OG ENKEL TILKOBLING

PATENTSØKT V-LOCK™

Den patentsøkte V-LOCK™ er en skrå lås som trygt og sikkert kobler R90 til mottakeren på stolen. Kombinert med det ergonomiske håndtaket, oppreist orientering og rullende dekk, kan R90 festes enkelt og sikkert. For noen kan dette gjøres mens de sitter i stolen sin.

V-formet lås hjelper til med å guide R90 inn i mottakeren, og låser den deretter på plass.



TA DET MED RO

TRYKKNAPP-FREMDRIFT

Spar skuldrene eller bare slapp av. R90 driver deg frem uten at du belaster hendene og skuldrene. Bare trykk på knappen.

HASTIGHETSKONTROLL MED EN HÅND

For å opprettholde hastigheten din, enten raskere eller saktere, bare trykk på en knapp på den lett tilgjengelige kontrollboksen.

PRAKTISK LADING

Bare klikk den magnetiske laderenheten inn i R90. For enda større bekvemmelighet eller for å holde et ekstra batteri oppladet, bruk den valgfrie dokkingladeren.

REKKEVIDDE

Standardbatteriet til R90 har en rekkevidde på over 15,7 km. Eller med det valgfrie batteriet med utvidet rekkevidde kan du reise så langt som 31,4 km! Ha et ekstra batteri ladet og sørg for at du aldri går tom for strøm.

Rekkevidden avhenger av underlaget, brukerens vekt, kjøremønster, temperatur og terreng.





R90 TEKNOLOGI

ENKEL KONTROLLBOKS

Styr stolen din enkelt uten å trenge et sterkt grep eller god fingerferdighet. Start og kontroller hastigheten med et enkelt trykk på en knapp. Frigjør hendene til å styre og stoppe, skyve en vogn eller holde en kjær hånd.

- Den trådløse kontrollboksen kan monteres på rammerøret, der det best passer for deg.
- Hev eller senk hjulet når som helst.
- Juster hastigheten din for enhver situasjon – rolig og behagelig i en overfylt butikk eller når du skal holde følge med hunden din. Du har en maks fart på 9km/t!
- For å komme i gang, trykk ganske enkelt på plussknappen, eller du kan bruke drivringene til ønsket hastighet og deretter trykke på plussknappen for å opprettholde farten (som cruisekontroll).

Ingen "overtalelse" nødvendig, bare: raskere, saktere, hjul opp eller kjør!

BLUETOOTH

Ingen kabler som kommer i veien. Kontrollboksen kobles til R90 via Bluetooth® og holder seg pålitelig tilkoblet uansett plassering eller bevegelse.

Den trådløse kontrollboksen kan enkelt fjernes ved forflytninger eller for å unngå skade ved flyreiser.

SUNRISE INTELLIGENCE APP

VELG KJØREPROFIL

Bruk appen til å velge enten innendørs eller utendørs kjøreprofil som passer best for ditt miljø. De forhåndsdefinerte profilene er tilpasset for hastighet, dreiemoment og terskelverdier for bakker for innendørs eller utendørs kjøresituasjoner

OVERVÅK DIN R90

Sjekk batteriet ditt så du alltid vet når du må lade. Du kan også se om hjulet er opp eller ned og bestem om du vil heve eller senke det.

KONFIGURER DIN R90 TIL Å PASSE TIL DEG

Bruk appen til det første oppsettet, og kalibrer R90 til din vekt for optimal ytelse.

METRICS DASHBOARD

Historiske data vises i et dashboard slik at du kan se dine bruksmønstre, maks hastighet og avstand.

Kompatibel med Android™ og Apple® iOS.



KOMPATIBILITET

Empulse R90 er kompatibel med de fleste fastramme- eller sammenleggbare rullestoler. Mottakerbrakettene forstyrrer ikke rullestolkomponentene og tillater fortsatt at din sammenleggbare rullestol kan legges sammen.

FOR FASTRAMME RULLESTOLER, monteres braketten direkte på camberrøret og kan holdes på plass enten R90 er påmontert eller ikke.

FOR SAMMENLEGGBARE RULLESTOLER, har monteringen en tverrstang som er fjæret for rask montering eller fjerning. Se spesifikasjonene for nøyaktige mål.

KONTROLLBOKSEN kan bestilles for enten høyre- eller venstrehåndsbruk og kan monteres hvor som helst på stolrammen din.



Mottakerbrakett for rullestol med fast ramme



Mottakerbrakett og avtakbar akselmontering til sammenleggbare rullestol

KOMPONENTER

HVA INNEHOLDER BOKSEN?

- R90 drivaggregat
- Standard, utskriftbart batteri
- Kontrollboks (med korte og lange monteringsbeslag)
- Ladeapparat
- Mottakersett*
- Reiseveske

Valgfritt

- Batteri med utvidet rekkevidde
- Ekstra standard batteri
- Ladeapparat (kompatibel med standard eller ekstra rekkeviddebatteri)

* Mottakerkomponenter for både fastramme- og sammenleggbare stoler vises. Det er kun komponenter som trengs for stolen din som vil bli sendt.



TEKNISKE DATA

Vektkapasitet	125 kg
Batteri rekkevidde*	
Standard (2.5 Ah)	15.7 km
Utvidet (5 Ah)	31.4 km
Maks helning	6 grader
Vekt (uten batteri)	5.9 kg
Standard batteri (2,5 AH)	0.7 kg
Utvidet batteri (5 Ah)	1.2 kg
Rammekompatibilitet	
Camber-rør diameter	22 mm to 45 mm
Akselhøyde	283 mm to 336 mm
Bredde (Kun for sammenleggbare rullestoler. Mellom akselplatene.)	300 mm to 530 mm
Justerbar maksimal hastighet	6 km/t eller 9 km/t
Elektronikk	Bluetooth / Trådløs
Batteri	Lithium-Ion 36V 2.5 Ah / 5 Ah
Batteriladetid	1 time (for 2.5 Ah) 2 timer (for 5 Ah)
Motor	250 W / 22 Nm
Motorbrems	Ingen

⚠ ADVARSEL

Bruk av en kraftassistanse-enhet kan endre tyngdepunktet ditt eller måten stolen din kjører på. For å redusere risikoen for velting eller fall, bør du konsultere ditt helsepersonell om riktig rullestolkonfigurasjon, inkludert bruk av anti-veltingsanordninger og eventuelle andre nødvendige justeringer.

SUNRISE MEDICAL BRYR SEG OM DIN SIKKERHET. Les bruksanvisningen for sikker bruk og vedlikehold. Bruksanvisning og vedlikeholdsanvisninger.

Se bestillingsblanketten da spesifikasjonene kan variere basert på konfigurasjon.

* Rekkevidde er avhengig av underlaget, brukerens vekt, kjøremønster, temperatur og terreng.

EMPOWER YOUR LIFE

Sunrise Medical AS

Delitoppen 3
1540 Vestby
Tel.: +47 66 96 38 00
E-Mail: post@sunrisemedical.no

For mer informasjon om spesifikasjon, alternativer og tilbehør, se bestillingsblanketten. All informasjon kan endres uten varsel. Ta kontakt med Sunrise Medical for eventuelle spørsmål du måtte ha.



For synshemmede kan dette dokumentet lastes ned i PDF-format på www.SunriseMedical.no

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)
Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.

