

Empulse M90

Guida alla Compatibilità

Rev1



Modello e marca della carrozzina	Piastra
Sunrise Medical	
IRIS	6
QS5 X	4
Neon ²	14
Xenon ²	14
SR45	6
Helium	2
Nitrum	2
Easy 200	4
Easy 300	4
Easy Life ECO	4
Easy Life R	4
Easy Life RT	4
Easy Life T	4
Easy Life i	4
Easy Life	4
Argon ²	15
Zippie IRIS	6
Simba	15
Youngster 3	4
Helix ²	12
Rubix ²	4
Basix ²	4
Parix ²	5
Style X	4
Style X Ultra	4
Ibis	13

Nota: Questa lista fornisce solo un'indicazione delle marche e dei modelli di carrozzine su cui M90 può essere applicato. E' importante ricordare che forma del telaio, centro di gravità, misura delle ruote e profondità della seduta potrebbero influenzarne la compatibilità. Per questa ragione è essenziale provare e testare la carrozzina completa di M90 per essere sicuri al 100%! Chiedere consiglio al rivenditore. La guida alla compatibilità riporta unicamente le carrozzine per cui è stato siglato un accordo ufficiale tra le aziende produttrici coinvolte. Troverete le indicazioni per l'aggancio nella prossima pagina.

Empulse M90



Informazioni sul sistema di aggancio

- Due piastre rimarranno montate in modo permanente sul supporto dell'asse delle ruote posteriori, consentendo anche l'utilizzo di altre tipologie di ruote posteriori per la propulsione manuale.
- La piastra per la parte sinistra della carrozzina contiene un magnete che deve essere montato rivolto verso la parte anteriore o superiore della carrozzina.



- La piastra per la parte destra non è dotata di magnete e deve essere montata rivolta verso la parte posteriore o la parte bassa della carrozzina.

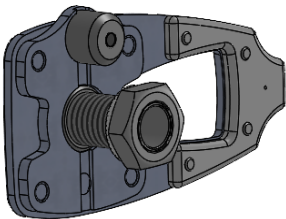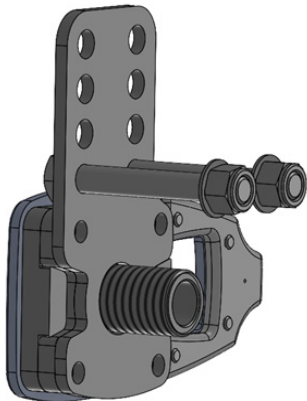

Carrozze pieghevoli con piastra dell'asse	Carrozze rigide con tubo dell'asse
Esempio di piastra di montaggio, la piastra cambia in base al modello della carrozzina  • Soluzione di montaggio con perno di fissaggio per la rotazione della piastra • Diametro e forma di fissaggio sono specifiche per la piastra di montaggio • Kit: 4, 5, 12	 • Piastra di supporto per la rotazione con viti e perni, da applicare al supporto dell'asse posteriore • La forma e il design sono specifici per ogni carrozzina • Kit: 2, 6, 13, 14, 15

Requisiti tecnici:

- Ruote da 24"
- Campanatura 0°
- Ruotine antiribaltamento per ragioni di sicurezza

No-Go:

- Se il diametro dei perni della carrozzina utilizzata non è uguale a 12,7 mm, è possibile ordinare da Sunrise Medical ruote posteriori compatibili con questa misura di perni
- La combinazione di M90 e freno a tamburo non è possibile