

Empulse M90

Guía de compatibilidad



04/2025

Modelo de silla de ruedas	Kit de Acople
Sunrise Medical	
IRIS	6
QS5 X	4
Neon ²	14
Xenon ²	14
SR45	6
Helium	2
Nitrum	2
Easy 300	4
Life R	4
Life	4
Argon ²	15
Zippie IRIS	6
Simba	15
Youngster 3	4
Helix ²	12
Rubix ²	4
Basix ²	4
Parix ²	5
Style X	4
Style X Ultra	4

Nota: Esta lista recoge los modelos de sillas de ruedas en los que se puede montar el Empulse M90. No obstante, factores como la forma del armazón, el centro de gravedad de la silla, el tamaño de las ruedas y la profundidad del asiento podrían influir en el montaje. Por lo tanto, es esencial probarlo y estar 100% seguro. Solicite consejo a su proveedor (la ortopedia) en el caso de que tenga alguna duda.

Empulse M90



Información de montaje

- Se fijarán dos pletinas de forma permanente al soporte del eje, sin afectar al uso de la silla de ruedas manual.
- La pletina del lado izquierdo de la silla contiene un imán y debe ser montado apuntando hacia el frente o hacia la parte superior de la silla.



- La pletina del lado derecho no contiene imán y debe instalarse apuntando hacia la parte trasera o inferior de la silla.

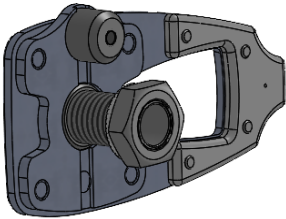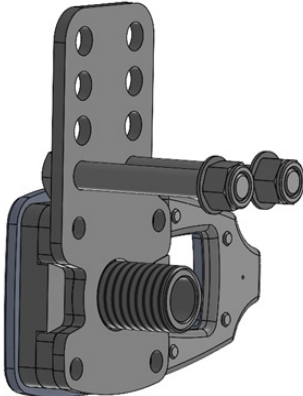

Sillas plegables con pletinas de eje	Sillas rígidas con tubo de eje
Kits de ejemplo, kit exacto según el modelo de silla de ruedas  • Solución de montaje con pasador para soporte de par. • Diámetro y forma adaptados a la pletina de eje específica de cada silla de ruedas. • Kits: 4, 5, 12.	 • Pletina de soporte con pasadores o tornillos, posiblemente casquillo de eje. • Forma y diseño adaptados a la silla de ruedas específica. • Kits: 2, 6, 13, 14, 15

Requisitos técnicos:

- Tamaño de rueda 24"
- Camber 0°
- Ruedas antivuelcos de seguridad

Restricciones técnicas:

- Si el diámetro del eje de la rueda no es igual a 12,7 mm, existe la posibilidad de pedir una rueda manual a Sunrise Medical que será compatible con el nuevo conjunto de ejes.
- No es posible combinar el Empulse M90 con freno de tambor.