

JAY sitteputer
og rygger



VÅR DIGITALE VERDEN

Følg Sunrise Medical på Facebook



Følg Quickie Wheelchairs på Facebook



Følg Sunrise Medical på Instagram



Se våre produktvideoer på YouTube



Hold deg oppdatert ved å abonnere på våre nyhetsbrev



Få faglig oppdatering ved å delta på webinarer



Book digitale møter med oss på Teams



Finn våre produkter på Hjelpemiddeldatabasen



JAY sitteputer, rygger og relaterte produkter

SITTEPUTER4

Basic Cushion.....	6
Easy Visco Cushion.....	7
Easy Fluid Cushion	8
Balance Cushion Deep Contour Fluid.....	9
J2 Cushion.....	10
J2 Cushion DC	11
Balance Cushion Fluid	12
Xtreme Active Cushion.....	13
Balance Cushion Cryo Fluid	14
GS Cushion.....	15
Balance Cushion Air S / Air D	16
J2 Cushion Plus	17
Kompletterende produkter	18
Kompletterende produkter	19
Kompletterende produkter	20
Tilbehør puter	21
Spesialtilpassing Jay puter	23
Kliniske prinsipper	24
Bevare huden (Trykkfordeling)	24
Reduksjon av fukt og varme	25
Reduksjon av skyvkrefter/shear	26
Stabilitet.....	26

Posisjonering	27
Kliniske nøkkelfaktorer.....	27
Funksjonelle nøkkelegenskaper ved sitteputer	28

RYGGER.....30

J3 Rygger	31
J3 rygger - Konturer og høyder	32
J3 SC - Grunn kontur	34
J3 MC - Medium kontur	35
J3 DC - Dyp kontur	36
J3 MDC - Medium dyp kontur	37
J3 XMDC - Medium ekstra dyp kontur	38
J3 XDC - Ekstra dyp kontur	38
JAY Fit 2U Back	42
Tilbehør JAY Fit 2U Back	44
Tilbehør J3 rygger	46
Tilpassing J3 rygger	49


ARTIKKELOVERSIKT PUTER50

ARTIKKELOVERSIKT RYGGER.....84

STEPS.....91

SITTEPUTER

For å opprettholde den optimale sittestillingen over tid med minst mulig bruk av krefter, er stabilitet en avgjørende faktor. Stabilitet ytes fra baksiden via rullestolens rygg, og underfra gjennom rullestolputen. Jay sitteputer gir deg en svært stabil base som yter tilpasset støtte til bekkenet. Jay sitteputer er enkle i bruk og krever lite vedlikehold. Dette gir trygghet for alle parter.

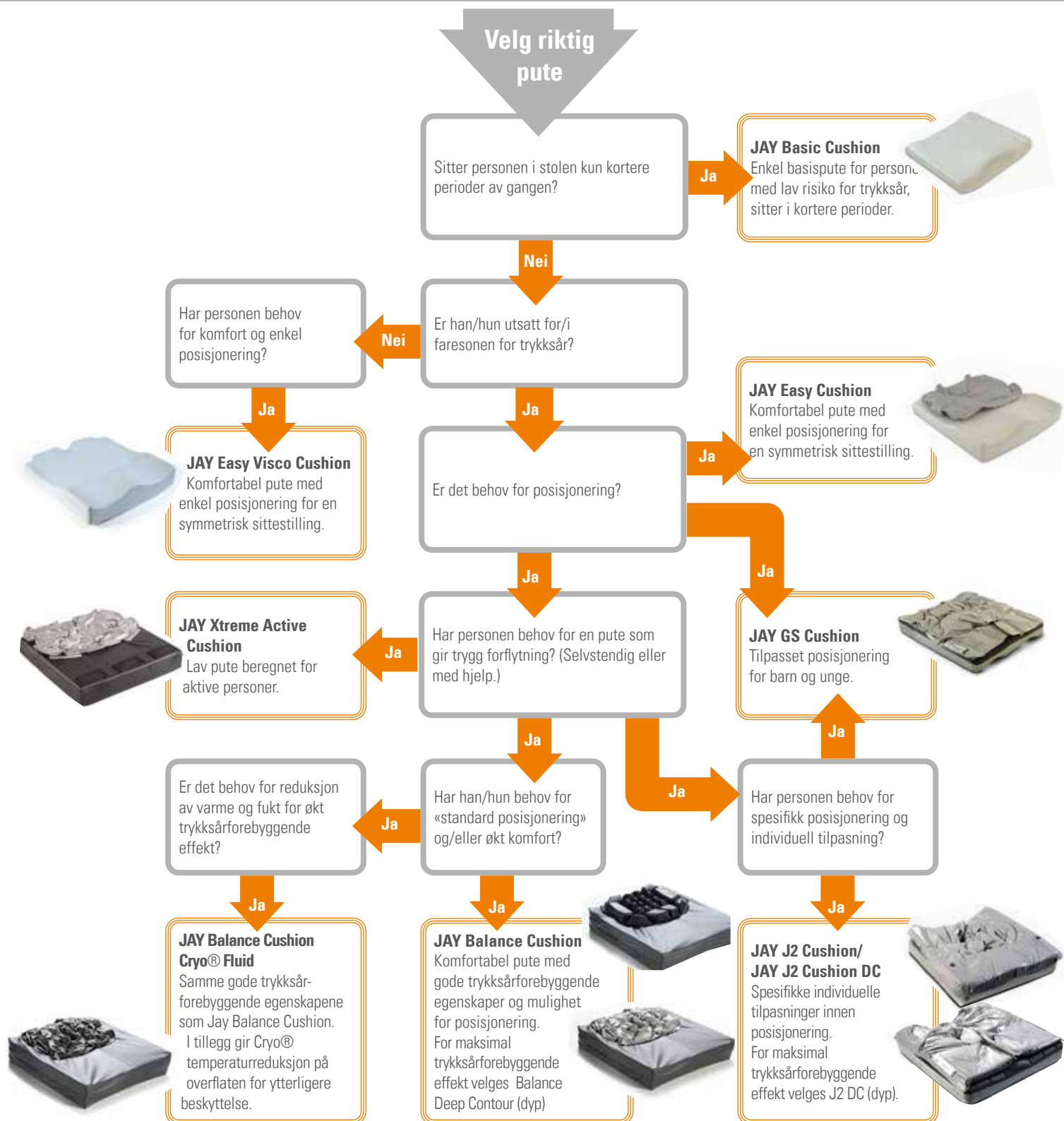

Eneste valg



Enkel sittepute

JAY Basic Cushion

For personer med lav risiko for trykksår og behov for enkel posisjonering, sitter i kortere perioder.

1. valg



Sittepute som ikke kan innstilles - lav modell

JAY Easy Visco Cushion

For personer med lav til medium risiko for trykksår, behov for en komfortabel pute som gir stabilitet og posisjonering.

2. valg



Sittepute som ikke kan innstilles - lav modell

JAY Easy Cushion

For personer med medium til høy risiko for trykksår, behov for stabilitet og posisjonering.

4. valg



Sittepute som ikke kan innstilles - høy modell

JAY Balance Cushion Deep Contour Fluid

For personer med høy risiko for trykksår, behov for komfort, stabilitet, trygg forflytning og evt posisjonering. Høyde 11 cm.

1. valg



Sittepute som gir god støtte under forflytning

JAY Xtreme Active Cushion S

For personer med høy risiko for trykksår, behov for komfort, stabilitet og trygg forflytning.

5. valg



Sittepute som gir god støtte under forflytning

JAY Xtreme Active Cushion L

For personer med høy risiko for trykksår, behov for komfort, stabilitet, trygg forflytning og evt posisjonering. Stor oljepad anbefales ved uttalt muskelatrofi.

2. valg *)



Sittepute som gir god støtte under forflytning

JAY J2 Cushion

For personer med høy risiko for trykksår, med større behov innen posisjonering og stabilitet i tillegg til trygg forflytning. (* Også 6.valg i DK 7 -Sittepute for posisjonering uten bruk av pumpe).

4. valg *)



Sittepute som gir god støtte under forflytning

JAY J2 Cushion DC

For personer med svært høy risiko for trykksår, med store behov innen posisjonering og stabilitet i tillegg til trygg forflytning. (* Også 7. valg i DK 7 - Sittepute for posisjonering uten bruk av pumpe).

3. valg



Sittepute som gir god støtte under forflytning

JAY Balance Cushion Fluid

For personer med høy risiko for trykksår, behov for komfort, stabilitet, trygg forflytning og evt posisjonering.

Basic Cushion

Komfort



Risikogruppe: Lav



Produktegenskaper:

- Formstøpt skum med svak anatomisk form for stabilitet
- Skråskårede kanter på undersiden av setteputen slik at den ligger like stabilt og godt i hengekøyesete som på plansete.
- Inkontinenstrekk beskytter basen mot smuss og kan bidra til å forlenge levetiden til puten

Klinisk bruk:

- Personer med behov for komfort og minimal postural støtte
- Personer med behov for lav pute/setehøyde
- Lav risiko for trykksår eller shear, frisk hud
- Selvstendig stillingsforandring
- Sitter i kortere perioder av gangen



Dybde	Bredde														
cm	25	30	35	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	60	
25															
30															
35															
36															
40															
42															
44															
46															
50															
56													*	*	
60														*	

Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Målt
4,8	4,7	uten belastning

Putens vekt 40x40	0,7 kg
Maks. brukervekt	150 kg
Garanti	2 år

*Ikke på kontrakt, lenger leveringstid må beregnes (3 uker).



www.SonriseMedical.no

Easy Visco Cushion

Høy grad av komfort og moderat grad av posisjonering, moderat grad av trykkfordeling

Risikogruppe: Middels

Produktegenskaper:

- Formstøpt skumbase med støtte for lårene, lett i vekt
- Viscoelastisk skum i setebrønnen slik at sitteknutene kan synke godt ned i materialet, gir større understøttelsesflate der vekten fordeles over til lårene
- Utsparing for halebenet for å unngå trykkpunkt
- Utsparing for ryggør slik at sitteputen kan plasseres godt inn i stolen
- Leveres med buet eller flat bunn for stabil plassering i hengekøyesete eller plansete - et optimalt grunnlag for funksjonell sittestilling
- Mikroklimatisk trekk som standard gir god luftsirkulasjon og bidrar til å holde huden frisk, inkontinenstrekk som tilbehør



Klinisk bruk:

- Personer med behov for moderat posisjonering og stabilisering
- Gir lateral stabilitet i tillegg til moderat stabilitet i sagittalplanet
- Personer med lav til moderat risiko for trykksår og lav risiko for shear
- Selvstendig stillingsendring




Dybde	Bredde											
cm	25	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
25												
30												
35												
40												
42			*									
44												
46												
48				*	*	*	*	*				
50				*	*	*	*	*				
52									*	*		
56												
60												

Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Målt
6,3	6	uten belastning

Putens vekt 40x40	1,06 kg
Maks. brukervekt	150 kg
Garanti	2 år

*Kun tilgjengelig som buet modell

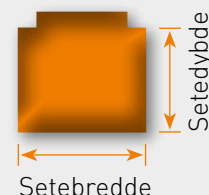

Easy Fluid Cushion

God trykfordeling og stabilitet



Risikogruppe: Høy

Produktegenskaper:

- Formstøpt skumbase med innebygget støtte for lårene for posisjonering og stabilitet, lett i vekt
- JAY oljepad i setebrønnen gir sitteknutene svært gode muligheter til å synke ned i materialet slik at understøttelsesflaten blir større og trykket fordeles til under lårene. Oljepaden er selvjusterende og trygg i bruk
- Utsparing for halebenet for unngå trykkpunkt
- Utsparing til ryggør for optimal plassering i rullestolen
- Velg mellom buet og flat bunn for stabil plassering i hengekøye- eller på plansete - et optimalt grunnlag for funksjonell sittestilling
- Mikroklimatisk trekk som standard gir god luftsirkulasjon og bidrar til å holde huden frisk, inkontinensstrekk som tilbehør



Klinisk bruk:

- Personer med moderate behov for posisjonering og stabilitet, og større behov for trykfordeling
- Gir lateral stabilitet i tillegg til moderat stabilitet i sagittalplanet
- Moderat til høy risiko for trykksår og moderat risiko for shear
- Selvstendig stillingsendring




Oljepaden er plassert i en lomme i putetrekket, noe som bidrar til at den alltid ligger på plass.

Dybde	Bredde											
cm	25	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
25												
30												
35												
40												
42												
44												
46												
50												
56												
60												

Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Målt
6,3	6	uten belastning

Putens vekt 40x40cm	1,6 kg
Maks. brukervekt	150 kg
Garanti	2 år

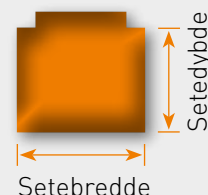

Balance Cushion Deep Contour Fluid

Høy grad av trykkfordeling, posisjonering og komfort

Risikogruppe: Høy

Produktegenskaper:

- Samme gode egenskaper som Balance Cushion, men med en dypere kontur, dypere setebrønn og en større oljepad.
- Basen består av et fast skumlag nederst som sørger for god posisjonering og stabilitet.
- Tykt mykt skumlag dekker den ergonomisk utformede basen for å gi en mer komfortabel flate mot kroppen
- Sittebrønnen er lukket i bakkant for å sikre at oljepaden holder seg på plass.
- Oljepaden gir optimal trykkfordeling. Den er selvjusterende og trygg i bruk. Svært begrenset behov for vedlikehold
- Mikroklimatisk trekk avleder varme og fukt effektivt. Innertrekket beskytter basen mot smuss og sikrer en lenger levetid for puten. Inkontinensstrekk og stretch-trekk tilgjengelig som tilbehør
- Stabil pute med flat, myk front bidrar til trygg og god forflytning.
- Posisjoneringskomponenter kan monteres for ytterligere stabilitet eller tilpassing av sittestilling. Se posisjoneringskomponenter på side 21.

Klinisk bruk:

- Personer med behov for stabilitet, posisjonering og optimal trykkfordeling
- Personer med behov for en pute som ligger stabilt ved forflytning, enten selvstendig eller med hjelp
- Maksimal stabilitet og posisjonering takket være utformingen av sittebrønnen, basert på antropometriske målinger
- Høy risiko for trykksår, moderat til høy risiko for shear
- Høy pute, dyp setebrønn og en større oljepad gjør puten egnet for personer som er mindre aktive, i for eksempel elektriske rullestoler.



Basen er bygget opp av ulike lag og har skråskårne kanter slik at sitteputen ligger like stabilt i et hengekøyesete som på et plansete

cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
34											
36											
38											
40											
42											
44											
46											
48											
50											
56											
60											
PLA	A			B				C			

Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Målt
11	10	uten belastning

Putens vekt 40x46cm	2,4 kg fluidinnlegg
Maks. brukervekt	150 kg (bredde 34-50cm) 225 kg (bredde 56-60cm)
Garanti	2 år

J2 Cushion



www.SinnseMedical.no

Stabilitet, posisjonering
og trykkfordeling

Risikogruppe: Høy



Produktegenskaper:

- Fast base, anatomisk utformet sittebrønn og stabil støtte for lårene
- Selvjusterende oljepad sikrer at sitteknutene synker godt ned i materialet for optimal trykkfordeling, samt bidrar til en trygg hverdag og enkelt vedlikehold
- Stabil pute med flat, myk front bidrar til trygg og god forflytning, enten selvstendig eller med hjelp
- Mikroklimatisk trekk for effektivt å avlede fukt og varme. Inkontinenstrekk tilgjengelig som tilbehør
- Base som egner seg til å skjære i, for å tilpasse puten til individuelle behov
- Bredt spekter av posisjoneringselementer (tilbehør) for ytterligere tilpasning i forhold til stabilitet og posisjonering



Dybde	Bredde						
cm	35	40	42	45	50	55	60
40							
42							
45							
50							


Klinisk bruk:

- Personer med høy risiko for trykksår og shear
- Personer med symmetrisk sittestilling til Personer med uttalte behov for posisjonering som endrer seg over tid
- Personer som eventuelt ikke kan utføre selvstendig stillingsendring eller vektskift, begrenset postural stabilitet



Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Målt
8	8	uten belastning

Putens vekt 40x40cm	2 kg
Brukervekt	175 kg
Garanti	2 år

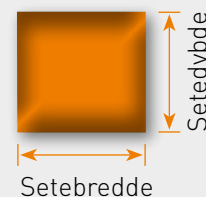



J2 Cushion DC

Stabilitet og posisjonering sammen med svært høy risiko for trykksår

Risikogruppe: Høy/Svært høy

Produktegenskaper:

- Fast base med dyp, anatomisk riktig sittebrønn
- Selvjusterende oljepad med mykt skumlag i framre del sikrer at sitteknutene synker godt ned i puten for maksimal trykkfordeling
- Selvjusterende oljepad gir trygghet i hverdagen og enkelt vedlikehold
- Stabil pute med flat, myk front bidrar til trygg og god forflytning, enten selvstendig eller med hjelp
- Mikroklimatisk trekk for effektivt å avlede fukt og varme. Inkontinenstrekk tilgjengelig som tilbehør.
- Base som egner seg til å skjære i, for å tilpasse puten til individuelle behov
- Bredt spekter av posisjoneringselementer (tilbehør) for ytterligere tilpasning i forhold til stabilitet og posisjonering



Dybde	Bredde							
cm	35	38	40	42	45	50	55	60
35								
38								
40								
42								
45								
50								


Klinisk bruk:

- Personer med svært høy risiko for trykksår
- Personer med symmetrisk sittestilling til Personer med uttalte behov for posisjonering
- Personer som eventuelt ikke kan utføre selvstendig stillingsendring eller vektskift



Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Målt
10	10	uten belastning

Putens vekt 40x40cm.	2,4 kg
Maks. brukervekt	150 kg
Garanti	2 år

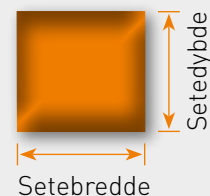

Balance Cushion Fluid



Høy grad av trykkfordeling, posisjonering og komfort

Risikogruppe: Høy

Produktegenskaper:

- Basen består av et fast skumlag nederst som sørger for god posisjonering og stabilitet.
- Tykt mykt skumlag dekker den ergonomisk utformede basen for å gi en mer komfortabel flate mot kroppen
- Sittebrønnen er lukket i bakkant for å sikre at oljepaden holder seg på plass.
- Oljepaden gir optimal trykkfordeling. Den er selvjusterende og trygg i bruk. Svært begrenset behov for vedlikehold
- Mikroklimatisk trekk avleder varme og fukt effektivt. Innertrekket beskytter basen mot smuss og sikrer en lenger levetid for puten. Inkontinenstrekk og stretch-trekk tilgjengelig som tilbehør
- Stabil pute med flat, myk front bidrar til trygg og god forflytning.
- Posisjoneringskomponenter kan monteres for ytterligere stabilitet eller tilpassing av sittestilling. Se posisjoneringskomponenter på side 21

Klinisk bruk:

- Personer med behov for stabilitet, posisjonering og optimal trykkfordeling
- Personer med behov for en pute som ligger stabilt ved forflytning, enten selvstendig eller med hjelp
- Maksimal stabilitet og posisjonering takket være utformingen av sittebrønnen, basert på antropometriske målinger
- Høy risiko for trykksår, moderat til høy risiko for shear
- Lav pute med flat front gjør den egnet for aktive personer, i for eksempel manuelle rullestoler.



Basen er bygget opp av ulike lag og har skråskårne kanter slik at sitteputen ligger like stabilt i et hengekøyesete som på et plansete

cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
34											
36											
38											
40											
42											
44											
46											
48											
50											
56											
60											
PLA	A			B				C			

Høyde (i cm)			Målt uten belastning
Foran	Bak		
8,5	8,5		

Putens vekt 40x46cm	2,4 kg fluid innlegg
Maks. brukervekt	150 kg (bredde 34-50cm) 225 kg (bredde 56-60cm)
Garanti	2 år

Setebredde
Setedybde



JAY®

Xtreme Active Cushion

God trykfordeling for aktive personer



Risikogruppe: Høy

Produktegenskaper:

- Lett i vekt og lav høyde for enkel forflytning og transport
- Flat front sikrer en trygg forflytning og minimaliserer trykksårfare ved en «subbeforflytning»
- Den myke putefronten er beregnet for at personen også skal kunne sitte foran på puten. Dette gir en stor bevegelsesfrihet og en trygg stillingsforandring.
- Mikroklimatisk trekk fremmer luftsirkulasjon og avleder effektivt fukt og varme. Innertrekket beskytter basen mot fukt og forlenger putens levetid
- Puten tilbyr to ulike oljepader: standard oljepad passer de aller fleste mens stor oljepad passer personer med uttalt muskelatrofi. Oljepaden er selvjusterende og trygg i bruk, krever minimalt vedlikehold
- Komponenter for posisjonering av lår leveres som tilbehør og kan ettermonteres.



Klinisk bruk:

- Aktive personer med moderat til høy risiko for trykksår og shear
- Personer med behov for moderat til høy grad av trykfordeling men som ikke ønsker en tyngre, høyere og profilert pute
- Symmetrisk eller mild asymmetrisk sittestilling som krever minimalt med støtte
- Personen klarer å gjennomføre selvstendig stillingsendring, vektskifte og forflytning




→ **Standard oljepad (S)**
Standard base med standard oljepad.

→ **Stor oljepad (L)**
Anbefales ved uttalt muskelatrofi, slik at knokkelutspring har enda mer masse å synke godt ned i. Xtreme Active leveres i de tilfellene med en base med tilpasset sittegrep.

Dybde	Bredde								
cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
34									
36									
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									

Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Målt
7	8(S), 9(L)	uten belastning

Putens vekt 40x40cm	1,7 kg
Maks. brukervekt	150 kg
Garanti	2 år

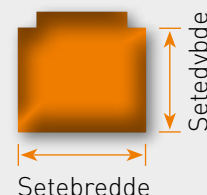

Balance Cushion Cryo Fluid

Høy grad av trykkfordeling, posisjonering og komfort sammen med aktivt kjølende materiale

Risikogruppe: Høy



Produktegenskaper:

- Sittepute som adresserer alle fire risikofaktorer samtidig: trykk, shear, temperatur og fukt.
- Basen består av et fast skumlag nederst som sørger for god posisjonering og stabilitet.
- Tykt mykt skumlag dekker den ergonomisk utformede basen for å gi en mer komfortabel flate mot kroppen
- Sittebrønnen er lukket i bakkant for å sikre at oljepaden holder seg på plass.
- Cryo Fluid gir optimal trykkfordeling. Den er selvjusterende og trygg i bruk. Svært begrenset behov for vedlikehold
- Cryo Fluid inneholder millioner av mikroporler bestående av parafinvoks. Varme overføres fra kroppen til fluid-paden.
- Cryo Fluid senker temperaturen i sitteområdet til et terapeutisk hensiktsmessig nivå i opptil åtte timer.
- Mikroklimatisk trekk avleder varme og fukt effektivt. Innertrekket beskytter basen mot smuss og sikrer en lenger levetid for puten. Inkontinenstrekk og stretch-trekk tilgjengelig som tilbehør

- Stabil pute med flat, myk front bidrar til trygg og god forflytning.
- Posisjoneringskomponenter kan monteres for ytterligere stabilitet eller tilpassing av sittestilling. Se posisjoneringskomponenter på side 21.

Klinisk bruk:

- Personer med behov for stabilitet, posisjonering og optimal trykkfordeling
- Personer med behov for en pute som ligger stabilt ved forflytning, enten selvstendig eller med hjelp
- Maksimal stabilitet og posisjonering takket være utformingen av sittebrønnen, basert på antropometriske målinger



Balance Cushion Cryo Fluid er også tilgjengelig i Deep Contour versjon. Kontakt Sunrise Medical AS for mer informasjon.

Basen er bygget opp av ulike lag og har skråskårne kanter slik at sitteputen ligger like stabilt i et hengekøyesete som på et plansete

cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
34											
36											
38											
40											
42											
44											
46											
48											
50											
56											
60											
PLA	A			B				C			

Høyde (i cm)			Målt uten belastning
Foran	Bak		
8,5	8,5		

Putens vekt 40x46cm	2,4 kg fluid innlegg
Maks. brukervekt	150 kg (bredde 34-50cm) 225 kg (bredde 56-60cm)
Garanti	2 år

Setebredde
Setedybde

GS Cushion

For barn og unge med behov for postural støtte og eventuelt trykkfordeling

Risikogruppe: Høy



Produktegenskaper:

- Fast og lett base med muligheter for vekst via blant annet lårstøtteforlenger. Plass til leggmuskelatur ved kontrakturer grunnet stram hamstrings gir bedre posisjonering av bekkenet
- Selvjusterende oljepad som balanserer optimal trykkfordeling og stabilitet
- For økt trykkfordeling er en alternativ oljepad tilgjengelig som tilbehør
- Mikroklimatisk trekk avleder varme og fukt effektivt. Inkontinenstrekk tilgjengelig som tilbehør
- Bredt spekter av posisjoneringskomponenter for ytterligere stabilitet og tilpassing, se side 21.

Husk: barn i vekst trenger jevnlig oppfølging for å sikre riktig tilpassede produkter.

Klinisk bruk:


- Personer med symmetrisk eller asymmetrisk sittestilling, moderate til store behov for postural støtte som endrer seg over tid
- Han / hun kan ikke utføre selvstendig vektskift eller stillingsendring, ofte med begrenset postural stabilitet
- Innebygget mulighet for vekst sikrer riktig tilpasset pute til enhver tid



Dybde cm	Bredde				
	25	30	35	40	45
25					
30					
33					
38					
43					
48					
50					

Høyde (i cm)		
Foran	Bak	Målt
6-7	5-6	uten belastning

Putens vekt 25x33cm.	0,6 kg
Maks. brukervekt	113 kg
Garanti	2 år

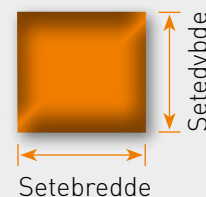

Balance Cushion Air S / Air D

Høy grad av trykkfordeling, posisjonering og komfort

Risikogruppe: Høy



Produktegenskaper:

- Basen består av et fast skum nederst som sørger for god posisjonering og stabilitet.
- Tykt mykt skumlag dekker den ergonomisk utformede basen for å gi en mer komfortabel flate mot kroppen
- Sittebrønnen er lukket i bakkant for å sikre at luftpaden holder seg på plass
- Luftinnlegget gir optimal trykkfordeling og er lett i vekt. Krever tilpassing av luftmengde ved levering, samt hyppige kontroller for å sikre korrekt luftmengde for optimal trykkfordeling
- Air S leveres med luftpad med 1 kammer, Air D med 2 kammer
- Mikroklimatisk trekk avleder varme og fukt effektivt. Innertrekket beskytter basen mot smuss. Inkontinenstrekk og stretchtrekk tilgjengelig som tilbehør
- Stabil pute med flat myk front bidrar til trygg og god forflytning
- Posisjoneringskomponenter kan monteres i egnede innertrekk (tilbehør) og oppmuntrer en symmetrisk sittestilling. Se posisjoneringskomponenter på side 21

Klinisk bruk:

- Personer med behov for posisjonering, stabilitet og optimal trykkfordeling
- Personer med behov for tilpassing av bekkenskjevhet (Air D)
- Personer med behov for en pute som gir stabilitet ved forflytning, enten selvstendig eller med hjelp
- Maksimal stabilitet og posisjonering takket være utformingen av sittebrønnen, basert på antropometriske målinger
- Høy risiko for trykksår, moderat til høy risiko for shear



Balance Cushion Air S/Air D er også tilgjengelig i Deep Contour versjon. Kontakt Sunrise Medical AS for mer informasjon.

Basen er bygget opp av ulike lag og har skråskårne kanter slik at sitteputen ligger like stabilt i et hengekøyesete som på et plansete

cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
34											
36											
38											
40											
42											
44											
46											
48											
50											
56											
60											
PLA	A			B				C			

Høyde (i cm)			Målt uten belastning
Foran	Bak		
8,5	8,5		

Putens vekt 40x46cm	1,9 kg luftinnlegg
Maks. brukervekt	150 kg (bredde 34-50cm) 225 kg (bredde 56-60cm)
Garanti	2 år

Setebredde
Setedybde

J2 Cushion Plus

Stabilitet, posisjonering og trykkfordeling for tunge personer



Risikogruppe: Høy

Produktegenskaper:

- Anatomisk formet base, der bekkenet oppnår god posisjonering og stabilitet samtidig som bløtdeler får støtte av putens sidekanter
- Litt åpen hoftevinkel for å gi ytterligere plass
- Selvjusterende oljepad med mykt skumlag i framre del sikrer maksimal trykkfordeling og komfort
- Selvjusterende oljepad gir trygghet i hverdagen og enkelt vedlikehold
- Inkontinenstrekk som standard



← Anatomisk formet sittebrønn

Sittebrønnen er tilpasset bekkenets anatomi. Sidekantene på puten er tilpasset for å gi plass til bløtdeler.

Klinisk bruk:


- Tunge personer med høy risiko for trykksår
- Personer med behov for en noe mer åpen vinkel i hofte for å få plass til bløtdeler



Dybde	Bredde			
	50	55	60	65
45				
50				
55				

Høyde (i cm)	Høyeste punkt (bak)
8 cm	12 cm

Putens vekt 50x55cm	2,7 kg
Brukervekt	295 kg
Garanti	2 år

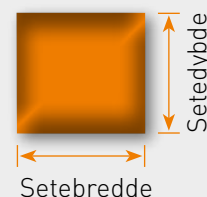

Kompletterende produkter

Jay Bilpute

Enkel oljepad kan bestilles som egen del.

Denne trykkfordelende puten er enkel å ta med seg for eksempel i bil eller på reise.

Se artikkeloversikt på side 80.



Jay Lumbalpute

Regulerbar, anatomisk utformet lumbalstøtte. Kan monteres på alle typer stoler ved hjelp av borrelåsbåndene. Ekstra skuminnlegg for tilpassing av lumbalstøtte.

Leveres i to størrelser. Se artikkeloversikt på side 80.





Kompletterende produkter



Lanapelle - ullprodukter

Lanapelle har en rekke trykksårforebyggende produkter til barn og voksne. Ullens naturlige egenskaper, sammen med den unike framstillingsprosessen, gjør produktene til noen av verdens mest allsidige og holdbare saueskinnsprodukter som er tilgjengelig på markedet i dag. Lanapelleproduktene er laget av skinnen til merinosauen, som inneholder 5–6.000 fiber/cm². Dette gjør at Lanapelleproduktene skiller seg ut fra andre saueskinn som finnes på markedet i dag. Bildet øverst på siden viser et helt skinn som har mange bruksområder. Mål: 63x92cm. Art.nr. 7981

Nedenfor ses et utvalg av ullprodukter i vårt sortiment. [Ta kontakt](#) for tilbud.



Skinn til bruk i rygg eller oppå sitteputen. Stk one size: 46x55cm. Art.nr. 8007



Albuebeskytter, par, one size. Art.nr: 8015



Armlensbeskyttere gir myke armlener. Par, one size: Art.nr.2145



Ull på fotplatene gir føttene en lun og myk flate å hvile føttene på. Par, one size. Art.nr. 8008



Hælbeskyttere finnes i 3 størrelser. S - M- L Art.nr: 8002-S/M/L



Håndflatebeskyttere, par, one size: Art.nr: 8003



Leggavlastere gir myke leggstøtter. Par, one size. Art. nr. 8005



Omslagstøfler holder deg tørr og varm på bena. Finnes i flere størrelser. Se artikkelnumre på hjemmesiden: <https://www.sunrisemedical.no/seating/stotte-komfort/lanapelle-ull-1>

Kompletterende produkter


www.SunriseMedical.no


Kinetic Balance produkter

Produktene er laget av neopren og lukkemekanismer av samme høye kvalitet som benyttes i vannsporten kiting og surfing. Fordelen med dette er at produktene blir meget sterke og får lang holdbarhetstid. Produktserien inneholder mange typer produkter; vester, hoftebelter, abduksjonsseler og ankelstropper. Størrelsesspektret er fra XS (extra small) til XL (extra large).

Nedenfor ses et lite utvalg av produkter fra Kinetic Balance i vårt sortiment. [Se hele katalogen.](#)



Hoftebelte, billås, enkel
Art. nr. 6.70003.x



Posisjoneringsvest
Art. nr. 5.71032.x



Hoftebelte, 4-punkts
enkel. Art.nr:6.70042.x



Skrittsele
Art. nr. 7.70001.x



Hoftebelte, 4-punkts
dobbel, Art. nr. 6.70044.x



Posisjoneringsvest,
Art. nr. 5.71014.x



Ankelsele
Art. nr. 8.70001.x

Tilbehør puter

JAY putene kan tilpasses individuelt ved bruk av tilbehør. Posisjoneringskomponentene kan monteres ute hos personen som skal bruke produktet. Se komplett tilbehørsoversikt med varenummer og HMS art.nr bakerst i katalogen

Posisjoneringskomponenter til Xtreme Active Cushion

Bendelere og bensamlere festes enkelt til borrelås på innertrekket i framkant av puten.

Se artikkeloversikt på side 78.



Posisjoneringskomponenter til Balance Cushion

Ved behov vil oppbyggingsklosser og posisjoneringskomponenter gi muligheter for riktig posisjonering av bekkenet og lårene. Posisjoneringskomponenter monteres enkelt og stabilt i egne lommer i innertrekk for posisjonering (tilbehør). Standard innertrekk er forberedt for oppbyggingsklosser for tilpassing i forhold til bekkenskjevhet.


Se artikkeloversikt på side 64, 69 og 74.



Posisjoneringskomponenter til J2 Cushion, J2 Cushion DC, GS Cushion

Delene kan bestilles separat. Det er nødvendig med en størrelse bredere trekk enn standard når puten tilpasses med hoftestøtter og / eller bensamlere.

Se artikkeloversikt på side 59, 70 og 76.

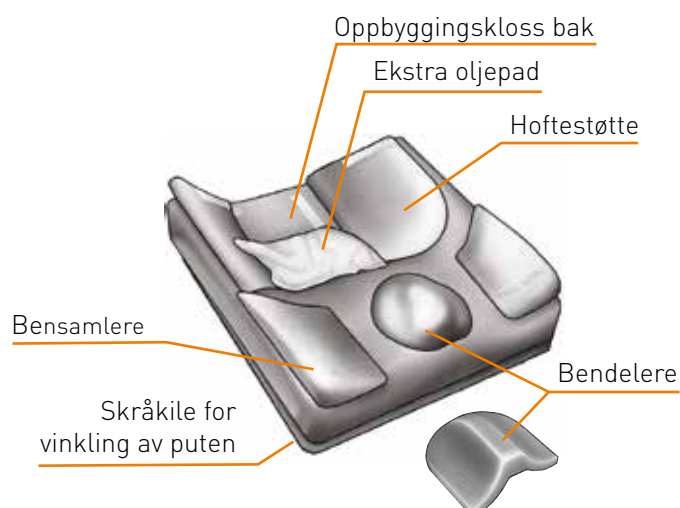

Trekk

En viktig del av sitteputen

Alle sitteputer er utviklet og testet med egne trekk. Sitteputens originale trekk er derfor en viktig faktor i forhold til sitteputens egenskaper, for eksempel trykksårforebyggende egenskaper

Det er viktig at trekket kan følge putens fasong og muliggjør at bekkenet kan synke lenger ned i det trykkfordelende materialet uten at trykket øker.



Alternativer

- **Mikroklimatisk trekk**
 3DX™ "spenstig nettaktig skum", avleder varme og fuktighet fra kroppen - ytterst viktig da magasinering av varme og fuktighet er med på å skade huden. Et nettaktig skumlag er også med på å øke komforten. Komfort er viktig for å redusere smerter og tretthet og øke sittetoleransen
- **Inkontinestrekk**
 Dersom permanent inkontinens er et problem, kan et inkontinestrekk være et godt valg. Inkontinestrekket beskytter putebasen mot smuss og fukt og kan bidra til økt levetid for produktet
- **Stretchtrekk**
 Hvis man ønsker et glattere og mer elastisk trekk kan et stretch-trekk være et godt alternativ. Dette kan være spesielt aktuelt i tilfeller der enklest mulig forflytning er et ønsket resultat. Da stretchtrekk er tynnere og mer elastisk, vil trekket enda lettere forme seg etter brukerens fasong



Spesialtilpassing Jay puter

Dersom du ikke finner puter med korrekte mål og utforming i vårt standardsortiment, tilbyr vi spesialtilpassing på en del av våre puter

Spesialtilpasninger som tilbys	Tilpassing i tommer/cm	MOD kode	Easy/Easy Visco	J2	J2 DC	Xtreme Active	Balance Cushion
Lengre pute. Legges til putefronten. (Increase Length IL)	1" ca 2,5 cm	IL1		✓	✓		✓
	2" ca 5,0 cm	IL2		✓	✓		✓
	3" ca 7,5 cm	IL3		✓	✓		✓
	4" ca 10,0 cm	IL4		✓	✓		✓
Kortere pute. Putefronten forkortes. Reduce Length RL)	1" ca 2,5 cm	RL1	✓	✓	✓	✓	✓
	2" ca 5,0 cm	RL2	✓	✓	✓	✓	✓
	3" ca 7,5 cm	RL3	✓	✓	✓	✓	✓
	4" ca 10,0 cm	RL4	✓	✓	✓	✓	✓
Bredere pute. Halvparten per side. (Increase Width IW)	1" ca 2,5 cm	IW1		✓	✓		✓
	2" ca 5,0 cm	IW2		✓	✓		✓
	3" ca 7,5 cm	IW3		✓	✓		✓
	4" ca 10,0 cm	IW4		✓	✓		✓
Smalere pute. Halvparten per side. (Reduce Width RW)	1" ca 2,5 cm	RW1	✓	✓	✓	✓	✓
	2" ca 5,0 cm	RW2	✓	✓			✓
	3" ca 7,5 cm	RW3					
	4" ca 10,0 cm	RW4					

Ta kontakt med salgsrepresentant i ditt fylke for hjelp til bestilling.

✓ Tilbys

Tilbys ikke

Puter med spesialtilpassede mål bestilles direkte fra vår fabrikk. Lenger leveringstid må beregnes.



← Jay Caliper





Skyvelær for korrekt måling kan bestilles. Se artikkeloversikt på side 80.

Kliniske prinsipper

Vitenskapen og den kliniske anvendelsen av sittesystemer for rullestoler kan deles opp i følgende prinsipper:

Bevare huden (Trykkfordeling)

Hvordan kan vi fordele trykket av hans/hennes vekt for å redusere punkttrykk på kritiske områder og redusere faren for skader på huden?

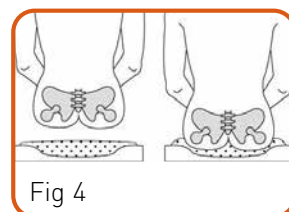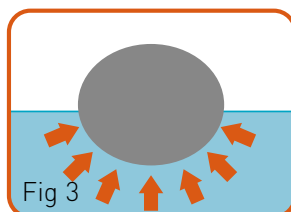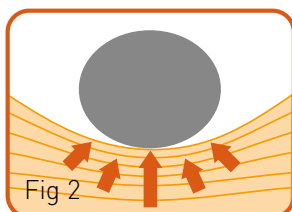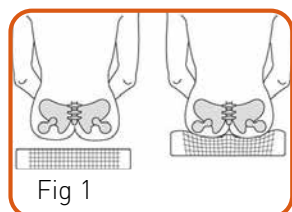

For optimalt vedlikehold av huden ønsker vi å fordele vekten av personen som sitter på sitteputen.

- Over så stort overflate som mulig
- Bort fra benutspring til områder der vi tåler å bære vekt
- Ved å redusere punkttrykk på sensitive områder

Faste materialer; inkludert skum, viskoelastisk skum og gele

- Former seg etter hans/hennes fasong i varierende grad avhengig av type materiale (Fig 1 and 2)
- Kan gi noe trykkfordeling MEN faste materialer gir alltid et mottrykk mot huden
- Stor grad av kompresjon gir tilsvarende stort u hensiktsmessig mottrykk på kritiske områder
- Har begrenset mulighet til å fordele trykket bort fra trykksensitive områder.

Væsker og gass (for eksempel luft og olje)

- Skiller seg fra faste materialer ved at de endrer fasong og former seg helt etter han/hun uten at det oppstår mottrykk. (Eksempel flyte i basseng(Fig 3))
- Fordeler trykket jevnt over hele kroppens vektbærende flate (Fig 4)

Overflatespenning

Alle materialer har en overflate (trekk, pose, skumoverflate).

Skum, gele, væsker og gass kan kun endre fasong og forme seg etter hans/hennes form når overflatematerialet er like fleksibelt og tilpasningsdyktig. Vann fylt i en elastisk gummiball kan kun endre fasong innenfor grensene av hva gummi tillater.

For å unngå at overflatematerialene begrenser fordeling og endring av materialets form, er det essensielt at overflaten er vesentlig større enn materialet det innkapsler.

Å sitte gjennom

Alle fordeler med de beste materialene i forhold til trykkfordeling, forsvinner dersom sitteknutene faktisk passerer gjennom det trykkfordelende materialet til den harde overflaten under.

Klinikere må enten sikre at de trykkfordelende materialene tillater bekkenet å synke tilstrekkelig ned i materialet uten å treffe bunnen eller at putens oppbygging gir avlastning samtidig som sitteknutene synker ned i materialet.



Reduksjon av fukt og varme

Noen Personer er mer utsatt for trykksår enn andre. Optimal trykkfordeling krever at utsatte knokkelutspring kan synke ned i det trykkfordelende materialet. Som et resultat av dette må vi forholde oss til at det kan oppstå fukt.

Påvirkningen av fukt kan reduseres, men ikke elimineres, ved bruk av fukttransporterende materialer i putetrekket. Det er nødvendig med bevisst oppfølging av personer som sitter lenge og dermed kan bli varme og klamme.

- Skum og gele er varmeisolerende materialer og fordeler varmen dårlig
- Skum og gele har høy termisk masse (virker varmere og kan holde på varmen)
- Væsker og gass fordeler og avleder varme til en viss grad
- JAY oljepad har medium termisk masse og fordeler og avleder varme til en viss grad.
- Luft har lav termisk masse (virker kaldere) og avleder varme mer effektivt

Gummi og neoprentrekk hindrer avledning av fukt. Nøkkelpunktet er putens oppbygging og materialene rundt puten:

- Fukttransporterende trekk
- Klær er kritiske, for eksempel leder bomull både fukt og varme dårlig

Klær og inkontinens har større påvirkning på fukt enn putens materialer.

Vektskift er kritisk for å avlede varme, i tillegg til fordeling av trykk. Aktive personer benytter vektskift aktivt for å avlede varme og oppnå trykkavlastning. Passive personer som selv ikke klarer å foreta vektskift, er avhengig av hjelp fra omsorgspersoner.

Velg det mest egnede putematerialet ut fra en vurdering av huden


- Gasser og væsker der personen har moderat til høy risiko for trykksår
- Skum, viskoelastisk materiale og gele der personen har lav til moderat risiko for trykksår og ved ønske om økonomisk fordelaktig løsning. Disse putene har ofte lavere egenvekt.

Trykkfordelende materialer av olje/luft under benutspring er alene ikke tilstrekkelig for å bevare huden og unngå trykksår. Putens fasong må også sikre stabilitet og posisjonering av bekkenet og lårbenene. Dette reduserer risikoen for punkttrykk.




Reduksjon av skyvkrefter/shear

Shear og friksjon er kritiske elementer i forhold til trykksår. Personer med høy risiko for trykksår kan ha tilfredsstillende trykkfordeling og likevel oppleve uttalt friksjon og shear-krefter ved forflytning eller når de sklir framover i setet på grunn av uhensiktsmessig posisjonering.

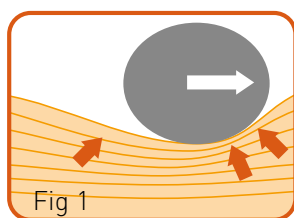

Skum, viskoelastisk materiale og gele komprimeres og endrer ikke fasong (fig 1). Dette skaper motkrefter til personens horisontale bevegelser som kan resultere i friksjon og shear i trykkutsatt vev.

Gasser og væsker endrer fasong (Fig 2) og gir minimalt med motkrefter, noe som er fordelaktig for utsatt vev.

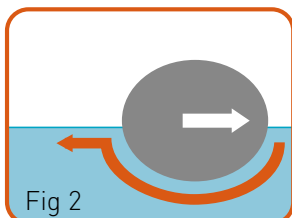


Som ved trykkfordeling kan shear og friksjon delvis reduseres, men er også avhengig av overflatespenningen i materialene. Stramme trekk og innkapslingsmaterialer skaper egen overflatespenning.

En sittestilling som gir veldig lav grad av shear, vil være veldig lett å skli ut av og tilby lite stabilitet og posisjonering - dersom dette er sitteputens eneste egenskap.

Nøkkelen er å redusere shear i de kritiske områdene, og samtidig benytte mindre utsatte områder for å avlaste trykket og gi brukeren stabilitet og postural støtte.

Stabilitet

En sittepute kan kun fungere optimalt når personen sitter stabilt i en spesifikk stilling egnet for hans/hennes aktiviteter og trykket kan fordeles effektivt. Nøkkelen er å stabilisere bekkenet.

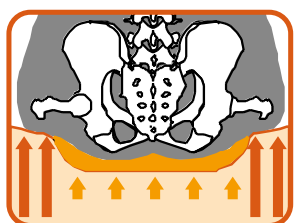

Stabilitet framover/bakover: Velg en sittepute med adekvat sittegropp, der sitteknutene kan synke godt ned i sitteputen. Ved i tillegg å gi støtte til trochanter og femur,

samt sikre at sittebrønnen har en framre avslutning, stabiliseres bekkenet i en optimal posisjon i sagitalplanet. Vi anbefaler å benytte en fast rygg som gir støtte til bekkenet fra baksiden. Dette vil støtte bekkenets posisjon og minimere bakovertipping av bekkenet.

Lateral stabilitet: Puter i viskoelastiske materialer, gele, olje eller luft kan gi trykkfordeling, men vil ikke være effektive dersom de ikke samtidig kan gi stabilitet. Samtidig som sittegroppen skal være dyp nok til sitteknutene, trenger trochanter god støtte for å redusere faren for skjevstillinger i bekkenet. Stabilitet til trochanter vil sikre personens sittestilling og funksjon, samtidig som det reduserer muligheten for økt trykk på en av sitteknutene – med fare for å sitte gjennom sitteputen.

Sitteputer som tilbyr trykkfordeling bør tilby en fastere ytre struktur for å stabilisere personen når stabilitet er et ønsket resultat.

Kliniske nøkkelfaktorer

Posisjonering

Stabilitet og posisjonering er veldig like konsepter. De kan involvere en kombinasjon av økt eller tilpasset kontur på selve sitteputen (form tilpasset bekkenet, trochanter og femur), tilpasning av rullestolens sitteflate og valget om å benytte en fast rygg.

Posisjonering er kritisk der han/hun har feilstillinger. Disse personene kan behøve en „spesialtilpassing“ ved hjelp av ekstra oljeinnlegg, posisjoneringsstøtter og/eller forming av putebasen.

Posisjoneringsputer har vesentlig fastere baser enn komfortputer for å sikre at de gir riktig støtte og at posisjoneringselementer holdes trygt på plass.

Ca. 30 % trenger spesifikk posisjonering. Det er her terapeuter bruker sin spesialkompetanse, sammen med sitteputer egnet for posisjonering (f.eks. J2 Cushion) og aktuelt tilbehør.


Sittetoleranse

Komfort er subjektivt men sittetoleranse kan betraktes som et objektivi mål. Det er essensielt å vurdere sittetoleranse i relasjon til tiden han/hun forventer å sitte i stolen. Personer som sitter i kortere perioder er kanskje kun opptatt av den umiddelbare komforten, mens for en person som skal sitte lenge er det nødvendig å vurdere sitteputens komfort over en periode på flere timer.

Han/hun må balansere sin oppfattelse av komfort opp mot stabilitet, trykkfordeling og behov for posisjonering. En myk pute kan gi utmerket komfort men vil ikke alltid gi ønsket stabilitet og kan være for høy for å gi ønsket setehøyde.


Sitteputer for posisjonering er kanskje ikke like „komfortable“ som et produkt som ikke tilbyr posisjonering. For å maksimere sittetoleransen er det nødvendig å optimalisere trykkfordelingen, redusere shear kreftene, maksimere stabilitet og posisjonering, samtidig som komforten ivaretas.

Funksjonelle nøkkelegenskaper ved sitteputer

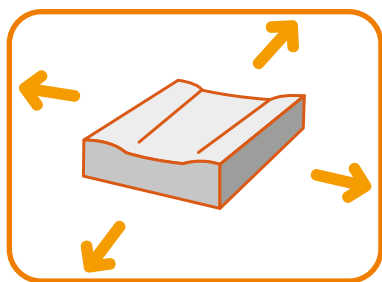


Størrelsesspekter

Vi tilbyr et stort utvalg størrelser slik at du alltid finner en pute som passer. Se hver enkelt sittepute for tilgjengelige størrelser.

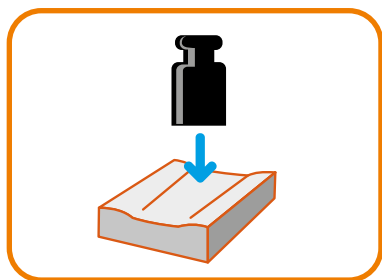

Brukervekt

En person som veier mer enn sitteputens oppgitte maksimale brukervekt har økt risiko for å sitte gjennom sitteputen. Vær spesielt oppmerksom ved bruk av de største størrelsene, da han/hun kan overskride de beskrevne begrensningene.

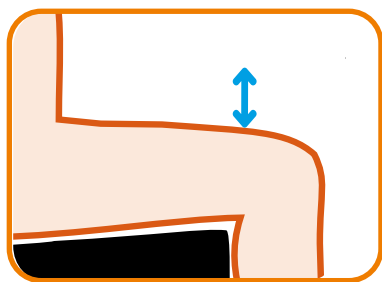

Sittehøyde

Personens sittehøyde i rullestolen er avgjørende for å sikre hans/hennes tilgang til omgivelsene. Sitteputen er et viktig element i denne sammenhengen.


Aktive personer ber ofte om en lav sittehøyde og en sittepute som er lett i vekt. Likevel er det viktig for denne gruppen å opprettholde trykkfordeling og stabilitet. Det finnes sitteputer som er godt egnet for aktive personer, for eksempel Easy Fluid Cushion og Xtreme Active Cushion.

Sitteputer som er egnet for høyrisikopersoner ved at de tillater sitteknutene å synke dypere ned i det trykksårforebyggende materialet, for eksempel høyere sitteputer som Jay J2 Cushion DC og Jay Balance Cushion DC, kan også leveres med en dropsete-løsning for at sittehøyden ikke skal bli for høy.



Sitteputens vekt


Sitteputens vekt er relevant i forbindelse med aktive rullestolbrukere, for enklere transport til og fra kjøretøy samt for framdrift i rullestolen.

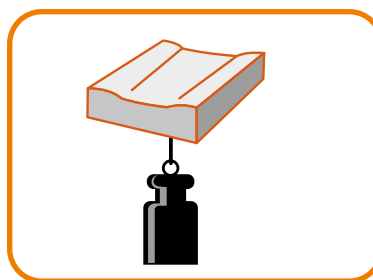

Sitteputens levetid

Garantiperiode på 2 år. Levetiden på produktet avhenger i stor grad av hvordan, hvor mye og under hvilke forhold produktet blir benyttet.

- Sitteputer produsert i formstøpt skum er mykere og mer komfortable for brukeren, og gir i tillegg økt holdbarhet i forhold til skumputer som ikke er formstøpt.

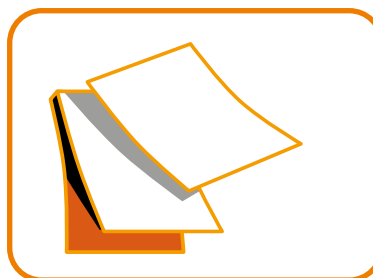


Å måle en JAY sittepute

Du måler JAY sitteputer for bruk i rullestol på følgende måte:

Fig A: Basic Cushion, J2 Cushion, J2 Cushion DC, GS Cushion

Fig B: Easy Visco Cushion, Easy Fluid Cushion, Balance Cushion, Xtreme Active Cushion

Vennligst observer at sitteputens mål er oppgitt med sitteputetrekket på.

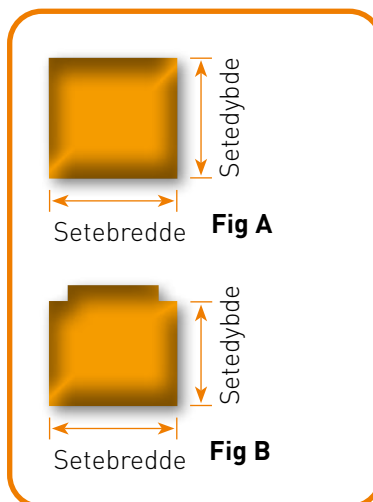

RYGGER



J3 SC - Grunn kontur

Fast rygg med grunn kontur på 5 cm. For Personer som normalt ikke har behov for sideveis støtte av overkroppen. Se side 34.



J3 MC - Medium kontur

Fast rygg med medium kontur på 8 cm. For Personer som har behov for noe sidestøtte. Se side 35.



J3 DC - Dyp kontur

For rygg med dyp kontur på 15 cm. For Personer som trenger sidestøtte. Se side 36.



J3 MDC - Medium dyp kontur

Fast rygg med dyp kontur på 15 cm og midtplasserte sidestøtter. For Personer som trenger litt til mye sideveis stabilitet i overkroppen. Se side 37.



XMDC - Medium ekstra dyp kontur XDC - Ekstra dyp kontur

To modeller med ekstra dyp kontur på 18 cm. For Personer med ekstra store behov for dyp, omsluttende kontur for sideveis stabilitet og posisjonering. Se side 38.



J3 Carbon

Fast, enda lettere rygg med aktiv kontur på 5 cm. For aktive rullestolPersoner med behov for lav til moderat støtte. Se side 38.



J3 Fit 2U Back

Fast modulær, justerbar og tilpasningsvennlig rygg. Spesielt utviklet for barn og unges behov. Se side 42



J3 Rygger

Ved moderate til store behov for posisjonering, tilbyr JAY J3 ryggene det bredeste utvalget av størrelser, konturer og tilbehør for å sikre optimal og individuelt tilpasset ryggstøtte

J3 tar utgangspunkt i antropometriske målinger og er tilgjengelig i bredder fra 31cm til 51cm, ulike ryggghøyder og fem konturer. De ulike konturene møter behovene til ulike personer, fra de aktive i manuell rullestol til de passive i elektriske rullestoler.

- Egnet for moderat til stor grad av posisjonering
- Mulighet for individuell tilpassing
- Gir presis passform til han/hun (størrelse, kontur, høyde, justeringsintervall, tilbehør)
- Lett i vekt (ideelt for aktive personer i manuelle rullestoler men også egnet for personer i elektriske rullestoler)
- Enkel montering med justerbare to- eller fire punktfester

Faste rygger har mange fordeler.

- Stabil støtte av bekkenet og overkroppen gir riktig sittestilling, konstant over tid
- Bedre trykkfordeling med en jevnere støtteflate og bedre posisjonering
- Økt komfort gjennom optimal sittestilling
- Energiøkonomisering ved at mindre krefter benyttes til å sitte
- Økt funksjon og selvstendighet, når mindre krefter benyttes til å sitte



Flere av Jay ryggene er testet og godkjent for bruk i bil i henhold til relevante ISO standarder

J3 rygger - Konturer og høyder

Personers behov for stabilisering avgjør valg av modell

Fem konturer

Velg kontur basert på behov for støtte, samt plassering av støtte.

J3 SC Grunn kontur

Moderat sidestøtte

5 cm



J3 MC Medium kontur

Medium sidestøtte

8 cm



J3 DC Dyp kontur

Full sidestøtte

15 cm



J3 MDC Medium dyp kontur

Full sidestøtte

15 cm



Høyder

J3 rygger tilbys i høyder fra 17 - 61 cm.



XMDC – Medium ekstra dyp kontur
XDC – Ekstra dyp kontur
 Full sidestøtte


18 cm



Fire nivåer av støtte

Det kan velges mellom 4 ulike nivåer av støtte avhengig av funksjonelle behov og nivå av kroppsstabilitet.

Shoulder Height	(SH)	530 - 610 mm
Upper Thoracic Height	(UT)	420 - 500 mm
Mid Thoracic Height	(MT)	300 - 380 mm
Lower Thoracic Height	(LT)	170 - 240 mm

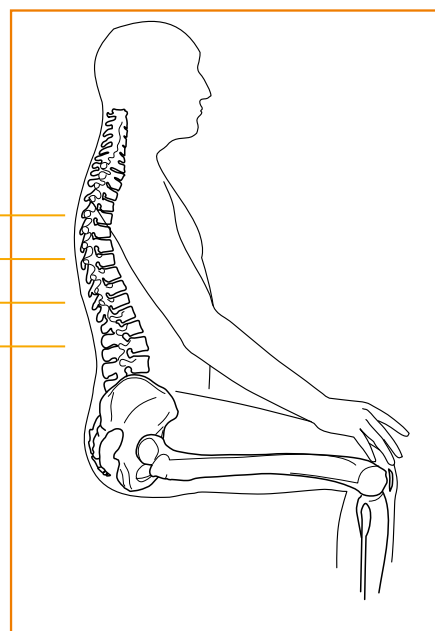

Tre ulike rygghøyder

To enkeltpersoner kan begge trenge støtte på samme sted på ryggraden; imidlertid, på grunn av forskjeller i høyde, trenger de fortsatt rygger med ulik høyde.



Short (S)

Medium (M)

Tall (T)

J3 SC - Grunn kontur



Produktegenskaper:

- Fast rygg med grunn kontur på 5 cm
- Leveres i flere høyder og bredder, fra de lave aktiv-ryggene og helt opp til skulderhøyde
- De laveste ryggene har komfortbøy øverst for bedre bevegelsesfrihet ved stillingendring (for eksempel enklere påkledning).
- Kan ved behov kompletteres med ulike kiler for å tilpasse ryggen til ulike brukeres individuelle kurvatur
- Hodestøtte og faste eller utsvingbare sidestøtter kan monteres ved behov, på rygger fra h. 42 cm

- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol

Klinisk bruk:

- Personer som normalt ikke har behov for sideveis støtte av overkroppen
- Personer med behov for presis posisjonering, oppnås ved bruk av sidestøtter



Fra ryggghøyde 42.

J3 SC - Grunn kontur						
Ryggbredde		31	36	41	46	51
Passer rullestolbredde		31-36	36-41	41-46	46-51	51-56
Brukers ryggbredde maks		28	33	38	43	48
Ryggghøyde	17	Varenummer	J3SCLTS36	J3SCLTS41	J3SCLTS46	
		HMS art.nr.		180892	180893	180894
	20	Varenummer	J3SCLTM31	J3SCLTM36	J3SCLTM41	J3SCLTM46
		HMS art.nr.	180891	151692	151693	151694
	24	Varenummer	J3SCLTT31	J3SCLTT36	J3SCLTT41	J3SCLTT46
		HMS art.nr.	180895	163436	163434	163435
	30	Varenummer	J3SCMTS31	J3SCMTS36	J3SCMTS41	J3SCMTS46
		HMS art.nr.	180901	160009	159087	180904
	34	Varenummer	J3SCMTM31	J3SCMTM36	J3SCMTM41	J3SCMTM46
		HMS art.nr.	180900	151695	151696	151697
	38	Varenummer	J3SCMTT31	J3SCMTT36	J3SCMTT41	J3SCMTT46
		HMS art.nr.	180906	180907	180908	180909
	42	Varenummer	J3SCUTS31	J3SCUTS36	J3SCUTS41	J3SCUTS46
		HMS art.nr.	180917	161662	168450	158453
	46	Varenummer		J3SCUTM36	J3SCUTM41	J3SCUTM46
		HMS art.nr.		151702	151703	151704
	50	Varenummer		J3SCUTT36	J3SCUTT41	J3SCUTT46
		HMS art.nr.		165449	165452	165455
	53	Varenummer		J3SCSHS36	J3SCSHS41	J3SCSHS46
		HMS art.nr.		180911	180912	180913
	57	Varenummer			J3SCSHM41	J3SCSHM46
		HMS art.nr.			151699	151700
	61	Varenummer				J3SCSHT46
		HMS art.nr.				180915



J3 MC - Medium kontur

Produktegenskaper:

- Fast rygg med medium kontur på 8 cm
- Leveres i flere høyder og bredder
- Kan ved behov kompletteres med ulike kiler for å tilpasse ryggen til ulike personers individuelle kurvatur
- Hodestøtte og faste eller utsvingbare sidestøtter kan monteres på ved behov, på rygger fra h. 42 cm
- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol

Klinisk bruk:

- Personer som har behov for noe sidestøtte
- Personer med behov for presis posisjonering, oppnås ved bruk av sidestøtter



Fra rygg høyde 42.

J3 MC - Medium kontur								
Ryggbredde			31	36	41	46	51	
Passer rullestolbredde			31-36	36-41	41-46	46-51	51-56	
Brukers ryggbredde maks			28	33	38	43	48	
Rygghøyde	30	Varenummer	J3MCMTS31	J3MCMTS36	J3MCMTS41	J3MCMTS46	J3MCMTS51	
		HMS art.nr.	180862	180863	180864	180865		
	34	Varenummer	J3MCMTM31	J3MCMTM36	J3MCMTM41	J3MCMTM46	J3MCMTM51	
		HMS art.nr.	180857	173806	180860	180861		
	38	Varenummer		J3MCMTT36	J3MCMTT41	J3MCMTT46	J3MCMTT51	
		HMS art.nr.		180866	180867	180868	180869	
	42	Varenummer	J3MCUTS31	J3MCUTS36	J3MCUTS41	J3MCUTS46	J3MCUTS51	
		HMS art.nr.	180882	180883	180884	180885	180886	
	46	Varenummer		J3MCUTM36	J3MCUTM41	J3MCUTM46	J3MCUTM51	
		HMS art.nr.		180879	180859	180880	180881	
	50	Varenummer		J3MCUTT36	J3MCUTT41	J3MCUTT46	J3MCUTT51	
		HMS art.nr.		180887	180888	180889	180890	
	53	Varenummer		J3MCSHS36	J3MCSHS41	J3MCSHS46	J3MCSHS51	
		HMS art.nr.		180873	180874	180875	180876	
	57	Varenummer			J3MCSTM41	J3MCSTM46	J3MCSTM51	
		HMS art.nr.			180870	180871	180872	
	61	Varenummer				J3MCSHT46	J3MCSHT51	
		HMS art.nr.				180877	180878	



J3 DC - Dyp kontur

Produktegenskaper:

- Fast rygg med 15 cm dyp kontur
- Faste, integrerte sidestøtter høyt plassert for stabilisering av overkroppen.
- Leveres i flere høyder og bredder
- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol
- Kan ved behov kompletteres med ulike kiler for å tilpasse ryggen til ulike brukeres individuelle kurvatur
- Hodestøtter tilgjengelig som tilbehør

Klinisk bruk:

- Personer som trenger sidestøtte
- Godt egnet til personer med behov for bedre plass i bekkenområdet
- Egnet for personer med behov for støtte høyt plassert



J3 DC - Dyp kontur						
Ryggbredde			36	41	46	51
Passer rullestolbredde			36-41	41-46	46-51	51-56
Brukers ryggbredde maks			33	38	43	48
Rygghøyde	42	Varenummer	J3DCUTS36	J3DCUTS41	J3DCUTS46	J3DCUTS51
		HMS art.nr.	158646	157323	164314	168444
	46	Varenummer	J3DCUTM36	J3DCUTM41	J3DCUTM46	J3DCUTM51
		HMS art.nr.	151688	151689	151690	151691
	50	Varenummer	J3DCUTT36	J3DCUTT41	J3DCUTT46	J3DCUTT51
		HMS art.nr.	168436	157476	164498	168446
	53	Varenummer	J3DCSHS36	J3DCSHS41	J3DCSHS46	J3DCSHS51
		HMS art.nr.	157878	164313	180796	180797
	57	Varenummer		J3DCSHM41	J3DCSHM46	J3DCSHM51
		HMS art.nr.		151685	151686	151687
	61	Varenummer			J3DCSHT46	J3DCSHT51
		HMS art.nr.			157475	180799





J3 MDC - Medium dyp kontur

Produktegenskaper:

- Fast rygg med 15 cm dyp kontur og midtplasserte sidestøtter
- Sidestøttene gir meget god stabilitet fra litt over bekkenkammen til midt på truncus
- Leveres i et stort utvalg høyder og bredder. Enkelte lave rygger tilbys med både standard og HD feste. Les om fester for J3 rygger på side 45
- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol

- Kan ved behov kompletteres med ulike kiler for å tilpasse ryggen til ulike brukeres individuelle kurvatur

- Faste eller utsvingbare sidestøtter samt hode støtte kan monteres på rygger fra h. 46 cm for ytterligere posisjonering og stabilitet

Klinisk bruk:

- Personer som trenger litt til mye sideveis stabilitet i overkroppen.



Fra rygg høyde 46.

J3 MDC - Medium dyp kontur						
Ryggbredde		31	36	41	46	51
Passer rullestolbredde		31-36	36-41	41-46	46-51	51-56
Brukers ryggbredde maks		28	33	38	43	48
Rygg høyde	20	Varenummer	J3MDCLTM36	J3MDCLTM41	J3MDCLTM46	
		HMS art.nr.				
	24	Varenummer	J3MDCLTT36	J3MDCLTT41	J3MDCLTT46	J3MDCLTT51
		HMS art.nr.				
	30	Varenummer	J3MDCMTS31	J3MDCMTS36	J3MDCMTS41	J3MDCMTS46
		HMS art.nr.		202235	202801	203470
	30*	Varenummer			J3MDCMTS46HD	J3MDCMTS51HD
		HMS art.nr.				
	34	Varenummer	J3MDCMTM31	J3MDCMTM36	J3MDCMTM41	J3MDCMTM46
		HMS art.nr.				
	38	Varenummer	J3MDCMTT31	J3MDCMTT36	J3MDCMTT41	J3MDCMTT46
		HMS art.nr.		202952	202943	202945
	38*	Varenummer			J3MDCMTT46HD	J3MDCMTT51HD
		HMS art.nr.				
	42	Varenummer	J3MDCUTS31	J3MDCUTS36	J3MDCUTS41	J3MDCUTS46
		HMS art.nr.				
	46	Varenummer		J3MDCUTM36	J3MDCUTM41	J3MDCUTM46
		HMS art.nr.		202950	202939	202940
	50	Varenummer		J3MDCUTT36	J3MDCUTT41	J3MDCUTT46
		HMS art.nr.				
	53	Varenummer		J3MDCSHS36	J3MDCSHS41	J3MDCSHS46
		HMS art.nr.		202949	202936	202937
	57	Varenummer			J3MDCSHM41	J3MDCSHM46
		HMS art.nr.				
	61	Varenummer			J3MDCSHT46	J3MDCSHT51
		HMS art.nr.				



* Inklusiv "heavy duty" feste

J3 XMDC - Medium ekstra dyp kontur

J3 XDC - Ekstra dyp kontur

Produktegenskaper:

- Faste rygger med 18 cm dyp kontur.
- Leveres i to modeller. Integrerte lavt plasserte sidestøtter gir optimal stabilisering fra rett over bekkenkammen til midt på trunkus, mens integrerte høyt plasserte sidestøtter sikrer optimal støtte for overkroppen og bedre plass i bekkenområdet
- Faste eller utsvingbare sidestøtter samt hode støtte kan monteres på rygger fra h. 46 cm for ytterlige posisjonering og stabilitet
- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol

Klinisk bruk:

- Personer med ekstra store behov for dyp, omsluttende kontur for sideveis stabilitet og posisjonering



Fra rygg høyde 46.

J3 XMDC - Medium ekstra dyp kontur						
Ryggbredde			41	46	51	
Passer rullestolbredde			41-46	46-51	51-56	
Brukers ryggbredde maks			38	43	48	
Rygg h øyde	38	Varenummer	J3XMDCMTT41	J3XMDCMTT46	J3XMDCMTT51	
		HMS art.nr.				
	46	Varenummer	J3XMDCUTM41	J3XMDCUTM46	J3XMDCUTM51	
		HMS art.nr.				

J3 XDC - Ekstra dyp kontur					
Ryggbredde		41	46	51	
Passer rullestolbredde		41-46	46-51	51-56	
Brukers ryggbredde maks		38	43	48	
Rygg høyde	46	Varenummer	J3XDCUTM41	J3XDCUTM46	J3XDCUTM51
		HMS art.nr.			
					



Opplev forskjellen

DEN ER SÅ LETT...

Karbon er lett i vekt og sterkt – derfor er dette det ideelle materialet for en rullestolrygg. Karbonryggen tilbyr samme styrke som aluminiumsryggen men er 60% lettere i vekt. J3 Carbon reduserer dermed totalvekten på rullestolen og dermed vekten en rullestolbruker må flytte hver eneste dag - dag etter dag.

... OG STILIG

J3 Carbon imponerer også med sin unike og flotte finish. Et aktivt og rent design kombinert med et elegant utseende – scenen er helt og holdent din.



J3 Carbon



Produktegenskaper:

- Aktiv kontur - dybden på 5 cm gir mild lateral støtte.
- Kan monteres på både fastramme og sammenleggbare rullestoler.
- Kan leveres med fast feste eller feste med hurtigutløser

Klinisk bruk:

- Aktive personer med behov for lav til moderat støtte av overkroppen.

J3 SC - Grunn kontur								
Ryggbredde			31	36	41	46		
Passer rullestolbredde			31-36	36-41	41-46	46-51		
Brukers ryggbredde maks			28	33	38	43		
Rygghøyde	17	Varenummer	J3BCFSCCLTS32xx	J3BCFSCCLTS36xx	J3BCFSCCLTS41xx	J3BCFSCCLTS46xx		
		HMS art.nr.			210910 [QR]			
	20	Varenummer						
		HMS art.nr.						
	24	Varenummer	J3BCFSCCLTT32xx	J3BCFSCCLTT36xx	J3BCFSCCLTT41xx	J3BCFSCCLTT46xx		
		HMS art.nr.						
	30	Varenummer	J3BCFSCCLMTS32xx	J3BCFSCCLMTS36xx	J3BCFSCCLMTS41xx	J3BCFSCCLMTS46xx		
		HMS art.nr.				207210 [QR]		
	34	Varenummer						
		HMS art.nr.						
	38	Varenummer	J3BCFSCCLMTT32xx	J3BCFSCCLMTT36xx	J3BCFSCCLMTT41xx	J3BCFSCCLMTT46xx		
		HMS art.nr.		207203 [QR]				
			XX= QR for hurtigkoblingsbrakett, FX for fast brakett					



J3 Carbon - støtten for å kunne være aktiv

J3 karbonryggen tilbyr god stabilitet og komfort. Ved hjelp av riktig støtte til bekkenet oppmuntres den optimale kurvaturen av ryggspylen. Dette danner grunnlag for stabilisering av overkroppen. Stabiliteten er viktig for å kunne være aktiv, redusere ryggsmarter og oppnå komfort.



→ Rask og enkel å fjerne

Med festet med hurtigutløser kan ryggen raskt og enkelt løsnes fra stolen – ideelt for sammenleggbare rullestoler.

Hvor er nøklene?

Du har nå et sted å lagre de tingene som så fort blir borte – i ryggtrekkforlengerens lomme. Tilbehørsbagen samler alle viktige eiendeler på ett sted i tillegg til å dekke åpningen mellom ryggen og sitteputen på en hensiktsmessig måte.

Nyttig og flott ryggtrekkforlenger med lomme



To ulike fester - for fastramme- og sammenleggbare rullestoler

J3 Carbon kan leveres med to ulike fester. Det faste festet tilbyr en svært lett løsning til Personer av fastrammerullestoler. Festet med hurtigutløser gjør det mulig å enkelt løsne ryggen fra rullestolen og er ideelt for sammenleggbare rullestoler. Begge festeløsningene er topunktsfester som er enkle å montere og som er justerbare i vinkel, dybde, høyde og bredde.

Feste med hurtigutløser

Ideelt for sammenleggbare rullestoler



Fast feste

Den letteste løsningen



JAY Fit 2U Back

Prøv, juster og omorganiser

Produktegenskaper:

- En modulært justerbar fast rygg , justeringer mulig ved levering og over tid.
- Spesielt utviklet i forhold til barn og unges behov.
- Fremmer barnets selvstendighet og komfort gjennom stabilitet i overkroppen og riktig posisjonering
- Sammenkoblende JAY byggeklosser og innebygd justering i ryggskallet gjør det enkelt å lage en personlig kontur som passer personens spesifikke behov

Produktegenskaper forts:

- Kollisjonstestet og godkjent for bruk som passasjer sete i bil
- Godt utvalg i tilbehør, som sidestøtter og hodestøtter for økt individuell tilpasning

Klinisk bruk:

- Barn og unge med varierende behov for støtte og posisjonering



JAY Fit 2U Back							
Ryggbredde		25	30	35	40	45	50
Rygghøyde	25	Varenummer					
		HMS art.nr.					
	30	Varenummer	JFIT2UB2530EU	JFIT2UB3030EU			
		HMS art.nr.					
	35	Varenummer	JFIT2UB2535EU	JFIT2UB3035EU	JFIT2UB3535EU		
		HMS art.nr.					
	40	Varenummer		JFIT2UB3040EU	JFIT2UB3540EU	JFIT2UB4040EU	
		HMS art.nr.					
	45	Varenummer		JFIT2UB3045EU	JFIT2UB3545EU	JFIT2UB4045EU	JFIT2UB4545EU
		HMS art.nr.					
	50	Varenummer			JFIT2UB3550EU	JFIT2UB4050EU	JFIT2UB4550EU
		HMS art.nr.					
55		Varenummer			JFIT2UB4055EU	JFIT2UB4555EU	JFIT2UB5055EU
		HMS art.nr.					



Universale braketter – justerbare og enkle å håndtere

Festene er enkle å håndtere og justere, for å gi ryggen optimal støtte.

- Festet er enkelt og raskt å montere og tilpasse
- FIT 2U Back benytter patenterte JAY J3-braketter, fire-punkts system (FP). Braketter er ferdig monterte på ryggskallet for enkel bruk og redusert tidsbruk
- Brakettene auto låses sikkert på plass når de bakre pinnene er satt i mottakerbrakettene.
- Hurtigutløser gjør det mulig å enkelt løsne ryggen fra rullestolen



Braketter

Innovativ teknologi i trekk

- Rullestolryggen har et innovativt dual-trekk system
- Det indre trekket i Dartex® beskytter skumdelene fra fukt og er enkelt å tørke av og gjøre rent
- Det ytterste trekket i stretch kan enkelt fjernes og vaskes
- Kan vaskes i vaskemaskinen på 50°C og tørker raskt

Tilbehør JAY Fit 2U Back

Få det til å passe – mer individualitet og tilpassing

Det er et utvalg muligheter og tilbehør tilgjengelig for å sikre at JAY Fit 2U Back får en optimal passform for den enkelte bruker.

- Sidestøtter
- Kinetic Balance posisjoneringsseler
- Whitmyer® hodestøtter



Kinetic Balance posisjoneringsseler

Et bredt utvalg av belter, vester og andre seler er tilgjengelig for å kunne jobbe med ytterligere posisjoneringsbehov.



Whitmyer® hodestøtter

Ved hjelp av en hodestøtte fra Whitmyer kan de mest grunnleggende til de mest komplekse behov møtes. Whitmyer hodestøtte gir støtte til hodet og nakken, dersom rullestolen skal tiltes bakover eller det er behov for ekstra støtte for å holde hodet i en oppreist posisjon.



Utsvingbare sidestøtter med rotasjon

De utsvingbare sidestøttene med rotasjon legger til et tredje justeringsplan, slik at sidestøttene kan vinkles for å matche personens ryggsgøyle. På denne måten kan det tilpasses for den mest komplekse skoliose.



JAY byggeklosser

De sammenkoblende byggeklossene kan kobles fra 25 mm til 65 mm tykke. Takket være leddet, som gir byggeklossene mulighet til å koble seg sammen, vil det være vanskelig å trekke de fra hverandre.

Fester J3 rygger

JAY J3 festene er enkle å montere, enkle å fjerne, kompakt i størrelse og justerbart i bredde, dybde, vinkel og høyde. Du kan til og med tilpasse ryggen med personen sittende i stolen.



Standard feste

Standardfestet er utviklet for å tilfredsstille behovene til den aktive rullestolbrukeren. Festet er standard på rygger med rygghøyde opp til 38 cm. Standardfestet er plasseseffektivt og lett i vekt. Festet er breddejusterbart 5cm, dybdejusterbart 3 cm og vinkeljusterbart $\pm 22^\circ$. Brukervekt 136 kg.



HD festet

HD festet er utviklet for de mer passive personene og er standard på rygger fra 42 cm til 61cm.

Dette festet er noe større og tilbyr økt stabilitet og brukervekt. Festet er breddejusterbart 5 cm, dybdejusterbart 3 cm og vinkeljusterbart $\pm 22^\circ$. Rygger i bredde 46 cm, med rygghøyde 30 til 38 cm og rygger i bredde 51 cm med rygghøyde 17 cm til 38 cm kan bestilles med HD festet for økt stabilitet. Brukervekt 225 kg.

Passer ulike ryggrør

- Den todelte klemmen er kompatibel med de fleste rullestoler på markedet
- Festet kan også monteres på utradisjonelle „ovale“ ryggrør
- Det er laget egne festebraketter for utvalgte spesialrygger, kontakt evt. vår kundeserviceavdeling for mer informasjon.



2,8 cm



2,5 cm



1,9 cm

Tilbehør J3 rygger

Hodestøtter

J3 rygger kan leveres med et bredt utvalg hodestøtter fra Whitmyer. I sortimentet finnes hodestøtter for alle behov. To eksempler er vist her.



Standard hodestøtte støtter hodet samt under bakhodet



Kontur hodestøtte for økt lateral støtte

Sidestøtter

Sidestøtter – faste eller utsvingbare. Tilgjengelig i seks størrelser - 10x10cm, 10x12cm, 10x15cm, 15x10cm, 15x12cm og 15x15cm



Vester og seler

Et bredt utvalg belter, vester og seler er tilgjengelig fra Kinetic Balance. Velg mellom ulike utforminger og størrelser.



Tilgjengelig i ulike størrelser



Ta kontakt for å få tilsendt katalog for posisjoneringsbelter fra Kinetic Balance, eller finn den på: www.SunriseMedical.no

Ryggtrekkforlenger med lomme



Dekker åpning mellom ryggen og sitteputen på en hensiktsmessig måte, i tillegg til å gi en lomme for oppbevaring av personlige eiendeler




Tilpassing J3 rygger

Allsidige tilpasningskomponenter

Tilpasningssett

- Komponentene kan benyttes til å forme ryggen for optimal postural stabilitet samt korrigere eller kompensere for milde til moderate feilstillinger
- Økt kontaktflate for maksimal trykkfordeling
- Gi avlastning på utsatte områder
- Komfort og sittetoleranse
- Enkle komponenter i ulike størrelser og fasonger, monteres med borrelås

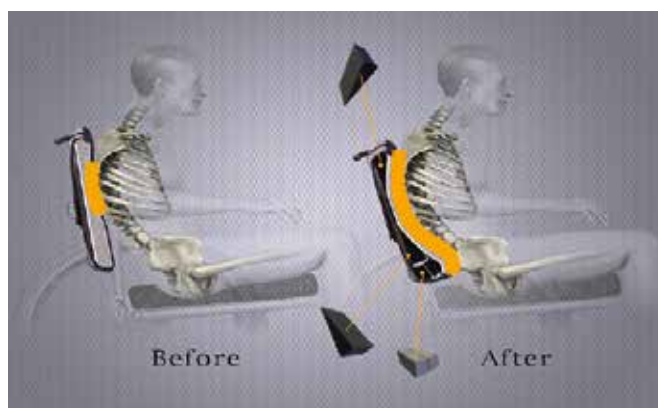

Se video av Jay ryggtilpassing på:
https://www.youtube.com/watch?v=hyECseTs_e4



Ulike sett er tilgjengelig, bestående av 7, 12 eller 36 deler



ARTIKKELOVERSIKT PUTER

Som standard leveres alle prisforhandlede sitteputer med ekstra trekk. Jay Basic har inkontinenstrekk som standard. Andre puter leveres med mikroklimatiske trekk. Alternative trekk finnes som tilbehør til alle puter med unntak av Jay Basic.

Jay Basic Cushion52

Hovedprodukt Jay Basic Cushion52

Jay Easy Visco Cushion52

Hovedprodukt Jay Easy Visco Cushion C (buet) .52

Hovedprodukt Jay Easy Visco Cushion F (flat)53

Trekk mikroklimatisk Jay Easy Visco C (std.)53

Trekk mikroklimatisk Jay Easy Visco F (std.)54

Trekk inkontinens Jay Easy Visco Cushion C.....55

Trekk inkontinens Jay Easy Visco F.....55

Innleggsplate Jay Easy Visco Cushion F.....56

Jay Easy Fluid Cushion56

Hovedprodukt Jay Easy Fluid Cushion C (buet)...56

Hovedprodukt Jay Easy Fluid Cushion F (flat)57

Trekk mikroklimatisk Jay Easy Fluid C (std.)57

Trekk mikroklimatisk Jay Easy Fluid Cushion F (std.)
57

Trekk inkontinens Jay Easy Fluid Cushion C.....58

Trekk inkontinens Jay Easy Fluid Cushion F58

Innleggsplate Jay Easy Fluid Cushion F58

Jay GS Cushion59

Hovedprodukt Jay GS Cushion59

Trekk mikroklimatisk JAY GS Cushion (std.).....59

Trekk mikroklimatisk JAY GS ekstra stort.....59

Trekk inkontinens Jay GS Cushion59

Oljepad Jay GS Cushion.....59

Posisjoneringskomponenter Jay GS Cushion59

Innleggsplate Jay GS.....60

Jay Balance Cushion Air D60

Hovedprodukt Jay Balance Cushion Air D.....60

Trekk mikroklimatisk Jay Balance Cushion Air D
(std.).....61

Trekk inkontinens Jay Balance Cushion Air D62

Trekk stretch Jay Balance Cushion Air D62

Trekk indre for posisjonering Jay Balance Cushion

Air D.....63

Posisjoneringssett Jay Balance Cushion Air D...64

Oppbyggingskloss Jay Balance Cushion Air D ...64

Innleggsplate Jay Balance Air D64

Jay Balance Cushion Air S64

Hovedprodukt Jay Balance Cushion Air S.....64

Trekk mikroklimatisk Jay Balance Cushion Air S
(std.).....65

Trekk inkontinens Jay Balance Cushion Air S66

Trekk stretch Jay Balance Cushion Air S.....67

Trekk indre for posisjonering Jay Balance Cushion

Air S68

Posisjoneringssett Jay Balance Cushion Air S....69

Oppbyggingskloss Jay Balance Cushion Air S ...69

Innleggsplate Jay Balance Cushion Air S.....69

Jay J2 Cushion69

Hovedprodukt Jay J2 Cushion69

Trekk mikroklimatisk Jay J2 Cushion(std.)69

Trekk inkontinens Jay J2 Cushion70

Oppbyggingskloss bekken Jay J2 Cushion.....70

Diverse posisjoneringskomponenter Jay J270

Bendeler Jay J2 Cushion70

Bensamlere Jay J2 Cushion70

Innleggsplate Jay J2 Cushion70



Jay Balance Cushion Fluid71

Hovedprodukt Jay Balance Cushion Fluid	71
Trekk mikroklimatisk Jay Balance Cushion Fluid (std.)	71
Trekk inkontinens Jay Balance Cushion Fluid	72
Trekk stretch Jay Balance Cushion Fluid	73
Trekk indre posisjonering Jay Balance Cushion Fluid	73
Posisjoneringssett Jay Balance Cushion Fluid ...	74
Oppbyggingskloss Jay Balance Cushion Fluid....	74
Innleggsplate Jay Balance Cushion Fluid.....	75

Jay J2 Cushion DC75

Hovedprodukt Jay J2 Cushion DC	75
Trekk mikroklimatisk Jay J2 Cushion DC (std.)	75
Trekk inkontinens Jay J2 Cushion DC	75
Posisjoneringskomponenter Jay J2 DC.....	76
Innleggsplate Jay J2 Cushion DC.....	76

Jay Xtreme Active Cushion S/L76

Hovedprodukt Jay Xtreme Active Cushion S.....	76
Hovedprodukt Jay Xtreme Active Cushion L.....	76
Trekk mikroklimatisk Xtreme Active Cushion S/L (std.)	77
Trekk inkontinens Jay Xtreme Active Cushion S/L	77
Trekk stretch Jay Xtreme Active Cushion S/L	78
Posisjoneringssett Xtreme Active S/L	78
Innleggsplate Xtreme Active S/L.....	78

Jay Balance Cushion DC Fluid.....79

Hovedprodukt Jay Balance DC Fluid Cushion.....	79
--	----

Jay Balance Cushion Cryo Fluid.....80

Hovedprodukt Jay Balance Cushion Cryo Fluid....	80
---	----

Jay J2 Cushion Plus.....80

Hovedprodukt Jay J2 Cushion Plus.....	80
---------------------------------------	----

Kompletterende produkter80

Bilpute	80
Lumbalpute	80
Jay Caliper.....	81

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Jay Basic Cushion

Høyde foran: 4,8 cm, Høyde bak: 4,7 cm

Base: skum

Trekk: inkontinens

Hovedprodukt Jay Basic Cushion		
171534	Basic b25 d25	JB2525
171535	Basic b25 d30	JB2530
171536	Basic b30 d25	JB3025
171537	Basic b30 d30	JB3030
171538	Basic b30 d35	JB3035
171539	Basic b35 d30	JB3530
171540	Basic b35 d35	JB3535
171541	Basic b35 d40	JB3540
171542	Basic b35 d45	JB3545
171504	Basic b38 d40	JB3840
171505	Basic b38 d42	JB3842
171506	Basic b38 d44	JB3844
171507	Basic b40 d40	JB4040
171508	Basic b40 d42	JB4042
171509	Basic b40 d44	JB4044
171510	Basic b40 d46	JB4046
171511	Basic b42 d40	JB4240
171512	Basic b42 d42	JB4242
171513	Basic b42 d44	JB4244
171514	Basic b42 d46	JB4246
171515	Basic b44 d40	JB4440
171516	Basic b44 d42	JB4442
171517	Basic b44 d44	JB4444
171518	Basic b44 d46	JB4446
171519	Basic b46 d42	JB4642
171520	Basic b46 d44	JB4644
171521	Basic b46 d46	JB4646
171522	Basic b46 d50	JB4650
171523	Basic b48 d42	JB4842
171524	Basic b48 d44	JB4844
171525	Basic b48 d46	JB4846
171526	Basic b48 d50	JB4850
171527	Basic b50 d42	JB5042
171528	Basic b50 d46	JB5046
171529	Basic b50 d50	JB5050
171530	Basic b52 d42	JB5242
171531	Basic b52 d46	JB5246
171532	Basic b52 d48	JB5248

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------

171533	Basic b52 d50	JB5250
217650	Basic b56 d46	JB5646
247601	Basic b56 d50	JB5650
247602	Basic b60 d46	JB6046
247603	Basic b60 d50	JB6050



Jay Easy Visco Cushion

Høyde foran: 6,3 cm Høyde bak: 6 cm

Base: skum

Trekk: mikroklimatisk Art.nr: CJEVbsdCM (buet)/
CJEVbsdFM (flat)

Hovedprodukt Jay Easy Visco Cushion C (buet)		
247611	Easy Visco C (buet) b25 d25	KJEV2525CM
247612	Easy Visco C (buet) b25 d30	KJEV2530CM
247613	Easy Visco C (buet) b30 d25	KJEV3025CM
247614	Easy Visco C (buet) b30 d30	KJEV3030CM
247615	Easy Visco C (buet) b30 d35	KJEV3035CM
247616	Easy Visco C (buet) b35 d30	KJEV3530CM
247617	Easy Visco C (buet) b35 d35	KJEV3535CM
247618	Easy Visco C (buet) b35 d40	KJEV3540CM
247619	Easy Visco C (buet) b35 d42	KJEV3542CM
247620	Easy Visco C (buet) b35 d45	KJEV3545CM
247621	Easy Visco C (buet) b38 d40	KJEV3840CM
247622	Easy Visco C (buet) b38 d42	KJEV3842CM
247623	Easy Visco C (buet) b38 d44	KJEV3844CM
247624	Easy Visco C (buet) b38 d48	KJEV3848CM
247625	Easy Visco C (buet) b38 d50	KJEV3850CM
247626	Easy Visco C (buet) b40 d40	KJEV4040CM
247627	Easy Visco C (buet) b40 d42	KJEV4042CM
247628	Easy Visco C (buet) b40 d44	KJEV4044CM
247629	Easy Visco C (buet) b40 d46	KJEV4046CM
247630	Easy Visco C (buet) b40 d48	KJEV4048CM
247631	Easy Visco C (buet) b40 d50	KJEV4050CM
247632	Easy Visco C (buet) b42 d40	KJEV4240CM
247633	Easy Visco C (buet) b42 d42	KJEV4242CM
247634	Easy Visco C (buet) b42 d44	KJEV4244CM
247635	Easy Visco C (buet) b42 d46	KJEV4246CM
247636	Easy Visco C (buet) b42 d48	KJEV4248CM
247637	Easy Visco C (buet) b42 d50	KJEV4250CM
247638	Easy Visco C (buet) b44 d40	KJEV4440CM
247639	Easy Visco C (buet) b44 d42	KJEV4442CM
247640	Easy Visco C (buet) b44 d44	KJEV4444CM
247641	Easy Visco C (buet) b44 d46	KJEV4446CM
247642	Easy Visco C (buet) b44 d48	KJEV4448CM

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247643	Easy Visco C (buet) b44 d50	KJEV4450CM
247644	Easy Visco C (buet) b46 d42	KJEV4642CM
247645	Easy Visco C (buet) b46 d44	KJEV4644CM
247646	Easy Visco C (buet) b46 d46	KJEV4646CM
247647	Easy Visco C (buet) b46 d48	KJEV4648CM
247648	Easy Visco C (buet) b46 d50	KJEV4650CM
247649	Easy Visco C (buet) b48 d42	KJEV4842CM
247650	Easy Visco C (buet) b48 d44	KJEV4844CM
247651	Easy Visco C (buet) b48 d46	KJEV4846CM
247652	Easy Visco C (buet) b48 d50	KJEV4850CM
247653	Easy Visco C (buet) b48 d52	KJEV4852CM
247654	Easy Visco C (buet) b50 d42	KJEV5042CM
247655	Easy Visco C (buet) b50 d46	KJEV5046CM
247656	Easy Visco C (buet) b50 d50	KJEV5050CM
247657	Easy Visco C (buet) b50 d52	KJEV5052CM
247658	Easy Visco C (buet) b56 d46	KJEV5646CM
247659	Easy Visco C (buet) b56 d50	KJEV5650CM
247660	Easy Visco C (buet) b56 d56	KJEV5656CM
247661	Easy Visco C (buet) b60 d46	KJEV6046CM
247662	Easy Visco C (buet) b60 d50	KJEV6050CM
247663	Easy Visco C (buet) b60 d56	KJEV6056CM
247664	Easy Visco C (buet) b60 d60	KJEV6060CM

Hovedprodukt Jay Easy Visco Cushion F (flat)

247665	Easy Visco F (flat) b25 d25	KJEV2525FM
247666	Easy Visco F (flat) b25 d30	KJEV2530FM
247667	Easy Visco F (flat) b30 d25	KJEV3025FM
247668	Easy Visco F (flat) b30 d30	KJEV3030FM
247669	Easy Visco F (flat) b30 d35	KJEV3035FM
247670	Easy Visco F (flat) b35 d30	KJEV3530FM
247671	Easy Visco F (flat) b35 d35	KJEV3535FM
247672	Easy Visco F (flat) b35 d40	KJEV3540FM
247673	Easy Visco F (flat) b35 d45	KJEV3545FM
247674	Easy Visco F (flat) b38 d40	KJEV3840FM
247675	Easy Visco F (flat) b38 d42	KJEV3842FM
247676	Easy Visco F (flat) b38 d44	KJEV3844FM
247677	Easy Visco F (flat) b40 d40	KJEV4040FM
247678	Easy Visco F (flat) b40 d42	KJEV4042FM
247679	Easy Visco F (flat) b40 d44	KJEV4044FM
247680	Easy Visco F (flat) b40 d46	KJEV4046FM
247681	Easy Visco F (flat) b42 d40	KJEV4240FM
247682	Easy Visco F (flat) b42 d42	KJEV4242FM
247683	Easy Visco F (flat) b42 d44	KJEV4244FM
247684	Easy Visco F (flat) b42 d46	KJEV4246FM
247685	Easy Visco F (flat) b44 d40	KJEV4440FM
247686	Easy Visco F (flat) b44 d42	KJEV4442FM
247687	Easy Visco F (flat) b44 d44	KJEV4444FM
247688	Easy Visco F (flat) b44 d46	KJEV4446FM
247689	Easy Visco F (flat) b46 d42	KJEV4642FM
247690	Easy Visco F (flat) b46 d44	KJEV4644FM
247691	Easy Visco F (flat) b46 d46	KJEV4646FM
247692	Easy Visco F (flat) b46 d50	KJEV4650FM
247693	Easy Visco F (flat) b48 d42	KJEV4842FM
247694	Easy Visco F (flat) b48 d44	KJEV4844FM
247695	Easy Visco F (flat) b48 d46	KJEV4846FM
247696	Easy Visco F (flat) b48 d50	KJEV4850FM
247697	Easy Visco F (flat) b50 d42	KJEV5042FM
247698	Easy Visco F (flat) b50 d46	KJEV5046FM

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247699	Easy Visco F (flat) b50 d50	KJEV5050FM
247700	Easy Visco F (flat) b56 d46	KJEV5646FM
247701	Easy Visco F (flat) b56 d50	KJEV5650FM
247702	Easy Visco F (flat) b56 d56	KJEV5656FM
247703	Easy Visco F (flat) b60 d46	KJEV6046FM
247704	Easy Visco F (flat) b60 d50	KJEV6050FM
247705	Easy Visco F (flat) b60 d56	KJEV6056FM
247706	Easy Visco F (flat) b60 d60	KJEV6060FM

Tilbehør og deler Jay Easy Visco Cushion

Trekk mikroklimatisk Jay Easy Visco C (std.)

247897	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b25 d25	CJEV2525CM
247898	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b25 d30	CJEV2530CM
247899	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b30 d25	CJEV3025CM
247900	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b30 d30	CJEV3030CM
247901	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b30 d35	CJEV3035CM
247902	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b35 d30	CJEV3530CM
247903	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b35 d35	CJEV3535CM
247904	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b35 d40	CJEV3540CM
247905	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b35 d42	CJEV3542CM
247906	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b35 d45	CJEV3545CM
247907	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b38 d40	CJEV3840CM
247908	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b38 d42	CJEV3842CM
247909	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b38 d44	CJEV3844CM
247910	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b38 d48	CJEV3848CM
247911	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b38 d50	CJEV3850CM
247912	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b40 d40	CJEV4040CM
247913	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b40 d42	CJEV4042CM
247914	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b40 d44	CJEV4044CM
247915	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b40 d46	CJEV4046CM
247916	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b40 d48	CJEV4048CM
247917	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b40 d50	CJEV4050CM
247918	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b42 d40	CJEV4240CM
247919	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b42 d42	CJEV4242CM
247920	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b42 d44	CJEV4244CM

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247921	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b42 d46	CJEV4246CM
247922	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b42 d48	CJEV4248CM
247923	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b42 d50	CJEV4250CM
247924	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b44 d40	CJEV4440CM
247925	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b44 d42	CJEV4442CM
247926	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b44 d44	CJEV4444CM
247927	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b44 d46	CJEV4446CM
247928	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b44 d48	CJEV4448CM
247929	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b44 d50	CJEV4450CM
247930	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b46 d42	CJEV4642CM
247931	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b46 d44	CJEV4644CM
247932	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b46 d46	CJEV4646CM
247933	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b46 d48	CJEV4648CM
247934	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b46 d50	CJEV4650CM
247935	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b48 d42	CJEV4842CM
247936	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b48 d44	CJEV4844CM
247937	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b48 d46	CJEV4846CM
247938	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b48 d50	CJEV4850CM
247939	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b48 d52	CJEV4852CM
247940	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b50 d42	CJEV5042CM
247941	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b50 d46	CJEV5046CM
247942	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b50 d50	CJEV5050CM
247943	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b50 d52	CJEV5052CM
247944	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b56 d46	CJEV5646CM
247945	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b56 d50	CJEV5650CM
247946	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b56 d56	CJEV5656CM
247947	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b60 d46	CJEV6046CM
247948	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b60 d50	CJEV6050CM
247949	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b60 d56	CJEV6056CM
247950	Trekk mikroklimatisk Easy Visco C b60 d60	CJEV6060CM

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
Trekk mikroklimatisk Jay Easy Visco F (std.)		
247951	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b25 d25	CJEV2525FM
247952	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b25 d30	CJEV2530FM
247953	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b30 d25	CJEV3025FM
247954	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b30 d30	CJEV3030FM
247955	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b30 d35	CJEV3035FM
247956	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b35 d30	CJEV3530FM
247957	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b35 d35	CJEV3535FM
247958	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b35 d40	CJEV3540FM
247959	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b35 d45	CJEV3545FM
247960	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b38 d40	CJEV3840FM
247961	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b38 d42	CJEV3842FM
247962	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b38 d44	CJEV3844FM
247963	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b40 d40	CJEV4040FM
247964	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b40 d42	CJEV4042FM
247965	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b40 d44	CJEV4044FM
247966	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b40 d46	CJEV4046FM
247967	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b42 d40	CJEV4240FM
247968	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b42 d42	CJEV4242FM
247969	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b42 d44	CJEV4244FM
247970	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b42 d46	CJEV4246FM
247971	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b44 d40	CJEV4440FM
247972	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b44 d42	CJEV4442FM
247973	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b44 d44	CJEV4444FM
247974	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b44 d46	CJEV4446FM
247975	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b46 d42	CJEV4642FM
247976	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b46 d44	CJEV4644FM
247977	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b46 d46	CJEV4646FM
247978	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b46 d50	CJEV4650FM

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247979	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b48 d42	CJEV4842FM
247980	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b48 d44	CJEV4844FM
247981	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b48 d46	CJEV4846FM
247982	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b48 d50	CJEV4850FM
247983	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b50 d42	CJEV5042FM
247984	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b50 d46	CJEV5046FM
247985	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b50 d50	CJEV5050FM
247986	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b56 d46	CJEV5646FM
247987	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b56 d50	CJEV5650FM
247988	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b56 d56	CJEV5656FM
247989	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b60 d46	CJEV6046FM
247990	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b60 d50	CJEV6050FM
247991	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b60 d56	CJEV6056FM
247992	Trekk mikroklimatisk Easy Visco F b60 d60	CJEV6060FM

Trekk inkontinens Jay Easy Visco Cushion C

172117	Trekk inko Easy Visco C b25 d25	CJEV2525C
172118	Trekk inko Easy Visco C b25 d30	CJEV2530C
172119	Trekk inko Easy Visco C b30 d25	CJEV3025C
172120	Trekk inko Easy Visco C b30 d30	CJEV3030C
172121	Trekk inko Easy Visco C b30 d35	CJEV3035C
172122	Trekk inko Easy Visco C b35 d30	CJEV3530C
172123	Trekk inko Easy Visco C b35 d35	CJEV3535C
078481	Trekk inko Easy Visco C b35 d40	CJEV3540C
172124	Trekk inko Easy Visco C b35 d42	CJEV3542C
078482	Trekk inko Easy Visco C b35 d45	CJEV3545C
078483	Trekk inko Easy Visco C b38 d40	CJEV3840C
078484	Trekk inko Easy Visco C b38 d42	CJEV3842C
078485	Trekk inko Easy Visco C b38 d44	CJEV3844C
172125	Trekk inko Easy Visco C b38 d48	CJEV3848C
172126	Trekk inko Easy Visco C b38 d50	CJEV3850C
078486	Trekk inko Easy Visco C b40 d40	CJEV4040C
078487	Trekk inko Easy Visco C b40 d42	CJEV4042C
078488	Trekk inko Easy Visco C b40 d44	CJEV4044C
172127	Trekk inko Easy Visco C b40 d46	CJEV4046C
172128	Trekk inko Easy Visco C b40 d48	CJEV4048C
172129	Trekk inko Easy Visco C b40 d50	CJEV4050C
078489	Trekk inko Easy Visco C b42 d40	CJEV4240C
078490	Trekk inko Easy Visco C b42 d42	CJEV4242C
078491	Trekk inko Easy Visco C b42 d44	CJEV4244C
078492	Trekk inko Easy Visco C b42 d46	CJEV4246C
172130	Trekk inko Easy Visco C b42 d48	CJEV4248C
172131	Trekk inko Easy Visco C b42 d50	CJEV4250C
078493	Trekk inko Easy Visco C b44 d40	CJEV4440C
078494	Trekk inko Easy Visco C b44 d42	CJEV4442C
078495	Trekk inko Easy Visco C b44 d44	CJEV4444C

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
078496	Trekk inko Easy Visco C b44 d46	CJEV4446C
172132	Trekk inko Easy Visco C b44 d48	CJEV4448C
172133	Trekk inko Easy Visco C b44 d50	CJEV4450C
078497	Trekk inko Easy Visco C b46 d42	CJEV4642C
078498	Trekk inko Easy Visco C b46 d44	CJEV4644C
078499	Trekk inko Easy Visco C b46 d46	CJEV4646C
172134	Trekk inko Easy Visco C b46 d48	CJEV4648C
078500	Trekk inko Easy Visco C b46 d50	CJEV4650C
078501	Trekk inko Easy Visco C b48 d42	CJEV4842C
078502	Trekk inko Easy Visco C b48 d44	CJEV4844C
078503	Trekk inko Easy Visco C b48 d46	CJEV4846C
078504	Trekk inko Easy Visco C b48 d50	CJEV4850C
172135	Trekk inko Easy Visco C b48 d52	CJEV4852C
078505	Trekk inko Easy Visco C b50 d42	CJEV5042C
078506	Trekk inko Easy Visco C b50 d46	CJEV5046C
078507	Trekk inko Easy Visco C b50 d50	CJEV5050C
172136	Trekk inko Easy Visco C b50 d52	CJEV5052C
172137	Trekk inko Easy Visco C b56 d46	CJEV5646C
172138	Trekk inko Easy Visco C b56 d50	CJEV5650C
172139	Trekk inko Easy Visco C b56 d56	CJEV5656C
172140	Trekk inko Easy Visco C b60 d46	CJEV6046C
172141	Trekk inko Easy Visco C b60 d50	CJEV6050C
172142	Trekk inko Easy Visco C b60 d56	CJEV6056C
172143	Trekk inko Easy Visco C b60 d60	CJEV6060C

Trekk inkontinens Jay Easy Visco F

172144	Trekk inko Easy Visco F b25 d25	CJEV2525F
172145	Trekk inko Easy Visco F b25 d30	CJEV2530F
172146	Trekk inko Easy Visco F b30 d25	CJEV3025F
172147	Trekk inko Easy Visco F b30 d30	CJEV3030F
172148	Trekk inko Easy Visco F b30 d35	CJEV3035F
172149	Trekk inko Easy Visco F b35 d30	CJEV3530F
172150	Trekk inko Easy Visco F b35 d35	CJEV3535F
172151	Trekk inko Easy Visco F b35 d40	CJEV3540F
172152	Trekk inko Easy Visco F b35 d45	CJEV3545F
172153	Trekk inko Easy Visco F b38 d40	CJEV3840F
172154	Trekk inko Easy Visco F b38 d42	CJEV3842F
172155	Trekk inko Easy Visco F b38 d44	CJEV3844F
172156	Trekk inko Easy Visco F b40 d40	CJEV4040F
172157	Trekk inko Easy Visco F b40 d42	CJEV4042F
172158	Trekk inko Easy Visco F b40 d44	CJEV4044F
172159	Trekk inko Easy Visco F b40 d46	CJEV4046F
172160	Trekk inko Easy Visco F b42 d40	CJEV4240F
172161	Trekk inko Easy Visco F b42 d42	CJEV4242F
172162	Trekk inko Easy Visco F b42 d44	CJEV4244F
172163	Trekk inko Easy Visco F b42 d46	CJEV4246F
172164	Trekk inko Easy Visco F b44 d40	CJEV4440F
172165	Trekk inko Easy Visco F b44 d42	CJEV4442F
172166	Trekk inko Easy Visco F b44 d44	CJEV4444F
172167	Trekk inko Easy Visco F b44 d46	CJEV4446F
172168	Trekk inko Easy Visco F b46 d42	CJEV4642F
172169	Trekk inko Easy Visco F b46 d44	CJEV4644F
172170	Trekk inko Easy Visco F b46 d46	CJEV4646F
172171	Trekk inko Easy Visco F b46 d50	CJEV4650F
172172	Trekk inko Easy Visco F b48 d42	CJEV4842F
172173	Trekk inko Easy Visco F b48 d44	CJEV4844F
172174	Trekk inko Easy Visco F b48 d46	CJEV4846F
172175	Trekk inko Easy Visco F b48 d50	CJEV4850F
172176	Trekk inko Easy Visco F b50 d42	CJEV5042F
172177	Trekk inko Easy Visco F b50 d46	CJEV5046F

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
172178	Trekk inko Easy Visco F b50 d50	CJEV5050F
172179	Trekk inko Easy Visco F b56 d46	CJEV5646F
172180	Trekk inko Easy Visco F b56 d50	CJEV5650F
172181	Trekk inko Easy Visco F b56 d56	CJEV5656F
172182	Trekk inko Easy Visco F b60 d46	CJEV6046F
172183	Trekk inko Easy Visco F b60 d50	CJEV6050F
172184	Trekk inko Easy Visco F b60 d56	CJEV6056F
172185	Trekk inko Easy Visco F b60 d60	CJEV6060F

Innleggsplate Jay Easy Visco Cushion F

247836	Innleggsplate Easy Visco F b25 d25	JSI2525
247837	Innleggsplate Easy Visco F b25 d30	JSI2530
247838	Innleggsplate Easy Visco F b30 d25	JSI3025
247839	Innleggsplate Easy Visco F b30 d30	JSI3030
247840	Innleggsplate Easy Visco F b30 d35	JSI3035
247841	Innleggsplate Easy Visco F b35 d30	JSI3530
247842	Innleggsplate Easy Visco F b35 d35	JSI3535
247843	Innleggsplate Easy Visco F b35 d40	JSI3540
247844	Innleggsplate Easy Visco F b35 d45	JSI3545
247845	Innleggsplate Easy Visco F b38 d40	JSI3840
247846	Innleggsplate Easy Visco F b38 d42	JSI3842
247847	Innleggsplate Easy Visco F b38 d44	JSI3844
247848	Innleggsplate Easy Visco F b40 d40	JSI4040
247849	Innleggsplate Easy Visco F b40 d42	JSI4042
247850	Innleggsplate Easy Visco F b40 d44	JSI4044
247851	Innleggsplate Easy Visco F b40 d46	JSI4046
247852	Innleggsplate Easy Visco F b42 d40	JSI4240
247853	Innleggsplate Easy Visco F b42 d42	JSI4242
247854	Innleggsplate Easy Visco F b42 d44	JSI4244
247855	Innleggsplate Easy Visco F b42 d46	JSI4246
247856	Innleggsplate Easy Visco F b44 d40	JSI4440
247857	Innleggsplate Easy Visco F b44 d42	JSI4442
247858	Innleggsplate Easy Visco F b44 d44	JSI4444
247859	Innleggsplate Easy Visco F b44 d46	JSI4446
247860	Innleggsplate Easy Visco F b46 d42	JSI4642
247861	Innleggsplate Easy Visco F b46 d44	JSI4644
247862	Innleggsplate Easy Visco F b46 d46	JSI4646
247863	Innleggsplate Easy Visco F b46 d50	JSI4650
247864	Innleggsplate Easy Visco F b48 d42	JSI4842
247865	Innleggsplate Easy Visco F b48 d44	JSI4844
247866	Innleggsplate Easy Visco F b48 d46	JSI4846
247867	Innleggsplate Easy Visco F b48 d50	JSI4850
247868	Innleggsplate Easy Visco F b50 d42	JSI5042
247869	Innleggsplate Easy Visco F b50 d56	JSI5046
247870	Innleggsplate Easy Visco F b50 d50	JSI5050
247871	Innleggsplate Easy Visco F b56 d46	JSI5646
247872	Innleggsplate Easy Visco F b56 d50	JSI5650
247873	Innleggsplate Easy Visco F b56 d56	JSI5656
247874	Innleggsplate Easy Visco F b60 d46	JSI6046
247875	Innleggsplate Easy Visco F b60 d50	JSI6050
247876	Innleggsplate Easy Visco F b60 d56	JSI6056
247877	Innleggsplate Easy Visco F b60 d60	JSI6060

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Jay Easy Fluid Cushion

Høyde foran: 6,3 cm Høyde bak: 6 cm

Base: skum/olje

Trekk: mikroklimatisk Art.nr: CJEsbsdCM (buet) / CJEsbsdFM (flat)

Hovedprodukt Jay Easy Fluid Cushion C (buet)

247707	Easy C (buet) b25 d25	KJE2525CM
247708	Easy C (buet) b25 d30	KJE2530CM
247709	Easy C (buet) b30 d25	KJE3025CM
247710	Easy C (buet) b30 d30	KJE3030CM
247711	Easy C (buet) b30 d35	KJE3035CM
247712	Easy C (buet) b35 d30	KJE3530CM
247713	Easy C (buet) b35 d35	KJE3535CM
247714	Easy C (buet) b35 d40	KJE3540CM
247715	Easy C (buet) b35 d45	KJE3545CM
247716	Easy C (buet) b38 d40	KJE3840CM
247717	Easy C (buet) b38 d42	KJE3842CM
247718	Easy C (buet) b38 d44	KJE3844CM
247719	Easy C (buet) b40 d40	KJE4040CM
247720	Easy C (buet) b40 d42	KJE4042CM
247721	Easy C (buet) b40 d44	KJE4044CM
247722	Easy C (buet) b40 d46	KJE4046CM
247723	Easy C (buet) b42 d40	KJE4240CM
247724	Easy C (buet) b42 d42	KJE4242CM
247725	Easy C (buet) b42 d44	KJE4244CM
247726	Easy C (buet) b42 d46	KJE4246CM
247727	Easy C (buet) b44 d40	KJE4440CM
247728	Easy C (buet) b44 d42	KJE4442CM
247729	Easy C (buet) b44 d44	KJE4444CM
247730	Easy C (buet) b44 d46	KJE4446CM
247731	Easy C (buet) b46 d42	KJE4642CM
247732	Easy C (buet) b46 d44	KJE4644CM
247733	Easy C (buet) b46 d46	KJE4646CM
247734	Easy C (buet) b46 d50	KJE4650CM
247735	Easy C (buet) b48 d42	KJE4842CM
247736	Easy C (buet) b48 d44	KJE4844CM
247737	Easy C (buet) b48 d46	KJE4846CM
247738	Easy C (buet) b48 d50	KJE4850CM
247739	Easy C (buet) b50 d42	KJE5042CM
247740	Easy C (buet) b50 d46	KJE5046CM
247741	Easy C (buet) b50 d50	KJE5050CM
247742	Easy C (buet) b56 d46	KJE5646CM
247743	Easy C (buet) b56 d50	KJE5650CM
247744	Easy C (buet) b56 d56	KJE5656CM
247745	Easy C (buet) b60 d46	KJE6046CM

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247746	Easy C (buet) b60 d50	KJE6050CM
247747	Easy C (buet) b60 d56	KJE6056CM
247748	Easy C (buet) b60 d60	KJE6060CM

Hovedprodukt Jay Easy Fluid Cushion F (flat)

247749	Easy F (flat) b25 d25	KJE2525FM
247750	Easy F (flat) b25 d30	KJE2530FM
247751	Easy F (flat) b30 d25	KJE3025FM
247752	Easy F (flat) b30 d30	KJE3030FM
247753	Easy F (flat) b30 d35	KJE3035FM
247754	Easy F (flat) b35 d30	KJE3530FM
247755	Easy F (flat) b35 d35	KJE3535FM
247756	Easy F (flat) b35 d40	KJE3540FM
247757	Easy F (flat) b35 d45	KJE3545FM
247758	Easy F (flat) b38 d40	KJE3840FM
247759	Easy F (flat) b38 d42	KJE3842FM
247760	Easy F (flat) b38 d44	KJE3844FM
247761	Easy F (flat) b40 d40	KJE4040FM
247762	Easy F (flat) b40 d42	KJE4042FM
247763	Easy F (flat) b40 d44	KJE4044FM
247764	Easy F (flat) b40 d46	KJE4046FM
247765	Easy F (flat) b42 d40	KJE4240FM
247766	Easy F (flat) b42 d42	KJE4242FM
247767	Easy F (flat) b42 d44	KJE4244FM
247768	Easy F (flat) b42 d46	KJE4246FM
247769	Easy F (flat) b44 d40	KJE4440FM
247770	Easy F (flat) b44 d42	KJE4442FM
247771	Easy F (flat) b44 d44	KJE4444FM
247772	Easy F (flat) b44 d46	KJE4446FM
247773	Easy F (flat) b46 d42	KJE4642FM
247774	Easy F (flat) b46 d44	KJE4644FM
247775	Easy F (flat) b46 d46	KJE4646FM
247776	Easy F (flat) b46 d50	KJE4650FM
247777	Easy F (flat) b48 d42	KJE4842FM
247778	Easy F (flat) b48 d44	KJE4844FM
247779	Easy F (flat) b48 d46	KJE4846FM
247780	Easy F (flat) b48 d50	KJE4850FM
247781	Easy F (flat) b50 d42	KJE5042FM
247782	Easy F (flat) b50 d46	KJE5046FM
247783	Easy F (flat) b50 d50	KJE5050FM
247784	Easy F (flat) b56 d46	KJE5646FM
247785	Easy F (flat) b56 d50	KJE5650FM
247786	Easy F (flat) b56 d56	KJE5656FM
247787	Easy F (flat) b60 d46	KJE6046FM
247788	Easy F (flat) b60 d50	KJE6050FM
247789	Easy F (flat) b60 d56	KJE6056FM
247790	Easy F (flat) b60 d60	KJE6060FM

Tilbehør og deler Jay Easy Fluid Cushion C

Trekk mikroklimatisk Jay Easy Fluid C (std.)

I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b25 d25	CJE2525CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b25 d30	CJE2530CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b30 d25	CJE3025CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b30 d30	CJE3030CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b30 d35	CJE3035CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b35 d30	CJE3530CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b35 d35	CJE3535CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b35 d40	CJE3540CM

I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b35 d45	CJE3545CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b38 d40	CJE3840CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b38 d42	CJE3842CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b38 d44	CJE3844CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b40 d40	CJE4040CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b40 d42	CJE4042CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b40 d44	CJE4044CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b40 d46	CJE4046CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b42 d40	CJE4240CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b42 d42	CJE4242CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b42 d44	CJE4244CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b42 d46	CJE4246CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b44 d40	CJE4440CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b44 d42	CJE4442CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b44 d44	CJE4444CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b44 d46	CJE4446CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b46 d42	CJE4642CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b46 d44	CJE4644CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b46 d46	CJE4646CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b46 d50	CJE4650CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b48 d42	CJE4842CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b48 d44	CJE4844CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b48 d46	CJE4846CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b48 d50	CJE4850CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b50 d42	CJE5042CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b50 d46	CJE5046CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b50 d50	CJE5050CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b56 d46	CJE5646CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b56 d56	CJE5656CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b56 d50	CJE5650CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b60 d46	CJE6046CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b60 d50	CJE6050CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b60 d56	CJE6056CM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy C b60 d60	CJE6060CM

Trekk mikroklimatisk Jay Easy Fluid Cushion F (std.)

I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b25 d25	CJE2525FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b25 d30	CJE2530FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b30 d25	CJE3025FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b30 d30	CJE3030FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b30 d35	CJE3035FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b35 d30	CJE3530FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b35 d35	CJE3535FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b35 d40	CJE3540FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b35 d45	CJE3545FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b38 d40	CJE3840FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b38 d42	CJE3842FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b38 d44	CJE3844FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b40 d40	CJE4040FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b40 d42	CJE4042FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b40 d44	CJE4044FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b40 d46	CJE4046FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b42 d40	CJE4240FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b42 d42	CJE4242FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b42 d44	CJE4244FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b42 d46	CJE4246FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b44 d40	CJE4440FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b44 d42	CJE4442FM

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b44 d44	CJE4444FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b44 d46	CJE4446FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b46 d42	CJE4642FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b46 d44	CJE4644FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b46 d46	CJE4646FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b46 d50	CJE4650FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b48 d42	CJE4842FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b48 d44	CJE4844FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b48 d46	CJE4846FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b48 d50	CJE4850FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b50 d42	CJE5042FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b50 d46	CJE5046FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b50 d50	CJE5050FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b56 d46	CJE5646FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b56 d50	CJE5650FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b56 d56	CJE5656FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b60 d46	CJE6046FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b60 d50	CJE6050FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b60 d56	CJE6056FM
I/A	Trekk mikroklimatisk Easy F b60 d60	CJE6060FM

Trekk inkontinens Jay Easy Fluid Cushion C

078454	Trekk inko Easy C b35 d40	CJE3540C
078455	Trekk inko Easy C b35 d45	CJE3545C
078456	Trekk inko Easy C b38 d40	CJE3840C
078457	Trekk inko Easy C b38 d42	CJE3842C
078458	Trekk inko Easy C b38 d44	CJE3844C
078459	Trekk inko Easy C b40 d40	CJE4040C
078460	Trekk inko Easy C b40 d42	CJE4042C
078461	Trekk inko Easy C b40 d44	CJE4044C
078462	Trekk inko Easy C b42 d40	CJE4240C
078463	Trekk inko Easy C b42 d42	CJE4242C
078464	Trekk inko Easy C b42 d44	CJE4244C
078465	Trekk inko Easy C b42 d46	CJE4246C
078466	Trekk inko Easy C b44 d40	CJE4440C
078467	Trekk inko Easy C b44 d42	CJE4442C
078468	Trekk inko Easy C b44 d44	CJE4444C
078469	Trekk inko Easy C b44 d46	CJE4446C
078470	Trekk inko Easy C b46 d42	CJE4642C
078471	Trekk inko Easy C b46 d44	CJE4644C
078472	Trekk inko Easy C b46 d46	CJE4646C
078473	Trekk inko Easy C b46 d50	CJE4650C
078474	Trekk inko Easy C b48 d42	CJE4842C
078475	Trekk inko Easy C b48 d44	CJE4844C
078477	Trekk inko Easy C b48 d50	CJE4850C
078478	Trekk inko Easy C b50 d42	CJE5042C
078479	Trekk inko Easy C b50 d46	CJE5046C
078480	Trekk inko Easy C b50 d50	CJE5050C
172059	Trekk inko Easy C b25 d25	CJE2525C
172060	Trekk inko Easy C b25 d30	CJE2530C
172061	Trekk inko Easy C b30 d25	CJE3025C
172062	Trekk inko Easy C b30 d30	CJE3030C
172063	Trekk inko Easy C b30 d35	CJE3035C
172064	Trekk inko Easy C b35 d30	CJE3530C
172065	Trekk inko Easy C b35 d35	CJE3535C
172066	Trekk inko Easy C b40 d46	CJE4046C
172067	Trekk inko Easy C b48 d46	CJE4846C
172068	Trekk inko Easy C b56 d46	CJE5646C
172069	Trekk inko Easy C b56 d50	CJE5656C
172070	Trekk inko Easy C b56 d56	CJE5650C

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
172071	Trekk inko Easy C b60 d46	CJE6046C
172072	Trekk inko Easy C b60 d50	CJE6050C
172073	Trekk inko Easy C b60 d56	CJE6056C
172074	Trekk inko Easy C b60 d60	CJE6060C

Trekk inkontinens Jay Easy Fluid Cushion F

172075	Trekk inko Easy F b25 d25	CJE2525F
172076	Trekk inko Easy F b25 d30	CJE2530F
172077	Trekk inko Easy F b30 d25	CJE3025F
172078	Trekk inko Easy F b30 d30	CJE3030F
172079	Trekk inko Easy F b30 d35	CJE3035F
172080	Trekk inko Easy F b35 d30	CJE3530F
172081	Trekk inko Easy F b35 d35	CJE3535F
172082	Trekk inko Easy F b35 d40	CJE3540F
172083	Trekk inko Easy F b35 d45	CJE3545F
172084	Trekk inko Easy F b38 d40	CJE3840F
172085	Trekk inko Easy F b38 d42	CJE3842F
172086	Trekk inko Easy F b38 d44	CJE3844F
172087	Trekk inko Easy F b40 d40	CJE4040F
172088	Trekk inko Easy F b40 d42	CJE4042F
172089	Trekk inko Easy F b40 d44	CJE4044F
172090	Trekk inko Easy F b40 d46	CJE4046F
172091	Trekk inko Easy F b42 d40	CJE4240F
172092	Trekk inko Easy F b42 d42	CJE4242F
172093	Trekk inko Easy F b42 d44	CJE4244F
172094	Trekk inko Easy F b42 d46	CJE4246F
172095	Trekk inko Easy F b44 d40	CJE4440F
172096	Trekk inko Easy F b44 d42	CJE4442F
172097	Trekk inko Easy F b44 d44	CJE4444F
172098	Trekk inko Easy F b44 d46	CJE4446F
172099	Trekk inko Easy F b46 d42	CJE4642F
172100	Trekk inko Easy F b46 d44	CJE4644F
172101	Trekk inko Easy F b46 d46	CJE4646F
172102	Trekk inko Easy F b46 d50	CJE4650F
172103	Trekk inko Easy F b48 d42	CJE4842F
172104	Trekk inko Easy F b48 d44	CJE4844F
172105	Trekk inko Easy F b48 d46	CJE4846F
172106	Trekk inko Easy F b48 d50	CJE4850F
172107	Trekk inko Easy F b50 d42	CJE5042F
172108	Trekk inko Easy F b50 d46	CJE5046F
172109	Trekk inko Easy F b50 d50	CJE5050F
172110	Trekk inko Easy F b56 d46	CJE5646F
172111	Trekk inko Easy F b56 d50	CJE5650F
172112	Trekk inko Easy F b56 d56	CJE5656F
172113	Trekk inko Easy F b60 d46	CJE6046F
172114	Trekk inko Easy F b60 d50	CJE6050F
172115	Trekk inko Easy F b60 d56	CJE6056F
172116	Trekk inko Easy F b60 d60	CJE6060F

Innleggsplate Jay Easy Fluid Cushion F

247836	Innleggsplate Easy F b25 d25	JSI2525
247837	Innleggsplate Easy F b25 d30	JSI2530
247838	Innleggsplate Easy F b30 d25	JSI3025
247839	Innleggsplate Easy F b30 d30	JSI3030
247840	Innleggsplate Easy F b30 d35	JSI3035
247841	Innleggsplate Easy F b35 d30	JSI3530
247842	Innleggsplate Easy F b35 d35	JSI3535
247843	Innleggsplate Easy F b35 d40	JSI3540

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247844	Innleggsplate Easy F b35 d45	JSI3545
247845	Innleggsplate Easy F b38 d40	JSI3840
247846	Innleggsplate Easy F b38 d42	JSI3842
247847	Innleggsplate Easy F b38 d44	JSI3844
247848	Innleggsplate Easy F b40 d40	JSI4040
247849	Innleggsplate Easy F b40 d42	JSI4042
247850	Innleggsplate Easy F b40 d44	JSI4044
247851	Innleggsplate Easy F b40 d46	JSI4046
247852	Innleggsplate Easy F b42 d40	JSI4240
247853	Innleggsplate Easy F b42 d42	JSI4242
247854	Innleggsplate Easy F b42 d44	JSI4244
247855	Innleggsplate Easy F b42 d46	JSI4246
247856	Innleggsplate Easy F b44 d40	JSI4440
247857	Innleggsplate Easy F b44 d42	JSI4442
247858	Innleggsplate Easy F b44 d44	JSI4444
247859	Innleggsplate Easy F b44 d46	JSI4446
247860	Innleggsplate Easy F b46 d42	JSI4642
247861	Innleggsplate Easy F b46 d44	JSI4644
247862	Innleggsplate Easy F b46 d46	JSI4646
247863	Innleggsplate Easy F b46 d50	JSI4650
247864	Innleggsplate Easy F b48 d42	JSI4842
247865	Innleggsplate Easy F b48 d44	JSI4844
247866	Innleggsplate Easy F b48 d46	JSI4846
247867	Innleggsplate Easy F b48 d50	JSI4850
247868	Innleggsplate Easy F b50 d42	JSI5042
247869	Innleggsplate Easy F b50 d56	JSI5046
247870	Innleggsplate Easy F b50 d50	JSI5050
247871	Innleggsplate Easy F b56 d46	JSI5646
247872	Innleggsplate Easy F b56 d50	JSI5650
247873	Innleggsplate Easy F b56 d56	JSI5656
247874	Innleggsplate Easy F b60 d46	JSI6046
247875	Innleggsplate Easy F b60 d50	JSI6050
247876	Innleggsplate Easy F b60 d56	JSI6056
247877	Innleggsplate Easy F b60 d60	JSI6060



Jay GS Cushion

Høyde foran: 6 cm Høyde bak: 5 cm (b25)

Høyde foran: 7 cm Høyde bak: 6 cm (b30-45)

Base: skum/olje

Trekk: mikroklimatisk

Hovedprodukt Jay GS Cushion		
247604	GS b25 d25	MJGSC2525PRUMEU
247605	GS b25 d33	JGSC2533PRUMEU
247606	GS b30 d30	MJGSC3030PRUMEU
247607	GS b30 d38	JGSC3038PRUMEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247608	GS b35 d43	JGSC3643PRUMEU
247609	GS b40 d48	JGSC4048PRUMEU
247610	GS b45 d50	JGSC4550PRUMEU

Tilbehør og deler Jay GS Cushion

Trekk mikroklimatisk JAY GS Cushion (std.)		
247886	Trekk mikroklimatisk GS b25 d25	MCJGS2525M
247887	Trekk mikroklimatisk GS b25 d33	CJGS2533M
247888	Trekk mikroklimatisk GS b30 d30	MCJGS3030M
247889	Trekk mikroklimatisk GS b30 d38	CJGS3038M
247890	Trekk mikroklimatisk GS b35 d43	CJGS3543M
247891	Trekk mikroklimatisk GS b40 d48	CJGS4048M
247892	Trekk mikroklimatisk GS b45 d50	CJGS4550M

Trekk mikroklimatisk JAY GS ekstra stort		
247804	Trekk mikroklimatisk GS b25 d25 ekstr. stort	MCJGS2525MO
247805	Trekk mikroklimatisk GS b25 d32 ekstr. stort	CJGS2532MO
247806	Trekk mikroklimatisk GS b30 d30 ekstr. stort	MCJGS3030MO
247807	Trekk mikroklimatisk GS b30 d38 ekstr. stort	CJGS3038MO
247808	Trekk mikroklimatisk GS b35 d43 ekstr. stort	CJGS3543MO
247809	Trekk mikroklimatisk GS b40 d48 ekstr. stort	CJGS4048MO
247810	Trekk mikroklimatisk GS b45 d50 ekstr. stort	CJGS4550MO

Trekk inkontinens Jay GS Cushion		
208523	Trekk inko GS b25 d25	MCJGS2525I
078448	Trekk inko GS b25 d33	CJGS2533I
208524	Trekk inko GS b30 d30	MCJGS3030I
078449	Trekk inko GS b30 d38	CJGS3038I
078450	Trekk inko GS b35 d43	CJGS3543I
247802	Trekk inko GS b40 d48	CJGS4048I
247803	Trekk inko GS b45 d50	CJGS4550I
146648	Trekk inko GS b25 d25 ekstra stort	MCJGS2525IO
146649	Trekk inko GS b25 d33 ekstra stort	CJGS2533IO
146650	Trekk inko GS b30 d30 ekstra stort	MCJGS3030IO
146651	Trekk inko GS b30 d38 ekstra stort	CJGS3038IO
146652	Trekk inko GS b35 d43 ekstra stort	CJGS3543IO
247795	Trekk inko GS b40 d48 ekstra stort	CJGS4048IO
247796	Trekk inko GS b45 d50 ekstra stort	CJGS4550IO

Oljepad Jay GS Cushion		
248598	Oljepad GS b25 ekstra trykkavlastn.	FPRJGS25
248599	Oljepad GS b30 ekstra trykkavlastn.	FPRJGS30
248600	Oljepad GS b35 ekstra trykkavlastn.	FPRJGS36
247811	Oljepad GS b40 ekstra trykkavlastn.	FPRJGS40
247812	Oljepad GS b45 ekstra trykkavlastn.	FPRJGS45

Posisjoneringskomponenter Jay GS Cushion		
078361	Oljepad J2 b12 l25 ekstra	F119
078362	Oljepad GS b10 l20 ekstra	JGSMFSP
078359	Bensamlere GS h7,5 par	JGSADDW7

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247797	Bensamlere GS/ J2 par	JGSCADDW
247798	Bensamlere GS h2,5 par	JGSADDW2
247799	Bensamlere GS h5 par	JGSADDW5
078360	Bendeler GS h7,5	JGSABDBUP3
247800	Bendeler GS h5	JGSABW2
247801	Bendeler GS/ J2 h5 junior	JGSJABDBUP2
078655	Gropoppbygger GS b36 d43 h1,25	JGSWBUP3643
078656	Gropoppbygger GS b30 d38 h1,25	JGSWBUP3038
247793	Gropoppbygger GS b40 d48 h1,25	JGSWBUP4048
247794	Gropoppbygger GS b45 d50 h1,25	JGSWBUP4550
078358	Bekkenstøtte GS h5 par	JGSHG2
078650	Lårstøtteforlenger GS b25 d33	JGSPISEXT2533
078651	Lårstøtteforlenger GS b30 d38	JGSPISEXT3038
078652	Lårstøtteforlenger GS b35 d43	JGSPISEXT3643
247791	Lårstøtteforlenger GS b40 d48	JGSPISEXT4048
247792	Lårstøtteforlenger GS b45 d50	JGSPISEXT4550

Innleggsplate Jay GS

247836	Innleggsplate GS b25 d25	JSI2525
247837	Innleggsplate GS b25 d30	JSI2530
247838	Innleggsplate GS b30 d25	JSI3025
247839	Innleggsplate GS b30 d30	JSI3030
247840	Innleggsplate GS b30 d35	JSI3035
247841	Innleggsplate GS b35 d30	JSI3530
247842	Innleggsplate GS b35 d35	JSI3535
247843	Innleggsplate GS b35 d40	JSI3540
247844	Innleggsplate GS b35 d45	JSI3545
247848	Innleggsplate GS b40 d40	JSI4040
247849	Innleggsplate GS b40 d42	JSI4042
247850	Innleggsplate GS b40 d44	JSI4044
247851	Innleggsplate GS b40 d46	JSI4046
247856	Innleggsplate GS b44 d40	JSI4440
247857	Innleggsplate GS b44 d42	JSI4442
247858	Innleggsplate GS b44 d44	JSI4444
247859	Innleggsplate GS b44 d46	JSI4446



Jay Balance Cushion Air D

Høyde 8,5cm

Base: skum/luft 2 kammer

Trekk: mikroklimatisk

Hovedprodukt Jay Balance Cushion Air D

208211	Balance Cushion Air D b34 d34	JBALC3434ADMEU
208212	Balance Cushion Air D b34 d36	JBALC3436ADMEU
208213	Balance Cushion Air D b34 d38	JBALC3438ADMEU
208214	Balance Cushion Air D b34 d40	JBALC3440ADMEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208215	Balance Cushion Air D b34 d42	JBALC3442ADMEU
208216	Balance Cushion Air D b36 d36	JBALC3636ADMEU
208217	Balance Cushion Air D b36 d38	JBALC3638ADMEU
208218	Balance Cushion Air D b36 d40	JBALC3640ADMEU
208219	Balance Cushion Air D b36 d42	JBALC3642ADMEU
208220	Balance Cushion Air D b36 d44	JBALC3644ADMEU
208221	Balance Cushion Air D b36 d46	JBALC3646ADMEU
208222	Balance Cushion Air D b38 d36	JBALC3836ADMEU
208223	Balance Cushion Air D b38 d38	JBALC3838ADMEU
208224	Balance Cushion Air D b38 d40	JBALC3840ADMEU
208225	Balance Cushion Air D b38 d42	JBALC3842ADMEU
208226	Balance Cushion Air D b38 d44	JBALC3844ADMEU
208227	Balance Cushion Air D b38 d46	JBALC3846ADMEU
208228	Balance Cushion Air D b40 d38	JBALC4038ADMEU
208229	Balance Cushion Air D b40 d40	JBALC4040ADMEU
208230	Balance Cushion Air D b40 d42	JBALC4042ADMEU
208231	Balance Cushion Air D b40 d44	JBALC4044ADMEU
208232	Balance Cushion Air D b40 d46	JBALC4046ADMEU
208233	Balance Cushion Air D b42 d38	JBALC4238ADMEU
208234	Balance Cushion Air D b42 d40	JBALC4240ADMEU
208235	Balance Cushion Air D b42 d42	JBALC4242ADMEU
208236	Balance Cushion Air D b42 d44	JBALC4244ADMEU
208237	Balance Cushion Air D b42 d46	JBALC4246ADMEU
208238	Balance Cushion Air D b42 d48	JBALC4248ADMEU
208239	Balance Cushion Air D b44 d38	JBALC4438ADMEU
208240	Balance Cushion Air D b44 d40	JBALC4440ADMEU
208241	Balance Cushion Air D b44 d42	JBALC4442ADMEU
208242	Balance Cushion Air D b44 d44	JBALC4444ADMEU
208243	Balance Cushion Air D b44 d46	JBALC4446ADMEU
208244	Balance Cushion Air D b44 d48	JBALC4448ADMEU
208245	Balance Cushion Air D b44 d50	JBALC4450ADMEU
208246	Balance Cushion Air D b46 d42	JBALC4642ADMEU
208247	Balance Cushion Air D b46 d44	JBALC4644ADMEU
208248	Balance Cushion Air D b46 d46	JBALC4646ADMEU
208249	Balance Cushion Air D b46 d48	JBALC4648ADMEU
208250	Balance Cushion Air D b46 d50	JBALC4650ADMEU
208251	Balance Cushion Air D b48 d42	JBALC4842ADMEU
208252	Balance Cushion Air D b48 d44	JBALC4844ADMEU
208253	Balance Cushion Air D b48 d46	JBALC4846ADMEU
208254	Balance Cushion Air D b48 d48	JBALC4848ADMEU
208255	Balance Cushion Air D b48 d50	JBALC4850ADMEU
208256	Balance Cushion Air D b50 d42	JBALC5042ADMEU
208257	Balance Cushion Air D b50 d44	JBALC5044ADMEU
208258	Balance Cushion Air D b50 d46	JBALC5046ADMEU
208259	Balance Cushion Air D b50 d48	JBALC5048ADMEU
208260	Balance Cushion Air D b50 d50	JBALC5050ADMEU
208261	Balance Cushion Air D b56 d46	JBALC5646ADMEU
208262	Balance Cushion Air D b56 d48	JBALC5648ADMEU
208263	Balance Cushion Air D b56 d50	JBALC5650ADMEU
208264	Balance Cushion Air D b56 d56	JBALC5656ADMEU
208265	Balance Cushion Air D b56 d60	JBALC5660ADMEU
208266	Balance Cushion Air D b60 d46	JBALC6046ADMEU
208267	Balance Cushion Air D b60 d48	JBALC6048ADMEU
208268	Balance Cushion Air D b60 d50	JBALC6050ADMEU
208269	Balance Cushion Air D b60 d56	JBALC6056ADMEU
208270	Balance Cushion Air D b60 d60	JBALC6060ADMEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
----------------	-------------	--------------------------

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
----------------	-------------	--------------------------

Tilbehør og deler Jay Balance Cushion Air D

Trekk mikroklimatisk Jay Balance Cushion Air D (std.)		
209086	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b34 d34	CJBALC3434MEU
209087	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b34 d36	CJBALC3436MEU
209088	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b34 d38	CJBALC3438MEU
209089	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b34 d40	CJBALC3440MEU
209090	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b34 d42	CJBALC3442MEU
209091	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b36 d36	CJBALC3636MEU
209092	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b36 d38	CJBALC3638MEU
209093	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b36 d40	CJBALC3640MEU
209094	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b36 d42	CJBALC3642MEU
209095	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b36 d44	CJBALC3644MEU
209096	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b36 d46	CJBALC3646MEU
209097	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b38 d36	CJBALC3836MEU
209098	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b38 d38	CJBALC3838MEU
209099	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b38 d40	CJBALC3840MEU
209100	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b38 d42	CJBALC3842MEU
209101	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b38 d44	CJBALC3844MEU
209102	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b38 d46	CJBALC3846MEU
209103	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b40 d38	CJBALC4038MEU
209104	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b40 d40	CJBALC4040MEU
209105	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b40 d42	CJBALC4042MEU
209106	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b40 d44	CJBALC4044MEU
209107	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b40 d46	CJBALC4046MEU
209108	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b42 d38	CJBALC4238MEU
209109	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b42 d40	CJBALC4240MEU
209110	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b42 d42	CJBALC4242MEU
209111	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b42 d44	CJBALC4244MEU
209112	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b42 d46	CJBALC4246MEU
209113	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b42 d48	CJBALC4248MEU

209114	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b44 d38	CJBALC4438MEU
209115	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b44 d40	CJBALC4440MEU
209116	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b44 d42	CJBALC4442MEU
209117	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b44 d44	CJBALC4444MEU
209118	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b44 d46	CJBALC4446MEU
209119	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b44 d48	CJBALC4448MEU
209120	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b44 d50	CJBALC4450MEU
209121	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b46 d42	CJBALC4642MEU
209122	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b46 d44	CJBALC4644MEU
209123	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b46 d46	CJBALC4646MEU
209124	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b46 d48	CJBALC4648MEU
209125	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b46 d50	CJBALC4650MEU
209126	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b48 d42	CJBALC4842MEU
209127	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b48 d44	CJBALC4844MEU
209128	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b48 d46	CJBALC4846MEU
209129	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b48 d48	CJBALC4848MEU
209130	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b48 d50	CJBALC4850MEU
209131	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b50 d42	CJBALC5042MEU
209132	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b50 d44	CJBALC5044MEU
209133	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b50 d46	CJBALC5046MEU
209134	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b50 d48	CJBALC5048MEU
209135	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b50 d50	CJBALC5050MEU
209136	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b56 d46	CJBALC5646MEU
209137	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b56 d48	CJBALC5648MEU
209138	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b56 d50	CJBALC5650MEU
209139	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b56 d56	CJBALC5656MEU
209140	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b56 d60	CJBALC5660MEU
209141	Trekk mikroklimatisk Balance Air D b60 d46	CJBALC6046MEU
209142	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air D b60 d48	CJBALC6048MEU
209143	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air D b60 d50	CJBALC6050MEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
209144	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air D b60 d56	CJBALC6056MEU
209145	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air D b60 d60	CJBALC6060MEU

Trekk inkontinens Jay Balance Cushion Air D

208391	Trekk inko Balance Air D b34 d34	CJBALC3434IEU
208392	Trekk inko Balance Air D b34 d36	CJBALC3436IEU
208393	Trekk inko Balance Air D b34 d38	CJBALC3438IEU
208394	Trekk inko Balance Air D b34 d40	CJBALC3440IEU
208395	Trekk inko Balance Air D b34 d42	CJBALC3442IEU
208396	Trekk inko Balance Air D b36 d36	CJBALC3636IEU
208397	Trekk inko Balance Air D b36 d38	CJBALC3638IEU
208398	Trekk inko Balance Air D b36 d40	CJBALC3640IEU
208399	Trekk inko Balance Air D b36 d42	CJBALC3642IEU
208400	Trekk inko Balance Air D b36 d44	CJBALC3644IEU
208401	Trekk inko Balance Air D b36 d46	CJBALC3646IEU
208402	Trekk inko Balance Air D b38 d36	CJBALC3836IEU
208403	Trekk inko Balance Air D b38 d38	CJBALC3838IEU
208404	Trekk inko Balance Air D b38 d40	CJBALC3840IEU
208405	Trekk inko Balance Air D b38 d42	CJBALC3842IEU
208406	Trekk inko Balance Air D b38 d44	CJBALC3844IEU
208407	Trekk inko Balance Air D b38 d46	CJBALC3846IEU
208408	Trekk inko Balance Air D b40 d38	CJBALC4038IEU
208409	Trekk inko Balance Air D b40 d40	CJBALC4040IEU
208410	Trekk inko Balance Air D b40 d42	CJBALC4042IEU
208411	Trekk inko Balance Air D b40 d44	CJBALC4044IEU
208412	Trekk inko Balance Air D b40 d46	CJBALC4046IEU
208413	Trekk inko Balance Air D b42 d38	CJBALC4238IEU
208414	Trekk inko Balance Air D b42 d40	CJBALC4240IEU
208415	Trekk inko Balance Air D b42 d42	CJBALC4242IEU
208416	Trekk inko Balance Air D b42 d44	CJBALC4244IEU
208417	Trekk inko Balance Air D b42 d46	CJBALC4246IEU
208418	Trekk inko Balance Air D b42 d48	CJBALC4248IEU
208419	Trekk inko Balance Air D b44 d38	CJBALC4438IEU
208420	Trekk inko Balance Air D b44 d40	CJBALC4440IEU
208421	Trekk inko Balance Air D b44 d42	CJBALC4442IEU
208422	Trekk inko Balance Air D b44 d44	CJBALC4444IEU
208423	Trekk inko Balance Air D b44 d46	CJBALC4446IEU
208424	Trekk inko Balance Air D b44 d48	CJBALC4448IEU
208425	Trekk inko Balance Air D b44 d50	CJBALC4450IEU
208426	Trekk inko Balance Air D b46 d42	CJBALC4642IEU
208427	Trekk inko Balance Air D b46 d44	CJBALC4644IEU
208428	Trekk inko Balance Air D b46 d46	CJBALC4646IEU
208429	Trekk inko Balance Air D b46 d48	CJBALC4648IEU
208430	Trekk inko Balance Air D b46 d50	CJBALC4650IEU
208431	Trekk inko Balance Air D b48 d42	CJBALC4842IEU
208432	Trekk inko Balance Air D b48 d44	CJBALC4844IEU
208433	Trekk inko Balance Air D b48 d46	CJBALC4846IEU
208434	Trekk inko Balance Air D b48 d48	CJBALC4848IEU
208435	Trekk inko Balance Air D b48 d50	CJBALC4850IEU
208436	Trekk inko Balance Air D b50 d42	CJBALC5042IEU
208437	Trekk inko Balance Air D b50 d44	CJBALC5044IEU
208438	Trekk inko Balance Air D b50 d46	CJBALC5046IEU
208439	Trekk inko Balance Air D b50 d48	CJBALC5048IEU
208440	Trekk inko Balance Air D b50 d50	CJBALC5050IEU
208441	Trekk inko Balance Air D b56 d46	CJBALC5646IEU
208442	Trekk inko Balance Air D b56 d48	CJBALC5648IEU
208443	Trekk inko Balance Air D b56 d50	CJBALC5650IEU
208444	Trekk inko Balance Air D b56 d56	CJBALC5656IEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208445	Trekk inko Balance Air D b56 d60	CJBALC5660IEU
208446	Trekk inko Balance Air D b60 d46	CJBALC6046IEU
208447	Trekk inko Balance Air D b60 d48	CJBALC6048IEU
208448	Trekk inko Balance Air D b60 d50	CJBALC6050IEU
208449	Trekk inko Balance Air D b60 d56	CJBALC6056IEU
208450	Trekk inko Balance Air D b60 d60	CJBALC6060IEU

Trekk stretch Jay Balance Cushion Air D

208331	Trekk stretch Balance Air D b34 d34	CJBALC3434SEU
208332	Trekk stretch Balance Air D b34 d36	CJBALC3436SEU
208333	Trekk stretch Balance Air D b34 d38	CJBALC3438SEU
208334	Trekk stretch Balance Air D b34 d40	CJBALC3440SEU
208335	Trekk stretch Balance Air D b34 d42	CJBALC3442SEU
208336	Trekk stretch Balance Air D b36 d36	CJBALC3636SEU
208337	Trekk stretch Balance Air D b36 d38	CJBALC3638SEU
208338	Trekk stretch Balance Air D b36 d40	CJBALC3640SEU
208339	Trekk stretch Balance Air D b36 d42	CJBALC3642SEU
208340	Trekk stretch Balance Air D b36 d44	CJBALC3644SEU
208341	Trekk stretch Balance Air D b36 d46	CJBALC3646SEU
208342	Trekk stretch Balance Air D b38 d36	CJBALC3836SEU
208343	Trekk stretch Balance Air D b38 d38	CJBALC3838SEU
208344	Trekk stretch Balance Air D b38 d40	CJBALC3840SEU
208345	Trekk stretch Balance Air D b38 d42	CJBALC3842SEU
208346	Trekk stretch Balance Air D b38 d44	CJBALC3844SEU
208347	Trekk stretch Balance Air D b38 d46	CJBALC3846SEU
208348	Trekk stretch Balance Air D b40 d38	CJBALC4038SEU
208349	Trekk stretch Balance Air D b40 d40	CJBALC4040SEU
208350	Trekk stretch Balance Air D b40 d42	CJBALC4042SEU
208351	Trekk stretch Balance Air D b40 d44	CJBALC4044SEU
208352	Trekk stretch Balance Air D b40 d46	CJBALC4046SEU
208353	Trekk stretch Balance Air D b42 d38	CJBALC4238SEU
208354	Trekk stretch Balance Air D b42 d40	CJBALC4240SEU
208355	Trekk stretch Balance Air D b42 d42	CJBALC4242SEU
208356	Trekk stretch Balance Air D b42 d44	CJBALC4244SEU
208357	Trekk stretch Balance Air D b42 d46	CJBALC4246SEU
208358	Trekk stretch Balance Air D b42 d48	CJBALC4248SEU
208359	Trekk stretch Balance Air D b44 d38	CJBALC4438SEU
208360	Trekk stretch Balance Air D b44 d40	CJBALC4440SEU
208361	Trekk stretch Balance Air D b44 d42	CJBALC4442SEU
208362	Trekk stretch Balance Air D b44 d44	CJBALC4444SEU
208363	Trekk stretch Balance Air D b44 d46	CJBALC4446SEU
208364	Trekk stretch Balance Air D b44 d48	CJBALC4448SEU
208365	Trekk stretch Balance Air D b44 d50	CJBALC4450SEU
208366	Trekk stretch Balance Air D b46 d42	CJBALC4642SEU
208367	Trekk stretch Balance Air D b46 d44	CJBALC4644SEU
208368	Trekk stretch Balance Air D b46 d46	CJBALC4646SEU
208369	Trekk stretch Balance Air D b46 d48	CJBALC4648SEU
208370	Trekk stretch Balance Air D b46 d50	CJBALC4650SEU
208371	Trekk stretch Balance Air D b48 d42	CJBALC4842SEU
208372	Trekk stretch Balance Air D b48 d44	CJBALC4844SEU
208373	Trekk stretch Balance Air D b48 d46	CJBALC4846SEU
208374	Trekk stretch Balance Air D b48 d48	CJBALC4848SEU
208375	Trekk stretch Balance Air D b48 d50	CJBALC4850SEU
208376	Trekk stretch Balance Air D b50 d42	CJBALC5042SEU
208377	Trekk stretch Balance Air D b50 d44	CJBALC5044SEU
208378	Trekk stretch Balance Air D b50 d46	CJBALC5046SEU
208379	Trekk stretch Balance Air D b50 d48	CJBALC5048SEU
208380	Trekk stretch Balance Air D b50 d50	CJBALC5050SEU
208381	Trekk stretch Balance Air D b56 d46	CJBALC5646SEU
208382	Trekk stretch Balance Air D b56 d48	CJBALC5648SEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208383	Trekk stretch Balance Air D b56 d50	CJBALC5650SEU
208384	Trekk stretch Balance Air D b56 d56	CJBALC5656SEU
208385	Trekk stretch Balance Air D b56 d60	CJBALC5660SEU
208386	Trekk stretch Balance Air D b60 d46	CJBALC6046SEU
208387	Trekk stretch Balance Air D b60 d48	CJBALC6048SEU
208388	Trekk stretch Balance Air D b60 d50	CJBALC6050SEU
208389	Trekk stretch Balance Air D b60 d56	CJBALC6056SEU
208390	Trekk stretch Balance Air D b60 d60	CJBALC6060SEU

Trekk indre for posisjonering Jay Balance Cushion Air D

208458	Trekk indre Balance Cushion Air D b34 d34 posisjonering	CIAPJBALC3434EU
208459	Trekk indre Balance Cushion Air D b34 d36 posisjonering	CIAPJBALC3436EU
208460	Trekk indre Balance Cushion Air D b34 d38 posisjonering	CIAPJBALC3438EU
208461	Trekk indre Balance Cushion Air D b34 d40 posisjonering	CIAPJBALC3440EU
208462	Trekk indre Balance Cushion Air D b34 d42 posisjonering	CIAPJBALC3442EU
208463	Trekk indre Balance Cushion Air D b36 d36 posisjonering	CIAPJBALC3636EU
208464	Trekk indre Balance Cushion Air D b36 d38 posisjonering	CIAPJBALC3638EU
208465	Trekk indre Balance Cushion Air D b36 d40 posisjonering	CIAPJBALC3640EU
208466	Trekk indre Balance Cushion Air D b36 d42 posisjonering	CIAPJBALC3642EU
208467	Trekk indre Balance Cushion Air D b36 d44 posisjonering	CIAPJBALC3644EU
208468	Trekk indre Balance Cushion Air D b36 d46 posisjonering	CIAPJBALC3646EU
208469	Trekk indre Balance Cushion Air D b38 d36 posisjonering	CIAPJBALC3836EU
208470	Trekk indre Balance Cushion Air D b38 d38 posisjonering	CIAPJBALC3838EU
208471	Trekk indre Balance Cushion Air D b38 d40 posisjonering	CIAPJBALC3840EU
208472	Trekk indre Balance Cushion Air D b38 d42 posisjonering	CIAPJBALC3842EU
208473	Trekk indre Balance Cushion Air D b38 d44 posisjonering	CIAPJBALC3844EU
208474	Trekk indre Balance Cushion Air D b38 d46 posisjonering	CIAPJBALC3846EU
208475	Trekk indre Balance Cushion Air D b40 d38 posisjonering	CIAPJBALC4038EU
208476	Trekk indre Balance Cushion Air D b40 d40 posisjonering	CIAPJBALC4040EU
208477	Trekk indre Balance Cushion Air D b40 d42 posisjonering	CIAPJBALC4042EU
208478	Trekk indre Balance Cushion Air D b40 d44 posisjonering	CIAPJBALC4044EU
208479	Trekk indre Balance Cushion Air D b40 d46 posisjonering	CIAPJBALC4046EU
208480	Trekk indre Balance Cushion Air D b42 d38 posisjonering	CIAPJBALC4238EU
208481	Trekk indre Balance Cushion Air D b42 d40 posisjonering	CIAPJBALC4240EU

208482	Trekk indre Balance Cushion Air D b42 d42 posisjonering	CIAPJBALC4242EU
208483	Trekk indre Balance Cushion Air D b42 d44 posisjonering	CIAPJBALC4244EU
208484	Trekk indre Balance Cushion Air D b42 d46 posisjonering	CIAPJBALC4246EU
208485	Trekk indre Balance Cushion Air D b42 d48 posisjonering	CIAPJBALC4248EU
208486	Trekk indre Balance Cushion Air D b44 d38 posisjonering	CIAPJBALC4438EU
208487	Trekk indre Balance Cushion Air D b44 d40 posisjonering	CIAPJBALC4440EU
208488	Trekk indre Balance Cushion Air D b44 d42 posisjonering	CIAPJBALC4442EU
208489	Trekk indre Balance Cushion Air D b44 d44 posisjonering	CIAPJBALC4444EU
208490	Trekk indre Balance Cushion Air D b44 d46 posisjonering	CIAPJBALC4446EU
208491	Trekk indre Balance Cushion Air D b44 d48 posisjonering	CIAPJBALC4448EU
208492	Trekk indre Balance Cushion Air D b44 d50 posisjonering	CIAPJBALC4450EU
208493	Trekk indre Balance Cushion Air D b46 d42 posisjonering	CIAPJBALC4642EU
208494	Trekk indre Balance Cushion Air D b46 d44 posisjonering	CIAPJBALC4644EU
208495	Trekk indre Balance Cushion Air D b46 d46 posisjonering	CIAPJBALC4646EU
208496	Trekk indre Balance Cushion Air D b46 d48 posisjonering	CIAPJBALC4648EU
208497	Trekk indre Balance Cushion Air D b46 d50 posisjonering	CIAPJBALC4650EU
208498	Trekk indre Balance Cushion Air D b48 d42 posisjonering	CIAPJBALC4842EU
208499	Trekk indre Balance Cushion Air D b48 d44 posisjonering	CIAPJBALC4844EU
208500	Trekk indre Balance Cushion Air D b48 d46 posisjonering	CIAPJBALC4846EU
208501	Trekk indre Balance Cushion Air D b48 d48 posisjonering	CIAPJBALC4848EU
208502	Trekk indre Balance Cushion Air D b48 d50 posisjonering	CIAPJBALC4850EU
208503	Trekk indre Balance Cushion Air D b50 d42 posisjonering	CIAPJBALC5042EU
208504	Trekk indre Balance Cushion Air D b50 d44 posisjonering	CIAPJBALC5044EU
208505	Trekk indre Balance Cushion Air D b50 d46 posisjonering	CIAPJBALC5046EU
208506	Trekk indre Balance Cushion Air D b50 d48 posisjonering	CIAPJBALC5048EU
208507	Trekk indre Balance Cushion Air D b50 d50 posisjonering	CIAPJBALC5050EU
208508	Trekk indre Balance Cushion Air D b56 d46 posisjonering	CIAPJBALC5646EU
208509	Trekk indre Balance Cushion Air D b56 d48 posisjonering	CIAPJBALC5648EU
208510	Trekk indre Balance Cushion Air D b56 d50 posisjonering	CIAPJBALC5650EU
208511	Trekk indre Balance Cushion Air D b56 d56 posisjonering	CIAPJBALC5656EU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208512	Trekk indre Balance Cushion Air D b56 d60 posisjonering	CIAPJBALC5660EU
208513	Trekk indre Balance Cushion Air D b60 d46 posisjonering	CIAPJBALC6046EU
208514	Trekk indre Balance Cushion Air D b60 d48 posisjonering	CIAPJBALC6048EU
208515	Trekk indre Balance Cushion Air D b60 d50 posisjonering	CIAPJBALC6050EU
208516	Trekk indre Balance Cushion Air D b60 d56 posisjonering	CIAPJBALC6056EU
208517	Trekk indre Balance Cushion Air D b60 d60 posisjonering	CIAPJBALC6060EU

Posisjoneringssett Jay Balance Cushion Air D

247878	Posisjoneringssett Balance Cushion Air D b34-40 5 deler h2,5	JBALCPKIT-S
208457	Posisjoneringssett Balance Cushion Air D b42-60 5 deler h2,5	JBALCPKIT

Oppbyggingskloss Jay Balance Cushion Air D

247883	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air D b34-38 hø	JBALCOP-ARH
247879	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air D b34-38 ve	JBALCOP-ALH
247884	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air D b40-48 hø	JBALCOP-BRH
247880	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air D b40-48 ve	JBALCOP-BLH
240441	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air D b50-60 hø	JBALCOP-CRH
247881	Oppbyggingskloss Balance Air D b50-60 ve	JBALCOP-CLH
247885	Oppbyggingskloss Balance Air D b50-60 ved bruk av 2stk hø	JBALCOP-DRH
247882	Oppbyggingskloss Balance Air D b50-60 ved bruk av 2stk ve	JBALCOP-DLH

Innleggsplate Jay Balance Air D

247842	Innleggspl. Balance Air D b35 d35	JSI3535
247843	Innleggspl. Balance Air D b35 d40	JSI3540
247844	Innleggspl. Balance Air D b35 d45	JSI3545
247845	Innleggspl. Balance Air D b38 d40	JSI3840
247846	Innleggspl. Balance Air D b38 d42	JSI3842
247847	Innleggspl. Balance Air D b38 d44	JSI3844
247848	Innleggspl. Balance Air D b40 d40	JSI4040
247849	Innleggspl. Balance Air D b40 d42	JSI4042
247850	Innleggspl. Balance Air D b40 d44	JSI4044
247851	Innleggspl. Balance Air D b40 d46	JSI4046
247852	Innleggspl. Balance Air D b42 d40	JSI4240
247853	Innleggspl. Balance Air D b42 d42	JSI4242
247854	Innleggspl. Balance Air D b42 d44	JSI4244
247855	Innleggspl. Balance Air D b42 d46	JSI4246
247856	Innleggspl. Balance Air D b44 d40	JSI4440
247857	Innleggspl. Balance Air D b44 d42	JSI4442
247858	Innleggspl. Balance Air D b44 d44	JSI4444
247859	Innleggspl. Balance Air D b44 d46	JSI4446
247860	Innleggspl. Balance Air D b46 d42	JSI4642

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247861	Innleggspl. Balance Air D b46 d44	JSI4644
247862	Innleggspl. Balance Air D b46 d46	JSI4646
247863	Innleggspl. Balance Air D b46 d50	JSI4650
247864	Innleggspl. Balance Air D b48 d42	JSI4842
247865	Innleggspl. Balance Air D b48 d44	JSI4844
247866	Innleggspl. Balance Air D b48 d46	JSI4846
247867	Innleggspl. Balance Air D b48 d50	JSI4850
247868	Innleggspl. Balance Air D b50 d42	JSI5042
247869	Innleggspl. Balance Air D b50 d56	JSI5046
247870	Innleggspl. Balance Air D b50 d50	JSI5050
247871	Innleggspl. Balance Air D b56 d46	JSI5646
247872	Innleggspl. Balance Air D b56 d50	JSI5650
247873	Innleggspl. Balance Air D b56 d56	JSI5656
247874	Innleggspl. Balance Air D b60 d46	JSI6046
247875	Innleggspl. Balance Air D b60 d50	JSI6050
247876	Innleggspl. Balance Air D b60 d56	JSI6056
247877	Innleggspl. Balance Air D b60 d60	JSI6060



HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------

Jay Balance Cushion Air S

Høyde 8,5 cm

Base: skum/luft

Trekk: mikroklimatisk

Hovedprodukt Jay Balance Cushion Air S

208151	Balance Cushion Air S b34 d34	JBALC3434ASMEU
208152	Balance Cushion Air S b34 d36	JBALC3436ASMEU
208153	Balance Cushion Air S b34 d38	JBALC3438ASMEU
208154	Balance Cushion Air S b34 d40	JBALC3440ASMEU
208155	Balance Cushion Air S b34 d42	JBALC3442ASMEU
208156	Balance Cushion Air S b36 d36	JBALC3636ASMEU
208157	Balance Cushion Air S b36 d38	JBALC3638ASMEU
208158	Balance Cushion Air S b36 d40	JBALC3640ASMEU
208159	Balance Cushion Air S b36 d42	JBALC3642ASMEU
208160	Balance Cushion Air S b36 d44	JBALC3644ASMEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208161	Balance Cushion Air S b36 d46	JBALC3646ASMEU
208162	Balance Cushion Air S b38 d36	JBALC3836ASMEU
208163	Balance Cushion Air S b38 d38	JBALC3838ASMEU
208164	Balance Cushion Air S b38 d40	JBALC3840ASMEU
208165	Balance Cushion Air S b38 d42	JBALC3842ASMEU
208166	Balance Cushion Air S b38 d44	JBALC3844ASMEU
208167	Balance Cushion Air S b38 d46	JBALC3846ASMEU
208168	Balance Cushion Air S b40 d38	JBALC4038ASMEU
208169	Balance Cushion Air S b40 d40	JBALC4040ASMEU
208170	Balance Cushion Air S b40 d42	JBALC4042ASMEU
208171	Balance Cushion Air S b40 d44	JBALC4044ASMEU
208172	Balance Cushion Air S b40 d46	JBALC4046ASMEU
208173	Balance Cushion Air S b42 d38	JBALC4238ASMEU
208174	Balance Cushion Air S b42 d40	JBALC4240ASMEU
208175	Balance Cushion Air S b42 d42	JBALC4242ASMEU
208176	Balance Cushion Air S b42 d44	JBALC4244ASMEU
208177	Balance Cushion Air S b42 d46	JBALC4246ASMEU
208178	Balance Cushion Air S b42 d48	JBALC4248ASMEU
208179	Balance Cushion Air S b44 d38	JBALC4438ASMEU
208180	Balance Cushion Air S b44 d40	JBALC4440ASMEU
208181	Balance Cushion Air S b44 d42	JBALC4442ASMEU
208182	Balance Cushion Air S b44 d44	JBALC4444ASMEU
208183	Balance Cushion Air S b44 d46	JBALC4446ASMEU
208184	Balance Cushion Air S b44 d48	JBALC4448ASMEU
208185	Balance Cushion Air S b44 d50	JBALC4450ASMEU
208186	Balance Cushion Air S b46 d42	JBALC4642ASMEU
208187	Balance Cushion Air S b46 d44	JBALC4644ASMEU
208188	Balance Cushion Air S b46 d46	JBALC4646ASMEU
208189	Balance Cushion Air S b46 d48	JBALC4648ASMEU
208190	Balance Cushion Air S b46 d50	JBALC4650ASMEU
208191	Balance Cushion Air S b48 d42	JBALC4842ASMEU
208192	Balance Cushion Air S b48 d44	JBALC4844ASMEU
208193	Balance Cushion Air S b48 d46	JBALC4846ASMEU
208194	Balance Cushion Air S b48 d48	JBALC4848ASMEU
208195	Balance Cushion Air S b48 d50	JBALC4850ASMEU
208196	Balance Cushion Air S b50 d42	JBALC5042ASMEU
208197	Balance Cushion Air S b50 d44	JBALC5044ASMEU
208198	Balance Cushion Air S b50 d46	JBALC5046ASMEU
208199	Balance Cushion Air S b50 d48	JBALC5048ASMEU
208200	Balance Cushion Air S b50 d50	JBALC5050ASMEU
208201	Balance Cushion Air S b56 d46	JBALC5646ASMEU
208202	Balance Cushion Air S b56 d48	JBALC5648ASMEU
208203	Balance Cushion Air S b56 d50	JBALC5650ASMEU
208204	Balance Cushion Air S b56 d56	JBALC5656ASMEU
208205	Balance Cushion Air S b56 d60	JBALC5660ASMEU
208206	Balance Cushion Air S b60 d46	JBALC6046ASMEU
208207	Balance Cushion Air S b60 d48	JBALC6048ASMEU
208208	Balance Cushion Air S b60 d50	JBALC6050ASMEU
208209	Balance Cushion Air S b60 d56	JBALC6056ASMEU
208210	Balance Cushion Air S b60 d60	JBALC6060ASMEU

Tilbehør og deler Jay Balance Cushion Air S

Trekk mikroklimatisk Jay Balance Cushion Air S (std.)

209086	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b34 d34	CJBALC3434MEU
209087	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b34 d36	CJBALC3436MEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
209088	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b34 d38	CJBALC3438MEU
209089	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b34 d40	CJBALC3440MEU
209090	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b34 d42	CJBALC3442MEU
209091	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b36 d36	CJBALC3636MEU
209092	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b36 d38	CJBALC3638MEU
209093	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b36 d40	CJBALC3640MEU
209094	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b36 d42	CJBALC3642MEU
209095	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b36 d44	CJBALC3644MEU
209096	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b36 d46	CJBALC3646MEU
209097	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b38 d36	CJBALC3836MEU
209098	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b38 d38	CJBALC3838MEU
209099	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b38 d40	CJBALC3840MEU
209100	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b38 d42	CJBALC3842MEU
209101	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b38 d44	CJBALC3844MEU
209102	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b38 d46	CJBALC3846MEU
209103	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b40 d38	CJBALC4038MEU
209104	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b40 d40	CJBALC4040MEU
209105	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b40 d42	CJBALC4042MEU
209106	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b40 d44	CJBALC4044MEU
209107	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b40 d46	CJBALC4046MEU
209108	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b42 d38	CJBALC4238MEU
209109	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b42 d40	CJBALC4240MEU
209110	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b42 d42	CJBALC4242MEU
209111	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b42 d44	CJBALC4244MEU
209112	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b42 d46	CJBALC4246MEU
209113	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b42 d48	CJBALC4248MEU
209114	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b44 d38	CJBALC4438MEU
209115	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b44 d40	CJBALC4440MEU
209116	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b44 d42	CJBALC4442MEU
209117	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b44 d44	CJBALC4444MEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
209118	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b44 d46	CJBALC4446MEU
209119	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b44 d48	CJBALC4448MEU
209120	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b44 d50	CJBALC4450MEU
209121	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b46 d42	CJBALC4642MEU
209122	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b46 d44	CJBALC4644MEU
209123	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b46 d46	CJBALC4646MEU
209124	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b46 d48	CJBALC4648MEU
209125	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b46 d50	CJBALC4650MEU
209126	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b48 d42	CJBALC4842MEU
209127	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b48 d44	CJBALC4844MEU
209128	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b48 d46	CJBALC4846MEU
209129	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b48 d48	CJBALC4848MEU
209130	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b48 d50	CJBALC4850MEU
209131	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b50 d42	CJBALC5042MEU
209132	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b50 d44	CJBALC5044MEU
209133	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b50 d46	CJBALC5046MEU
209134	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b50 d48	CJBALC5048MEU
209135	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b50 d50	CJBALC5050MEU
209136	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b56 d46	CJBALC5646MEU
209137	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b56 d48	CJBALC5648MEU
209138	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b56 d50	CJBALC5650MEU
209139	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b56 d56	CJBALC5656MEU
209140	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b56 d60	CJBALC5660MEU
209141	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b60 d46	CJBALC6046MEU
209142	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b60 d48	CJBALC6048MEU
209143	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b60 d50	CJBALC6050MEU
209144	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b60 d56	CJBALC6056MEU
209145	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Air S b60 d60	CJBALC6060MEU

Trekk inkontinens Jay Balance Cushion Air S

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208391	Trekk inko Balance Cushion Air S b34 d34	CJBALC3434IEU
208392	Trekk inko Balance Cushion Air S b34 d36	CJBALC3436IEU
208393	Trekk inko Balance Cushion Air S b34 d38	CJBALC3438IEU
208394	Trekk inko Balance Cushion Air S b34 d40	CJBALC3440IEU
208395	Trekk inko Balance Cushion Air S b34 d42	CJBALC3442IEU
208396	Trekk inko Balance Cushion Air S b36 d36	CJBALC3636IEU
208397	Trekk inko Balance Cushion Air S b36 d38	CJBALC3638IEU
208398	Trekk inko Balance Cushion Air S b36 d40	CJBALC3640IEU
208399	Trekk inko Balance Cushion Air S b36 d42	CJBALC3642IEU
208400	Trekk inko Balance Cushion Air S b36 d44	CJBALC3644IEU
208401	Trekk inko Balance Cushion Air S b36 d46	CJBALC3646IEU
208402	Trekk inko Balance Cushion Air S b38 d36	CJBALC3836IEU
208403	Trekk inko Balance Cushion Air S b38 d38	CJBALC3838IEU
208404	Trekk inko Balance Cushion Air S b38 d40	CJBALC3840IEU
208405	Trekk inko Balance Cushion Air S b38 d42	CJBALC3842IEU
208406	Trekk inko Balance Cushion Air S b38 d44	CJBALC3844IEU
208407	Trekk inko Balance Cushion Air S b38 d46	CJBALC3846IEU
208408	Trekk inko Balance Cushion Air S b40 d38	CJBALC4038IEU
208409	Trekk inko Balance Cushion Air S b40 d40	CJBALC4040IEU
208410	Trekk inko Balance Cushion Air S b40 d42	CJBALC4042IEU
208411	Trekk inko Balance Cushion Air S b40 d44	CJBALC4044IEU
208412	Trekk inko Balance Cushion Air S b40 d46	CJBALC4046IEU
208413	Trekk inko Balance Cushion Air S b42 d38	CJBALC4238IEU
208414	Trekk inko Balance Cushion Air S b42 d40	CJBALC4240IEU
208415	Trekk inko Balance Cushion Air S b42 d42	CJBALC4242IEU
208416	Trekk inko Balance Cushion Air S b42 d44	CJBALC4244IEU
208417	Trekk inko Balance Cushion Air S b42 d46	CJBALC4246IEU
208418	Trekk inko Balance Cushion Air S b42 d48	CJBALC4248IEU
208419	Trekk inko Balance Cushion Air S b44 d38	CJBALC4438IEU
208420	Trekk inko Balance Cushion Air S b44 d40	CJBALC4440IEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208421	Trekk inko Balance Cushion Air S b44 d42	CJBALC4442IEU
208422	Trekk inko Balance Cushion Air S b44 d44	CJBALC4444IEU
208423	Trekk inko Balance Cushion Air S b44 d46	CJBALC4446IEU
208424	Trekk inko Balance Cushion Air S b44 d48	CJBALC4448IEU
208425	Trekk inko Balance Cushion Air S b44 d50	CJBALC4450IEU
208426	Trekk inko Balance Cushion Air S b46 d42	CJBALC4642IEU
208427	Trekk inko Balance Cushion Air S b46 d44	CJBALC4644IEU
208428	Trekk inko Balance Cushion Air S b46 d46	CJBALC4646IEU
208429	Trekk inko Balance Cushion Air S b46 d48	CJBALC4648IEU
208430	Trekk inko Balance Cushion Air S b46 d50	CJBALC4650IEU
208431	Trekk inko Balance Cushion Air S b48 d42	CJBALC4842IEU
208432	Trekk inko Balance Cushion Air S b48 d44	CJBALC4844IEU
208433	Trekk inko Balance Cushion Air S b48 d46	CJBALC4846IEU
208434	Trekk inko Balance Cushion Air S b48 d48	CJBALC4848IEU
208435	Trekk inko Balance Cushion Air S b48 d50	CJBALC4850IEU
208436	Trekk inko Balance Cushion Air S b50 d42	CJBALC5042IEU
208437	Trekk inko Balance Cushion Air S b50 d44	CJBALC5044IEU
208438	Trekk inko Balance Cushion Air S b50 d46	CJBALC5046IEU
208439	Trekk inko Balance Cushion Air S b50 d48	CJBALC5048IEU
208440	Trekk inko Balance Cushion Air S b50 d50	CJBALC5050IEU
208441	Trekk inko Balance Cushion Air S b56 d46	CJBALC5646IEU
208442	Trekk inko Balance Cushion Air S b56 d48	CJBALC5648IEU
208443	Trekk inko Balance Cushion Air S b56 d50	CJBALC5650IEU
208444	Trekk inko Balance Cushion Air S b56 d56	CJBALC5656IEU
208445	Trekk inko Balance Cushion Air S b56 d60	CJBALC5660IEU
208446	Trekk inko Balance Cushion Air S b60 d46	CJBALC6046IEU
208447	Trekk inko Balance Cushion Air S b60 d48	CJBALC6048IEU
208448	Trekk inko Balance Cushion Air S b60 d50	CJBALC6050IEU
208449	Trekk inko Balance Cushion Air S b60 d56	CJBALC6056IEU
208450	Trekk inko Balance Cushion Air S b60 d60	CJBALC6060IEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
Trekk stretch Jay Balance Cushion Air S		
208331	Trekk stretch Balance Air S b34 d34	CJBALC3434SEU
208332	Trekk stretch Balance Air S b34 d36	CJBALC3436SEU
208333	Trekk stretch Balance Air S b34 d38	CJBALC3438SEU
208334	Trekk stretch Balance Air S b34 d40	CJBALC3440SEU
208335	Trekk stretch Balance Air S b34 d42	CJBALC3442SEU
208336	Trekk stretch Balance Air S b36 d36	CJBALC3636SEU
208337	Trekk stretch Balance Air S b36 d38	CJBALC3638SEU
208338	Trekk stretch Balance Air S b36 d40	CJBALC3640SEU
208339	Trekk stretch Balance Air S b36 d42	CJBALC3642SEU
208340	Trekk stretch Balance Air S b36 d44	CJBALC3644SEU
208341	Trekk stretch Balance Air S b36 d46	CJBALC3646SEU
208342	Trekk stretch Balance Air S b38 d36	CJBALC3836SEU
208343	Trekk stretch Balance Air S b38 d38	CJBALC3838SEU
208344	Trekk stretch Balance Air S b38 d40	CJBALC3840SEU
208345	Trekk stretch Balance Air S b38 d42	CJBALC3842SEU
208346	Trekk stretch Balance Air S b38 d44	CJBALC3844SEU
208347	Trekk stretch Balance Air S b38 d46	CJBALC3846SEU
208348	Trekk stretch Balance Air S b40 d38	CJBALC4038SEU
208349	Trekk stretch Balance Air S b40 d40	CJBALC4040SEU
208350	Trekk stretch Balance Air S b40 d42	CJBALC4042SEU
208351	Trekk stretch Balance Air S b40 d44	CJBALC4044SEU
208352	Trekk stretch Balance Air S b40 d46	CJBALC4046SEU
208353	Trekk stretch Balance Air S b42 d38	CJBALC4238SEU
208354	Trekk stretch Balance Air S b42 d40	CJBALC4240SEU
208355	Trekk stretch Balance Air S b42 d42	CJBALC4242SEU
208356	Trekk stretch Balance Air S b42 d44	CJBALC4244SEU
208357	Trekk stretch Balance Air S b42 d46	CJBALC4246SEU
208358	Trekk stretch Balance Air S b42 d48	CJBALC4248SEU
208359	Trekk stretch Balance Air S b44 d38	CJBALC4438SEU
208360	Trekk stretch Balance Air S b44 d40	CJBALC4440SEU
208361	Trekk stretch Balance Air S b44 d42	CJBALC4442SEU
208362	Trekk stretch Balance Air S b44 d44	CJBALC4444SEU
208363	Trekk stretch Balance Air S b44 d46	CJBALC4446SEU
208364	Trekk stretch Balance Air S b44 d48	CJBALC4448SEU
208365	Trekk stretch Balance Air S b44 d50	CJBALC4450SEU
208366	Trekk stretch Balance Air S b46 d42	CJBALC4642SEU
208367	Trekk stretch Balance Air S b46 d44	CJBALC4644SEU
208368	Trekk stretch Balance Air S b46 d46	CJBALC4646SEU
208369	Trekk stretch Balance Air S b46 d48	CJBALC4648SEU
208370	Trekk stretch Balance Air S b46 d50	CJBALC4650SEU
208371	Trekk stretch Balance Air S b48 d42	CJBALC4842SEU
208372	Trekk stretch Balance Air S b48 d44	CJBALC4844SEU
208373	Trekk stretch Balance Air S b48 d46	CJBALC4846SEU
208374	Trekk stretch Balance Air S b48 d48	CJBALC4848SEU
208375	Trekk stretch Balance Air S b48 d50	CJBALC4850SEU
208376	Trekk stretch Balance Air S b50 d42	CJBALC5042SEU
208377	Trekk stretch Balance Air S b50 d44	CJBALC5044SEU
208378	Trekk stretch Balance Air S b50 d46	CJBALC5046SEU
208379	Trekk stretch Balance Air S b50 d48	CJBALC5048SEU
208380	Trekk stretch Balance Air S b50 d50	CJBALC5050SEU
208381	Trekk stretch Balance Air S b56 d46	CJBALC5646SEU
208382	Trekk stretch Balance Air S b56 d48	CJBALC5648SEU
208383	Trekk stretch Balance Air S b56 d50	CJBALC5650SEU
208384	Trekk stretch Balance Air S b56 d56	CJBALC5656SEU
208385	Trekk stretch Balance Air S b56 d60	CJBALC5660SEU
208386	Trekk stretch Balance Air S b60 d46	CJBALC6046SEU
208387	Trekk stretch Balance Air S b60 d48	CJBALC6048SEU
208388	Trekk stretch Balance Air S b60 d50	CJBALC6050SEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208389	Trekk stretch Balance Air S b60 d56	CJBALC6056SEU
208390	Trekk stretch Balance Air S b60 d60	CJBALC6060SEU

Trekk indre for posisjonering Jay Balance Cushion Air S

208458	Trekk indre Balance Cushion Air S b34 d34 posisjonering	CIAPJBALC3434EU
208459	Trekk indre Balance Cushion Air S b34 d36 posisjonering	CIAPJBALC3436EU
208460	Trekk indre Balance Cushion Air S b34 d38 posisjonering	CIAPJBALC3438EU
208461	Trekk indre Balance Cushion Air S b34 d40 posisjonering	CIAPJBALC3440EU
208462	Trekk indre Balance Cushion Air S b34 d42 posisjonering	CIAPJBALC3442EU
208463	Trekk indre Balance Cushion Air S b36 d36 posisjonering	CIAPJBALC3636EU
208464	Trekk indre Balance Cushion Air S b36 d38 posisjonering	CIAPJBALC3638EU
208465	Trekk indre Balance Cushion Air S b36 d40 posisjonering	CIAPJBALC3640EU
208466	Trekk indre Balance Cushion Air S b36 d42 posisjonering	CIAPJBALC3642EU
208467	Trekk indre Balance Cushion Air S b36 d44 posisjonering	CIAPJBALC3644EU
208468	Trekk indre Balance Cushion Air S b36 d46 posisjonering	CIAPJBALC3646EU
208469	Trekk indre Balance Cushion Air S b38 d36 posisjonering	CIAPJBALC3836EU
208470	Trekk indre Balance Cushion Air S b38 d38 posisjonering	CIAPJBALC3838EU
208471	Trekk indre Balance Cushion Air S b38 d40 posisjonering	CIAPJBALC3840EU
208472	Trekk indre Balance Cushion Air S b38 d42 posisjonering	CIAPJBALC3842EU
208473	Trekk indre Balance Cushion Air S b38 d44 posisjonering	CIAPJBALC3844EU
208474	Trekk indre Balance Cushion Air S b38 d46 posisjonering	CIAPJBALC3846EU
208475	Trekk indre Balance Cushion Air S b40 d38 posisjonering	CIAPJBALC4038EU
208476	Trekk indre Balance Cushion Air S b40 d40 posisjonering	CIAPJBALC4040EU
208477	Trekk indre Balance Cushion Air S b40 d42 posisjonering	CIAPJBALC4042EU
208478	Trekk indre Balance Cushion Air S b40 d44 posisjonering	CIAPJBALC4044EU
208479	Trekk indre Balance Cushion Air S b40 d46 posisjonering	CIAPJBALC4046EU
208480	Trekk indre Balance Cushion Air S b42 d38 posisjonering	CIAPJBALC4238EU
208481	Trekk indre Balance Cushion Air S b42 d40 posisjonering	CIAPJBALC4240EU
208482	Trekk indre Balance Cushion Air S b42 d42 posisjonering	CIAPJBALC4242EU
208483	Trekk indre Balance Cushion Air S b42 d44 posisjonering	CIAPJBALC4244EU
208484	Trekk indre Balance Cushion Air S b42 d46 posisjonering	CIAPJBALC4246EU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208485	Trekk indre Balance Cushion Air S b42 d48 posisjonering	CIAPJBALC4248EU
208486	Trekk indre Balance Cushion Air S b44 d38 posisjonering	CIAPJBALC4438EU
208487	Trekk indre Balance Cushion Air S b44 d40 posisjonering	CIAPJBALC4440EU
208488	Trekk indre Balance Cushion Air S b44 d42 posisjonering	CIAPJBALC4442EU
208489	Trekk indre Balance Cushion Air S b44 d44 posisjonering	CIAPJBALC4444EU
208490	Trekk indre Balance Cushion Air S b44 d46 posisjonering	CIAPJBALC4446EU
208491	Trekk indre Balance Cushion Air S b44 d48 posisjonering	CIAPJBALC4448EU
208492	Trekk indre Balance Cushion Air S b44 d50 posisjonering	CIAPJBALC4450EU
208493	Trekk indre Balance Cushion Air S b46 d42 posisjonering	CIAPJBALC4642EU
208494	Trekk indre Balance Cushion Air S b46 d44 posisjonering	CIAPJBALC4644EU
208495	Trekk indre Balance Cushion Air S b46 d46 posisjonering	CIAPJBALC4646EU
208496	Trekk indre Balance Cushion Air S b46 d48 posisjonering	CIAPJBALC4648EU
208497	Trekk indre Balance Cushion Air S b46 d50 posisjonering	CIAPJBALC4650EU
208498	Trekk indre Balance Cushion Air S b48 d42 posisjonering	CIAPJBALC4842EU
208499	Trekk indre Balance Cushion Air S b48 d44 posisjonering	CIAPJBALC4844EU
208500	Trekk indre Balance Cushion Air S b48 d46 posisjonering	CIAPJBALC4846EU
208501	Trekk indre Balance Cushion Air S b48 d48 posisjonering	CIAPJBALC4848EU
208502	Trekk indre Balance Cushion Air S b48 d50 posisjonering	CIAPJBALC4850EU
208503	Trekk indre Balance Cushion Air S b50 d42 posisjonering	CIAPJBALC5042EU
208504	Trekk indre Balance Cushion Air S b50 d44 posisjonering	CIAPJBALC5044EU
208505	Trekk indre Balance Cushion Air S b50 d46 posisjonering	CIAPJBALC5046EU
208506	Trekk indre Balance Cushion Air S b50 d48 posisjonering	CIAPJBALC5048EU
208507	Trekk indre Balance Cushion Air S b50 d50 posisjonering	CIAPJBALC5050EU
208508	Trekk indre Balance Cushion Air S b56 d46 posisjonering	CIAPJBALC5646EU
208509	Trekk indre Balance Cushion Air S b56 d48 posisjonering	CIAPJBALC5648EU
208510	Trekk indre Balance Cushion Air S b56 d50 posisjonering	CIAPJBALC5650EU
208511	Trekk indre Balance Cushion Air S b56 d56 posisjonering	CIAPJBALC5656EU
208512	Trekk indre Balance Cushion Air S b56 d60 posisjonering	CIAPJBALC5660EU
208513	Trekk indre Balance Cushion Air S b60 d46 posisjonering	CIAPJBALC6046EU
208514	Trekk indre Balance Cushion Air S b60 d48 posisjonering	CIAPJBALC6048EU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208515	Trekk indre Balance Cushion Air S b60 d50 posisjonering	CIAPJBALC6050EU
208516	Trekk indre Balance Cushion Air S b60 d56 posisjonering	CIAPJBALC6056EU
208517	Trekk indre Balance Cushion Air S b60 d60 posisjonering	CIAPJBALC6060EU

Posisjonierungssett Jay Balance Cushion Air S

247878	Posisjonierungssett Balance Cushion Air S b34-40 5 deler h2,5	JBALCPKIT-S
208457	Posisjonierungssett Balance Cushion Air S b42-60 5 deler h2,5	JBALCPKIT

Oppbyggingskloss Jay Balance Cushion Air S

247883	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air S b34-38 hø	JBALCOP-ARH
247879	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air S b34-38 ve	JBALCOP-ALH
247884	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air S b40-48 hø	JBALCOP-BRH
247880	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air S b40-48 ve	JBALCOP-BLH
240441	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air S b50-60 hø	JBALCOP-CRH
247881	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air S b50-60 ve	JBALCOP-CLH
247885	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air S b50-60 ved bruk av 2stk hø	JBALCOP-DRH
247882	Oppbyggingskloss Balance Cushion Air S b50-60 ved bruk av 2stk ve	JBALCOP-DLH

Innleggsplate Jay Balance Cushion Air S

247842	Innleggspl. Balance Air S b35 d35	JSI3535
247843	Innleggspl. Balance Air S b35 d40	JSI3540
247844	Innleggspl. Balance Air S b35 d45	JSI3545
247845	Innleggspl. Balance Air S b38 d40	JSI3840
247846	Innleggspl. Balance Air S b38 d42	JSI3842
247847	Innleggspl. Balance Air S b38 d44	JSI3844
247848	Innleggspl. Balance Air S b40 d40	JSI4040
247849	Innleggspl. Balance Air S b40 d42	JSI4042
247850	Innleggspl. Balance Air S b40 d44	JSI4044
247851	Innleggspl. Balance Air S b40 d46	JSI4046
247852	Innleggspl. Balance Air S b42 d40	JSI4240
247853	Innleggspl. Balance Air S b42 d42	JSI4242
247854	Innleggspl. Balance Air S b42 d44	JSI4244
247855	Innleggspl. Balance Air S b42 d46	JSI4246
247856	Innleggspl. Balance Air S b44 d40	JSI4440
247857	Innleggspl. Balance Air S b44 d42	JSI4442
247858	Innleggspl. Balance Air S b44 d44	JSI4444
247859	Innleggspl. Balance Air S b44 d46	JSI4446
247860	Innleggspl. Balance Air S b46 d42	JSI4642
247861	Innleggspl. Balance Air S b46 d44	JSI4644

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247862	Innleggspl. Balance Air S b46 d46	JSI4646
247863	Innleggspl. Balance Air S b46 d50	JSI4650
247864	Innleggspl. Balance Air S b48 d42	JSI4842
247865	Innleggspl. Balance Air S b48 d44	JSI4844
247866	Innleggspl. Balance Air S b48 d46	JSI4846
247867	Innleggspl. Balance Air S b48 d50	JSI4850
247868	Innleggspl. Balance Air S b50 d42	JSI5042
247869	Innleggspl. Balance Air S b50 d56	JSI5046
247870	Innleggspl. Balance Air S b50 d50	JSI5050
247871	Innleggspl. Balance Air S b56 d46	JSI5646
247872	Innleggspl. Balance Air S b56 d50	JSI5650
247873	Innleggspl. Balance Air S b56 d56	JSI5656
247874	Innleggspl. Balance Air S b60 d46	JSI6046
247875	Innleggspl. Balance Air S b60 d50	JSI6050
247876	Innleggspl. Balance Air S b60 d56	JSI6056
247877	Innleggspl. Balance Air S b60 d60	JSI6060



Jay J2 Cushion

Høyde: 8 cm

Base: skum/olje

Trekk: mikroklimatisk

Hovedprodukt Jay J2 Cushion

146072	J2 b35 d40	2108AT
006725	J2 b40 d40	2105AT
006726	J2 b40 d45	2106AT
006727	J2 b40 d50	2107AT
008987	J2 b42 d42	2117AT
006720	J2 b45 d40	2100AT
006721	J2 b45 d45	2101AT
006723	J2 b45 d50	2103AT
016635	J2 b50 d40	2116AT
016636	J2 b50 d45	2118AT
006722	J2 b50 d50	2102AT
146073	J2 b55 d45	M2104AT-55x45
006724	J2 b60 d50	2104AT

Tilbehør og deler Jay J2 Cushion

Trekk mikroklimatisk Jay J2 Cushion(std.)

078386	Trekk mikroklimatisk J2 b35 d40	C2108AT
078392	Trekk mikroklimatisk J2 b40 d40	C2105AT

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
078393	Trekk mikroklimatisk J2 b40 d45	C2106AT
078394	Trekk mikroklimatisk J2 b40 d50	C2107AT
078396	Trekk mikroklimatisk J2 b42 d42	C2117AT
078387	Trekk mikroklimatisk J2 b45 d40	C2100AT
078388	Trekk mikroklimatisk J2 b45 d45	C2101AT
078390	Trekk mikroklimatisk J2 b45 d50	C2103AT
078395	Trekk mikroklimatisk J2 b50 d40	C2116AT
078397	Trekk mikroklimatisk J2 b50 d45	C2118AT
I/A	Trekk mikroklimatisk J2 b55 d45	CM2104AT
078389	Trekk mikroklimatisk J2 b50 d50	C2102AT
078391	Trekk mikroklimatisk J2 b60 d50	C2104AT
Trekk inkontinens Jay J2 Cushion		
078383	Trekk inko J2 b35 d40	C2108NI
006735	Trekk inko J2 b40 d40	C2105NI
006736	Trekk inko J2 b40 d45	C2106NI
006737	Trekk inko J2 b40 d50	C2107NI
009128	Trekk inko J2 b42 d42	C2117NI
006730	Trekk inko J2 b45 d40	C2100NI
006731	Trekk inko J2 b45 d45	C2101NI
006733	Trekk inko J2 b45 d50	C2103NI
016653	Trekk inko J2 b50 d40	C2116NI
016654	Trekk inko J2 b50 d45	C2118NI
172186	Trekk inko J2 b55 d45	CM2104-55x45NI
006732	Trekk inko J2 b50 d50	C2102NI
006734	Trekk inko J2 b60 d50	C2104NI
Oppbyggingskloss bekken Jay J2 Cushion		
078645	Oppbyggingskloss J2 b35 d40 bekken h1,25 hø	B2168R
078646	Oppbyggingskloss J2 b35 d40 bekken h1,25 ve	B2168L
014595	Oppbyggingskloss J2 b40 d40 bekken h1,25 hø	B2165R
014594	Oppbyggingskloss J2 b40 d40 bekken h1,25 ve	B2165L
014596	Oppbyggingskloss J2 b40 d45 bekken h1,25 hø	B2166R
014597	Oppbyggingskloss J2 b40 d45 bekken h1,25 ve	B2166L
014567	Oppbyggingskloss J2 b40 d50 bekken h1,25 hø	B2167R
014566	Oppbyggingskloss J2 b40 d50 bekken h1,25 ve	B2167L
247813	Oppbyggingskloss J2 b42 d42 bekken h1,25 hø	B2177R
247814	Oppbyggingskloss J2 b42 d42 bekken h1,25 ve	B2177L
014577	Oppbyggingskloss J2 b45 d40 bekken h1,25 hø	B2160R
014578	Oppbyggingskloss J2 b45 d40 bekken h1,25 ve	B2160L
014580	Oppbyggingskloss J2 b45 d45 bekken h1,25 hø	B2161R
014579	Oppbyggingskloss J2 b45 d45 bekken h1,25 ve	B2161L
014584	Oppbyggingskloss J2 b45 d50 bekken h1,25 hø	B2163R
014583	Oppbyggingskloss J2 b45 d50 bekken h1,25 ve	B2163L

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247817	Oppbyggingskloss J2 b50 d40 bekken h1,25 hø	B2169R
247818	Oppbyggingskloss J2 b50 d40 bekken h1,25 ve	B2169L
247815	Oppbyggingskloss J2 b50 d45 bekken h1,25 hø	B2170R
247816	Oppbyggingskloss J2 b50 d45 bekken h1,25 ve	B2170L
014581	Oppbyggingskloss J2 b50 d50 bekken h1,25 hø	B2162R
014582	Oppbyggingskloss J2 b50 d50 bekken h1,25 ve	B2162L
014585	Oppbyggingskloss J2 b60 d50 bekken h1,25 hø	B2164R
014593	Oppbyggingskloss J2 b60 d50 bekken h1,25 ve	B2164L

Diverse posisjoneringskomponenter Jay J2

078361	Oljepad J2 b12 l25 ekstra	F119
078362	Oljepad GS b10 l20 ekstra	JGSMFSP
004101	Kile J2 skråstilling	B114
078358	Bekkenstøtter J2 h5 par	B1167

Bendeler Jay J2 Cushion

004152	Bendeler J2 h5	B118
004153	Bendeler J2 bred h5	B118W
247801	Bendeler J2 h5 junior	JGSJABDBUP2

Bensamlere Jay J2 Cushion

004146	Bensamlere J2 h5 par	B113J
004148	Bensamlere J2 h2,5 par	B119J
247797	Bensamlere J2 par	JGSCADDW

Innleggsplate Jay J2 Cushion

078644	Innleggsplate J2 b35 d40	S2108
009107	Innleggsplate J2 b40 d40	S2105
009108	Innleggsplate J2 b40 d45	S2106
009109	Innleggsplate J2 b40 d50	S2107
009129	Innleggsplate J2 b42 d42	S2117
009102	Innleggsplate J2 b45 d40	S2100
009103	Innleggsplate J2 b45 d45	S2101
009105	Innleggsplate J2 b45 d50	S2103
018034	Innleggsplate J2 b50 d40	S2116
009104	Innleggsplate J2 b50 d50	S2102
009106	Innleggsplate J2 b60 d50	S2104
018035	Innleggsplate J2 b50 d45	S2118

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Jay Balance Cushion Fluid

Høyde: 8,5 cm

Base: skum/olje

Trekk: mikroklimatisk Artnr: CJBALCsbdsMEU

Hovedprodukt Jay Balance Cushion Fluid		
208271	Balance Cushion Fluid b34 d34	JBALC3434FLMEU
208272	Balance Cushion Fluid b34 d36	JBALC3436FLMEU
208273	Balance Cushion Fluid b34 d38	JBALC3438FLMEU
208274	Balance Cushion Fluid b34 d40	JBALC3440FLMEU
208275	Balance Cushion Fluid b34 d42	JBALC3442FLMEU
208276	Balance Cushion Fluid b36 d36	JBALC3636FLMEU
208277	Balance Cushion Fluid b36 d38	JBALC3638FLMEU
208278	Balance Cushion Fluid b36 d40	JBALC3640FLMEU
208279	Balance Cushion Fluid b36 d42	JBALC3642FLMEU
208280	Balance Cushion Fluid b36 d44	JBALC3644FLMEU
208281	Balance Cushion Fluid b36 d46	JBALC3646FLMEU
208282	Balance Cushion Fluid b38 d36	JBALC3836FLMEU
208283	Balance Cushion Fluid b38 d38	JBALC3838FLMEU
208284	Balance Cushion Fluid b38 d40	JBALC3840FLMEU
208285	Balance Cushion Fluid b38 d42	JBALC3842FLMEU
211241	Balance Cushion Fluid b38 d44	JBALC3844FLMEU
208287	Balance Cushion Fluid b38 d46	JBALC3846FLMEU
208288	Balance Cushion Fluid b40 d38	JBALC4038FLMEU
208289	Balance Cushion Fluid b40 d40	JBALC4040FLMEU
208290	Balance Cushion Fluid b40 d42	JBALC4042FLMEU
208291	Balance Cushion Fluid b40 d44	JBALC4044FLMEU
208292	Balance Cushion Fluid b40 d46	JBALC4046FLMEU
208293	Balance Cushion Fluid b42 d38	JBALC4238FLMEU
208294	Balance Cushion Fluid b42 d40	JBALC4240FLMEU
208295	Balance Cushion Fluid b42 d42	JBALC4242FLMEU
208296	Balance Cushion Fluid b42 d44	JBALC4244FLMEU
208297	Balance Cushion Fluid b42 d46	JBALC4246FLMEU
208298	Balance Cushion Fluid b42 d48	JBALC4248FLMEU
208299	Balance Cushion Fluid b44 d38	JBALC4438FLMEU
208300	Balance Cushion Fluid b44 d40	JBALC4440FLMEU
208301	Balance Cushion Fluid b44 d42	JBALC4442FLMEU
208302	Balance Cushion Fluid b44 d44	JBALC4444FLMEU
208303	Balance Cushion Fluid b44 d46	JBALC4446FLMEU
208304	Balance Cushion Fluid b44 d48	JBALC4448FLMEU
208305	Balance Cushion Fluid b44 d50	JBALC4450FLMEU
208306	Balance Cushion Fluid b46 d42	JBALC4642FLMEU
208307	Balance Cushion Fluid b46 d44	JBALC4644FLMEU
208308	Balance Cushion Fluid b46 d46	JBALC4646FLMEU
208309	Balance Cushion Fluid b46 d48	JBALC4648FLMEU
208310	Balance Cushion Fluid b46 d50	JBALC4650FLMEU
208311	Balance Cushion Fluid b48 d42	JBALC4842FLMEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208312	Balance Cushion Fluid b48 d44	JBALC4844FLMEU
208313	Balance Cushion Fluid b48 d46	JBALC4846FLMEU
208314	Balance Cushion Fluid b48 d48	JBALC4848FLMEU
208315	Balance Cushion Fluid b48 d50	JBALC4850FLMEU
208316	Balance Cushion Fluid b50 d42	JBALC5042FLMEU
208317	Balance Cushion Fluid b50 d44	JBALC5044FLMEU
208318	Balance Cushion Fluid b50 d46	JBALC5046FLMEU
208319	Balance Cushion Fluid b50 d48	JBALC5048FLMEU
208320	Balance Cushion Fluid b50 d50	JBALC5050FLMEU
208321	Balance Cushion Fluid b56 d46	JBALC5646FLMEU
208322	Balance Cushion Fluid b56 d48	JBALC5648FLMEU
208323	Balance Cushion Fluid b56 d50	JBALC5650FLMEU
208324	Balance Cushion Fluid b56 d56	JBALC5656FLMEU
208325	Balance Cushion Fluid b56 d60	JBALC5660FLMEU
208326	Balance Cushion Fluid b60 d46	JBALC6046FLMEU
208327	Balance Cushion Fluid b60 d48	JBALC6048FLMEU
208328	Balance Cushion Fluid b60 d50	JBALC6050FLMEU
208329	Balance Cushion Fluid b60 d56	JBALC6056FLMEU
208330	Balance Cushion Fluid b60 d60	JBALC6060FLMEU

Tilbehør og deler Jay Balance Cushion Fluid

Trekk mikroklimatisk Jay Balance Cushion Fluid (std.)		
209086	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b34 d34	CJBALC3434MEU
209087	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b34 d36	CJBALC3436MEU
209088	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b34 d38	CJBALC3438MEU
209089	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b34 d40	CJBALC3440MEU
209090	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b34 d42	CJBALC3442MEU
209091	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b36 d36	CJBALC3636MEU
209092	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b36 d38	CJBALC3638MEU
209093	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b36 d40	CJBALC3640MEU
209094	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b36 d42	CJBALC3642MEU
209095	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b36 d44	CJBALC3644MEU
209096	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b36 d46	CJBALC3646MEU
209097	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b38 d36	CJBALC3836MEU
209098	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b38 d38	CJBALC3838MEU
209099	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b38 d40	CJBALC3840MEU
209100	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b38 d42	CJBALC3842MEU
209101	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b38 d44	CJBALC3844MEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
209102	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b38 d46	CJBALC3846MEU
209103	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b40 d38	CJBALC4038MEU
209104	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b40 d40	CJBALC4040MEU
209105	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b40 d42	CJBALC4042MEU
209106	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b40 d44	CJBALC4044MEU
209107	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b40 d46	CJBALC4046MEU
209108	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b42 d38	CJBALC4238MEU
209109	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b42 d40	CJBALC4240MEU
209110	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b42 d42	CJBALC4242MEU
209111	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b42 d44	CJBALC4244MEU
209112	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b42 d46	CJBALC4246MEU
209113	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b42 d48	CJBALC4248MEU
209114	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b44 d38	CJBALC4438MEU
209115	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b44 d40	CJBALC4440MEU
209116	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b44 d42	CJBALC4442MEU
209117	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b44 d44	CJBALC4444MEU
209118	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b44 d46	CJBALC4446MEU
209119	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b44 d48	CJBALC4448MEU
209120	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b44 d50	CJBALC4450MEU
209121	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b46 d42	CJBALC4642MEU
209122	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b46 d44	CJBALC4644MEU
209123	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b46 d46	CJBALC4646MEU
209124	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b46 d48	CJBALC4648MEU
209125	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b46 d50	CJBALC4650MEU
209126	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b48 d42	CJBALC4842MEU
209127	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b48 d44	CJBALC4844MEU
209128	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b48 d46	CJBALC4846MEU
209129	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b48 d48	CJBALC4848MEU
209130	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b48 d50	CJBALC4850MEU
209131	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b50 d42	CJBALC5042MEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
209132	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b50 d44	CJBALC5044MEU
209133	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b50 d46	CJBALC5046MEU
209134	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b50 d48	CJBALC5048MEU
209135	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b50 d50	CJBALC5050MEU
209136	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b56 d46	CJBALC5646MEU
209137	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b56 d48	CJBALC5648MEU
209138	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b56 d50	CJBALC5650MEU
209139	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b56 d56	CJBALC5656MEU
209140	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b56 d60	CJBALC5660MEU
209141	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b60 d46	CJBALC6046MEU
209142	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b60 d48	CJBALC6048MEU
209143	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b60 d50	CJBALC6050MEU
209144	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b60 d56	CJBALC6056MEU
209145	Trekk mikroklimatisk Balance Cushion Fluid b60 d60	CJBALC6060MEU

Trekk inkontinens Jay Balance Cushion Fluid

208391	Trekk inko Balance Fluid b34 d34	CJBALC3434IEU
208392	Trekk inko Balance Fluid b34 d36	CJBALC3436IEU
208393	Trekk inko Balance Fluid b34 d38	CJBALC3438IEU
208394	Trekk inko Balance Fluid b34 d40	CJBALC3440IEU
208395	Trekk inko Balance Fluid b34 d42	CJBALC3442IEU
208396	Trekk inko Balance Fluid b36 d36	CJBALC3636IEU
208397	Trekk inko Balance Fluid b36 d38	CJBALC3638IEU
208398	Trekk inko Balance Fluid b36 d40	CJBALC3640IEU
208399	Trekk inko Balance Fluid b36 d42	CJBALC3642IEU
208400	Trekk inko Balance Fluid b36 d44	CJBALC3644IEU
208401	Trekk inko Balance Fluid b36 d46	CJBALC3646IEU
208402	Trekk inko Balance Fluid b38 d36	CJBALC3836IEU
208403	Trekk inko Balance Fluid b38 d38	CJBALC3838IEU
208404	Trekk inko Balance Fluid b38 d40	CJBALC3840IEU
208405	Trekk inko Balance Fluid b38 d42	CJBALC3842IEU
208406	Trekk inko Balance Fluid b38 d44	CJBALC3844IEU
208407	Trekk inko Balance Fluid b38 d46	CJBALC3846IEU
208408	Trekk inko Balance Fluid b40 d38	CJBALC4038IEU
208409	Trekk inko Balance Fluid b40 d40	CJBALC4040IEU
208410	Trekk inko Balance Fluid b40 d42	CJBALC4042IEU
208411	Trekk inko Balance Fluid b40 d44	CJBALC4044IEU
208412	Trekk inko Balance Fluid b40 d46	CJBALC4046IEU
208413	Trekk inko Balance Fluid b42 d38	CJBALC4238IEU
208414	Trekk inko Balance Fluid b42 d40	CJBALC4240IEU
208415	Trekk inko Balance Fluid b42 d42	CJBALC4242IEU
208416	Trekk inko Balance Fluid b42 d44	CJBALC4244IEU
208417	Trekk inko Balance Fluid b42 d46	CJBALC4246IEU
208418	Trekk inko Balance Fluid b42 d48	CJBALC4248IEU
208419	Trekk inko Balance Fluid b44 d38	CJBALC4438IEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208420	Trekk inko Balance Fluid b44 d40	CJBALC4440IEU
208421	Trekk inko Balance Fluid b44 d42	CJBALC4442IEU
208422	Trekk inko Balance Fluid b44 d44	CJBALC4444IEU
208423	Trekk inko Balance Fluid b44 d46	CJBALC4446IEU
208424	Trekk inko Balance Fluid b44 d48	CJBALC4448IEU
208425	Trekk inko Balance Fluid b44 d50	CJBALC4450IEU
208426	Trekk inko Balance Fluid b46 d42	CJBALC4642IEU
208427	Trekk inko Balance Fluid b46 d44	CJBALC4644IEU
208428	Trekk inko Balance Fluid b46 d46	CJBALC4646IEU
208429	Trekk inko Balance Fluid b46 d48	CJBALC4648IEU
208430	Trekk inko Balance Fluid b46 d50	CJBALC4650IEU
208431	Trekk inko Balance Fluid b48 d42	CJBALC4842IEU
208432	Trekk inko Balance Fluid b48 d44	CJBALC4844IEU
208433	Trekk inko Balance Fluid b48 d46	CJBALC4846IEU
208434	Trekk inko Balance Fluid b48 d48	CJBALC4848IEU
208435	Trekk inko Balance Fluid b48 d50	CJBALC4850IEU
208436	Trekk inko Balance Fluid b50 d42	CJBALC5042IEU
208437	Trekk inko Balance Fluid b50 d44	CJBALC5044IEU
208438	Trekk inko Balance Fluid b50 d46	CJBALC5046IEU
208439	Trekk inko Balance Fluid b50 d48	CJBALC5048IEU
208440	Trekk inko Balance Fluid b50 d50	CJBALC5050IEU
208441	Trekk inko Balance Fluid b56 d46	CJBALC5646IEU
208442	Trekk inko Balance Fluid b56 d48	CJBALC5648IEU
208443	Trekk inko Balance Fluid b56 d50	CJBALC5650IEU
208444	Trekk inko Balance Fluid b56 d56	CJBALC5656IEU
208445	Trekk inko Balance Fluid b56 d60	CJBALC5660IEU
208446	Trekk inko Balance Fluid b60 d46	CJBALC6046IEU
208447	Trekk inko Balance Fluid b60 d48	CJBALC6048IEU
208448	Trekk inko Balance Fluid b60 d50	CJBALC6050IEU
208449	Trekk inko Balance Fluid b60 d56	CJBALC6056IEU
208450	Trekk inko Balance Fluid b60 d60	CJBALC6060IEU

Trekk stretch Jay Balance Cushion Fluid

208331	Trekk stretch Balance Fluid b34 d34	CJBALC3434SEU
208332	Trekk stretch Balance Fluid b34 d36	CJBALC3436SEU
208333	Trekk stretch Balance Fluid b34 d38	CJBALC3438SEU
208334	Trekk stretch Balance Fluid b34 d40	CJBALC3440SEU
208335	Trekk stretch Balance Fluid b34 d42	CJBALC3442SEU
208336	Trekk stretch Balance Fluid b36 d36	CJBALC3636SEU
208337	Trekk stretch Balance Fluid b36 d38	CJBALC3638SEU
208338	Trekk stretch Balance Fluid b36 d40	CJBALC3640SEU
208339	Trekk stretch Balance Fluid b36 d42	CJBALC3642SEU
208340	Trekk stretch Balance Fluid b36 d44	CJBALC3644SEU
208341	Trekk stretch Balance Fluid b36 d46	CJBALC3646SEU
208342	Trekk stretch Balance Fluid b38 d36	CJBALC3836SEU
208343	Trekk stretch Balance Fluid b38 d38	CJBALC3838SEU
208344	Trekk stretch Balance Fluid b38 d40	CJBALC3840SEU
208345	Trekk stretch Balance Fluid b38 d42	CJBALC3842SEU
208346	Trekk stretch Balance Fluid b38 d44	CJBALC3844SEU
208347	Trekk stretch Balance Fluid b38 d46	CJBALC3846SEU
208348	Trekk stretch Balance Fluid b40 d38	CJBALC4038SEU
208349	Trekk stretch Balance Fluid b40 d40	CJBALC4040SEU
208350	Trekk stretch Balance Fluid b40 d42	CJBALC4042SEU
208351	Trekk stretch Balance Fluid b40 d44	CJBALC4044SEU
208352	Trekk stretch Balance Fluid b40 d46	CJBALC4046SEU
208353	Trekk stretch Balance Fluid b42 d38	CJBALC4238SEU
208354	Trekk stretch Balance Fluid b42 d40	CJBALC4240SEU
208355	Trekk stretch Balance Fluid b42 d42	CJBALC4242SEU
208356	Trekk stretch Balance Fluid b42 d44	CJBALC4244SEU
208357	Trekk stretch Balance Fluid b42 d46	CJBALC4246SEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208358	Trekk stretch Balance Fluid b42 d48	CJBALC4248SEU
208359	Trekk stretch Balance Fluid b44 d38	CJBALC4438SEU
208360	Trekk stretch Balance Fluid b44 d40	CJBALC4440SEU
208361	Trekk stretch Balance Fluid b44 d42	CJBALC4442SEU
208362	Trekk stretch Balance Fluid b44 d44	CJBALC4444SEU
208363	Trekk stretch Balance Fluid b44 d46	CJBALC4446SEU
208364	Trekk stretch Balance Fluid b44 d48	CJBALC4448SEU
208365	Trekk stretch Balance Fluid b44 d50	CJBALC4450SEU
208366	Trekk stretch Balance Fluid b46 d42	CJBALC4642SEU
208367	Trekk stretch Balance Fluid b46 d44	CJBALC4644SEU
208368	Trekk stretch Balance Fluid b46 d46	CJBALC4646SEU
208369	Trekk stretch Balance Fluid b46 d48	CJBALC4648SEU
208370	Trekk stretch Balance Fluid b46 d50	CJBALC4650SEU
208371	Trekk stretch Balance Fluid b48 d42	CJBALC4842SEU
208372	Trekk stretch Balance Fluid b48 d44	CJBALC4844SEU
208373	Trekk stretch Balance Fluid b48 d46	CJBALC4846SEU
208374	Trekk stretch Balance Fluid b48 d48	CJBALC4848SEU
208375	Trekk stretch Balance Fluid b48 d50	CJBALC4850SEU
208376	Trekk stretch Balance Fluid b50 d42	CJBALC5042SEU
208377	Trekk stretch Balance Fluid b50 d44	CJBALC5044SEU
208378	Trekk stretch Balance Fluid b50 d46	CJBALC5046SEU
208379	Trekk stretch Balance Fluid b50 d48	CJBALC5048SEU
208380	Trekk stretch Balance Fluid b50 d50	CJBALC5050SEU
208381	Trekk stretch Balance Fluid b56 d46	CJBALC5646SEU
208382	Trekk stretch Balance Fluid b56 d48	CJBALC5648SEU
208383	Trekk stretch Balance Fluid b56 d50	CJBALC5650SEU
208384	Trekk stretch Balance Fluid b56 d56	CJBALC5656SEU
208385	Trekk stretch Balance Fluid b56 d60	CJBALC5660SEU
208386	Trekk stretch Balance Fluid b60 d46	CJBALC6046SEU
208387	Trekk stretch Balance Fluid b60 d48	CJBALC6048SEU
208388	Trekk stretch Balance Fluid b60 d50	CJBALC6050SEU
208389	Trekk stretch Balance Fluid b60 d56	CJBALC6056SEU
208390	Trekk stretch Balance Fluid b60 d60	CJBALC6060SEU

Trekk indre posisjonering Jay Balance Cushion Fluid

208966	Trekk indre Balance Cushion Fluid b34 d34 posisjonering	CIFLPJBALC3434EU
208967	Trekk indre Balance Cushion Fluid b34 d36 posisjonering	CIFLPJBALC3436EU
208968	Trekk indre Balance Cushion Fluid b34 d38 posisjonering	CIFLPJBALC3438EU
208969	Trekk indre Balance Cushion Fluid b34 d40 posisjonering	CIFLPJBALC3440EU
208970	Trekk indre Balance Cushion Fluid b34 d42 posisjonering	CIFLPJBALC3442EU
208971	Trekk indre Balance Cushion Fluid b36 d36 posisjonering	CIFLPJBALC3636EU
208972	Trekk indre Balance Cushion Fluid b36 d38 posisjonering	CIFLPJBALC3638EU
208973	Trekk indre Balance Cushion Fluid b36 d40 posisjonering	CIFLPJBALC3640EU
208974	Trekk indre Balance Cushion Fluid b36 d42 posisjonering	CIFLPJBALC3642EU
208975	Trekk indre Balance Cushion Fluid b36 d44 posisjonering	CIFLPJBALC3644EU
208976	Trekk indre Balance Cushion Fluid b36 d46 posisjonering	CIFLPJBALC3646EU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208977	Trekk indre Balance Cushion Fluid b38 d36 posisjonering	CIFLPJBALC3836EU
208978	Trekk indre Balance Cushion Fluid b38 d38 posisjonering	CIFLPJBALC3838EU
208979	Trekk indre Balance Cushion Fluid b38 d40 posisjonering	CIFLPJBALC3840EU
208980	Trekk indre Balance Cushion Fluid b38 d42 posisjonering	CIFLPJBALC3842EU
208981	Trekk indre Balance Cushion Fluid b38 d44 posisjonering	CIFLPJBALC3844EU
208982	Trekk indre Balance Cushion Fluid b38 d46 posisjonering	CIFLPJBALC3846EU
208983	Trekk indre Balance Cushion Fluid b40 d38 posisjonering	CIFLPJBALC4038EU
208984	Trekk indre Balance Cushion Fluid b40 d40 posisjonering	CIFLPJBALC4040EU
208985	Trekk indre Balance Cushion Fluid b40 d42 posisjonering	CIFLPJBALC4042EU
208986	Trekk indre Balance Cushion Fluid b40 d44 posisjonering	CIFLPJBALC4044EU
208987	Trekk indre Balance Cushion Fluid b40 d46 posisjonering	CIFLPJBALC4046EU
208988	Trekk indre Balance Cushion Fluid b42 d38 posisjonering	CIFLPJBALC4238EU
208989	Trekk indre Balance Cushion Fluid b42 d40 posisjonering	CIFLPJBALC4240EU
208990	Trekk indre Balance Cushion Fluid b42 d42 posisjonering	CIFLPJBALC4242EU
208991	Trekk indre Balance Cushion Fluid b42 d44 posisjonering	CIFLPJBALC4244EU
208992	Trekk indre Balance Cushion Fluid b42 d46 posisjonering	CIFLPJBALC4246EU
208993	Trekk indre Balance Cushion Fluid b42 d48 posisjonering	CIFLPJBALC4248EU
208994	Trekk indre Balance Cushion Fluid b44 d38 posisjonering	CIFLPJBALC4438EU
208995	Trekk indre Balance Cushion Fluid b44 d40 posisjonering	CIFLPJBALC4440EU
208996	Trekk indre Balance Cushion Fluid b44 d42 posisjonering	CIFLPJBALC4442EU
208997	Trekk indre Balance Cushion Fluid b44 d44 posisjonering	CIFLPJBALC4444EU
208998	Trekk indre Balance Cushion Fluid b44 d46 posisjonering	CIFLPJBALC4446EU
208999	Trekk indre Balance Cushion Fluid b44 d48 posisjonering	CIFLPJBALC4448EU
209000	Trekk indre Balance Cushion Fluid b44 d50 posisjonering	CIFLPJBALC4450EU
209001	Trekk indre Balance Cushion Fluid b46 d42 posisjonering	CIFLPJBALC4642EU
209002	Trekk indre Balance Cushion Fluid b46 d44 posisjonering	CIFLPJBALC4644EU
209003	Trekk indre Balance Cushion Fluid b46 d46 posisjonering	CIFLPJBALC4646EU
209004	Trekk indre Balance Cushion Fluid b46 d48 posisjonering	CIFLPJBALC4648EU
209005	Trekk indre Balance Cushion Fluid b46 d50 posisjonering	CIFLPJBALC4650EU
209006	Trekk indre Balance Cushion Fluid b48 d42 posisjonering	CIFLPJBALC4842EU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
209007	Trekk indre Balance Cushion Fluid b48 d44 posisjonering	CIFLPJBALC4844EU
209008	Trekk indre Balance Cushion Fluid b48 d46 posisjonering	CIFLPJBALC4846EU
209009	Trekk indre Balance Cushion Fluid b48 d48 posisjonering	CIFLPJBALC4848EU
209010	Trekk indre Balance Cushion Fluid b48 d50 posisjonering	CIFLPJBALC4850EU
209011	Trekk indre Balance Cushion Fluid b50 d42 posisjonering	CIFLPJBALC5042EU
209012	Trekk indre Balance Cushion Fluid b50 d44 posisjonering	CIFLPJBALC5044EU
209013	Trekk indre Balance Cushion Fluid b50 d46 posisjonering	CIFLPJBALC5046EU
209014	Trekk indre Balance Cushion Fluid b50 d48 posisjonering	CIFLPJBALC5048EU
209015	Trekk indre Balance Cushion Fluid b50 d50 posisjonering	CIFLPJBALC5050EU
209016	Trekk indre Balance Cushion Fluid b56 d46 posisjonering	CIFLPJBALC5646EU
209017	Trekk indre Balance Cushion Fluid b56 d48 posisjonering	CIFLPJBALC5648EU
209018	Trekk indre Balance Cushion Fluid b56 d50 posisjonering	CIFLPJBALC5650EU
209019	Trekk indre Balance Cushion Fluid b56 d56 posisjonering	CIFLPJBALC5656EU
209020	Trekk indre Balance Cushion Fluid b56 d60 posisjonering	CIFLPJBALC5660EU
209021	Trekk indre Balance Cushion Fluid b60 d46 posisjonering	CIFLPJBALC6046EU
209022	Trekk indre Balance Cushion Fluid b60 d48 posisjonering	CIFLPJBALC6048EU
209023	Trekk indre Balance Cushion Fluid b60 d50 posisjonering	CIFLPJBALC6050EU
209024	Trekk indre Balance Cushion Fluid b60 d56 posisjonering	CIFLPJBALC6056EU
209025	Trekk indre Balance Cushion Fluid b60 d60 posisjonering	CIFLPJBALC6060EU

Posisjoneringssett Jay Balance Cushion Fluid

208457	Posisjoneringssett Balance Cushion Fluid b42-60 5 deler h2,5	JBALCPKIT
247878	Posisjoneringssett Balance Cushion Fluid b34-40 5 deler h2,5	JBALCPKIT-S

Oppbyggingskloss Jay Balance Cushion Fluid

247883	Oppbyggingskloss Balance Cushion Fluid b34-38 hø	JBALCOP-ARH
247879	Oppbyggingskloss Balance Cushion Fluid b34-38 ve	JBALCOP-ALH
247884	Oppbyggingskloss Balance Cushion Fluid b40-48 hø	JBALCOP-BRH
247880	Oppbyggingskloss Balance Cushion Fluid b40-48 ve	JBALCOP-BLH
240441	Oppbyggingskloss Balance Cushion Fluid b50-60 hø	JBALCOP-CRH
247881	Oppbyggingskloss Balance Cushion Fluid b50-60 ve	JBALCOP-CLH

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
247885	Oppbyggingskloss Balance Cushion Fluid b50-60 ved bruk av 2stk hør	JBALCOP-DRH
247882	Oppbyggingskloss Balance Cushion Fluid b50-60 ved bruk av 2stk ve	JBALCOP-DLH

Innleggsplate Jay Balance Cushion Fluid

247842	Innleggsplate Balance Fluid b35 d35	JSI3535
247843	Innleggsplate Balance Fluid b35 d40	JSI3540
247844	Innleggsplate Balance Fluid b35 d45	JSI3545
247845	Innleggsplate Balance Fluid b38 d40	JSI3840
247846	Innleggsplate Balance Fluid b38 d42	JSI3842
247847	Innleggsplate Balance Fluid b38 d44	JSI3844
247848	Innleggsplate Balance Fluid b40 d40	JSI4040
247849	Innleggsplate Balance Fluid b40 d42	JSI4042
247850	Innleggsplate Balance Fluid b40 d44	JSI4044
247851	Innleggsplate Balance Fluid b40 d46	JSI4046
247852	Innleggsplate Balance Fluid b42 d40	JSI4240
247853	Innleggsplate Balance Fluid b42 d42	JSI4242
247854	Innleggsplate Balance Fluid b42 d44	JSI4244
247855	Innleggsplate Balance Fluid b42 d46	JSI4246
247856	Innleggsplate Balance Fluid b44 d40	JSI4440
247857	Innleggsplate Balance Fluid b44 d42	JSI4442
247858	Innleggsplate Balance Fluid b44 d44	JSI4444
247859	Innleggsplate Balance Fluid b44 d46	JSI4446
247860	Innleggsplate Balance Fluid b46 d42	JSI4642
247861	Innleggsplate Balance Fluid b46 d44	JSI4644
247862	Innleggsplate Balance Fluid b46 d46	JSI4646
247863	Innleggsplate Balance Fluid b46 d50	JSI4650
247864	Innleggsplate Balance Fluid b48 d42	JSI4842
247865	Innleggsplate Balance Fluid b48 d44	JSI4844
247866	Innleggsplate Balance Fluid b48 d46	JSI4846
247867	Innleggsplate Balance Fluid b48 d50	JSI4850
247868	Innleggsplate Balance Fluid b50 d42	JSI5042
247869	Innleggsplate Balance Fluid b50 d56	JSI5046
247870	Innleggsplate Balance Fluid b50 d50	JSI5050
247871	Innleggsplate Balance Fluid b56 d46	JSI5646
247872	Innleggsplate Balance Fluid b56 d50	JSI5650
247873	Innleggsplate Balance Fluid b56 d56	JSI5656
247874	Innleggsplate Balance Fluid b60 d46	JSI6046
247875	Innleggsplate Balance Fluid b60 d50	JSI6050
247876	Innleggsplate Balance Fluid b60 d56	JSI6056
247877	Innleggsplate Balance Fluid b60 d60	JSI6060



HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------

Jay J2 Cushion DC

Høyde: 10 cm

Base: skum/olje

Trekk: mikroklimatisk (C foran art.nr)

Hovedprodukt Jay J2 Cushion DC

078851	J2 DC b35 d35	2444AT
078852	J2 DC b35 d40	2446AT
016637	J2 DC b38 d38	2455AT
016638	J2 DC b38 d42	2457AT
016639	J2 DC b40 d40	2466AT
016640	J2 DC b40 d45	2468AT
016641	J2 DC b40 d50	2460AT
016642	J2 DC b42 d38	2475AT
016643	J2 DC b42 d42	2477AT
016644	J2 DC b45 d40	2486AT
016645	J2 DC b45 d45	2488AT
016646	J2 DC b45 d50	2480AT
016647	J2 DC b50 d40	2406AT
016648	J2 DC b50 d45	2408AT
016649	J2 DC b50 d50	2400AT
016650	J2 DC b55 d40	2426AT
016651	J2 DC b55 d45	2428AT
016652	J2 DC b60 d45	2448AT

Tilbehør og deler Jay J2 Cushion DC

Trekk mikroklimatisk Jay J2 Cushion DC (std.)

078403	Trekk mikroklimatisk J2 DC b35 d35	C2444AT
078404	Trekk mikroklimatisk J2 DC b35 d40	C2446AT
078411	Trekk mikroklimatisk J2 DC b38 d38	C2455AT
078412	Trekk mikroklimatisk J2 DC b38 d42	C2457AT
078414	Trekk mikroklimatisk J2 DC b40 d40	C2466AT
078415	Trekk mikroklimatisk J2 DC b40 d45	C2468AT
078413	Trekk mikroklimatisk J2 DC b40 d50	C2460AT
078416	Trekk mikroklimatisk J2 DC b42 d38	C2475AT
078417	Trekk mikroklimatisk J2 DC b42 d42	C2477AT
078419	Trekk mikroklimatisk J2 DC b45 d40	C2486AT
078420	Trekk mikroklimatisk J2 DC b45 d45	C2488AT
078418	Trekk mikroklimatisk J2 DC b45 d50	C2480AT
078406	Trekk mikroklimatisk J2 DC b50 d40	C2406AT
078407	Trekk mikroklimatisk J2 DC b50 d45	C2408AT
078405	Trekk mikroklimatisk J2 DC b50 d50	C2400AT
078408	Trekk mikroklimatisk J2 DC b55 d40	C2426AT
078409	Trekk mikroklimatisk J2 DC b55 d45	C2428AT
078410	Trekk mikroklimatisk J2 DC b60 d45	C2448AT

Trekk inkontinens Jay J2 Cushion DC

078401	Trekk inko J2 DC b35 d35	C2444NI
078402	Trekk inko J2 DC b35 d40	C2446NI
016655	Trekk inko J2 DC b38 d38	C2455NI
016656	Trekk inko J2 DC b38 d42	C2457NI
016657	Trekk inko J2 DC b40 d40	C2466NI
016658	Trekk inko J2 DC b40 d45	C2468NI
016670	Trekk inko J2 DC b40 d50	C2460NI

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
016659	Trekk inko J2 DC b42 d38	C2475NI
016660	Trekk inko J2 DC b42 d42	C2477NI
016661	Trekk inko J2 DC b45 d40	C2486NI
016662	Trekk inko J2 DC b45 d45	C2488NI
016663	Trekk inko J2 DC b45 d50	C2480NI
016664	Trekk inko J2 DC b50 d40	C2406NI
016665	Trekk inko J2 DC b50 d45	C2408NI
001666	Trekk inko J2 DC b50 d50	C2400NI
016667	Trekk inko J2 DC b55 d40	C2426NI
016668	Trekk inko J2 DC b55 d45	C2428NI
016669	Trekk inko J2 DC b60 d45	C2448NI

Posisjoneringskomponenter Jay J2 DC

078358	Bekkenstøtter J2 DC h5 par	B1167
078361	Oljepad J2 DC b12 l25 ekstra	F119
004101	Kile J2 DC skråstilling	B114
004146	Bensamlere J2 DC h5 par	B113J
004148	Bensamlere J2 DC h2,5 par	B119J
004152	Bendeler J2 DC h5	B118
004153	Bendeler J2 DC bred h5	B118W

Innleggsplate Jay J2 Cushion DC

247819	Innleggsplate J2 DC b35 d35	S2444
247820	Innleggsplate J2 DC b35 d40	S2446
247821	Innleggsplate J2 DC b38 d38	S2455
247822	Innleggsplate J2 DC b38 d42	S2457
247823	Innleggsplate J2 DC b40 d40	S2466
247824	Innleggsplate J2 DC b40 d45	S2468
247825	Innleggsplate J2 DC b40 d50	S2460
247826	Innleggsplate J2 DC b42 d38	S2475
247827	Innleggsplate J2 DC b42 d42	S2477
247828	Innleggsplate J2 DC b45 d40	S2486
247829	Innleggsplate J2 DC b45 d45	S2488
247830	Innleggsplate J2 DC b45 d50	S2480
247831	Innleggsplate J2 DC b50 d40	S2406
247832	Innleggsplate J2 DC b50 d45	S2408
247833	Innleggsplate J2 DC b50 d50	S2400
247834	Innleggsplate J2 DC b55 d40	S2426
247835	Innleggsplate J2 DC b55 d45	S2428



Jay Xtreme Active Cushion S/L

Høyde foran: 8 cm høyde bak 8 cm (S), 9 cm (L)

Base: skum/olje

Trekk: mikroklimatisk

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
Hovedprodukt Jay Xtreme Active Cushion S		
202025	Xtreme Active S b34 d34	KJXAC3434SMEU
202026	Xtreme Active S b34 d36	KJXAC3436SMEU
202027	Xtreme Active S b36 d34	KJXAC3634SMEU
202028	Xtreme Active S b36 d36	KJXAC3636SMEU
202029	Xtreme Active S b36 d38	KJXAC3638SMEU
202030	Xtreme Active S b36 d40	KJXAC3640SMEU
255453	Xtreme Active S b36 d42	KJXAC3642SMEU
202031	Xtreme Active S b38 d38	KJXAC3838SMEU
202032	Xtreme Active S b38 d40	KJXAC3840SMEU
202033	Xtreme Active S b38 d42	KJXAC3842SMEU
202034	Xtreme Active S b38 d44	KJXAC3844SMEU
298839	Xtreme Active S b40 d38	KJXAC4038SMEU
202035	Xtreme Active S b40 d40	KJXAC4040SMEU
202036	Xtreme Active S b40 d42	KJXAC4042SMEU
202037	Xtreme Active S b40 d44	KJXAC4044SMEU
202038	Xtreme Active S b40 d46	KJXAC4046SMEU
202039	Xtreme Active S b42 d38	KJXAC4238SMEU
202040	Xtreme Active S b42 d40	KJXAC4240SMEU
202041	Xtreme Active S b42 d42	KJXAC4242SMEU
202042	Xtreme Active S b42 d44	KJXAC4244SMEU
202043	Xtreme Active S b42 d46	KJXAC4246SMEU
298840	Xtreme Active S b42 d48	KJXAC4248SMEU
298841	Xtreme Active S b44 d38	KJXAC4438SMEU
202044	Xtreme Active S b44 d40	KJXAC4440SMEU
202045	Xtreme Active S b44 d42	KJXAC4442SMEU
202046	Xtreme Active S b44 d44	KJXAC4444SMEU
202047	Xtreme Active S b44 d46	KJXAC4446SMEU
217355	Xtreme Active S b44 d48	KJXAC4448SMEU
298842	Xtreme Active S b44 d50	KJXAC4450SMEU
202048	Xtreme Active S b46 d42	KJXAC4642SMEU
202049	Xtreme Active S b46 d44	KJXAC4644SMEU
202050	Xtreme Active S b46 d46	KJXAC4646SMEU
298843	Xtreme Active S b46 d48	KJXAC4648SMEU
202051	Xtreme Active S b46 d50	KJXAC4650SMEU
202052	Xtreme Active S b48 d42	KJXAC4842SMEU
202053	Xtreme Active S b48 d44	KJXAC4844SMEU
202054	Xtreme Active S b48 d46	KJXAC4846SMEU
298844	Xtreme Active S b48 d48	KJXAC4848SMEU
298845	Xtreme Active S b48 d50	KJXAC4850SMEU
298846	Xtreme Active S b50 d42	KJXAC5042SMEU
202055	Xtreme Active S b50 d44	KJXAC5044SMEU
202056	Xtreme Active S b50 d46	KJXAC5046SMEU
298847	Xtreme Active S b50 d48	KJXAC5048SMEU
298848	Xtreme Active S b50 d50	KJXAC5050SMEU

Hovedprodukt Jay Xtreme Active Cushion L

202057	Xtreme Active L b36 d36	KJXAC3636LMEU
202058	Xtreme Active L b36 d38	KJXAC3638LMEU
202059	Xtreme Active L b36 d40	KJXAC3640LMEU
202060	Xtreme Active L b38 d38	KJXAC3838LMEU
202061	Xtreme Active L b38 d40	KJXAC3840LMEU
202062	Xtreme Active L b38 d42	KJXAC3842LMEU
202063	Xtreme Active L b38 d44	KJXAC3844LMEU
202064	Xtreme Active L b40 d40	KJXAC4040LMEU
202065	Xtreme Active L b40 d42	KJXAC4042LMEU
202066	Xtreme Active L b40 d44	KJXAC4044LMEU
202067	Xtreme Active L b40 d46	KJXAC4046LMEU
202068	Xtreme Active L b42 d38	KJXAC4238LMEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
202069	Xtreme Active L b42 d40	KJXAC4240LMEU
202070	Xtreme Active L b42 d42	KJXAC4242LMEU
202071	Xtreme Active L b42 d44	KJXAC4244LMEU
202072	Xtreme Active L b42 d46	KJXAC4246LMEU
202073	Xtreme Active L b44 d40	KJXAC4440LMEU
202074	Xtreme Active L b44 d42	KJXAC4442LMEU
202075	Xtreme Active L b44 d44	KJXAC4444LMEU
202076	Xtreme Active L b44 d46	KJXAC4446LMEU
298849	Xtreme Active L b44 d50	KJXAC4450LMEU
202077	Xtreme Active L b46 d42	KJXAC4642LMEU
202078	Xtreme Active L b46 d44	KJXAC4644LMEU
202079	Xtreme Active L b46 d46	KJXAC4646LMEU
202080	Xtreme Active L b46 d50	KJXAC4650LMEU
202081	Xtreme Active L b48 d44	KJXAC4844LMEU
202082	Xtreme Active L b48 d46	KJXAC4846LMEU
298850	Xtreme Active L b48 d50	KJXAC4850LMEU
202083	Xtreme Active L b50 d44	KJXAC5044LMEU
202084	Xtreme Active L b50 d46	KJXAC5046LMEU

Tilbehør og deler Jay Xtreme Active Cushion S/L

Trekk mikroklimatisk Xtreme Active Cushion S/L (std.)		
208714	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b34 d34	CJXAC3434MEU
208715	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b34 d36	CJXAC3436MEU
208716	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b36 d34	CJXAC3634MEU
208717	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b36 d36	CJXAC3636MEU
208718	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b36 d38	CJXAC3638MEU
208719	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b36 d40	CJXAC3640MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b36 d42	CJXAC3642MEU
208720	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b38 d38	CJXAC3838MEU
208721	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b38 d40	CJXAC3840MEU
208722	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b38 d42	CJXAC3842MEU
208723	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b38 d44	CJXAC3844MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b40 d38	CJXAC4038MEU
208724	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b40 d40	CJXAC4040MEU
208725	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b40 d42	CJXAC4042MEU
208726	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b40 d44	CJXAC4044MEU
208727	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b40 d46	CJXAC4046MEU
208728	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b42 d38	CJXAC4238MEU
208729	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b42 d40	CJXAC4240MEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
208730	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b42 d42	CJXAC4242MEU
208731	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b42 d44	CJXAC4244MEU
208732	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b42 d46	CJXAC4246MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b42 d48	CJXAC4248MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b44 d38	CJXAC4438MEU
208733	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b44 d40	CJXAC4440MEU
208734	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b44 d42	CJXAC4442MEU
208735	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b44 d44	CJXAC4444MEU
208736	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b44 d46	CJXAC4446MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b44 d48	CJXAC4448MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b44 d50	CJXAC4450MEU
208737	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b46 d42	CJXAC4642MEU
208738	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b46 d44	CJXAC4644MEU
208739	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b46 d46	CJXAC4646MEU
i/a	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b46 d48	CJXAC4648MEU
208740	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b46 d50	CJXAC4650MEU
208741	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b48 d42	CJXAC4842MEU
208742	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b48 d44	CJXAC4844MEU
208743	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b48 d46	CJXAC4846MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b48 d48	CJXAC4848MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b48 d50	CJXAC4850MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b50 d42	CJXAC5042MEU
208744	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b50 d44	CJXAC5044MEU
208745	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b50 d46	CJXAC5046MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b50 d48	CJXAC5048MEU
I/A	Trekk mikroklimatisk Xtreme Active b50 d50	CJXAC5050MEU

Trekk inkontinens Jay Xtreme Active Cushion S/L		
202117	Trekk inko Xtreme Active b34 d34	CJXAC3434IEU
202118	Trekk inko Xtreme Active b34 d36	CJXAC3436IEU
202119	Trekk inko Xtreme Active b36 d34	CJXAC3634IEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
202120	Trekk inko Xtreme Active b36 d36	CJXAC3636IEU
202121	Trekk inko Xtreme Active b36 d38	CJXAC3638IEU
202122	Trekk inko Xtreme Active b36 d40	CJXAC3640IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b36 d42	CJXAC3642IEU
202123	Trekk inko Xtreme Active b38 d38	CJXAC3838IEU
202124	Trekk inko Xtreme Active b38 d40	CJXAC3840IEU
202125	Trekk inko Xtreme Active b38 d42	CJXAC3842IEU
202126	Trekk inko Xtreme Active b38 d44	CJXAC3844IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b40 d38	CJXAC4038IEU
202127	Trekk inko Xtreme Active b40 d40	CJXAC4040IEU
202128	Trekk inko Xtreme Active b40 d42	CJXAC4042IEU
202129	Trekk inko Xtreme Active b40 d44	CJXAC4044IEU
202130	Trekk inko Xtreme Active b40 d46	CJXAC4046IEU
202131	Trekk inko Xtreme Active b42 d38	CJXAC4238IEU
202132	Trekk inko Xtreme Active b42 d40	CJXAC4240IEU
202133	Trekk inko Xtreme Active b42 d42	CJXAC4242IEU
202134	Trekk inko Xtreme Active b42 d44	CJXAC4244IEU
202135	Trekk inko Xtreme Active b42 d46	CJXAC4246IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b42 d48	CJXAC4248IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b44 d38	CJXAC4438IEU
202136	Trekk inko Xtreme Active b44 d40	CJXAC4440IEU
202137	Trekk inko Xtreme Active b44 d42	CJXAC4442IEU
202138	Trekk inko Xtreme Active b44 d44	CJXAC4444IEU
202139	Trekk inko Xtreme Active b44 d46	CJXAC4446IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b44 d48	CJXAC4448IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b44 d50	CJXAC4450IEU
202140	Trekk inko Xtreme Active b46 d42	CJXAC4642IEU
202141	Trekk inko Xtreme Active b46 d44	CJXAC4644IEU
202142	Trekk inko Xtreme Active b46 d46	CJXAC4646IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b46 d48	CJXAC4648IEU
202143	Trekk inko Xtreme Active b46 d50	CJXAC4650IEU
202144	Trekk inko Xtreme Active b48 d42	CJXAC4842IEU
202145	Trekk inko Xtreme Active b48 d44	CJXAC4844IEU
202146	Trekk inko Xtreme Active b48 d46	CJXAC4846IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b48 d48	CJXAC4848IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b48 d50	CJXAC4850IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b50 d42	CJXAC5042IEU
202147	Trekk inko Xtreme Active b50 d44	CJXAC5044IEU
202148	Trekk inko Xtreme Active b50 d46	CJXAC5046IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b50 d48	CJXAC5048IEU
i/a	Trekk inko Xtreme Active b50 d50	CJXAC5050IEU

Trekk stretch Jay Xtreme Active Cushion S/L

202085	Trekk stretch X. Active b34 d34	CJXAC3434SEU
202086	Trekk stretch X. Active b34 d36	CJXAC3436SEU
202087	Trekk stretch X. Active b36 d34	CJXAC3634SEU
202088	Trekk stretch X. Active b36 d36	CJXAC3636SEU
202089	Trekk stretch X. Active b36 d38	CJXAC3638SEU
202090	Trekk stretch X. Active b36 d40	CJXAC3640SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b36 d42	CJXAC3642SEU
202091	Trekk stretch X. Active b38 d38	CJXAC3838SEU
202092	Trekk stretch X. Active b38 d40	CJXAC3840SEU
202093	Trekk stretch X. Active b38 d42	CJXAC3842SEU
202094	Trekk stretch X. Active b38 d44	CJXAC3844SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b40 d38	CJXAC4038SEU
202095	Trekk stretch X. Active b40 d40	CJXAC4040SEU
202096	Trekk stretch X. Active b40 d42	CJXAC4042SEU
202097	Trekk stretch X. Active b40 d44	CJXAC4044SEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
202098	Trekk stretch X. Active b40 d46	CJXAC4046SEU
202099	Trekk stretch X. Active b42 d38	CJXAC4238SEU
202100	Trekk stretch X. Active b42 d40	CJXAC4240SEU
202101	Trekk stretch X. Active b42 d42	CJXAC4242SEU
202102	Trekk stretch X. Active b42 d44	CJXAC4244SEU
202103	Trekk stretch X. Active b42 d46	CJXAC4246SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b42 d48	CJXAC4248SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b44 d38	CJXAC4438SEU
202104	Trekk stretch X. Active b44 d40	CJXAC4440SEU
202105	Trekk stretch X. Active b44 d42	CJXAC4442SEU
202106	Trekk stretch X. Active b44 d44	CJXAC4444SEU
202107	Trekk stretch X. Active b44 d46	CJXAC4446SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b44 d48	CJXAC4448SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b44 d50	CJXAC4450SEU
202108	Trekk stretch X. Active b46 d42	CJXAC4642SEU
202109	Trekk stretch X. Active b46 d44	CJXAC4644SEU
202110	Trekk stretch X. Active b46 d46	CJXAC4646SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b46 d48	CJXAC4648SEU
202111	Trekk stretch X. Active b46 d50	CJXAC4650SEU
202112	Trekk stretch X. Active b48 d42	CJXAC4842SEU
202113	Trekk stretch X. Active b48 d44	CJXAC4844SEU
202114	Trekk stretch X. Active b48 d46	CJXAC4846SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b48 d48	CJXAC4848SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b48 d50	CJXAC4850SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b50 d42	CJXAC5042SEU
202115	Trekk stretch X. Active b50 d44	CJXAC5044SEU
202116	Trekk stretch X. Active b50 d46	CJXAC5046SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b50 d48	CJXAC5048SEU
i/a	Trekk stretch X. Active b50 d50	CJXAC5050SEU

Posisjonierungssett Xtreme Active S/L

202150	Posisjonierungssett Xtreme Active d34-42 h2,5	LSKJXACEU-S
202149	Posisjonierungssett Xtreme Active d44-50 h2,5	LSKJXACEU-R

Innleggsplate Xtreme Active S/L

Innleggsplate Xtreme Active b35 d35	JSI3535
Innleggsplate Xtreme Active b35 d40	JSI3540
Innleggsplate Xtreme Active b35 d45	JSI3545
Innleggsplate Xtreme Active b38 d40	JSI3840
Innleggsplate Xtreme Active b38 d42	JSI3842
Innleggsplate Xtreme Active b38 d44	JSI3844
Innleggsplate Xtreme Active b40 d40	JSI4040
Innleggsplate Xtreme Active b40 d42	JSI4042
Innleggsplate Xtreme Active b40 d44	JSI4044
Innleggsplate Xtreme Active b40 d46	JSI4046
Innleggsplate Xtreme Active b42 d40	JSI4240
Innleggsplate Xtreme Active b42 d42	JSI4242
Innleggsplate Xtreme Active b42 d44	JSI4244
Innleggsplate Xtreme Active b42 d46	JSI4246
Innleggsplate Xtreme Active b44 d40	JSI4440
Innleggsplate Xtreme Active b44 d42	JSI4442
Innleggsplate Xtreme Active b44 d44	JSI4444
Innleggsplate Xtreme Active b44 d46	JSI4446
Innleggsplate Xtreme Active b46 d42	JSI4642

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
	Innleggsplate Xtreme Active b46 d44	JSI4644
	Innleggsplate Xtreme Active b46 d46	JSI4646
	Innleggsplate Xtreme Active b46 d50	JSI4650
	Innleggsplate Xtreme Active b48 d42	JSI4842
	Innleggsplate Xtreme Active b48 d44	JSI4844
	Innleggsplate Xtreme Active b48 d46	JSI4846
	Innleggsplate Xtreme Active b48 d50	JSI4850
	Innleggsplate Xtreme Active b50 d42	JSI5042
	Innleggsplate Xtreme Active b50 d56	JSI5046
	Innleggsplate Xtreme Active b50 d50	JSI5050



Jay Balance Cushion DC Fluid

Høyde: 11 cm

Base: skum/olje

Trekk: mikroklimatisk Artnr: CJBALCDCsbsdMEU

Hovedprodukt Jay Balance DC Fluid Cushion

298779	Balance Cushion b34 d34	DC Fluid	JBALCDC3434FLMEU
298780	Balance Cushion b34 d36	DC Fluid	JBALCDC3436FLMEU
298781	Balance Cushion b34 d38	DC Fluid	JBALCDC3438FLMEU
298782	Balance Cushion b34 d40	DC Fluid	JBALCDC3440FLMEU
298783	Balance Cushion b34 d42	DC Fluid	JBALCDC3442FLMEU
298784	Balance Cushion b36 d36	DC Fluid	JBALCDC3636FLMEU
298785	Balance Cushion b36 d38	DC Fluid	JBALCDC3638FLMEU
298786	Balance Cushion b36 d40	DC Fluid	JBALCDC3640FLMEU
298787	Balance Cushion b36 d42	DC Fluid	JBALCDC3642FLMEU
298788	Balance Cushion b36 d44	DC Fluid	JBALCDC3644FLMEU
298789	Balance Cushion b36 d46	DC Fluid	JBALCDC3646FLMEU
298790	Balance Cushion b38 d36	DC Fluid	JBALCDC3836FLMEU
298791	Balance Cushion b38 d38	DC Fluid	JBALCDC3838FLMEU
298792	Balance Cushion b38 d40	DC Fluid	JBALCDC3840FLMEU
298793	Balance Cushion b38 d42	DC Fluid	JBALCDC3842FLMEU
298794	Balance Cushion b38 d44	DC Fluid	JBALCDC3844FLMEU
298795	Balance Cushion b38 d46	DC Fluid	JBALCDC3846FLMEU
298796	Balance Cushion b40 d38	DC Fluid	JBALCDC4038FLMEU
298797	Balance Cushion b40 d40	DC Fluid	JBALCDC4040FLMEU
298798	Balance Cushion b40 d42	DC Fluid	JBALCDC4042FLMEU
298799	Balance Cushion b40 d44	DC Fluid	JBALCDC4044FLMEU
298800	Balance Cushion b40 d46	DC Fluid	JBALCDC4046FLMEU
298801	Balance Cushion b42 d38	DC Fluid	JBALCDC4238FLMEU
298802	Balance Cushion b42 d40	DC Fluid	JBALCDC4240FLMEU
298803	Balance Cushion b42 d42	DC Fluid	JBALCDC4242FLMEU
298804	Balance Cushion b42 d44	DC Fluid	JBALCDC4244FLMEU
298805	Balance Cushion b42 d46	DC Fluid	JBALCDC4246FLMEU
298806	Balance Cushion b42 d48	DC Fluid	JBALCDC4248FLMEU
298807	Balance Cushion b44 d38	DC Fluid	JBALCDC4438FLMEU
298808	Balance Cushion b44 d40	DC Fluid	JBALCDC4440FLMEU

HMS art.nr:	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
298809	Balance Cushion b44 d42 DC Fluid	JBALCDC4442FLMEU
298810	Balance Cushion b44 d44 DC Fluid	JBALCDC4444FLMEU
298811	Balance Cushion b44 d46 DC Fluid	JBALCDC4446FLMEU
298812	Balance Cushion b44 d48 DC Fluid	JBALCDC4448FLMEU
298813	Balance Cushion b44 d50 DC Fluid	JBALCDC4450FLMEU
298814	Balance Cushion b46 d42 DC Fluid	JBALCDC4642FLMEU
298815	Balance Cushion b46 d44 DC Fluid	JBALCDC4644FLMEU
298816	Balance Cushion b46 d46 DC Fluid	JBALCDC4646FLMEU
298817	Balance Cushion b46 d48 DC Fluid	JBALCDC4648FLMEU
298818	Balance Cushion b46 d50 DC Fluid	JBALCDC4650FLMEU
298819	Balance Cushion b48 d42 DC Fluid	JBALCDC4842FLMEU
298820	Balance Cushion b48 d44 DC Fluid	JBALCDC4844FLMEU
298821	Balance Cushion b48 d46 DC Fluid	JBALCDC4846FLMEU
298822	Balance Cushion b48 d48 DC Fluid	JBALCDC4848FLMEU
298823	Balance Cushion b48 d50 DC Fluid	JBALCDC4850FLMEU
298824	Balance Cushion b50 d42 DC Fluid	JBALCDC5042FLMEU
298825	Balance Cushion b50 d44 DC Fluid	JBALCDC5044FLMEU
298826	Balance Cushion b50 d46 DC Fluid	JBALCDC5046FLMEU
298827	Balance Cushion b50 d48 DC Fluid	JBALCDC5048FLMEU
298828	Balance Cushion b50 d50 DC Fluid	JBALCDC5050FLMEU
298829	Balance Cushion b56 d46 DC Fluid	JBALCDC5646FLMEU
298830	Balance Cushion b56 d48 DC Fluid	JBALCDC5648FLMEU
298831	Balance Cushion b56 d50 DC Fluid	JBALCDC5650FLMEU
298832	Balance Cushion b56 d56 DC Fluid	JBALCDC5656FLMEU
298833	Balance Cushion b56 d60 DC Fluid	JBALCDC5660FLMEU
298834	Balance Cushion b60 d46 DC Fluid	JBALCDC6046FLMEU
298835	Balance Cushion b60 d48 DC Fluid	JBALCDC6048FLMEU
298836	Balance Cushion b60 d50 DC Fluid	JBALCDC6050FLMEU
298837	Balance Cushion b60 d56 DC Fluid	JBALCDC6056FLMEU
298838	Balance Cushion b60 d60 DC Fluid	JBALCDC6060FLMEU

**Jay Balance Cushion Cryo Fluid****Høyde: 8,5 cm****Base: skum/olje****Trekk: mikroklimatisk****Hovedprodukt Jay Balance Cushion Cryo Fluid**

Balance Cryo Fluid sb36 sd36	JBALC3636CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb36 sd38	JBALC3638CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb36 sd40	JBALC3640CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb36 sd42	JBALC3642CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb36 sd44	JBALC3644CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb36 sd46	JBALC3646CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb38 sd36	JBALC3836CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb38 sd38	JBALC3838CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb38 sd40	JBALC3840CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb38 sd42	JBALC3842CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb38 sd44	JBALC3844CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb38 sd46	JBALC3846CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb40 sd38	JBALC4038CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb40 sd40	JBALC4040CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb40 sd42	JBALC4042CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb40 sd44	JBALC4044CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb40 sd46	JBALC4046CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb42 sd38	JBALC4238CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb42 sd40	JBALC4240CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb42 sd42	JBALC4242CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb42 sd44	JBALC4244CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb42 sd46	JBALC4246CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb42 sd48	JBALC4248CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb44 sd38	JBALC4438CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb44 sd40	JBALC4440CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb44 sd42	JBALC4442CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb44 sd44	JBALC4444CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb44 sd46	JBALC4446CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb44 sd48	JBALC4448CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb44 sd50	JBALC4450CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb46 sd42	JBALC4642CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb46 sd44	JBALC4644CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb46 sd46	JBALC4646CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb46 sd48	JBALC4648CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb46 sd50	JBALC4650CFLMEU
Balance Cryo Fluid sb48 sd42	JBALC4842CFLMEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
	Balance Cryo Fluid sb48 sd44	JBALC4844CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb48 sd46	JBALC4846CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb48 sd48	JBALC4848CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb48 sd50	JBALC4850CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb50 sd42	JBALC5042CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb50 sd44	JBALC5044CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb50 sd46	JBALC5046CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb50 sd48	JBALC5048CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb50 sd50	JBALC5050CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb56 sd46	JBALC5646CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb56 sd48	JBALC5648CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb56 sd50	JBALC5650CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb56 sd56	JBALC5656CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb56 sd60	JBALC5660CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb60 sd46	JBALC6046CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb60 sd48	JBALC6048CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb60 sd50	JBALC6050CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb60 sd56	JBALC6056CFLMEU
	Balance Cryo Fluid sb60 sd60	JBALC6060CFLMEU

**Jay J2 Cushion Plus****Høyde: 12cm****Base: skum/olje****Trekk: inkontinenstrekk****Hovedprodukt Jay J2 Cushion Plus**

J2 Plus b55 l45 h6 olje skum	302218NIFL
J2 Plus b55 l50 h6 olje skum	302220NIFL
J2 Plus b55 l55 h6 olje skum	302222NIFL
J2 Plus b60 l45 h6 olje skum	302418NIFL
J2 Plus b60 l50 h6 olje skum	302420NIFL
J2 Plus b60 l55 h6 olje skum	302422NIFL
J2 Plus b60 l60 h6 olje skum	302424NIFL

Kompletterende produkter**Bilpute**

Bilpute	FLJXAC-L1EU
(består av 2 artikkelnummer)	C141

Lumbalpute

138635	Lumbalpute Jay Combi liten	251XB
138620	Lumbalpute Jay Combi medium	250XB

HMS art.nr:	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
	Jay Caliper	
	Skyvelær br/l måling	JCALIPER





Rygger

ARTIKKELOVERSIKT RYGGER



JAY J3 SC Grunn kontur.....	85	Sidestøtter J3 rygger.....	88
Jay J3 MC Medium kontur	85	Ryggforlenger/oppbevaringslomme J3....	88
Jay J3 DC Dyp kontur	86	Ryggtrekkforlenger	88
Jay J3 MDC Medium dyp kontur	86	Posisjoneringsdeler rygger	88
Jay J3 XMDC Medium ekstra dyp kontur	87	Posisjoneringsdeler J3.....	88
Jay J3 XDC Ekstra dyp kontur.....	87	Jay Fit 2U rygg	89
Jay J3 Carbon.....	87	Sidestøtter Jay Fit 2U.....	89
Fester J3 rygger	88	Posisjoneringsdeler Jay Fit 2U.....	89
		Whitmyer hodestøtter	90

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



JAY J3 SC Grunn kontur

Moderat sidestøtte

Kontur 5 cm

180891	Jay J3 SC b31 rh20 d5	J3SCLTM31
180895	Jay J3 SC b31 rh24 d5	J3SCLTT31
180901	Jay J3 SC b31 rh30 d5	J3SCMTS31
180900	Jay J3 SC b31 rh34 d5	J3SCMTM31
180906	Jay J3 SC b31 rh38 d5	J3SCMTT31
180917	Jay J3 SC b31 rh42 d5	J3SCUTS31
180892	Jay J3 SC b36 rh17 d5	J3SCLTS36
151692	Jay J3 SC b36 rh20 d5	J3SCLTM36
163436	Jay J3 SC b36 rh24 d5	J3SCLTT36
160009	Jay J3 SC b36 rh30 d5	J3SCMTS36
151695	Jay J3 SC b36 rh34 d5	J3SCMTM36
180907	Jay J3 SC b36 rh38 d5	J3SCMTT36
161662	Jay J3 SC b36 rh42 d5	J3SCUTS36
151702	Jay J3 SC b36 rh46 d5	J3SCUTM36
168449	Jay J3 SC b36 rh50 d5	J3SCUTT36
180911	Jay J3 SC b36 rh53 d5	J3SCSHS36
180893	Jay J3 SC b41 rh17 d5	J3SCLTS41
151693	Jay J3 SC b41 rh20 d5	J3SCLTM41
163434	Jay J3 SC b41 rh24 d5	J3SCLTT41
159087	Jay J3 SC b41 rh30 d5	J3SCMTS41
151696	Jay J3 SC b41 rh34 d5	J3SCMTM41
180908	Jay J3 SC b41 rh38 d5	J3SCMTT41
168450	Jay J3 SC b41 rh42 d5	J3SCUTS41
151703	Jay J3 SC b41 rh46 d5	J3SCUTM41
168452	Jay J3 SC b41 rh50 d5	J3SCUTT41
180912	Jay J3 SC b41 rh53 d5	J3SCSHS41
151699	Jay J3 SC b41 rh57 d5	J3SCSHM41
180894	Jay J3 SC b46 rh17 d5	J3SCLTS46
151694	Jay J3 SC b46 rh20 d5	J3SCLTM46
163435	Jay J3 SC b46 rh24 d5	J3SCLTT46
180904	Jay J3 SC b46 rh30 d5	J3SCMTS46
151697	Jay J3 SC b46 rh34 d5	J3SCMTM46
180909	Jay J3 SC b46 rh38 d5	J3SCMTT46
168453	Jay J3 SC b46 rh42 d5	J3SCUTS46
151704	Jay J3 SC b46 rh46 d5	J3SCUTM46
168455	Jay J3 SC b46 rh50 d5	J3SCUTT46
180913	Jay J3 SC b46 rh53 d5	J3SCSHS46
151700	Jay J3 SC b46 rh57 d5	J3SCSHM46
180915	Jay J3 SC b46 rh61 d5	J3SCSHT46
180899	Jay J3 SC b51 rh24 d5	J3SCLTT51
180905	Jay J3 SC b51 rh30 d5	J3SCMTS51
151698	Jay J3 SC b51 rh34 d5	J3SCMTM51
180910	Jay J3 SC b51 rh38 d5	J3SCMTT51

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------

168456	Jay J3 SC b51 rh42 d5	J3SCUTS51
151705	Jay J3 SC b51 rh46 d5	J3SCUTM51
168458	Jay J3 SC b51 rh50 d5	J3SCUTT51
180914	Jay J3 SC b51 rh53 d5	J3SCSHS51
151701	Jay J3 SC b51 rh57 d5	J3SCSHM51
180916	Jay J3 SC b51 rh61 d5	J3SCSHT51



Jay J3 MC Medium kontur

Medium sidestøtte

Kontur: 8 cm

180862	Jay J3 MC b31 rh30 d8	J3MCMTS31
180857	Jay J3 MC b31 rh34 d8	J3MCMTM31
	Jay J3 MC b31 rh38 d8	J3MCMTT31
180882	Jay J3 MC b31 rh42 d8	J3MCUTS31
180863	Jay J3 MC b36 rh30 d8	J3MCMTS36
173806	Jay J3 MC b36 rh34 d8	J3MCMTM36
180866	Jay J3 MC b36 rh38 d8	J3MCMTT36
180883	Jay J3 MC b36 rh42 d8	J3MCUTS36
180879	Jay J3 MC b36 rh46 d8	J3MCUTM36
180887	Jay J3 MC b36 rh50 d8	J3MCUTT36
180873	Jay J3 MC b36 rh53 d8	J3MCSHS36
180864	Jay J3 MC b41 rh30 d8	J3MCMTS41
180860	Jay J3 MC b41 rh34 d8	J3MCMTM41
180867	Jay J3 MC b41 rh38 d8	J3MCMTT41
180884	Jay J3 MC b41 rh42 d8	J3MCUTS41
180859	Jay J3 MC b41 rh46 d8	J3MCUTM41
180888	Jay J3 MC b41 rh50 d8	J3MCUTT41
180874	Jay J3 MC b41 rh53 d8	J3MCSHS41
180870	Jay J3 MC b41 rh57 d8	J3MCSHM41
180865	Jay J3 MC b46 rh30 d8	J3MCMTS46
180861	Jay J3 MC b46 rh34 d8	J3MCMTM46
180868	Jay J3 MC b46 rh38 d8	J3MCMTT46
180885	Jay J3 MC b46 rh42 d8	J3MCUTS46
180880	Jay J3 MC b46 rh46 d8	J3MCUTM46
180889	Jay J3 MC b46 rh50 d8	J3MCUTT46
180875	Jay J3 MC b46 rh53 d8	J3MCSHS46
180871	Jay J3 MC b46 rh57 d8	J3MCSHM46
180877	Jay J3 MC b46 rh61 d8	J3MCSHT46
	Jay J3 MC b51 rh30 d8	J3MCMTS51
	Jay J3 MC b51 rh34 d8	J3MCMTM51
180869	Jay J3 MC b51 rh38 d8	J3MCMTT51
180886	Jay J3 MC b51 rh42 d8	J3MCUTS51
180881	Jay J3 MC b51 rh46 d8	J3MCUTM51
180890	Jay J3 MC b51 rh50 d8	J3MCUTT51
180876	Jay J3 MC b51 rh53 d8	J3MCSHS51
180872	Jay J3 MC b51 rh57 d8	J3MCSHM51
180878	Jay J3 MC b51 rh61 d8	J3MCSHT51

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Jay J3 DC Dyp kontur

Full sidestøtte

Kontur: 15 cm

158646	Jay J3 DC b36 rh42 d15	J3DCUTS36
151688	Jay J3 DC b36 rh46 d15	J3DCUTM36
168436	Jay J3 DC b36 rh50 d15	J3DCUTT36
157878	Jay J3 DC b36 rh53 d15	J3DCSHS36
157323	Jay J3 DC b41 rh42 d15	J3DCUTS41
151689	Jay J3 DC b41 rh46 d15	J3DCUTM41
157476	Jay J3 DC b41 rh50 d15	J3DCUTT41
164313	Jay J3 DC b41 rh53 d15	J3DCSHS41
151685	Jay J3 DC b41 rh57 d15	J3DCSHM41
164314	Jay J3 DC b46 rh42 d15	J3DCUTS46
151690	Jay J3 DC b46 rh46 d15	J3DCUTM46
164498	Jay J3 DC b46 rh50 d15	J3DCUTT46
180796	Jay J3 DC b46 rh53 d15	J3DCSHS46
151686	Jay J3 DC b46 rh57 d15	J3DCSHM46
157475	Jay J3 DC b46 rh61 d15	J3DCSHT46
168444	Jay J3 DC b51 rh42 d15	J3DCUTS51
151691	Jay J3 DC b51 rh46 d15	J3DCUTM51
168446	Jay J3 DC b51 rh50 d15	J3DCUTT51
180797	Jay J3 DC b51 rh53 d15	J3DCSHS51
151687	Jay J3 DC b51 rh57 d15	J3DCSHM51
180799	Jay J3 DC b51 rh61 d15	J3DCSHT51



Jay J3 MDC Medium dyp kontur

Full sidestøtte

Kontur: 15 cm

Jay J3 MDC b31 rh30 d15	J3MDCMTS31
Jay J3 MDC b31 rh34 d15	J3MDCMTM31
Jay J3 MDC b31 rh38 d15	J3MDCMTT31

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------

Jay J3 MDC b31 rh42 d15	J3MDCUTS31
Jay J3 MDC b36 rh20 d15	J3MDCLTM36
Jay J3 MDC b36 rh24 d15	J3MDCLTT36
202235 Jay J3 MDC b36 rh30 d15	J3MDCMTS36
Jay J3 MDC b36 rh34 d15	J3MDCMTM36
202952 Jay J3 MDC b36 rh38 d15	J3MDCMTT36
Jay J3 MDC b36 rh42 d15	J3MDCUTS36
202950 Jay J3 MDC b36 rh46 d15	J3MDCUTM36
Jay J3 MDC b36 rh50 d15	J3MDCUTT36
202949 Jay J3 MDC b36 rh53 d15	J3MDCSHS36
Jay J3 MDC b41 rh20 d15	J3MDCLTM41
Jay J3 MDC b41 rh24 d15	J3MDCLTT41
202801 Jay J3 MDC b41 rh30 d15	J3MDCMTS41
Jay J3 MDC b41 rh34 d15	J3MDCMTM41
202943 Jay J3 MDC b41 rh38 d15	J3MDCMTT41
Jay J3 MDC b41 rh42 d15	J3MDCUTS41
202939 Jay J3 MDC b41 rh46 d15	J3MDCUTM41
Jay J3 MDC b41 rh50 d15	J3MDCUTT41
202936 Jay J3 MDC b41 rh53 d15	J3MDCSHS41
Jay J3 MDC b41 rh57 d15	J3MDCSHM41
Jay J3 MDC b46 rh20 d15	J3MDCLTM46
Jay J3 MDC b46 rh24 d15	J3MDCLTT46
203470 Jay J3 MDC b46 rh30 d15	J3MDCMTS46
Jay J3 MDC b46 rh30 d15 HD feste	J3MDCMTS46HD
Jay J3 MDC b46 rh34 d15	J3MDCMTM46
202945 Jay J3 MDC b46 rh38 d15	J3MDCMTT46
Jay J3 MDC b46 rh38 d15 HD feste	J3MDCMTT46HD
Jay J3 MDC b46 rh42 d15	J3MDCUTS46
202940 Jay J3 MDC b46 rh46 d15	J3MDCUTM46
Jay J3 MDC b46 rh50 d15	J3MDCUTT46
202937 Jay J3 MDC b46 rh53 d15	J3MDCSHS46
Jay J3 MDC b46 rh57 d15	J3MDCSHM46
Jay J3 MDC b46 rh60 d15	J3MDCSHT46
Jay J3 MDC b51 rh24 d15	J3MDCLTT51
202946 Jay J3 MDC b51 rh30 d15	J3MDCMTS51
Jay J3 MDC b51 rh30 d15 HD feste	J3MDCMTS51HD
Jay J3 MDC b51 rh34 d15	J3MDCMTM51
202947 Jay J3 MDC b51 rh38 d15	J3MDCMTT51
Jay J3 MDC b51 rh38 d15 HD feste	J3MDCMTT51HD
Jay J3 MDC b51 rh42 d15	J3MDCUTS51
202941 Jay J3 MDC b51 rh46 d15	J3MDCUTM51
Jay J3 MDC b51 rh50 d15	J3MDCUTT51
202938 Jay J3 MDC b51 rh53 d15	J3MDCSHS51
Jay J3 MDC b51 rh57 d15	J3MDCSHM51
Jay J3 MDC b51 rh60 d15	J3MDCSHT51

HMS art.nr:	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Jay J3 XMDC Medium ekstra dyp kontur

Full sidestøtte
Kontur: 18 cm

Jay J3 XMDC b41 rh38 d18	J3XMDCMTT41
Jay J3 XMDC b41 rh46 d18	J3XMDCUTM41
Jay J3 XMDC b46 rh38 d18	J3XMDCMTT46
Jay J3 XMDC b46 rh46 d18	J3XMDCUTM46
Jay J3 XMDC b51 rh38 d18	J3XMDCMTT51
Jay J3 XMDC b51 rh46 d18	J3XMDCUTM51



Jay J3 XDC Ekstra dyp kontur

Full sidestøtte
Kontur: 18 cm

Jay J3 XDC b41 rh46 d18	J3XDCUTM41
Jay J3 XDC b46 rh46 d18	J3XDCUTM46
Jay J3 XDC b51 rh46 d18	J3XDCUTM51

HMS art.nr:	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Jay J3 Carbon

Moderat sidestøtte
Kontur: 5 cm

Jay J3 Carbon b32 rh17 d5 fester faste	J3BCFSCSLTS32FX
Jay J3 Carbon b32 rh17 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTS32QR
Jay J3 Carbon b32 rh24 d5 fester faste	J3BCFSCSLTT32FX
Jay J3 Carbon b32 rh24 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTT32QR
Jay J3 Carbon b32 rh30 d5 fester faste	J3BCFSCMTS32FX
Jay J3 Carbon b32 rh30 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTS32QR
Jay J3 Carbon b32 rh38 d5 fester faste	J3BCFSCMTT32FX
Jay J3 Carbon b32 rh38 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTT32QR
Jay J3 Carbon b36 rh17 d5 fester faste	J3BCFSCSLTS36FX
Jay J3 Carbon b36 rh17 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTS36QR
Jay J3 Carbon b36 rh24 d5 fester faste	J3BCFSCSLTT36FX
Jay J3 Carbon b36 rh24 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTT36QR
Jay J3 Carbon b36 rh30 d5 fester faste	J3BCFSCMTS36FX
Jay J3 Carbon b36 rh30 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTS36QR
Jay J3 Carbon b36 rh38 d5 fester faste	J3BCFSCMTT36FX
Jay J3 Carbon b36 rh38 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTT36QR
Jay J3 Carbon b41 rh17 d5 fester faste	J3BCFSCSLTS41FX
Jay J3 Carbon b41 rh17 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTS41QR
Jay J3 Carbon b41 rh24 d5 fester faste	J3BCFSCSLTT41FX
Jay J3 Carbon b41 rh24 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTT41QR
Jay J3 Carbon b41 rh30 d5 fester faste	J3BCFSCMTS41FX
Jay J3 Carbon b41 rh30 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTS41QR
Jay J3 Carbon b41 rh38 d5 fester faste	J3BCFSCMTT41FX
Jay J3 Carbon b41 rh38 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTT41QR
Jay J3 Carbon b46 rh24 d5 fester faste	J3BCFSCSLTT46FX
Jay J3 Carbon b46 rh24 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTT46QR
Jay J3 Carbon b46 rh30 d5 fester faste	J3BCFSCMTS46FX

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
207210	Jay J3 Carbon b46 rh30 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTS46QR
	Jay J3 Carbon b46 rh38 d5 fester faste	J3BCFSCMTT46FX
	Jay J3 Carbon b46 rh38 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTT46QR

Fester J3 rygger

	Feste Jay J3 rygg HD par (del montert på stol)	J3EUHDCHRDW
	Feste Jay J3 rygg standard par (del montert på stol)	J3EUCHRDW
	Festebrakett Jay J3 rygg HD par (del montert på rygg)	J3EUHDCHRDWS
	Festebrakett Jay J3 rygg standard par (del montert på rygg)	J3EUCHRDWS
	Festebrakett Jay J3 for Etac cross	J3RFE5

Sidestøtter J3 rygger

180808	Sidestøtte Jay J3 b10 h10 fast hø	J3LAT1010FXRH
180810	Sidestøtte Jay J3 b10 h10 fast ve	J3LAT1010FXLH
180811	Sidestøtte Jay J3 b10 h10 utsvingbar hø	JLATS1010RH
180809	Sidestøtte Jay J3 b10 h10 utsvingbar ve	JLATS1010LH
180813	Sidestøtte Jay J3 b10 h12 fast hø	J3LAT1012FXRH
180812	Sidestøtte Jay J3 b10 h12 fast ve	J3LAT1012FXLH
180815	Sidestøtte Jay J3 b10 h12 utsvingbar hø	JLATS1012RH
180814	Sidestøtte Jay J3 b10 h12 utsvingbar ve	JLATS1012LH
180817	Sidestøtte Jay J3 b10 h15 fast hø	J3LAT1015FXRH
180816	Sidestøtte Jay J3 b10 h15 fast ve	J3LAT1015FXLH
180819	Sidestøtte Jay J3 b10 h15 utsvingbar hø	JLATS1015RH
180818	Sidestøtte Jay J3 b10 h15 utsvingbar ve	JLATS1015LH
180821	Sidestøtte Jay J3 b15 h10 fast hø	J3LAT1510FXRH
180820	Sidestøtte Jay J3 b15 h10 fast ve	J3LAT1510FXLH
180823	Sidestøtte Jay J3 b15 h10 utsvingbar hø	JLATS1510RH
180822	Sidestøtte Jay J3 b15 h10 utsvingbar ve	JLATS1510LH
180825	Sidestøtte Jay J3 b15 h12 fast hø	J3LAT1512FXRH
180824	Sidestøtte Jay J3 b15 h12 fast ve	J3LAT1512FXLH
180827	Sidestøtte Jay J3 b15 h12 utsvingbar hø	JLATS1512RH
180826	Sidestøtte Jay J3 b15 h12 utsvingbar ve	JLATS1512LH
180829	Sidestøtte Jay J3 b15 h15 fast hø	J3LAT1515FXRH
180828	Sidestøtte Jay J3 b15 h15 fast ve	J3LAT1515FXLH
180831	Sidestøtte Jay J3 b15 h15 utsvingbar hø	JLATS1515RH
180830	Sidestøtte Jay J3 b15 h15 utsvingbar ve	JLATS1515LH
138674	Sidestøtte Jay utsvingbar innvendig mont	477000

Ryggforlenger/oppbevaringslomme J3

218868	Trekk ryggforlenger Jay J3 rygg b32 integrert lomme	ABJ3BCF32
218869	Trekk ryggforlenger Jay J3 rygg b36 integrert lomme	ABJ3BCF36
218870	Trekk ryggforlenger Jay J3 rygg b41 integrert lomme	ABJ3BCF41
218871	Trekk ryggforlenger Jay J3 rygg b45 integrert lomme	ABJ3BCF45

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
	J3 Ryggtrekkforlenger sb31	J3BVF31
218873	J3 Ryggtrekkforlenger sb36	J3BVF36
213320	J3 Ryggtrekkforlenger sb41	J3BVF41
215552	J3 Ryggtrekkforlenger sb46	J3BVF46
	J3 Ryggtrekkforlenger sb51	J3BVF51

Posisjoneringsdeler rygger

Posisjoneringsdeler J3	
Bekkenstøtte Jay J3 lateral	J3SPNLP
Innlegg Jay J3 erterpose liten	J3SPNSBB
Innlegg Jay J3 erterpose stor	J3SPNLBB
Innlegg Jay J3 buet	J3SPNCRS
Innlegg Jay J3/flat	J3SPNFLS
Innlegg Jay J3 sidestøtte	J3SPNLLS
Kile Jay J3 b36 h16 d4	J3SPNWE36
Kile Jay J3 b41 h16 d4	J3SPNWE41
Kile Jay J3 b46 h16 d4	J3SPNWE46
Kile Jay J3 b51 h16 d4	J3SPNWE51
Lumbalstøtte Jay J3 b36 b9 h11 d2,5	J3SPNSL36
Lumbalstøtte Jay J3 b36 b9 h18 d4	J3SPNLL36
Lumbalstøtte Jay J3 b41 b14 h11 d2,5	J3SPNSL41
Lumbalstøtte Jay J3 b41 b14 h18 d4	J3SPNLL41
Lumbalstøtte Jay J3 b46 b19 h11 d2,5	J3SPNSL46
Lumbalstøtte Jay J3 b46 b19 h18 d4	J3SPNLL46
Lumbalstøtte Jay J3 b51 b24 h11 d2,5	J3SPNSL51
Lumbalstøtte Jay J3 b51 b24 h18 d4	J3SPNLL51
Posisjoneringssett Jay J3 b36 12deler	J3SPNK236
Posisjoneringssett Jay J3 b36 7deler	J3SPNK136
Posisjoneringssett Jay J3 b41 12deler	J3SPNK241
Posisjoneringssett Jay J3 b41 7deler	J3SPNK141
Posisjoneringssett Jay J3 b46 12deler	J3SPNK246
Posisjoneringssett Jay J3 b46 7deler	J3SPNK146
Posisjoneringssett Jay J3 b51 12deler	J3SPNK251
Posisjoneringssett Jay J3 b51 7deler	J3SPNK151
180856 Stillingskorrigerer Jay J3 32 deler	J3SPNKEU
Festebrakett Jay J3 vest skulder	J3EUGPSG

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Jay Fit 2U rygg

Jay Fit 2U b25 h30	JFIT2UB2530EU
Jay Fit 2U b25 h35	JFIT2UB2535EU
Jay Fit 2U b30 h30	JFIT2UB3030EU
Jay Fit 2U b30 h35	JFIT2UB3035EU
Jay Fit 2U b30 h40	JFIT2UB3040EU
Jay Fit 2U b30 h45	JFIT2UB3045EU
Jay Fit 2U b35 h35	JFIT2UB3535EU
Jay Fit 2U b35 h40	JFIT2UB3540EU
Jay Fit 2U b35 h45	JFIT2UB3545EU
Jay Fit 2U b35 h50	JFIT2UB3550EU
Jay Fit 2U b40 h40	JFIT2UB4040EU
Jay Fit 2U b40 h45	JFIT2UB4045EU
Jay Fit 2U b40 h50	JFIT2UB4050EU
Jay Fit 2U b40 h55	JFIT2UB4055EU
Jay Fit 2U b45 h45	JFIT2UB4545EU
Jay Fit 2U b45 h50	JFIT2UB4550EU
Jay Fit 2U b45 h55	JFIT2UB4555EU
Jay Fit 2U b50 h45	JFIT2UB5045EU
Jay Fit 2U b50 h50	JFIT2UB5050EU
Jay Fit 2U b50 h55	JFIT2UB5055EU

Sidestøtter Jay Fit 2U

Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d10 h10 hø JLATRSA1010RH	JLATRSA1010RH
Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d10 h10 ve JLATRSA1010LH	JLATRSA1010LH
Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d10 h12 hø JLATRSA1012RH	JLATRSA1012RH
Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d10 h12 ve JLATRSA1012LH	JLATRSA1012LH
Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d10 h15 hø JLATRSA1015RH	JLATRSA1015RH
Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d10 h15 ve JLATRSA1015LH	JLATRSA1015LH
Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d15 h10 hø JLATRSA1510RH	JLATRSA1510RH
Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d15 h10 ve JLATRSA1510LH	JLATRSA1510LH
Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d15 h12 hø JLATRSA1512RH	JLATRSA1512RH
Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d15 h12 ve JLATRSA1512LH	JLATRSA1512LH

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------

Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d15 h15 hø JLATRSA1515RH	JLATRSA1515RH
Sidestøtte Jay Fit 2U utsvingbar rotasjon d15 h15 ve JLATRSA1515LH	JLATRSA1515LH
Sidestøtte Jay Fit 2U b10 h10 fast JFLATFX1010	JFLATFX1010
Sidestøtte Jay Fit 2U b10 h12 fast JFLATFX1012	JFLATFX1012
Sidestøtte Jay Fit 2U b10 h15 fast JFLATFX1015	JFLATFX1015
Sidestøtte Jay Fit 2U b15 h10 fast JFLATFX1510	JFLATFX1510
Sidestøtte Jay Fit 2U b15 h12 fast JFLATFX1512	JFLATFX1512
Sidestøtte Jay Fit 2U b15 h15 fast JFLATFX1515	JFLATFX1515

Posisjoneringsdeler Jay Fit 2U

Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b25 h30 JF2UBEPFK2530	JF2UBEPFK2530
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b25 h35 JF2UBEPFK2535	JF2UBEPFK2535
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b30 h30 JF2UBEPFK3030	JF2UBEPFK3030
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b30 h35 JF2UBEPFK3035	JF2UBEPFK3035
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b30 h40 JF2UBEPFK3040	JF2UBEPFK3040
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b30 h45 JF2UBEPFK3045	JF2UBEPFK3045
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b35 h35 JF2UBEPFK3535	JF2UBEPFK3535
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b35 h40 JF2UBEPFK3540	JF2UBEPFK3540
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b35 h45 JF2UBEPFK3545	JF2UBEPFK3545
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b35 h50 JF2UBEPFK3550	JF2UBEPFK3550
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b40 h40 JF2UBEPFK4040	JF2UBEPFK4040
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b40 h45 JF2UBEPFK4045	JF2UBEPFK4045
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b40 h50 JF2UBEPFK4050	JF2UBEPFK4050
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b40 h55 JF2UBEPFK4055	JF2UBEPFK4055
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b45 h45 JF2UBEPFK4545	JF2UBEPFK4545
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b45 h50 JF2UBEPFK4550	JF2UBEPFK4550
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b45 h55 JF2UBEPFK4555	JF2UBEPFK4555
Posisjoneringssskum Jay Fit 2U sett f/ rygg b50 h45 JF2UBEPFK5045	JF2UBEPFK5045

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
	Posisjoneringsskum Jay Fit 2U sett f/rygg b50 h50 JF2UBEPFK5050	JF2UBEPFK5050
	Posisjoneringsskum Jay Fit 2U sett f/rygg b50 h55 JF2UBEPFK5055	JF2UBEPFK5055
	Ryggforhøyer Jay Fit 2U sett f/rygg h30 JF2UBEXF30	JF2UBEXF30
	Ryggforhøyer Jay Fit 2U sett f/rygg h35 JF2UBEXF35	JF2UBEXF35
	Ryggforhøyer Jay Fit 2U sett f/rygg h40 JF2UBEXF40	F2UBEXF40
	Ryggforhøyer Jay Fit 2U sett f/rygg h45 JF2UBEXF45	JF2UBEXF45
	Ryggforhøyer Jay Fit 2U sett f/rygg h50 JF2UBEXF50	JF2UBEXF50
	Ryggforhøyer Jay Fit 2U sett f/rygg h55 JF2UBEXF55	JF2UBEXF55
	Voksesett Jay Fit 2U bredde og høyde f/rygg b25 JF2UBGFK25	JF2UBGFK25
	Voksesett Jay Fit 2U bredde og høyde f/rygg b30 JF2UBGFK30	JF2UBGFK30
	Voksesett Jay Fit 2U bredde og høyde f/rygg b35 JF2UBGFK35	JF2UBGFK35
	Voksesett Jay Fit 2U bredde og høyde f/rygg b40 JF2UBGFK40	JF2UBGFK40
	Voksesett Jay Fit 2U bredde og høyde f/rygg b45 JF2UBGFK45	JF2UBGFK45
	Voksesett Jay Fit 2U bredde og høyde f/rygg b50 JF2UBGFK50	JF2UBGFK50
	Festebrakett Jay Fit 2U for vest JGPSG2	JGPSG2



Whitmyer hodestøtter

161737	Hodestøttepute Kontur	J3EUHDLCP
161738	Hodestøttepute Standard	J3EUHDLSP
217972	Støttestag hodestøtte nedfellbar	J3EUHDFH
217973	Støttestag hodestøtte standard	J3EUHDXH
218932	Universalfeste nakkestøtte	J3EUUHM



Høyere kunnskap gir bedre løsninger

Våre STEPS kurs gir helsepersonell og andre økt kunnskap, bedre produktkjennskap og en større forståelse for individuelle krav.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud /Asker og Bærum

Hanne Helgerud Tel. 975 25 131
hanne.helgerud@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
(Nord-/Øst)
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
(Sør-/Øst)
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Sentrum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Hanne Helgerud Tel. 975 25 131
hanne.helgerud@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
(Sør)
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
(Nord)
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.

MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.