



QUICKIE LIFE R



Quickie Life R

Chassis rígido e duradouro
com um look moderno

Rígida, duradoura e robusta; desenhada para satisfazer as exigências da vida moderna. A robustez que confere a estrutura rígida permite um aproveitamento eficiente da energia de propulsão.

Escolhe a armação: com apoio de pés fixos para uma maior leveza e um look de cadeira mais ativa ou com apoio de pés desmontáveis se desejar uma cadeira mais fácil de transportar. Uma Quickie ao seu alcance!



Quickie Life R com apoios de pés fixos a 105° ou 95°
Disponível também com **apoio de pés desmontáveis a 70°, 80° ou 90°.**

Configuração que não é a standard

Espreme a tua vida ao máximo com a Quickie Life



Máxima resistência no seu dia a dia.

Quando vives a tua vida ao máximo, necessitas de uma cadeira que ofereça total confiança. Quickie Life R superou com êxito as provas mais exigentes, para garantir a **máxima resistência no seu dia a dia**.

A rigidez que lhe confere a **estrutura fixa** permite um aproveitamento eficiente da energia de propulsão, para que se centre no que é realmente importante. Além disso, o chassis incorpora uma barra transversal no encosto e outra por baixo do assento para facilitar as transferências e aumentar a rigidez da cadeira para uma maior precisão e rendimento na condução.

Desenho modular

A cadeira de rodas Quickie Life R permite seleccionar entre distintos tipos de armação. A versão com **apoios de pés fixos** está disponível a 105° e 95° e a versão com **apoios de pés desmontáveis** pode levar apoios de pés a 70°, 80° ou 90°.

Além disso, graças ao desenho modular da parte frontal é possível regular a profundidade do assento ou modificar uma vez configurada a cadeira o tipo de estrutura: o ângulo seleccionado ou inclusivamente converter os apoios de pés fixos em apoios de pés desmontáveis e vice versa




Quickie Life R com apoios de pés fixos

Ajustes e personalização

Quickie Life permite um **grande número de ajustes** para adaptar-se ao estilo de vida dos usuários mais ativos. Mas ... Porquê ficar por aqui? Possibilidade de escolher entre uma ampla gama de opções e cores da armação disponíveis ou adicionar partes na cor anodizada para conseguir uma cadeira única.



Altura do assento ajustável em 7 posições. Com 4 posições do camber (de 0° a 4°) e a placa do eixo disponível em 3 cores anodizadas (laranja, preto e cinza prata)

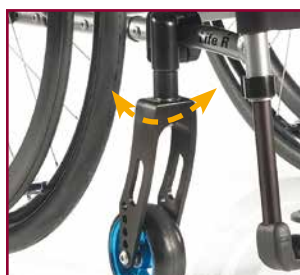

Simple ajuste do ângulo da forqueta. Amplo ângulo de ajuste para garantir um rendimento superior na condução.




Encosto ajustável em ângulo (opcional). Ligeiro e muito fácil de ajustar. Permite um ajuste de 20°, de -12° a +8° (em incrementos de 4°).



Estrutura com apoio de pés desmontáveis. Permite abater ou retirar completamente os apoios de pés, disponíveis a 70°, 80° e 90°.

Quickie Life R

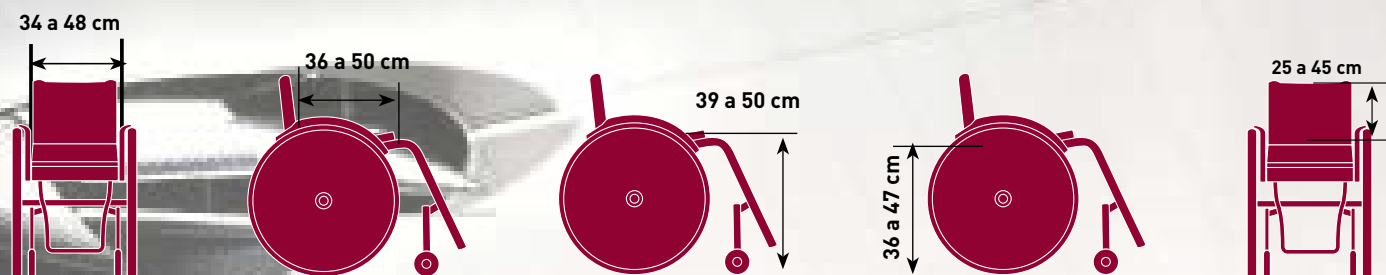

Especificações técnicas

Largura de assento:	34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)	Camber:	0° / 1° / 2° / 3° / 4°
Profundidade do assento:	36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)	Centro de Gravidade:	ajustável de 2,3 a 8,3 cm
Altura dianteira do assento:	39 a 50 cm	Peso Máx. do Utilizador:	125 kg
Altura traseira do assento:	36 a 47 cm	Peso total com apoios de pés fixos:	desde 10,5 kg
Altura do encosto:	25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)	Peso total com apoios de pés desmontáveis:	desde 11,5 kg
Ângulo do encosto:	De -12° a + 8° (opcional)	Cores da armação:	Disponível em 32 cores
Largura total:	Largura de assento + 20 cm (0° camber)	Crash Tested:	Si

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Para mais informação sobre opções e disponibilidade por favor consulte a folha de pedido.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34

Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt

