

J3 CARBON

FEEL THE DIFFERENCE

SI LEGER...

Le carbone est le matériau par excellence, reconnu pour sa légèreté et sa résistance – idéal pour ce dossier! Rigidité identique à un dossier en aluminium, mais 60% plus léger. Le poids du dossier J3 Carbon est comparable à celui d'une toile garantissant une maniabilité optimale du fauteuil avec un minimum d'effort .
Sentez la différence!



... ET SI RAFFINE

Le dossier J3 Carbon vous impressionnera par son style unique et ses finitions exemplaires. Un design actif et soigné combiné à une extrême élégance – il devient une partie intégrante de votre style.



LE SUPPORT INDISPENSABLE POUR ETRE ACTIF

Le dossier J3 Carbon combine excellente stabilité et confort. Grâce au support du bassin, il permet une stabilisation du tronc et favorise des courbures dorsales optimales. Cette caractéristique renforce la stabilité dont vous avez besoin pour une vie active, réduit les douleurs dorsales et vous procure un grand confort. De plus, grâce à cette posture stable que procure un dossier rigide sur un fauteuil roulant, l'Utilisateur transfère au châssis une force plus efficace tout en déployant moins d'efforts.

Essayez le et vous serez convaincu...



Pour tous les types de fauteuils

Que vous soyez adepte d'un châssis pliant ou rigide, le J3 Carbon est votre dossier. Deux types de fixations, fixes ou à démontage rapide, pour s'adapter aux différents types de fauteuils.

→ Simple & rapide à retirer


Un minimum d'effort pour installer et retirer son dossier avec les fixations à démontage rapide - idéales pour les fauteuils pliants.



Accessoire de rangement

Optez pour la pochette de dossier, discrète et élégante, pour y stocker vos effets personnels. Elle comblera également l'espace entre votre coussin et votre dossier.

Pochette de dossier

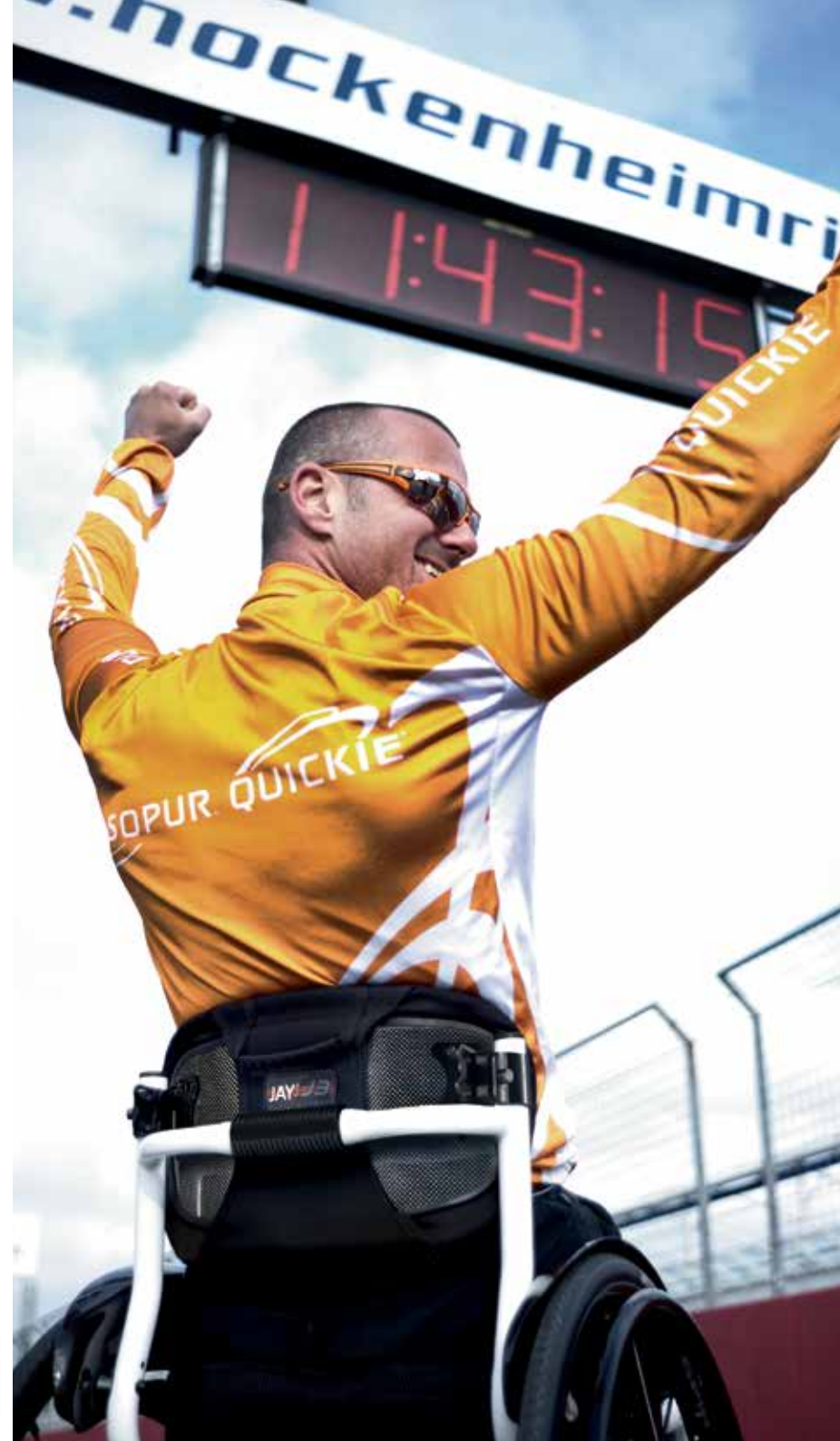

S'ADAPTE A VOTRE STYLE DE VIE

Fauteuil pliant ou rigide, le J3 Carbon répond à vos besoins!

Le dossier J3 Carbon est disponible avec deux types de fixations:

- ▶ Système fixe: offrant aux Utilisateurs de fauteuils à cadre rigide une solution légère .
- ▶ Système à démontage rapide: retrait simple et rapide du dossier, idéal pour les fauteuils pliants.

Quel que soit le choix, les deux systèmes de montage disposent de deux points de fixation facilitant l'installation et offrant les mêmes réglages en profondeur, en largeur, en angle et en hauteur. A chaque besoin postural, sa solution!



Système de fixations à démontage rapide
idéal pour les fauteuils pliants



Système de fixations fixes
la solution la plus légère





→ **Galbe peu profond**
Support du tronc modéré avec
5 cm de profondeur



→ **Quatre hauteurs disponibles**
17, 24, 30 et 38 cm

A chacun son dossier...!


Différents besoins nécessitant une solution adaptée.
Les quatre hauteurs de dossier s'adressent aux Utilisateurs actifs avec des besoins de positionnement variant de faibles à modérés.
Des cales lombaires fournies avec le dossier pour encourager l'extension thoracique, la répartition des pressions et le confort.



Bien-être avec la housse microaérée et la mousse souple

Le dossier J3 Carbon utilise une housse 3DX™ permettant l'aération, limitant l'accumulation de chaleur et évitant la transpiration. Confort et prévention anti-escarre sont ainsi optimisés
De plus, la housse recouvre la coque du dossier pour vous fournir une protection supplémentaire.
Lavable en machine à 60°C et séchage rapide.
Le bien-être au service des actifs!

→ **Housse J3 Carbon**
La technologie 3DX apporte
confort et bien-être

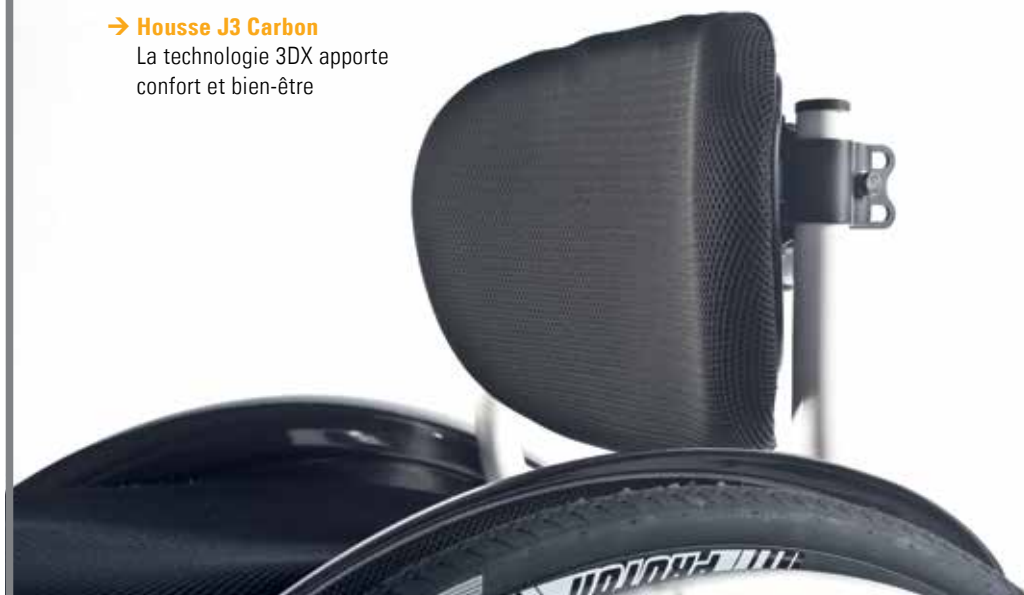

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs du dossier:	32 / 36 / 41 / 46 cm
Hauteurs du dossier:	17 / 24 / 30 / 38 cm
Enveloppement:	5 cm
Réglage en largeur:	sur 5 cm
Réglage en profondeur:	sur 4 cm
Réglage en angle:	± 20°
Réglage en hauteur:	selon la hauteur du dossier
Poids du dossier:	à partir de 690 g (largeur 32 cm - hauteur 17 cm - fixations fixes)
Fixations:	fixes ou à démontage rapide
Poids max. Utilisateur:	125 kg

Pour plus d'informations sur les options disponibles, veuillez consulter la fiche de mesure sur notre site internet.

Nos produits sont constamment améliorés, c'est pourquoi Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis le design et les données techniques de ses modèles.

Si vous êtes malvoyant, ce document peut être visualisés en format PDF sur www.SunriseMedical.fr ou adressé en agrandissement sur simple demande.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

