

# TECHNISCHE DATEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Max. Benutzergewicht: | 125 kg                                    |
| Rückenbreite:         | 32 / 36 / 41 / 46 cm                      |
| Rückenhöhe:           | 17 / 24 / 30 / 38 cm                      |
| Konturtiefe:          | 5 cm                                      |
| Rückenwinkel:         | ± 20°                                     |
| Gewicht des Rückens:  | ab 690 g inkl. Halterung                  |
| Halterung             | Ausführung fest und mit Schnellverschluss |
| Zubehör               | Zubehörtasche und Positionierungskeile    |
| Abrechnungsnummer     | 18.99.99.0099                             |

Weitere Informationen zu den kompletten technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular.

Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.

Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf [www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de) zur Verfügung oder es ist auch im Großdruck erhältlich.



## Sunrise Medical GmbH & Co. KG

Kahlbachring 2-4

D-69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: [kundenservice@sunrisemedical.de](mailto:kundenservice@sunrisemedical.de)

[www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)





# J3 CARBON RÜCKEN

## SPÜRE DEN UNTERSCHIED



# SO LEICHT...

---

Carbon ist leicht und stabil, somit das ideale Material für diesen Rücken. Der neue J3 Carbon Rücken bietet die gleiche Festigkeit wie Aluminium (ist aber um 60 % leichter) und verringert damit das Gewicht, das der Rollstuhlfahrer tagein, tagaus bewegt.

Sie werden den Unterschied feststellen!



## ... UND STYLISCH

---

Der J3 Carbon Rücken wird Sie auch mit seiner einzigartigen und ansprechenden Optik beeindrucken. Eine Kombination aus aktivem und klarem Design mit einem modernen Erscheinungsbild.



# DIE UNTERSTÜTZUNG FÜR EIN AKTIVES LEBEN

---

Der J3 Carbon Rücken stellt eine gute Sitzstabilität sicher. Durch die richtige Abstützung des Beckens wird der Oberkörper stabilisiert und die optimale Wirbelsäulenkrümmung gefördert. Dadurch bietet dieser Rücken die Unterstützung, die Sie für ein sehr aktives Leben brauchen und verringert Rückenschmerzen. Dazu kommt, dass die beim Antrieb des Rollstuhls erzeugte Kraft durch einen festen Rücken effektiver und effizienter auf den Rahmen übertragen wird. Das heißt, dass Sie Ihren Rollstuhl mit einem geringeren Aufwand bewegen.

Probieren Sie es einfach ...



## Für alle Arten von Rollstühlen

Egal, ob Sie einen Rollstuhl mit Starr- oder Faltrahmen haben, der J3 Carbon Rücken passt immer. Sowohl die feste Halterung als auch die mit Schnellverschluss sind an alle Arten von Rollstühlen montierbar.

### → Schnell und einfach abnehmen


Durch optionale Halterung mit Schnellverschluss leicht abnehmbar – ideal für Faltrollstühle.



## Wo sind meine Schlüssel?

In der neuen Zubehörtasche können Sie jetzt die Sachen aufbewahren, die man oft suchen muss. Sie können darin nicht nur alle Ihre Wertsachen aufbewahren, es wird damit auch die Lücke zwischen Ihrem Rücken und dem Sitzkissen abgedeckt.

Die nützliche, stilvolle Zubehörtasche

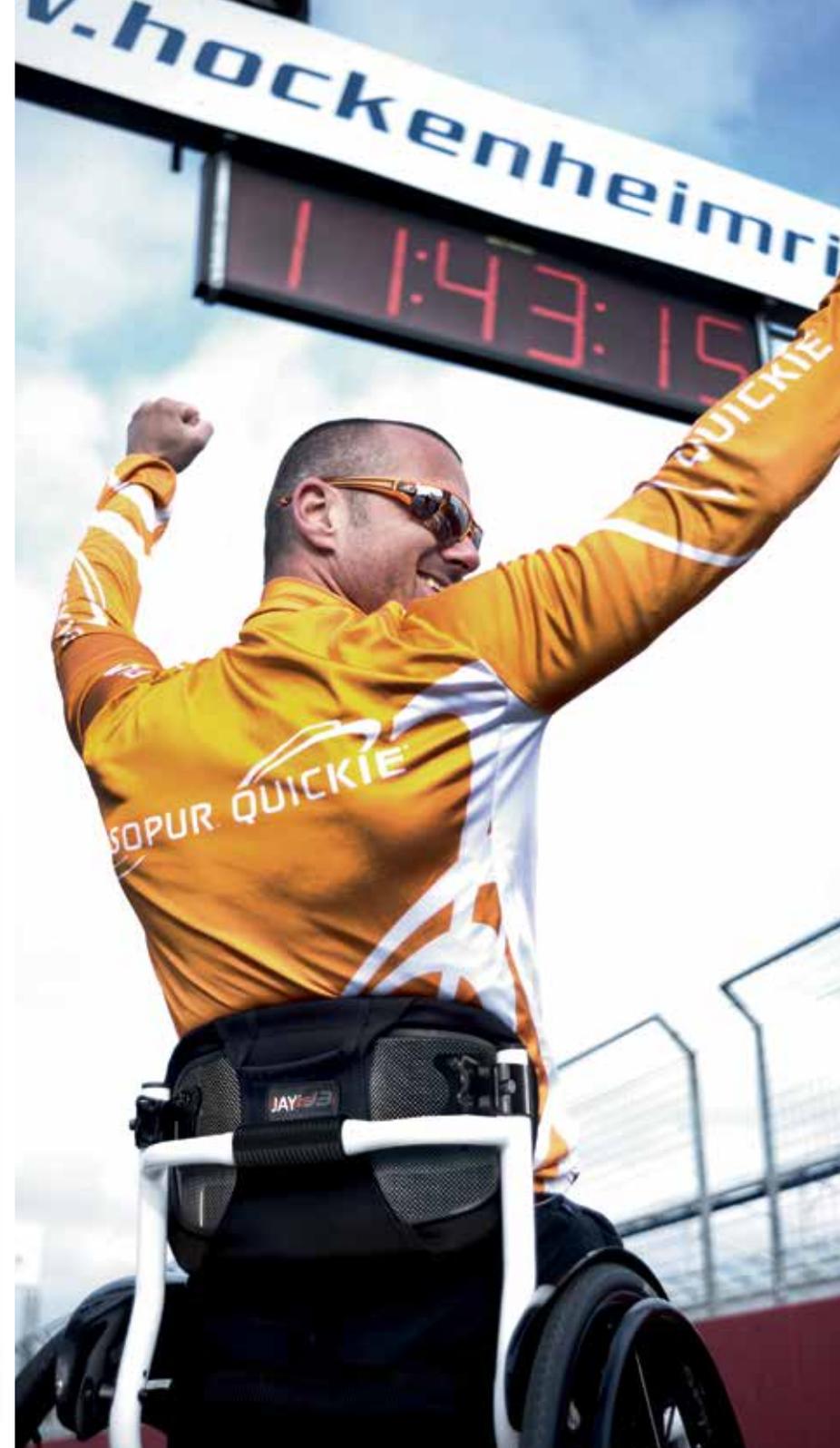

# ANPASSBAR AN IHRE BEDÜRFNISSE

---

## Zwei verschiedene Halterungssysteme erhältlich für falt- und Starrahmenrollstühle

Der J3 Carbon Rücken ist mit zwei verschiedenen Halterungssystemen erhältlich. Das feste System bietet eine Halterung für Starrahmenrollstühle, die extrem leicht ist. Eine andere Möglichkeit ist das System mit Schnellverschluss, mit dem der Rücken ganz einfach abgenommen werden kann, ideal für die Montage an einen faltrollstuhl.

Abgesehen von der Auswahlmöglichkeit sind beide Halterungssysteme als einfach zu bedienendes 2-Punkt-Halterungssystem ausgelegt und bieten die gleichen Verstellmöglichkeiten bei Winkel, Tiefe, Höhe und Breite. So kann der J3 Carbon Rücken ganz an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.



**Die Halterung mit  
Schnellverschluss**  
Ideal für faltrollstühle

---



**Das feste  
Halterungssystem**  
Die gewichtssparendste  
Lösung

---





→ **Flache Kontur**

Leichte, seitliche Abstützung des Rumpfes durch Konturtiefe von 5 cm



→ **Verschiedene Rückenhöhen**

Immer die richtige Unterstützung (vier Höhen von 17 bis 38 cm)

## Wählen Sie Ihren Rücken...!

Unterschiedliche Bedürfnisse erfordern passende Lösungen. Die vier Rückenhöhen (von 17 bis 38 cm) sind für aktive Nutzer ausgelegt, die eine leichte bis moderate Unterstützung des Oberkörpers benötigen. Die seitliche Unterstützung des Rumpfes wird durch die Konturtiefe von 5 cm gewährleistet.



## Cool aussehen und kühl bleiben - mit dem mikroklimatischen Bezug und der weichen Schaumstoffunterlage

Im Bezug des J3 Carbon Rückens ist das 3DX™ Abstandsgewebe verarbeitet, das Wärme und Feuchtigkeit ableitet und dafür sorgt, dass die Luft am Rücken zirkulieren kann. Der Bezug kann bei 60°C gewaschen werden und trocknet schnell. Er umhüllt die Rückenschale für einen zusätzlichen Schutz. Mit Hilfe von Positionierungskeilen können Sie sogar die Kontur des Rückens an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

→ **J3 Carbon Bezug**

Die 3DX™ Technologie sorgt für ein komfortables Mikroklima.

