

SR45™



Fauteuil livré de série en 24".
Version à fauteuil à pousser non disponible.

Fauteuil à propulsion manuelle de
positionnement avec bascule d'assise
jusqu'à 45°

SR45™

Le fauteuil de positionnement Quickie® SR45™ offre d'importants bénéfices cliniques à son Utilisateur grâce à son système de bascule d'assise à 45° et à ses multiples options de positionnement.



La rotation intelligente

Le point de pivot de l'inclinaison d'assise se trouve dans l'axe du centre de gravité de l'Utilisateur, ce qui assure une meilleure maniabilité et permet une inclinaison d'assise sans effort.

Positionnement, confort et maniabilité!



Système d'inclinaison d'assise jusqu'à 45°

Le Quickie SR45 intègre un système de bascule d'assise à 45°. Le centre de gravité de l'Utilisateur et le centre de rotation du fauteuil restent alignés lors de l'inclinaison. Ceci représente des bénéfices cliniques importants pour l'Utilisateur: réduction de la pression sur les tubérosités ischiatiques et réactions d'extension et de spasticité du patient minimisées. De plus, la maniabilité du fauteuil s'en trouve améliorée, nécessitant un effort minimal de la part de la tierce personne, pour incliner le dossier ou revenir à la position initiale.

Deux versions d'assise pour une même base

Le fauteuil SR45 peut être équipé de différents types de coussins et de dossiers Jay selon les besoins des Utilisateurs.

Pour des besoins de confort, la combinaison dossier Jay Easy et coussin Jay Easy Fluid apporte une solution simple pour aider à maintenir une posture droite et stable en position assise.

Pour des besoins plus complexes en terme de posture, de stabilité et de répartition des pressions, les dossiers Jay 3 et les coussins de prévention Jay apportent une réponse idéale.



Accoudoir réglable en hauteur sans outil avec poignée de transfert



Bascule au pied




Barre de poussée réglable en angle



Accroche taxi avant et arrière

Quickie® SR45™

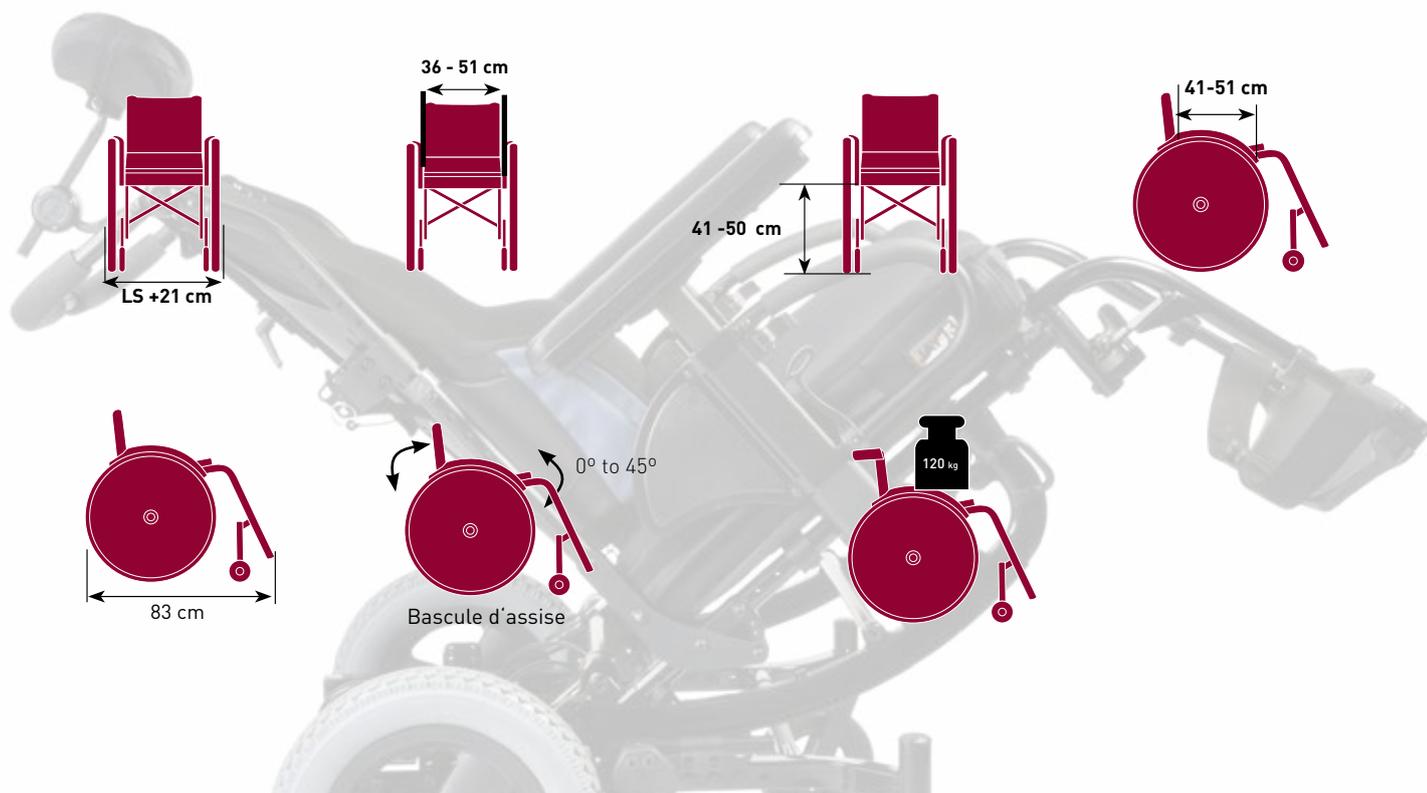

Données Techniques

Largeur de châssis:	36 à 51cm	Hauteur d'assise:	41 à 50 cm
Profondeur de châssis:	36 à 56 cm	Bascule d'assise	0° à 45°
Longueur totale:	70 à 79 cm (selon profondeur)	Poids Utilisateur	120kg
Largeur totale:	largeur châssis + 21cm	Poids fauteuil (sans coussin ni dossier)	à partir de 17.6kg

Tolérance usine: +/- 1 cm

Pour plus d'informations sur toutes les spécifications, options et accessoires, veuillez vous référer à la fiche de mesure.

Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ses produits. Pour toutes demandes supplémentaires, merci de consulter Sunrise Medical.

Si vous êtes malvoyant, ce document peut-être visualisé en format PDF sur www.SunriseMedical.fr ou disponible en agrandissement sur simple demande.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr