



ATTITUDE  
LIBERTÉ PURE

# WHAT'S YOUR ATTITUDE?

---

GOÛTEZ À LA LIBERTÉ COMME JAMAIS AUPARAVANT GRÂCE À LA CINQUIÈME ROUE EMPULSE ATTITUDE.

Que vous vouliez faire du sport ou accroître votre mobilité, il existe un modèle Attitude parfaitement adapté à vos besoins.

Le modèle Manual est léger et sportif. Vous désirez disposer d'une assistance électrique lorsque vous roulez ? Dans ce cas, le modèle Hybrid est pour vous ! Et si vous préférez une version entièrement électrique, le modèle Power répondra à vos attentes.



## ATTITUDE Manual





ATTITUDE Hybrid



ATTITUDE Power



# ASSEMBLAGE RÉALISÉ EN QUELQUES SECONDES !

L'Attitude possède un mécanisme d'ancrage intelligent et novateur, permettant d'accrocher ou de détacher votre Attitude en quelques secondes et sans difficultés. Idéal si vous ne souhaitez pas perdre de temps ou si vous êtes pressé.

Le système de fixation du Empulse Attitude est simple et solidement verrouillé à l'avant de votre fauteuil roulant. Aucun autre mécanisme est nécessaire, donc aucune perte d'espace. Rien ne vient vous gêner ni réduire le confort de votre fauteuil roulant.

Après désassemblage, il ne reste que deux petits axes de 170 grammes sur le fauteuil roulant.

- 1 Accrochez l'Attitude aux axes du fauteuil roulant.
- 2 Tournez le mécanisme d'ancrage vers le bas.
- 3 Verrouillez l'Attitude en tirant le levier rouge vers l'arrière.



1



2



3




→ Prêt à regarder la vidéo du système d'ancrage de l'Attitude !  
**VOYEZ PLUTÔT !**



# PEDALIER IDEALE

Avec son nouveau pédalier réglable en angle et en profondeur, l'Attitude Manual et Hybrid vous offre une position ergonomique idéal. Le réglage adéquat fait en sorte que votre conduite soit énergique et efficace pour les longues distance en toute liberté.

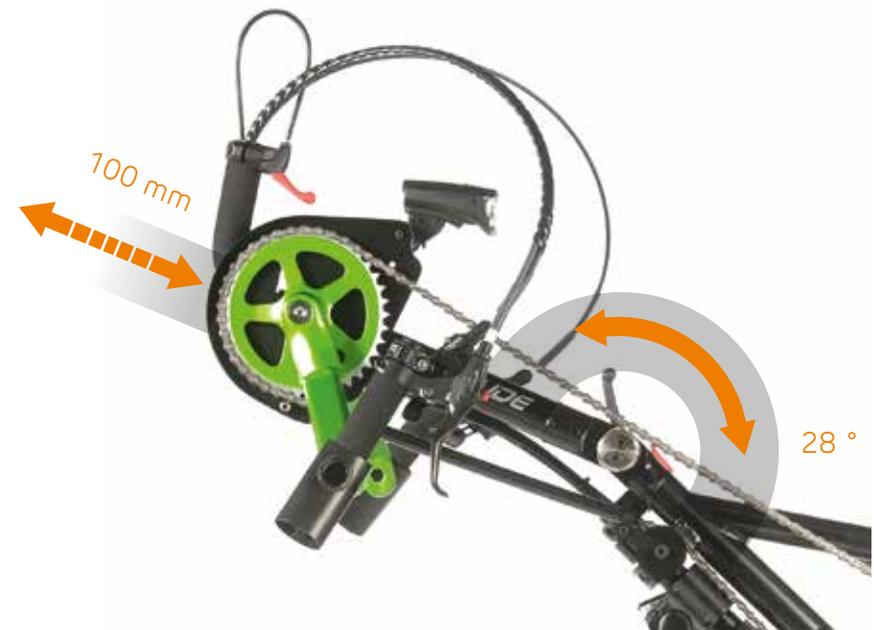

# MANUAL

Le modèle Manual est idéal pour vous si vous voulez développer plus de puissance et/ou améliorer votre endurance par du cyclisme récréatif. La roue avant de 20" et le dérailleur à 30 vitesses vous permettent des prestations de route exceptionnelles ! L'Attitude Manual est léger et facile à manier : c'est le complément parfait de votre fauteuil roulant.



Position du pédalier réglable en angle et profondeur.



# ATTITUDE

*Manual*



MANUAL | HYBRID | POWER



## VITESSES 3X10

Le dérailleur à 30 vitesses convient sur tous terrains de régler facilement votre vitesse. Le frein à disque pour contrôler votre vitesse au mieux.



## TRIGGER SHIFT

La manette à gâchette sur la poignée permet une commutation souple en roulant ; de plus elle peut être actionnée d'une seule main sans aucun problème.



## CREER VOTRE PROPRE STYLE

Pédalier et protège chaîne, possible en coloris différents.



## FREIN DE STATIONNEMENT

Le frein de stationnement avec fonction de verrouillage est facile à manipuler et équipe toutes les cinquièmes roues Attitude.

# HYBRID

Le modèle Hybrid combine les avantages du cyclisme indépendant et la fiabilité de l'assistance électrique. Vous avez besoin d'aide en roulant ? L'assistance électrique peut être activée facilement lorsque vous en avez besoin. Cette fonction est pratique contre le vent, sur les fortes pentes ou tout simplement lorsque vous voulez augmenter votre vitesse !



Position du pédalier réglable en angle et profondeur.



# ATTITUDE

## Hybrid



### BATTERIE LITHIUM-ION

Le modèle Hybrid dispose d'une batterie lithium-ion de 17,5 Ah ; il est possible de produire de l'électricité en roulant et de bénéficier ainsi d'un plus grand rayon d'action. Capacité résiduelle de la batterie par le témoin sur l'écran du tableau de bord.



### PUISSANT MOTEUR 250 WATTS

Le puissant moteur de 250 Watts permet d'atteindre une vitesse de 25 km/h. Idéal sur terrain vallonné ou sur de longues distances.



### GARDER LE CONTROLE

Avec le MMI de Noedrive, vous voyez d'un coup d'oeil votre vitesse, distance et la capacité restante.



### PÉDALIER ERGONOMIQUE EN V

La position de la poignée ergonomique empêche tout contact avec le corps, ce qui s'avère pratique dans les virages serrés.

# POWER

La cinquième roue version Power (électrique) est puissante, elle vous permet de rouler off-road ou de circuler sur route à la vitesse qui vous convient. Vous pouvez rester confortablement assis et relaxé dans votre fauteuil roulant ; il vous suffit d'actionner le levier de gaz pour avancer. Découvrez vos limites et déplacez-vous partout avec Attitude Power !



*Power***PUISSANT MOTEUR 250 WATTS**

Le puissant moteur silencieux ne nécessite aucun entretien et permet d'atteindre une vitesse maximale de 15 km/h !

**GUIDON RÉGLABLE**

Le guidon ergonomique est réglable en hauteur par le biais de la potence et de façon progressive. L'écran de l'ordinateur de bord propose des informations comme la vitesse, le temps de roulage, la distance parcourue, le kilométrage total, etc.

**BATTERIE LITHIUM-ION**

Une batterie lithium-ion de 9 ou 13,4 Ah pour un rayon d'action étendu. Les batteries lithium-ion possèdent une haute densité d'énergie et aucun effet de mémoire (réduction de la capacité en cas de recharge d'une batterie non déchargée).

**ÉCLAIRAGE AVANT**

L'éclairage brillant à l'avant est relié directement sur la batterie.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>ATTITUDE</b>	<i>Manual</i>	<i>Hybrid</i>	<i>Power</i>
<b>Largeur châssis avant (+2 cm) :</b>	260 - 460 mm	260 - 460 mm	100 kg
<b>Largeur de manivelle :</b>	470 mm	470 mm	260 - 460 mm
<b>Longueur de manivelle :</b>	170 mm	170 mm	170 g
<b>Largeur guidon :</b>	-	-	15,3 kg
<b>Manette :</b>	Trigger shift ou Grip shift	Trigger shift ou Grip shift	-
<b>Vitesses :</b>	8 of 3x10	10	-
<b>Diamètre roue :</b>	20"	20"	16"
<b>Frein :</b>	Disque (180 mm)	Disque (180 mm)	Disque (180 mm)
<b>Frein de parking :</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Vitesse maximale :</b>	-	23 km/u	6 , 10 ou 15 km/u
<b>Autonomie (ISO 7176-4) :</b>	-	120 km*	30 ou 50 km*
<b>Batterie :</b>	-	17,5 Ah	9 ou 13,4 Ah
<b>Moteur :</b>	-	250 W	250 W
<b>Poids fixation :</b>	170 gr	170 gr	170 gr
<b>Poids total :</b>	14,5 kg	21,5 kg	15,3 kg
<b>Charge maximale :</b>	100 kg	100 kg	100 kg
<b>Couleur (cadre,pédalier et protègechaîne)</b>	3x 31 combinaisons	3x 31 combinaisons	1x 31 combinaisons

Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, nous vous renvoyons au formulaire de commande.  
Toute ces informations sont données sous réserve de fautes de frappe et d'inexactitudes techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.  
\* L'autonomie est calculée sous des conditions d'essai. Le poids, la surface et les conditions atmosphériques peuvent influencer l'autonomie maximale.



**EDUCATION  
IN MOTION**



**built4me**



[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)