



WHERE YOU WANT TO BE.

Sapphire[®] 2






Sapphire[®] 2





Afneembaar

Om uw Sapphire®2 klaar te maken voor transport, tilt u eenvoudig de stoel eraf, haalt u de accu's eruit en trekt u aan de achterste hendel om de voor- en achterkant van de scooter van elkaar te scheiden. Het is echt zo simpel! (en trouwens, het gaat net zo soepel weer in elkaar!).

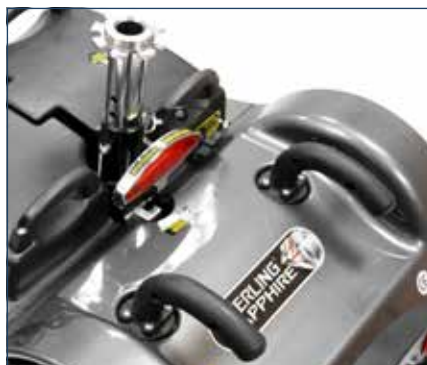

Het Sterling® Gem-Lock systeem is vrij van kabels en connectors, dus er zijn geen lastige onderdelen om mee om te gaan.

Transporteerbaar

Nu kan de Sapphire®2 in uw voertuig worden geladen. Gelukkig is dit, als een van de lichtste scooters in zijn klasse, geen probleem met de Sterling® Lift-dual-handgrepen die aan de accu's en de achterste aandrijfeenheid zijn bevestigd. Deze maken het tillen en hanteren van de onderdelen veiliger en comfortabeler.



Met zijn grote accu's die u in stijl en comfort vervoeren, is de Sapphire®2 de scooter waarmee u op pad wilt gaan!

Het stuur kan veilig worden vastgezet voor transport

Comfortabel



Nu bent u klaar! Strek uw benen en profiteer van het Sterling® Comfort-pakket: beenruimte zoals bij een driewieler met de stabiliteit van vier wielen, traploos verstelbaar stuur, comfortabele handgrepen en een intuïtieve en ergonomische hand/duimbediening, allemaal standaard uitgerust.



Sapphire[®] 2



Instelbaar
43 - 54 cm

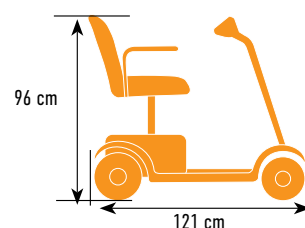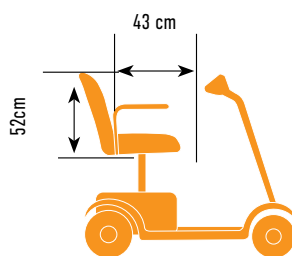

Specificaties

Versie	4-wiel	Totale breedte	59 cm
Snelheid	6,4 km/u	Totale lengte	121 cm
Accu	35Ah	Zithoogte	43-54 cm
Maximale actieradius	30 km	Draaicirkel	140 cm
Maximale hellingshoek	10 °	Maat zwenkwiel/voorwiel	9"
Verlichting en richtingaanwijzers	alleen verlichting	Maat aandrijfwiel/achterwiel	10.5"
Gewicht van het zwaarste onderdeel	22.5 kg		
Gewicht vanaf	79 kg		
Maximale gebruikersgewicht	150 kg		



**EDUCATION
IN MOTION**

built4me



www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.be