



**QUICKIE**  
Live without limits.

**ATTITUDE**

TRANSPORT

AKTIVITET

SPORT

**STØRRE FRIHET!**

 **SUNRISE**  
MEDICAL.

[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



LAV EGENVEKT

RASK MONTERING

PERSONLIG STIL

STØRRE FRIHET

STERK HJELPEMOTOR

AVTAGBART DISPLAY

SMÅ FESTER

## QUICKIE ATTITUDE Hybrid

Opplev frihet under aktivitet som aldri før med den nye sykkelfronten med hjelpemotor!

Enten du ønsker å trene, dra på sykkeltur med familien og venner, eller bare ønsker å komme deg ut i naturen vil Attitude sykkelfront med hjelpemotor være et perfekt transportmiddel for deg. Sykkelfronten er også et alternativ som et fremkomstmiddel til jobb eller skole, hvor du kan koble av sykkelfronten og fortsatt ha rullestolen tilgjengelig. Om du ønsker vil du kunne få hjelp av motorkraft om du skulle bli sliten eller møter på utfordringer i form av bratte bakker på turen. Attitude kan festes på de fleste av Sunrise Medicals rullestoler med fast front, også kryssrammestoler.



### STØRRE FRIHET UNDER AKTIVITET

De ergonomiske håndtakene og de to „støttehjulene“ vil hjelpe deg å manøvrere sykkelen lett med bare en hånd. Dermed vil det å koble sykkelfronten av eller sette den bort, bli en enkel sak uansett situasjon.



#### // LITHIUM-ION BATTERI

14,5 Ah Lithium -Ion batteri for forbedret ytelse og rekkevidde. Displayet viser batteri-kapasiteten som gjenstår.



#### // BAGASJEBRETT OG TILBEHØR

Feste for bagasje/vesker kan fås som tilbehør sammen med bl.a. speil, elektrisk pumpe, og Mountain bike-hjul.




# KLAR TIL BRUK PÅ BARE FÅ SEKUNDER



Se demonstrasjon av  
Quickie Attitude Hybrid

Sykkelfronten låses til din rullestol på bare få sekunder...  
Attitude er bare å klikke på og av, ingen skruing!

Sykkelfrontens 4-punkts feste fordele belastningen over en større del av stolens ramme. Den låses sikkert med et „click-on“-feste til fronten på rullestolen din -uten noen form for deler, verktøy eller stropper. Dermed beholder du den benplassen du trenger for en god komfort.

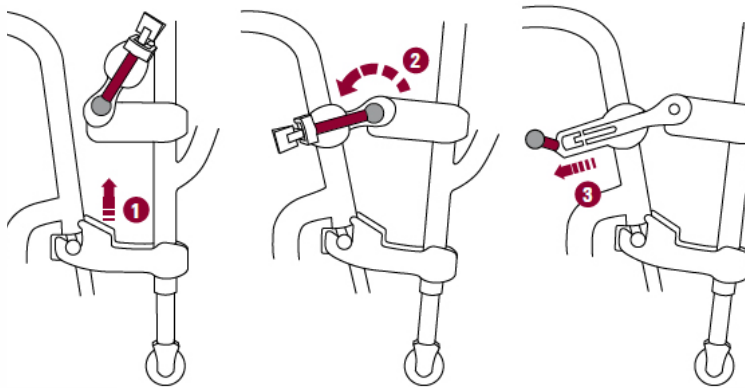

- 1 Vipp sykkelfronten opp og den klikker i lås på nederste feste.
- 2 Vipp ned øvre fester så de peker nedover.
- 3 Lås det øvre festet ved å føre den røde spaken bakover.

Etter demontering er det bare to små fester (170 gram) som sitter igjen på din rullestol.

## PERSONLIG STIL

Den lette og elegante Attitude sykkelfronten vil perfekt komplimentere din Quickie rullestol. Med sitt strømlinjeformede moderne design og et utvalg av 31 iøynefallende farger, kan du enkelt individualisere din Attitude sykkelfront til å passe din egen unike personlighet og rullestol.



### // ERGONOMISK V-KRANK

Plasseringen av de ergonomiske håndtakene forhindrer kontakt med kroppen, spesielt når du svinger.



### // STERK 250 WATT MOTOR

Den kraftige 250 watt motoren hjelper deg opp til 25 km/t. Idèelt for kupert terreng eller lengre avstander.





### ***ATTITUDE***

### *Hybrid*

Passer til rullestolbredde	26 - 46 cm (OBS!Oppgi bredde i front!)
Total sykkelvekt/produktvekt	fra 21,5 kg
Vekt på deler til sykkel	170 gram
Regulerbart styre	ja
Hjul størrelse	20"
Gir	SRAM X5 10 gir
Maks. brukervekt	100 kg
Anbefalt lengde på brukeren	160 - 195 cm
Motor	250W
Maks. motor-hastighet	Maks. 25 km/t
Kjørelengde	Maks. 120 km
Spenning	36V
Batteritype	Lithium ion 14,5 Ah
Batterivekt	3,5 kg
Brukstemperatur	-20°C - 60°C
Ladetemperatur	0°C - 40°C



Sunrise Medical AS  
 Delitoppen 3  
 1540 VESTBY  
 Tel.: +47 66 96 38 00  
 Fax: +47 66 96 38 80  
 E-Mail: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)

