



# JAY HIGHLIGHTS

FÜR PERFEKTES SITZEN  
UND POSITIONIEREN

**In dieser Highlight-Broschüre finden Sie  
eine Auswahl unserer JAY Produkte.  
Weitere Produkte finden Sie auf unserer  
Homepage [www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)  
oder direkt bei Ihrem Fachhändler!**





Ein gutes Zusammenspiel von Rollstuhl, Sitzkissen und Rücken ist für das langfristige Wohlbefinden eines jeden Rollstuhlnutzers entscheidend.

### **Die Marke JAY steht für:**

- + Beschwerdefreies Sitzen mit qualitativ hochwertigen Materialien**
- + Effektive Druckverteilung**
- + Einfache Handhabung**
- + Hervorragende Sitzstabilität**

Exzellente Qualität ist die Basis für einen optimalen und langlebigen Einsatz unserer JAY Produkte. Aber nur wenn unsere Produkte exakt auf die Bedürfnisse bzw. das Krankheitsbild des Nutzers angepasst sind, können sie ihre Wirkung voll entfalten, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern und einer drohenden Behinderung vorzubeugen.

Um das richtige JAY Produkt für die Bedürfnisse des Nutzers auszuwählen, ist die medizinische Diagnose des Arztes essentiell! Die Notwendigkeit für die entsprechende Hilfsmittelversorgung ergibt sich des Weiteren aus der Ermittlung

- des Bedarfs,**
- der Fähigkeit zur Nutzung und**
- der Prognose,**

um das angestrebte Behandlungsziel zu erreichen. Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Überblick sowie eine Hilfestellung bei der Auswahl unserer JAY Produkte, um den gewünschten Behandlungserfolg zu erzielen.



# JAY®

# ROLLSTUHL- KISSEN

JAY Rollstuhl-Kissen gewährleisten durch eine anatomisch geformte Schaumbasis mit unterschiedlichen Dichten und speziellen Druckentlastungsmaterialien (z. B. Fluid, Luft, Visco-Schaum) eine grundlegend gute Sitzstabilität und einen hervorragenden Hautschutz.



Easy Visco



Lite / Lite P

**// Einsatz**

- Prophylaxe-Antidekubituskissen

**// Hautschutz**

- Mittel, durch Kontur und Relaxschaum unter den Sitzbeinhöckern

**// Positionierung**

- Mittel, durch anatomische Anformung und Materialmix von Kaltschaum und Relaxschaum

**// Bezug**

- Standardmäßig mit Inkontinenzbezug

**// Einsatz**

- Prophylaxe- und Positionierungs-Antidekubituskissen

**// Hautschutz**

- Hoch, durch Kontur und netzförmigen Schaumstoff

**// Positionierung**

- Hoch, durch anatomische Form, und Materialmix von Hartschaum sowie netzförmigem Schaumstoff

**// Bezug**

- Sehr gutes Mikroklima durch atmungsaktives Abstandsgewirke

**// Besonderheit**

- Extrem leicht (ab 660 g)






## Balance

Standardmäßige Auswahl zwischen Cryo Fluid-, Flow Fluid- oder Lufteinlage



Fluid-Einlage L

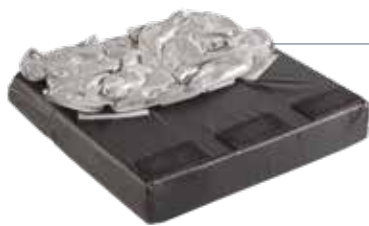

Fluid-Einlage S

## Xtreme Active

Standardmäßige Auswahl von zwei Fluid-Einlage-Größen

1. Cryo®Fluid
2. JAY Flow Fluid
3. Lufteinlage

hoch

sehr hoch

### // Einsatz

- Prophylaxe- oder Therapie Antidekubituskissen

### // Hautschutz

- Hoch, durch den Einsatz von Fluid unter den Sitzbeinhöckern
- Geringe Scherkräfte

### // Positionierung

- Hoch, durch anatomische Anformung und Materialmix von Kaltschaum und Fluid
- Optional sind Positionierungskeile erhältlich

### // Bezug

- Standardmäßig mit 2 Bezügen:
- Innenbezug Inkontinenz, Außenbezug mikroklimatisch
- Optional äußerer Stretch- oder Inkontinenzbezug erhältlich

### // Einsatz

- Prophylaxe- oder Therapie Positionierungs-Antidekubituskissen

### // Hautschutz

- Sehr hoch, durch Kontur und Einsatz von Fluid oder Luft unter den Sitzbeinhöckern, Geringe Scherkräfte
- Cryo Fluid reduziert die Hauttemperatur im gefährdeten Bereich (Sitzbeinhöcker)

### // Positionierung

- Sehr hoch, durch anatomische Anformung, Materialmix von Kaltschaum und Hartschaum
- Optional sind Positionierungskeile erhältlich

### // Bezug

- Standardmäßig mit 2 Bezügen:
- Innenbezug Inkontinenz, Außenbezug mikroklimatisch
- Optional äußerer Stretch- oder Inkontinenzbezug erhältlich


# JAY®

## ROLLSTUHL- RÜCKEN



**JAY Rollstuhl-Rücken wurden entwickelt, um**  
**+ den Oberkörper sicher zu führen,**  
**+ Haltungsschäden zu vermeiden oder zu korrigieren,**  
**+ Sitzstabilität und Sitztoleranz zu erhöhen.**

Mit einem hohen Maß an Anpassungsfähigkeit gelingt eine konfektionierte, aber dennoch individuelle Versorgung. Die festen JAY Rollstuhl-Rücken sind leicht montierbar, einstellbar und passen nahezu an alle Rollstuhl-Modelle.

 Alle Rückenbespannungen sind bei 60° C waschbar.



### // Einsatz

- Erhöhung der Oberkörperstabilität und Sitztoleranz durch einstellbare Rückenlänge und Rückenwinkel

### // Oberkörperführung

- Leicht, durch 5 cm Konturtiefe

### // Anpassbarkeit

- Rückenwinkeleinstellbarkeit (+/- 20°)
- Anatomische Anpassbarkeit (natürliche Wirbelsäulenform (Doppel-S))

### // Montage

- Benutzerfreundlich und schnell
- Einfache Entnahme für den Transport
- 2 Halterungssysteme: für Faltrollstühle QR (abnehmbar) und Starrrahmenrollstühle FX (fest)

### // Mikroklima

- Sehr gut, durch speziellen Schaum und mikroklimatischen Bezug

### // Besonderheit

- Geringes Gewicht (ab 690 g inkl. Halterung) durch Einsatz von Carbon und einem speziellen Halterungssystem



J3 Mittlerer  
Kontur Rücken  
(MC)



J3 Mittlerer Tiefe  
Kontur Rücken  
(MDC)

mittel

hoch

#### // Einsatz

- Erhöhung der Oberkörperstabilität und der Sitztoleranz durch einstellbare Rückenhöhe und Rückenwinkel

#### // Oberkörperführung

- Mittel, durch 8 cm Konturtiefe
- Bei Hohen (UT) - und Schulterhohen (SH) - Rücken sind optional Seitenpelotten und Kopfstütze erhältlich

#### // Anpassbarkeit

- Rückenwinkleinstellbarkeit (+/- 22°)

#### // Montage

- Benutzerfreundlich und schnell
- Einfache Entnahme für den Transport

#### // Mikroklima

- Sehr gut, durch speziellen Schaum und mikroklimatischen Bezug

#### // Einsatz

- Erhöhung der Oberkörperstabilität und der Sitztoleranz durch einstellbare Rückenhöhe und Rückenwinkel

#### // Oberkörperführung

- Hoch, durch 15 cm Konturtiefe
- Bei Hohen (UT) - und Schulterhohen (SH) - Rücken sind optional Seitenpelotten und Kopfstütze erhältlich

#### // Anpassbarkeit

- Rückenwinkleinstellbarkeit (+/- 22°)

#### // Montage

- Benutzerfreundlich und schnell
- Einfache Entnahme für den Transport

#### // Mikroklima

- Sehr gut, durch speziellen Schaum und mikroklimatischen Bezug



# Technische Daten



JAY ROLLSTUHL-KISSEN	EASY VISCO	LITE / LITE P	XTREME ACTIVE	BALANCE
BREITE (CM)	25 – 60 cm	35 – 50 cm	34 – 50 cm	34 – 60 cm*
TIEFE (CM)	25 – 60 cm	35 – 50 cm	34 – 50 cm	34 – 60 cm*
HÖHE (CM)	6 cm	7 cm	6 cm	8,5 cm
MAX. NUTZERGEWICHT (KG)	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg – 225 kg

HILFSMITTELVERZEICHNIS POS.-NR.:	11.39.01.1018	11.39.01.2017	11.39.02.1009	11.39.04.2012 (Fluid) 11.39.03.5005 (Luft)
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---

JAY ROLLSTUHL-RÜCKEN	J3 CARBON RÜCKEN	J3 MITTLERE KONTUR RÜCKEN	J3 MITTL. TIEFE KONTUR RÜCKEN
KONTURTIEFE (CM)	5 cm	8 cm	15 cm
RÜCKENHÖHE (CM)	17 / 24 / 30 / 38 cm	30 / 38 / 46 / 53 cm	30 / 38 / 46 / 53 cm
RÜCKENBREITE (CM)	32 / 36 / 41 / 46 cm	36 / 41 / 46 / 51 cm	36 / 41 / 46 / 51 cm
RÜCKENWINKEL	- /+ 20°	- /+ 22°	- /+ 22°
MAX. NUTZERGEWICHT (KG)	125 kg	136 kg	136 kg

HILFSMITTELVERZEICHNIS POS.-NR.:	–	18.99.07.0021	18.99.07.0021
ABRECHNUNGS POS.-NR.:	18.99.99.0099	–	–

\* Größenangabe für Balance mit Cryo Fluid siehe separates Bestellblatt.



## Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/HD  
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0  
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222  
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de  
www.SunriseMedical.de