

XENON²

ENKEL HOPFÄLLNING OCH
PERFEKTA KÖREGENSKAPER

Marknadens lättaste hopfällbara
rullstol i aluminium



XENON² – DEN ELEGANTA, HÖGKLASSIGA SERIEN

Oavsett om du är ute efter en rullstol med perfekta köregenskaper eller den mest kompakta stolen hopfälld, så finns en Xenon² bara för dig

Blir det den stilrent designade Xenon² FF? Alternativt, vad sägs om den förstärkta ramen som du får på Xenon² FF Förstärkt ram? Eller, den för transport praktiska, Xenon² SA? Vilken av de tre modellerna du än väljer, så kommer elegansen och degenen av Xenon² alltid göra att du hamnar i centrum för uppmärksamheten.





XENON² FF **DEN LÄTTA**

Vår lättaste kryssfälda rullstol.
Öppen ramdesign med fast front.
Cool, ren och snygg design.



XENON² FF **FÖRSTÄRKT RAM** **DEN STARKA**

Ingen kompromiss när det kommer till
styvhet.
Förstärkt ram med fast front.
Max brukarvikt 140 kg.



XENON² SA **DEN ALLSIDIGA**

Enkel förflyttning till och från rullstolen.
Förstärkt ram med sidosvängbara benstöd.
Blir mycket kompakt ihopfälld för enkel transport
i bil.





MARKNADENS LÄTTASTE KRYSSFÄLLDA RULLSTOLAR

Hur kan man bygga en kryssfälld rullstol som väger så lite som 8,8 kg? Genom att använda förstklassigt material för ramen, som aluminium som används i flygindustrin, och en innovativ process som är unik för Quickie – ShapeLoc Teknologi.

Genom att värmebehandla aluminium, kan vi öka dess styrka, vilket gör att ramrören kan bli tunnare, lättare och starkare än en konventionell kryssfälld rullstol. Bara känn efter själv...





...MED MAKALÖS HOPFÄLLNING

I mitten av Xenon² sitter ett unikt kryss som passar så snyggt under sitsen att det knappt syns – vilket ger en mycket minimalistisk look och känsla av öppen ramdesign som du vanligtvis förknippar med en fastramsrullstol.

Likheterna slutar inte med utseendet – den helt nya designen på drivhjulblocket i kombination med det nya krysset, ger styva, stabila köregenskaper, känslan av en fastramsrullstol, men med de smidiga transportmöjligheterna du får med en kryssfälld rullstol.

→ **Enkel hantering av hopfällningsmekanismen**

De nya stabiliseringsstagen i aluminium på krysset gör också att hjulen förblir parallella när stolen fälls ihop, din Xenon² förblir stabil, oavsett situation.






STIL I RÖRELSE

Gör din Xenon² mer personlig och stick ut ifrån massan med en palett av 32 olika ramfärger. Det finns dessutom 5 snygga eloxerade stilar att välja mellan för gafflar och hjul. Du kan också komplettera detta ytterligare genom att matcha eller, varför inte som kontrast, välja färg på kantbanden på EXO rygglädseln.

→ Gör din Xenon² personlig
med ett urval på 32
snygga färger

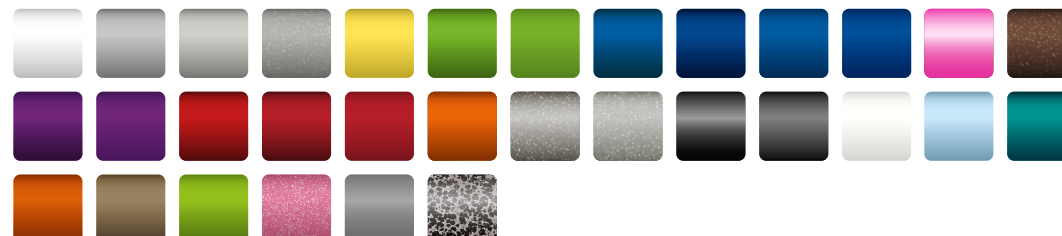

” **Yeray Betancor:** I was looking for a wheelchair for someone with an active life. I wanted it to be lightweight, modern, folding and easy to lift up to the car with just one hand – and the QUICKIE Xenon² ticks all those boxes.



→ **Sätt lite färg på din ryggklädsel**

Den mycket bekväma och snygga Exo ryggklädseln kan väljas med 5 olika färger på kantbanden.



→ **Välj din stil på länkhjul och gafflar**

De eloxerade länkhjulen och gafflarna kan väljas i silver, blå, röd, orange eller svart



” **Yeray Betancor:** *I've always been a QUICKIE guy: active and dynamic and I think that the QUICKIE Xenon² is the best fit for me.*

JUSTERBAR FÖR ATT PASSA DIG

Precis som det ska vara – designad för att kunna anpassas efter förändrade behov, på Xenon² är det enkelt att justera höjden.

Om behovet finns att justera om stolen från passivt till aktivt läge eller tvärtom kan tyngdpunkten ställas om enkelt via drivhjulblocket. Även ryggvinklingen kan anpassas för att uppnå en ergonomisk positionering.

❶ Tyngdpunktsinställning

Påverka köregenskaperna från väldigt aktivt till passivt läge.

❷ Ryggvinkling

Korrekt ryggvinkling är viktigt för att uppnå en ergonomisk positionering.

❸ Bakre sitthöjden

Sitthöjden kan anpassas efter behov för brukaren.





XENON² FF
DEN LÄTTA



XENON² FF FÖRSTÄRKT RAM
DEN STARKA



XENON² SA
DEN ALLSIDIGA

XENON²

Ultra lightweight wheelchairs
with outstanding folding and
driving performance



Tillbehör och egenskaper för Xenon² serien – Konfigurera din rullstol efter dina behov.
För ytterligare information om produkttillbehör se beställningsunderlag för Xenon² FF och Xenon² SA.



// FÄLLBART RYGGSTÖD

Denna rygg fälls framåt på mitten och gör stolen smidig vid transport.



// SURGE® LT DRIVRINGAR

Dess Gripton gummibana på den ovala ergonomiskt formade drivringen ger utmärkt grepp.



// VINKELJUSTERBAR RYGG

Snyggt designad ryggvinklinslösning är integrerad och följer ramen. Ryggstödsvinkel från -15° till +13° i steg om 4°.



// SIDOSKYDD KOLFIBER

Snyggt sidoskydd med låg vikt ger stolen en unik look.



// AUTOMATISKT UPPFÄLLBAR FOTPLATTA

Denna fotplatta är vinkel- och djupjusterbar och finns i kolfiber eller komposit. Passar till Xenon med fast front.



// TRANSPORTFÄSTE

Med detta tillval är stolen godkänd för transport i fordon med brukare i (krocktestad enligt ISO 7176-19).

TEKNISK SPECIFIKATION

	Xenon ² FF	Xenon ² FF Förstärkt ram	Xenon ² SA
Max. brukarvikt:	110 kg	140 kg	125 kg
Sittbredd:	32 – 46 cm	32 – 50 cm	32 – 50 cm
Sittdjup:	34 - 50 cm	34 - 50 cm	34 - 50 cm
Främre sitthöjd:	43 – 55 cm	43 – 55 cm	43 – 56 cm
Bakre sitthöjd:	37 – 50 cm	37 – 50 cm	37 – 50 cm
Rygg höjd:	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm
Ryggvinkel:	-15° till +13° i steg om 4°	-15° till +13° i steg om 4°	-15° till +13° i steg om 4°
Tyngdpunktsinställning (COG):	4 – 13 cm	4 – 13 cm	4 – 13 cm
Kambring:	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°
Ramversion:	Öppen ramdesign med fast front	Förstärkt ram (extra stag) med fast front	Förstärkt ram med sidosvängbara benstöd
Stolens vikt:	från 8,8 kg	från 9,5 kg	från 10,3 kg
Ramfärger:	32	32	32
Krocktestad:	ja	ja	ja

För ytterligare information om fullständig specifikation, tillval och tillbehör, vänligen se beställningsunderlag.
All information kan komma att förändras utan förvarning. Vänligen kontakta Sunrise Medical vid frågor.



Sunrise Medical AB

Neogatan 5
31 35 Mölndal
Tel.: 031-748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se