


100 % ROLLATORER



NYHETER 2024

Vi är glada att kunna presentera de senaste förbättringarna samt nya tillbehör till våra rollatorer.

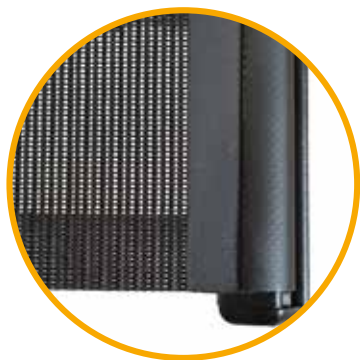

// FÖRBÄTTRAD SITTMATTA

Sittmattan är förstärkt och har en mjukare kant.
Alla modeller.



// NYTT TRAMPRÖR

Det nya trampröret har lägre vikt och är monterat närmare marken än tidigare. Det gör det lättare att använda trampröret utan att tappa balansen eftersom man inte behöver lyfta foten lika högt.
Alla modeller.



// NYA GAFFLAR OCH HJUL

De nya gafflarna minskar rollatorns totalvikt och hjulnavet är förändrat så att de lösa distanserna inte längre behövs vilket underlättar montering.
Ej Gemino 60/60 M/ 60 ATR/60 Walker.



// NY VÄSKA MED LOCK

Den nya väderbeständiga väskan skyddar mot regn och fukt och kan stängas helt för att förhindra obehörig åtkomst. Endast till Gemino 60/60 M/ 60 ATR/60 Walker.



// FÖRBÄTTRAD REM

Förbättrad stabilitet med den nya justerbara remmen för underarmstöd.
Enbart Walker-modeller.



// GEMINO 60 ATR - TERRÄNGHJUL

Terränghjulen har grövre mönstring och är designade för användning på ojämnt underlag och är idealiska under vinterförhållanden. Köp en komplett Gemino 60 ATR eller komplettera/byt ut på befintlig Gemino 60. Enbart till Gemino 60/60 M.



// SHOPPINGVÄSKA SHOP-N-GO

Smidig shoppingväska på hjul. Till de senaste modellerna av Gemino 20 och Gemino 30 och kan även eftermonteras på äldre modeller.



// LASERFUNKTION

Den innovativa laserfunktionen, speciellt designad för patienter med Parkinsons, är nu tillgänglig även på våra Walker-modeller.



NYHETER 2024

	Gemino 20	Gemino 30	Gemino 30 SpeedControl	Gemino 30 Parkinson	Gemino 60 / Gemino 60 ATR	Gemino 30 Walker	Gemino 60 Walker
Förbättrad sittmatta	•	•	•	•	•	•	•
Nytt tramprör	•	•	•	•	•	•	•
Nya gafflar & hjul	•	•	•	•		•	
Ny väska med lock					•		•
Förbättrad rem						•	•
Terränghjul					•		
Shoppingväska	•	•	•	•			
Laserfunktion på Walker						•	•





100 %
KOMFORT



DET SKA VARA NJUTBART OCH BEKVÄMT ATT PROMENERA

Våra Gemino rollatorer har utformats med din bekvämlighet i åtanke. En lätt ram av aluminium, material av hög kvalitet och maximal stabilitet säkerställer en bra upplevelse både inomhus och utomhus. Tack var höjdjustering med minnesfunktion är de ergonomiska handtagen alltid i rätt position och om det är dags för en paus kan du sitta säkert på det generösa sätet. Naturligtvis kan du också ta din rollator med dig när du reser – du fäller enkelt ihop den till en kompakt storlek.

Välj den Gemino som passar dig bäst och upplev hur enkelt och bekvämt det kan vara!

// VÄLJ DIN RAMSTORLEK

Att välja rätt storlek kommer inte bara hjälpa dig gå bekvämt och säkert. Varje storlek har också en annan sitthöjd – detta är viktigt för att upprätthålla en korrekt hållning när man sitter (för mer information, se teknisk information på sidan 22).

// SMART JUSTERING AV HANDTAGEN

Det är enkelt att justera de ergonomiska körhandtagen för att passa din längd. Tack vare den speciella minnesfunktion, är de alltid i rätt läge för dig.

// ENKEL ATT FÄLLA IHOP MED ETT SJÄLVLÅSANDE SYSTEM

Tack vare Geminos unika system med en självlåsande mekanism är det mycket enkelt att fälla ihop rollatorn till en kompakt storlek. Sedan kan du bara sätta handtagen i sitt lägsta läge för att minska storleken ytterligare. Praktiskt för små utrymmen och transport i bil. Förresten, visste du att du också kan manövrera i trånga utrymmen när rollatorn är (delvis) hopfälld?

// PRAKTISK ATT ANVÄNDA VARJE DAG

Med Gemino kan du promenera bekvämt - och sitta bekvämt när det är dags för en paus. Kombinera med ett bekvämt ryggstöd för extra stöd. Mycket att bära? Använd den praktiska väskan!





100 % SÄKERHET

Vart du än går så känner du dig trygg och säker med en Gemino rollator. Den kraftiga och stabila ramen säkerställer maximal säkerhet och de ergonomiska handtagen ger dig utmärkt stöd. Men det finns mer: vi jobbar kontinuerligt för att ta fram smarta lösningar för att underlätta och ge mervärde. Gemino - njut av livet, vart du än går!

// UTOMORDENTLIGT BROMSSYSTEM

Ergonomiskt designade bromsar som är enkla att använda (kräver låg nivå av ansträngning) och som säkerställer optimalt grepp.

// ENKLARE ATT TA SIG ÖVER HINDER


Tramprör gör det enklare att gå över trottoarkanter och trösklar samtidigt som sidostötfångare hjälper dig ytterligare.

// SYNLIG I MÖRKRET

Sex integrerade reflexer på alla sidor hjälper dig att synas i mörkret. För ytterligare säkerhet, välj till den extra belysningen.

// NYTT TRAMPRÖR 2024

Det nya trampröret har lägre vikt och är monterat närmare marken än tidigare. Det gör det lättare för brukaren att använda trampröret utan att tappa balansen eftersom man inte behöver lyfta foten lika högt.

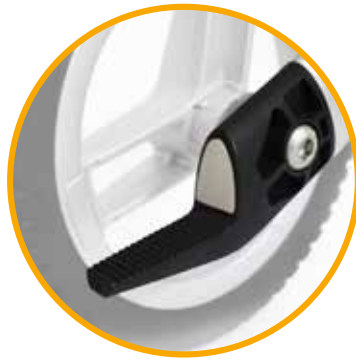

GEMINO 20



GEMINO 20

LÅG VIKT OCH HÖG FUNKTIONALITET

Letar du efter en rollator med hög kvalitet som erbjuder bra valuta för pengarna? Då är Gemino 20 precis rätt för dig. Den är säker och enkel att använda och med denna lättviktaren kan du promenera stabilt och säkert. Den har också ett unikt system som gör den enkel att fälla ihop för förvaring eller transport i bil. Den är också utrustad med en praktisk väska och ett brett säte - perfekt när du vill ta en paus.

Gemino 20 finns i tre ramstorlekar (färg: grå), välj den modell som passar din längd och njut av 100 % kvalitet och funktionalitet - till ett attraktivt pris.

// GEMINO - ETT SMART VAL

Gemino 20 har alla de tekniska egenskaperna som vår prisbelönta Gemino 30 och kan kombineras med ett flertal av praktiska tillbehör.

// SMIDIG ATT FÖRVARA OCH TRANSPORTERA

Gemino 20 har ett unikt system som gör den mycket enkel att fälla upp, fälla ihop och transportera tack vare en självlåsande mekanism.

// NYTT TRAMPRÖR 2024

Det nya trampröret har lägre vikt och är monterat närmare marken än tidigare. Det gör det lättare för brukaren att använda trampröret utan att tappa balansen eftersom man inte behöver lyfta foten lika högt.




Läs mer om Gemino 20 på vår hemsida genom att scanna QR-koden.




De nya gafflarna minskar rollatorns totalvikt och hjulnavet är förändrat så att de lösa distanserna inte längre behövs vilket underlättar montering.




100 % ROLLATOR

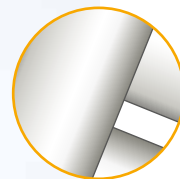


Silvergrå

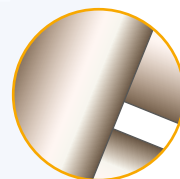

Champagne

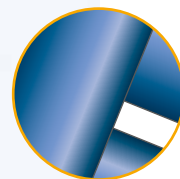


Blå

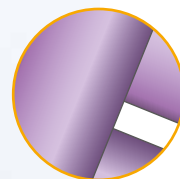


Rosa



Grön

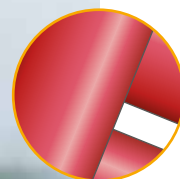

Röd

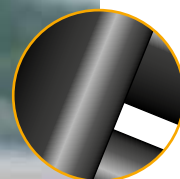

Svart

// ETT FÄRGGLATT SORTIMENT

Välj en av de 7 snygga
ramfärgerna.

// VÄSKOR ATT MIXA OCH MATCHA

Komplettera din Gemini 30
med en snygg och praktisk
väska med axelrem - välj
din favoritfärg!



Grå



Blå



Mintgrön



Rosa



Alcantara svart



Grön



Svart



Röd



GEMINO 30

EN ROLLATOR MED "DET LILLA EXTRA"

Gemino 30 - vår mest kompletta rollator - kommer att överträffa dina förväntningar när det gäller komfort, säkerhet och design. Du har möjlighet att anpassa den till ditt aktiva liv och personliga stil.


Med vår prisbelönta Gemino 30 rollator får du "det bästa av det bästa". Med hög manövrerbarhet i kombination med maximerad stabilitet kommer denna rollator att understödja din självständighet. Välj din favoritfärg och praktiska tillbehör.

// PRISVINNANDE DESIGN

Gemino 30 rollator har en internationellt erkänd design av institut som Red Dot, iF och tyska konsumenttidningen Öko-Test.

// NYTT TRAMPRÖR 2024

Det nya trampröret har lägre vikt och är monterat närmare marken än tidigare. Det gör det lättare för brukaren att använda trampröret utan att tappa balansen eftersom man inte behöver lyfta foten lika högt.

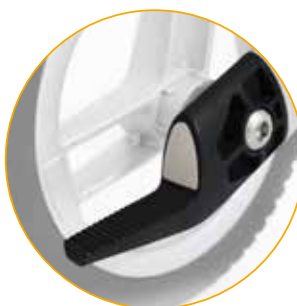

De nya gafflarna minskar rollatorns totalvikt och hjulnavet är förändrat så att de lösa distanserna inte längre behövs vilket underlättar montering.



Läs mer om Gemino 30 på vår hemsida genom att scanna QR-koden.

GEMINO 60



// DESIGNAD FÖR ÖVERLÄGSEN STABILITET

Den kraftiga, extra breda och långa ramen tillsammans med de stora hjulen säkerställer stabilitet och säkerhet, också på ojämn terräng.



// HJUL SOM GÖR SKILLNAD

De extra stora mjuka hjulen gör det enklare att gå över hinder och ger också en bekvämare känsla, på alla underlag.



// NY VÄSKA MED LOCK 2024

Till skillnad från väskor av tunnare nätliknande material skyddar den nya väderbeständiga väskan på Gemino 60 mot regn och fukt. Väskan kan också stängas helt för att förhindra obehörig åtkomst och lägger därmed till ett extra lager av säkerhet för dina tillhörigheter.



// NJUT AV MER UTRYMME

De stora hjulhusen ger maximal stabilitet, samtidigt som de erbjuder extra gångutrymme och en mycket rymlig sittplats – också tillgänglig med justerbart ryggstöd med extra komfort. Praktiskt om du behöver ta en paus.



// HANTERING AV EXTRA VIKT

Alla Gemino 60 - modeller passar brukare med en max vikt på 150 kg. Mycket att bära? Den extra slitstarka väskan tål upp till 10 kg.



GEMINO 60

ULTIMAT KOMFORT OCH SÄKERHET - OAVSETT TERRÄNG

Nu går vi! Gemino 60 är den perfekta partnern för en aktiv livsstil! Med sina extra stora och mjuka hjul kan du gå bekvämt och säkert, även på ojämnt underlag. Promenera på kullerstensgatorna i stan, njuta av en promenad i skogen eller helt enkelt bara smidigt ta dig över trösklarna i ditt eget hem?

Gemino 60 är designad för ett aktivt utomhusliv och klarar av extra vikt. Den är också enkel att fälla ihop – för smidig förvaring och transport. Gemino 60 - fortsätt vara aktiv och njut av ultimat komfort, vart du än går!

// GEMINO 60 ATR - ALL TERRAIN WHEELS - TERRÄNGHJUL

Terränghjulen (ATR) har som namnet indikerar grövre mönstring och är designade för användning på ojämnt underlag. Det gör dem idealiska under vinterförhållanden och för användning i vilken terräng som helst. Njut av ökad komfort och säkerhet med förbättrat grepp och dämpning.

Köp en komplett Gemino 60 med terränghjul eller komplettera/byt ut på befintlig Gemino 60.

// NYTT TRAMPRÖR 2024

Det nya trampröret har lägre vikt och är monterat närmare marken än tidigare. Det gör det lättare för brukaren att använda trampröret utan att tappa balansen eftersom man inte behöver lyfta foten lika högt.



Läs mer om Gemino 60
på vår hemsida genom att
scanna QR-koden.



GEMINO 30

Walker



Förbättrad stabilitet med den nya justerbara remmen för underarmstöd.



De nya gafflarna minskar rollatorns totalvikt och förenklar montering och byte av hjul.

EXTRA STÖD OCH STABILITET. PERFEKT FÖR GÅNGTRÄNING

Behöver du extra stöd när du går är Gemino 30 Walker det perfekta valet för dig. Den lättviktsrollator är utrustad med justerbara underarmsstöd för att hjälpa dig att gå bekvämt och säkert. Broms- och körhandtagen är helt integrerade i underarmsstöden - lätta att nå och lätta att använda. Bra för gångträning.

// AVANCERADE BROMSAR FÖR ÄNNU HÖGRE SÄKERHET

Behöver du ännu mer trygghet? Komplettera din Gemino 30 Walker med en kontinuerlig broms eller det innovativa bromssystemet SpeedControl. Med SpeedControl bromsar din rollator automatiskt när du börjar accelerera. Det gör att det blir lättare att hålla en upprätt hållning och att gå tryggt och bekvämt, nära din rollator.

// UNDERARMSSTÖD FÖR ÖKAD STABILITET OCH SÄKERHET

Du justerar enkelt höjd, djup och vinkel av armstöden för att passa dina behov. Broms- och körhandtagen är helt integrerade i underarmsstöden - lätta att nå och lätta att använda. För bekväma och stabila promenader.



Läs mer om Gemino 30 Walker på vår hemsida genom att scanna QR-koden.



// LASERFUNKTION

Den innovativa laserfunktionen, speciellt designad för patienter med Parkinsons, är nu tillgänglig även på våra Walker-modeller. Funktionen ger visuella signaler för att initiera rörelse, förbättra gång och minska risken för freezing. När freezing inträffar, aktiverar man enkelt en laserlinje via en knapp på körhand- tagen. Genom att koncentrera sig på laserlinjen på marken kan man sedan ta ett steg över den - och komma i rörelse igen



// NYTT TRAMPRÖR 2024

Det nya trampröret har lägre vikt och är monterat närmare marken än tidigare. Det gör det lättare för brukaren att använda trampröret utan att tappa balansen eftersom man inte behöver lyfta foten lika högt.

GEMINO 60 walker

Förbättrad stabilitet
med den nya
justerbara remmen
för underarmsstöd.



// NY VÄSKA MED LOCK

Väskan till Gemini 60 Walker skyddar mot regn och fukt och kan stängas helt för att förhindra obehörig åtkomst.

OPTIMALT STÖD OCH STABILITET – INOMHUS OCH UTOMHUS

Är du ofta utomhus? Med Gemini 60 Walker får du det bästa av båda världar: Det bekväma mjuka stödet från Gemini 60 samt den ytterligare support och säkerhet du förväntar dig från en Gemini "Walker". Justera underarmsstöden och handtagen så att de passar dina behov och njut av mer frihet både inomhus och utomhus. Självklart är denna lättviktaren också bra för gångträning!

// JUSTERBARA UNDERARMSSTÖD GER FÖRSTÄRKT STABILITET

Underarmsstöden med integrerade körhandtag och bromsar är utformade för optimalt stöd, stabilitet och enkel användning. Justera för att passa din längd och njut av ett bekvämt gångläge.

// BEKVÄM OCH SÄKER VID UTOMHUSBRUK

Gemino 60 Walker har en robust ram och extra stora mjuka hjul och du kan bekvämt och tryggt röra dig utomhus. Gå på kullerstengator eller över trösklar i ditt hem? Med Gemini 60 Walker är det inga problem.

// NYTT TRAMPRÖR 2024

Det nya trampröret har lägre vikt och är monterat närmare marken än tidigare. Det gör det lättare för brukaren att använda trampröret utan att tappa balansen eftersom man inte behöver lyfta foten lika högt.



Läs mer om Gemini 60 Walker på vår hemsida genom att scanna QR-koden.



GEMINO 30

SpeedControl

DEN INNOVATIVA ROLLATORN

Letar du efter en rollator med maximal säkerhet? Då är Gemino 30 SpeedControl med sitt innovativa dynamiska bromssystem precis vad du behöver. Du kommer att känna dig helt säker och kan njuta av en jämn gång och en bättre kroppshållning. Den är också utmärkt för gång-träning - för både barn och vuxna!



// DYNAMISKT BROMSSYSTEM MED TRE NIVÅER FÖR MAXIMAL SÄKERHET

Det innovativa bromssystemet SpeedControl har tre nivåer och kan enkelt anpassas till dina specifika behov. När du börjar accelerera kommer bromsarna i bakhjulen automatiskt att aktiveras vilket understödjer en upprätt hållning och jämn gång. SpeedControl ger ett kontrollerat motstånd som ökar med hastigheten. När du går i låg fart upplever du inget motstånd. SpeedControl främjar en stadig takt och säkerställer att du går närmare rollatorn och hindrar den från att "springa ifrån" dig. Detta förebygger fall och är också bra för gångträning – både för barn och vuxna!

// ÄVEN BRA TILL BARN

Gemino 30 S SpeedControl, den minsta modellen, ger barn möjlighet att upptäcka världen på ett säkert sätt tack vare det dynamiska bromssystemet.



// BRA HJÄLPMEDEL VID GÅNGTRÄNING

Gemino 30 SpeedControl erbjuder ett kontrollerat motstånd vilket ger en unik förmåga att jämna ut gången. Det gör den till en bra träningspartner om man t.ex. behöver lära dig att gå igen. Genom de olika bromsnivåerna anpassar man smidigt rollatorn efter de framsteg som görs i rehabträningen.



Läs mer om Gemino 30 SpeedControl på vår hemsida genom att scanna QR-koden.

// NYTT TRAMPRÖR 2024

Det nya trampröret har lägre vikt och är monterat närmare marken än tidigare. Det gör det lättare för brukaren att använda trampröret utan att tappa balansen eftersom man inte behöver lyfta foten lika högt.

// NYA GAFFLAR 2024

De nya gafflarna minskar rollatorns totalvikt och hjulnavet är förändrat så att de lösa distanserna inte längre behövs vilket underlättar monteringen.



GEMINO 30
parkinson

DESIGNAD SPECIELLT FÖR PERSONER MED PARKINSONS

En del personer behöver lite extra hjälp för att ta sig fram på ett säkert sätt. Om du har Parkinsons sjukdom är du kanske en av dessa. Vi har utvecklat en rollator med dig i åtanke, med funktioner som är helt anpassade efter just dina behov.

// SLÄPBROMS FRÄMJAR EN JÄMN TAKT

Gemino 30 Parkinson är utrustad med en släpbroms som ger lagom motstånd och hjälper dig att gå i en jämn och stadig takt. Enkel att justera till din önskade nivå.

// EXTRA SÄKERHET MED OMVÄND BROMS

Tack vare det omvända bromssystemet stannar rollatorn omedelbart när du släpper bromsen. Detta ger ökad säkerhet om du ibland har sk "freezing" perioder - då det känns som om dina fötter är fastlimmade i marken.

// LASER FÖR ATT ÖVERKOMMA "FREEZING"

Ett laserljus kan hjälpa dig att komma igång igen när du har en "freezing period". Med denna speciella rollator kan du aktivera ett laserljus via en knapp på handtaget. Genom att koncentrera dig på laserlinjen på marken kan du sedan ta ett steg över den - och komma i rörelse igen.

// NYTT TRAMPRÖR 2024

Det nya trampröret har lägre vikt och är monterat närmare marken än tidigare. Det gör det lättare för brukaren att använda trampröret utan att tappa balansen eftersom man inte behöver lyfta foten lika högt.



Läs mer om Gemino 60 på vår hemsida genom att scanna QR-koden.



Monteras höger eller vänster sida



// NYA GAFFLAR 2024

De nya gafflarna minskar rollatorns totalvikt och hjulnavet är förändrat så att de lösa distanserna inte längre behövs vilket underlättar monteringen.

100% VAL PRAKTISKA TILLBEHÖR

Gemino rollatorer är inte bara enkla att ställa in och justera. De har också ett stort urval av praktiska och smarta tillbehör för en enklare vardag. En snygg väska, en praktisk kryckkäpphållare, ett bekvämt ryggstöd eller belysning? Välj de tillbehör som passar dina behov och din livsstil!

// VÄSKOR I ETT STORT URVAL AV OLIKA FÄRGER

Komplettera din Gemino med en snygg väska i din favoritfärg. Med handtag och axelrem för enkel hantering.

Ej tillgänglig för Gemino 60 M



Blå



Grå



Svart



Rosa



Grön



Röd



Alcantara svart



Mintgrön

// VÄSKOR TILL GEMINO 30 S



Svart, blåmönstrad
sida



Svart, gråmönstrad
sida



// NY SHOPPINGVÄSKA SHOP-N-GO

Shoppingväskan Shop-n-Go är det perfekta tillbehöret till din rollator när du ska handla. Förvara och skydda dina varor och sedan är det bara att promenera hem igen. Väskan tas enkelt bort med en enda rörelse tack vare den smarta fästmekanismen. Med mjukt löpande hjul och ett utdragbart handtag kan du sedan ta med dig varorna uppför enstaka trappor och fram till köket. Shop-n-Go går att montera på de senaste modellerna av Gemino 20 och Gemino 30 och kan även eftermonteras på äldre modeller.



// PARAPLY
Höjjusterbart paraply.



// RYGGSTÖD*
Bekvämt ryggstöd om inte behöver monteras loss när rollatorn ska fällas ihop.



// JUSTERBART RYGGSTÖD KOMFORT**
Större vadderat ryggstöd för ytterligare komfort. Justerbart och fälls hop med rollatorn.



// BRICKA
Praktisk bricka med kopp-hållare gör det enkelt att transportera mat och dryck.



// KRYCKKÄPPHÅLLARE
Håller fast din krycka eller käpp lättillgängligt för dig. Enkel att montera, enkel att nå.



// VÄSKA FÖR SYRGAS***
Axelremsväska för säker förvaring av en syrgasflaska.



// KÖRHANDTAG, FÖRLÅNGT
100 mm silvergrå, kit



// UNIVERSALFÄSTE
Bra till dina accessoarer.



// BELYSNING
Säkerställer att du syns i mörkret - för extra säkerhet.



// DROPSTÄLLNING
Droppställning med justerbar höjd och vinkel.



// TERRÄNGHJUL (ATR)
Grövre mönstrade däck för tuffare terräng till Gemino 60.



// ENHANDSBROMS
Bekväm och säker hantering med en hand.




// OMVÄND BROMS
Rollatorn stannar omedelbart när du släpper bromsen. För ökad säkerhet.



// STABILISERINGSSTAG
För extra stabilitet. Enkel att ta bort vid transport. Endast till Gemino 30 Walker och Gemino 60 Walker.



// SLÄPBROMS*
Ger motstånd för att hjälpa dig gå i jämn takt. Enkel att justera till önskad nivå och enkel att stänga av/på. Släpbröms kan fås till alla modeller men kan ej kombineras med Speed Control.

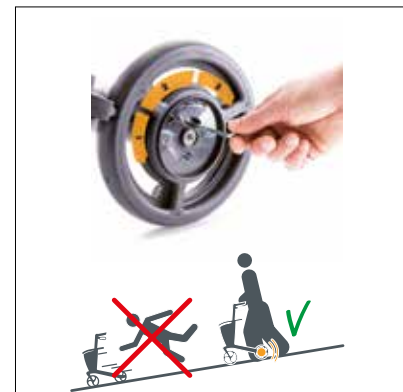

// SPEEDCONTROL

Med SpeedControl kommer tryggheten. Rollatorn bromsar automatiskt vid acceleration vilket garanterar en jämn gång och ett bekvämt, upprätt läge. SpeedControl ger ett kontrollerat motstånd som ökar med hastigheten. När du går i låg fart upplever du inget motstånd. SpeedControl förhindrar fall och är också bra för gångträning – för både barn och vuxna! SpeedControl passar Gemino 20 och 30 (inkl. Walker) men ej till Gemino 60-modellerna.

**ej tillgänglig för alla modeller, kontrollera tillgänglighet*

*** ej tillgänglig för Gemino 30/30 M Walker*

**** ej tillgänglig för Gemino 60 M*



GEMINO - ROLLATORGUIDE



GEMINO 20

Lättviktsrollator i snygg design.
God funktionalitet till ett bra pris.



För användning inomhus
och utomhus

Daglig användning



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Även lämplig för barn



Liten vändradie underlättar
körning inomhus



GEMINO 30

Sunrise Medical's mest kompletta 100% rollator.
Prisvinnande design som kombinerar
manövrerbarhet inomhus med hög prestanda
utomhus. Många färgalternativ och tillbehör att
välja mellan.



För användning inomhus
och huvudsakligen i
stadsmiljö utomhus

Daglig användning



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Även lämplig för barn



Liten vändradie underlättar
körning inomhus



Sätt personlig touch med 7
ramfärger och 8 färger på
väskor.
Stort urval av tillbehör



GEMINO 60

Utvecklad för alla typer av underlag och för
kraftiga personer. Lätt men fortfarande solid. Har
alla fördelarna med den prisvinnande Gemini 30
samt ytterligare funktionalitet.



Huvudsakligen
utomhusbruk, också på
ojämnt underlag, även
inomhusbruk

Aktivt bruk/kraftigare
personer



150 kg
150 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Extra bred och lång ram för
optimal stabilitet



Stora och mjuka hjul
säkerställer bästa komfort
och gör det enkelt att ta sig
över hinder



Extra brett säte



Ökad maxvikt (10 kg) i
korgen.



**GEMINO 60
ATR**

Terrånghjulen (ATR) har som namnet indikerar
grövre mönstring och är designade för
användning på ojämnt underlag. Det gör dem
idealiska under vinterförhållanden och för
användning i vilken terräng som helst.



Huvudsakligen
utomhusbruk, också på
ojämnt underlag, även
inomhusbruk

Aktivt bruk/kraftigare
personer



150 kg
150 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Extra bred och lång ram för
optimal stabilitet



Stora och mjuka hjul
säkerställer bästa komfort
och gör det enkelt att ta sig
över hinder



Extra brett säte



Ökad maxvikt (10 kg) i
korgen.

VÄLJ DEN GEMINO SOM PASSAR DIG BÄST



GEMINO 30 walker

Rollator med underarmsstöd
Utmärkt vid gångträning.



För inomhusbruk
Daglig användning /
gångträning



150 kg
130 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Höjdjusterbara
underarmsstöd för extra
support och stabilitet



GEMINO 60 walker

Extra stöd och stabilitet. God komfort inomhus i
kombination med bra prestanda utomhus.
Utmärkt vid gångträning.



Huvudsakligen
utomhusbruk, också på
ojämt underlag, även
inomhusbruk

Daglig användning /
gångträning



130 kg
130 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Extra bred och lång ram för
optimal stabilitet



Stora och mjuka hjul
säkerställer bästa komfort
och gör det enkelt att ta sig
över hinder



Höjdjusterbara
underarmsstöd för extra
support och stabilitet



Ökad maxvikt (10 kg) i
korgen.



GEMINO 30 SpeedControl

För extra trygghet. Bakhjulsbromsarna slår
automatiskt på när hastigheten ökas plötsligt.
Utmärkt vid gångträning.



För användning inomhus
och huvudsakligen i
stadsmiljö utomhus

Daglig användning/
gångträning



100 kg



150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Även lämplig för barn



Liten vändradie underlättar
körning inomhus



Vid plötslig acceleration
slår de automatiska
bromsarna på.



GEMINO 30 parkinson

Speciellt framtagen för personer med
Parkinsons sjukdom. Kontinuerligt bromsande
hjul för extra motstånd. Som extra trygghet vid
t. ex "freezing" stannar rullatorn omedelbart när
man släpper handtag och broms.



För användning inomhus
och huvudsakligen i
stadsmiljö utomhus

Daglig användning



130 kg
130 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Liten vändradie underlättar
körning inomhus



Omvänt bromssystem:
rollatorn stannar
omedelbart när bromsen
släpps




Kontinuerligt bromsande
hjul ger extra motstånd och
främjar en jämn takt



Laserljus kan aktiveras för
att hjälpa till att överkomma
"freezing"



GEMINO TEKNISK INFORMATION

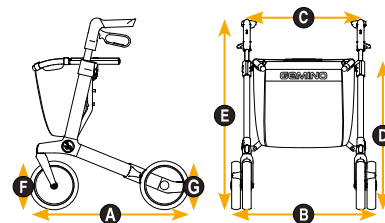


		GEMINO 20			GEMINO 30			GEMINO 60 GEMINO 60 ATR	
		20	20 M	20 S	30	30 M	30 S	60	60 M
ARTIKELNUMMER*		7120000	7120200	7120100	7100000	7100200	7100100	7160000	7160200
MÅTT								71000650 (ATR)	71000660 (ATR)
Max brukarvikt	kg	150	130	125	150	130	125	150	150
Rekommenderad brukarlängd	cm	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170
Max vikt i korgen	kg	5	5	5	5	5	5	10	10
Total längd A	cm	65	65	68	65	65	68	74	74
Total bredd B	cm	60	60	55	60	60	55	64	64
Total vikt utan korg (med korg)	kg	7.1 (7.3)	7.0 (7.2)	6.6 (6.8)	7.1 (7.4)	7.0 (7.3)	6.6 (6.8)	8.5 (8.8)	8.2 (8.5)
Bredd mellan körhandtag C	cm	47	47	42	47	47	42	51	51
Sitthöjd D	cm	62	55	48	62	55	48	62	53
Total höjd E	cm	78 - 100	69 - 88	65 - 77	78 - 100	69 - 88	65 - 77	76-95	73 - 83
Total höjd, ihopfälld	cm	80	76	69	80	76	69	84	80
Total längd, ihopfälld	cm	65	65	68	65	65	68	74	74
Total bredd, ihopfälld	cm	23	23	23	23	23	23	23	23
Diameter framhjul F	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	28 x 4.2	28 x 4.2
Diameter bakhjul G	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2
PRESTANDA									
Vändradie	cm	84	84	79	84	84	79	95	95
FÄRGALTERNATIV									
Grå (standard)		✓	✓	✓					
Silvergrå					✓	✓	✓	✓	✓
Champagne					✓	✓			
Midnattsblå					✓	✓	✓		
Rosa					✓		✓		
Svart					✓	✓			
Äpplegrön					✓				
CERTIFIKAT									
CE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 12182		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-3									

* Artikelnummer gäller för produkten i grått inkl. korg. För andra artikelnummer kontakta vår Kundservice.



CE Gemini Walker rollatorer: EN 12182, ISO 11199-3 - Övriga Gemini rollatorer: EN 12182, ISO 11199-2

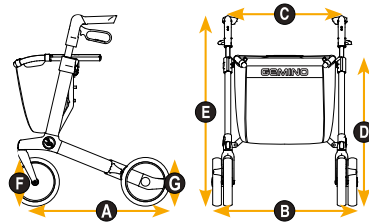

		GEMINO 30 walker		GEMINO 60 walker		GEMINO 30 SpeedControl			GEMINO 30 parkinson	
		30	30M	60	60M	30	30M	30S	30	30M
		7100020	7100220	7160020	7160220	7100060	7100260	7100160	7100070	7100270
ARTIKELNUMMER*										
MÅTT										
Max brukarvikt	kg	150	130	130	130	100	100	100	130	130
Rekommenderad brukarlängd	cm	150-200	135-170	150-200	135-170	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170
Max vikt i korgen	kg	5	5	10	10	5	5	5	5	5
Total längd A	cm	65	65	74	74	65	65	68	65	65
Total bredd B	cm	61	61	64	64	60	60	55	60	60
Total vikt utan korg (med korg)	kg	10.6 (10.9)	10.4 (10.7)	11.8 (12.1)	11.6 (11.9)	8.7 (8.9)	8.6 (8.8)	8.2 (8.4)	7.5 (7.8)	7.4 (7.7)
Bredd mellan körhandtag C	cm	25.5	25.5	32	32	47	47	42	47	47
Sitthöjd D	cm	62	55	62	53	62	55	48	62	55
Total höjd E	cm	98 - 111.5	84 - 100	98.5 - 115.5	89.5 - 98.5	78 - 100	69 - 88	65 - 77	78 - 100	69 - 88
Total höjd, ihopfälld	cm	97	89	109	101	80	76	69	80	76
Total längd, ihopfälld	cm	65	65	74	74	65	65	68	65	65
Total bredd, ihopfälld	cm	35.5	35.5	35.5	35.5	23	23	23	23	23
Diameter framhjul F	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	28 x 4.2	28 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6
Diameter bakhjul G	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6
PRESTANDA										
Vändradie	cm	84	84	95	95	84	84	79	84	84
FÄRGALTERNATIV										
Grå (standard)										
Silvergrå		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Champagne										
Midnattsblå								✓		
Rosa								✓		
Svart										
Äpplegrön										
CERTIFIKAT										
CE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 12182		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-2						✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-3		✓	✓	✓	✓					

* Artikelnummer gäller för produkten i grått inkl. korg. För andra artikelnummer kontakta vår Kundservice.

För ytterligare information om fullständiga specifikationer, tillval och tillbehör hänvisas till beställningsformuläret. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Vid frågor, kontakta Sunrise Medical direkt.



Sunrise Medical AB

Neongatan 5
431 53 Mölndal
Tel.: 031-748 37 000
E-post: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se



För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor. Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via SunriseMedical.se