



KRYPTON

DE ULTIEME QUICKIE



DE NIEUWSTE GENERATIE

We wisten dat we voor de volgende generatie rolstoel met iets bijzonders moesten komen. Onze missie was om de beste Quickie ooit te maken, een nieuw paradepaardje dat de essentie van ons streven naar verbetering weer spiegelt. Met de meest geavanceerde technieken, het mooiste design en de beste materialen hebben we de ultieme Quickie gecreëerd. En zo kwam de Krypton tot stand.

Een rolstoel waarbij we geen concessies hebben gedaan. Slechts één materiaal was goed genoeg om dit prestatieniveau te kunnen bereiken: op basis van ruimtevaarttechniek ontwikkelde carbonvezel. Het resultaat is een fenomenale stijfheid en messcherpe wendbaarheid, verpakt in een volledig aan te passen rolstoelconcept.





LICHTGEWICHT.
STIJL.
PRESTATIES.

GRENSVERLEGGEN CARBONFRAME

De Krypton is samengesteld op basis van de laatste en meest geavanceerde carbontechnologie, met als resultaat een verbluffende verhouding tussen sterkte en gewicht.

Het resultaat is een ultralichte rolstoel in combinatie met ultieme stijfheid voor een ultra-responsieve rit.

Neem plaats en ervaar het verschil!

* Gewichtsverdeling: SW 36 cm, SD 40 cm, met carbonzijscherm in slanke stijl, superlichte bekleding, lichte en compacte rem en carbonrugleuning zonder duwgrepen.



6,2 kg

KRYPTON R

De lichtste en tegelijkertijd volledig verstelbare rolstoel met perfecte stijfheid van 6,2 kg*


8,3 kg

KRYPTON F

De lichtste opvouwbare rolstoel ter wereld vanaf 8,3 kg*



HIGHTECH

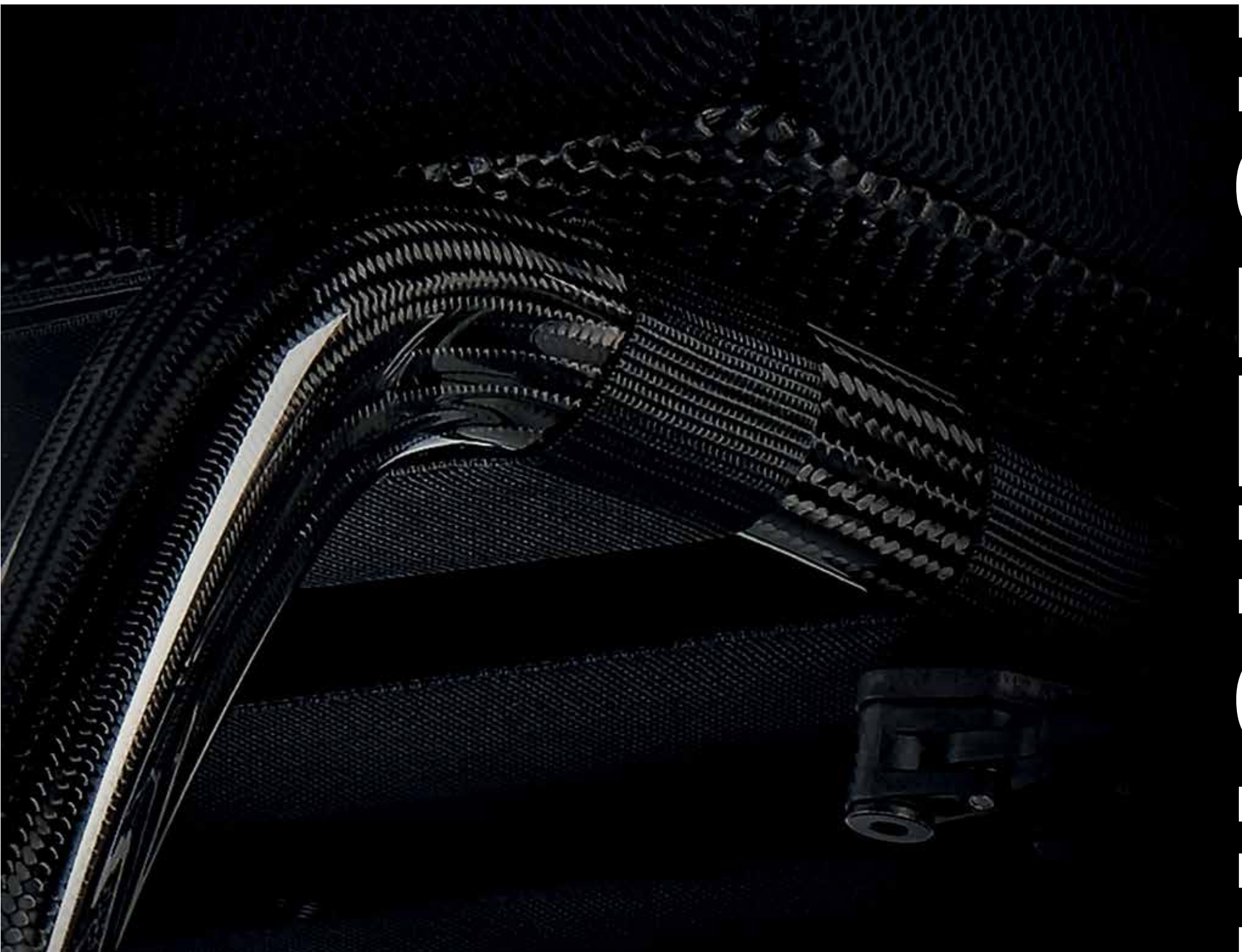

REVOLUTIONAIRE TECHNIEK

Carbonbuizen kunnen op verschillende manieren worden gemaakt. Wij zijn echter de eerste rolstoelfabrikant die gebruikmaakt van een gepatenteerde, innovatieve en naadloze technologie van gevlochten carbon.

Dankzij dit volledig geautomatiseerde vlechtproces kan het perfecte frame worden gebouwd – sterk waar nodig, licht waar mogelijk, en vervaardigd op basis van een nauwkeurig en betrouwbaar geautomatiseerd proces.

Dat is wat we noemen technische deskundigheid.



1 De carbonframebuizen worden ontwikkeld op basis van een gerobotiseerde vlechttechnologie

2 Kwaliteitscontrole tijdens het proces

3 Carbonafwerking van de buizen



ONTWORPEN OM EENLEVEN LANG MEE TE GAAN

We sparen kosten noch moeite om de betrouwbaarheid van de Krypton aan te tonen. Elk onderdeel werd pas goedgekeurd op het moment dat onze technische experts 100% tevreden waren over de kwaliteit ervan.

De Krypton is zelfs getest onder ijsskoude en bloedhete omstandigheden (-20 °C tot 70 °C).

Geen verouderingstest heeft de levensduur kunnen vaststellen, waarmee we een rolstoel hebben ontworpen die daadwerkelijk een leven lang mee kan.

EN BETROUWBAAR



TWEE ROLSTOELLEN ÉÉN KARAKTER



KRYPTON R

FENOMENALE STIJFHEID EN MESSCHERPE
WENDBAARHEID


Het is niet alleen het verfijnde materiaal en de bekende verleidelijke vormgeving die deze krachtige rolstoel uniek maakt, maar ook de atletische eigenschappen en de wendbaarheid ervan. Dankzij het traploos instelbare zwaartepunt, de mogelijkheid tot goede afstemming van de voorste en achterste zithoogten en instelling van de juiste rughoek, is de Krypton R echt tot bijzondere dingen in staat.

KRYPTON F

DE LICHTSTE OPVOUWBARE ROLSTOEL OOIT

Vanuit elke positie straalt de Krypton F schoonheid uit. Het hart van de Krypton F is zijn onberispelijk gevormde dwarsverbinding, die nauwelijks zichtbaar onder de zitting is bevestigd en die de rolstoel, dankzij dit open frame, een zeer minimalistische uitstraling geeft.



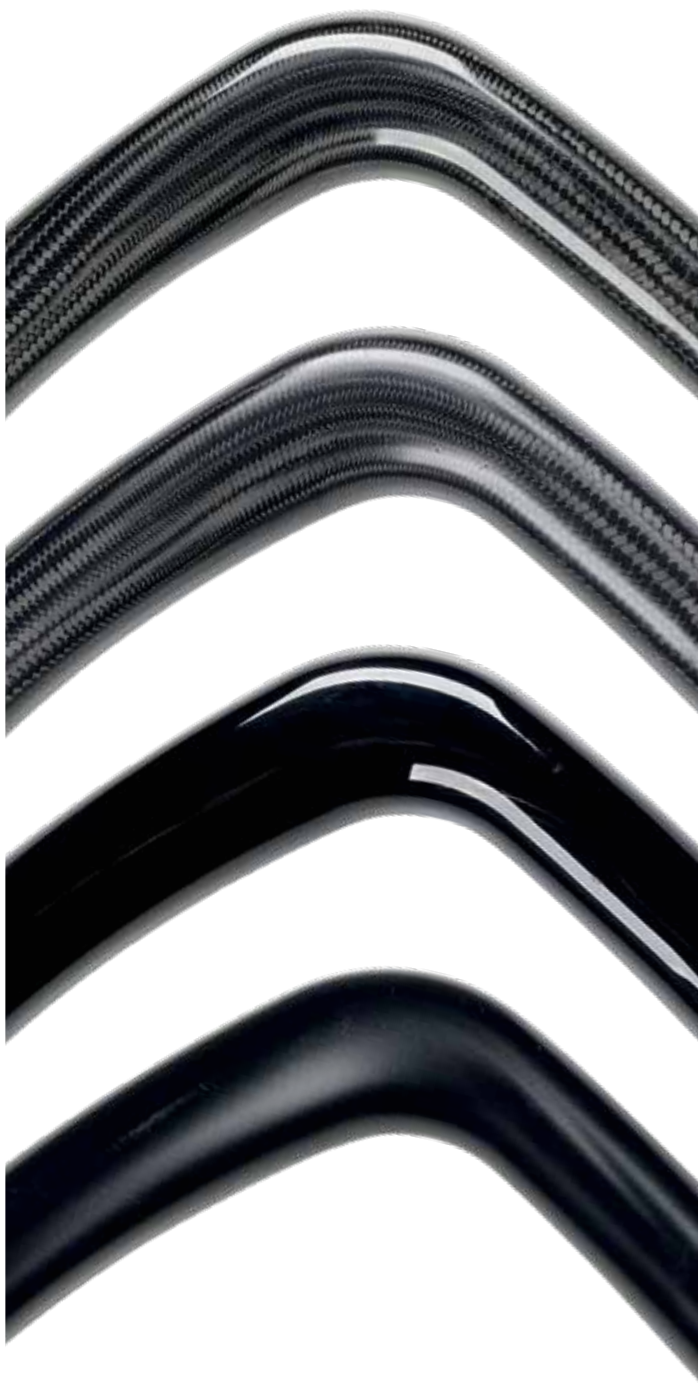

TOT IN DETAIL UITGEWERKT

Ga voor een Krypton. Dat is stap één. Vervolgens kunt u met de persoonlijke opties van Quickie uw droomrolstoel creëren en een stijl kiezen die perfect bij u past.

CARBONAFWERKING

Transparante hoogglanscoating – transparante coating met luxe hoogglans

Transparante matcoating – een ingehouden chique levensstijl

Ongecompliceerd zwart – zwarte coating, mat of glans

Natuurlijk carbon – zonder coating; de puurste variant, gewichtsbesparing 100 g. Dezelfde uitstraling als de transparante variant met matcoating





TWEE POSITIES VOOR ZWENKWIELEN

Smal en in de achterste stand;
ideaal voor drukke omgevingen.
Breed en in de voorste stand;
voor meer stabiliteit aan de
voorkant.



KLEURACCENTEN

U kunt kiezen uit 5 kenmerkende stijlen voor de zwenkwielvorken, wielen, Exo-bekleding en stickers.

WENDBAAR. STIJL.

DE QUICKIE

DE LICHTSTE VERSTELBARE SERIE ROLSTOELN

Ons doel is om aan de hand van innovatieve en betrouwbare oplossingen de onafhankelijkheid van gebruikers te vergroten en ze zo te helpen bij het verwezenlijken van hun gewenste levensstijl.



XENON² vanaf 8,8 kg



HELIUM[®] vanaf 6,8 kg



KRYP

OPVOUWBARE ROLSTOEL

MAXIMALE FRAMESTIJFHEID



KRYPTON R

vanaf 6,2 kg

OPVOUWBAAR STOEL

MAXIMALE

FRAMESTIJFHEID

KRYPTON F *vanaf 8,3 kg*

TECHNISCHE GEGEVENS

	Krypton R – Carbonrolstoel met maximale frame stijfheid	Krypton F – Opvouwbaar carbonrolstoel
Maximumgewicht gebruiker	125 kg	110 kg
Frameversie	Rolstoel met stijf frame en open voorkant	Opvouwbaar rolstoel met open frame aan de voorkant
Framemateriaal	Carbonvezel	Carbonvezel
Zitbreedte	320 - 460 mm (in stappen van 20 mm)	320 - 460 mm (in stappen van 20 mm)
Zitdiepte	340 - 480 mm (in stappen van 20 mm)	340 - 480 mm (in stappen van 20 mm)
Stoelhoogte voorkant	430 - 550 mm	430 - 550 mm
Stoelhoogte achterkant	380 - 500 mm	370 - 500 mm
Rugleuninghoogte	250 - 450 mm	250 - 475 mm
Rugleuninghoek	59° - 105°	75° - 103°
Wielvlucht	0°/3°	0°/2°/4°
Totale breedte // lengte // hoogte	760 mm // 930 mm // 950 mm	720 mm // 1075 mm // 950 mm
Max. draaibreedte	700 mm	700 mm
Max. veilige helling	7° (bij gebruik van parkeerremmen)	7° (bij gebruik van parkeerremmen)
Voorwiel // Achterwiel	3"/4"/5"/6" // 24"/25"	3"/4"/5"/6" // 24"/25"
Gewicht rolstoel	vanaf 6,2 kg	vanaf 8,3 kg
Gewicht na demontage	vanaf 3,65 kg	vanaf 5,8 kg
Massa zwaarste onderdeel	Achterwiel 1,1 kg	Achterwiel 1,1 kg
Verwijderbare onderdelen	Achterwielen (uitsluitend voor transport)	Achterwielen, hangers en zijschermen (uitsluitend voor transport)
Afwerking carbonframe	Natuur; transparante glanslak en matte lak, zwarte glanslak en matte lak	Natuur; transparante glanslak en matte lak, zwarte glanslak en matte lak
Getest op botsbestendigheid	Niet goedgekeurd voor transport in een voertuig	
Transport zonder inzittende	Rolstoel moet veilig worden vastgemaakt in een voertuig (bv. auto of vliegtuig)	
Beoogd gebruik en beoogde omgeving	Voor mensen met een beperkte mobiliteit (jongeren en volwassenen); zelf voortduwen of geduwd worden door een begeleider, voor binnen- en buitengebruik.	

De specificaties en vermeldingen in deze brochure kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd. De kleuren van de afgebeelde producten kunnen afwijken van de werkelijke kleuren en de actuele beschikbaarheid. Alle merk- en productnamen die worden genoemd, zijn gedeponeerde handelsmerken van Sunrise Medical. De gegevens in de brochure waren actueel op het moment van drukken. Kijk voor de meest recente informatie op onze website en raadpleeg altijd de laatste versie van het orderformulier.