



ATTITUDE JUNIOR

DOVE L'AVVENTURA HA INIZIO

LA GIUSTA ATTITUDE PER CHI AMA SCOPRIRE IL MONDO

LA PRIMA HANDBIKE CHE APRIRÀ
AL VOSTRO BAMBINO NUOVI
ORIZZONTI DA ESPORARE
E TANTA LIBERTÀ.

Desideriamo che i bambini
amino la libertà quanto
la amiamo noi.
Per questa ragione
Attitude Junior è
perfetta per portare i
bambini verso nuove
avventure.

// Empulse Attitude Junior
con Zippie Youngster 3



ATTITUDE
Junior

L'HANDBIKE È L'IDEALE PER I BAMBINI

- n Ha un ruolo fondamentale nello sviluppo naturale durante la crescita
- n Aumenta l'autostima poichè stimola partecipazione e indipendenza
- n Migliora la coordinazione e la consapevolezza del proprio corpo
- n Rinforza il sistema cardiovascolare




PRONTI A PARTIRE IN POCHI SECONDI

L'intelligente meccanismo di aggancio consente di applicare Attitude Junior alla carrozzina in pochi secondi e di sganciarla in modo altrettanto facile. Ideale per i piccoli esploratori che non vogliono perdere nemmeno un attimo quando è il momento di passare dalla handbike alla carrozzina e viceversa.

Il meccanismo di aggancio di Attitude Junior è semplicissimo: si applica semplicemente alla parte anteriore della carrozzina senza bisogno di ulteriori parti o di cavi tra le vostre ginocchia. In questo modo niente si frapperà tra voi e il comfort che vi aspettate dalla vostra carrozzina.

Dopo avere sganciato Attitude, solo due piccoli perni (170 g) rimangono sulla carrozzina.

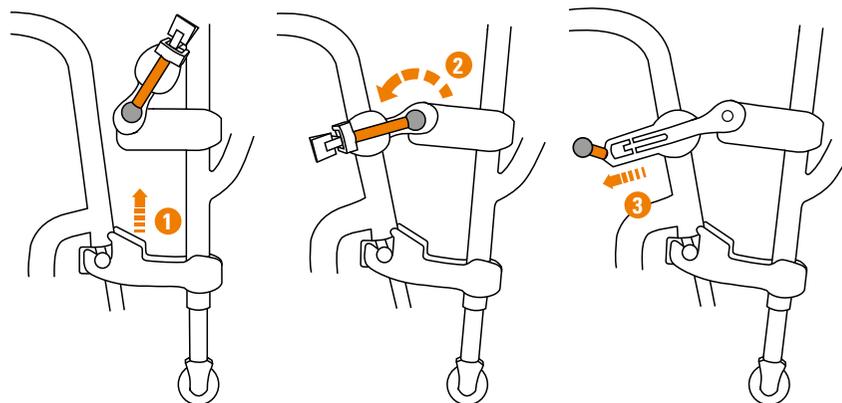

- 1 Inserite la parte inferiore nel perno di blocco.
- 2 Ruotare il connettore superiore verso il basso.
- 3 Bloccare il sistema di aggancio tirando la leva rossa.



Guarda il video!

IDEALE PER LA CRESCITA DEI BAMBINI!

Stare insieme, crescere insieme. La facilità di regolazione in profondità ed inclinazione della handbike Attitude Junior assicura una posizione corretta del sistema di spinta (regolazione in profondità fino a 100 mm e 28° di inclinazione). Questo è molto importante per avere a disposizione l'energia necessaria per una spinta efficiente ed è un must per i bambini in crescita.



DOVE L'AVVENTURA HA INIZIO

Attitude Junior ha tutte le caratteristiche che consentiranno al vostro bimbo di guidare con controllo, fiducia e comfort. La ruota da 16", il cambio a 8 velocità e le maniglie orizzontali offrono prestazioni di guida eccezionali su tutti i terreni. In più, il potente freno ad inversione consente un controllo della velocità estremamente fluido. Leggera e facilmente manovrabile, porta divertimento ovunque vada.



ATTITUDE Junior



// LIBERI DI ANDARE

Il cambio a 8 velocità è perfetto per tutti i terreni. Il potente freno ad inversione consente un controllo della velocità estremamente sicuro.



// MANIGLIE ORIZZONTALI

La posizione orizzontale delle maniglie è l'ideale per i bambini poiché consente di mantenere le braccia in posizione ergonomica.



// MANIGLIA ERGONOMICA

La maniglia ergonomica consente di manovrare la handbike utilizzando una sola mano quando la si sgancia dalla carrozzina o la si vuole riporre.



// FRENO DI STAZIONAMENTO

Il freno di stazionamento con funzione di blocco è standard su tutte le Attitude.



DATI TECNICI

ATTITUDE JUNIOR // Add-on wheelchair bike for kids

Portata massima	100 kg
Larghezza telaio anteriore (regolabile + 2 cm)	260 - 460 mm
Peso delle parti che rimangono applicate alla carrozzina	170 g
Peso totale	14,5 kg
Ruote	16"
Leve del cambio	Grip shift
Cambio	8 velocità

Larghezza sistema di spinta a V	240 mm
Lunghezza del sistema di guida	110 mm / 130 mm / 150 mm
Regolazione in profondità del sistema di guida	100 mm
Regolazione in angolazione del sistema di guida	28°
Freni	Freno ad inversione
Freno di stazionamento	Sì
Colori	31

Salvo errori e omissioni.



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it



Rev. 01/2023

