



Sortimentsoversikt

MODULOPPBYGDE SITTESYSTEMER

Produktene fra Sunrise Medical AS som fra mars 2022 er på avtale i kontrakten for moduloppbygde sittesystemer.

Innhold

Utfordringer i sittende posisjon	3
Breezy Nuage PLS	5
Breezy Nuage PLS Active/Active XS	5
Mygo Seat.....	6
Squiggles Seat.....	6
BeMe.....	7



Utfordringer i sittende posisjon

Ved posisjonering i sittende stilling er det tre nøkkelområder som krever spesiell fokus:

1. posisjonering av bekken og bekkenstabilitet
2. posisjonering av ben og føtter
3. posisjonering av overkropp og hode


1 Posisjonering av bekken og bekkenstabilitet

- Bakovertiltet bekken
- Rotert bekken
- Skjevstilt bekken

God posisjonering av bekkenet er grunnsteinen for sittende stilling.

En riktig tilpasset bekkenstøtte er viktig for å opprettholde en optimal stilling i bekkenet. Ved fikserte feilstillinger i bekkenet bør bekkenstøtten kunne tilpasses slik at den gir støtte også til denne stillingen.

Trinnløst justerbare hoftestøtter sikrer god støtte for bekkenet. Ved å feste bekkenbeltet i hoftestøttene sørger man for at beltet sitter tett rundt brukers bekken. Dette gir minimale muligheter til å bevege bekkenet til en uheldig stilling. Bekkenbeltets utforming og plassering av festepunkter bør være slik at de sørger for ytterligere stabilisering av bekkenet. For mer utfordrende kroppsfasonger vil et belte som omslutter bekkenet fullstendig gi uovertruffen proksimal posisjonering av og støtte til bekkenet.

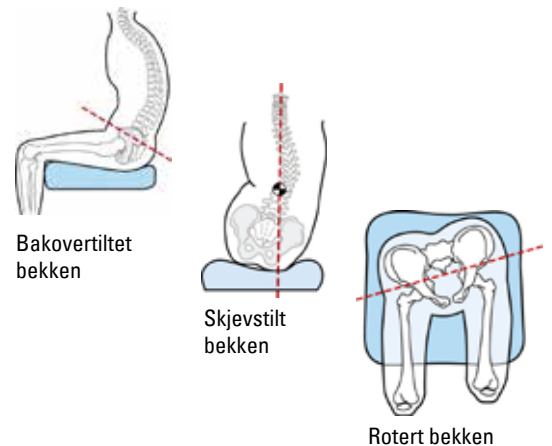


2 Posisjonering av ben og føtter

- Windsweeping
- Stram hamstrings
- Funksjonell benlengdeforskjell
- Faktisk benlengdeforskjell

Noen brukere presenterer en windsweept sittestilling, med stramme abduktorer på det ene benet og stramme adduktorer på det andre.

Å tillate en windsweept sittestilling bidrar til at bekkenet kan plasseres godt inn i sittemodulen. I tillegg vil tonus ikke bli unødvendig forhøyet på grunn av ubehag og/eller strekk i stram muskulatur. Resultatet er en funksjonell sittestilling der bruker klarer å utføre ulike aktiviteter.

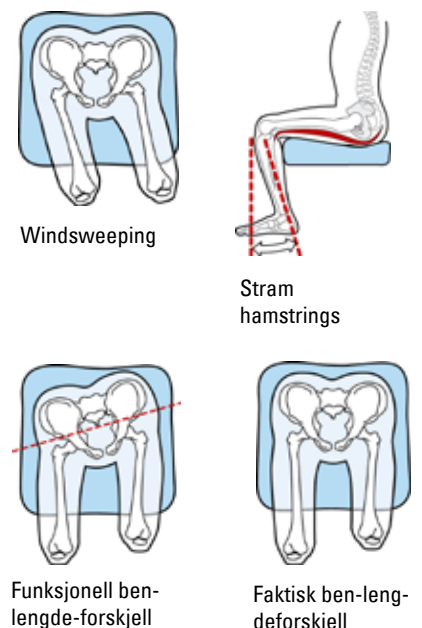

Ved stram hamstrings er det viktig å kunne plassere foten bak loddlinjen for kneet. Dette sikrer at bekkenet ikke tipper bakover eller at tonus ikke forhøyes som resultat av drag på hamstrings.

Tilpassing til en faktisk eller en funksjonell benlengdeforskjell sikrer optimal understøttelse samtidig som bekkenet kan plasseres godt inn i sittemodulen. Full understøttelse for ben og føtter er avgjørende for å opprettholde posisjonen i bekken og overkropp samt for fullt potensiale for funksjon og interaksjon.

3 Posisjonering av overkropp og hode


- Kyfose
- Lordose
- Skoliose

En riktig tilpasset bekkenstøtte gir støtte og posisjonering til bekkenet og nedre del av ryggen. Bekkenstøtten bør også kunne tilpasses en fiksert feilstilling for å gi støtte og stabilitet. Ytterligere innstillingsmuligheter av ryggsegmentene vil bidra til optimal støtte for alle posisjoner.

En fleksibel skoliose kan korrigeres ved hjelp av faste hoftestøtter, individuelt regulerbare sidestøtter og et godt bekkenbelte. Formbare sidestøtter er spesielt egnet til å støtte en fiksert skoliose da disse sidestøttene formes etter kroppens fasong for å gi størst mulig støtteflate.

Støtte for skuldrene oppfordrer bruker til å samle hendene foran kroppen for funksjonell aktivitet og gir i tillegg støtte for økt hodekontroll.

Mulighet for variasjon i støtte av overkroppen ved bruk av bryststøtte og ulike typer vester er avgjørende for et balansert forhold mellom god posisjonering og funksjon. Et tilpasset sortiment av hodestøtter er nødvendig for å møte de individuelle behovene.

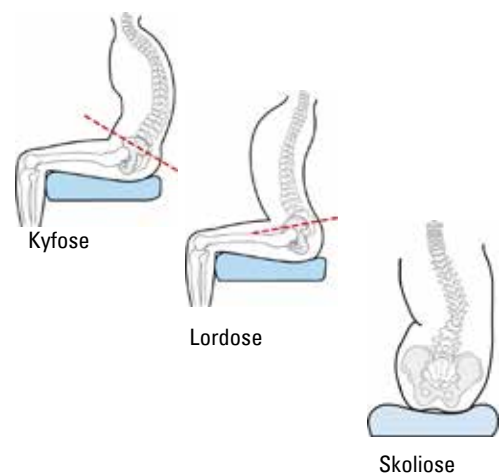

Breezy Nuage PLS

Nummer 1 i delkontrakt 3 - Sittemodul med tykk polstring og omsluttende støtte, med understell - barn, ungdom og voksne.



	Art.nr	HMS art.nr.
Breezy Nuage PLS	NPLS-NO	294023

- Maksimal omsluttende støtte for personer med begrenset mobilitet, balanse og selvstendig stillingsendring.
- Svært gode tilpasningsmuligheter til den foretrukne stillingen, for støtte og komfort
- Den omsluttende puten dekker fra skuldre og helt ned til føttene.

Breezy Nuage PLS Active/Active XS

Nummer 2 i delkontrakt 3 - Sittemodul med tykk polstring og omsluttende støtte, med understell - barn, ungdom og voksne.



	Art.nr	HMS art.nr.
Breezy Nuage PLS Active	NPLSA-NO	294021
Breezy Nuage PLS Active XS	NPLSAXS-NO	294022

- Serie på to produkter: Breezy Nuage PLS Active for voksne og Breezy Nuage PLS Active XS for barn, ungdom og mindre voksne.
- Maksimal omsluttende støtte for personer med begrenset mobilitet, balanse og selvstendig stillingsendring.
- Nuage PLS Active kommer som standard uten leggstøtte og er beregnet for personer som er noe mer aktive og har mulighet for frontalflytting ut av stolen.
- Svært gode tilpasningsmuligheter til den foretrukne stillingen, for støtte og komfort.

Mygo Seat

Nummer 2 i delkontrakt 1 - Sittemodul med avanserte tilpasningsmuligheter, med understell til barn.



	Art.nr	HMS art.nr.
Mygo Seat Str. 1	117-610-06N021	294024
Mygo Seat Str. 2	137-600-06N021	294025
Mygo Seat Str. 3	185-600-06N021	294026

- Trinnløst breddejusterbare bekkenstøtter.
- Justerbar korsryggstøtte for posisjonering og stabilisering av bekken.
- Skulderstøtte med justerbare sidevanger gir støtte til skuldre for hensiktsmessig bruk av hendene (standard str2/3, tilbehør str1).
- Enkel tilpassing av hoftaabduksjon, setedybde, lårlengdeforskjell, abduksjon og windsweeping.
- Separate fotstøtter følger abduksjon og windsweeping.
- Sidestøtter justerbare i høyde, bredde og vinkel, utsvingbare for enklere forflytning.
- Tilpasset brukerbehovet 3-16 år.

Squiggles Seat

Nummer 3 i delkontrakt 1 - Sittemodul med avanserte tilpasningsmuligheter, med understell til barn.



	Art.nr	HMS art.nr.
Squiggles Seat	120-610-03N021	294027

- Tilpasset behovene til barn som skal opp å sitte for første gang, gjennom blant annet bekkenstøttens utforming.
- Sidestøtter justerbare i høyde, bredde og vinkel, utsvingbare for enklere forflytning.
- Stabil støtte over tid fra polstret, regulerbart fire-punkts bekkenbelte.
- Trinnløst breddejusterbare bekkenstøtter.
- Tilpasset brukerbehovet 1-5 år.

BeMe

Nummer 3 i delkontrakt 2 - Sittemodul med avanserte tilpasningsmuligheter, med understell til ungdom og voksne.



	Art.nr	HMS art.nr.
BeMe Stor	150-BML	294019
BeMe Stor lang	150-BMLL	294020

- Moduloppbygget rygg som kan tilpasses spesifikke behov.
- Bekkenstøtte justerbar i høyde, dybde samt kuleledd for god støtte og posisjonering til bekkenet.
- Stabil støtte fra polstret, regulerbart fire-punkts bekkenbelte.
- Enkelt justerbar hodestøtte for flat eller formet posisjon.
- Tilpasningvennlig dynamisk rygg som bidrar til å opprettholde god bekkenplassering, uavhengig av blant annet ekstensjonsspastisitet.
- Smale, bredde-, høyde-, dybde- og vinkeljusterbare sidestøtter. Utsvingbare for enklere forflytning.
- Enkel tilpassing av hofteabduksjon, lårlengde og windsweeping.
- Tilpasset brukerbehovet fra 10 år.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.