

Q700


LEISTUNGSSTARKE TECHNIK
AUF HOHEM NIVEAU



LEISTUNGSSTARKE TECHNIK AUF HOHEM NIVEAU



Q700 M

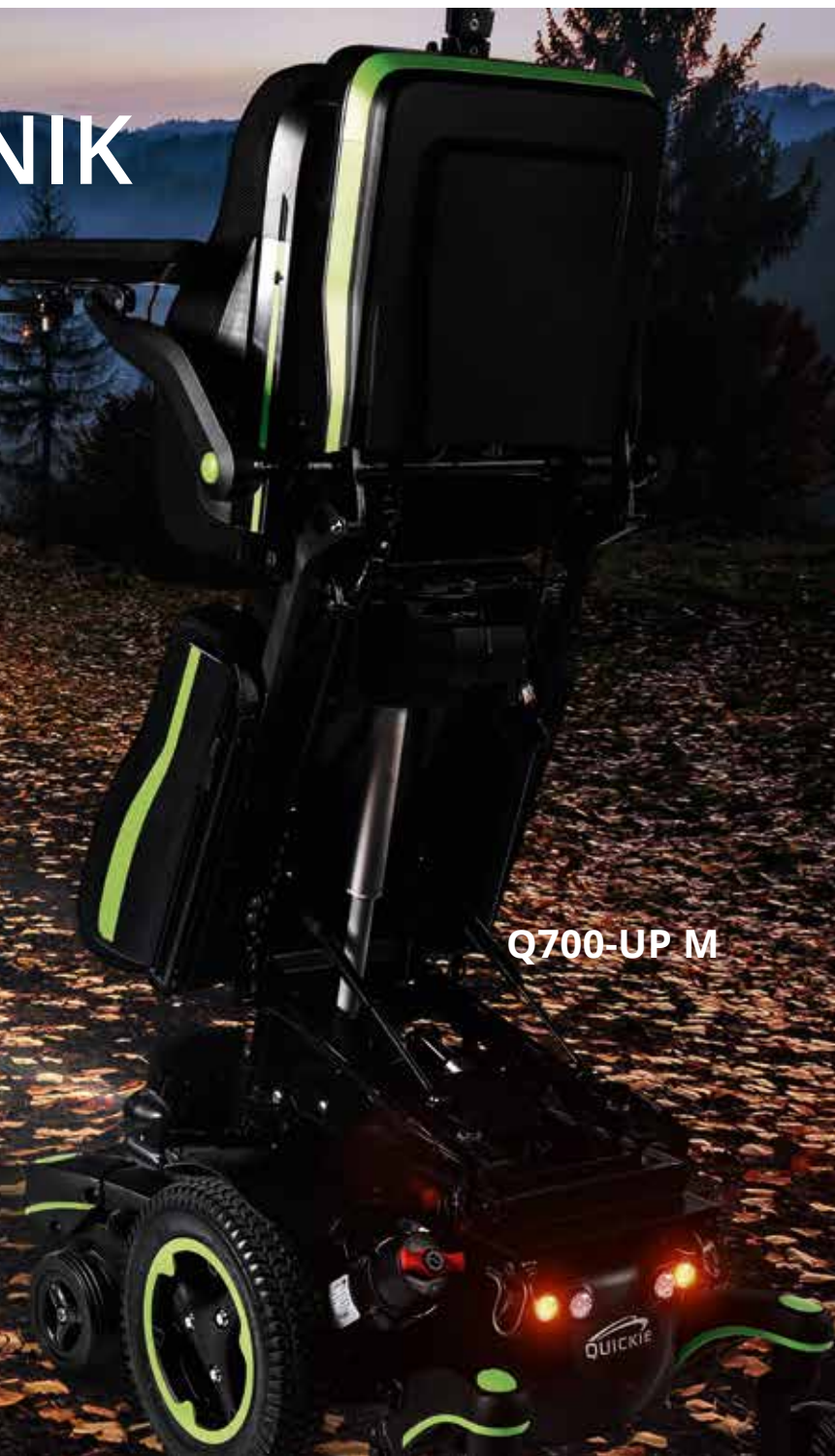

Q700-UP M

Frei und unabhängig sein – mit den innovativen Elektrorollstühlen der Marke QUICKIE erleben Sie größtmögliche Flexibilität und Mobilität sowie ein hohes Maß an Unabhängigkeit für ein selbstbestimmtes Leben. Unsere leistungsstarken Elektrorollstühle stehen darüber hinaus für maximale Sicherheit, sehr gute Fahreigenschaften, passende Sitzsysteme und eine auf Ihre Anforderungen perfekt abgestimmte Fahrelektronik.

Unsere Mission war es, revolutionäre Elektrorollstühle zu entwickeln, die das Beste aus Hightech und Innovation vereinen. Das Ergebnis sind der Q700-UP M und der Q700 M, die neue Maßstäbe setzen und die Elektrorollstuhltechnologie revolutionieren.

Willkommen in der Zukunft

PERFORMANCE

Das SpiderTrac 2.0 Fahrwerk mit patentiertem Anti-Pitch-System ermöglicht ein sehr komfortables Fahren über Unebenheiten, sichert maximale Traktion und minimiert Ihre Bewegungen beim Fahren – jederzeit und dauerhaft.

SITZSYSTEM

Das einzigartige Sitzsystem passt sich kompromisslos an. Aufgrund des patentierten biomechanischen Rückensystems bleiben die Kopfstütze, die Kopf- und Kinnsteuerung in der gleichen Bedienposition, trotz Bewegung des Rückens und Verstellung des Rückenwinkels. Sechs Positionen sind individuell programmier- und jeweils mit nur einem Knopfdruck erreichbar.

KONNEKTIVITÄT

Umfeldsteuerung leicht gemacht! Dank der einfachen und intuitiv zu bedienenden Steuerung können Sie Geräte in Ihrem Umfeld problemlos durch Bluetooth und Infrarot steuern.

DESIGN

Die in sechs Farben erhältlichen Inlays von Sitz und Fahrbasis runden das exklusive Design ab.






MITTELRAD ANTRIEB

Die Antriebseinheit der Q700 Serie setzt neue Maßstäbe im Bereich Antriebstechnik. Das innovative, patentierte SpiderTrac™ Fahrwerk bietet Stabilität, Sicherheit und volle Kontrolle bei maximaler Traktion auf jedem Untergrund. Erleben Sie das ultimative Fahrerlebnis der besonderen Art.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Mit extrem zuverlässigen 4-Pol Motoren in 6, 10 oder 13 km/h und 80 Ah Batterien zur Maximierung Ihrer Reichweite, haben Sie mit dem Q700 M einen verlässlichen Wegbegleiter.

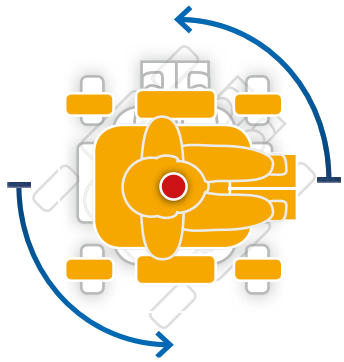

INTUITIVES FAHREN

Durch den Mittelradantrieb liegt der natürliche Drehpunkt des Körpers genau über dem Drehpunkt des Rollstuhls. Das Fahren geschieht damit intuitiv.


INNOVATIVE FAHRWERKSTECHNOLOGIE

Stabilität, Sicherheit und volle Kontrolle auf jedem Untergrund mit SpiderTrac™. Das innovative, patentierte SpiderTrac™ Fahrwerk harmonisiert über Dämpfer die Bewegungen des gesamten Elektrorollstuhls. Die über eine Verbundmechanik gekoppelten Lenkradarme reduzieren die Bewegung des Sitzes auf ein Minimum.




ELEKTRONISCHER SPURASSISTENT

Das optionale Gyro Tracking System des Q700 kompensiert automatisch jegliche Unebenheiten des Untergrundes und hält den Elektrorollstuhl in der Spur. Dies ist besonders von Vorteil bei Verwendung von Sondersteuerungen.

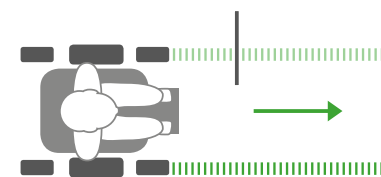

MIT GYRO

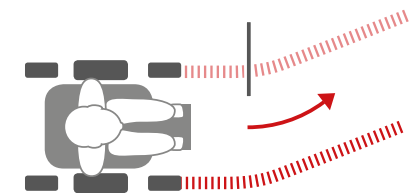

OHNE GYRO



SEDEO ERGO SITZSYSTEM

Das revolutionäre, biomechanische Sitzsystem Sedeo Ergo passt sich kompromisslos an die Bedürfnisse an. Das patentierte, biomechanische Rückensystem unterstützt Sie effektiv beim Druckentlasten und ermöglicht eine richtige Positionierung über den ganzen Tag verteilt.

EINFACHER TRANSFER

Das Sitzkissen ist in drei Elemente aufteilbar. Die zwei Oberschenkel-Seitenpolster sind abschwenk- und abnehmbar. Dies sichert einen einfachen Transfer.

Bei komplexeren Positionierungsanforderungen kann das serienmäßige Sitzkissen durch ein JAY Sitzkissen einfach und schnell ersetzt werden.

EINSTELLBAR AUF IHRE BEDÜRFNISSE

Die Premium-Kopfstütze ist einfach verstell- und komplett abnehmbar (1). Alle Sitzbreiten und -tiefen (2) sind stufenlos mit nur einem Werkzeug (5 mm Inbus-Schlüssel) anpassbar. Gleiches gilt für die Rückenbreite (3). Auch die Armlehnenhöhe (4) und Winkleinstellung können gleichermaßen einfach angepasst werden.

DRUCKENTLASTUNGSERINNERUNG

Eine Erinnerungsfunktion zur Druckentlastung teilt Ihnen mit, wann es Zeit ist, die Sitzposition zu wechseln. Ein Protokoll kann gespeichert und mit Therapeuten und Ärzten per E-Mail geteilt werden.

PROGRAMMIERBARE SITZPOSITIONEN

Der Q700 M Sedeo Ergo kann bis zu sechs individuelle Memory-Funktionen speichern und jederzeit abrufen. Einfach programmieren, abrufen und ansteuern – ohne PC oder Programmiergerät.

FUSSPLATTE BIS ZUM BODEN

Da die Fussplatte bis zum Boden absenkbar ist, werden so auch Transfers aus und in den Rollstuhl im Stehen möglich gemacht.



ERGONOMISCHE VERSTELLUNG

Das patentierte biomechanische Rückenverstell-System positioniert Sie wie kein anderes. Von einer Liegeposition hin zu einer aufrechten Sitzposition kann eine Zwischenposition programmiert werden, die auf eine stabile Sitzposition vorbereitet. So wird ein Verrutschen im Sitz verhindert, speziell wenn Unterstützung beim Erlangen einer stabilen Sitzposition benötigt wird.

BIOMECHANISCHER RÜCKEN

Dank dem patentierten biomechanischen Rückensystem, welches einen Längenausgleich bis zu 180 mm ermöglicht, bleiben Kopf- und Kinnsteuerung trotz Bewegung des Rückens und Verstellung des Rückenwinkels in der gleichen Bedienposition.



A man wearing a grey cap and a blue and black jacket is seated in a black and orange motorized wheelchair. He is smiling and holding a metal cup. A woman in a black top and a long olive-green skirt is standing next to him, also smiling and holding a pretzel. They are on a gravel path next to a stone wall, with a mountainous landscape in the background. The wheelchair has the brand name 'QUICKIE' on its side.

Q700 M

SEDEO ERGO SITZSYSTEM

Erleben Sie den Unterschied mit dem Q700 M SEDEO ERGO. Die Kombination aller Vorteile des SEDEO ERGO Sitzsystems mit C-Me ermöglicht es Ihnen Ihr Leben selbstständig zu bewältigen.

AUF AUGENHÖHE MIT C-ME

Alles auf Augenhöhe miterleben: Mit C-Me kann die Sitzhöhe um 300 mm nach oben verstellt und trotzdem eine Geschwindigkeit von 4,5 km/h erreicht werden. Egal, ob Sie für die Familie kochen oder mit Freunden „Schulter an Schulter“ unterwegs sind – mit C-Me werden Sie eine neue Ebene der Unabhängigkeit erleben.



MEMORY POSITIONEN

Die vier voreingestellten Memory Positionen können individuell programmiert werden, indem der Memory Button gedrückt und gleichzeitig der Joystick für drei Sekunden nach hinten gezogen wird. Ein kurzer Hinweisston bestätigt die Einprogrammierung.

POSITIONSBEISPIELE



KANTELN



RELAX



LIFT (C-ME)



LIEGEN

Q700-UP M

SEDEO ERGO UP SITZSYSTEM

Für alle, die das Leben aus neuen Höhen erfahren möchten:
Entdecken Sie SEDEO ERGO UP. Kombinieren Sie alle Vorteile
des SEDEO ERGO Sitzsystems mit der Möglichkeit zu stehen,
wann immer Sie es möchten.



VORTEILE DES STEHENS

Der Q700-Up M ermöglicht es jederzeit zu stehen und bietet darüber hinaus noch weitere Vorteile für Ihre Gesundheit:

- Erleichtert die Atmung
- Verbessert die Druckentlastung
- Entlastet Organe wie Lunge, Darm und Blase
- Verbessert die Durchblutung
- Reduziert Spastiken
- Fördert die Knochengesundheit und verringert Skelettdeformitäten
- Stärkt das Herz-Kreislauf-, sowie das Lymphsystem
- Kräftigt Stütz- und Bewegungssystem und beugt Gelenkeinschränkungen vor

90° KNIIEWINKEL


Die neue elektrische Zentral-Beinstütze bietet einen echten 90° Kniewinkel in sitzender Position. Das ergonomische Kniepolster ist auch in Tiefe und Breite einstellbar.




MEMORY POSITIONEN

Jede der sechs Memory Positionen kann individuell programmiert werden, indem der Memory Button gedrückt und gleichzeitig der Joystick für drei Sekunden nach hinten gezogen wird. Ein kurzer Hinweisston bestätigt die Einprogrammierung.


POSITIONSBEISPIELE

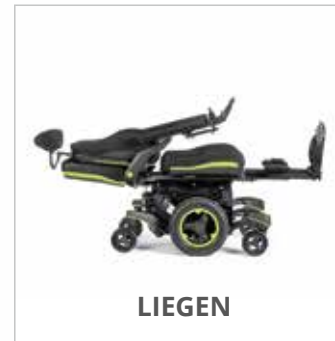


LIEGEN

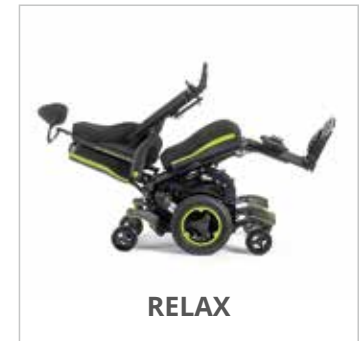


RELAX

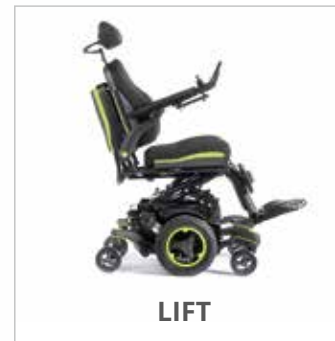

LIFT

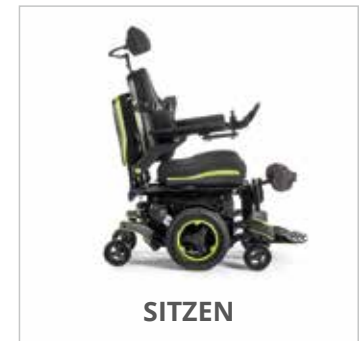

SITZEN

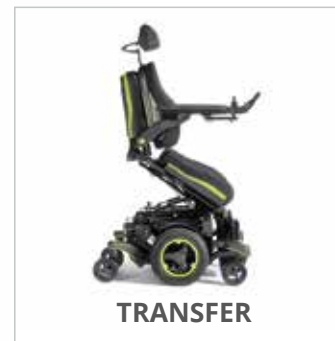

TRANSFER



STEHEN

JAY® & WHITMYER®

POSITIONIERUNGSOPTIONEN

Mit SEDEO ERGO und SEDEO ERGO UP sind eine Vielzahl von WHITMYER Kopfstützen, JAY Sitzkissen und Rücken kombinierbar, um unterschiedliche klinische Bedürfnisse zu erfüllen und sicherzustellen, die bestmögliche Positionierung zu gewährleisten.



JAY KISSEN & RÜCKEN

JAY Sitzkissen und Rücken wurden für größtmögliche Stabilität und Hautschutz entwickelt. Sie sind einfach und individuell anpassbar und können somit unterschiedlichsten Positionierungsanforderungen gerecht werden.



WHITMYER KOPFSTÜTZEN

Um Positionierungsanforderungen von der Basisunterstützung bis hin zur multiplen Punktunterstützung zu erfüllen, hat Whitmyer unterschiedliche Kopfstützen entwickelt. Das Befestigungssystem lässt sich perfekt mit einer Reihe von Pads kombinieren und bietet eine breite Palette an Lösungen zur Unterstützung und/oder Kontrolle der Halswirbelsäule und des Kopfes.







SWITCH-IT REMOTE SEATING APP

Die Switch-It Remote Seating App* misst permanent die Sitzwinkel und registriert die Zeit, in der Sie in einer Sitzposition verbleiben, um Ihre allgemeine Gesundheit und Wohlbefinden durch Druckmanagement zu verbessern und Druckstellen vorzubeugen.

- Bluetooth Technologie verbindet sich kabellos mit dem Rollstuhl.
- Live Berichte über Sitzwinkel, -dauer und -neigung können erstellt werden.
- Berichte können mit Therapeuten und Ärzten per E-Mail geteilt werden.
- Unterstützt bei der Erstellung von Druckentlastungsplänen.
- Benachrichtigt den Nutzer seine Sitzposition anzupassen.

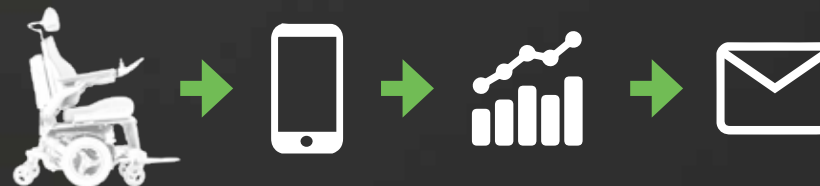

*Hardware als Voraussetzung. Standardmäßig enthalten in der gegen Aufpreis optional verfügbaren 5-Schalter Box.

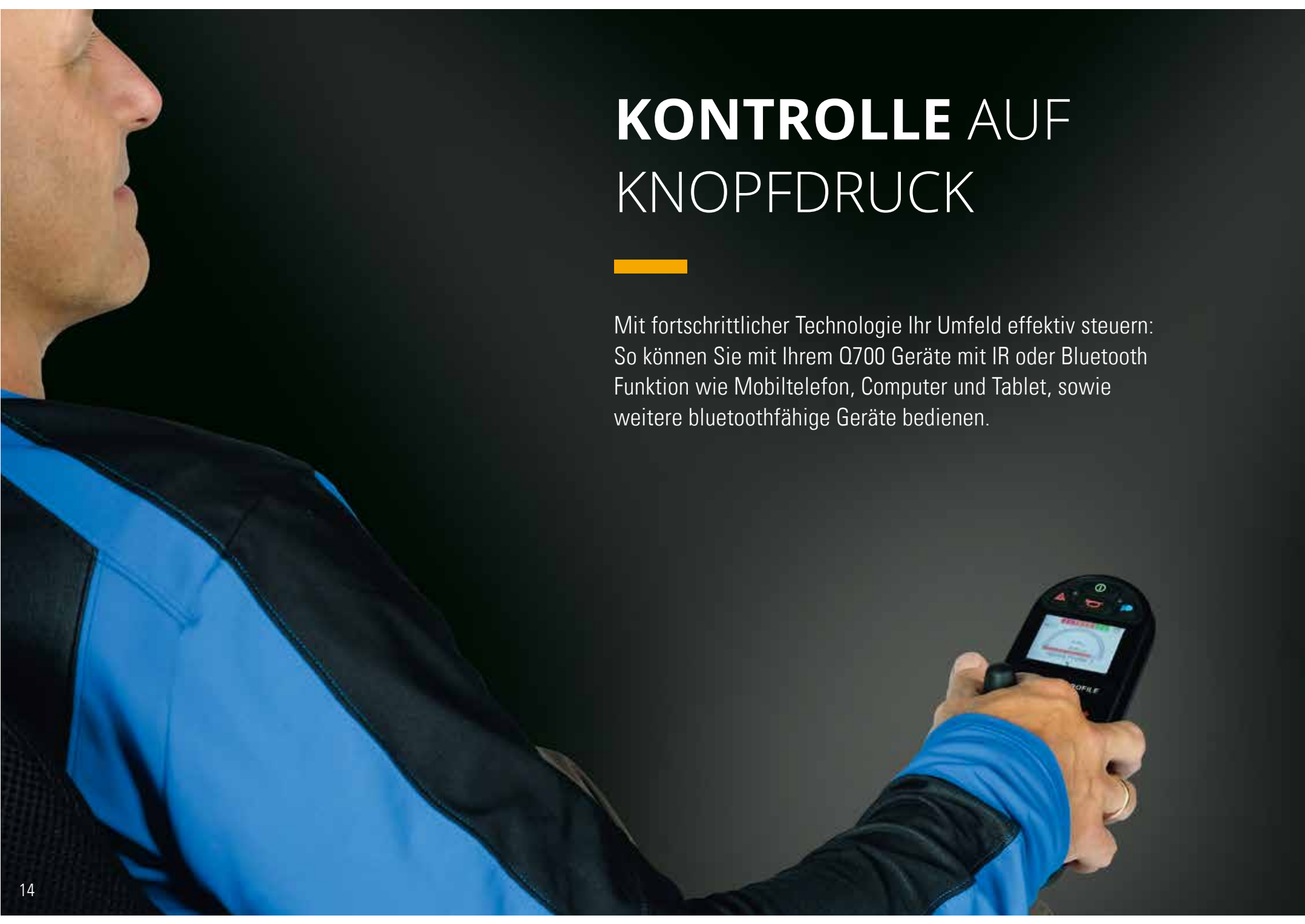A person wearing a blue and black jacket is shown from the side, holding a black handheld device with a screen and buttons. The device has a small screen displaying a graph and some text. The background is dark.

KONTROLLE AUF KNOPFDRUCK

Mit fortschrittlicher Technologie Ihr Umfeld effektiv steuern:
So können Sie mit Ihrem Q700 Geräte mit IR oder Bluetooth
Funktion wie Mobiltelefon, Computer und Tablet, sowie
weitere bluetoothfähige Geräte bedienen.

R-NET

ADVANCED JOYSTICK

Jeder Rollstuhl der Q700 Serie erhält standardmäßig ein fortschrittliches R-Net Bedienpult. Ein großes, gut lesbares HD-Display und einfach zu bedienende Tasten ermöglichen eine intuitive Bedienung.

KONNEKTIVITÄT

Neues Bedienpult mit integrierter Infrarot Funktion und erweitertem Multifunktionsdisplay. Dies ermöglicht ein Bedienen von Geräten mit Infrarot Schnittstelle.

BLUETOOTH & IDEVICE

Einfache Steuerung von Mobiltelefon, Computer, Tablet und anderen Geräten (2 Android/Windows und 2 IOS). Bis zu drei Geräte lassen sich über externe Bluetooth Module ansteuern.

PATENTIERTE ZUORDENBARE-TASTEN-TECHNOLOGIE

Die von Sunrise Medical patentierte Zuordenbare-Tasten-Technologie bietet vielfältige softwareintegrierte und benutzerfreundliche Möglichkeiten für die Verbesserung der Lebensqualität.



SWITCH-IT

INNOVATIVE STEUERUNGEN

Mit der Memory Funktion flexibel in jede Position - auf Wunsch können einfach per Knopfdruck die vordefinierten Sitzfunktionen mittels der 5-Schalter Box angesteuert werden. Standardmäßig besitzt jede 5 Tasten Box eine USB Ladebuchse für das Laden mobiler Geräte.

ALTERNATIVE SONDERSTEUERUNGEN

Wenn das Fahren mit einem herkömmlichen Joystick nicht die beste Option ist, können Sie mit den Switch-It Sondersteuerungen die Vorteile und das Fahrpotential Ihres Rollstuhles voll ausschöpfen.



LINK-IT

BEFESTIGUNGSSYSTEM

Sollen zusätzliche Sondersteuerungen oder Schalter verwendet werden? Mit Link-It, dem neuen Befestigungssystem im modularen Baukastenformat, ist fast alles möglich.

Aus den verfügbaren Modulen und Stäben können unendlich viele Kombinationen erstellt werden, um die verschiedenen Anforderungen zu erfüllen. Link-It ist nicht nur leicht und einfach zu positionieren, sondern sorgt auch dafür, dass das minimalistische Design des Rollstuhls bestehen bleibt.

Ob es ein zusätzliches Bedienpult sein soll, ein Taster am Rücken oder ein Schalter an der Kopfstütze, einfach Link-It.







A close-up, low-angle shot of a black Quickie motor vehicle. The vehicle features a prominent white 'QUICKIE' logo on its side panel. Above the logo, there are two circular headlights, each containing a red lens and a clear lens. The vehicle's body is black with a red stripe running along the side of the front fender. A black tire with a multi-spoke wheel is visible in the foreground. The background is dark and out of focus.

QUICKIE

INDIVIDUELLER **STYLE**

Mit der Q700 Series haben wir in Punkto Design ein neues Level erreicht. Die Antriebseinheit in Mattschwarz in Kombination mit der ansprechenden Bespannung, ergeben ein schlankes und modernes Design.

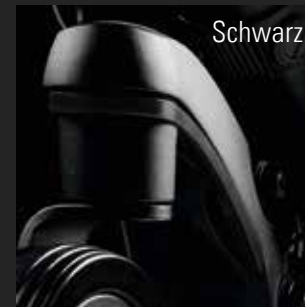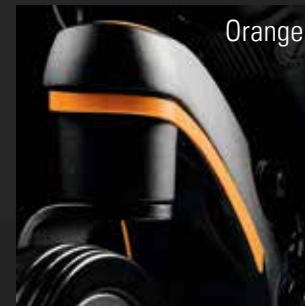

TECHNISCHE DATEN

	Q700 M	Q700-UP M		Q700 M & Q700-UP M
Max. Zuladung:	160 kg	120 kg	Min. Breite zum Wenden:	1000 mm
Sitzbreite:	400 – 560 mm	400 – 500 mm	Max. Steigfähigkeit:	10°
Sitztiefe:	400 – 560 mm	400 – 540 mm	Max. Kantensteigfähigkeit:	100 mm
Sitzhöhe:	430 – 480 mm	450 – 480 mm	Räder:	14" Antriebsräder; 6" Lenkräder
Rückenhöhe:	510 – 610 mm	510 – 610 mm	Farbinlays:	Rot, Blau, Grün, Orange, Weiß, Schwarz
Rückenwinkel:	85° bis 175° (elektrisch)	85° bis 175° (elektrisch)	Max. Reichweite (ISO 7176-4)	40 km (mit 80 Ah Batterien & 6 km/h Motoren)
Gesamtbreite:	630 mm	630 mm	Gesamtgewicht:	ab 160 kg (inklusive 60 Ah Batterien)
Gesamtlänge:	1070 mm	1070 mm	Crash getestet:	Ja - nach ISO 7176-19 crashgetestet und damit zum Transport von Personen im Rollstuhl sitzend im Fahrzeug zugelassen.
Gesamthöhe:	1100 mm	1100 mm		
Memory Positionen:	Sitzen, Liegen, Relax & Frei programmierbar	Sitzen, Stehen, Transfer, Liegen, Relax, Frei programmierbar	Transport ohne Nutzer:	Den Rollstuhl sicher im Fahrzeug fixieren (z.B. Auto)
Höchstgeschwindigkeit:	6 km/h (standard), 10 & 13 km/h (optional)	6 km/h (standard), 10 & 13 km/h (optional)	Bestimmungsgemäße Verwendung und Umgebung:	Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die selbstfahrend oder von einem Helfer geschoben werden, drinnen und draußen. Rollstuhl Typ der Klasse B.
Batterien:	60 Ah, 80 Ah (optional)	80 Ah (optional)		
Elektronik:	R-Net inklusive Licht und Blinker	R-Net inklusive Licht und Blinker		
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:	18.99.06.1099	18.99.03.2030		



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: international@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.eu



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf: www.SunriseMedical.de zur Verfügung.

