

SÉRIE Q500[®]

Make your own adventure



Série Q
Cadeiras de rodas elétricas

Tecnologia inteligente. Pensada para se adaptar a si




Q500 R
SEDEO PRO



Q500 M
SEDEO PRO



Q500 F
SEDEO PRO

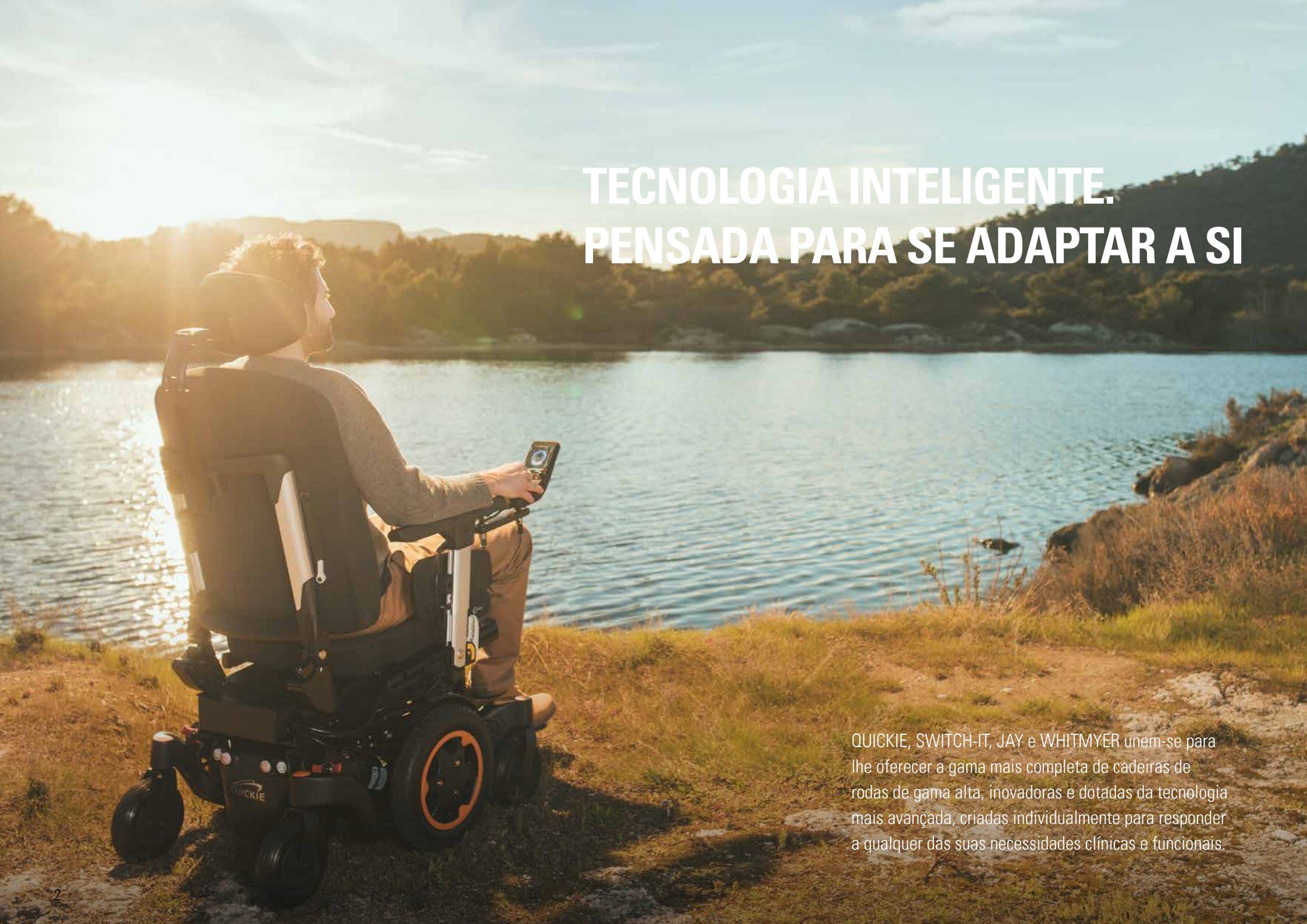A man with curly hair is sitting in a motorized wheelchair, looking out over a calm lake at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow and reflecting on the water. The background shows a forested hillside. The man is holding a small electronic device in his hands. The wheelchair has 'QUICKIE' written on the back.

TECNOLOGIA INTELIGENTE. PENSADA PARA SE ADAPTAR A SI

QUICKIE, SWITCH-IT, JAY e WHITMYER unem-se para
lhe oferecer a gama mais completa de cadeiras de
rodas de gama alta, inovadoras e dotadas da tecnologia
mais avançada, criadas individualmente para responder
a qualquer das suas necessidades clínicas e funcionais.

THE POWER OF QUICKIE®

Se precisa de uma cadeira de rodas elétrica que lhe proporcione mobilidade, ou se necessita de uma reabilitação mais completa, há uma QUICKIE ideal para si! As séries Q da Quickie estão disponíveis com uma ampla gama de bases, tração de condução, sistemas de assento, sistemas eletrónicos, controlos e acessórios, que podem ser combinados com o objetivo de criar a cadeira perfeita que se adapta às necessidades individuais de cada pessoa.

NECESSIDADES CLÍNICAS



Q100

ASSENTO
TECIDO

BASE
T. TRASEIRA



Q200

ASSENTO
TECIDO

BASE
T. TRASEIRA



Q400

ASSENTO
SEDEO LITE

BASE
T. CENTRAL
T. DIANTEIRA
T. TRASEIRA



Q500

ASSENTO
SEDEO PRO

BASE
T. CENTRAL
T. DIANTEIRA
T. TRASEIRA



Q700

ASSENTO
SEDEO ERGO
SEDEO PRO

BASE
T. CENTRAL
T. DIANTEIRA
T. TRASEIRA



Q700 UP

ASSENTO
SEDEO ERGO UP

BASES
T. CENTRAL
T. DIANTEIRA

RENDIMENTO DA BASE

SÉRIE Q500

Em resultado de anos de experiência no desenvolvimento de bases de condução, sistemas de assento inovadores e a eletrônica mais desenvolvida, a QUICKIE® voltou a converter-se na líder de mercado com a criação da série Q500. Descubra do que é capaz com a sua Q500!



Q500 COM
SEDEO PRO
TRAÇÃO TRASEIRA



Q500 COM
SEDEO PRO
TRAÇÃO CENTRAL



Q500 COM
SEDEO PRO
TRAÇÃO DIANTEIRA



CADEIRAS DE RODAS PARA DESFRUTAR DO AR LIVRE

Três bases diferentes com a tecnologia mais avançada de suspensão e poderosos motores, combinados com o sistema de assento multiajustável SEDEO® PRO. Escolha entre a multitude de opções de controlos de condução VR2, Switch-It e R-net, autênticas referências na indústria eletrónica, e verá como crescerão ao seu redor um mundo de possibilidades de adaptação individual para configurar a tua cadeira perfeita.



BASES DE RENDIMENTO

Q500 M: Tração central

Q500 R: Tração traseira

Q500 F: Tração dianteira

SISTEMAS DE ASSENTO

SEDEO® PRO

JAY E WHITMYER

COMANDOS E CONETIVIDADE

Comando VR2

Comandos R-Net

Comandos especiais SWITCH-IT

Sistemas de instalação LINK-IT

ESTILO INOVADOR

DESENHO DISTINTIVO - Opções de cores

CENTRAL, TRASEIRA OU DIANTEIRA EM QUE BASE JOGA?

Os 3 tipos de bases proporcionam total autonomia de condução. Sinta os seus potentes motores de 4 pólos, o conforto e a tração que lhe confere o seu sistema de suspensão, as suas rodas grandes, a velocidade de até 13 km/h e as suas baterias de 80 Amph.



Em função da base de condução pela qual se opte (central, traseira ou dianteira) a cadeira comportar-se-á de uma forma ou outra em diferentes situações e ambientes. A Q500 oferece a gama mais completa de bases do mercado, para que cada pessoa possa selecionar a opção que mais se adequa às suas preferências pessoais, experiência, estilo de vida ou necessidades clínicas e vitais.

	Q500 R	Q500 M	Q500 F
Tipo de tração	Tração traseira	Tração central	Tração dianteira
Raio de viragem	95 cm	56-63 cm	73,5 cm
Rodas motrizes	14"	13"	14"
Rodas pequenas	9" e 10"	7"	9" e 10"
Velocidade	10 km/h (6 , 8 e 13 km/h opcionais)		
Baterias	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)		
Pendente máx. segurança	10º	8º	8º
Trepa-passeios	8 cm (10 cm com trepa-passeios)	10 cm	7 cm
Detalhes de cor	7 cores	7 cores	7 cores
Altura do assento ao solo	Desde 41,5 cm	Desde 41,5 cm	Desde 41,5 cm

Q500 R **TRAÇÃO TRASEIRA**

A condução com tração traseira proporciona estabilidade e uma grande facilidade no momento de subir bermas. É fácil de conduzir e oferece um grande controlo com comandos de condução alternativos ou especiais.



Q500 M **TRAÇÃO CENTRAL**

A condução de tração central proporciona uma manobrabilidade sem igual, com uma base mais compacta do que a de tração traseira ou dianteira. Apresenta o raio de viragem mais reduzido e é extremamente intuitiva de conduzir e controlar.



Q500 F **TRAÇÃO DIANTEIRA**

A condução de tração dianteira oferece aos utilizadores mais experientes um grande desempenho em exteriores e uma grande manobrabilidade em interiores, assim como a melhor estabilidade na descida de declives.



BASES DE ALTO RENDIMENTO

Q500 M

BASE COM TRAÇÃO CENTRAL

Desfrute de excelentes resultados de condução tanto em interiores como em exteriores com a base de tração central da série Q500. A combinação perfeita entre a suspensão independente nas 6 rodas, tecnologia anti-balanço que minimiza os movimentos do corpo e potentes motores para que vá onde vá sempre com uma condução suave, grande estabilidade e máxima tração.

MANOBRABILIDADE SUPERIOR EM INTERIORES

Excelente manobrabilidade para passar em portas, aceder a elevadores ou espaços apertados graças à sua base estreita a partir de 61 cm e o seu raio de viragem compacto. Além disso, oferece uma altura de assento baixa inclusive quando está equipada com módulos de assento opcionais, para lhe proporcionar transferências, aceder a mesas ou a veículos adaptados com maior facilidade.



ELEVADO DESEMPENHO PARA EXTERIORES



SUSPENSÃO EM TODAS AS RODAS

Condução muito suave e estável em qualquer terreno graças ao sistema patenteado da QUICKIE de suspensão independente nas 6 rodas. Todas as rodas estão permanentemente em contacto com o solo, inclusivamente durante a subida de bermas ou de atravessamento de buracos. Máxima tração e estabilidade mesmo durante a subida de rampas até 8°.



SISTEMA ANTI-BALANÇO

A tecnologia anti-balanço da QUICKIE minimiza os movimentos do corpo. Todo o peso da pessoa fica centrado diretamente sobre a roda central, maximizando assim a tração da cadeira e aumentando a estabilidade e a sensação de conforto e segurança.



LIBERDADE ABSOLUTA

Viaje sempre com confiança com a Q500 M graças aos seus potentes motores de 4 pólos, que proporcionam velocidades de até 13 km/h, e com baterias de série de 80 Amp, para maximizar o seu alcance.

BASES DE ALTO RENDIMENTO

Q500 F

BASE COM TRAÇÃO DIANTEIRA

A base da Q500 F oferece uma altura de assento ao solo muito reduzida desde apenas 41,5 cm, o que facilita as transferências da cadeira, o acesso a veículos adaptados ou mesas, entre outros.

FORA E DENTRO DE CASA

O desenho dos braços das rodas traseiras com curvatura para o interior reduz sensivelmente a largura da cadeira, o que se traduz uma condução intuitiva e ideal para uso em interiores.



EXCELENTE RENDIMENTO EM EXTERIORES

O desenho sólido da sua base, combinado com a avançada suspensão das rodas dianteiras, a tecnologia de nivelamento e os potentes motores asseguram uma condução uniforme e estável em qualquer terreno.



SUSPENSÃO DAS RODAS DIANTEIRAS

O sistema de suspensão Full Track das suas rodas dianteiras grandes, conjuntamente com a tecnologia de nivelamento de um braço, tornará as irregularidades do solo impercetíveis. Conforto e suavidade quando mais o necessitar.




TECNOLOGIA DE NIVELAMENTO

Uma tração sem igual graças à tecnologia de nivelamento única da base. O sistema de suspensão de um braço conecta as rodas entre si, garantindo que permanecem sempre em contacto com o solo. Desta forma, são absorvidas as vibrações laterais durante o movimento em curva a grande velocidade, para que ambas as rodas mantenham a máxima tração durante todo o tempo.



LIBERDADE ABSOLUTA

As rodas grandes e os potentes motores de 4 pólos proporcionam velocidades de até 13 km/h, enquanto as baterias de 80 Amp maximizam a autonomia. Vá por aí fora e desfrute!

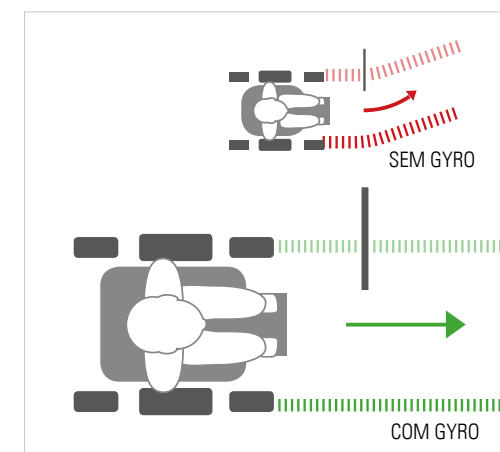

MANTENHA-SE SEMPRE NO SEU CAMINHO COM O MÓDULO DE CONTROLO GYRO

O módulo de controlo opcional Gyro deteta e corrige automaticamente qualquer pequeno desvio da direção pretendida. Proporcionando uma condução segura e precisa, reduz o número de ações físicas ou cognitivas necessárias para manter a direção correta - permite uma condução menos exigente (especialmente se se utilizam controlos especiais).

Q500 R

BASE COM TRAÇÃO TRASEIRA

A Q500 R com tração traseira, da mesma forma que a Q500 F com tração dianteira, oferece uma altura reduzida do assento ao solo (desde 41,5 cm) para que possa aceder facilmente a veículos adaptados ou a mesas, ou realizar transferências de e para a cadeira.

CONDUÇÃO INTUITIVA

A Q500 R com tração traseira proporciona uma condução manobrável e intuitiva graças à posição da roda de tração na cadeira. Poderá subir bordas até 8 cm ou 10 cm (com a opção de trepa-passeios).



DESENHADA PARA ENFRENTAR O TERRENO



SUSPENSÃO DAS RODAS DIANTEIRAS

O sistema de suspensão FULL TRACK das suas rodas traseiras grandes, em conjuntos com a tecnologia de nivelamento de um braço, tornará impercetíveis as irregularidades do solo. Conforto e suavidade quando mais o necessitar.



TECNOLOGIA DE NIVELAMENTO


Uma tração sem igual graças à tecnologia de nivelamento única da base. O sistema de suspensão de um braço conecta as rodas entre si, garantindo que permanecem sempre em contacto com o solo. Desta forma, são absorvidas as vibrações laterais durante o movimento em curva a grande velocidade, para que ambas as rodas mantenham a máxima tração durante todo o tempo.

A base firme da Q500 R em conjunto com o incrível comportamento do sistema de suspensão FULL TRACK e a tecnologia de nivelamento, asseguram uma condução confortável, grande estabilidade e máxima tração em todas as situações.



LIBERDADE ABSOLUTA

As rodas grandes e os potentes motores de 4 pólos proporcionam velocidades de até 13 km/h, enquanto as baterias de 80 Amp maximizam a autonomia. Vá por aí fora e desfrute!

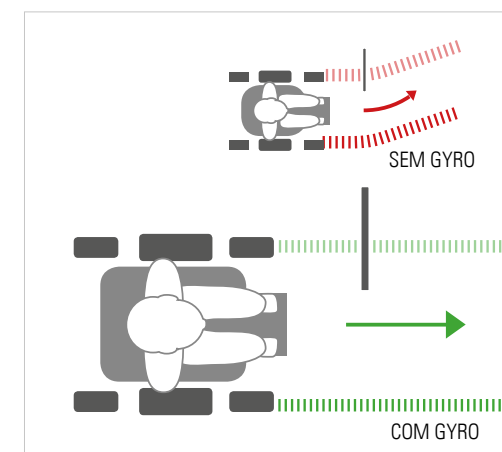

MANTENHA-SE SEMPRE NO SEU CAMINHO COM O MÓDULO DE CONTROLO GYRO

O módulo de controlo opcional Gyro deteta e corrige automaticamente qualquer pequeno desvio da direção pretendida. Proporciona assim uma condução segura e precisa, reduzindo o número de ações físicas ou cognitivas necessárias para manter a direção pretendida - permite uma condução menos exigente (especialmente se se utilizarem os controlos especiais).

SEDEO PRO

O sistema de assento SEDEO PRO combina um assento altamente ajustável e configurável com uma excelente variedade de suportes e acessórios de posicionamento, incluindo uma ampla gama de assentos e almofadas para necessidades posturais leves ou moderadas.

SEDEO PRO é muito confortável de usar e favorece a independência no dia-a-dia.

FÁCIL E RÁPIDO DE AJUSTAR

O sistema de assento SEDEO PRO confere uma grande flexibilidade pois é totalmente ajustável. Todos os ajustes podem ser realizados de forma rápida e simples usando apenas uma única ferramenta, inclusivamente com a própria pessoa sentada na cadeira. Pode ser facilmente personalizado para se adequar às necessidades individuais de cada pessoa e ajusta-se rapidamente a qualquer alteração necessária.

BASCULAÇÃO



ELEVAÇÃO



ASSENTO AJUSTÁVEL E CONFIGURÁVEL



ENCOSTO RECLINÁVEL ANTIFRICÇÃO

Descubra a opção de encosto reclinável elétrico com um alcance de deslizamento antifricção de 100 mm, que assegura que não haja fricção entre a almofada e as suas costas. O assento SEDEO PRO está também disponível com encosto fixo ou outras duas opções de encostos reclináveis: mecânico ou com atuadores.

APOIOS DE PÉS ELEVÁVEIS ELÉTRICOS

As diferentes opções de apoios de pés elétricos com ajuste independente permitem alcançar o melhor posicionamento. Disponíveis em versão central ou rebatíveis. Pode escolher entre o ângulo de apoio de pés standard ou o elevável elétrico a 70°, ou o apoio de pés elevável manualmente.

ENCOSTO ANATÓMICO SEDEO PRO

Poderá seleccionar entre uma ampla gama de almofadas e encostos SEDEO PRO, como o encosto anatómico com cintos ajustáveis e suporte lateral, que proporcionam um conforto excecional e posicionamento simples.

ELEMENTOS DE POSICIONAMENTO

Consiga um posicionamento individual com os encostos de cabeça SEDEO e WHITMYER, apoios laterais rebatíveis, apoios para as coxas ou apoios de joelhos. Todos os elementos de posicionamento são facilmente rebatíveis ou desmontáveis.

APOIOS DE BRAÇOS REBATÍVEIS ATÉ ATRÁS

Os apoios de braços rebatíveis até atrás são muito simples de manusear e proporcionam-lhe um espaço amplo nos momentos de realizar transferências. Poderá escolher entre a versão desmontável ou reclinável. São todos compatíveis com 5 opções de almofadas para os apoios de braços.



JAY® & WHITMYER®

POSICIONAMENTO

Descubra a ampla gama de encostos de cabeça WHITMYER e almofadas e encostos JAY disponíveis para oferecer soluções para as necessidades clínicas de cada utilizador.





ENCOSTO PARA CABEÇA WHITMYER

Desenvolvido para responder a diferentes necessidades, desde o suporte básico até ao controlo de múltiplos pontos. Disponíveis com diferentes opções de almofadas, tamanhos e braços de apoio para personalizar e responder a todas as necessidades individuais, desde as mais básicas até às mais desafiantes.

ALMOFADAS E ENCOSTOS JAY

Concebidos para oferecer estabilidade pélvica, proteção da pele e conforto, as almofadas e encostos JAY são altamente personalizáveis e encontram-se disponíveis numa grande variedade de tamanhos e modelos para atender às diferentes necessidades de suporte postural e proteção da pele.

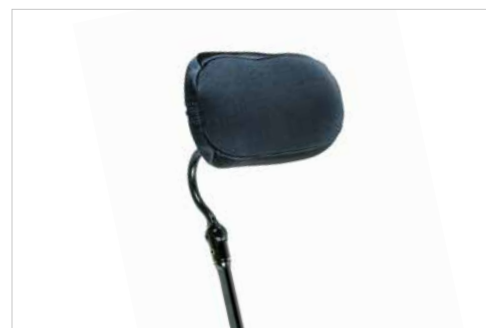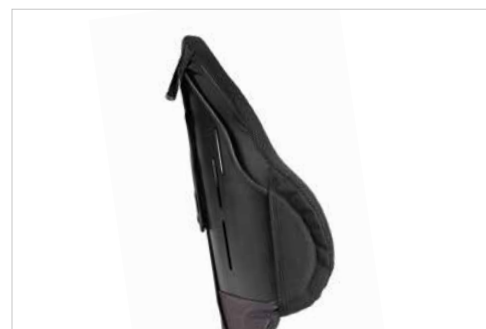

O CONTROLO NA SUA MÃO

Controle o seu ambiente com a Série Q500 e a sua avançada tecnologia eletrónica. Não só poderá controlar a sua Q500 como deseja, como também os seus electrodomésticos, Smartphone e computadores.



VR2 & R-NET

COMANDOS DE CONTROLO

Escolha entre uma ampla gama de comandos de controlo, desde o fiável VR2 até ao avançado R-net equipado com um grande ecrã HD de fácil leitura.

R-net oferece a melhor tecnologia ao alcance da sua mão, para que possa impor um controlo absoluto sobre o seu ambiente:

CONETIVIDADE IR

Controle o seu ambiente usando a funcionalidade de infravermelhos integrada no comando R-net Advanced. Controle o sistema de entretenimento da sua casa, televisão, DVD e outros sistemas de domótica, tudo de forma simples a partir do seu joystick.

BLUETOOTH & IDRIVE

Controle o seu Smartphone, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo eletrónico por Bluetooth com este comando opcional. Conecte e controle até quatro dispositivos.

BOTÕES PROGRAMÁVEIS PATENTEADOS DA QUICKIE

Mude a função de qualquer botão do comando R-net Advanced quando desejar, graças à função de botões programáveis patenteada da QUICKIE. Para ter um acesso mais rápido, simples e suave das funções que usa habitualmente, sem ter de usar o joystick.



SWITCH-IT[®]

COMANDOS INOVADORES

Aceda comodamente às 5 posições programadas com a caixa de controlo opcional Ctrl+5 que lhe permitirá ir diretamente para a função que necessita com um simples apertar de um botão.

COMANDOS DE CONDUÇÃO ALTERNATIVOS

Se conduzir com o joystick tradicional não for a opção mais confortável, os comandos de condução alternativos permitir-lhe-ão experimentar completamente as capacidades e benefícios de condução da sua cadeira.



Controlo de cabeça Dual Pro



Joystick MicroPilot



Joystick Allround



LINK-IT

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Precisa de utilizar controlos adicionais ou especiais? Não há problema, conecte-os facilmente com o sistema universal de instalação Link-It.

Através da utilização de módulos e ligações disponíveis, poderá criar um número infinito de combinações para se adaptar às suas necessidades. Não só é fácil de colocar, o Link-It também garante que o design minimalista da sua cadeira de rodas não seja comprometido pela instalação desordenada de controlos opcionais.

Tanto se for um comando especial no apoio de braços, um botão no encosto, ou um botão de pressão no apoio de cabeça, basta apenas... link-it



Módulo básico



Módulo com 2 entradas



Módulo de conexão







DESIGN E ESTILO

DISTINTO

Um estilo de sonho. Com acabamento do chassis em negro mate elegante, sobressai pelo seu design fresco e distinto.

Procura uma mudança?

As Q500 oferecem a opção de escolher entre uma gama de detalhes de cor contemporâneos para complementar na perfeição a sua surpreendente base em negro mate. Basta simplesmente mudar os detalhes de cor. Personalizar a sua cadeira nunca foi tão fácil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / Q500 R - Q500 M - Q500 F COM ASSENTO SEDEO PRO

	Q500 R (tração traseira)	Q500 M (tração central)	Q500 F (tração dianteira)		Q500 R (tração traseira)	Q500 M (tração central)	Q500 F (tração dianteira)
Peso máx. utilizador	160 kg	160 kg	160 kg	Velocidade	10 km/h (13, 6 ou 8 km/h opcionais)	10 km/h (13, 6 ou 8 km/h opcionais)	10 km/h (13, 6 ou 8 km/h opcionais)
Largura do assento	38 a 56 cm	38 a 56 cm	38 a 56 cm	Baterias	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)
Profundidade do assento	40 a 56 cm	40 a 56 cm	40 a 56 cm	Eletrónica	VR2 R-Net	VR2 R-Net	VR2 R-Net
Altura do assento	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	Raio de viragem	95 cm	56-63 cm	73,5 cm
Altura do encosto	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm	Pendente máx. segurança	10°	8°	8°
Largura total	64 cm	61 a 62 cm	64 cm	Trepa-passeios	8 cm (10 cm com trepa passeios)	10 cm	7 cm
Comprimento total	Máx. 118 cm	Máx. 128 cm	Máx. 134 cm	Rodas motrizes	13" - 14"	13"	13" - 14"
Reclinação do encosto	0° a 40° manual (elétrica opcional)	0° a 40° manual (elétrica opcional)	0° a 40° manual (elétrica opcional)	Rodas pequenas	9"-10"	7"	9"-10"
Reclinado antifricção	100 mm (opcional)	100 mm (opcional)	100 mm (opcional)	Cor dos detalhes	Branco, cinza prata, preto, laranja, vermelho, verde, azul	Branco, cinza prata, preto, laranja, vermelho, verde, azul	Branco, cinza prata, preto, laranja, vermelho, verde, azul
Basculação	0° a 9° manual (elétrica opcional)	0° a 9° manual (elétrica opcional)	0° a 9° manual (elétrica opcional)	Peso da cadeira	Desde 133 kg	Desde 130 kg	Desde 133 kg
Crash tested	Estas cadeiras de rodas passaram nos testes de colisão Crash Tested de conformidade com a norma ISO 7176-19 utilizando um sistema de retenção com 4 pontos de ancoragem (2 cintos simples na zona dianteira e 2 duplos na parte traseira). <i>Classificação geral do cinto de segurança de acordo com a norma ISO 7176-19: 2008 Anexo D = A.</i>						

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Para obter mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedido. Os nossos produtos estão em constante processo de aperfeiçoamento, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de modificar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Rev.2- Março 2021