

Q400[®]

LEEF ZONDER GRENZEN



Q-Serie
Elektrische rolstoelen



Q400 R



Q400 M



Q400 F

Op basis van jarenlange ervaring met hoogwaardige aandrijf- en zitsystemen en geavanceerde technologie introduceert QUICKIE® de Q400.

Binnen- en buitenshuis biedt de Q400 goede rij-eigenschappen door betrouwbare 2-polige motoren met hoge koppel. Je rijdt comfortabel en stabiel door de goede vering. De kleine draaicirkel, de wendbaarheid en de compactheid van de stoel zorgen ervoor dat je overal makkelijk bij kunt en geen lift of deur meer een probleem is. Het strakke design met de grote stoere lichtmetalen velgen, snelheden tot 10 km/u en accu's tot 80 Ah maken de rijervaring compleet. Leef zonder grenzen!



Q400


Q400 biedt voor iedereen een passende oplossing.

- Hoogwaardig SEDEO PRO zitsysteem voor alle zitbehoeften.
- Drie typen aandrijfsystemen (achter -, mid- en voorwiel-aandrijving) passend bij jouw voorkeur en levensstijl.
- Een uitgebreid assortiment aan alternatieve bedieningen (R-Net, VR2, Switch-IT en Link-IT).



Q400 MET SEDEO PRO

ACHTERWIELAANDRIJVING

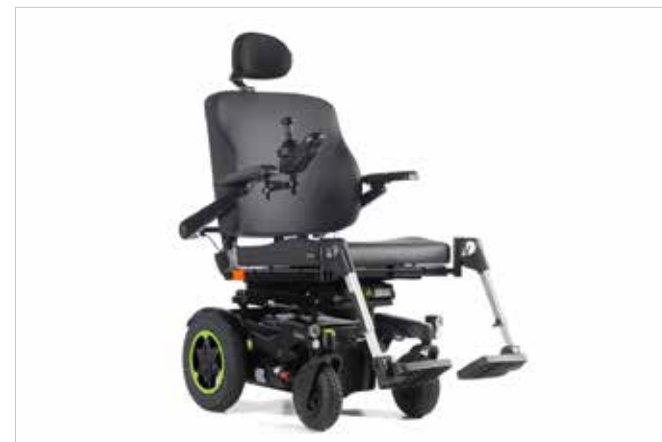

Q400 MET SEDEO PRO

MIDWIELAANDRIJVING



Q400 MET SEDEO PRO

VOORWIELAANDRIJVING





A close-up photograph of a black remote-controlled car chassis. The car is positioned diagonally, showing the front and side. The text "Q400F" is printed in a bold, white, sans-serif font on the side of the chassis. The car has a black body with a white stripe running along the side. The front wheel is visible, and the suspension system is partially shown. The background is a plain, light-colored surface.

Q400F


Q400

LEEF ZONDER GRENZEN



MAXIMALE VRIJHEID

Op de betrouwbare 2-polige motoren met hoge koppel kun je rekenen. Met snelheden van 6 of 10 km/u, en in combinatie met de 50 Ah, 60 Ah of 80 Ah accu's kun je altijd met vertrouwen op pad. Door zijn beperkte breedte zijn deuren en liften geen barrières meer.

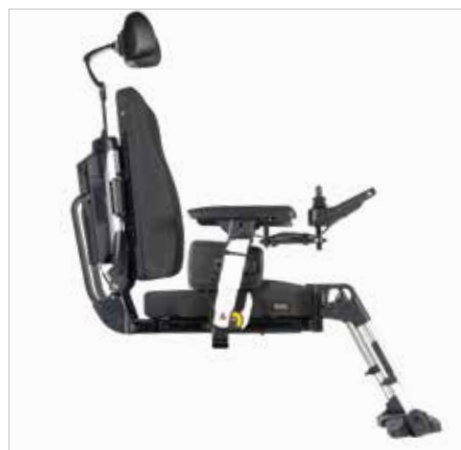

ALTIJD GOED ZITTEN

In een Q400 zit je altijd goed! Het SEDEO PRO zitsysteem is zeer configureerbaar en instelbaar en heeft daarnaast nog een ruim assortiment aan armsteunen en armleggers, beensteunen, zitkussens, rugleuningen en positionerings-elementen. Zodat er voor jou altijd de juiste zitpositie gecreëerd kan worden waarbij je goed stabiel zit met optimale ondersteuning op de juiste plaatsen.



COMFORTABEL RIJDEN

De Q400 heeft een synthetisch rubberen vering op de aandrijfwielen. Deze vering zorgt ervoor dat kleinere schokken opgevangen worden en dat je veilig en stabiel kunt rijden, ook op oneffen ondergrond.



ONDSCHIEDEND

Laat zien wie je bent! De mat zwarte basis in combinatie met de stijlvolle bekleding zorgen voor een modern en slank design. Je kunt kiezen uit 4 opvallende accentkleuren. Van bekleding tot wielen, elk detail draagt bij aan een onderscheidende look!




KIES JE AANDRIJVING

ACHTER-, MID- OF VOORWIELAANDRIJVING

	Q400 R	Q400 M	Q400 F
Aandrijving	Achterwiel	Midwiel	Voorwiel
Draaicirkel	1900 mm	1120 mm	1470 mm
Aandrijfwielen	13/14"	13"	13/14"
Zwenkwielen	9/10"	7"	9"
Max. snelheid	6 km/u (standaard), 10 km/u (optioneel)		
Accu's	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah		
Bedieningen	VR2, R-net	VR2, R-net	VR2,R-net
Max. hellingshoek	10°	8°	8°
Max. obstakelhoogte	80 mm	75 mm	70 mm
Actieradius ISO 7176-4 *	40 km	40 km	40 km
Min. totale breedte	615 mm	610 mm	615 mm
Totale lengte incl. beensteunen	1110 - 1180 mm	1280 mm	1280 - 1340 mm
Totale lengte excl. beensteunen	840 mm	900 mm	1030 mm
Max. gebruikersgewicht	136 kg	136 kg	136 kg

De keuze van aandrijving bepaalt de rijprestaties van de stoel in verschillende situaties en omgevingen. Het is dus belangrijk dat je een aandrijving kiest die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren, ervaringen, levensstijl, klinische- en omgevingsbehoeften. De Q400 voorziet in die behoefte zodat er altijd een aandrijving is die bij jou past. Welke aandrijving kies jij?

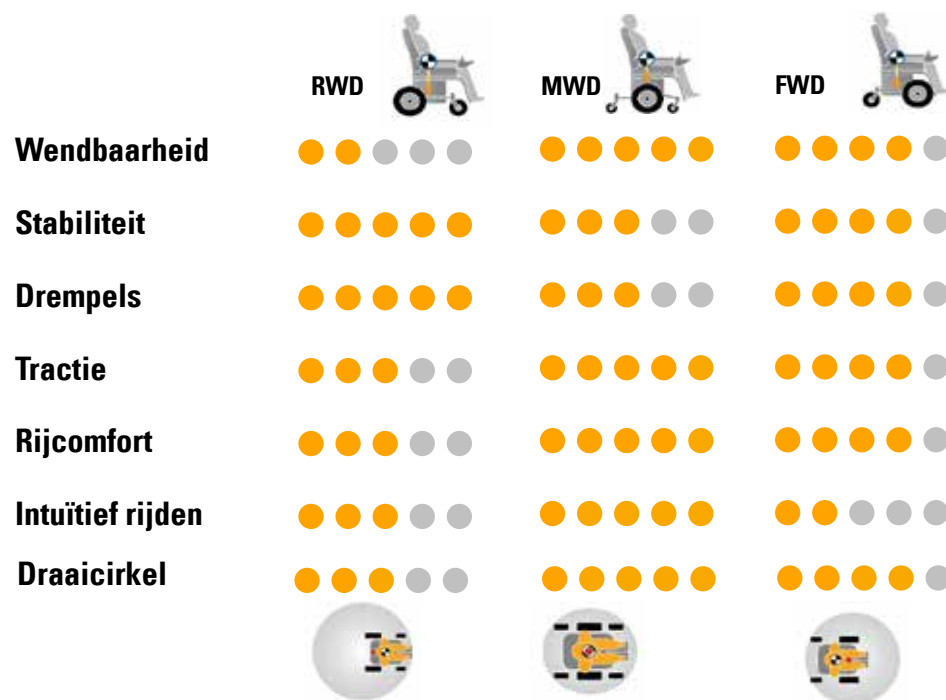

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gewicht, ondergrond en weeromstandigheden kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.

Q400R

ACHTERWIELAANDRIJVING

Doordat de aandrijfwielen achter zitten, gebeurt alles voor je. Je ziet dus wat je doet en daardoor is rijden heel gemakkelijk en intuïtief. Een achterwielaandrijving is zeer stabiel door o.a. de grote wielen en daarnaast ook koersvast op alle snelheden, zelfs op oneffen ondergrond. Stoepranden tot 80 mm zijn geen probleem.



Q400M

MIDWIELAANDRIJVING

Door de midwielaandrijving ligt het natuurlijke draaipunt van het lichaam precies boven het draaipunt van de rolstoel. Je rijdt daarom heel intuïtief. Daarnaast is een midwielaandrijving zeer wendbaar en heeft hij ten opzicht van de voor- en achterwielaandrijving de meest compacte draaicirkel.



Q400F

VOORWIELAANDRIJVING

De voorwielaandrijving combineert goede rijeigenschappen voor buiten met optimale wendbaarheid voor binnen. De stoel reageert direct op jou, je manoeuvreert makkelijk overal tussendoor. Doordat je een kleine beenhoek hebt, kun je overal dichtbij rijden en gaan transfers makkelijk.




SEDEO PRO

Hoogwaardig, instelbaar zitsysteem met een hoog zitcomfort en makkelijk te gebruiken en te bedienen. SEDEO PRO heeft een uitgebreid assortiment aan armsteunen, armleggers, beensteunen, zitkussen, rugleuningen, hoofdsteunen en positioneringselementen. Zo kan er voor jou de meest optimale zitpositie gecreëerd worden, waarbij je goed stabiel zit met optimale ondersteuning op de juiste plaatsen.

SEDEO PRO

Klinische behoefte gebruiker	Gemiddeld tot hoog
Zitbreedte	380 - 560 mm
Zitdiepte	400 - 600 mm
Rughoogte	530 - 720 mm
Configureerbaar	Hoog
Rughoekverstelling elektrisch	130°
Kantelhoek	30° / 50°
Hoog/laag	300 mm
JAY & WHITMYER opties	Ja
Max. gebruikersgewicht	160 kg

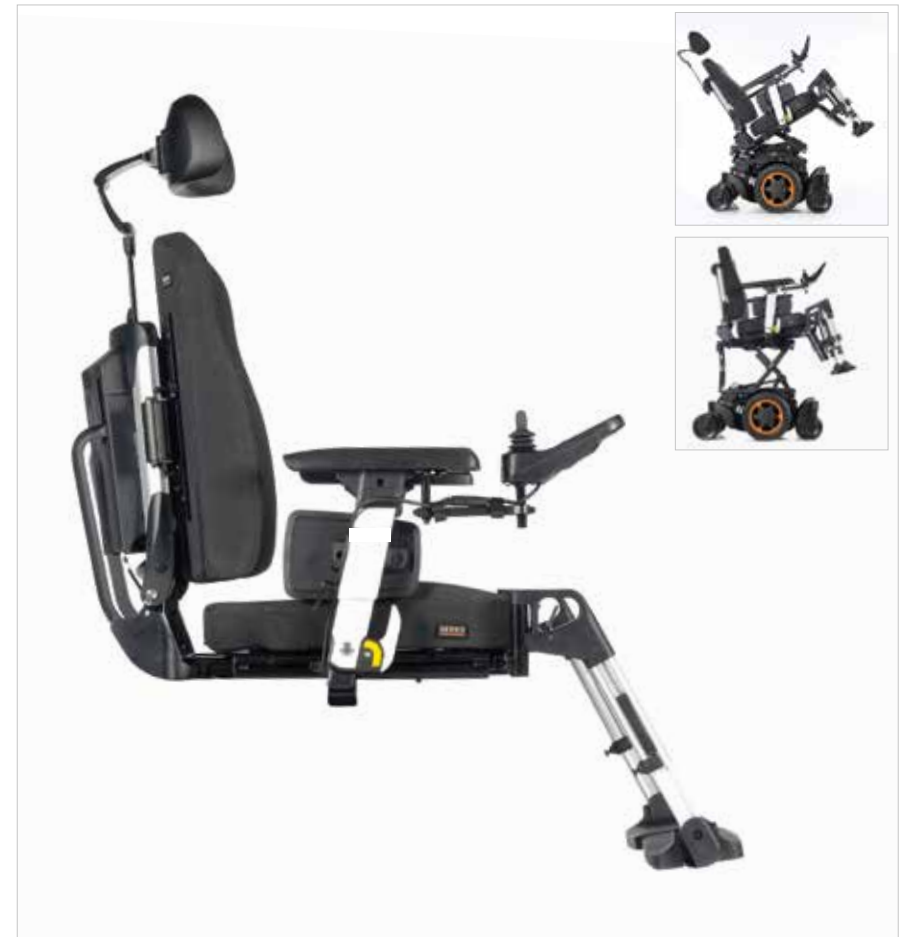

POSITIONERINGSOPTIES



Het SEDEO PRO zitsysteem heeft vele positioneringsmogelijkheden en kan ook nog eens gecombineerd worden met een uitgebreid scala aan WHITMYER hoofdsteunen en JAY zitkussens en JAY rugleuningen. Zo bieden we een oplossing voor elke klinische behoefte, en zorgen we voor de best mogelijke positionering.



EENVOUDIGE TRANSFERS

Makkelijk je rolstoel in- en uitkomen. Het SEDEO PRO zitsysteem is voorzien van wegzwenk- of opklapbare armsteunen en wegzwenkbare beensteunen. Optioneel zijn de transferhendels, voor extra ondersteuning bij het opstaan. Dat is handig!



ZELF OVERAL BIJ KUNNEN

De hoog/laag- en kantelverstelling zorgen ervoor dat je overal makkelijk bij kunt. Met een zithoogte van slechts 415 mm rijd je makkelijk onder een tafel of in een aangepaste auto. Een onafhankelijk leven!



MEER ONDERSTEUNING

Heb je behoefte aan meer zijwaartse ondersteuning of extra steun aan de lage rug? Dan is het SEDEO PRO rugkussen spanbanden flexibel met instelbare spanbanden en laterale ondersteuning een goede optie voor jou. Goede positionering en hoog zitcomfort!



ANTI-DECUBITUS

Wanneer er een verhoogde mate is van houdingsproblematiek dat kan wisselen gedurende langere tijd, biedt het JAY 2 Deep Contour kussen een hoge mate van stabiliteit en positionering. Daarnaast draagt het bij aan anti-decubitus.

CONTROLE MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Met geavanceerde technologie je omgeving effectief aansturen: bij de Q400 bepaal je niet alleen hoe je je rolstoel bedient, maar stuur je ook je telefoon, laptop of tablet en andere apparaten met infrarood- of bluetoothfunctie aan.



VR2 & R-NET

GEAVANCEERDE JOYSTICK

Met de Q400 heb je keuze uit een betrouwbare VR2 bediening of een superieure R-net bediening. Een groot, goed leesbaar HD-scherm en makkelijk te bedienen knoppen, zorgen voor een intuïtieve bediening.

CONNECT

Met de geïntegreerde infraroodfunctie stuur je je omgeving effectief aan. Home entertainment systemen, tv's, dvd-spelers, docking stations – je bedient ze allemaal eenvoudig met je joystick.

BLUETOOTH & IDRIVE

Met deze handige optie stuur je ook je telefoon, computer, tablet en andere bluetooth- en i-apparaten aan. Je kunt maximaal vier apparaten verbinden en aansturen.

QUICKIE'S GEPATENTEERDE TOEWIJSBARE-KNOPPEN-TECHNOLOGIE

Met de gepatenteerde toewijsbare-knoppen-technologie van QUICKIE verander je de functie van elke knop/schakelaar op je bedieningskast. Ook kun je een tweede (lang indrukken) functie toewijzen aan een knop/schakelaar. Zo heb je snel en makkelijk toegang tot de functies die je veel gebruikt – zonder dat je je joystick hoeft te gebruiken. Altijd handig!




SWITCH-IT®

INNOVATIEVE BEDIENINGEN

Snel en makkelijk met de geheugenfunctie naar elke gewenste zitpositie? Met de 5-Switch box stuur je de 5 voorgedefinieerde zitfuncties eenvoudig met een druk op de knop aan.

ALTERNATIEVE BEDIENINGSOPTIES

Wanneer rijden met een standaard joystick voor jou niet de beste optie is, dan kun je met de alternatieve bedieningen van Switch-IT de instellingen en rijprestaties van je rolstoel volledig benutten.

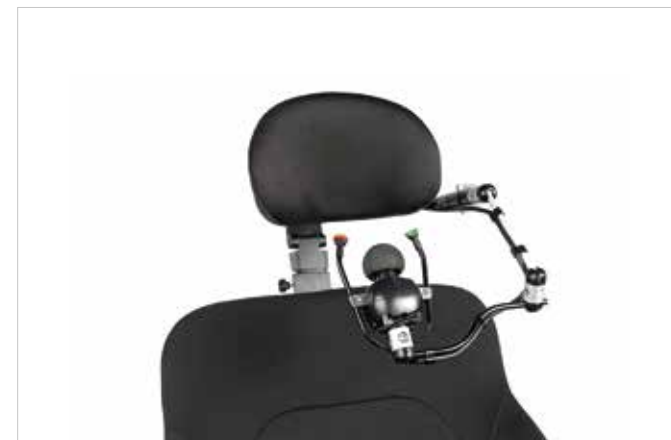

LINK-IT[®]

BEVESTIGINGSSYSTEEM

Heb je extra schakelaars of alternatieve bedieningen nodig? Geen probleem. Je bevestigt ze gemakkelijk met het universele Link-IT bevestigingssysteem.

Met de beschikbare modules en staafjes kun je eindeloos veel combinaties samenstellen, en de oplossing creëren die jij nodig hebt. Link-it is niet alleen makkelijk te positioneren; het zorgt er ook voor dat het minimalistische, strakke design van je rolstoel behouden blijft.

Een extra bedieningskast op de armsteun, een drukknop op de rugleuning of een schakelaar op de hoofdsteun? Just Link-it!





040027

QUICKI




ONDSCHIEDEND DESIGN

Met de Q400 hebben we design naar een nieuw niveau getild. De mat zwarte basis in combinatie met de stijlvolle bekleding zorgen voor een modern en slank design.

EENVOUDIG PERSONALISEREN

Je kunt bij de Q400 kiezen uit 4 opvallende accentkleuren - een mooi contrast met de mat zwarte basis. Wil je eens wat anders? Dan vervang je gewoon de gekleurde inlays. Welke kleur kies jij?

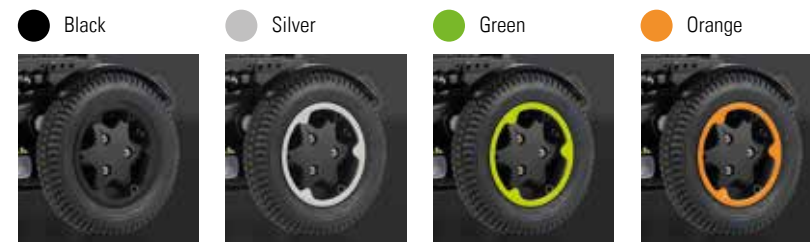



Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij je naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
De Q400 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.



www.SunriseMedical.nl